



使用說明書

家用美容器 BLOOM WR S12

目錄

前言.....	1	護理完畢後.....	18
安全注意事項.....	1	須知.....	20
在海外使用時注意事項.....	8	● 排除故障.....	20
各部件的名稱及功能.....	9	● 常見問題.....	22
使用前.....	11	● 產品規格.....	23
護理方法.....	13	售後服務.....	24



前言

非常感謝您選購YA-MAN的產品。

- ・為確保正確及安全使用,請先仔細閱讀使用說明書。
- ・閱讀後,請務必保管能夠隨時取閱的地方。
- ・將本產品轉讓他人時,請務必附上使用說明書。

安全注意事項

- ・使用前,請仔細閱讀「安全注意事項」。
- ・請按照使用說明書的指示使用。
- ・發生異常情況時,請立即停止使用。
- ・如果在故障狀態下使用,可能對身體造成不良影響,請務必注意。
- ・本使用說明書的注意事項列明了與安全有關的重要內容,請務必遵守。
- ・注意事項分為「危險」、「警告」及「注意」,並清楚列明危險程度,以及錯誤操作可能造成的傷害。

●關於注意事項的區分



危險 不正當使用本產品會導致嚴重傷亡事故。



警告 不正當使用本產品會導致嚴重受傷。



注意 不正當使用本產品可能會導致個人受傷或
引起財物損失※。

※財物損失所示範圍包括對房屋、財產、寵物等損害。

●關於標示符號



表示禁止的事項。



表示務必遵守的事項。



表示務必注意的事項。

危險 (關於使用及保管)

● 切勿在以下情況下使用。

否則可能會導致醫療儀器發生故障。

◆ 使用醫療儀器的人士

• 起搏器等植於體內使用輔助儀器・人工心肺機等植於體內使用的儀器・心電計等攜帶式裝置



禁止

警告 (關於使用及保管)

● 以下人士請勿使用。

否則可能造成事故或對身體造成損傷。

- 正在接受治療的人士・正在發育者・急性疾病・結核性疾病・發熱中人士・高血壓・傳染病患者・惡性腫瘤・血液病患者
- 內臟疾病患者・皮膚病・過敏體質・異位性皮膚炎皮膚・有皮膚問題的人士・敏感性肌膚或肌膚較脆弱的人
- 物理性刺激導致病變斑・因過度日曬導致皮膚刺痛及發炎
- 過度疲勞人士・健康狀態不好的人・飲酒後・懷孕、經期、哺乳期・正服用安眠藥的人士
- 因長期使用類固醇荷爾蒙藥物或肝臟機能障礙問題引致毛細管擴張或肝功能紊亂
- 深近視的人士(600度以上)・曾進行眼睛或面部手術的人・患有或正在治療眼睛或面部疾病的人士



禁止

● 除指定部位以外，請勿使用於以下部位。

否則可能造成事故或引起皮膚問題。

- 傷口・曾接受整形手術部位・口腔內、陰部周圍或黏膜・暗瘡・皮膚潰爛化膿發炎部位・發癢或泛紅部位
- 隆起的痣・過濾性疣・喉核・眼球・眼瞼及眼部周圍

※若不能確定自己是否有上述狀況，請事先徵求醫生意見。

● 請勿持續貼於同一部位。請務必在皮膚上移動使用。請勿貼於護理面無法完全接觸的部位上使用。

否則可能造成燙傷或低溫燙傷。

警告 (關於使用及保管)

- 請勿過度使用機器。

請按照說明書上的使用時間和使用頻度的指示使用本儀器。
否則可能對身體造成損傷。



禁止

- 請勿長時間連續使用。(用於商業用途等)

否則可能造成事故、故障、受傷。

- 請勿在肌膚較薄的部位，骨骼上方長時間使用。

否則可能會造成肌膚以及身體的損傷。

- 請勿在易燃物質(如酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水或噴霧等)附近使用。

否則可能會引致爆炸、起火。

- 請勿在浴室、浴缸、淋浴、洗面盆或裝滿水的容器附近使用。

否則會引致觸電、短路、起火或故障。



禁止淋水

- 請勿濕水或清洗本機。請勿在有水或濕氣重的地方使用。

否則會引致起火、觸電、故障。

- 請勿在說明書記載以外的其他用途使用。

否則可能會造成受傷或機件故障。



禁止
其他用途

- 請避免讓兒童或殘疾人士單獨使用。未成年人請在監護者的同意並陪同下使用。

否則會引起事故和受傷。



使用者
限制

- 請勿讓無法表達自己意志人士及肌膚感知能力低的人士使用。

否則可能導致事故或受傷。

- 請將主機/充電插頭放在兒童接觸不到的地方。

請勿讓兒童使用或玩耍。

否則可能導致事故或受傷。

- 請勿放置在不平穩的地方以及請勿把機器(主機及配件)跌下或受到衝擊。

否則會造成故障。或儀器跌到腳上會造成受傷。



禁止墜落

- 請勿在主機上放置重的物件或使用時跌下等的強烈撞擊。

否則可能會造成受傷、故障。

- 請勿拆解、維修和改裝。

否則可能會引致起火、觸電或受傷。

如需維修，請聯絡經銷商。



禁止分解

警告 (關於使用及保管)

- 如出現異味或異常發熱時，請停止使用。
否則可能會造成損壞或引致起火。



- 請勿放置於靠近火源，熾熱陽光下，浴室等高溫潮濕地方，請勿置於熱能電器附近。
否則會引致發熱，起火，破裂。



- 請勿投入火中，加熱，高溫地方充電，使用，放置。
請勿置於熱能電器附近。
否則會引致發熱，起火，破裂。本產品內藏充電式電池。
- 務必確認插頭形狀及電壓後才使用。
否則可能會導致機身發熱、起火或故障。

- 請勿放入微波爐或高壓容器。
否則會造成發熱，起火，破裂。



- 如有水或異物等進入本機時，請立即停止使用並要求檢查。
否則可能會引起火災、觸電。



- 正進行牙齒治療、或補過牙的人士，請調低強度、調整使用部位。或關掉EMS。
EMS對臉頰、下巴有較強烈的刺激，如若感到不適請立即停止使用並諮詢醫生。



- 地震或打雷時請停止使用並關掉電源。如在充電的話，請立即拔除充電插頭。
否則可能會引起火災、觸電。

- 請勿在下列情況下使用或保管機器。
否則可能會引起火災、觸電、意外、故障和跌倒。
 - ・浴室等濕氣較重的場所・灰塵較多的場所・陽光直射的場所・容易沾水的場所・容易傾斜、震動、被撞擊的場所・室外・有強電波或磁場的場所。
 - ・兒童能觸碰的場所・有油煙、水蒸氣的場所・發熱器具(爐子等)周圍的高溫場所・溫差較大的場所(空調、暖氣等旁邊)。

- 如果機器跌落破損，請立即關上電源及必須要求檢查及維修。
否則可能會引起火災、觸電。

- 請勿在通電的情況下放置。
否則可能會引起火災、事故。

注意（關於使用及保管）

- 請於使用前先確認電極頭沒有損壞、變形、破裂，如有破損故障，請不要使用。
否則肌膚的傷口等問題症狀可能會惡化。
- 請勿連續使用6分鐘以上。
否則會引起肌膚問題。
- 請勿強力按壓及持續在同一部位使用。
如果使用過強的力度按壓在同一部位可能會令肌膚受損。
- 請勿在電源開啟的狀態下接觸其他美容儀器或電器產品。
請勿與其他電器產品(電熱墊等)同時使用。
否則可能會因失靈而引起事故。
- 請勿使用酒精,稀釋劑,汽油,洗甲水,燈油等液體,藥品類,拋光粉擦拭主機。
否則可能會造成機器表面損傷。
- 請勿將電極頭觸碰金屬物件。
否則可能會引致故障,受傷。
- 請勿用於寵物身上。
否則可能造成受傷。



禁止

- 請勿在室外使用。
否則可能會導致本機故障。



室外使用
禁止

- 使用在臉上時請必須先卸妝後使用。
如在化妝後使用會因粉底液而令肌膚上出現黑色污垢。
- 必須遵守以下項目
否則可能會造成事故,受傷及故障。
 - 不要在同一地方連續使用。
 - 請根據肌膚狀態使用。
 - 如皮膚有出疹,發熱或痕癢等異常時請勿使用。
 - 請避免日曬活動或與去角質護理或塗抹式面膜一同使用。
 - 使用後必須關掉電源。
- 使用時請注意肌膚是否出現異常。
使用時如感到痛楚或疲勞或肌膚出現異常請立即停止使用。
如跟肌膚不合的話請停止使用。第二天肌膚異常情況持續時,請立即諮詢醫生。



務必遵守

注意（關於使用及保管）

- 首次使用或適應前請務必從強度1使用。
否則可能會造成事故或受傷。
- 長時間沒有使用時，請先檢查機器是否正常操作
後使用。
否則可能會造成事故或故障。
- 使用時請除下身上的金屬物品(手錶, 頸鏈, 戒指, 耳環)。
否則可能造成事故, 受傷或飾物被捲入。
- 請勿隔着衣物使用。
- 請保持電極頭和肌膚沾上護膚品或水份，並在使用途中補充護膚品或水份。
如護膚品或水份太少會影響刺激傳達及造成肌膚問題。
- 如果使用時肌膚感覺到刺痛感請將強度降低，或
換部位使用。或補充附屬的化妝品令肌膚濕潤後
再使用。
否則可能會引起肌膚疼痛。



務必遵守

- 如需在同一部位使用時必須隔24小時以上。
過度使用會造成肌膚損傷。24小時只為建議, 請根據肌
膚狀態使用。
- 每次使用後請參閱「護理完畢後」清潔本儀器
上的污垢或護膚品。
否則可能會造成故障或肌膚問題。
- 保養本儀器時, 必須關上電源, 將充電插頭從
插座拔掉並依照使用說明書的指示。
否則可能會造成事故或故障。



務必遵守

警告 (關於電源)

- 使用本產品時必須使用專用的充電插頭及USB線。另外充電插頭必須直接插入牆身的插座，請勿使用拖板。
否則可能引起觸電、短路、起火、故障。



禁止
使用拖板

- 請勿強行破損、加工或捆扎充電插頭及USB線。
否則可能會因電線破損引致火災、觸電。
- 收納時請勿把USB線卷在主機或充電插頭。
否則會令USB受負荷斷線而引致觸電或短路。



不適當使用

- 請勿使用已損壞的充電器及USB線或鬆動的插座。
否則可能會導致觸電、短路或起火。
如需維修請聯絡經銷商。



禁止使用
已損壞插頭

- 請勿讓充電插頭及USB線沾水、灑水及水洗。
否則可能會引致觸電、短路、起火或故障。



禁止灑水

- 拔除充電插頭及USB線時請必須手握插頭前端拔出(切勿接觸金屬部份)。
否則可能引起觸電、短路、起火、故障。



拔除插頭

- 開置時，請先將充電插頭及USB線從插座拔除。
請勿在手沾濕狀態下拔除插頭。
否則可能引起觸電、短路、起火。
- 萬一出現異常，請立即拔除充電插頭及USB線。
若出現冒煙、怪聲或異味等異常情況時，切勿繼續使用。



拔除
充電插頭

警告 (關於電源)

- 請確保充電口沒有被水沾濕後進行充電。
否則可能會引致觸電短路或起火。
- 請勿拉扯充電器及USB線去移動或抬起本產品。
否則可能會觸電、短路、起火、故障。
- 必須使用100~240伏交流電，請確保充電插頭及USB線完全插入。
否則可能會引起火災、觸電、事故。



務必遵守

在國外使用上注意事項

警告

- 必須使用100~240伏交流電。
否則可能會引起起火、觸電或故障。
 - 勿必確認插頭形狀及電壓後才使用。
否則可能會導致機身發熱、起火或故障。
-
- 如需要使用原裝插頭以外的形狀時請使用轉換插頭(非原裝配件)。
 - 因應地區和住宿地點，插頭形狀和電壓可能有異，請使用前務必先檢查。
 - 關於轉換插頭請向旅行社、電器店等查詢。



務必遵守




注意起火


各部件的名稱及功能

主機

●正面

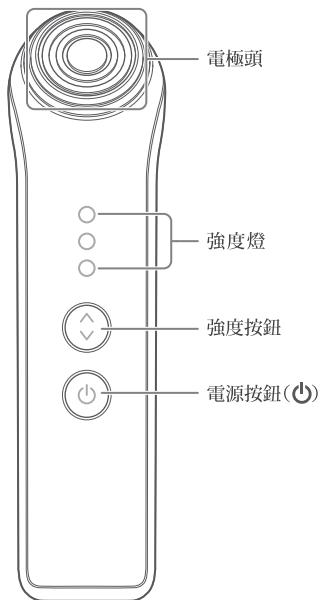

●背面

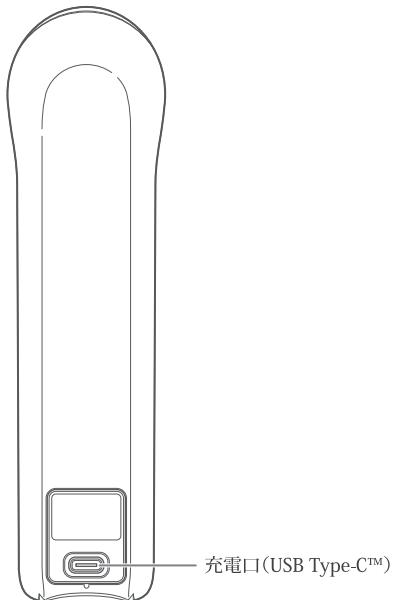

配件

●充電插頭

●USB線(USB Type-C™)

●護膚品

●使用說明書

為提升產品品質，主機及配件的設計，規格出現變更時，殊不另行通知。

•USB Type-C™及USB-C™為USB Implementers Forum的商標。

功能

安全機能

●溫度感應

當肌膚或電極頭的溫度較高時，因安全起見，主機會自動降低輸出。

另外如果溫度過高時，因安全起見，電源會自動關上，電極頭的燈部會閃爍5次並有5次提示聲作通知。

●動作感應器

檢測主機的活動，如電極頭持續於同一地方使用時，因安全起見，會停止輸出。

與主機移動的速度過慢時，可能會觸發感應器的功能，令溫感減弱。

自動關機功能

如開機後過了6分鐘，會自動關上電源(提示音：嗶嗶)

TIMER機能

全臉的建議使用時間為約6分鐘。過了3分鐘後，會發出提示音通知(提示音：嗶)。


充電提示

開啟電源後，電源按鈕會亮起(白色，紅色)來提示電池量。如紅燈亮起時請充電後使用。會根據電池狀態或使用環境，電池量的表示會出現差異。

使用前

充電

使用家庭插座

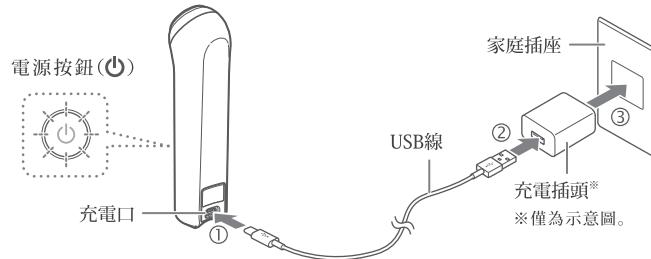

- 充電時電源按鈕閃爍(①)。
- 充電完畢後，電源按鈕①閃爍5秒後熄掉。請拔除充電插頭及USB線。
- 室溫約25°C時，約3小時可完全充電，能夠操作約40分鐘。充電時間及操作時間會因電池量及充電環境出現差異。
※如約10秒後，還沒有開始充電，請確認USB線的插頭是否鬆掉。

注意

- 主機和充電口沾上水滴，請先擦乾。否則充電會造成故障。
- 首次使用或長時間閒置時，即使顯示完全充電，可能仍只能操作短時間。請再度充電後再使用。
- 請必須使用原裝配置的充電插頭及充電用USB線。
- 如使用電壓DC5V2.0A以下的插頭充電時會出現錯誤(提示音：7次)
※如使用市面其他型號的USB線或充電器可能無法正常充電。

預先進行肌膚測試

首次使用時，請務必預先測試產品和肌膚的適應性。

⚠ 注意

- 為防止出現肌膚問題，請務必先進行測試。
- 如測試部位出疹、泛紅、痕癢、刺激及異常情況時，請立即停止測試。
- 請小心使用，不要令肌膚出現問題。如肌膚感覺異常請勿使用。

1

先用肥皂等產品清潔
手臂內側，然後用毛巾
擦拭乾淨



2


請將適量護膚品(約1粒珍
珠)直接擠到電極頭中央
部位，開啟電源後，一邊移
動一邊使用(P.13)

請務必以強度1進行測試。

3

請推勻殘留在肌膚上的護
膚品，並確認肌膚是否出
現異常

如果24小時內肌膚沒有出現泛紅
或發燙等異常情況，即可使用本
產品。

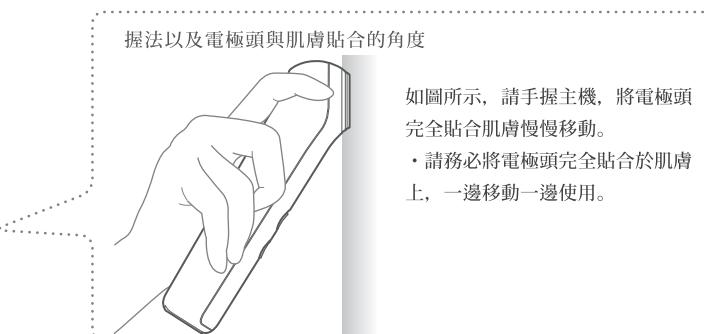

護理方法

基本使用方法

<https://ymn.cm/9ZG2mMZ>



各部位的使用方法

<https://ymn.cm/VL1VNZd>




基本的使用方法

可以從影片確認基本的使用方法。請讀取上方的QR code。

請務必卸妝，潔面後使用。

1 開啟電源

電源按鈕()，強度按鈕，強度1燈亮起，電極頭亮燈，無線電波(RF)和EMS開始輸出。

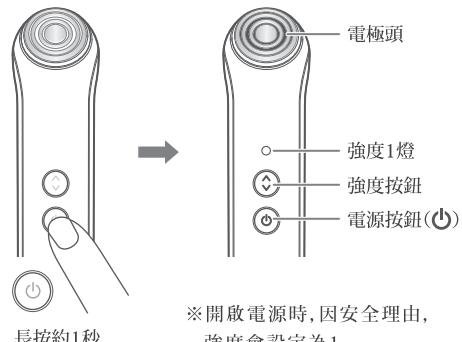


※開啟電源時，因安全理由，強度會設定為1。

個人記憶機能

會保存使用完結時的強度和EMS開/關，下次使用時，將會設定為上一次使用的同一使用設定。

2 選擇強度

每按強度按鈕一次，強度便會轉換。
強度可從強度燈確認。

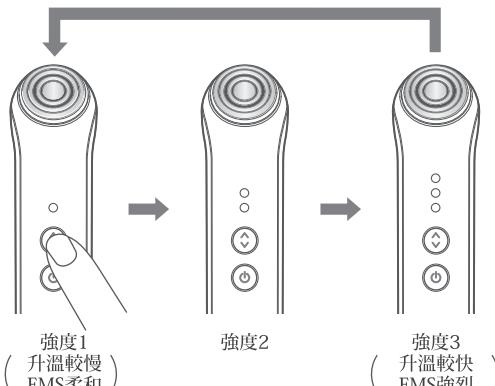

EMS的開/關切換

長按強度按鈕切換EMS的開/關。
(強度按鈕亮燈:EMS開啟，強度按鈕燈熄滅:EMS關)


注意

第一次使用或適應前請務必由強度1開始使用。

3

將附屬的護膚品直接擠在電極頭中央，
電極頭貼在肌膚上移動

主要分6個部位進行護理(P.15~16)。
一個部位的護膚品使用量為約1粒珍珠。

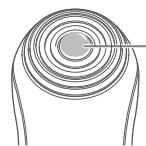

附屬的護膚品
(約1粒珍珠)

4

使用後請護理肌膚

使用本儀器後，請推勻臉上的護膚品，
然後使用日常的護膚品護理肌膚。



移動方式請參照「移動方式」
(P.15~16)

注意


- 請避免用手塗抹附屬的護膚品。否則可能會令主機骯髒或因手滑而跌下。
- 如果使用過程中感覺滑動不暢，請適量添加護膚品。
- 使用時請將電極頭完整接觸到肌膚。
- 請務必一邊在肌膚上移動一邊使用。

- 如果感到過熱時，請加快移動速度或調低強度。
- 請勿使用在喉核，眼瞼及眼睛周圍。




移動方式


如下圖所示，請按照①~⑧的順序朝箭嘴方向移動，每個箭嘴動作重複3次。

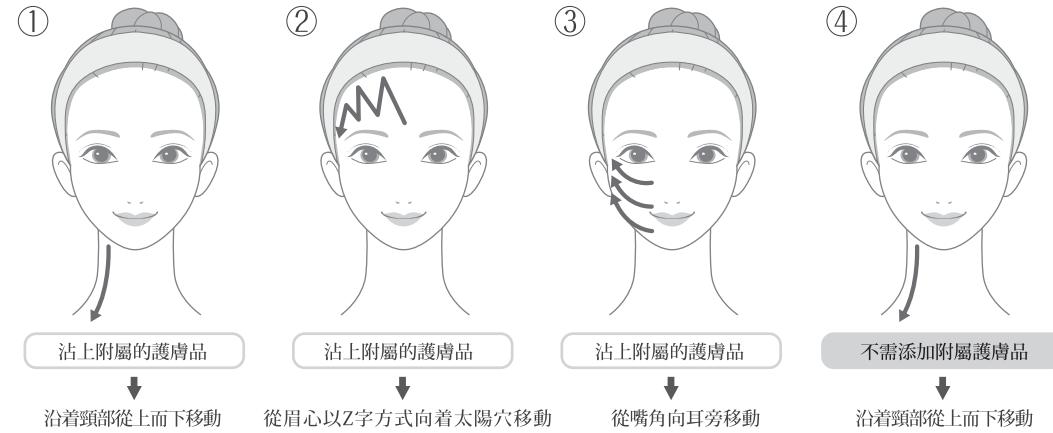

左半邊臉 約3分鐘

- 建議主機移動速度：1秒鐘4cm
- 建議使用時間：一次約6分鐘（全臉）
- 3分鐘後響起「嗶」的蜂鳴提示音，為換臉的提醒功能。
- 使用中途想停止時，請按電源按鈕 1秒以上，切斷電源。

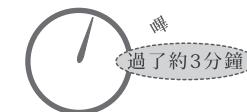

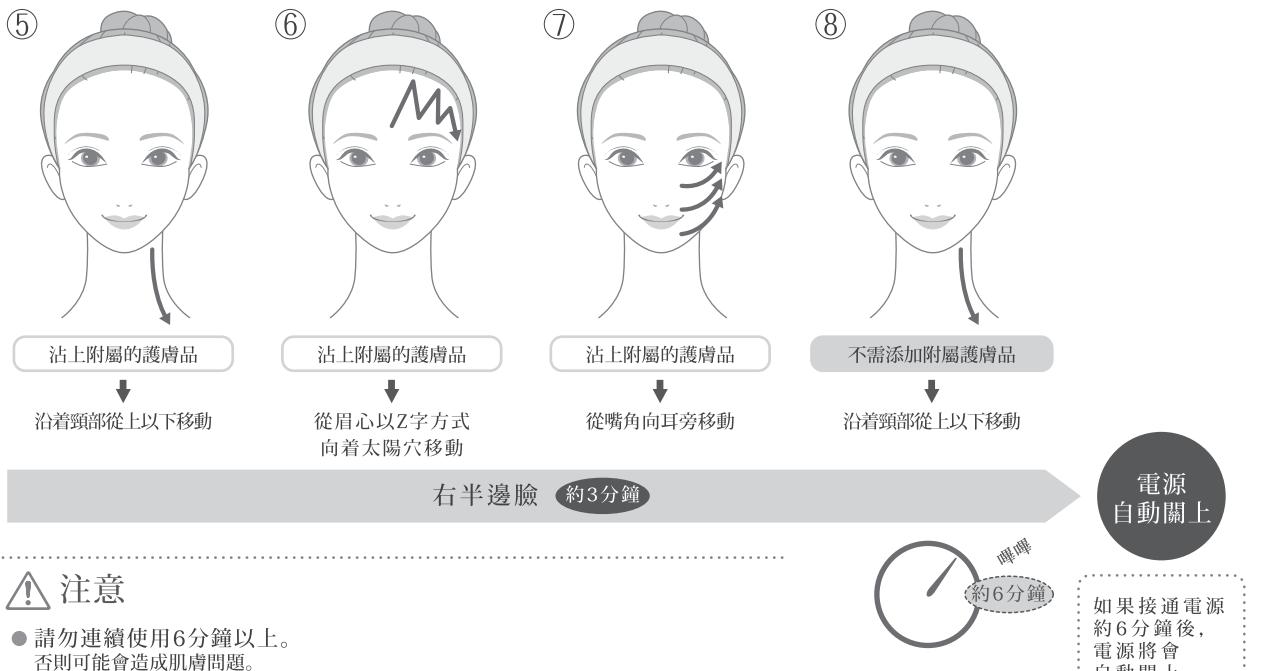

護理要點

請參照下圖使用於特別關注護理的地方，效果會更佳。

嘴角

如下圖所示，請根據箭嘴的方向移動3次。




沾上附屬的護膚品



沿着法令紋由下而上→往太陽穴（3次）

面部輪廓線

如下圖所示的順序，根據箭嘴的方向移動各3次

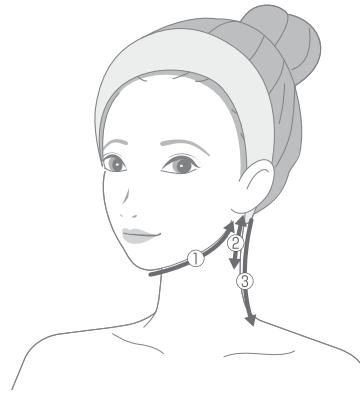

沾上附屬的護膚品



- ①下巴往耳垂方向移動（3次）
- ②耳垂下方來回移動（3次）
- ③沿著頸部從上往下移動（3次）

護理完畢後

保養方法

為保持本機清潔，每次使用後請進行清潔保養。



- 清潔保養時，電源必須關上，將USB線從主機拔除。
否則可能會造成觸電、短路及起火。

- 請勿用水沖洗。
本產品非防水產品。
會造成故障。



1

用擰乾水份的柔軟布等擦拭污漬

- ・頑固污跡難以清潔時，請用沾上稀釋了中性洗劑的布輕輕擦拭。
- ・殘留於電極頭縫隙中的護膚品，請使用棉花棒或化妝棉清潔乾淨。

注意

- 請不要在沾有附屬護膚品的狀態下放置。
- 請勿使用酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水等，溶劑或藥品類拋光粉擦拭。



保管方法

- 請將本機放置於兒童無法接觸及通風良好的潔淨地方。
- 長時間閒置本機時，請將電源插頭和USB線從主機和插座上拔除後保管。
- 請勿放置於高溫潮濕的地方(火源附近, 炎熱天氣下, 浴室等)

保養及檢查

- 長時間閒置後，使用前請務必確認本產品處於正常、可安全操作的狀態後再使用。
- 如機器操作異常時，請在送交維修前參照「排除故障」(P.20)的內容，確認故障。
如果問題還未能解決，請向經銷商諮詢
- 如本產品發生故障或破損，請諮詢經銷商。

須知

疑似故障時 使用本產品時如感到異常，提交維修前請先確認以下項目。

狀況	可能的原因和處理方法
無法開機	→ 請長按下電源按鈕約1秒。
	→ 電量不足，請進行充電(P.11)。
中途關機	→ 同時按下電源按鈕和強度按鈕會重設機能並關上電源。 使用時請小心不要按下。
	→ 約6分鐘後電源會自動關上。
充電後只能使用數分鐘	→ 電量不足，請進行充電(P.11)。
	→ 可能是電池壽命完結。請聯絡經銷商。
無法開始充電	→ 請插入附屬的USB線(P.11)。並確認是否有鬆動。
	→ 請把附屬的充電插頭插入插座(P.11)。
	→ 如使用電壓DC5V2.0A以下的插頭充電時會出現錯誤。 提示音：7次
射頻(RF)過熱	→ 請勿在同一部位長時間使用，必須一邊移動一邊使用。
	→ 請加快移動速度使用。
	→ 請把強度調低。初次使用時必須以強度1使用。

狀況	可能的原因和處理方法
無法感到射頻(RF)的溫感	<p>→ 皮膚乾燥。請塗上附屬的護膚品，調整皮膚的濕度後再使用。</p> <p>→ 調高強度。</p>
刺痛、疼痛	<p>→ 請調低強度。初次使用時必須以強度1使用。</p> <p>→ 使用時，請將電極頭的整体貼上肌膚。</p>
EMS過弱、感覺不到	<p>→ 請調高強度。</p> <p>→ 皮膚乾燥。請塗上附屬的護膚品，調整皮膚的濕度後再使用。</p> <p>→ 因應肌肉的生長，會有難以感受到的地方。</p> <p>→ EMS的輸出關閉。請長按強度按鈕(P.13)。</p>
電源按鈕的顏色為紅色	→ 正在表示電量(P.10)。
不是從強度1開始	→ 設有個人記憶機能(P.13)。

常見問題

Q 建議使用次數及時間的標準?

A 建議一星期使用五天(一天使用1次,最多6分鐘)。
※請根據皮膚狀態使用。
※請注意肌膚是否出現異常。如果跟肌膚不合請停止使用。

Q 能夠連續使用嗎?

A 建議一天使用本產品1次,每次6分鐘。

Q 護膚品一次應該使用多少?

A 使用在全臉時,附屬的護膚品約6粒珍珠的大小。
如果你手上的護膚品是水溶性,也能夠使用。
如果感到護膚品不足時請添加。

Q 能在浴室使用嗎?

A 本產品非防水製品。請勿在浴室内使用。

Q 使用後肌膚發熱

A 這是射頻(RF)的溫熱效果而引致。

Q 電極頭不熱

A 射頻(RF)並不是由電極頭發熱,而是透過電流溫熱皮膚。

Q 根據不同的強度效果也不同嗎?

A 強度越高升溫越快。EMS的感覺亦越強。
※初次使用時或適應前必須使用強度1。

產品規格

電 壓	DC5V 2.0A
電 力 消 耗	約9W(充電時)
使 用 電 池	鋰蓄電池
充 電 時 間	約3小時 ※充電環境不同，充電時間也會稍有不同。
操 作 時 間	約40鐘(滿電量狀態開始) ※使用模式，使用強度，使用環境會影響操作時間。
外 型 尺 寸	約W46×D47×H173(mm)
產 品 重 量	約175g
材 質	主機:ABS樹脂、聚碳酸脂 電極頭:不鏽鋼
產 地	日本
配 件	充電插頭1個 USB線(USB Type-C™)1條 護膚品1件 使用說明書
建議使用環境	10°C~40°C

售後服務

關於附屬護膚品

- 產品詳情或購買請聯絡當地經銷商。

※銷售結束時，恕不另行通知。。

關於充電池

- 充電池是消耗品。(保養範圍以外)
- 如果充電後使用時間變短，可能是電池壽命完結。(建議充電次數為約300次)
- 如果需要更換充電池，請聯絡經銷商。

關於廢棄

- 棄置本產品時，請遵照當地政府規定進行棄置。
- 本產品使用鋰離子充電池。



S12-1-001TC