

YAMAN

TOKYO JAPAN

使用手冊

家庭用美容器 | CAVISPA360 | HDS-100B

目錄

前言	1	護理後事項	22
安全注意事項	1	其他注意事項	24
在國外使用上注意事項	8	● 排除故障	24
產品說明	9	● 常見問題	26
使用前	11	● 產品規格	27
護理方法	14	售後服務	28



前言

衷心感謝閣下選購 YA-MAN 的產品。

- 為閣下安全着想，使用產品前請先仔細閱讀本使用手冊。
- 閱讀後請放置於可經常查閱的地方。
- 將本產品轉讓他人時請務必同時附上使用手冊。

安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀「安全注意事項」所有指示內容，以確保能正確地使用。
- 請按照操作手冊的指示使用。
- 如發生異常情況時，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- 請絕對不要在故障狀態下使用，可能對身體造成壞影響及發生危險。
- 本手冊所列注意事項對閣下的安全非常重要，請務必遵守。
- 注意事項分為「危險」、「警告」及「注意」，並清楚列明危險程度，以及錯誤操作可能造成的傷害。

●關於注意事項



危險

不正當使用本產品會引起造成嚴重傷亡的危險。



警告

不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。



注意

不正當使用本產品可能令個人受傷，並引致財物*損失。

*財物損失所示範圍包括對房屋、財產、寵物等損害。

●關於符號



此符號表示禁止進行的事項。



此符號表示務必遵守的事項。



此符號表示該小心注意的事項。

危險 (關於使用及保管)

● 以下人士請勿使用。

可能會影響電子醫療儀器運作。

◆ 使用電子醫療儀器的人士

- 心臟起搏器等植於體內用的儀器 · 氧合器等維持生命用輔助儀器 · 心電計等攜帶式裝置。



禁止

警告 (關於使用及保管)

● 以下人士請勿使用。

否則可能造成事故或發生問題。

- 正接受治療人士 · 發育中人士 · 急性疾病 · 結核性疾病 · 正在發熱人士 · 高血壓 · 傳染病疾病 · 惡性腫瘤
- 患有血液疾病 · 患有內臟疾病 · 患有皮膚病 · 過敏體質 · 過敏性皮膚炎或皮膚有問題人士 · 皮膚敏感的人
- 物理刺激產生生理性色素 · 因曬傷引致皮膚發炎人士
- 極度疲勞 · 身體抱恙人士 · 飲酒後 · 懷孕期間 · 經期期間或授乳期間人士 · 服用催眠藥人士
- 因長期使用類固醇荷爾蒙藥物引致毛細管擴張或肝功能紊亂 · 正在牙齒治療的人



禁止

● 除指定部位外，請勿使用於以下部位，

否則可能造成事故或發生問題。

- 傷口 · 曾接受整形手術之部位 · 口腔內、陰部或粘膜等 · 喉核 · 人工植牙 · 隆起的痣 · 過濾性疣 · 暗瘡
- 皮膚發炎的部位 · 皮膚痕癢和泛紅部位 · 頭部 · 心臟正上方 (圍繞太陽神經叢)
- 手指、手腕、腳踝等位置較細的部位 (整個電極不接觸的部分) · 面部 (運動模式/細胞模式使用時)
- 耳 · 鼻 · 唇 · 眼球 · 眼瞼及眼部周圍 · 手肘、膝蓋、鎖骨、前額等皮膚較薄的部位 (骨頭上方)

※若無法自行判斷，請使用前先徵求醫生意見。

● 切勿長時間連續使用。(用於商業用途等)

否則可能導致受傷及發熱等。

● 切勿在頭上使用。

否則可能導致受傷。

警告 (關於使用及保管)

- 切勿帶到桑拿浴室或岩盤浴室內使用。
否則會導致主機可能會發熱、導致受傷或損壞產品。
- 切勿放置於浴室或水中。
否則可能會導致觸電、短路、起火或故障。
- 請勿使用易燃物品（酒精、稀釋劑、汽油、去除劑、噴霧劑等）。
否則可能會導致火災、短路或受傷。



禁止

- 若出現異味或異常發熱，請停止使用。
否則可能會造成損壞或引致起火。



出現異味
異常發熱時
禁止使用

- 請勿在使用過程中將重物放在主機上、讓主機跌下或受強烈撞擊。
否則可能導致受傷或機件故障。



禁止撞擊

- 請勿放置不平穩的地方。請勿讓主機跌下或受撞擊。
否則可能會造成本機故障。另外，墜落腳上會造成受傷。



禁止墜落

- 請勿讓無法表達意願或對皮膚感覺較弱的人士使用。
否則可能會導致意外或受傷。
- 避免與兒童或殘疾人士使用。未成年之人士須要在監護人的監督下及同意方可使用。
否則可能導致受傷。



使用者的
限制

- 除美容用途以外，請勿使用。
否則可能會導致受傷或損壞本機。
- 請勿以本使用手冊以外的其他用途使用。
否則可能導致受傷或機件故障。



禁止
其他用途

- 請勿浸入或沖洗充電器。
否則可能會導致觸電、短路、起火或故障。



禁止沾水

- 請勿拆解、維修及改裝。
否則可能會引致起火、觸電或身體受傷。
如要維修，請聯絡當地經銷商。



禁止分拆

警告 (關於使用及保管)

- 首次使用前請務必要進行預先皮膚測試。

否則可可能導致事故或傷害。

- 請勿強行按壓。

否則可可能導致事故或傷害。



務必遵守

-
- 請勿將其置於火源、火焰、浴室等高溫潮濕的地方，或靠近易燃氣體或易燃物品的地方。此外，請勿在高溫下充電或使用。遠離加熱電器。

本產品內置可充電電池。它可能導致過熱、火災、破裂或故障。



起火注意

-
- 切勿放入微波爐或高壓容器中。

否則可能導致發燒、火災或爆炸。



破裂注意

注意 (關於使用及保管)

- 除了水之外，請勿使用其他護膚品。

〈不適合使用護膚品〉

- 油性 · 磨沙產品 · 刺激性強爽膚水 · 肥皂 · 溫感效果的爽膚水、按摩啫喱
- 含有脂肪燃燒成分的乳液、按摩啫喱等。



禁止

注意 (關於使用及保管)

- 請勿將電極頭與金屬接觸。
否則可能導致過熱、火災、故障或損壞。
- 使用前，請確保電極頭沒有裂縫、變形或破損，如果破損或破損則切勿使用。
否則可能會導致皮膚問題和故障。
- 切勿使用酒精、稀釋劑、汽油或溶液等溶劑擦拭主機。
否則可能會對身體表面造成傷害。
- 請勿在溫泉或加入入浴劑的熱水中使用。
否則可能會造成故障。
- 請勿使用於寵物。
否則會導致損傷。
- 切勿將電源開啟後放在地板或家具上。另外，使用後請關閉電源。
否則可能會導致家具或傷害等損壞。
- 開啟電源時，請勿與其他美容產品或電器接觸。請勿同時使用其他電子產品（電熱毯、床上用品、被爐等）。
可能會導致主機受傷或損壞。
- 請勿穿著衣服使用。



禁止

-
- 請勿在室外使用。
否則可能導致主機故障或故障。



禁止
室外使用

注意（關於使用及保管）

- **使用前請除下首飾（如項鍊和耳環）。**

否則可能導致意外或傷害。

- **請在使用或首次使用之前，請選擇強度1。**

否則可能導致意外或傷害。

- **在面上使用時，務必要卸妝。**

用於化妝時，粉底可能會使你的皮膚變黑。

- **如果你在沐浴時未被水覆蓋的部位下使用，請務必使用較低的強度。**

當在水中使用時，感覺EMS刺激比在水外使用時更弱。此外，在調節到你選擇的強度後，如果在同一水位以外使用本產品，您可能會感受到EMS的強烈刺激。

- **在進行護理途中補充在電極表面和皮膚之間化妝品的護膚品、水等。**

如果護膚品和水的量低，EMS（肌肉刺激）和超聲波震動（衝擊波）的輸出將會變差及效果將會降低，並且可能發生皮膚問題。

- **如果感到不適或皮膚出現問題，請停止使用。**

如果你的皮膚有任何問題，請小心使用。如果你的皮膚不適合，請停止使用。

- **請勿長時間使用，並使用一次10分鐘作為標準。**

過度使用可能會損傷你的皮膚。以上只用作做用標準，請在觀察皮膚狀況時使用。

- **護理後，請參閱“護理後事項”（第22頁），除去粘附在產品上的啫喱和其他物質。**

否則可能會導致皮膚問題和故障。

- **請務必遵守以下事項。**

意外或受傷可能導致本機損壞。

- 避免在同一個地方使用超過一定的時間。（參閱第11頁）
- 根據你的皮膚狀況使用。
- 如果患有皮疹，炎症或瘙癢等皮膚問題，請勿使用。
- 曬傷後，切勿立即同時使用去除角質產品及面膜。
- 護理後務必關閉電源。



務必遵守

警告 (關於電源)

● 請勿損害、加工及或捆紮充電器。

將電線放置於重物下或被夾緊可能導致電線破損、觸電或起火。



● 移除充電器時，請勿移動或抬起產品。

否則可能會導致觸電、短路、起火或斷線。



● 請勿使用已損壞的充電器或鬆動的插座。

否則可能會導致觸電、短路或起火。
如要維修請聯絡經銷商。



● 拔下充電器時，請務必握住電源插頭並將其拔出（不要觸摸金屬部件）。此外，請勿在手沾濕狀態下拔除或插入插頭。

否則可能會導致觸電、短路或起火。



● 拔下充電器時，請務必關閉電源，並在閒置時從電源插座上拔下充電器。

請勿在手沾濕狀態下拔除或插入插頭。

否則可能會導致觸電、短路或起火。

● 務必使用100~240V。將充電器牢固地插入。

否則可能導致火災，觸電或故障。



● 務必使用專用的充電器。

將充電器直接插入牆壁插座，切勿連接延長插座。

否則可能導致火災，觸電或故障。

● 充電前確保水滴不會沾附在充電端子上。

否則可能會導致觸電、短路或起火。

● 萬一發生異常情況時，請立即關閉電源。

若出現運作異常、冒煙、發出怪聲或有異味時，切勿繼續使用。

● 使用後務必關閉電源。

● 如果你感到地震或閃電時，請停止使用並關閉電源。如果正在充電，請從電源插座上拔下充電器。

在國外使用上注意事項

警告

- 請務必連接100~240伏交流電使用。

否則可能引致起火或觸電。



務必遵守

-
- 務必確認插頭形狀及電壓後才使用。

否則可能會導致機身發熱、起火或故障。




起火注意

-
- 插頭形狀及電壓可能會按區域有所不同，請先行確認後才使用。
 - 關於充電器插頭的轉換，請向旅行社或電器銷售店查詢。

產品說明

主機


●正面

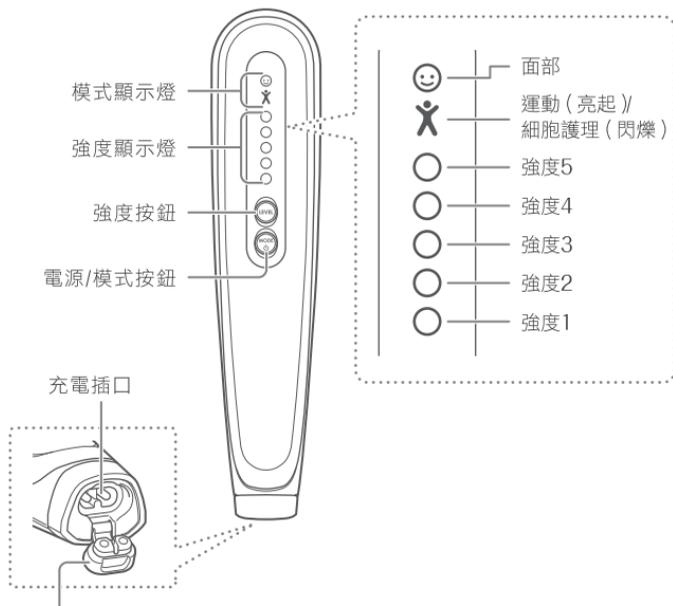

充電插口蓋子*

*除充電外，請保持電池關閉狀態。

●背面

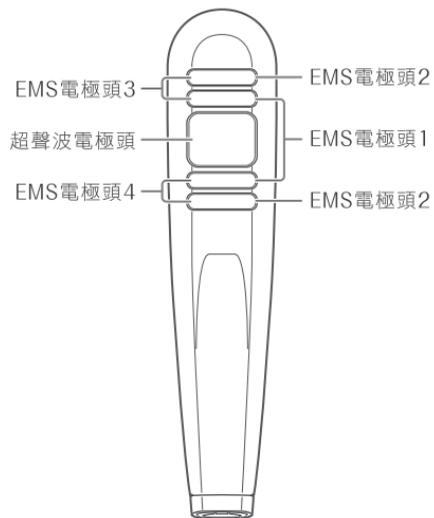

配件

● 座台



充電或不使用產品時
請將本機放在座台上。



● 充電器

● 使用手冊

功能

超聲波（衝擊波）

以超聲波震動皮膚。

EMS

以電流刺激肌肉。

防水規格

機身是採用IPX7防水規格。可以在浴室、水邊等地方使用。

※充電器不設防水功能。

自動關機功能

開啟電源大約10分鐘後，會發出聲「嗶嗶」聲，電源將自動關閉。

※在面部模式的情況下，10分鐘後，會發出「嗶」聲，直到大約10分鐘才會關閉電源（整個面部的使用時間為標準）。

使用前

使用注意事項

使用本產品前請仔細閱讀以下內容並正確使用。

- 當您第一次使用本產品時，請務必進行皮膚測試（第13頁）。
- 使用本產品時，請用水、乳液或保濕啫喱滋潤皮膚，然後將電極頭貼在皮膚上。
- 務必除下首飾（如項鍊和耳環）。
- 在面上使用時務必要卸妝。
- 請遵照以下使用時間和使用頻率作為標準。

1個部位10分鐘、一星期2~3次

全身30分鐘內一次

（左臂和右臂、大腿、小腿等共10分鐘）

如果想再次在同一部位上使用EMS，請相隔24小時或更長的時間後使用。


※以上只是參考。請在觀察皮膚狀況時使用。

- 務必使用專用的充電器進行充電。

請勿在浴室或洗手間等炎熱潮濕的地方充電。

請在10至35℃的環境溫度範圍內為電池充電。

充電

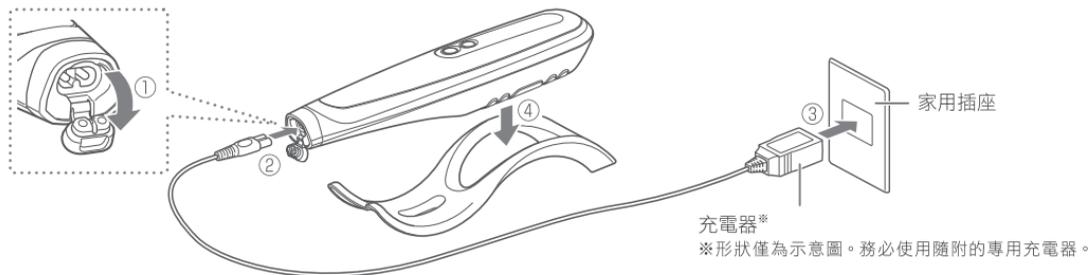

- 充電插口蓋子打開，連接充電器開始充電。充電中面部模式顯示燈 (☺ / ✕) 交替閃爍。
- 充電完成時，面部模式顯示燈 (☺ / ✕) 會亮起約1分鐘後熄滅。
- 當室溫約為25°C時，約在3小時內充滿電並可以運行約1.5小時。充電和操作時間因電池電量和充電環境而有異。

※約10秒後仍未開始充電時，請檢查充電器是否鬆動。

注意

- 如主機及充電端子沾濕時，請將水分徹底擦乾。留有水分狀態下充電可能會導致觸電、短路、起火或機件故障。
- 請將充電器直接插入牆壁上的插座上。如連接延長插座，可能會導致難於充電。
- 購買後首次充電時，請在充滿電後才使用。
- 首次使用或長時間閒置時，即使顯示完全充電可能仍只能操作短時間。請再度充電後才使用。
- 如充電線破損，請更換充電器。

皮膚測試

初次使用產品時請務必進行事前皮膚測試。



注意

- 為確認皮膚是否適應本產品，請務必事先進行測試。
- 進行部位如出現紅疹、發紅、痕癢或受刺激等異常情況，請立即中止測試並用清水沖洗。
- 如皮膚感到異常請停止使用。

1

用肥皂清洗手腕內側
並用毛巾擦拭

2

用水、乳霜或保濕啫哩等塗抹
於手腕內側，開啟電源並以運
動模式使用約3分鐘。
(第14及15頁)

請務必調節至強度1進行。



3

確認皮膚是否有異常

如24小時內皮膚沒有出現泛紅或
發熱，便可以使用。



手握的方法

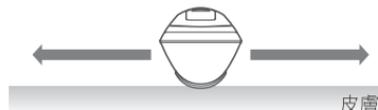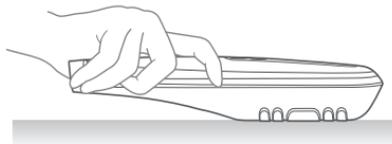

皮膚

請按上圖所示的方法緊握機身，以電極頭貼於皮膚上沿著箭阻的方向緩緩移動。

使用方法

基本的使用方法

1

使用水、乳液、保濕啫喱等充分潤濕皮膚。

皮膚乾燥的狀態下使用，會較難感覺效果，或導致皮膚出現問題。

※ 於浸浴、淋浴使用時，請以水充分沾濕皮膚後才使用。

注意

請勿同時使用以下的護膚品。


- 油性產品
- 磨砂產品
- 刺激性爽膚水
- 肥皂
- 溫感效果的乳液或按摩啫喱
- 含脂肪燃燒成分的乳液或按摩啫喱

2

啟動電源

長按電源 / 模式顯示燈約3秒。

本機發出「嗶」一聲蜂鳴聲，模式顯示燈 (X) 及強度1顯示燈會亮起。(第9頁)

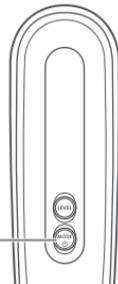

長按電源 / 模式按鈕
約3秒。


注意

- 使用時請拔除充電器。
本機使用時不能同時充電。

3

選擇模式

同時按下電源 / 模式按鈕，會發出「啾」一聲蜂鳴聲，以切換模式。
模式顯示燈 (✕/☺) 確認所選模式。

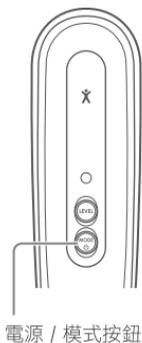

警告


- 面部護理時務必使用面部模式。
否則可能導致皮膚問題。

4

選擇強度


每次按強度按鈕，都會發出「嗶」一聲，EMS強度會切換（0到5級）。

強度顯示燈會亮起確認強度。

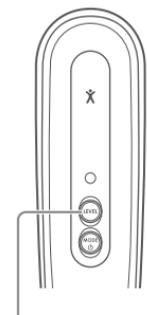

強度按鈕

EMS
強度

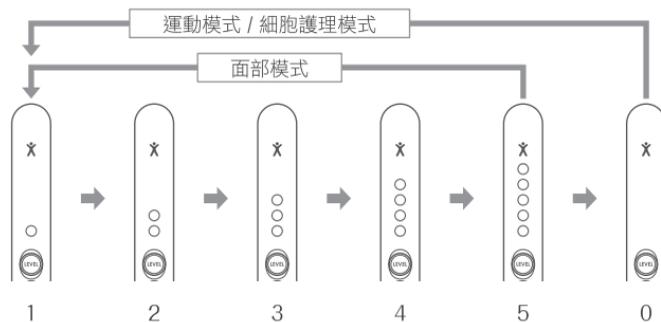

- ※強度等級0，不會輸出EMS。
- ※面部模式，沒有強度0的設定。
- ※超聲波的強度不會變更。

注意

- 首次使用時請選擇強度1開始。
- 請選擇合適的強度。

5

貼於皮膚上

運動模式/細胞護理模式

將整個電極板貼在皮膚上，然後慢慢滑動（約2cm/1秒）。

面部模式



將EMS電極板貼在皮膚上並緩慢滑動（約2~5cm/1秒）。

請勿不要太用力按壓皮膚。

※如果難以滑動，請立即補充水分、乳液、保濕啫喱等。

有關各部位的護理方法，請參閱下一頁。

注意

- 請勿將電極頭固定並保持在一個部位。否則可能會導致皮膚問題。
- 如果你的皮膚有任何問題，請小心使用。
- 如果你的皮膚不適合，請停止使用。

6

關掉電源

按住電源/模式按鈕（約3秒）。

將發出「嗶嗶」的蜂鳴聲並且顯示燈將熄滅。

在浴缸中使用要點

- 用水徹底擦拭皮膚。
- 請勿不要太用力按壓皮膚。否則會難於滑動。
- 在水中下難以滑動。

如何在每個部位上使用

正確使用電極頭（第15頁）。根據不同的部位，使用單手在身體上護理能達致最佳效果。

用於身體（運動模式/細胞護理模式）

➔ 移動方向 ○ 易於感受EMS的部位

※請使用EMS電極頭1或2中的任何一個或兩個緊貼於在皮膚上。

※以單手握著本機貼著部位時，顯示燈將會顯示。請勿不當地按下按鈕。


※請勿強行按壓皮膚。

●上臂（左臂5分鐘/右臂5分鐘）



- 將手掌朝上，將電極頭推向上臂，並將其從肘部移到側面。
- 適用於上臂內外。
- ○ 的部位為標準、以電極頭按壓。


●腹部（腰部）10分鐘

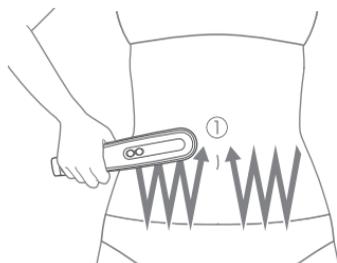


① 將鋸齒形從側面移動到肚臍。

② 以單手按著本機，將電極頭放在腰部，然後沿著骨盆朝向腳底移動。

○ 的部位為標準、以電極頭按壓。

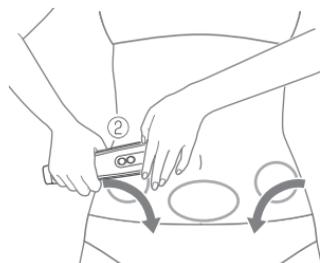

●大腿(左腿5分鐘/右腿5分鐘)

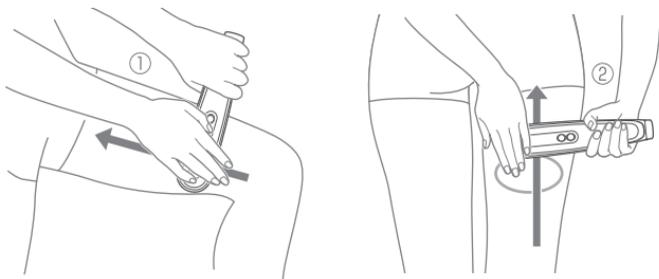

單手握著本機，將電極頭緊貼及按壓於皮膚上。

①將大腿內側部分從膝蓋移向腳底。

②將大腿後部從膝蓋移向腳底。

○的部位為標準、以電極頭按壓。


●小腿(左腿5分鐘/右腿5分鐘)



· 單手握著本機，將電極頭緊貼及按壓於在小腿上，然後將其從腳踝移到膝蓋後面。

○的部位為標準、以電極頭按壓。

●背部（10分鐘）

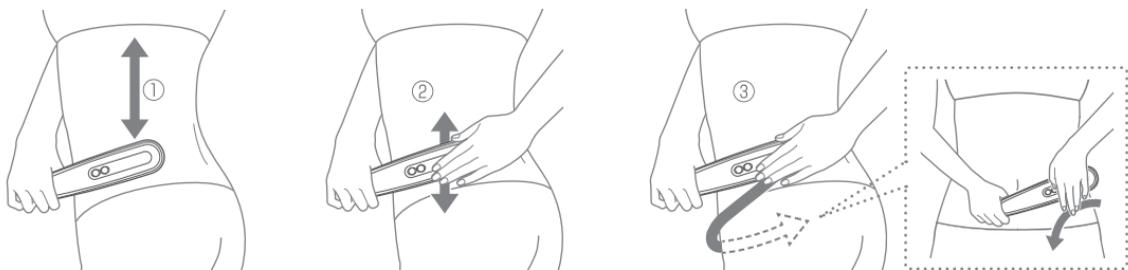

①手握本機及將手轉到腰部另一方，將其放在背上，並上下移動到下側。

※稍稍扭動身體會易於移動。


②將電極板緊貼在靠近臀部的背部，以單手按著本機並上下移動。

③圍繞腳底移動大約一次10次。

④如果護理另一側，請將本機握住另一隻手並重複①~③。

背部上方的
部位為標準、以
電極板按壓。

※小心不要掉落主
機。

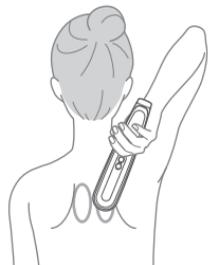

面部護理 (面部模式: 10分鐘)

※請將EMS電極頭3或4的任何一個或兩個緊貼於皮膚上。

警告

● 在面上護理時，請務必使用面部模式。


否則可能會導致皮膚問題。

● 護理前請卸妝。

● 護理前請除下首飾 (項鍊、耳環等)。

將電極頭輕輕按下，請按以下步驟順序滑動。

- ① 沿著頸部從上到下
- ② 從下巴到耳朵下方
- ③ 從鼻子的一側到耳朵的一側
- ④ 從眼睛下方到太陽穴
- ⑤ 沿著頸部從上到下

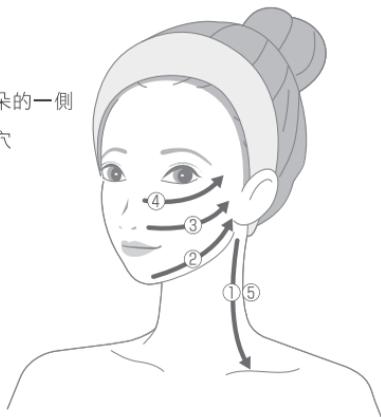


注意

- 進行面部護理時，EMS可能會刺激牙齒的神經。請勿強行按壓，並透過滑動進行護理。尤其是曾接受補牙的人士請注意。
- 請注意，護理頸部時可能會感受到強烈的EMS刺激。

禁止使用部位

請勿於眼瞼、眼睛周圍、喉核、鼻子、耳朵、嘴唇、前額 (下圖中 // 的部分) 使用。

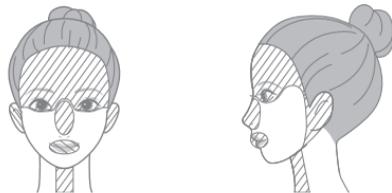

使用後

清潔方法

為保持主機清潔，請於每次使用後進行清潔保養。

警告

- 請清潔時務必關閉電源。
否則會導致觸電、短路、故障及起火。

1 用濕布擦去表面污垢

如果污漬較嚴重，請用沾有中性洗滌劑的海綿或布擦拭。

2 請以毛巾等將機身抹乾

- 請用乾布擦拭，以防止水分留在充電插口和電極頭上。
- 請用棉棒等擦拭充電插口。

3 請放於通風之處風乾

如在沾濕狀態下閒置會造成故障。

注意

- 請勿暴露在直射陽光下。
- 請勿使用除污劑、酒精、稀釋液、汽油或卸甲水等清潔。



本機可以用水清潔。

清潔後，請勿於本機上殘留水滴，請用乾布或棉棒擦乾。

- ※ 請勿使用熱水。
- ※ 請不要浸入水中。
- ※ 充電器並非防水。

儲存方法

- 如長時間閒置本機，請在存放前進行清潔。
- 如長時間閒置本機，請關閉主機的電源並將其放在附隨的座台上並存放。
- 請關掉電源並將充電插頭從插座中拔除後妥善儲存起來。
- 請勿放置於火源附近，熾烈陽光下或浴室等潮濕的地方，應將其存放於通風的清潔地方。
- 請把本機放置於兒童無法觸及的地方。

保養及檢查

- 長時間閒置後，請於使用前先檢查其操作是否正常及安全。
- 本機操作發生異常時，可先參照「排除故障」(第24頁)部分進行檢查，如仍無法解決，請向產品銷售商查詢。
- 如有故障或受損，請向所購買的產品銷售商查詢。

其他注意事項

排除故障

如使用過程中感到異常，請委託維修前對照以下項目進行檢查。

狀況	可能的成因及解決方法
無法開機	→ 請長按電源/模式按鈕約3秒。
	→ 電池沒電。請充電（第12頁）。
	→ 充電中。請拔除充電器。
充電後只能運作數分鐘	→ 電量不足。請充電約2小時。
	→ 自動響鬧功能啟動（第10頁）。
無法充電或 充電指示燈沒有閃爍	→ 將充電器牢固地插入充電器插口和本機座台。
	→ 已經完全充電。充電完成後  /  模式指示燈熄滅。
超聲波電極頭髮熱	→ 電極頭透過超聲波震動加熱。 如果太熱，請關閉電源並等待10分鐘再重新開啟。
超聲波震動 感覺不到(衝擊波)	→ 超聲波震動（衝擊波）由於輕微的震動，所以沒有明顯感覺。 （面部模式不設超聲波輸出）
無法變更超聲波的強度	→ 超聲波的強度不能調節。
使用時發出「吱」聲音	→ 超聲波震動的聲音。沒有問題

狀況	可能的成因及解決方法
感覺不到 EMS (肌肉刺激)	→ 如果皮膚乾燥，請在用水、乳液或保潔啫喱潤濕後使用。
	→ 如果強度太低，請選擇強度按鈕調高EMS強度。
	→ 如果護理部位難以感覺電流刺激，請轉換其他部位（第18-21頁）。
	→ 感覺因人而異。
EMS(肌肉刺激)應到疼痛	→ EMS電極頭沒有接觸皮膚。 運動模式/細胞護理模式下選擇EMS電極板1或2， 面部模式選擇EMS電極板3或4。
	→ 如果強度太高，請按強度按鈕降低EMS的強度。
本機發熱	→ 請關閉電源並閒置10分鐘後再使用。

常見問題

Q 是否可於入浴時使用？

A

本機具有防水功能，可於浸浴或淋浴時使用，但請勿將本機放置水中。
如無法暢順運作，請輕輕的貼於皮膚上使用。
※避免於溫泉或加入入浴劑後使用。

Q 是否有建議使用方法？

A

建議在身體溫暖時使用，例如在沐浴期間或之後使用。

Q 桑拿浴或岩盤浴時是否可使用？

A

因機身在高溫情況下，可能有燙傷皮膚的危險，故請勿在進行桑拿浴或岩盤浴時使用。

Q 即使皮膚乾燥也可以使用嗎？

A

皮膚在乾燥狀態下會減低對EMS電流的敏感度。如EMS電流感覺太弱，請使用水、潤膚乳液或保潔啫喱等潤濕皮膚後再進行護理。

Q 敏感皮膚是否都可以使用？

A

開始時請兒進行“預先測試皮膚”（第13頁）並檢查皮膚的狀況。
如皮膚沒有出現異常，便可放心使用。
如發現使用後皮膚出現異常狀況，請立即停止使用。如果難以自行判斷，請諮詢你的醫生。

Q 那種類型的化妝品適合滋潤皮膚？

A

你可以使用現有的爽膚水、乳液和保潔啫喱。
但是，請勿使用以下護膚品，否則可能會導致皮膚問題並損壞本產品。
<不適合使用的護膚品>

- 油性·磨沙·肥皂
- 刺激性爽膚水
- 溫感效果的爽膚水、按摩啫喱
- 含有脂肪燃燒成分的乳液、按摩啫喱等。

產品規格

電 壓	DC9V 1.0A
耗 電 量	約6.5W
使 用 電 池	鋰離子電池
充 電 時 間	約3小時 ※會因充電環境影響充電時間。
防 水 規 格	IPX7
外 形 尺 寸	主機：約W52×D242×H50(mm)
產 品 重 量	主機：約280g
材 質	主機：ABS樹脂、聚碳酸酯 電極頭：ABS樹脂（鍍鉻）、鋁
生 產 地	日本
配 件	充電器 1個 座台 1個 使用手冊

售後服務

充電池

- 充電電池是消耗品。（不在保修範圍內）
- 即使充電使用時間仍極短，可能是因為電池壽命完結（充電時間原則為300次）。
- 如果需要更換電池，請諮詢您的經銷商。

廢棄

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本產品使用的鋰離子電池。



Memo

關於保養

- 如果在正常使用過程中發生故障，我們保證自購買之日起保養一年（不包括消耗品和配件）。此外，超過保養期可能會另收運費。
- 我們將在保修期後以實際成本修復本產品的故障問題。
- 請仔細閱讀免費維修政策的說明，因為即使在保修期內也可能需要付費維修。

