

● 聯繫

如果您對本機的保養、維修或其他需要說明的事項有任何疑問，請聯繫當地的經銷商。

● 產品規格

額定輸入	AC100-240V
額定輸出	DC9V 1.0A
功率	約 5W (充電時)
電池	鋰蓄電池
充電時間	約3小時 (因充電環境不同，充電時間也會稍有不同。)
外形尺寸	約 W83 x D116 x H97 mm (主機)
重量	約307g
材質	主機：ABS樹脂、PET樹脂、聚碳酸酯 (接觸面：不銹鋼) 充電器底座：ABS樹脂和聚碳酸酯
生產國	日本
配件	主機、充電座和電源插頭

YAMAN
TOKYO JAPAN


保存用

使用手冊

家用美容器

Cavi Spa RF Core PLUS

HRF-51

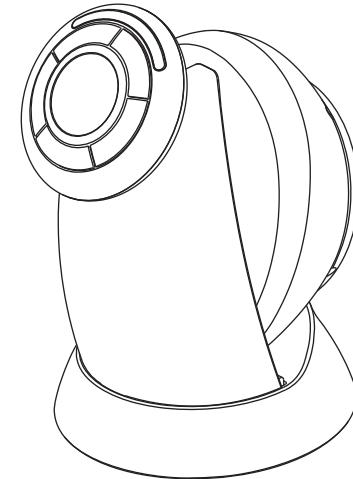

目錄

安全注意事項	1
在國外使用時注意事項	8
產品說明	9
使用前	10
護理方法	16
護理後事項	21
排除故障	23
售後服務	26

衷心感謝閣下選購YA-MAN的產品。

- 為閣下安全著想，使用產品前請先仔細閱讀本使用手冊。
- 請妥善保存本使用手冊並放置於方便可取的地方，以便日後參考使用。
- 如將本產品轉讓他人，請務必同時附上使用手冊。

安全注意事項

- 請仔細閱讀所有指示內容，以確保能安全及正確地使用本產品。
- 請按照使用手冊的指示進行操作。
- 如護理時出現機件故障或有異常情況，請立即停止使用。
- 本手冊中列出的注意事項非常重要。為了您的安全，請謹慎遵守。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 注意事項分為「危險」、「警告」和「注意」三類，以明確說明誤用本機時可能發生的危險程度和傷害。

● 注意事項分類



危險

不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。



警告

不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。



注意

不當使用本產品可能會導致起火、受傷或財產損失*。

*所謂財產損失，是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。

● 標示符號（以下為符號示例）



此符號表示禁止進行的事項。



此符號表示務必遵守的事項。



此符號表示該小心注意的事項。



請勿在以下情況下使用，否則可能會導致醫療儀器故障。



禁止

● 使用醫療儀器的人士，包括

- 起搏器等其他植入體內用輔助儀器；
- 心臟起搏器等植於體內用的儀器，以及
- 心電計等攜帶式裝置



警告

請勿在以下情況下使用：

- 否則可能會導致事故或其他問題。
- 患有或疑似心臟病或相關疾病
- 幼兒或無法正常表達意願的人士
- 無法感知溫度或刺激的人士
- 懷孕初期至剛分娩的準媽媽
- 患有自身免疫性疾病的人士
- 患有子宮內膜異位症或子宮肌瘤等疾病的人士

在以下情況下，使用前請諮詢醫生：

- 患有急性疾病 · 患有傳染病
- 患有惡性腫瘤 · 患有發熱性疾病
- 患有高血壓或血液疾病 · 發燒
- 因嚴重的周邊動脈阻塞（例如糖尿病）而導致有感覺障礙
- 有神經損傷 · 患有皮膚病或異位性皮膚炎
- 定期看診並且正在服藥
- 在使用本機時有過敏、接觸性皮炎、曾有皮膚相關病史或對皮膚有任何疑慮



禁止

對於以下身體部位，或存在以下狀況，切勿使用：

否則可能會導致事故或其他問題：

- 皮膚受損、出現皮疹、炎症或其他異常情況
- 受到酒精的影響
- 口腔內、陰部周圍或粘膜
- 眼球 · 眼瞼（眼週） · 喉嚨 · 凸起的痣 · 痘病毒感染性疣
- 骨關折部位
- 眼部周邊、鼻、耳朵、咀唇、前額等
- 醫學美容治療後出現內出血、腫脹或結痂症狀的部位

*醫學美容治療後2週內避免使用本產品。之後也請諮詢醫生並且只在獲得許可後才能使用本產品（例如注射透明質酸、注射矽膠、注射肉毒桿菌、埋線拉提、雙眼皮手術、HIFU等）

- 通過手術（重建、整形或整容手術）植入金屬的部位



請勿過量或長時間使用（例如用於美容業務上）。

否則可能會引致身體受傷或發熱。



禁止

使用RF射頻護理時，請勿長時間貼於同一部位。護理時請務必在皮膚上持續移動使用。

請勿使用於接觸面無法完全覆蓋的部位。

否則可能會引致身體受傷或發熱。



請勿攜帶至桑拿浴或岩盤浴中使用。

否則可能會導致機身過熱、引致身體受傷或灼傷。



禁止



警告



請勿使用於頭部。
否則可能會引致身體受傷。



**禁止
不當處理**
請勿損壞、加工、用力彎曲、拉扯、扭曲或捆紮電源線。
將電線放置重物下或被夾緊，可能會導致電線破損，並引致觸電或起火。



**出現異味或
異常發熱時
請勿使用**
若出現異味或異常發熱，請停止使用。
否則可能會造成損壞或引致起火。



**限制
使用對象**
請勿讓無法表達其意願的人士，或皮膚感知力弱的人士使用。

否則可能引致意外或身體受傷。



**禁上拉扯
電線移動**
請勿拉扯電線以移動或提起充電座。
否則會導致觸電、短路、起火或電路無法連接。



禁上沾濕
請勿沾濕、水洗或將充電座及電源插頭浸入水中。
否則會導致觸電、短路、起火或無法運作。



請勿在易燃物質(如酒精、稀釋劑、汽油、指甲油卸除劑或定型噴霧等)的附近使用。
否則可能會引致起火、觸電或身體受傷。



**禁止使用
已損壞電線
或插頭**
請勿使用已損壞的電源插頭或已鬆動的插座。
否則會導致觸電、短路或起火。如需維修，請聯絡當地經銷商。



禁止撞擊
請勿將主機放於重物下，使用時避免摔跌或受重力撞擊。
否則可能會造成損壞或故障。



**限制
使用對象**
請勿讓兒童或單獨讓身體殘障人士使用。未成年的使用者請於監護人同意及監管下使用。

否則可能引致身體受傷。



**用途以外
禁止**
請勿作美容外用途使用。
否則可能引致身體受傷或造成故障。



禁止拆解
請勿自行拆解、維修或改裝本機。
否則可能會導致起火、觸電或身體受傷。如需維修，請聯絡當地經銷商。



警告



只可連接100~240伏特交流電使用。
插入電源插頭時必須確認完全插入。
否則會導致起火、觸電或故障。



務必遵守
本機必須使用專用電源插頭。電源插頭必須直接插入牆上電源插座，請勿使電路負荷超載。
否則可能會導致觸電、短路、起火或故障。



拔除插頭
拔除電源插頭時，請手握插頭前端拔出(請勿接觸金屬的部分)。請勿在手沾濕狀態下拔除插頭。

否則濕導致觸電、短路或起火。



務必遵守
請確認充電端子沒有沾濕後才充電。
否則可能會導致觸電、短路或起火。



拔除插頭
清潔及不使用時，請務必關掉電源及拔除插頭。請勿在手沾濕狀態下拔除或接駁插頭。
否則可能會導致觸電、短路或起火。



生火注意
請勿放置於靠近火源、熾熱陽光下、浴室等高溫潮濕地方，或易燃汽油等易燃物品附近。請勿投置火中、或置於靠近火源地方。請勿在高溫地方或主機高溫狀態下充電。請勿置於熱能電器附近。

本產品內置充電式電池。錯誤使用可能會導致導致發熱、起火、產品爆炸或故障。



務必遵守
萬一發生異常時，請立即切斷電源。
若出現運作異常、冒煙、發出怪聲或有異味時，切勿繼續使用。



務必遵守
當感覺到地震或聽到雷聲時，請停止使用本機並將其關閉。當正在充電時請拔除電源插頭。



警告



請勿在皮膚較薄或骨骼上方的部位長時間使用本機。
否則可能會導致皮膚問題或身體疾病。



請勿將電極面放置在心臟位置上，例如胸部或背部。



請勿讓兒童遊玩本機。
否則可能會導致意外或受傷。



務必遵守

如果本機跌落或損壞，請立即關閉電源並拔掉電源插頭，要求維修及檢查。
否則可能會導致起火或觸電。



務必遵守

只可使用本機附設的電源裝置配件為電池充電。



注意



請勿將本機放置在不穩定的位置。請不要摔跌或撞擊。
否則可能會導致故障。如果主機掉落在腳或其他暴露的身體部位上，也可能造成傷害。



請勿在通電狀態下讓本機與其他美容儀器或電子產品接觸。請勿與其他電子產品（電熱毯／床單／加熱桌等）同時使用。

否則可能會導致損傷或故障。



請勿在衣服上使用。



務必遵守
首次使用本機前，請務必對皮膚進行測試。
否則可能會導致意外或受傷。



務必遵守
請勿放置於浴室或水中。
否則可能會導致觸電、短路、起火或故障。



請勿在駕駛時使用。
否則可能會導致事故或受傷。



務必遵守
使用後請務必擦去主機上的水分。此外，請勿將本機放在浴室等炎熱或潮濕的地方。
沾濕狀態下閒置可能會導致損壞。



注意



請勿與護膚品（不適合的除外）和水以外的物質一起使用。
可能會導致皮膚出現問題或造成機件故障。

（不適合用護膚品種類）

- 油性 · 磨沙類 · 刺激性爽膚水 · 肥皂
- 具溫熱效果護膚品或按摩啫喱
- 具燃燒脂肪成分的護膚品或按摩啫喱



請勿讓接觸面接觸金屬或其他物件。
否則可能導致故障、受傷、過熱或起火。



禁止

請勿用酒精、稀釋劑、指甲除光液其他類似的物質擦拭。
否則可能對機身表面造成損害。



使用前請確認接觸面上是否有破裂、變形或破損。如出現破損或故障情況，請停止使用。
否則可能會導致皮膚問題或機件故障。



禁止

請勿用作護理寵物。
否則可能導致受傷。

在國外使用時注意事項



注意

以下事項請務必遵守。



務必遵守

否則可能引起意外、身體受傷或機件故障。

- 避免使用在同一位置超過規定的時間。(請參照P.15)
- 使用時請留意皮膚狀態。
- 請避免日光浴後、去角質護理後或與面膜一併使用。
- 使用後請將電源關掉。



務必遵守

確保接觸面和皮膚表面之間有足夠的護膚品或水分，並在護理期間按需要添加及補濕。

護膚品及水分不足時，RF射頻、EMS及CAVI(超聲波)的傳送效果可能會減低，或導致皮膚出現問題。



務必遵守

使用 RF 和 EMS 模式時，應該先設置強度1(最低)開始護理，讓皮膚適應刺激。

以過高強度開始護理可能引起意外或導致身體受傷。



務必遵守

使用期間如發現身體不適或皮膚異常，請停止使用。

使用本機前請仔細檢查以確保沒有皮膚異常。如果護理不適合皮膚，請立即停止使用。



務必遵守

使用本機前請先除下所有飾物(項鍊、耳環等)。

否則可能會導致意外或損傷。



務必遵守

使用於臉上前，請務必先卸妝。

如果在上妝狀態使用本機，粉底可能會導致皮膚變黑。



務必遵守

請勿將本機用於使用手冊中規定用途以外的任何目的。

否則可能會導致身體受傷或故障。



警告



務必遵守

請務必使用100~240伏特交流電以避免發生火災或觸電。

否則可能會導致起火、觸電或故障。



使用前請務必確認插頭形狀及電壓後才使用。

否則可能會導致機身發熱、起火或故障。


● 插頭形狀、電壓可能會因地區及住宿地而有所不同。使用前請先進行確認。

● 關於電源插頭及插頭的轉換，請向旅行社或電器銷售店查詢。

產品說明


● 主機

(操作介面)

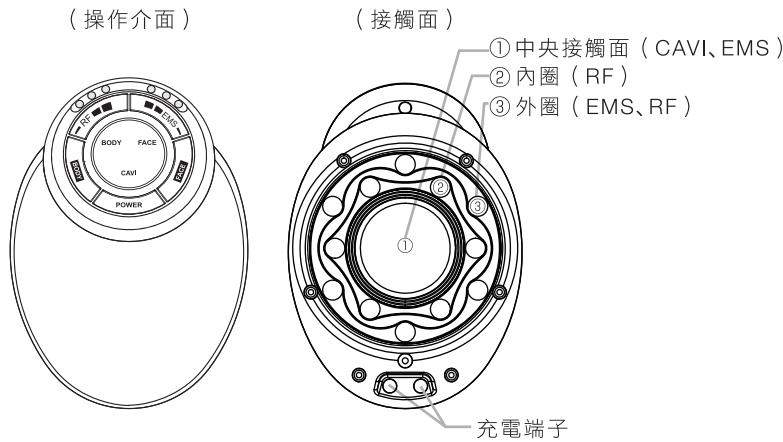

● 充電座

主機裝置充電座示意圖

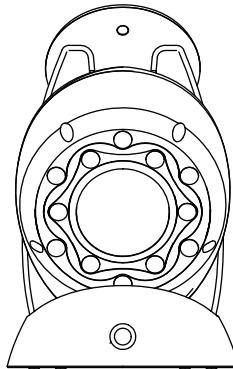

● 配件


• 電源插頭 1個

* 電源插頭為本產品專用。

* 主機及配件的設計和規格以提升品質為前提，恕不另行通知。

使用前

操作板及操作方法

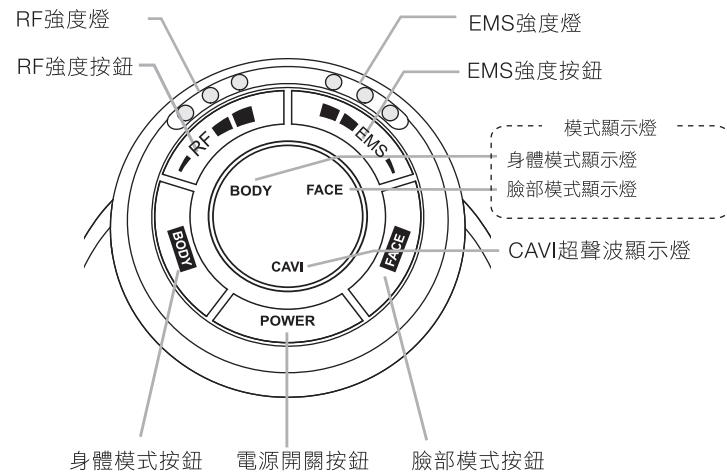

● 各種按鈕


按鈕	功能	顯示燈
	電源開啟（長按）	身體模式/臉部模式顯示燈呈藍燈閃爍
	電源關閉（長按）	全部顯示燈熄滅
	選擇身體模式或臉部模式	身體模式/CAVI模式顯示燈呈藍燈 臉部模式顯示燈呈藍燈 (CAVI模式顯示燈熄滅)
	選擇RF強度	詳細請參考P.10「強度按鈕」
	選擇EMS強度	

● 強度按鈕

< RF強度 >

每當按下RF強度按鈕時，會按以下次序變更強度，
RF強度顯示燈會點亮顯示強度。

***尚未習慣護理時，請務必使用強度1開始。**

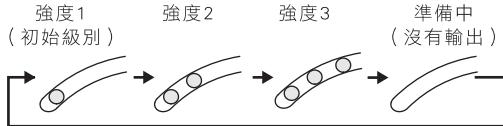


RF強度增加時，可感覺溫度相應提高。

建議選擇讓皮膚感到溫熱的強度。

< EMS強度 >

每當按下EMS強度按鈕時，會按以下次序變更強度，
EMS強度顯示燈會點亮或閃爍顯示強度。

***尚未習慣護理時，請務必使用強度1開始。**

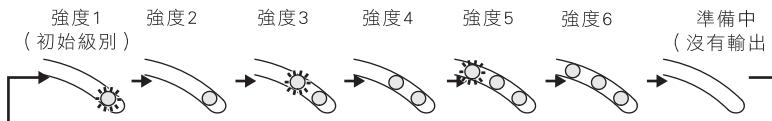

表示顯示燈正在閃爍。

EMS強度增加時，可感覺刺激感相應提高。

建議設定為個人感覺舒適的強度。

* 請勿選用感到不適或刺痛的強度。

* 於水中及離開水面時使用，感覺可能會出現差異。

< CAVI(超聲波)強度 >

身體模式時會輸出超聲波，強度無法調節。

臉部模式時不會輸出超聲波。

超聲波輸出時CAVI顯示燈會亮起。

特點

●自動關閉電源(Autooff)

- 電源開啟後10分鐘會發出「嗶嗶一」的提示音後自動關閉。
- 為防止過度連續使用、過量進行護理及忘記關掉電源。

●防水功能

本產品擁有JIS保護等級IPX7的防水性能，因此浸浴或淋浴時均可使用。
*IPX7指以室溫環境下的自來水、及將產品放內水深1m的水中，30分鐘後再取出時，產品內部沒有滲入水分的性能。

***充電座並非防水設計。**

充電

本產品為充電式電器，使用前請先完全充電。

- 購買後首次使用時，請務必完全充電。
- 首次使用時或長時間閒置後，即使顯示為電池充滿，也可能無法使用很長的時間，請使用前重新充電。
- 如於使用時電池剩餘電量變少，模式顯示燈(及身體模式時的CAVI顯示燈)會呈藍燈閃爍。電源會關閉。

● 充電時間


充電時間	操作時間
3小時	30分鐘

- * 充電環境請保持於約室溫25°C。
- * 操作時間為完全充電後使用時間。
- * 操作時間會因使用模式、使用強度及使用環境而有異。
- * 根據電池剩餘量及環境，充電時間可能會有縮短差異。



● 充電方法

- 1 將充電線插頭插入充電座的插孔中，再將另一端電源插頭連接到牆上插座。**
- 2 請將機身上的水滴完全擦乾，並安放於充電座上，確保機身與充電座上接上。**
 - * 請確認CAVI模式顯示燈，藍燈閃爍表示充電開始。
 - * 充電完畢後，顯示燈會亮起藍燈1分鐘然後熄滅。
 - * 充電端子沾濕情況下充電，可能會造成故障。
- 3 充電完畢後，將充電線插頭從插座中拔除，並把電源插頭從牆上插座拔出。**

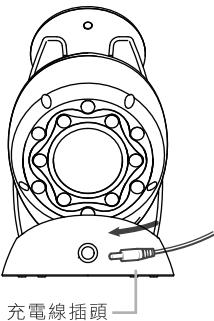

● 如主機無法充電

如主機置於充電座上仍無法充電，請嘗試以下方法。

- 請確切地將充電線插頭完全插入充電座的插孔中。**

- 主機與充電座的充電端子可能未完全接合。**

請將主機從充電座取出並重新放置。

請將主機左右搖晃，確保充電端子已接合。

主機的模式顯示燈(CAVI顯示燈)應呈閃爍藍燈。



*主機連接充電座後，模式顯示燈(CAVI顯示燈)約需2秒方可呈藍燈閃爍。

*當放於充電座後，強度顯示燈亮起藍燈約1分鐘後熄滅，表示充電已完成。

請將殘留於主機及充電端子上的水滴、保濕啫喱及污垢擦拭去除後才進行充電。

皮膚測試

*首次使用本產品或所用護膚品前請務必進行皮膚測試。

- 1 清潔皮膚。**

用肥皂清潔手腕內側並用毛巾等抹乾。

- 2 手腕內側以水沾濕或塗上護膚品(保濕啫喱或乳液)，使用身體模式護理約3分鐘。**

· 請使用強度1進行RF及EMS測試。

· 請於測試區域的皮膚上打圈移動使用。

· 請勿用水沾濕或磨擦已經進行過皮膚測試的部位。

24小時內沒有出現皮膚異常情況(如紅腫或感覺刺激等)則可繼續使用。



- 為避免出現皮膚問題，請務必先進行測試。
- 如測試部位出現紅疹、紅腫、發癢、刺激等異常，請立即中止測試並用水沖洗該部位。
- 使用前請小心確保沒有出現皮膚異常，如感覺皮膚有異常情況請停止使用。

注意



注意

護理方法

模式

本產品設有身體護理模式及臉部護理模式。

模式	功能	使用頻密度(建議)
身體模式	CAVI(超聲波) RF(射頻) EMS(刺激肌肉)	每個部位約10分鐘，一週2~3次。 全身每次30分鐘內 (手臂、大腿、小腿等左右側共10分鐘) 再次對同一部位進行EMS護理時， 兩次護理時間至少隔24小時 *以上僅為建議頻密度。可以每日按個人皮膚 狀態使用。
臉部模式	RF(射頻) EMS(刺激肌肉)	

● 請勿連續使用在同一個部位上，而是在皮膚上移動使用。

* 每個部位指上手臂、下手臂、大腿、小腿、腹部前側、腹部後側、臀部及臉部
(只限臉部模式)

* 過度使用、集中使用相同部位、強度過高等過量進行可能造成皮膚受損。

* 對同一部位進行EMS護理時，兩次護理時間至少隔24小時

● 皮膚狀態與護膚品

請務必先用水或護膚啫喱或乳液沾濕護理部位的皮膚，否則可能較難感覺效果，
或造成皮膚問題。

〈不適用的護膚乳液〉

- 油性・磨砂類・刺激性爽膚水・肥皂
- 具溫熱效果的護膚品或按摩啫喱
- 具燃燒脂肪成分護膚品或按摩啫喱等

● 禁止使用部位

以下的部位不能使用：

口腔內、陰部周圍、粘膜、喉核、曾接受整形手術之部位、植牙、割傷部位、心臟位置或胃部上方、臉部(如使用身體模式時)、耳、鼻、唇、眼部周圍、手指或手腕腳踝等接觸面無法完全覆蓋的部位、膝蓋、鎖骨、前額、頭部、眼皮等皮膚較薄或肘部等骨質區域、曾接受醫學美容的位置。

● 使用方法

為避免對皮膚造成不良影響，請務必將接觸面平貼皮膚表面，使接觸面整個表面與皮膚接觸，如下所示。



身體模式操作方法

* 請勿使用在臉部。

1 將硬幣大小的護膚品塗抹於接觸面上，然後放於所使用部位上讓其適應。
或用水充分沾濕。

- 如浸浴時使用，請浸於浴缸中或以水充分沾濕皮膚後才使用。

2 請長按電源按鈕3秒以上以開啟電源。

- 身體及臉部模式顯示燈會短鳴一聲後亮起閃爍。

3 請按身體護理模式按鈕。

- 身體模式顯示燈及CAVI超聲波顯示燈會呈藍燈亮起，RF及EMS強度燈為強度1。

4 按RF(射頻加熱)或EMS(刺激肌肉)強度按鈕選擇強度級別。

- 適應護理強度前請務必使用強度1開始。
- 如使用EMS感到刺痛，請勿再增加強度。

5 將接觸面在皮膚上移動使用。(建議：每秒約2~5cm)

- 開始使用時請緩慢地移動(每秒約2cm)，接近完成時可以加快(約5cm每秒)移動。
- 使用時接觸面完全貼於皮膚上。

* 請參照P.18建議用於身體各部位的使用方法及P.15建議的皮膚貼著方法。

6 護理程序完結後，請長按電源按鈕3秒以上關閉電源。

- 選擇模式10分鐘後或開機10分鐘後未操作，電源將自動關閉並發出兩聲短促的噓聲。



注意

- 使用時請務必將接觸面完全貼於皮膚上。
- 請絕對不要使用於禁止部位(請參照P.15)。
- 使用時請勿持續停留於同一位置上，請務必於皮膚上移動使用。
- 只能使用護膚品(P.5中不適用物質除外)及水進行護理，否則可能導致皮膚出現問題或機件故障。


●○ 浸浴時使用注意事項 ○●

- ・請不要在皮膚上過度按壓接觸面。
過度按壓會較難在皮膚上滑動。
- ・確保接觸面完全貼於皮膚上。
否則可能導致皮膚出現問題。(請參照P.15)
- ・請勿長時間放置於水中。
- ・可使用浸浴或淋浴的水，而無需塗上保濕啫喱。
- ・於水中使用時接觸面可能會較難移動。
- ・浸浴或淋浴時使用，對RF及EMS的感覺可能會較弱。
- ・每次使用後請清潔主機 (請參照P.21) 。

推薦使用的身體部位

按以下推薦的方法，在每個身體位置移動接觸面數次，以護理各個部位。

圖例說明：

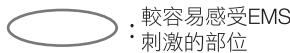

← : 移動的方向

●上臂(左右手臂各5分鐘)

①手掌向上，手腕完全伸直。


・讓需要護理的上臂部位朝下方。

②由手肘向腋下方向移動。

・上臂內側及外側也同樣進行。


③另一邊亦同樣方法進行。

・貼於圓圈所示位置護理。

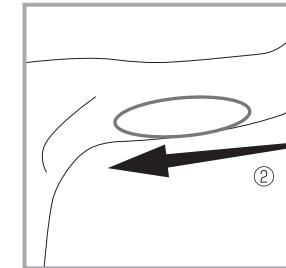


●大腿(左右腿各5分鐘)

①從膝蓋向上至大腿內側 (腹股溝) 移動。

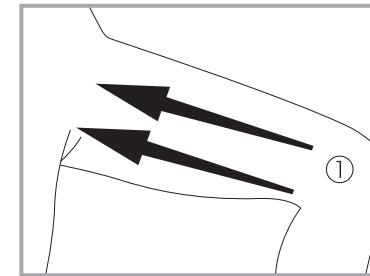

②從大腿後方膝關節位置向上至臀部移動。

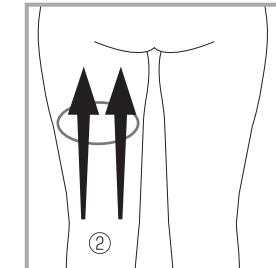


③另一邊亦同樣進行。

・貼於圓圈所示位置護理。

● 腹部(腰部) (步驟① 5分鐘、步驟②+③ 5分鐘)


①由腹部外側向內側以鋸齒形方式移動。

- 由側腹以鋸齒形方式逐步移向肚臍方向。

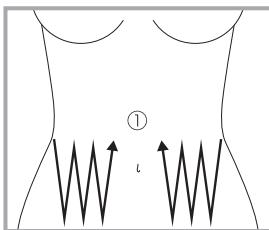

②由側腹(腰側)向下移動到腿的腹股溝。


③在肚臍的範圍打圈移動。

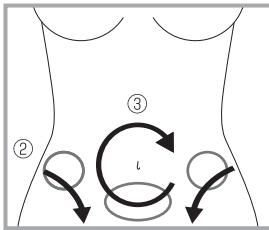

● 臀部 (步驟① 5分鐘、步驟②+③ 5分鐘)


①由臀部中央向外側以鋸齒形方式移動。

- 由中央以鋸齒形方式逐步移向臀部外側方向。

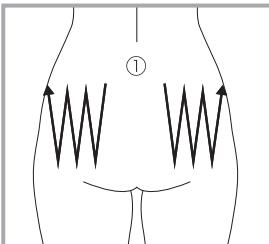

②由臀部內部向外側移動。

③從頂部中心向下移動到臀部的底部。

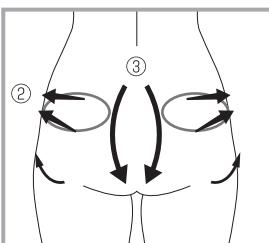

臉部模式操作方法

* 只適用於臉部作護理臉部之用。

進行前請先清潔面部並去除化妝及污垢。

1 將護膚品或水塗抹於臉上。

2 長按電源按鈕3秒以上以啟動電源。

- 身體模式和臉部模式顯示燈將在短暫的嘩聲後閃爍。

3 按下臉部模式按鈕。

- 臉部模式顯示燈亮藍燈，RF(射頻)和EMS強度設置為強度1。

4 請按照個人需要按RF(射頻·溫熱)強度按鈕或EMS(刺激肌肉)強度按鈕調節強度。

* 適應護理強度前請務必使用強度1開始。

* 如使用EMS感到刺痛，請勿再增加強度。

* CAVI顯示燈熄滅。

5 將接觸面如箭咀所示在皮膚上移動使用。臉部整體護理維持10分鐘之內完成。(建議: 每秒約2~5cm)

* 難以移動時，請馬上補充護膚品或水分。

* 請勿將接觸面停滯於固定位置上。

持續貼於同一位置上可能會造成灼傷。

* 請勿過度按壓。

* 使用時請將接觸面完全貼於皮膚上。



不要使用在這些區域

6 護理完成後，請長按電源按鈕3秒以上以關掉電源。

* 選擇模式10分鐘後或開機10分鐘後未操作，電源將自動關閉並發出兩聲短促的嘩聲。



注意

- 臉部整體每次使用請勿超過10分鐘。
- 請將接觸面完全貼於皮膚上。
- 請勿使用於眼瞼、眼部周圍、喉核、鼻、耳、唇及額頭上。
- 只能使用護膚品(P.5中不適用物質除外)及水進行護理，否則可能導致皮膚出現問題或機件故障。
- 請勿在臉上使用身體模式，否則可能會導致皮膚問題。
- 如果在臉上使用本機，EMS功能可能會刺激牙齒的神經。不要用力將按壓在皮膚上，而是移動位置。如果有補牙，請特別小心。
- 在頸部兩側使用本機時要小心，因為可能會感覺到更強的EMS刺激。

護理方法

清潔方法

每次使用後請務必清潔接觸面及充電端子。

為避免造成機件故障或運作出現問題，請定期進行清潔。

進行清潔時請務必關掉電源，並將充電插頭從充電座取出，電源插頭從插座中拔出。

● 清潔主機

1 請擦拭去除殘留於接觸面及充電端子上的水滴、潤膚霜或保濕啫喱等液體。

2 請用水沾濕毛巾並捲起，將表面的所有污垢及殘留物擦拭去除。

- 污漬較嚴重的情況，請用沾上已稀釋的中性清潔劑海綿或抹布擦拭去除。

- 請勿使用鹼性清潔劑、酒精、稀釋劑、汽油、指甲油除光液等清潔。

3 請將殘留於主機及充電端子上的水滴及污垢擦拭去除。

- 用乾布仔細擦拭，確保充電端子或接觸面上沒有水分。
- 用棉棒清除主機充電端子中的水分。

4 讓主機在通風良好的地方風乾。

未清除灰塵或沾濕狀態下閒置主機，可能會導致故障或產生異味。

● 清潔充電座

1 請用水沾濕毛巾並捲起，將表面的污垢及殘留物擦擦拭去除。

2 請將殘留於充電端子上的水滴及污垢也擦拭去除。

● 入浴使用後的清潔

1 請擦拭去除殘留於機身上的水滴。

如接觸面旁的孔中殘留水滴，請輕敲或搖動機身去除水滴。

* 請勿將本機置於陽光下直射。

2 將主機放於通風處風乾。

* 請勿將本機置於陽光下直射。

* 請勿在機身(充電端子)沾濕狀態下充電。

- 可以用水沖洗主機。
- 沖洗後用乾布或棉棒徹底清除水分。請勿沾濕狀態下閒置本機。
- * 不要使用熱水。 * 請勿將本機留在水中。
- * 充電插頭不防水。

存放方法

- 長時間閒置本機時，將主機及充電端子清潔後再收存起來。
- 不使用本機時，請關掉電源並將電源插頭拔除，妥善收存在清潔及乾爽地方。
- 請勿存放於焗爐或暖爐附近、熾熱陽光下、浴室等潮濕地方或不穩固的地方。
- 請把本機放置於兒童無法觸及的地方。

保養及檢查

- 經長時間閒置後，請於再使用前先檢查其操作是否正常及安全。
- 本機操作發生異常時，向產品銷售商查詢前可先參照「排除故障」(P.23~P.25) 進行檢查。
- 如有故障或損壞或需要服務，請向產品銷售商查詢。


排除故障

檢查項目

如於使用本產品過程中有異常或出現下列狀況時，請按下表確認成因及解決方法。

狀況	可能的成因	解決方法
無法開機	→ 沒有長按電源按鈕開啟	→ 請長按下電源電源按鈕 3秒以上啟動電源
	→ 沒有充電	→ 請用充電座充電(P.12-13)
充電後仍只能操作數分鐘	→ 電力不足	→ 請充電約3小時
	→ 自動關機(P.12)	
無法充電或充電顯示燈沒有閃爍	→ 主機沒有正確地放置充電座	→ 請確保充電端子已連接 (P.13-14)
	→ 充電插頭沒有插入充電座	→ 請確切地插入充電座
	→ 已經充電完成	→ 充電完成，可以使用 (藍燈亮起1分鐘後熄滅)
感覺不到RF射頻溫熱	→ 所使用部位沒有沾濕 皮膚太過乾燥	→ 請用充足護膚品或水沾濕 後使用(對RF的感覺可能會 因護膚品種類有差異)
感覺CAVI過熱	→ 接觸面通過超聲波發熱	→ 如使用時太熱，請待10分 鐘後重新啟動電源

狀況	可能的成因	解決方法
感覺不到RF射頻溫熱	→ 強度過低 / 正在待機模式	→ 請按RF強度按鈕增加強度
	→ 移動速度太快	建議移動速度： 每秒約2~5cm
	→ 接觸面沒有完全接觸皮膚	→ 請將接觸面完全貼於皮膚
	→ 正在水中使用	於水中使用時對RF的感覺 可能會較弱
RF射頻太熱	→ 持續貼於同一部位上 / 移動速度太慢	建議移動速度： 每秒約2~5cm
	→ 接觸面沒有完全緊貼皮膚	→ 請將接觸面完全貼於皮膚
	→ 強度太高	→ 用RF強度按鈕調低強度
感覺不到CAVI超聲波	→ 一般不會感覺到CAVI 超聲波	註：臉部模式不設超聲波 輸出
	→ CAVI*超聲波強度不能 調節	
	→ 使用CAVI時發出聲音	→ CAVI*超聲波震動時的 聲音屬正常現象
感覺不到EMS護理	→ 護理位置沒有沾濕	→ 用護膚品或水沾濕皮膚
	→ 皮膚太乾燥	→
	→ 強度過低 / 正在待機模式	→ 用EMS強度按鈕提高強度
	→ 貼於較難感覺到的部位上	→ 移動到不同的部位 (P.18-20)
	→ 感覺因人而異	

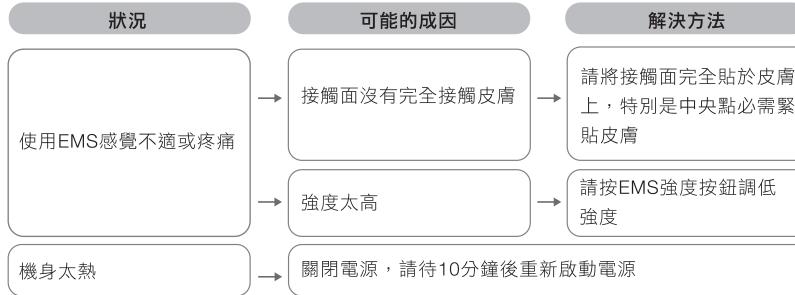

常見問題

Q	A
是否可於入浴時使用？	是，本機具有防水功能。（合乎IPX7規格）但請勿將機體長時間放置水中。 如無法暢順移動時，請輕輕貼於皮膚上移動。
是否有建議使用方法？	建議入浴時或入浴後，溫熱身體後使用。 以慢滑的動作在皮膚上推行和移動本機。 * 請避免在溫泉或含有浴鹽的浴缸中使用。
桑拿浴或岩盤浴時是否可使用？	因在高溫情況下可能有燙傷皮膚的危險，故請勿在進行桑拿浴或岩盤浴時使用。
是否可於入浴以外時間使用？	是，於一般室內使用時，皮膚乾燥會較難感受超聲波、RF及EMS，請配合保濕霜或水一併使用。
敏感皮膚是否都可以使用？	開始時請參照「皮膚測試」(P.14)確認皮膚的狀況，如皮膚沒有出現異常反應，便可放心使用。 如發現使用後皮膚出現異常狀況，請立即停用。 如無法自行判斷時，請向專業醫生查詢。
應該使用什麼類型的護膚品？	可使用現有的潤膚霜、精華液或保濕啫喱。但下列的爽膚水可能會導致皮膚出現問題，或造成機件故障，故請勿使用。 (使用時不適合的護膚品種類) · 油、磨砂膏、肥皂、刺激性爽膚水 · 具溫熱效果護膚品或按摩啫喱 · 具燃燒脂肪成分的護膚品或按摩啫喱等
機身太熱。	請關閉電源，待10分鐘後重新啟動電源。



● 充電電池

- 充電池屬耗用品。
- 如完全充電後操作時間仍非常短，表示電池壽命可能已完結。
- 電池一般可充電約300次。
- 如要更換電池，請向當地經銷商諮詢。

● 棄置

本產品採用鋰電池。
請遵照當地政府規定棄置產品。
本產品只可由技術人員更換電池。

● 取出內置電池


本產品中使用的鋰離子電池是有用的可回收資源。

- 電池在丟棄前必須從主機中取出。
- 取出電池前務必關閉電源。
- 請使用螺絲刀拆除電池。小心不要弄傷自己。
- 取出電池時，注意不要在硬物等上損壞電池。
- *否則可能會導致發熱或火災。
- 請遵守當地政府規定，妥善處置或回收本產品。

<操作步驟> 請參閱下圖(1)至(3)拆除電池。


(1) 拆除4個橡膠塞和6粒螺絲，
然後拆除底蓋。

(工具: 螺絲刀、尖頭工具)

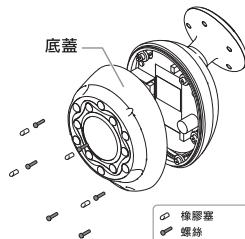


(2) 拔下電線連接頭，拆除4
粒螺絲，然後卸下隔板。

(工具: 螺絲刀)

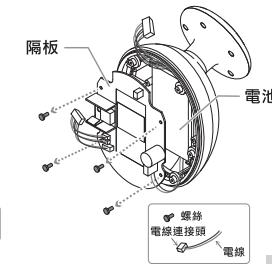

(3) 拆去2粒螺絲和固定條，
然後取出電池。

(工具: 螺絲刀)

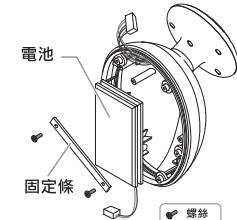

(!) 不要剪斷電線！



此圖旨在用於棄置產品，而不是作修理之用。
注意: 自行拆卸/維修設備可能會導致故障。