

美容家電のパイオニア




保管用

使用手冊

家庭用美容器

Circle Peeling Pro

HDS-30N

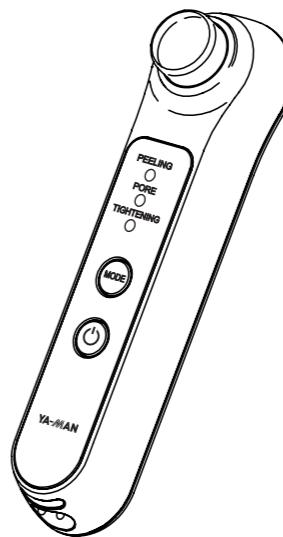

目錄

安全注意事項	1
產品說明	6
使用前	7
使用方法	9
護理後事項	13
排除故障	15
售後服務	17
●產品規格	18

衷心感謝閣下選購雅萌（YA-MAN）的產品。

- 為閣下安全著想，使用產品前請先仔細閱讀本使用手冊。
- 請妥善保存本使用手冊，以便日後參考。
- 如將本產品轉讓他人，請必須附上本使用手冊。

HDS30-2-001HK

- ・請仔細閱讀所有指示內容，以確保能安全及正確地使用本產品。
 ・請按照操作手冊的指示操作。
 ・如發生異常情況時，請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
 ・於故障狀態下使用，會對身體造成不良影響及構成危險，請立即停止使用。
 ・本手冊所列注意事項對閣下的安全非常重要，請務必遵守。
 ・注意事項分為“危險”、“警告”及“注意”三類，及清楚列明危險程度，以及錯誤操作能造成的傷害。

●關於三類注意事項

 危險	不正當使用本產品會引致嚴重傷亡事故。
 警告	不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。
 注意	不正當使用本產品可能令個人及他人受傷，並引致財物損失*。

*財物損失所示範圍包括對房屋、財產及寵物等損害。

●關於三類標示符號

 此符號表示禁止進行的事項。
 此符號表示務必遵守的事項。
 此符號表示該小心注意的事項。

!**危險**

- 切勿在以下情況下使用，否則可能會導致醫療儀器發生故障：
 ◆使用醫療儀器的人士
 · 氧合器等植於體內使用輔助儀器。
 · 心臟起搏器等植於體內使用的儀器。
 · 心電計等攜帶式裝置。

!**警告**

請勿於以下情況下使用，

- 否則可能對皮膚或身體造成損傷。
 · 正接受治療之人士 · 成長或青春期 · 急性疾患
 · 結核性疾病 · 發燒 · 高血壓 · 傳染病
 · 癌症 · 血液疾病 · 內臟疾病 · 皮膚病 · 過敏性體質
 · 過敏性皮炎 · 皮膚敏感 · 過度疲勞
 · 皮膚敏感度不足 · 身體抱恙 · 受酒精影響之人士
 · 懷孕期間、經期期間或授乳期間 · 正服用安眠藥之人士
 · 皮膚上有發癢或病理性色素 · 正接受牙科治療之人士
 · 因曬傷引致皮膚發炎或紅腫之人士
 · 因長期使用類固醇荷爾蒙藥物引致毛細血管擴張或肝功能紊亂之人士

對於以下身體部位，或存在以下狀況，切勿使用，

- 否則可能導致事故或故障發生。
 · 割傷 · 曾接受整形手術之部位 · 口腔內、陰部周圍或粘膜
 · 皮膚潰爛化膿、發癢或發紅的部位
 · 凸起的黑痣 · 過濾性疣 · 喉核 · 眼球
 · 眼瞼、眼窩

若不能確定自己是否有上述狀況，請事先徵求醫生意見。



必須遵守

只可連接100~240伏特交流電使用。請確認AC電源插頭完全插入插座中。

否則可能導致火災、觸電、故障。



禁止

請勿置於火中、加熱裝置或高溫地方充電、使用或放置，

因本產品使用內置充電式電池，可能會導致過熱、起火、破裂而造成損壞。



用途以外禁止

請勿作使用手冊以外的其他用途使用，

否則可能導致身體受傷，或機件故障。



請勿拆解、維修或改造本產品。

否則可能導致火災、觸電、身體受傷。
 請聯絡經銷商進行維修。

<p>! 警告</p> <p>安全注意事項</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>禁止不當處理 請勿損傷、破壞或加工電源線，也不可強行彎曲、拉伸、扭轉、捆紮。 此外，如果放置重物或雜物，電源線會破損，導致火災或漏電。</td><td>禁止使用已損傷的電線插頭 當AC電源插頭損傷，或插座的插入鬆脫時不可使用。 否則可能導致觸電、短路或起火。 請聯絡當地經銷商維修。</td></tr> <tr> <td>拔下插頭 從插座上拔下AC電源插頭時，請必須拿著前端拔出。 否則可能導致觸電、短路或起火。</td><td>拔下AC電源插頭 不使用時，請必須關閉電源，從插座上拔下AC電源插頭。此外，不可用潮濕的手插拔電源線。 否則可能導致觸電、短路或起火。</td></tr> <tr> <td>拔下AC電源插頭 保養本產品時，請必須關閉電源，從插座上拔下AC電源插頭。 否則可能導致觸電、短路或起火。</td><td>萬一發生異常時 請關閉主機的電源，馬上拔下AC電源插頭。 請勿在冒煙、發出異響或異味等異常的狀態下使用。</td></tr> <tr> <td>注意起火 請勿放置靠近火源、熾熱陽光下、灰塵瀰漫、浴室等高溫潮濕地方使用或放置。 請勿置於熱能電器附近。 否則可能會導致過熱、起火、破裂而造成損壞。</td><td>禁止使用延長插座 本產品必須使用專用的AC電源插頭。並且，AC電源插頭要直接插入牆壁的插座上，請勿使用延長插座。 否則可能導致觸電、短路或起火。</td></tr> <tr> <td>禁止 請勿掉落水中、或浸入水中。 AC電源插頭請勿在浴室或濕度高的場所使用或保管。 否則可能導致觸電、短路或起火。</td><td>禁止發熱時使用 發出異味或異常發熱時要停止使用。 否則可能導致破損或起火。</td></tr> </tbody> </table>	禁止不當處理 請勿損傷、破壞或加工電源線，也不可強行彎曲、拉伸、扭轉、捆紮。 此外，如果放置重物或雜物，電源線會破損，導致火災或漏電。	禁止使用已損傷的電線插頭 當AC電源插頭損傷，或插座的插入鬆脫時不可使用。 否則可能導致觸電、短路或起火。 請聯絡當地經銷商維修。	拔下插頭 從插座上拔下AC電源插頭時，請必須拿著前端拔出。 否則可能導致觸電、短路或起火。	拔下AC電源插頭 不使用時，請必須關閉電源，從插座上拔下AC電源插頭。此外，不可用潮濕的手插拔電源線。 否則可能導致觸電、短路或起火。	拔下AC電源插頭 保養本產品時，請必須關閉電源，從插座上拔下AC電源插頭。 否則可能導致觸電、短路或起火。	萬一發生異常時 請關閉主機的電源，馬上拔下AC電源插頭。 請勿在冒煙、發出異響或異味等異常的狀態下使用。	注意起火 請勿放置靠近火源、熾熱陽光下、灰塵瀰漫、浴室等高溫潮濕地方使用或放置。 請勿置於熱能電器附近。 否則可能會導致過熱、起火、破裂而造成損壞。	禁止使用延長插座 本產品必須使用專用的AC電源插頭。並且，AC電源插頭要直接插入牆壁的插座上，請勿使用延長插座。 否則可能導致觸電、短路或起火。	禁止 請勿掉落水中、或浸入水中。 AC電源插頭請勿在浴室或濕度高的場所使用或保管。 否則可能導致觸電、短路或起火。	禁止發熱時使用 發出異味或異常發熱時要停止使用。 否則可能導致破損或起火。	<p>! 警告</p> <p>安全注意事項</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>使用者的限制 要放置在兒童無法拿到的地方，不讓其使用。 否則可能導致事故或人體受傷。</td><td>禁止掉落 請勿放置在不穩定的地方。並且，請勿摔落或撞擊主機。 否則可能導致主機發生故障。 此外，如果落到腳上，可能會導致人體受傷。</td></tr> <tr> <td>使用者的限制 請勿讓無法表達自己意思的人士使用。此外，請勿讓殘障人士使用。 否則可能導致事故或人體受傷。</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>! 注意</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>必須遵守 使用中感覺疲勞或肌膚顯現出異常時，請馬上停止使用。 如果次日後異常仍持續存在，請向醫生查詢。</td><td>必須遵守 請勿將本機固定在一個位置，要不斷移動進行護理。 如果固定在同部位地進行護理，可能會損傷肌膚。</td></tr> <tr> <td>必須遵守 要遵守使用時間使用。 使用過度可能會損傷肌膚。</td><td>必須遵守 請勿用力摩擦肌膚。 否則可能損傷肌膚。</td></tr> <tr> <td>必須遵守 當肌膚表面有灼熱的痛感時，要移動位置使用，或補充啫喱或水。 如果繼續使用，可能會損傷肌膚。</td><td>必須遵守 為了讓主機頭部和肌膚之間總是保持有啫喱或水，要中途進行補充。 如果繼續使用，可能會損傷肌膚。</td></tr> </tbody> </table>	使用者的限制 要放置在兒童無法拿到的地方，不讓其使用。 否則可能導致事故或人體受傷。	禁止掉落 請勿放置在不穩定的地方。並且，請勿摔落或撞擊主機。 否則可能導致主機發生故障。 此外，如果落到腳上，可能會導致人體受傷。	使用者的限制 請勿讓無法表達自己意思的人士使用。此外，請勿讓殘障人士使用。 否則可能導致事故或人體受傷。		必須遵守 使用中感覺疲勞或肌膚顯現出異常時，請馬上停止使用。 如果次日後異常仍持續存在，請向醫生查詢。	必須遵守 請勿將本機固定在一個位置，要不斷移動進行護理。 如果固定在同部位地進行護理，可能會損傷肌膚。	必須遵守 要遵守使用時間使用。 使用過度可能會損傷肌膚。	必須遵守 請勿用力摩擦肌膚。 否則可能損傷肌膚。	必須遵守 當肌膚表面有灼熱的痛感時，要移動位置使用，或補充啫喱或水。 如果繼續使用，可能會損傷肌膚。	必須遵守 為了讓主機頭部和肌膚之間總是保持有啫喱或水，要中途進行補充。 如果繼續使用，可能會損傷肌膚。
禁止不當處理 請勿損傷、破壞或加工電源線，也不可強行彎曲、拉伸、扭轉、捆紮。 此外，如果放置重物或雜物，電源線會破損，導致火災或漏電。	禁止使用已損傷的電線插頭 當AC電源插頭損傷，或插座的插入鬆脫時不可使用。 否則可能導致觸電、短路或起火。 請聯絡當地經銷商維修。																				
拔下插頭 從插座上拔下AC電源插頭時，請必須拿著前端拔出。 否則可能導致觸電、短路或起火。	拔下AC電源插頭 不使用時，請必須關閉電源，從插座上拔下AC電源插頭。此外，不可用潮濕的手插拔電源線。 否則可能導致觸電、短路或起火。																				
拔下AC電源插頭 保養本產品時，請必須關閉電源，從插座上拔下AC電源插頭。 否則可能導致觸電、短路或起火。	萬一發生異常時 請關閉主機的電源，馬上拔下AC電源插頭。 請勿在冒煙、發出異響或異味等異常的狀態下使用。																				
注意起火 請勿放置靠近火源、熾熱陽光下、灰塵瀰漫、浴室等高溫潮濕地方使用或放置。 請勿置於熱能電器附近。 否則可能會導致過熱、起火、破裂而造成損壞。	禁止使用延長插座 本產品必須使用專用的AC電源插頭。並且，AC電源插頭要直接插入牆壁的插座上，請勿使用延長插座。 否則可能導致觸電、短路或起火。																				
禁止 請勿掉落水中、或浸入水中。 AC電源插頭請勿在浴室或濕度高的場所使用或保管。 否則可能導致觸電、短路或起火。	禁止發熱時使用 發出異味或異常發熱時要停止使用。 否則可能導致破損或起火。																				
使用者的限制 要放置在兒童無法拿到的地方，不讓其使用。 否則可能導致事故或人體受傷。	禁止掉落 請勿放置在不穩定的地方。並且，請勿摔落或撞擊主機。 否則可能導致主機發生故障。 此外，如果落到腳上，可能會導致人體受傷。																				
使用者的限制 請勿讓無法表達自己意思的人士使用。此外，請勿讓殘障人士使用。 否則可能導致事故或人體受傷。																					
必須遵守 使用中感覺疲勞或肌膚顯現出異常時，請馬上停止使用。 如果次日後異常仍持續存在，請向醫生查詢。	必須遵守 請勿將本機固定在一個位置，要不斷移動進行護理。 如果固定在同部位地進行護理，可能會損傷肌膚。																				
必須遵守 要遵守使用時間使用。 使用過度可能會損傷肌膚。	必須遵守 請勿用力摩擦肌膚。 否則可能損傷肌膚。																				
必須遵守 當肌膚表面有灼熱的痛感時，要移動位置使用，或補充啫喱或水。 如果繼續使用，可能會損傷肌膚。	必須遵守 為了讓主機頭部和肌膚之間總是保持有啫喱或水，要中途進行補充。 如果繼續使用，可能會損傷肌膚。																				




使用前

●模式切換

護理模式共有3種類型，在電源開啟的狀態下每按一次模式按鈕，會如下述所顯示切換到另一個護理模式。

※護理方法請閱覽P.10～P.13。

想要在中途關閉電源時，請長按（約3秒）電源按鈕。

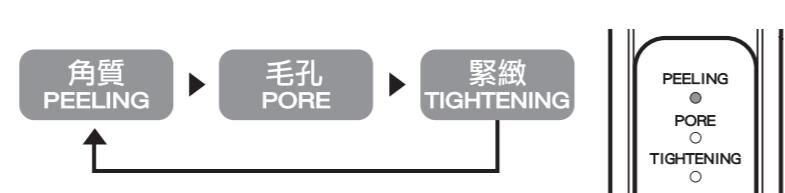

肌膚測試

第一次使用產品或選用未曾使用過的護膚品時，請必須先測試是否適宜，確認不會造成皮膚損傷。

1 清潔肌膚。

用肥皂清洗前臂內側，用毛巾等擦乾。

2 在前臂的內側塗上護膚品（不含油分的啫喱、化妝水）或水，在毛孔模式（PORE）下使用約1分鐘。

・請勿摩擦剛進行測試的部位。

3 請在確認肌膚24小時以內沒有發生異常（發紅或發熱等）後使用。



- ・為了防止肌膚問題，請必須事前作測試。
- ・測試部位如果出現起疹、發紅、發癢、刺激等異常時，請即刻停止測試進行沖洗。
- ・當肌膚感覺異常時請勿使用。

充電方法

第一次使用時或電池餘量減少時請進行充電。

・購買後第一次充電時，請在完全充滿電後使用。

・第一次使用時和長時間未使用時，即使充滿電也可能只可使用較短時間。


1 將電源插頭插入主機的電源插頭插入口。

2 將AC電源插頭插入插座。

・主機的充電指示燈亮起時，充電開始。

指示燈熄滅則充電完畢。

・充電時間會因為電池的餘量和使用環境的不同而變化。

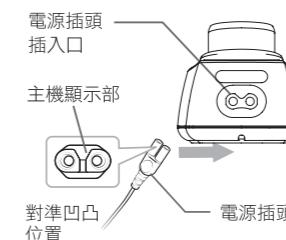

3 充電完畢後，請從插座拔下AC電源插頭。



本產品務必使用專用的AC電源插頭。並且將AC電源插頭要直接插入牆壁的插座上，請勿使用延長插座。
否則可能導致觸電、短路或起火。

●充電時間

充電時間	操作時間
約2~3小時	約30分鐘

※在室溫約攝氏25度的使用。

※操作時間以完全充電後立即使用為準。

※充電時間會因電池的餘量和使用環境而有變。

使用方法

●建議使用時間

※使用頻率為每週1～2次左右。
每次5分鐘以內的標準使用。
過度使用會給肌膚帶來負擔，導致肌膚發生問題。

基本使用方法

●護理方法

1 卸妝後清潔面部肌膚。

※清除油分和污垢，使得肌膚處於清潔狀態。
※與潔面啫喱一同使用時，無需卸妝。

2 請確認肌膚上沒有痤瘡或小膿包等異常。

※請勿在肌膚異常的部位使用。
※當肌膚感覺異常時，請立即停止使用，並向專業醫生查詢。
※請勿於眼周和耳周使用。

3 長按（約3秒）電源按鈕開啟電源。



第一次使用時請先進行肌膚測試。（參照P.7）

請勿用力摩擦肌膚。

為了讓主機頭部和肌膚之間總是保持有啫喱或水，請在使用途中進行補充。

如果在乾燥的肌膚上使用，會損傷肌膚。

請勿將主機頭部固定在一個位置，要不斷移動進行護理。

如果固定在同一部位進行護理，會損傷肌膚。

不可使用護膚品和水以外的物質，包括不適合使用的護膚品。

否則可能導致肌膚問題、故障發生。

〈不適合使用的護膚品〉

· 精油、磨砂膏、刺激性強的化妝水

關於防水性能

· 本產品的防水等級相當於JIS標準的IPX4。

※不屬於完全防水規格。請勿浸入水中或持續讓水流沖淋3分鐘以上。

各種模式的使用方法

●角質模式：PEELING

建議使用時間：2分鐘

利用超聲波清除肌膚表面老化的角質。

請在整個臉部使用。

1 使用前進行卸妝，在肌膚上塗抹充分的啫喱。


2 將主機輕輕地貼上肌膚，慢慢朝著箭頭的方向移動。

※使用時請勿將本機停留在同一位置，要保持移動進行護理。

※請勿在同一位置使用2次以上，而護理的位置不要重疊。


· 使用後請用適當的護膚品護理肌膚。

主機的移動方法

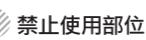

禁止使用部位

※請按箭咀指示的方向於皮膚上滑行使用。

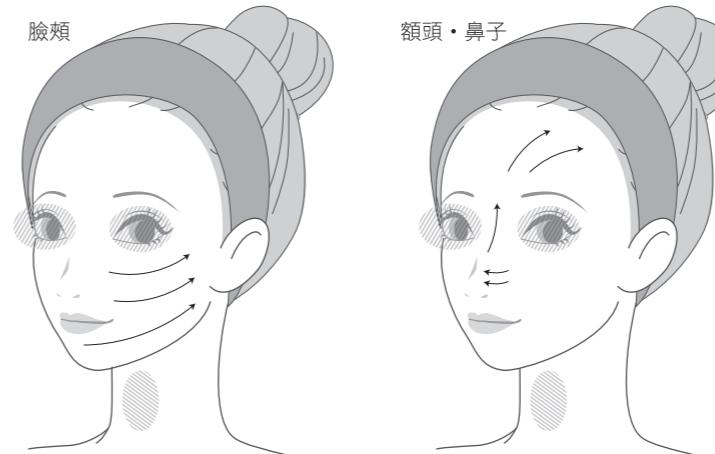

●使用要點

當肌膚上沒有啫喱時，請再次在肌膚上塗抹啫喱。

· 用熱毛巾將臉部加溫後，或沐浴後肌膚仍處於溫熱狀態時使用效果更佳。


此外，還建議與蒸臉器一起使用。

●毛孔模式：PORE 建議使用時間：1分鐘


利用超聲波+離子清潔清除毛孔內的污垢。請在鼻翼、下巴、眉間等需要改善毛孔的部位使用。

- 1 使用前進行卸妝，在肌膚上塗抹充分的啫喱。
- 2 將主機輕輕地貼上需要改善毛孔的部位，以打圈方式移動。請按照1個部位轉5圈的標準進行。

※使用時請勿將本機停留在同一位置，要保持移動進行護理。
※請勿在同一位置使用2次以上，而護理的位置不要重疊。
· 使用時，請必須接觸主機的電極線狀態下使用。
· 緊緊握住電極線，可以進行離子護理。

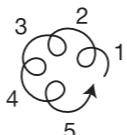主機的移動方法  禁止使用部位


※請按箭咀指示的方向於皮膚上滑行使用。

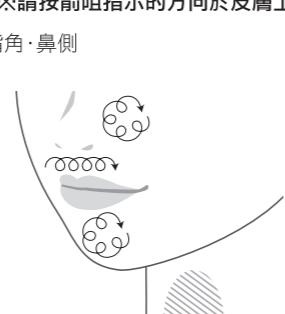嘴角·鼻側 

鼻子·眉間 

2 輕輕地將主機貼在肌膚上，慢慢地按箭咀指示方向移動。

※使用時請勿將本機停留在固定的一個位置，要保持移動進行護理。
※請勿在同一位置使用2次以上，而護理的位置不要重疊。
· 使用時，請必須在接觸主機的電極線狀態下使用。
· 緊緊握住電極線進行電刺激。
· 使用後請用乳液或面霜等對肌膚進行適當的護理。

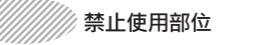主機的移動方法  禁止使用部位

※請按箭咀指示的方向於皮膚上滑行使用。

整個臉部 

請按照①～④的順序移動主機。

●緊緻模式：TIGHTENING 建議使用時間：2分鐘

利用超聲波+電刺激讓肌膚變得緊緻。

請在整個臉部使用。

- 1 在肌膚處於潔淨的狀態下，充分地塗抹粘稠的化妝水、乳液、啫喱等護膚品。

模式組合使用方法

潔臉	▶	角質模式	▶
清潔整個臉部。		將啫喱塗抹在肌膚上，可在整個臉部使用。	將護膚品塗抹在肌膚上，可在整個臉部使用。
		▶	
		毛孔模式	
		▶	
		緊緻模式	

※角質模式和毛孔模式，建議配合蒸臉器同時使用。
※與潔面啫喱一起使用時，請從角質模式開始使用。

護理後事項

清潔及收存方法

為了保持本產品清潔，請於每次使用後進行清理。




清潔時，必須將電源關閉。
否則可能導致觸電、短路或起火。

1 確認電源已經關閉。

**2 置於水龍頭下沖洗主機頭部上
粘附的污垢。**

- 使用啫喱或水等時，請徹底將污垢沖洗乾淨。
- 切勿將主機浸於水中。否則可能導致故障。

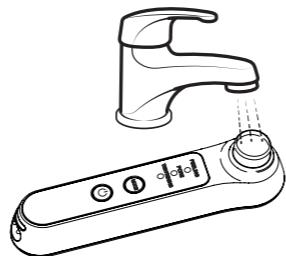

**3 用毛巾或乾布，將主機表面的
污垢和主機頭部及主機的水分
擦拭乾淨。**

- 請勿使用鹼性洗滌劑、酒精、稀釋劑、揮發油、卸甲水等。



護理後事項

存放方法

- 長期間閒置本機時，將主機清潔後再收存起來。
- 請將粘附在主機和主機頭部的水分擦拭乾淨後才收存起來。
- 不使用本機時，請關掉電源並從插座上拔下AC電源插頭後才收存。
- 請勿放置在火旁或烈日下、浴室等高溫潮濕的地方，放置在通風良好且乾淨的地方收存。
- 請把本機放置於兒童無法觸及的地方。

保養及檢查

- 經長時間閒置後，請於再使用前先檢查其操作是否正常及安全。
- 本機操作發生異常時，可先參照(P.15)「排除故障」進行檢查。如仍無法解決，請連同購買相關資料向產品銷售商查詢。
- 如有故障或受損，請向產品銷售商查詢。

護理後事項

排除故障		
檢查項目		
在使用本產品時如果感覺到異常，請確認是否存在下述狀況。		
狀況	推測原因	處理方法
無法開機	→ 沒有長按（3秒）電源按鈕 → 沒有拔掉AC電源插頭 → 未有充電	→ 長按電源按鈕約3秒或以上開啟電源 → 請拔掉AC電源插頭以啟動電源 → 請充電（P.8）
充電後仍只能操作數分鐘	→ 未有充電 → 電池壽命完結	→ 請充電（P.8） → 請聯絡銷售商
無法充電	→ AC電源插頭沒有插入到插座內	→ 請將AC電源插頭插入到插座內（P.8）
超聲波感覺痛	→ 肌膚乾燥 → 摩擦過強	→ 請在肌膚上塗抹啫喱 → 請輕輕滑動主機
不產生離子（感覺不到）	→ 沒有觸碰電極線 → 使用的部位過於乾燥 → 肌膚感受因人而異	→ 請緊緊握住電極線使用 → 請用啫喱或水充分潤濕
超聲波弱	→ 主機頭部沒有緊貼肌膚 → 充電池餘量不足	→ 請將整個主機頭部接觸面貼在肌膚上 → 請充電（P.8）
所有的模式指示燈閃爍	→ 充電不足	→ 請充電（P.8）

常見問題

Q	A
在去角質部位塗抹啫喱的理由？	為了均勻直接地傳遞超聲波和離子。切勿在乾燥的肌膚上使用。
使用時間、使用頻率有什麼標準？	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用頻率為每週1~2次左右。 每次5分鐘以內的使用時間。 ※這只是參考標準。應按自己肌膚狀況作出調整。 ● 相同部位請勿使用10分鐘以上。 ● 當肌膚感覺異常時，請立即停止使用。 ● 肌膚較敏感的用家在每個模式使用1次後，請勿在相同位置再次使用。
使用後肌膚發紅？	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果主機頭部產生強烈摩擦，可能令肌膚受傷。請在肌膚上輕輕滑動主機頭部。此外，為了讓主機頭部和肌膚之間保有啫喱和水分，請進行補充。
主機難以移動時怎麼辦？	<ul style="list-style-type: none"> ● 當啫喱或護膚品不充足時，將無法順暢地移動主機頭部。為了讓滑動順暢，請在肌膚上塗抹充足的啫喱或護膚品後才使用本產品。
怎樣進行保養和收藏？	<ul style="list-style-type: none"> ● 用水清洗主機頭部後，請用乾布擦拭主機和主機頭部表面的水分後才收存起來。（注意：請勿將本機浸沒在水中） ● 請勿置於高溫潮濕的地方。
在浴室可以使用嗎？	請注意，主機可以在浴室使用，但不可以長時間持續沖淋強力的水流或浸入水中。
是否有時肌膚會感覺灼熱？	由於個人差異，可能會感受到微弱電流產生的刺激。此外，當曬傷或肌膚存在異常時，請停止使用並向專業醫生查詢，或在症狀穩定之前暫停使用。
可以在未卸妝的情況下使用嗎？	如果在未卸妝的情況下使用，請搭配潔面啫喱一起使用。
使用時只可以使用啫喱嗎？	<p>請使用水溶性的啫喱。請勿使用磨砂膏等具強刺激性肌膚用品。</p> <p>此外，下述護膚品可能會導致肌膚問題或造成本產品故障，請勿使用。</p> <p>〈不適合使用的護膚品〉</p> <ul style="list-style-type: none"> · 油、磨砂膏類、刺激性強的化妝水等。

售後服務

充電池

- 充電池屬消耗品。（不屬於保用範圍內）
- 如完全充電後操作時間仍非常短，表示電池壽命可能已完結。
(電池一般可充電約300次)
- 如更換電池，請向當地經銷商查詢。

棄置產品

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本機採用鋰電池。

售後服務

●產品規格

額定電壓	DC5.0V 0.8A
功 率	約3W (充電時)
充電時間	約2~3小時 ※充電時間因使用環境而變化。
外 形 尺 寸	約W43xD40xH169 (mm)
產 品 重 量	主機：150g
材 質	主機：ABS樹脂／聚碳酸酯／不銹鋼
生 產 國	日本
配 件	AC電源插頭.....1個