


使用方法

家用美容仪 Liftlogy YJFD1N

各部位の名称

本体

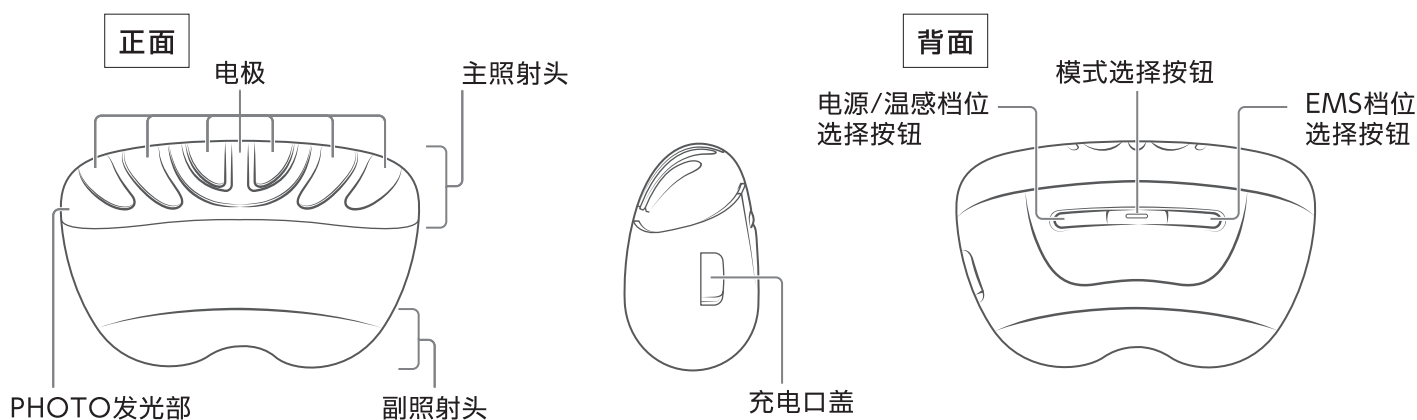

配件

- USB充电线 (USB Type-C)
- 护肤品
- 使用说明书

模式说明

模式显示	PHOTO	使用部位	温感档位	EMS档位	推荐每次使用时间	推荐使用频率
FACE	蓝 绿	面部和颈部	1~3	1~6	2分钟 (最多不超过10分钟)	每天
BODY	红 色	前胸、上臂、侧腹				

推荐使用次数

可以每天使用。但每次使用不超过2分钟（面部和身体各不超过10分钟），每天合计使用时间不超过20分钟。

如次日以后使用，请至少间隔24小时后使用。

※以上仅供参考，还请根据您的肌肤状况使用。过度使用可能会损伤肌肤。

使用时的注意事项

在使用本产品前，请仔细阅读以下内容后采取正确的方法使用。

- 使用前请去除身体上附带的金属物品（如手表、项链、戒指、耳环）。
否则可能会导致事故或受伤。
- 使用前请务必先卸妆。
如果带妆使用，有可能会因为粉底而导致肌肤变黑变脏。
- 初次使用本产品时，必须进行皮肤适应性测试。
- 请使用附赠的护肤品或自有的化妆水、凝胶、水等润湿肌肤后，直接将仪器贴合在肌肤上。
如果使用自有的护肤品，请使用质地浓稠的化妆水或精华液。

使用方法

- 1 打开电源**
长按电源/温感档位选择按钮（约1秒）。
- 2 选择模式**
短按模式选择按钮选择模式。
- 3 选择温感档位**
短按电源/温感档位选择按钮从1~3档选择温感档位。
- 4 选择EMS档位**
短按EMS档位选择按钮从1~6档选择EMS档位。
- 5 将照射头贴合在肌肤上**
将主照射头轻轻贴合在肌肤上。
- 6 关闭电源**
长按电源/温感档位选择按钮（约2秒）。

各部位的护理方法

请按如下所示将主照射头贴合在肌肤上效果更好。

面部护理模式

使用建议：1组（2分钟） ※最多5组（10分钟）

请按图所示，按照①~⑥的顺序使用仪器进行护理。

- 半边脸使用1分钟、全脸使用2分钟。
1分钟后会响起半边脸提示音，请换至另外半边脸使用。
如果1组（2分钟）感觉不够，请再次按照①~⑥的顺序使用仪器。

- ① 颈部：停留10秒
- ② 下巴下方（轮廓线下方）：停留10秒
- ③ 脸颊*：停留20秒
※嘴角与耳朵的连线上为大致位置。
- ④ 太阳穴：停留5秒
- ⑤ 前额发际线：停留5秒
- ⑥ 脸颊：在肌肤表面轻柔滑动*10秒
※使用时请注意保持机身与唇部方向垂直，手握机身向斜上方移动。




- 选择模式1分钟后会发出“哔——”的提示音（计时功能）。
再过1分钟后（合计经过2分钟后）会发出“哔哔哔”的提示音，之后进入待机状态（待机功能）。

身体护理模式

使用建议：1组（2分钟） ※最多5组（10分钟）


锁骨肩颈前胸一带

沿着锁骨由内向外移动仪器。

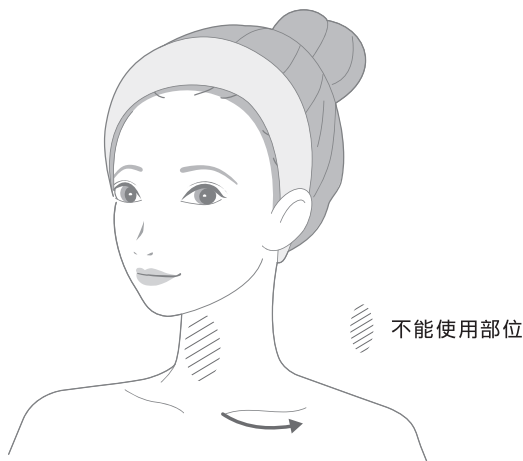

上臂

从手肘向腋下移动仪器。

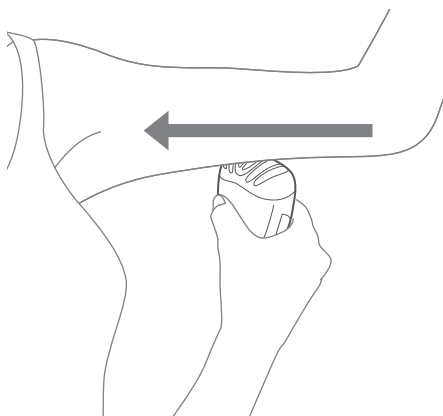

注意

- EMS可能会对牙神经造成刺激。请勿用力按压主照射头，感受到刺激时，请调为低档或更换护理部位。
正在接受牙科治疗或牙齿中有填充物的人群需要特别注意。
- 护理脖颈处时，请注意不要用力按压。如果使用过程中感觉不适，请立即停止使用。
有时可能会感觉到EMS的刺激强烈，护理时请注意。