



使用说明书

家用美容仪

Photo Plus Deep Lift

YJFA1

特点

本产品通过RF射频功能(无线电波,以下简称为RF)进行皮肤温热,是具有离子洁面,离子保湿,EMS,Photo,微电流,冷敷功能的面部美容仪。


使用者可按个人皮肤状况及需要,选择各模式组合进行护理。

- RF...温热达至深层肌肤*,让肌肤可于更合适状态下进行护理。
- 离子清洁...一般洁面难以去除的污垢可透过离子导出功能吸出面部。
- 离子保湿...独特波形的离子导入功能可让爽肤水更易渗透*至皮肤。
- EMS...能够以微电流刺激肌肉。
- 照射...以LED光照射肌肤进行护理。
- 微电流...以微弱的电流针对眼部进行护理。
- 冷敷...以冰冷温度贴于皮肤表面,让皮肤更紧致。
- 震动...配合以微细震频进行护理。


※深至角质层

各个部位的名称与功能

主机

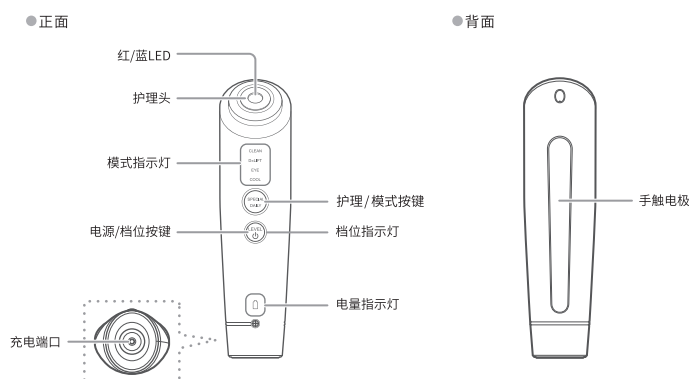

配件

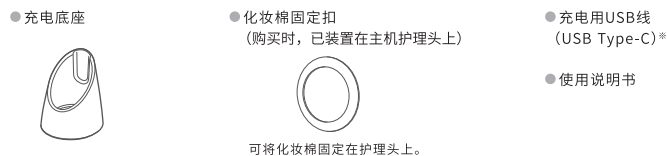

※本机专用配件,充电时务必搭配使用。

※为提升品质,主机和配件的设计和规格如有改变,恕不另行通知。

模式介绍

	模式	功能	是否搭配化妆棉	推荐护肤品 ^{※1}	时间	档位	使用频率(参考)
日护理	DAILY	- RF - EMS - 离子导入 - LED (红)	都可以	化妆水或精华	约3分钟	6档	每天 ^{※2} (不与特别护理模式同一天使用)
特别护理	CLEAN	- RF - 离子导出 - 震动 (仅离子导出时)	√	化妆水	约3分钟	6档	2~3次/周
	D×LIFT	- RF - EMS - DYHP - LED (红)	都可以	精华或面膜	约5分钟	6档	
	EYE CARE	- RF - EMS - 微电流	×	眼部护肤品	约2分钟	6档	2~3次/周 ^{※3}
	COOL	- 冰敷 - LED (蓝)	×	直接贴在皮肤上使用 ^{※4}	约3分钟	-	每天 ^{※5}

※1 使用个人护肤品时,请务必使用水溶性护肤品。请勿使用油性、磨砂类护肤品。会造成机器故障或肌肤问题。※2 请勿与特别模式同一天使用(EYE CARE、COOL模式除外)。

※3 眼周干燥时,1周5天。※4 建议先使用乳液等保湿肌肤后再使用。※5 使用次数仅供参考,根据自己的皮肤状态调节2~3次/周的使用频率。

使用前，请仔细阅读下列注意事项。

- 初次使用本产品时，务必做过肌肤适应性测试后再使用，在同一部位持续使用有低温烧伤的风险。（眼部、冰敷模式除外）
- 请务必参考使用手法滑动使用。
- 使用RF(射频)时，根据护肤品的功能以及品牌的不同，温感也会有所不同。
- 请勿用于上眼睑、眼眶骨内肌肤。
- 使用时，请务必紧握手触电极。

使用注意事项

护理方法


- 1 卸妆、清洁脸部。**
 - 去除肌肤油脂和脏污，保持肌肤干净清爽。
 - ※ 冰敷模式在上妆后也可使用。
- 2 根据护理需求，还可以在护理头装化妆棉搭配化妆水使用。**
- 3 开机**

长按电源/档位按键（约3秒以上）
【嘀嘀】声后，护理/模式按键灯（DAILY）亮灯，DAILY模式启动。
- 4 选择需求模式**

长按模式按键，切换日/特别护理；短按模式按键，选择日护理时，模式按键（DAILY）亮灯。
选择特别护理时，模式按键（SPECIAL）和所选模式指示灯同时亮灯。
- 5 选择需求档位（强度）（COOL模式除外）**
 - 短按电源按键/档位按键，【嘀】声后切换档位。
- 6 使用时，请紧握手触电极（背部银色金属电极条）。**
 - 如不握住手触电极，可能会无法正常使用。
- 7 请将整个护理头表面贴于肌肤使用。**
 - 日护理结束后会自动关机。
 - 特别护理的各个模式结束后，进入待机状态（COOL模式除外）。
 - 短按护理/模式按键，进入下一个护理模式。
 - 中途想要关闭电源时，请长按电源/档位按键。
- 8 护理后，请进行仪器的清洁与保养。**
 - 使用后按摩吸收剩余化妆水，再进行日常肌肤护理即可。

机器的滑动方法


- 参考滑动速度：2cm/秒。
- ※ 如果热感变强，请加快滑动速度。
- 操作时间过半时，会想起【嘀】声提醒换脸使用。

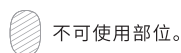

不可使用部位。


D×LIFT 模式

如下图所示，请按照箭头方向移动。
上眼睑，下眼睑，眼尾部分可以使用LED光照射护理

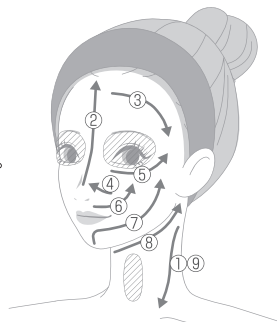


日护理

如下图所示，请按照箭头方向滑动。
上眼睑，下眼睑，眼尾部分可以使用LED光照射护理

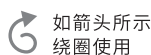

如箭头所示
绕圈使用

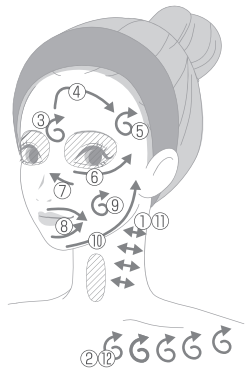

EYE CARE 模式


沿眼头至眼尾的方向，
以【点按→离开→移动】的步骤重复进行护理。
贴脸停留时间为3秒左右。
眼周感到干燥时，可最多1天2次，1周5天。
※ 请勿持续贴于同一部位使用3秒以上。
※ 请勿贴于肌肤滑动使用。



不可以使用部位：上眼睑、眼眶骨内肌肤
※ 可使用于眼周（下眼睑、眼尾）

CLEAN模式

如下图所示，请按照箭头方向滑动。

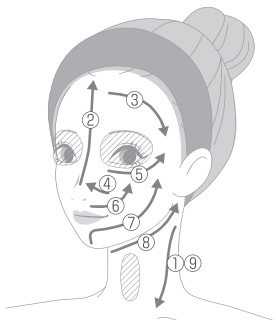

COOL模式

用于面部时，
请以【点按→离开→移动】的步骤重复按压使用。

※ 上眼睑，下眼睑，眼尾部分可以使用。
※ 在眼睑处使用时，请闭上双眼，
将电极头距离眼睑肌肤5cm以上的距离进行照射护理。