

使用说明书

家用美容仪	Photo PLUS Deep Lift	YJFA1	
注意事项	1	使用完毕后	27
安全注意事项	1	须知	29
在国外使用时的注意事项	9	● 常见疑似故障	29
各部位的名称与功能	10	● 常见问题	31
使用前	13	● 产品规格	32
使用方法	16	售后服务	33

目录



注意事项

衷心感谢您选购雅萌的产品。

- 为确保正确、安全地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。
- 阅读后，请妥善保管，以便随时查阅。
- 将该产品转让给他人时，请务必附带使用说明书。

安全注意事项

- 请仔细阅读所有指示内容，以确保能安全及正确地使用本产品。
- 请严格按照使用说明书的指示操作。
- 如出现异常情况，请立即停止使用并联系当地的经销商进行维修。
- 如果在发生故障后使用本产品，会有对身体造成不良影响及构成危险，请务必停用。
- 本说明书所列举的注意事项对您的安全非常重要，请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度，将因错误操作而可能发生的状况分为“危险”、“警告”和“注意”三种类型。

●关于三类注意事项

 **危险** 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。

 **警告** 不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。

 **注意** 不正当使用本产品可能导致人身伤害或引起财物损失*。

*财物损失是指：对房屋、财产以及家畜、宠物等扩大性损害。

●关于三类标示符号

 该符号表示禁止进行的事项。

 该符号表示必须遵守的事项。

 该符号表示必须注意的事项。

危险 (关于使用和保管)

● 以下人群请勿使用。

否则可能导致医用电子仪器发生错误操作。

◆正在使用医用电子仪器的人士，包括：

- 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器 · 人工心肺器等维持生命的医用电子仪器 · 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器



禁止

警告 (关于使用和保管)

● 以下人群请勿使用。

否则可能会导致事故或意外。

- 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者 · 无法自行表达想法的人群 · 无法感知温度以及刺激的人群
- 自身免疫性疾病患者

以下人群请慎重，使用前请咨询专业医生后再使用。

- 急性病患者 · 传染病患者 · 恶性肿瘤患者 · 发热性疾病患者 · 高血压患者或血液病患者 · 发热人群
- 糖尿病等高度末梢循环功能障碍导致的知觉障碍 · 神经障碍者 · 皮肤病以及过敏性皮炎患者 · 定期就医或正在服药的人群
- 过敏体质人群，患有接触性皮炎等有既往皮肤病史的人群，或在使用时皮肤不稳定的人群



禁止

● 以下情况或部位请勿使用。

否则可能会导致事故或意外。

- 皮肤有伤口、皮疹、炎症等异常时 · 饮酒后 · 头部 · 口腔内、阴部、粘膜处等 · 眼球
- 上眼睑 (可在COOL模式下使用，可使用LED光) · 下眼睑及眼角 (可在EYE CARE模式与COOL模式下使用，可使用LED光)
- 喉咙 · 凸起的痣 · 病毒性疣 · 骨折部位
- 医美治疗后有出血、肿胀、结痂等的部位

※治疗后2周内请勿使用。使用前请咨询医生，获得准许后方可使用

(治疗示例：玻尿酸、硅胶或肉毒注射、埋线提拉、双眼皮手术、HIFU等)。

- 接受外科手术 (矫形、整容、美容) 后体内有金属植入的部位

● 请勿过度连续使用本产品 (如用于商用等)。

否则可能导致人员受伤或机器发热。

警告 (关于使用和保管)

- 请勿在皮肤较薄或骨骼贴近表面的部位长时间使用。否则可能对皮肤或身体健康造成不良影响。



禁止

- 请勿在非指定部位使用。否则可能导致人员受伤。

- 除了EYE CARE和COOL模式以外，请勿在同一部位上长时间使用。护理时，请确保护理头在肌肤上持续滑动，而非停止在某一部位。请勿在无法与护理头完全贴合的部位使用。否则可能导致灼伤或低温灼伤。

- 请勿将产品于火中放置或加热，请勿在高温地方使用或放置。否则可能导致产品发热、起火或破裂。

- 请勿在易燃物质（如酒精、稀释剂、汽油、卸甲水或定型喷雾等）的附近使用。否则可能导致火灾、触电或受伤。

- 请勿在以下场所使用或保管本产品。

- 灰尘较多的场所 · 阳光直射的场所
 - 有倾倒、震动或可能受到撞击的场所 · 室外
 - 强电磁波或强磁场环境 · 儿童可触及的场所
 - 有油烟或蒸汽的地方
 - 温度急剧变化的区域（如空调或暖气设备出风口附近）
- 否则可能导致火灾、触电、事故、产品故障、跌倒。

- 产生异味、异常发热时请勿使用。继续使用可能导致机器破损、起火。



出现异味
或异常发热时
禁止使用

- 请勿在本体上放置重物，或在使用过程中使其跌落、遭受强烈冲击。



禁止冲击

否则可能导致人员受伤或产品故障。

- 请勿将产品放置于不平稳的地方，避免掉落或进行碰撞。



禁止摔跤

否则可能导致产品故障。若砸中脚部等身体部位，还可能导致受伤。

- 请勿让无法自我表达者或皮肤感知度很弱的人使用。



限制
使用人群

否则可能导致事故或人员受伤。

- 请避免儿童或残障人士单独使用本产品。未成年人应经监护人同意，并在监护人的监督下使用。

否则可能导致人员受伤。

- 请将主机、充电底座和USB充电线存放于儿童接触不到的地方，勿让儿童使用。也不得将本产品当作玩具交予儿童。

否则可能导致事故或人员受伤。

- 禁止将本产品用于说明书中未记载的用途。



禁止本用途
以外使用

禁止将本产品用于说明书中未记载的用途。

警告 (关于使用和保管)

- 请勿在浴室、浴缸、淋浴间、洗脸池或其他盛水容器附近使用或充电。
否则可能导致触电、短路、起火或产品故障。
- 禁止将机身浸入水中、打湿、或用水冲洗。
否则可能导致触电、短路、起火或产品故障。



禁止淋水

-
- 请勿自行拆解维修或改装本产品。
否则可能导致火灾、触电或受伤。
如需维修，请联系您购入的店铺。



禁止拆解

-
- 第一次使用前必须先进行测试。
否则可能导致事故或人员受伤。
 - 如正在接受牙科治疗或有补牙情况，使用本产品时请调低档位或避开相关部位。
否则EMS功能可能对面颊或下颌造成强烈刺激或带来不适感。如感到强烈不适，请及时就医。
 - 如果产品（主机）内进水或进入了异物，请立即停止使用并申请检查。
否则可能导致火灾或触电。



务必遵守

警告 (关于使用和保管)

- 请勿将产品放置于火源旁、烈日下、浴室等高温潮湿的场所，或可燃性气体、易燃物的附近。请勿将产品扔入火中或加热，勿在高温状态下使用本产品或进行充电。请勿置于热能电器附近。本产品内置可充电电池。否则可能导致机器发热、起火、破裂或运转不良。



注意起火

- 禁止将产品放入微波炉或高压容器内。否则可能导致产品发热、起火或破裂。



注意破损

注意 (关于使用和保管)

- 请勿过度按压或长时间用于同一部位。如果过度按压或过长时间集中在同一部位使用，可能会损伤肌肤。
- 请勿用电极头触碰金属或其他物体。否则可能导致机器发热、起火、故障或损坏。
- 使用前请确认电极部位有无开裂、变形、破损。如发现破损或故障时请勿使用。否则可能导致皮肤问题或产品故障。
- 请勿在极端高温或低温场所使用本产品。推荐使用环境温度为15-30摄氏度。



禁止

注意 (关于使用和保管)

- 请勿使用酒精、有机溶剂、汽油、卸甲水或灯油等溶剂或化学品、抛光粉等物擦拭主机或充电底座。否则可能导致产品表面受损。
- 请勿将本产品用于宠物。会引起受伤。
- 请勿在开机状态下将本产品随意放置于地板或家具上。使用后请及时关闭电源。否则可能损坏家具或导致人员受伤。
- 请勿在开机状态下让产品与其他加热电器（如电热毯、电热被、被炉等）接触或同时使用。否则可能导致人员受伤或产品故障。
- 禁止直视LED光源。使用LED光在上眼睑、下眼睑或眼角部位进行护理时，请闭上双眼，并保持电极头距离肌肤5厘米以上（在COOL模式下使用LED光时，可直接接触肌肤）。否则可能导致眼部或皮肤受伤。
- 请勿连续使用COOL模式。连续使用时，皮肤对冰冷温度的感觉会变弱。请等待至少30分钟之后再次使用。
- 请勿同时进行角质护理。否则可能导致皮肤问题。



禁止

-
- 使用前请摘下首饰（项链、皮带、戒指、耳环等）。否则可能导致事故或人员受伤。
 - 首次使用或尚未适应本产品时，请务必先从档位1开始使用。否则可能导致事故或人员受伤。
 - 如在使用过程中感到疼痛，请立即停止使用。否则可能导致事故或皮肤问题。



务必遵守

注意 (关于使用和保管)

- 请保持电极护理头与肌肤间始终有充足的护肤品或清水，如感到不足请在使用过程中进行补充。如果护肤品或清水不足，将造成护理刺激的传达功能变差，可能导致皮肤问题。
- 如果肌肤表面感到刺痛，请降低护理档位或更换使用部位。或在护理前用爽肤水产品对肌肤进行保湿。否则可能导致肌肤受损。
- 每次使用后，请对与肌肤接触的机器部分进行清理，保证在清洁的状态下使用。否则可能导致皮肤问题。
- 如果在使用中感到身体不适或肌肤出现异常情况，请立刻停止使用。使用时需注意查看肌肤是否出现异常情况。如果发现本产品不适合您的肌肤，请立即停止使用。
- 请严格遵守以下使用时长限制。

【日常护理】

- DAILY模式：每天最多使用1次，每次3分钟

【特殊护理】

- CLEAN模式：每周使用2-3天，每天最多1次、每次3分钟
- D×LIFT模式：每周使用2-3天，每天最多1次、每次5分钟
- EYE CARE模式：每周使用不超过5天，每天最多2次、每次2分钟
- COOL模式：每天最多使用1次，每次3分钟

请勿在同一天内同时使用“日常护理 + 特殊护理的CLEAN模式”，或“日常护理 + 特殊护理的D×LIFT模式”。

- 除EYE CARE模式以外，请勿在同一部位使用同一模式连续护理。如需在同一部位连续使用，请至少间隔24小时。过度使用可能会损伤肌肤。以上为推荐使用方法，请根据个人肌肤状况合理调整。
- 每次使用完毕后，必须按照“使用完毕后”(P.27)的内容擦除附着在产品上的污渍等。否则可能导致皮肤问题或产品故障。



务必遵守

警告 (关于电源)

- 禁止蛮力破坏、加工、捆扎USB充电线。

也请勿夹住或在USB充电线上放置重物，否则容易造成损坏，从而引起火灾或者触电。



禁止
不当操作

- 请勿通过拽拉USB充电线来移动或提起产品。

否则可能导致触电、短路、起火、充电线破损。



禁止拽拉
电源线

- 如果USB充电线受损或者插头松动，请勿使用本产品。

否则可能导致触电、短路或起火。如需维修，请联系您购买的店铺。



禁止使用
损坏的插座

- 拔下USB充电线时，务必手持前端的USB插头拔出（注意不要触碰到金属部位）。请勿用湿手插拔插头。

否则可能导致触电、短路或起火。



拔掉插头

- 清理机器前必须关闭电源。闲置产品时，请拔下USB充电线。请勿用湿手插拔插头。

否则可能导致触电、短路或起火。

- 禁止将USB充电线浸泡到水中，打湿、或用水清洗。

否则可能导致触电、短路、起火或产品故障。



禁止淋水

- 充电时，请确保USB充电线充分插到底。

否则可能引起火灾、导致触电或产品故障。



务必遵守

- 必须使用本产品专用的USB充电线。请将电源适配器（市面销售品）直接插入墙上的插座，而不要使用插排。

否则可能导致触电、短路、起火或产品故障。

- 充电前必须确认充电端口上未沾有爽肤水等液体。

否则可能导致触电、短路或起火。

- 如发生异常情况，请立即切断电源。

请勿在运转不良、冒烟、异音、异味等异常状态下使用该产品。

- 使用中如发生地震或感受到雷电，请停止使用并断开电源。如果正在充电，请拔出USB充电线。

- 充电底座上沾有爽肤水等液体时，请勿将电源适配器（市面销售品）插入插座或充电。



禁止

在国外使用时的注意事项

警告

- 必须使用5V的直流电源（免费维修仅在日本国内）。
否则可能引起火灾、导致触电或产品故障。



务必遵守

- 使用前，请先确认插头形状与电压后才使用。
否则可能导致产品发热、起火或故障。




注意起火

- 插头形状与电压可能会因地域、居住地点的差异而有所不同，请先确认后再使用。
- 关于变压器以及转换插头，请咨询门店或当地经销商。


各部位的名称与功能

机身

● 正面

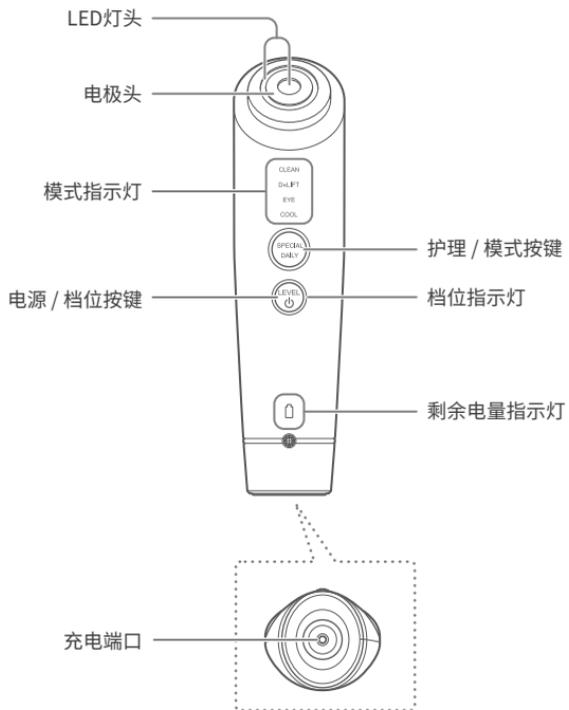

● 背面

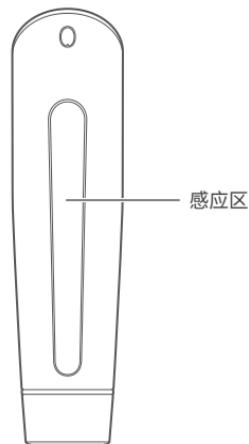

配件

- 充电底座



- 化妆棉固定环
(已安装在机身的电极头上)



可将化妆棉固定于电极头之上 (P.19)。

- USB充电线
(USB Type-C)

- 使用说明书

※以上为本产品专用配件。请勿使用非本产品专用的配件。

※为提升产品质量,主机与配件的设计及规格可能在未提前通知的情况下进行变更,敬请谅解。

功能

安全保护功能

为确保用户的使用安全，本产品搭载了多种传感器，可根据产品及肌肤状态自动调节输出强度，防止过度护理。

●温度传感器

当检测到肌肤或电极头温度过高时，产品将发出10次蜂鸣声后自动关机，以确保用户安全。
此时请停止使用机器30分钟左右。

●动作传感器

实时监测产品的移动状态。当检测到产品静止不动或电极头长时间停留同一部位时，将自动停止护理，以确保用户安全。

●电流传感器

监测电极头与肌肤的接触状态。

●输出控制传感器

持续监测被传导至肌肤的电流状态，自动调节以保持最合适的输出强度。

其他功能

●报时功能

当护理时间过半时，机器将发出1次蜂鸣提示声。各模式的具体时长，请参阅P.17-18。

●待机模式（仅限特殊护理）

某一模式的护理结束时，机器将发出3次蜂鸣提示音，下一模式的指示灯开始闪烁（待机模式表示产品功能暂停的状态）
各模式的具体时长，请参阅P.17-18。
再次短按护理 / 模式按键，即可启动闪灯的模式开始护理。
COOL模式结束时，仅发出2次蜂鸣提示音并自动关机，而不进入待机模式。


●自动关机功能

日常护理模式结束后或特殊护理模式进入待机状态约5分钟无操作后，机器将发出2次蜂鸣提示音并自动关机。


使用前

进行充电

使用家用插座充电时

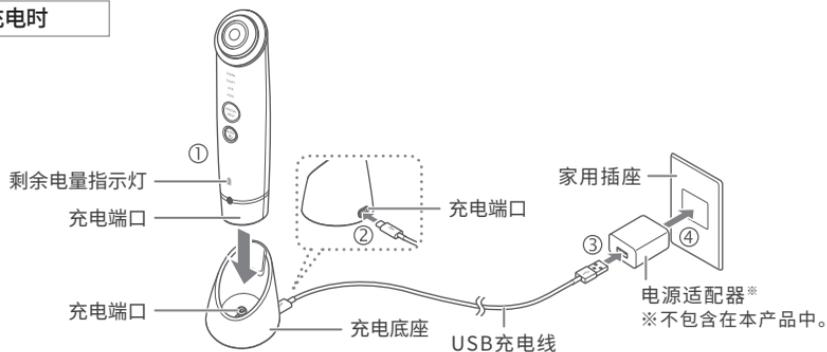

使用电脑充电时

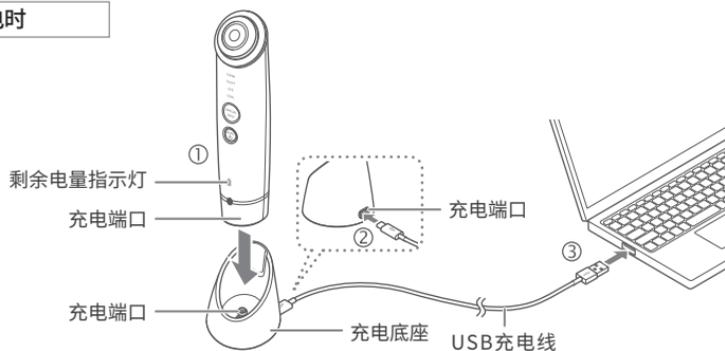

如上图所示,将本产品放置于已连接USB充电线的充电底座上,即可开始充电。

※经过10秒后充电仍未开始时,请确认USB充电线或电源适配器(市面销售品)的插口是否松动。

充电时	剩余电量指示灯白色闪烁。
充满电后	剩余电量指示灯持续亮白灯5秒后熄灭。
充电时间	约3小时（室温约25度） 实际充电时间视电池剩余电量、充电环境和电源适配器（市面销售品）而定。
使用时间	约30分钟（使用D×LIFT模式最大输出时） 实际使用时间视电池剩余电量及充电环境而定。

开机状态下可通过剩余电量指示灯确认当前电量。

剩余电量说明	
白灯	电量充足。
红灯常亮	电量不足。
红灯闪烁	请及时充电。

注意

- 使用电源适配器（市面销售品）时不可将其插入到插排，请直接插入墙壁上的插座内。选择电源适配器（市面销售品）时，请确认电流值的标识。低于1A的适配器可能导致无法充电。
- 购买后第一次充电时，请完全充满后再使用。
- 第一次使用时或长时间未使用时，即便显示电量充满，可能也只能使用较短时间。此时请再次充电后再使用。
- 充电时，请使用本产品配件的USB充电线。
- 请勿在浴室或盥洗室等高温潮湿的地方充电。

预先进行肌肤测试

第一次使用时,必须预先测试产品与肌肤的适应性。



注意

- 为防止出现皮肤问题,使用前请务必先进行皮肤适应性测试。
- 若皮肤适应性测试部位出现发疹、发红、瘙痒、感到刺激等异常情况时,请立即停止测试。
- 使用时需留意查看肌肤是否出现异常情况。如果发现本产品不适合您的肌肤,请立即停止使用。

1

用香皂清洗手臂内侧,用毛巾等擦拭。

请彻底擦干水分,防止肌肤上有水分残留

2

使用自备的爽肤水等保湿产品涂抹到清洗好的部位,
然后使用D×LIFT模式的档位1护理5分钟 (P.21)

3

确认肌肤是否有异常

如果24小时内肌肤无发红或灼热感觉,则可继续使用本产品。



使用方法

使用前须知

在使用本产品前，请仔细阅读以下内容后采取正确的方法使用。

- 初次使用本产品时，必须进行皮肤适应性测试 (P.15)。
- 护理时，请确保护理头在肌肤上持续滑动。如长时间持续使用于同一部位，可能会导致烫伤（不包括EYE CARE和COOL模式）。
- RF（射频）产生的温热感和使用的护肤品类型以及肌肤状态有关。
- 请勿在上眼睑（COOL模式除外）、下眼睑及眼角（EYE CARE和COOL模式除外）使用本产品。
※可使用LED光照射上眼睑、下眼睑及眼角部位。请闭上双眼，并保持电极头距离肌肤5厘米以上。请勿直视LED光（在COOL模式下使用LED光时，可直接接触肌肤）。
- 护理时，请确保手握机身并触碰到背面的感应区。
- 建议使用环境温度：15-30摄氏度

护理的基本流程



模式说明

	模式	推荐使用场景	功能	化妆棉的使用要求	推荐配合使用护肤品 ^{※1}	时间	档位	使用频率(建议)
日常护理	DAILY	每天的基础保湿护理与提拉护理 ^{※2}	<ul style="list-style-type: none"> • RF • EMS • 离子导入 • LED (红) 	可选择性使用	爽肤水或美容液	约3分钟	共 6 级	每天 ^{※3}
特殊护理	导出模式 CLEAN	清除老旧角质及毛孔污垢	<ul style="list-style-type: none"> • RF • 离子导出 • 振动 (仅在离子输出时) 	需使用化妆棉	爽肤水	约3分钟	共 6 级	每周 2-3次
	导入模式 D×LIFT	进行更深层的保湿与提拉护理 ^{※2}	<ul style="list-style-type: none"> • RF • EMS • DYHP • LED (红) 	可选择性使用	美容液或面膜	约5分钟	共 6 级	
	眼部护理模式 EYE CARE	对眼周部位进行护理	<ul style="list-style-type: none"> • RF • 眼部专用EMS • 微电流 	无需使用化妆棉	眼部专用美容液	约2分钟	共 6 级	每周 2-3次 ^{※4}

	模式	推荐使用场景	功能	化妆棉的使用要求	推荐配合使用护肤品 ^{※1}	时间	档位	使用频率(建议)
特殊护理	紧致 ^{※5} 模式 COOL	通过冷敷让肌肤变得更紧致 ^{※5}	<ul style="list-style-type: none"> 冷敷 LED (蓝) 	无需使用化妆棉	直接接触肌肤护理 ^{※6}	约3分钟	-	每天 ^{※7}

※1 使用自备的护肤品时，必须使用水溶性产品。请勿使用油性产品或磨砂膏类产品。

否则可能导致产品故障或对肌肤造成伤害。

※2 指移动产品以向上提拉的手法进行护理。

※3 请勿在同一天使用日常护理和特殊护理（EYE CARE和COOL模式可与日常护理在同一天使用）。

※4 若希望改善眼周肌肤干燥问题，建议每周使用5次。


※5 指通过冷敷护理肌肤。

※6 建议先使用乳液等产品对肌肤进行保湿后再开始护理。

※7 上述使用频率仅供参考，请根据肌肤的实际状态调整（如每周2-3次）。

化妆棉的安装方法

1 从主机上取下化妆棉固定环

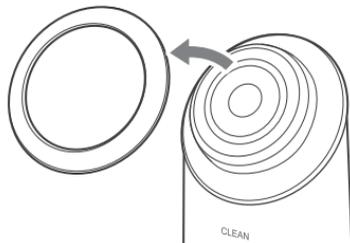

2 将1片化妆棉放于电极面上，再将化妆棉固定环扣紧

- 如化妆棉固定环无法扣紧化妆棉，请使用较大尺寸的薄款化妆棉。厚款化妆棉较难固定，请对半撕开后使用。
- 如化妆棉过厚，可能导致皮肤对RF的温热感觉变弱。

3 用爽肤水沾湿化妆棉

- 请确保爽肤水均匀浸润整个电极头接触面。

注意

- 护理过程中如果化妆棉变干，请及时补充爽肤水。

基本使用方法

1

卸妆洁面

- 清除面部的油脂和污垢，确保肌肤处于洁净的状态。

※COOL模式可带妆使用。

2

如需使用化妆棉，在电极头上安装化妆棉并用爽肤水浸润


化妆棉的安装方法请参阅P.19。

3

打开电源

长按电源 / 档位按键 (约3秒)。

机器发出2次蜂鸣提示音后，护理 / 模式按键 (DAILY) 指示灯亮起，进入DAILY模式。

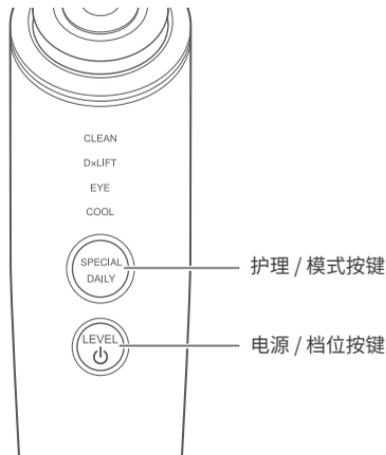


4

选择护理模式

可通过长按或短按护理 / 模式按键来切换护理模式。

选择日常护理时，护理 / 模式按键（DAILY）指示灯亮起。

选择特殊护理时，护理 / 模式按键（SPECIAL）和所选模式的指示灯亮起。

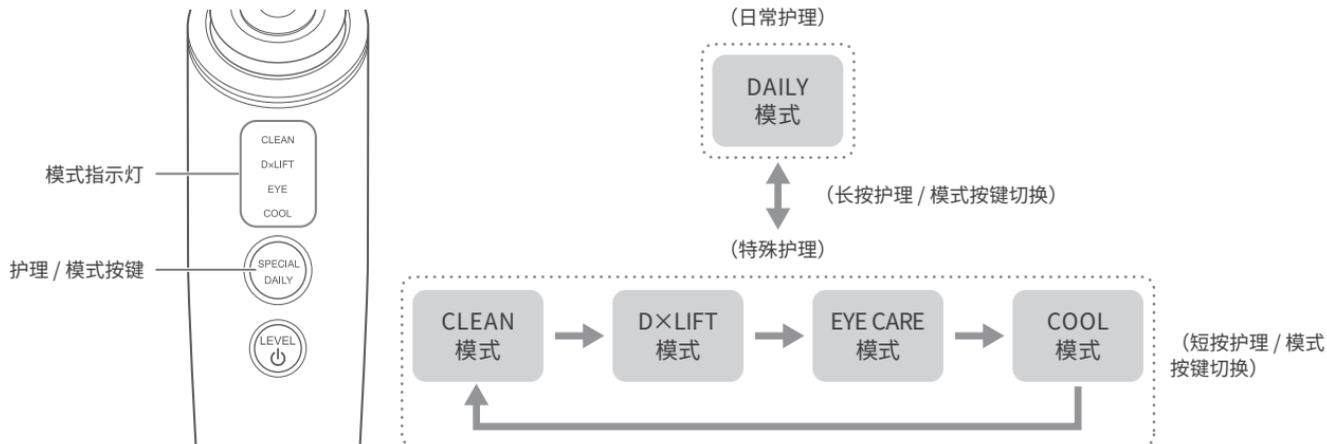


- 可通过长按护理 / 模式按键来切换日常护理和特殊护理。
- 在特殊护理的模式下，即使护理未结束，也可通过长按护理 / 模式按键切换到日常护理。

关于各个模式的说明请参阅“模式说明”（P.17-18）。

5

选择护理档位（不包括COOL模式）

- 可通过短按电源 / 档位按键来切换护理档位。切换时，机器会发出一次蜂鸣提示音。

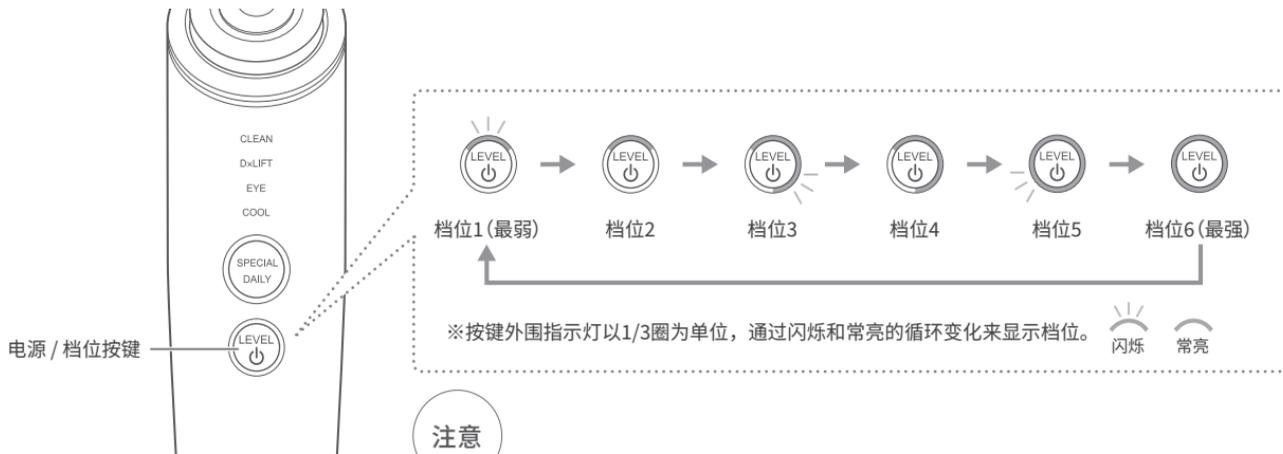

- 刚开始使用时必须使用档位1。
- 如果选择的档位会让肌肤感受到疼痛，请暂停使用并调低护理档位。

6

手握机身，并触碰到背面的感应区（银色部分）

- 如果没有触碰到感应区，则无法触发机器开始工作。

7

将电极头轻轻贴于肌肤上，并移动机身进行护理

- DAILY模式结束后，机器会自动关机。
- 除了COOL模式以外，特殊护理的各模式结束后，机器自动进入待机模式。可选择其他模式继续护理。
- 如需在护理过程中关机，请长按电源 / 档位按键。

- 关于机身的具体移动方法，请参阅“护理手法” (P.24-26)。
- 各模式的具体时长，请参阅P.17-18。

注意

- 护理过程中，请确保电极头的接触面完全贴于肌肤上。

8

使用后保养肌肤

- 护理结束后，轻拍面部促进肌肤上的爽肤水等保湿产品吸收，并用基础护肤品进行日常护肤。

注意

- 每次护理结束后都必须对机身进行清理 (P.27)。

护理手法

- 建议移动速度：每秒移动约2厘米
※如果感到温度过高，请稍微加快移动的速度。
- 当护理时间过半时，机器将发出1次蜂鸣提示声。请转换至面部另一侧护理。

注意

- 护理过程中，请确保电极头的接触面完全贴于肌肤上。
- 除EYE CARE和COOL模式以外，请确保护理头在肌肤上持续滑动。如长时间使用于同一部位上，可能会导致灼伤或低温灼伤。
- 请勿在上眼睑（COOL模式除外）、下眼睑及眼角（EYE CARE和COOL模式除外）使用本产品。


DAILY模式

请按图中的箭头指示方向，在肌肤上轻轻滑动护理头。
可以使用LED光对上眼睑、下眼睑及眼角部位进行护理。




CLEAN模式

请按图中的箭头指示方向，在肌肤上轻轻滑动护理头。

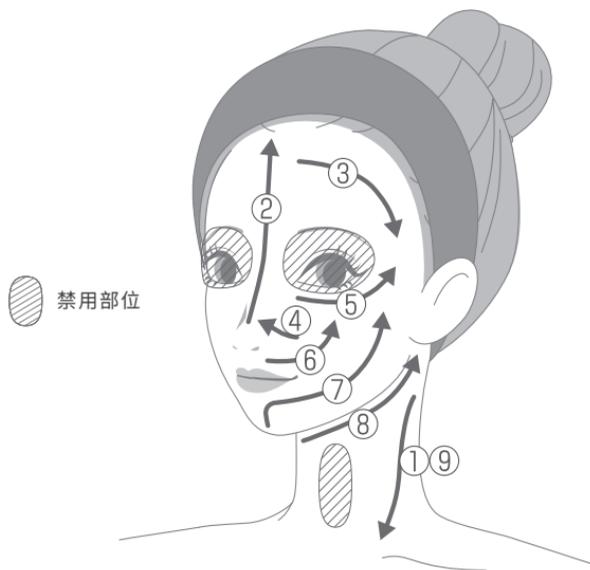

D×LIFT模式

请按图中的箭头指示方向，在肌肤上轻轻滑动护理头。
可以使用LED光对上眼睑、下眼睑及眼角部位进行护理。

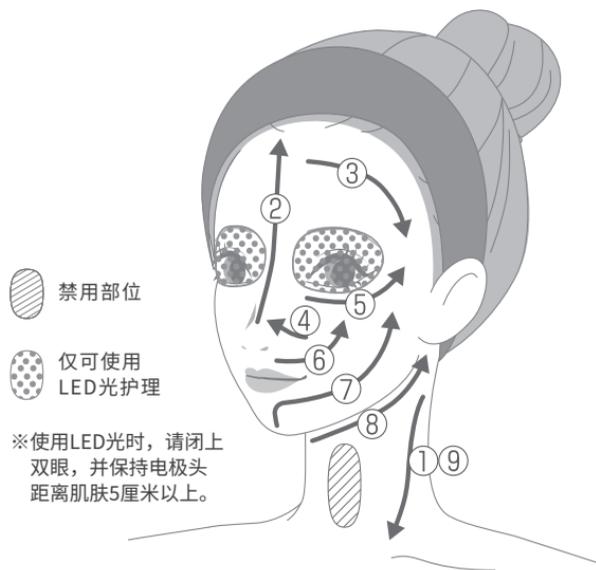


EYE CARE模式

按照从眼头到眼尾的方向，以「贴近→离开→移动」的步骤重复按压使用。贴近时间大约在3秒左右。

若希望改善眼周肌肤干燥问题，建议每周使用5天，每天使用2次，每次2分钟。

※请勿连续贴近3秒以上。

※贴近时，请勿移动电极板。

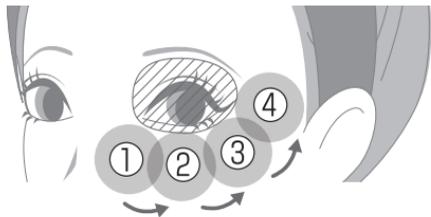

禁用部位：上眼睑

※可在下眼睑及眼周部位使用。

COOL模式

用于面部时，以「贴近→离开→移动」的步骤重复按压使用。

※上眼睑、下眼睑及眼周部位均可使用。

※在眼睑部位使用时，请闭上双眼，并避免用力按压。

※请勿直视LED光。

使用完毕后

清理方法

为保持产品清洁，请于每次使用完毕后对产品进行清理。

警告

- 清理前请确认机器已断开充电连接，且电源处于关闭状态。

1

请将沾湿的毛巾拧干后，擦去残留在机身和电极头上的污渍
化妆棉固定环需从机身上取下后，单独用清水冲洗

2

用干布擦除所有部件上的水分后妥善保管

注意

- 禁止将机身和充电底座浸泡到水中或打湿。
- 请勿在机身上残留有爽肤水等液体的状态下闲置本产品。
- 请确保充电端口上没有水分残留。
- 请勿使用酒精、有机溶剂、汽油、卸甲水或灯油等溶剂或化学品、抛光粉等物擦拭机身。



保管方法

- 如需长期闲置本产品，请对主机进行清理后再妥善保管。
- 未使用时，请拔下USB充电线。
- 请勿存放于暖炉或取暖器附近、浴室等高温潮湿的地方、阳光直射的场所、以及不平稳的地方。
- 请妥善存放在儿童接触不到的地方。

保养与检查

- 经长时间闲置后，首次恢复使用前请先确认本产品可以正常安全地操作。
- 如果本产品无法正常使用，可先参照「常见疑似故障」(P.29) 进行检查。如仍无法解决，请咨询您购买的销售店，或者准备好购货明细单向雅萌客服中心 (P.36) 进行咨询。
- 如果产品发生故障或损坏，请联系您购货的销售店。

须知

常见疑似故障

使用本产品的过程中如果感觉异常，请在送交维修前确认以下事项。

异常状况	可能出现的原因和处理方法
无法开机	→ 请长按电源 / 档位按键约3秒以上 (P.20)。
	→ 电池电量耗尽，请充电 (P.13)。
充电异常	→ 请检查电源适配器（市面销售品）和USB充电线没有连接错误 (P.13)。请确认电源适配器（市面销售品）上的电流值标识。低于1A的适配器可能导致无法充电。
	→ 机身可能未被正确放置于充电底座上。请检查放置方法 (P.13)。
机身过热	→ 连续使用导致，请关机休息1小时以上。
无法调节档位（强度）	→ 使用COOL模式时，无法选择档位。
感受不到COOL模式的冷却功能	→ 连续使用COOL模式导致，请关机休息30分钟以上。
	→ 使用环境温度超出了推荐范围。请于15-30摄氏度的环境下使用。
EMS刺激过强（有刺痛感）	→ 请按电源/档位按键来调低档位。
	→ 电极头没有完全贴合在肌肤上。请对照镜子调整，确保电极头完全贴合在肌肤上。

异常状况	可能出现的原因和处理方法
EMS刺激太弱（感觉不到）	→ 请按电源/档位按键来调高档位。
	→ 肌肤干燥，水分不足。请在护理前用爽肤水等液体对肌肤进行保湿。 请将手稍微沾湿。
	→ 未按照肌肉走向移动护理头。请根据肌肉走向用护理头进行护理（P.24-26）。
	→ 电量不足，请充电（P.13）。
EMS输出不稳定	→ 本产品为多频EMS交替输出，在体感上会出现强弱差异。
护理部位感到灼热 (除COOL模式以外)	→ 护理时没有持续在肌肤上滑动护理头。除COOL模式以外，必须保持电极头在肌肤上持续滑动。
	→ 滑动速度过慢，请适当加快滑动速度。
	→ 温热感视使用的护肤品类型以及是否使用化妆棉而定，某些情况下会感到非常灼热。 如果感到温度过高，请尝试以下方法调节。 <ul style="list-style-type: none"> • 切换化妆棉使用状态（用化妆棉感到过热则取下化妆棉，反之亦然） • 更换护肤品类型
感觉不到温热	→ 机器可能处于待机模式或已自动关机（P.12）。请按护理/模式按键来选择模式开始护理（P.17）。
	→ 肌肤干燥，水分不足。请在护理前用爽肤水等液体对肌肤进行保湿。
	→ 滑动速度过快，请适当放缓滑动速度。
	→ 电量不足，请及时充电。

常见问题

Q 每次护理应该使用多少爽肤水？

A 使用化妆棉时，建议用量以浸润电极头整个接触面为宜。
如在护理过程中感觉水分不足，请随时补充。

Q 推荐使用次数和时长是多少？

A 推荐使用次数如下所示。
【日常护理】
• DAILY模式：每天使用1次，每次3分钟
【特殊护理】
• CLEAN模式：每周使用2-3天，每天1次、每次3分钟
• D×LIFT模式：每周使用2-3天，每天1次、每次5分钟
• EYE CARE模式：每周使用2-3天，每天1次、每次2分钟
– 若希望改善眼周肌肤干燥问题，建议每周使用5天，每天使用2次，每次2分钟。
• COOL模式：每天使用1次，每次3分钟
– 请根据肌肤的实际状态调整（如每周2-3次）。
请勿在同一天内同时使用“日常护理 + 特殊护理的CLEAN模式”，或“日常护理 + 特殊护理的D×LIFT模式”。
使用单个模式时仍建议遵守上述频率。

Q 使用DAILY、CLEAN、D×LIFT、EYE CARE模式时，RF温热感不明显

A 请适当减缓移动电极头的速度，或尝试加大按于肌肤上的力度。此外，也可能因爽肤水或化妆棉中的含水量不足所导致。请补充适量的爽肤水或凝胶。

Q 化妆棉上没有沾上污垢

A 清洁导出的污垢未必肉眼可见。污垢附着程度存在个人差异。

Q RF功能没有让电极头变得温热

A RF是通过无线射频作用于肌肤产生热能，而非直接加热电极头。

产品规格

额定输入	DC5V 1.0A(充电底座)
额定输出	DC9V 0.55A(充电底座)
功率	约4.5W(充电时)
使用电池	锂离子电池
充电时间	约3小时 ※实际充电时间视电池剩余电量、充电环境和电源适配器（市面销售品）而定。
使用时间	约30分钟(使用D×LIFT模式最大输出时) ※实际使用时间视电池剩余电量及充电环境而定。
外形尺寸	机身(含化妆棉固定环):约W47×D44×H176(mm)
产品重量	机身(含化妆棉固定扣):约210g
材质	主机:ABS树脂、硅胶 电极头:PET树脂、不锈钢 感应区:不锈钢
生产国	日本
配件	充电底座..... 1个 USB充电线(USB Type-C)..... 1根 化妆棉固定环..... 1个(已安装在机身的电极头上) 使用说明书
推荐环境	15°C~30°C

售后服务

关于充电电池

- 充电电池为消耗品（不在保修范围内）。
- 即使在充满电的情况下，机器可使用的时间依然非常短，表示电池已经老化（电池一般可充电约300次）。
- 如需更换充电电池，请联系当地经销商。

关于产品废弃

- 如需废弃本产品，请遵照地方政府的相关规定。
- 本产品使用锂离子充电电池。关于充电电池的废弃方法，请参考下方“电池废弃的注意事项”和P.34的“电池的拆卸方法”。



电池废弃的注意事项


本产品使用的电池为锂离子充电电池，是可回收利用的贵重资源。

- 充电电池内置于主机之内，废弃前请先从主机内取出。
- 拆卸充电电池前，请关闭电源并拔出电源适配器（市面销售品）。
- 拆卸充电电池时，需要使用螺丝刀，请注意安全操作，避免受伤。
- 拆卸充电电池时，请避免硬物划伤电池。※否则可能导致充电电池发热、起火等。
- 取出充电电池后，请遵照地方政府的相关规定处理。

电池的拆卸方法


1

使用尖细工具移除螺丝
保护盖和橡胶圈，卸下
螺丝

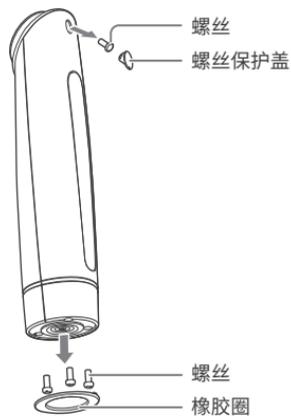

2

拆卸底部外壳

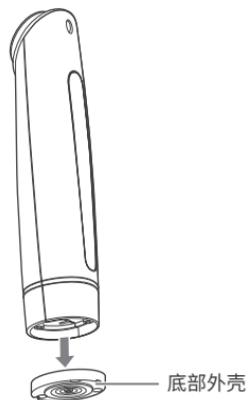


3

拆卸背壳




4 断开电池连接线

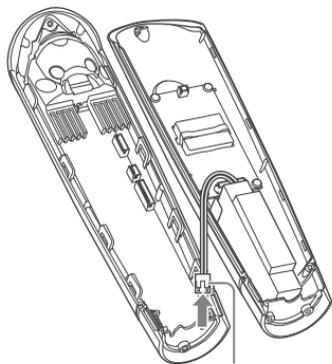

电池连接线

5 取出电池

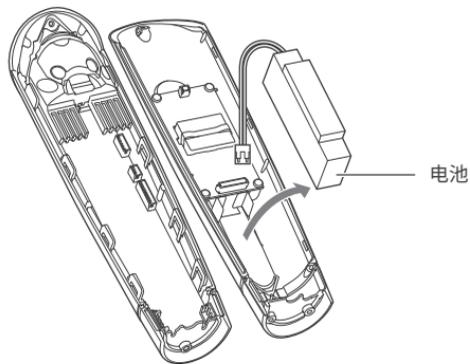

电池



注意

- 本示意图仅适用于产品废弃处理，而非维修指导。除废弃目的外严禁拆卸。否则可能导致火灾、触电或受伤。

海外地区(非日本地区)联系方式

请联系经销商或雅萌全球网站(<https://www.ya-man.com/en/>)。

Memo

