



TOKYO JAPAN

使用説明書

家用美容器 Photo PLUS Prestige S

M20



目錄

安全注意事項	1
在日本以外地區使用時的注意事項	6
特點	7
各部位的名稱	7
使用前	
護理方法 1	
護理完畢後1	
排除故障 1	
售後服務 2	
● 產品規格 2	1

衷心感謝閣下購買YA-MAN 產品。

- 為確保正確及安全使用,請仔細閱讀使用説明書。
- 閱讀後請妥善保管説明書,方便日後使用。
- 如將本產品轉讓他人使用,請連同本説明書一併提供。

安全注意事項

- · 請仔細閱讀所有指示內容,以確保能安全及正確地使用本產品。
- · 請按照操作手冊的指示進行操作。
- · 如發生異常情況,請立即停止使用並聯絡當地經銷商進行維修。
- · 於故障狀態下使用,可能會有對身體造成不良影響的危險,請立即停止使用。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容,請務必遵守。
- · 為清楚列明危害及損害程度,以及錯誤操作而發生的狀況分為「危險」、「警告」和 「注意 |三類。

●注意事項的分類



不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。



不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。



使用本產品時,如果進行錯誤的操作,有可能會導致人身傷害或財 產損失*。

※所謂財產損失,是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。

●標示符號



此符號表示禁止推行的事項。




此符號表示務必遵守的事項。



此符號表示該小心注意的事項。

危險

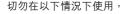



否則可能會導致醫療儀器發生故障:

- ◆使用醫療儀器的人十。
 - 起搏器等植於體內使用輔助儀器。
- 人工心肺機等植於體內使用的儀器。
- 心雷計等攜帶式裝置。

警告

請勿於以下情況下使用,

否則可能對皮膚或身體造成損傷。

- · 正接受治療的人士 · 成長或青春期 · 急性疾患
- · 結核性疾患 · 發燒 · 高血壓 · 傳染病疾患
- · 惡性腫瘤 · 血液疾患 · 內臟疾患 · 皮膚病 · 過敏性體質
- · 過敏性皮炎 · 患有皮膚病的人士 · 過度疲勞
- · 皮膚敏感或脆弱 · 身體抱恙 · 受酒精影響之人十
- · 懷孕、經期、哺乳期 · 正服用安眠藥的人十
- · 皮膚 | 有發癢或病理性色素的人士
- · 因長期使用類固醇荷爾蒙藥物或者肝功能紊亂,從而導致毛細 血管擴張的人士



- · 高度近視的人士(600度以上)
- · 眼部或面部患有疾病,以及正在治療,或者曾做手術的人士。
- 皮膚因過度日曬而刺痛發炎的人十

對於以下身體部位,或存在以下狀況,切勿使用,

否則可能對皮膚或身體造成損傷:

- · 割傷 · 手術(包括整形手術)部位 · 口腔內、陰部周圍或粘膜
- · 暗瘡 · 皮膚潰爛化膿 · 皮膚上有發癢或病理性色素
- · 過濾性疣或黑皮病 · 病毒感染性疣 · 喉結 · 眼球
- · 眼瞼, 眼部周圍(使用眼部護理及冷敷模式時除外)
- ※LED的光可以照射於眼瞼或眼部周圍。請閉上眼睛,並將電極頭 置於距離肌膚5cm以上的位置維行使用。請勿直視LED光。

若不能確定自己是否有上述狀況,請事先徵求醫生意見。



請勿長時間貼於同一位置 上使用, 並請於皮膚上移 動位置。

禁止

否則可能會引致灼傷或 凍傷。



請勿將機器置於火中或加 熱,以及禁止在高溫環境 中充電,使用,放置。

本產品內含充電電池。否 則可能會導致渦熱、起火、 破裂而浩成損壞。



請放置於兒童無法觸及的 地方,不可讓兒童使用。

否則可能會造成意外、身體 使用對象 受傷。



請勿作使用手冊以外的其他 用涂使用。

禁止

用途以外 否則可能會造成身體受傷: 產品故障。

警告



禁止

安全注意事項

請勿在易燃物質(如酒精 稀 釋劑、汽油、指甲油卸除劑 或定型噴霧等)的附近使用。

否則可能會引致起火、觸電 或身體受傷。

電源插頭必須直接插入電

起火。

本產品必須使用專用電源 插頭。

禁止使用 延長線

源插座,請勿使用延長線。 否則會導致觸電、短路或



請勿讓神志不清者使用。 此外,請避免殘障人士單獨 進行使用。

使用對象 受傷。

否則可能會造成意外、身體



異常發熱時

請勿使用

若出現異味或異常發熱,請 停止使用。

否則可能會造成損壞引致 起火。



請確保充電時電源插頭沒 有沾水。

務必遵守

否則會導致觸電、短路或 起火。



請勿損害、加工、用力彎 曲、拉扯、扭曲及捆扎電源 插頭。

禁止 不當處理

如果將電源插頭放置於重 物下或被夾緊,可能會導 致電源插頭破損,並導致 觸電或起火。



請勿使用已損壞的電源插 頭或已鬆動的插座。

禁止使用 已損壞插座

否則會導致觸電、短路或 起火。

如需維修,請聯絡當地經 **鉛商。**



請勿在浴室內或有水的地 方使用電源插頭。 請勿讓機身或電源插頭沾 水,或用水清洗。

否則會導致觸電、短路或 起火。



請勿自行拆解維修或改裝。

否則可能會導致起火、觸 電或身體受傷。

如需維修,請聯絡當地經 銷商。



閒置及進行清潔時,請務 必關閉電源。

否則會導致觸電、短路或 起火。



警告



只可連接100~240伏特交流 電使用。(免費修理僅在日本 國內對應)

務必遵守 完全插入。

插入電源插頭時,必須確認

否則可能會造成起火、 觸電或意外。



閒置時請將插頭從插座中 拔除。 請勿以沾濕的雙手拔除或

插入電源插頭。

電源插頭 否則會導致觸電、短路或 起火。



拔除電源插頭時,請手握 插頭前端拔出。

請勿以沾濕的雙手拔除或 插入電源插頭。

否則會導致觸電、短路或 起火。



請勿放置於靠近火源、熾 熱陽光下、浴室等高溫潮 濕地方。

請勿置於熱能電器附近。 當心火災 否則可能會導致過熱、起 火、破裂而浩成損壞。



萬一發生異常情況時,請 立即拔除電源插頭。

電源插頭

若出現運作異常、冒煙、發 出怪聲或有異味時,切勿 繼續使用。





請勿在禁止使用部位進行使用(P.2)。

正接受牙齒治療或曾進行補牙人士,在進行離子導出導入、EMS、 DYHP刺激時,可能會感到不適。

使用時,請降低離子導出導入、EMS、DYHP的強度、並調整使用部位。

禁止以下事項。



否則可能會造成意外、損傷或機件受損。

- · 皮膚出現紅疹,炎症,瘙癢等異常情況下請勿使用。
- 因機身掉落、碰撞造成損壞時請勿使用。
- 請勿作商業上使用或長時間連續使用。



注意



請勿以鹼性洗滌劑、酒精、 稀釋液、汽油、指甲油卸除 劑等塗抹機身。

否則可能會造成機身表面 受損。



請勿用電極面觸碰金屬表

否則可能會引致故障或受



請勿放置於不平穩的地方, 切勿摔跌或撞擊機器。

請勿用來護理寵物。

否則可能會引起受傷。



否則可能會造成機器故障 禁止掉落 此外,若機器掉落在腳上可 能會導致受傷。



請勿首視LED光。

在眼部周圍或眼瞼處使用LED光進行護理時,請閉上眼睛,並將電極面 置於距離肌膚5cm以上的位置進行使用。

否則可能會引起眼部或皮膚受傷。



請不要連續使用冰感模式。

連續使用時,皮膚對冰冷溫度的感覺會變弱。 請等待至少30分鐘之後再次使用。

請務必遵守以下事項。



否則可能會造成意外、身體受傷或機器故障。

- · 請勿長時間使用於同一位置上。
- 請根據個人皮膚狀態進行使用。

- 務必遵守 . 請避免進行日光浴後,去角質護理或塗抹式面膜一並使用。
 - 使用後請將電源關掉。



使用時若感到身體不適,請停止使用。

使用時需留意查看身體皮膚是否出現異常情況。

務必遵守 如發現本產品不適合您的皮膚,請立即停止使用。



首次使用或尚未調節時,請務必使用強度1。

否則可能會造成意外、身體受傷。

在日本以外地區使用時的注意事項



警告



請務必使用100~240伏特交流電。(免費修理僅在日本國內對應)

否則可能會引致起火、觸電或意外。



請務必確認插頭形狀及電壓後再進行使用。 否則可能會導致機身發熱、起火或故障。

生火注意

- 插頭形狀、電壓可能會因地區及住宿地而有所不同。使用前請先進行確認。
- 關於電源插頭及插頭的轉換,請向旅行社或電器銷售店查詢。


特點

本產品通過RF射頻功能(無線電波,以下簡稱為RF)進行皮膚溫熱,是具有離子潔面, EMS機電刺激, Photo LED, 冰感, DYHP, 微電流功能的面部美容儀。 使用者可按個人皮膚狀況及需要,選擇各模式組合進行使用。

- RF:溫熱達至深層肌膚*,使肌膚處於更適合護理的狀態。
- 離子潔面:一般洗面難以去除的污垢可透過離子導出功能吸出面部。
- EMS:以電流刺激肌肉。
- Photo照射:以LED光照射肌膚進行護理。
- 冰感:以冰冷溫度貼於皮膚表面。
- DYHP: 通過獨特波形的超脈衝滲透技術,幫助護膚品滲透※至皮膚。
- 微電流:以微弱的電流針對眼部進行護理。

※深至角質層

各部位的名稱

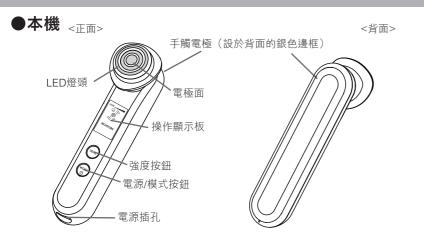

【配件】

●化妝棉固定扣 (銀圏)

※購買產品時已裝置於機器的電極頭上。 ※能將化妝棉固定於電極頭之上。



使用前

●電源插頭




※主機、配件、電源插頭、電源線的設計和規格以提升品質為前提。如有更改, 將不再另外涌知。

使用前

操作顯示板

●操作顯示板及按鈕

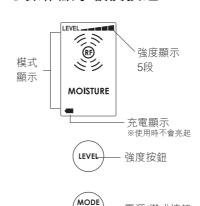

電源/模式按鈕

- · 長按電源/模式按鈕約3秒開啓電源。 (自動進入清潔模式。)
- · 各模式進行時可按電源/模式按鈕切換 至其他模式。
- · 使用清潔、保濕、EMS UP模式時,可調 節強度。
- 強度分為5級,可按強度按鈕選擇合嫡強
- ※RF射頻、微電流、LED、冰感模式無 法選擇強度。
- · 長按電源/模式按鈕約3秒可關閉電源。

●模式顯示

每次按下電源/模式按鈕,將以清潔模式→眼部護理→保濕模式→EMS UP模式→冰感 模式→清潔模式<重覆>……的次序切換模式。

模式	清潔模式 CLEAN	眼部護理 EYE CARE	保濕模式 MOISTURE	► EMS UP ■	冰感模式 COOL
功能	RF/離子清潔	RF/ 微電流	RF/DYHP/ LED(紅光・琥珀光)	EMS / LED(紅光)	冷敷/ LED(藍光)
模式顯示	LEVEL	EXE	LEVEL ((E))	LEVEL	***************************************
	CLEAN	(90.1100)	MOISTURE	EMS UP	соог

※進行清潔模式及保濕模式護理時,模式顯示板上的RP會重覆顯示或隱藏。

●強度顯示

撰擇清潔模式後,按壓強度按鈕可調節離子導出強度。


選擇保濕模式後,按壓強度按鈕可調節DYHP的強度。

選擇EMS UP模式後,按壓強度按鈕可調節EMS強度。

強度分為5級,請選擇個人合嫡強度。


每次按下強度按鈕 場以強度1→強度2→強度3→強度4→強度5 <重覆> ⋯⋯的次序切

※RF射頻、微電流、LED 泳感模式無法選擇強度。首次使用或尚未適應時,請務必使 用強度1。

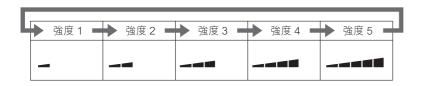

●充電顯示

充電時,充電顯示燈會閃爍。 充電完畢後充電顯示燈會點亮。 ※使用時不會亮起。

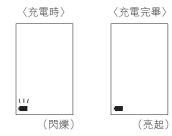

●提醒功能

模式設定時間進行到一半的時候,會發出「嗶—」的提示音。 此時請切換到另一邊臉進行護理。

●待機顯示及Auto off(自動關閉電源)

清潔、眼部護理、保濕、EMS UP模式結束後(各模式約3分鐘),下一個模式的顯示燈 會閃爍,此時將進入待機狀態*(非操作中的狀態)。

※按下電源/模式按鈕閃爍中的護理模式會開始運行。

※如停止操作約兩分鐘,提示音會響起,電源會自動關閉(Auto off)。

只有冰感模式完畢後,不會切換至待機模式,而且會自動關閉電源(Auto off)。 (發出提示音,自動關閉電源。)

預先進行肌膚測試

※第一次使用本產品或護膚品時,請務必預先測試產品與肌膚的適應性。

清潔肌膚。

- · 用肥皂清洗手臂內側,用毛巾等擦拭。
- 將護膚品(保濕霜或爽膚水)或清水塗抹再手腕內側,並在 保濕模式下使用本產品3分鐘。
 - · 請勿擦拭或用水潤濕肌膚測試處的皮膚。

如果24小時內肌膚沒有出現異常情況(泛紅或發燙),則可以使用本產品。



- · 為防止發生肌膚問題,請務必事先測試。
- · 實施部位出現發疹、泛紅、發癢、刺激等異常情況時,請立即停止 測試。
- · 肌膚感覺異常時請勿使用。

注意

10

12

充電方法

本產品可用充電池或連接著電源插頭使用。

如使用充電池,請務必先進行充電。

· 開始使用時(購買後或長時間閒置)請務必先進行充電,並確認充電顯示燈由閃爍變 為持續亮燈後才使用。

●建議充電時間

充電時間	操作時間
約3小時	約30分鐘

※充電環境室溫約為25℃。

※此為充滿電池後可操作的時間。

※操作時間會因使用模式、使用強度及使用環境而異。

※充電及操作時間的方法因應環境、電 池量而異。

●充電方法

- 1 電源插頭的電源線插入機身的電源插口中。
- つ 電源插頭連接到插座。
 - 本產品必須使用專用電源插頭。
 - · 電源插頭必須直接插入插座,請勿使用延長線。
 - · 充電開始時充電顯示燈會閃爍。充電完畢後充電顯示燈會持續亮燈。
- 3 充電完畢後,將電源插頭從插座中拔出, 並把電源綫從機身上拔除。

模式

模式	特點	功能	建議使用方法	時間	強度	使用频率 (建議)
清潔模式 CLEAN	將一般洗臉 難以去除, 完垢吸出, 度膚更清 乾淨。	· RF射頻 · 離子清潔	RF離子深層潔淨薄膜*3 (或先備的化妝棉+爽膚水*2)	約3分鐘	離子: 5級	每週 2~3次
眼部護理 EYE CARE	微電流對眼周 肌膚進行護理。	· RF射頻 · 微電流		約2分鐘	無	每週5次
保濕模式 MOISTURE	讓護膚品更易 滲透*1至角質 層,讓皮膚更 加水潤。	· RF射頻 · DYHP · LED (紅光· 琥珀光)	RF離子導入保濕 薄膜※3 (當水分不足時,請 將殘留在面膜包裝袋 內的化妝水添加後繼 續使用。)	約3分鐘	DYHP: 5級	每週 2~3次
EMS UP	刺激肌肉富 课性 使用於 高頸部位。	・EMS ・LED(紅光)		約3分鐘	EMS: 5級	
冰感模式 COOL	冰感功能可 調整肌膚紋 路並恢復彈 性。	・冰感 ・LED(藍光)	請直接使用於皮膚。	約3分鐘	無	每日

- · 使用時須於皮膚上滑動進行。(使用眼部護理及冰感模式時除外)
- · 除清潔模式和冰感模式以外,可根據個人喜好選擇使用或不使用化妝棉。
- ※使用冰感模式後本機以及電極面會發熱。

請勿連續使用。

使用後請將電源關閉,並保證機器至少休息30分鐘。


※1 深至角質層

※2 使用自備的護虜品時,必須使用水溶性產品。請勿使用油性產品或磨砂膏類產品。 否則可能引起產品故障或對肌膚造成傷害。

※3 請參考P.21

化妝棉的裝置方法

從主機拔出化妝棉固定扣。

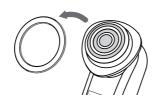

2 將1張化妝棉放於電極面上, 再將化裝棉固定扣扣好。

- ※ 如化妝棉固定扣無法將化妝棉穩定扣上,請使用較大且較薄的化妝棉。 因較厚的化妝棉固定起來比較困難,請對半撕開使用。
- ※ 如化妝棉鍋厚,會令皮膚對RF射頻的溫熱感覺變弱。
- 將爽膚水或凝膠沾於化妝棉上。
 - ※ 爽膚水及凝膠須完全沾滿電極面。
 - ※ 使用較清爽的爽膚水可能會令溫熱感覺減弱。
 建議的保濕產品: RF Booster Pad、較滋潤的爽膚水。
 - ※ 使用後請將殘留於電極面上的爽膚水及凝膠徹底擦拭去除,或稍微用水清洗。 清洗的時候,請勿將本產品泡入水中。

基本使用方法

●使用時的注意事項

- ●使用時須於皮膚上滑動進行。如持續貼於同一部位上可能會造成灼傷。
- ●使用RF射頻時會因護膚品的種類或皮膚的狀態而感覺溫度有異。
- ●請勿用於眼瞼及眼部周圍(眼部護理及冰感模式除外)。
- ※LED的光可以照射於眼瞼或眼部周圍。請閉上眼睛,並將電極面置於距離肌膚 5cm以上的位置進行使用。
- ●請勿百視LED光。
- ●手握機器時請務必確保能接觸到手觸電極。
- ●建議使用環境溫度15℃~30℃

●護理方法

- 1 請先清洗臉上的化妝品。
 - · 去除臉上油分及污垢,確保肌膚於潔淨的狀態。
 - ※ 冰感模式也可在化妝狀態時使用。
- 2 必要時可裝上化妝棉並加上爽膚水。
- 長按電源/模式按鈕(約3秒)開啟電源。選擇模式、強度。
 - · 按電源/模式按鈕選擇模式。
 - · 按強度按鈕選擇強度。
 - ※RF、微電流、LED 泳感模式無法選擇強度。
 - ※首次使用或尚未適應操作時·請務必使用強度1。
- 4 手握機器時請確保接觸到背面的手觸電極 (背面銀色邊框)
 - ※手握機器時請勿用手指觸摸充電接口。
 否則可能會有電流的刺痛感。
- 5 將電極面貼於皮膚上滑動。(使用方法請參閱P.15~16)
 - · 各模式結束後將進入待機狀態(約2分鐘),按壓電源/模式按鈕可開始下個模式。 (冰感模式結束後電源會自動關閉)。
 - ※使用時請務必把電極頭完全貼在皮膚上。
- 長按電源/模式按鈕(約3秒)關閉電源。
 - ※冰感模式結束後電源會自動關閉。
- 7 機器護理後進一步調整肌膚。
 - 請塗上適量的保濕乳霜。
 - ※請每次使用後都進行機身的清潔。(參考P.17)


13

使用方

請按箭頭指示的方向於皮膚上滑動使用。

<清潔 ● 保濕模式>

- · 感到灼熱時可稍微加快移動的速度。此外,使用化妝棉等可以減輕灼熱感。
- · 請將整個電極面表面貼於肌膚上使用。
- · 使用時須於皮膚上滑動進行。 因長時間使用於同一位置上可能會造成肌膚的灼傷或凍傷。
- · 請勿將電極面貼於眼瞼或眼的周圍使用。

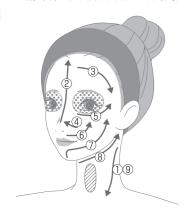



不能使用的部位

只限LED光使用的部位 (使用方法請參考P.16) (只限保濕模式

> ※請閉上眼睛,並將電極面置於距離 肌膚5cm以上的位置進行使用。

建議移動機器的速度: 每秒移動2cm



<眼部護理模式>

按照從眼頭到眼尾的方向,以「貼合→拿開→移動」的步驟重覆按壓使用。 ※請勿連續貼合3秒以上。

※貼合時,請勿移動電極面。



不能使用部位:上眼瞼 ※可在眼周(下眼瞼及眼尾)使用。

貼合時間:每一處約3秒。



如特別在意眼周護理,推薦單側使用約2分 鐘,共計約4分鐘。

<EMS UP模式>



如箭頭指示的方式打圈移動


只限LED光使用的部位 (使用方法請參考以下)

※請閉上眼睛,並將電極頭置於距離 肌膚5cm以上的位置進行使用。



<冰感模式>

用於面部時,以「拿開→移動」的 步驟重覆按壓使用。 ※眼瞼及眼周肌膚均可使用

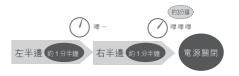

●使用LED光(保濕·EMS UP·冰感模式) 對眼瞼及眼部周圍進行護理

請拆下RF Booster Pad或化妝棉,並閉上眼睛,將電極頭置於距離肌膚5cm以上的位置

進行照射。



使用方法

為保持本產品清潔,請於每次使用後進行清理。

●清潔及保管方法

- I 關閉電源並將電源插頭拔除。
- 2 請用水沾濕毛巾並捲起,將電極面及化妝棉固定扣上的 污垢擦拭去除。化妝棉固定扣則使用清水進行清洗。
 - · 清潔化妝棉固定扣時,請先從機身上拆除,並在洗後擦乾。
 - · 請勿使用水浴性清潔劑、酒精、稀釋劑、汽油、指甲油卸除劑等清潔。
 - · 請勿在殘留爽膚水或凝膠的狀態下閒置本機。
- 🤻 電極面及化妝棉固定扣以外的污垢,請用乾布擦拭去除。

保管方法

- ●長時間閒置本機時,請在保養後進行妥善保管。
- ●不使用時,請關閉電源並將電源插頭拔掉,妥善保管。
- ●請勿存放於焗爐或加熱器附近、浴室等高溫潮濕地方、熾熱陽光下及不穩固的地方。
- ●請將本機放置於兒童無法觸及的地方。

保養及檢查

- ●經長時間閒置後,請於再使用前先檢查其操作是否正常及安全。
- ●本機操作發異常時,可先參照「排除故障」(P.18~P.19)進行檢查。
- ●如有故障或異常,請向產品銷售商咨詢。

檢查項目



狀況		可能的成因		解决方法
	→ 連絡	續使用冰感模式	\rightarrow	請關掉電源,並讓機 器休息最少30分鐘
冰感模式沒有冰凍感覺		推薦環境溫度範圍 使用時	\rightarrow	請於15℃~30℃的環 境下使用
感到灼熱或疼痛	→ 設	定的強度過高	\rightarrow	請按強度按鈕調低強度
您到灯愁现冷拥	→ −	極面沒有完全貼於 青上	\rightarrow	使用時請將電極面完 全貼於皮膚上
	→ 設	定的強度過低	\rightarrow	請按強度按鈕調高強度
EMS強度太低/感覺不 到	→	膚的水分不足或太 乾燥	\rightarrow	請用爽膚水或凝膠調節 皮膚的濕度後再使用 請將手稍微沾濕
	→	有貼合於肌肉上)-	使用時請將電極面貼 於肌肉上(P.16)
灼熱 (冰感模式使用時 除外)	→ 電	極面長時間貼於皮上)-	使用冰感模式以外的 模式時,須於皮膚上 滑動進行。
	→ [移動	動速度太慢)-	請加快移動速度
	_ <u></u>	機狀態 / 自動關閉 .10)	_	請重新啓動電源,或 按電源/模式按鈕來啓 動模式
感覺不到 RF的溫熱	→	膚的水分不足或太 乾燥)-	請用爽膚水或凝膠調節 皮膚的濕度後再使用
	→ 移	動速度太快)-	請減慢移動速度
RF、微電流、LED、 冰感模式無法選擇強 度				能夠調節強度的只有 離子、DYHP、EMS模 式

排除故障

常見問題

Q	А
每次應使用多少爽膚 水或凝膠保濕霜?	以本產品特點來說,使用較多爽膚水及凝膠的溫熱效果較佳。 使用化妝棉時,建議將爽膚水完全沾滿電極頭。 凝膠請使用約為2粒珍珠大小的份量。 如感覺爽膚水及凝膠不足,建議補充份量。
是否可於入浴時使用?	本產品並非防水產品,請勿在入浴時使用。
使用後肌膚發燙	因 RF射頻的溫熱所產生現象。 可使用冰感模式或保冷冰袋為皮膚降溫。
面部及手部感到刺痛	這是受到離子清潔、DYHP、EMS的電流刺激所致。可按強度按鈕調節強度 請選擇個人合適的強度 首次使用或尚未適應時,請務必使用強度1。
使用清潔模式、眼部 護理模式、保濕模式 時感覺不到 RF射頻的 溫熱	請減慢移動電極面時速度,或嘗試加強按於皮膚上的力度。 此外,也可能因化妝棉的濕度不足引致。 請補充適量的爽膚水或凝膠。 RF射頻會間歇性啓動及關閉。顯示屏表示為 健 時, RF為啓動狀態。 (僅限清潔 ● 保濕模式)
化妝棉上沒有沾上污垢	肉眼無法看出的污垢也會被導出。 污垢的導出狀態及黏附狀況亦會因人而異。
RF電極面沒有熱力	RF射頻並非由電極面發熱,而是透過電流溫熱皮膚。

9

售後服務

●充電電池

- · 充電池屬耗用品。(不屬於保用範圍內)
- ·如完全充電後操作時間仍非常短,表示電池壽命可能已完結。 (電池一般可充電約300次)
- · 如要更換電池,請向當地經銷商咨詢。

●廢棄

- · 請遵照當地政府規定棄置產品。
- · 本產品採用鋰電池。

●產品規格

額	定	DC9V 2.0A
功	率	約15W
使 用 電	池	鋰蓄電池
充 電 時	間	約3小時 ※因充電環境不同,充電時間也會稍有不同。
外形尺	寸	機身(含化妝棉固定扣):約W50×D55×H190(mm)
產品重	量	機身(含化妝棉固定扣):約270g
材	質	機身:ABS樹脂 面板: 聚碳酸酯、丙烯酸樹脂 電極頭: PET樹脂/不鏽鋼 手觸電極: ABS樹脂(鍍鉻)
生產	國	日本
配	件	化妝棉固定扣、充電器
推薦環	境	15℃~30℃

21 22