

使用说明书

射频水嫩美颜仪

Photo PLUS Shiny NEO

YJFM18N-HK

目录

前言.....	1	护理后.....	27
安全注意事项.....	1	其他须知.....	29
在香港境外使用时注意事项.....	9	● 排除故障.....	29
产品说明.....	10	● 常见问题.....	31
使用前.....	13	● 产品规格.....	32
护理方法.....	16	弃置产品.....	33



前言

衷心感谢阁下购买 YA-MAN 产品。

· 为确保正确及安全使用，请仔细阅读本使用说明书。

安全注意事项

- 使用前请仔细阅读「安全注意事项」，确保正确地使用本产品。
- 请按照使用说明书的指示进行操作。
- 如发生异常情况，请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。
- 于故障状态下使用，可能会对身体造成不良影响，请立即停止使用。
- 此处的注意事项列明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。
- 注意事项分为「危险」、「警告」和「注意」三类，明确说明误用本机时可能发生的危险和伤害程度。

● 注意事项的分类



危险

不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。



警告

不正当使用本产品可能导致严重伤亡事故。



注意

不正当使用本产品时，有可能导致人身伤害或财产损失*。

*所谓“财产损失”，是指包括住宅、家庭财物或家畜和宠物的损害。

● 标示符号



表示禁止的事项。



表示务必遵守的事项。



务必注意的事项。

危险 (关于使用及保管)

● 下列人士请勿使用:

可能导致医疗仪器发生故障。

◆ 请勿将本产品与任何医疗电子仪器一起使用, 包括:

- 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
- 人造心肺机等维持生命用的仪器
- 心电图描写器等穿戴式医用电子仪器



禁止

警告 (关于使用及保管)

● 请勿在下列情况下使用。

可能会导致事故或出现其他问题:

- 患有或疑似心脏病或相关疾病
- 无法表达自己意愿的人士
- 无法感知温度或刺激的人士 · 患有自身免疫性疾病的人士

在以下情况下使用前请咨询医生:

- 患有急性疾病 · 患有传染病 · 患有恶性肿瘤 · 患有发热性疾病 · 患有高血压或血液疾病 · 发烧
- 因严重的周边动脉阻塞 (例如糖尿病) 而导致有感觉障碍 · 有神经损伤 · 患有皮肤病或异位性皮炎
- 定期覆诊并且正在服药 · 有过敏、接触性皮炎、曾有皮肤相关病史或使用本产品时对皮肤有任何疑问



禁止

● 对于以下身体部位或存在以下状况, 切勿使用。

可能会引起意外或身体造成损伤。

- 皮肤受损、出现皮疹、炎症或其他异常情况 · 受到酒精的影响 · 头部
 - 口腔内、阴部周围或粘膜 · 眼球 · 上眼睑 (COOL模式除外)
 - 下眼睑或外眼角 (EYE CARE模式和COOL模式除外) · 喉咙 · 隆起的痣 · 病毒性疣 · 骨折部位
- 医学美容治疗后出现内出血、肿胀或结痂症状的部位
 - *医学美容治疗后两周内避免使用本产品。之后也请咨询医生并且只在获得许可后才能使用本产品 (例如注射透明质酸、注射矽胶、注射肉毒杆菌、埋线拉皮、双眼皮手术、HIFU等)
- 因手术 (重建手术、整形手术、整容手术等) 植入金属的区域

● 请勿长时间连续使用。

否则可能会导致受伤或机身过热。

警告 (关于使用及保管)

● 请勿在皮肤较薄或骨头上的部位长时间使用本机。否则可能会导致皮肤或身体出现问题。

● 请勿在指定部位以外的位置使用本机。否则可能会导致伤害。

● 请勿持续使用在同一部位 (EYE CARE 或 COOL 模式除外)。使用时, 请务必在皮肤上保持移动本机。请勿使用在无法完全接触整个电极头的部位上。否则可能会导致灼伤。

● 请勿投入火中或在高温环境下充电, 使用以及放置。否则可能会导致主机发热、起火或爆炸。

● 请勿在易燃物质 (例如酒精、稀释剂、汽油、洗甲水或喷雾剂) 附近使用本产品。否则可能会导致火灾、触电或其他意外而受伤。

● 请勿在以下场所使用或存放本产品:

- 多尘的地方 · 阳光直射的地方
- 不平坦、不平稳、有震动或易受撞击的位置
- 室外场所 · 有强力无线电波或电磁波的场所
- 儿童容易取得的地方
- 暴露于有油烟或蒸汽的场所
- 温差变化大的地方 (例如空调或暖炉附近)

否则可能会导致火灾、触电、故障、机件故障或其他事故。

● 当发现有异味或异常发热, 请勿使用本产品。否则可能会导致机件损坏或起火。



禁止

● 请勿在本产品上放置重物。请勿让主机掉落 (尤其是在使用过程中) 或受到强烈撞击。否则可能会导致身体受伤或机件故障。



禁止撞击

● 请勿将本产品放置在不稳定的地方。请勿跌落或撞击。否则可能会导致机件故障。如本产品掉落脚上或其他外露的身体部位也可能造成伤害。



禁止摔跌

● 请勿让无法表达自己意愿或皮肤敏感度低的人士使用本产品。否则可能会导致意外或受伤。



限制
使用对象

● 感官或心智障碍、缺乏经验和相关知识的人士, 必须得到负责其安全的监护人员的监督或指导下方可使用本产品。

● 请勿让儿童玩耍。

● 儿童不得在无人看管的情况下清洁本机和进行保养。

● 清洁和保养不得在没有监督情况下, 由缺乏心智能力、经验和相关知识的儿童进行, 除非得到负责其安全的监护人员给他们有关本产品使用上的监督或指导。

● 将主机、充电座和USB线放置在儿童接触不到的地方, 并不要让他们使用本产品。否则可能会导致意外或受伤。

● 请勿用于使用说明书中说明以外的用途。否则可能会导致身体受伤或机件故障。



禁止
其他用途



发现异味或过热时
禁止使用

警告 (关于使用及保管)

- 请勿在浴室、浴缸附近、淋浴间、水槽或其他盛水的容器附近使用或为本产品充电。
否则可能会导致触电、短路、起火或机件故障。
- 请勿弄湿、清洗或将主机浸入水中。
否则可能会导致触电、短路、起火或机件故障。



-
- 请勿以任何方式拆解、尝试修理或改装本产品。
否则可能会导致火灾、触电或其他意外事故。
如需维修，请联系经销商。



-
- 首次使用本产品前，请务必进行皮肤适应测试。
否则可能会导致意外或受伤。
 - 如果您目前正在接受牙科治疗或补牙，请选择较低的强度级别并将本机使用于不同的位置。
脸颊或下巴可能会因EMS的影响令您感到强烈的刺激或不适。如感到强烈不适，请咨询医生。
 - 如果有水或异物进入本产品中（例如主机身），请立即停止使用并联系经销商。
否则可能会导致起火或触电。



警告 (关于使用及保管)

- 请勿将本产品放置在火源附近、烈日下、浴室等高温潮湿的场所，或可燃气体或易燃物体的附近。请勿将本产品投入火中或靠近火源。请勿在高温地方或机身发热时使用或充电。请勿将本产品靠近暖炉。本产品内置可充电电池。错误使用可能会导致发热、起火、爆炸或机件故障。



-
- 请勿将本产品放入微波炉或压力容器中。否则可能会导致发热、起火或爆炸。



注意 (关于使用及保管)

- 请勿用力按压或持续使用本产品在同一位置。施加过大力度或在同一位置集中使用本产品可能会损害皮肤。
- 避免让电极头接触任何其他金属的表面或物件。否则可能会导致发热、起火、机件故障或损坏。
- 使用前请检查电极头是否有裂纹、变形或破损。如本机已损坏或出现故障，请勿使用。否则可能会导致皮肤出现问题或机件故障。
- 请勿在极热或极冷的场所使用本产品。本机的建议使用环境温度范围约为15°C至30°C。



注意 (关于使用及保管)

- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、煤油、化学品或抛光粉等溶剂擦拭主机或充电底座。否则可能会导致机身表面损坏。
- 请勿在宠物身上使用本产品。否则可能会导致受伤。
- 本产品启动时，请勿将其放在地板或家具上。使用后请务必关闭主机。否则可能会导致受伤或损坏家具。
- 通电时请勿让本产品接触其他电器（电热毯/床单、被炉等）。请勿与其他电子产品同时使用。否则可能会导致身体受伤或机件故障。
- 请勿直视LED灯。使用LED灯护理上眼睑、下眼睑或外眼角周围位置时，请务必闭上眼睛，并让电极头距离皮肤至少5厘米。否则可能会对眼睛或皮肤造成伤害。
- 请勿连续使用COOL模式。如持续进行护理，电极头将不能完全冷却。要恢复使用本机，请等待至少30分钟后再次使用。
- 请勿与去角质护理产品一起使用。否则可能会导致皮肤问题。



禁止

-
- 使用本机前请卸下所有饰物（项链、皮带、戒指、耳环等）。否则可能会导致意外或受伤。
 - 首次使用时请使用强度级别1，直到习惯使用为止。否则可能会导致意外或受伤。
 - 使用过程中如感到疼痛，请立即停止使用。否则可能会导致意外或皮肤问题。



务必遵守

注意 (关于使用及保管)



- 护理时请经常补充护肤品或水，以确保电极头与皮肤之间有足够的水分。
如护肤品或水的份量不足，刺激就会减弱，并引起皮肤问题。
- 如感到皮肤有刺痛感，请降低强度或更换使用部位。在使用本产品之前，可以使用乳液等护肤产品先润湿皮肤。
否则可能会对皮肤造成伤害。
- 每次使用本产品时，请仔细清洁产品与皮肤接触的部分。
否则可能会导致皮肤问题。
- 如使用过程中感到不适或出现皮肤异常，请立即停止使用。
使用前请仔细检查，确保皮肤没有异常。如果护理令皮肤不适，请立即停止使用本产品。
- 请确保按照以下建议时间和频率使用。

[日常护理]

- DAILY 模式：建议每天1次，每次护理最多3分钟

[周间护理]

- CLEAN 模式：建议每天1次，每周2至3次，每次护理最多3分钟
 - DYHP 模式：建议每天1次，每周2至3次，每次护理最多5分钟
 - EYE CARE 模式：建议每天2次，每周5次，每次护理最多2分钟
 - COOL 模式：建议每天1次，每次护理最多3分钟
- 请勿在同一天内同时进行每日护理和周间护理程序 (EYE CARE模式和COOL模式除外)。

- 避免在同一部位持续使用(使用EYE CARE模式时除外)。
如需再次使用在同一部位时，请务必间隔24小时以上。
过度使用可能会损害皮肤。上述建议仅供参考。
请观察个人的皮肤状况并相应地使用该产品。
- 每次使用后，请务必按照“护理后”(P.27)中的说明，清除附着在机身上的污垢和残留护肤品。
否则可能会导致皮肤问题或机件故障。

警告 (关于电源)

- 请勿损坏、改装或捆绑USB充电线。

请勿在USB充电线上放置重物或将其夹在其他物件之间，否则可能会损坏USB充电线并导致火灾或引起触电危险。



- 请勿拉扯USB充电线以移动或提起主机。

否则可能会导致电线断裂或导致触电、短路或起火。



- 如USB充电线已损坏或端口松动，请勿使用。

否则可能会导致触电、短路或起火。
如需取得有关维修的建议，请联系经销商。



- 从机身及USB端口拔除USB充电线时，请握住USB插头拔出(请勿触摸金属部件)。手湿时请勿插入或拔除插头。

否则可能会导致触电、短路或起火。



- 清洁本产品时，请确保电源已关闭。不使用时，请拔除主机上的USB充电线。手湿时请勿插入或拔除插头。

否则可能会导致触电、短路或起火。

- 请勿清洗USB充电线或将其浸入水中。

否则可能会导致触电、短路、起火或机件故障。



- 请确保USB充电线完全插入USB端口。

否则可能会导致起火、触电或机件故障。

- 请务必使用原装USB充电线。

否则可能会导致触电、短路、起火或机件故障。

- 充电前，请检查充电端子上是否有护肤品残留。

否则可能会导致触电、短路或起火。

- 万一发生异常情况，请立即关闭主机。

如发现产品运作出现异常、冒烟、异常噪音、异味或其他异常状态，请停止使用。

- 当感觉到地震或听到雷声时，请停止使用产品并将其电源关上。

如产品正在充电，请从主机上拔除USB充电线。



- 当充电底座中有残留护肤品时，请勿充电。



在香港境外使用时注意事项

警告

- 仅使用5V DC USB交流电。

否则可能会导致起火、触电或机件故障。



务必遵守

-
- 使用时，请务必先确认插头的形状及电压后才使用。

否则可能会导致发热、起火或机件故障。




起火注意

-
- 插头的形状及电压会因地域及住宿地方而有不同。请先确认后才使用。
 - 有关于转换插头的事宜，请向经销商查询。


产品说明

主机

● 正面

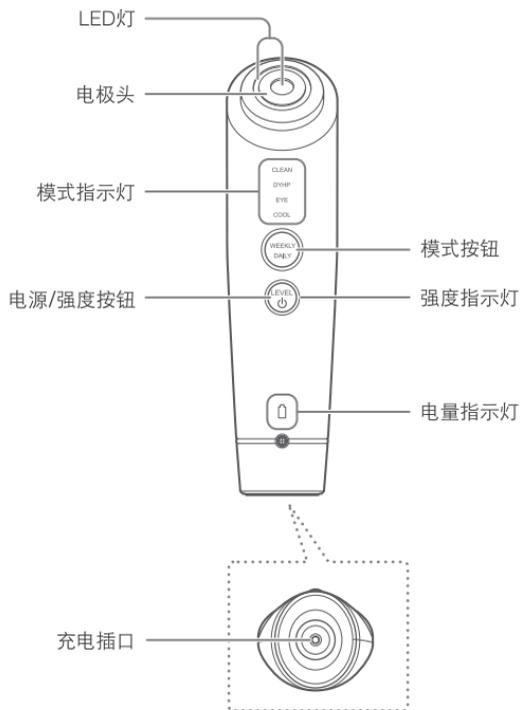

● 背面

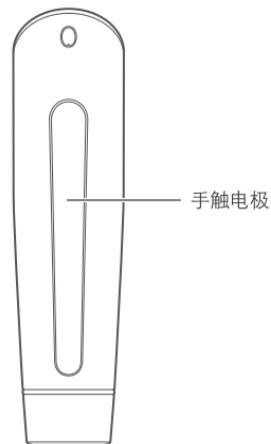

配件

- 充电底座



- 化妆棉固定扣
(购买时已装在主机的电极头上)



可将化妆棉固定于电极头上(P.19)。

- USB充电线 (Type-C™)

- 使用说明书

* 本产品专用。请勿使用产品附随以外的配件。

* 主机和配件的设计和规格上可能为提高品质而有所更改，恕不另行通知。

特点

安全功能

本产品配有多个感应器，确保使用安全。

- 温度感应器

如皮肤或电极头温度过高，为安全起见，电源将自动关闭（主机会发出10次提示音）。此时，请先让主机休息约30分钟。

- 动态感应器

动态传感器检测主机的移动，并在主机停止或在同一位置连续使用电极头时，出于安全原因暂停输出。

- 电流感应器

检测电极头是否有接触皮肤并启动输出。

- 输出控制感应器

持续监测流经皮肤的电流水平，并调整输出的电流至适当的水平。如电极之间有强力电流流动，为安全起见，电源将自动关闭。

其他功能

- 定时器

将发出一声提示音表示操作时间已过一半。有关每种模式的操作时间，请参阅P.17-P.18。

- 待机模式（仅当选择周间护理时）

每个模式的护理完成后，主机会发出短促的提示音，并且随后模式的指示灯会闪烁（进入待机状态）。

有关每种模式的操作时间，请参阅P.17-P.18。

再次短按模式按钮即可启动正闪烁的模式。

当COOL模式下的护理完成时，主机将发出短促的提示音，电源将自动关闭。


- 自动关机

如果主机在待机模式5分钟内未有使用，会发出短促的提示音并自动关机。


使用前

为主机充电

使用家用电源插座

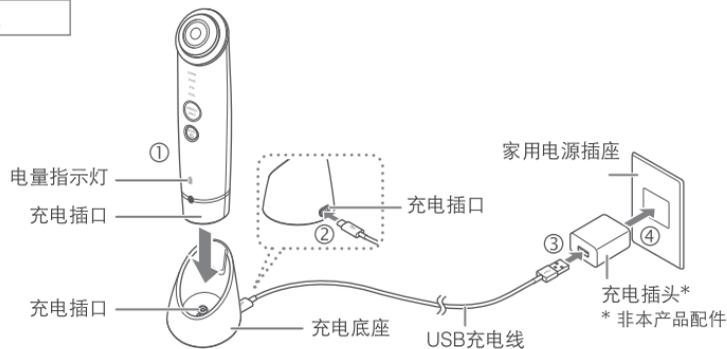

使用电脑

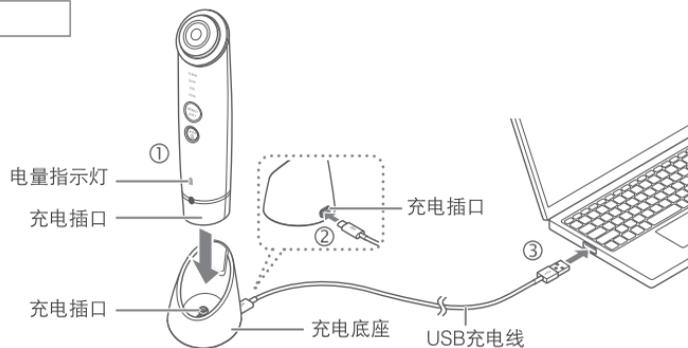

要开始充电，请将主机放在连接到USB充电线的充电底座上，如图所示。

* 如果约10秒后仍未开始充电，请检查USB充电线和充电插口是否已正确连接。

充电	电量指示灯呈白灯闪烁。
充电完成时	电量指示灯呈白灯亮起5秒钟后熄灭。
充电时间	约3小时(室温约25°C)。 实际充电时间将根据剩余电池电量、充电环境及所使用的充电插头(另购)而有所不同。
运作时间	约30分钟(DYHP模式下最大输出功率)。 实际运行时间将根据剩余电量和使用环境而有所不同。

可以通过电量指示灯检查剩余电量。

电量指示灯	
白灯	电量充足。
红灯	电量不足。
红灯闪烁	充电中。

注意

- 使用充电插头(另购)时, 请勿使用电源拖板, 请直接插入墙壁插座。
- 首次使用产品前请将电池完全充满。
- 首次使用产品或长时间未使用时, 即使显示电量已满, 也可能无法长时间使用。此时, 请在使用产品前先充电。
- 仅使用原装附的USB充电线。
- 请勿在浴室或洗手间等高温潮湿的场所为产品充电。

皮肤适应测试

首次使用本产品时，请务必先测试与皮肤的适应性。

注意

- 请务必进行皮肤适应测试，以防发生皮肤问题。
- 如果测试部位出现皮疹、红肿、瘙痒、刺痛感等异常情况，请立即停止测试。
- 使用产品前请仔细检查皮肤无异常情况。如果皮肤感觉异常，请立即停止使用本产品。

1

用肥皂和水清洗手臂内侧，然后用毛巾擦干。

一定要彻底抹去水分。

2

将护肤品涂抹在皮肤上，并选择DYHP模式下的强度1测试约5分钟 (P.20)。

3

确保没有出现皮肤异常。

如在24小时内皮肤没有出现发红或灼热感时，可继续使用本产品。



护理方法

注意事项

使用前请仔细阅读以下注意事项并按照其指示使用。

- 首次使用产品前，请务必进行皮肤适应测试(P.15)。
- 使用时，请务必在皮肤上保持滑动主机。持续在同一部位使用可能会导致灼伤。
(EYE CARE模式和COOL模式除外)
- RF(射频)的温度根据所使用的护肤品类型和护理时的皮肤状况而有所变化。
- 请勿在上眼睑 (COOL模式除外)、下眼睑或外眼角 (EYE CARE模式和COOL模式除外)上使用。
* LED灯可用于上眼睑、下眼睑和外眼角。请闭上眼睛，让电极头距离皮肤至少5厘米。请勿直视LED灯。
- 握住机身时，请确保握住手触电极位置。
- 建议使用环境温度：15°C至30°C

模式

	模式	技术	化妆棉	推荐护肤品*1	操作时间	强度等级	推荐频率
日常护理	DAILY	<ul style="list-style-type: none"> · RF 射频 · EMS · 离子导入 · LED (红色) 	×	精华	约3分钟	3个级别	每日 ²
周间护理	CLEAN	<ul style="list-style-type: none"> · RF 射频 · 离子导入 · 震动 (仅在离子导出时) 	✓	爽肤水	约3分钟	3个级别	每周 2-3次
	DYHP	<ul style="list-style-type: none"> · RF 射频 · DYHP · LED (红色) 	可使用或 不使用化妆棉	精华	约5分钟	3个级别	
	EYE CARE	<ul style="list-style-type: none"> · EMS · 微电流 	×	眼部精华	约2分钟	3个级别	每周 2-3次 ³

	模式	技术	化妆棉	推荐护肤品*1	操作时间	强度等级	推荐频率
周间护理	COOL	<ul style="list-style-type: none"> • 冰敷 • LED (蓝色) 	×	直接贴在皮肤上 *4	约3分钟	-	每日 *5

*1：请确保使用的护肤品是水溶性。请勿使用油性或磨砂类的护肤品。

否则可能会导致产品无法正常运作或引起皮肤问题。

*2：请勿与周间护理模式在同一天内使用 (EYE CARE模式和COOL模式除外)。

*3：如眼睛周围皮肤干燥，建议每周使用5次。


*4：建议先用乳液或其他护肤品润湿皮肤后再使用。

*5：上述建议仅供参考。请按个人皮肤状况调整使用频率。

将化妆棉固定在电极头上

1

从电极头上取下化妆棉固定扣。

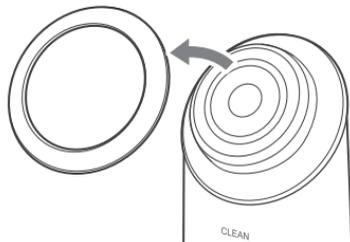

2

将化妆棉放在电极头上，然后将化妆棉固定扣向下压并固定化妆棉上。

- 如化妆棉固定扣不能正确套在护理头上，请使用更大更薄的化妆棉。由于厚化妆棉难以固定，使用前请将对半撕开。
- 如化妆棉太厚，皮肤对RF射频护理的温热感可能会变弱。

3

使用爽肤水/精华润湿化妆棉。

- 确保爽肤水/精华能润湿整个电极头的表面。

注意

- 如化妆棉变干，请补充爽肤水/精华。

基本使用方法

1

卸妆并清洁脸部。

- 在护理前先清除皮肤上的油脂和污垢，让皮肤处于清洁状态。

* COOL模式可在化妆后使用。

2


将化妆棉固定在电极头上。请使用爽肤水/精华湿润化妆棉。

关于安装化妆棉的方法，请参阅P.19。

3

开启电源。

- 按住电源/强度按钮 (按住按钮约3秒或以上)。主机将发出提示音，模式按钮(DAILY)亮起，启动DAILY模式。

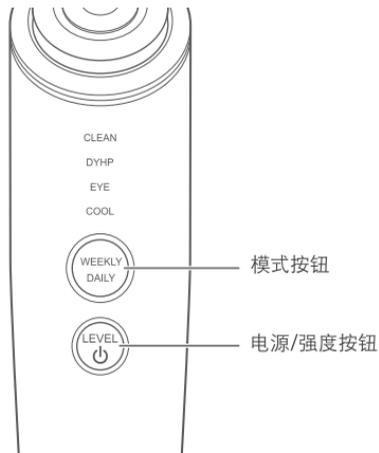


4

选择模式。

要更换模式，请长按或短按模式按钮。

如选择日常护理，模式按钮 (DAILY) 会亮起。

如选择周间护理，模式按钮 (WEEKLY) 及所选的模式指示灯会亮起。

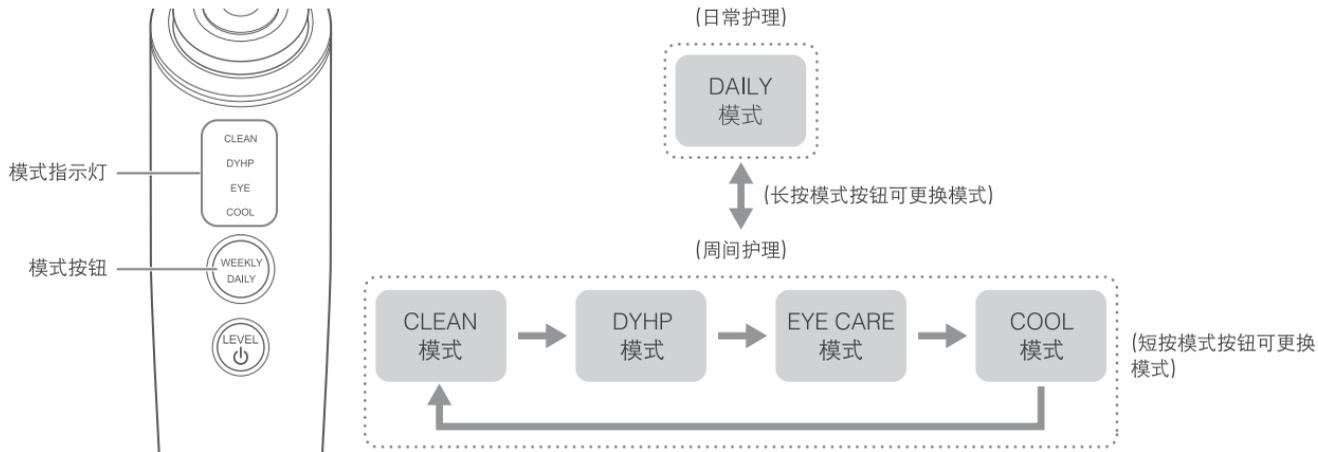


- 长按模式按钮可在日常护理和周间护理之间切换。
- 在周间护理模式下长按模式按钮可切换至DAILY模式。

有关各种模式的功能，请参阅“模式” (P.17-18)。

5

选择护理级别(强度)(COOL模式除外)。

• 每次短按电源/强度按钮时，主机都会发出一次提示音并转换强度。

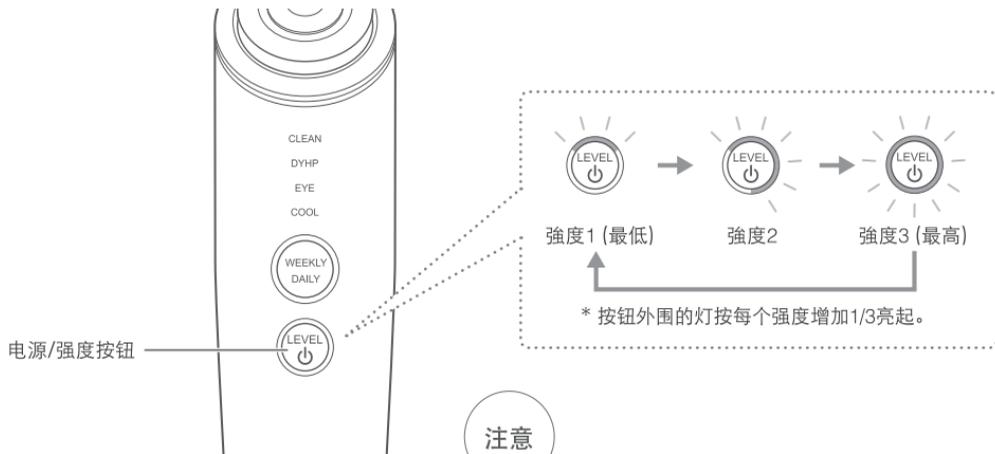

注意

- 请从强度1上开始使用产品。
- 请勿在感觉到疼痛的位置使用本产品。

6

握住机身，手触机身背面的手触电极（银色金属片）。

- 如手没有接触手触电极，则无法正常运作。

7

将电极头贴在皮肤上滑动。

- 日常模式结束后，电源将自动关闭。
- 当周间护理模式下的各个护理程序完成后，主机将进入待机状态（COOL模式时除外），选择模式以开始下一个模式。
- 如想在使用过程中关闭电源，请按住电源/强度按钮。

- 请参阅“滑动方式”（P.24-26）以了解使用方法。
- 关于每种模式的使用时间，请参阅P.17-18。

注意

- 使用时，确保电极头紧贴着皮肤。

8

护理后修护皮肤。

- 完成护理后，再按日常使用的护肤品进行修护。

注意

- 每次使用后请清洁主机（P.27）。

滑动方式

- 建议滑动的速度：约每秒2厘米
*如感觉电极头温度太热，请加速滑动。
- 如发出一声短促的提示音，表示操作时间已过一半。
当听到提示音时，可开始护理另一侧脸颊。

注意

- 请将电极头完全接触皮肤上使用。
- 使用时请将主机贴于皮肤上使用(在EYE CARE模式和COOL模式下使用时除外)。在同一位置持续使用可能会导致灼伤或低温灼伤。
- 请勿在上眼睑(COOL 模式除外)、下眼睑或外眼角(EYE CARE模式和COOL 模式除外)上使用。
*LED灯可用于上眼睑、下眼睑和外眼角。请闭上眼睛，让电极头距离皮肤至少5厘米。
请勿直视LED灯。


DAILY模式

按下图所示箭头方向将电极头在皮肤上滑动。
LED灯可用于护理上眼睑、下眼睑和外眼角。




CLEAN 模式

按下图所示箭头方向将电极头在皮肤上滑动。

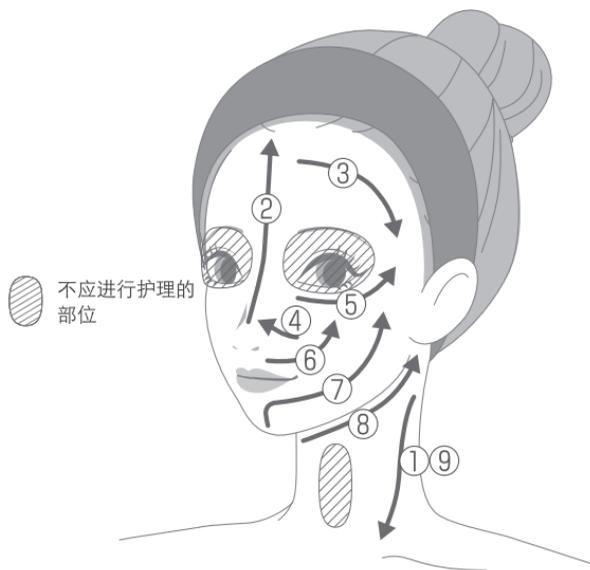

DYHP 模式

按下图所示箭头方向将电极头在皮肤上滑动。
LED灯可用于护理上眼睑、下眼睑和外眼角。

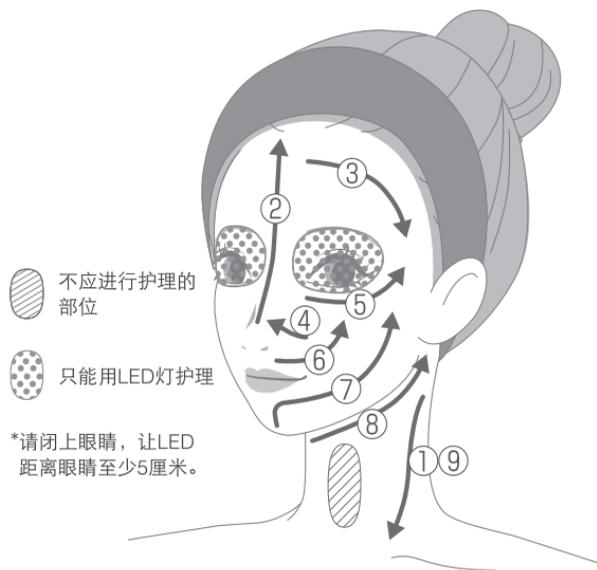


EYE CARE 模式

将电极头从内眼角移至外眼角重覆地点按在脸部(点按 → 放开 → 移动电极头)。
向下按压皮肤约3秒。如担心眼睛周围皮肤干燥, 建议每天使用2次, 每次护理2分钟, 每周5次。

* 请勿连续按压皮肤超过3秒。

* 按压时请勿滑动主机。

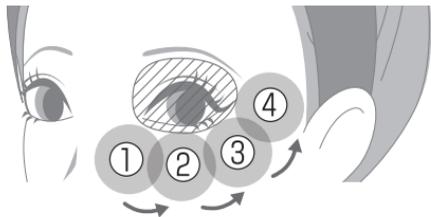

不应护理的部位: 上眼睑

* 本产品可用于下眼睑和外眼角周围。

COOL 模式

将电极头重覆地点按在脸部(点按 → 放开 → 移动电极头)。

* 此模式也可用于上眼睑、下眼睑和外眼角。

* 在眼脸上使用LED灯时, 请务必闭上眼睛, 并确保使电极距离皮肤至少5厘米。

护理后

清洁

为保持卫生，每次使用后请清洁机身。

警告

- 清洁主机时，请检查并确保主机并非正常充电及电源已关闭。

1

要清洁主机和电极头，请用扭干水分的湿布擦拭以除去污垢。
将化妆棉固定扣从主机上取下并用水清洗。

2

用干布擦拭整个机身，抹去所有水分后再妥善保存。

注意

- 请勿将水溅到主机及充电底座上，或将其浸入水中。
- 请勿残留护肤品于机身上。
- 确保充电插口上没有残留水分。
- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、煤油、化学品或抛光粉等溶剂擦拭主机。



保存

- 如果长时间不使用本产品，请在存放前清洁主机。
- 闲置时请拔除USB充电线。
- 避免将主机存放在靠近暖炉、浴室或其他高温潮湿的场所。另外，请避免放在不稳定的地方或阳光直射的地方。
- 请将本产品放置于儿童无法触碰的地方。

维修和检查

- 如长时间未使用本产品，请仔细检查并确认其运作正常且安全后再使用。
- 如果产品出现故障，安排维修前请参阅“排除故障”(P.29)并尝试找出问题。如果问题仍然存在，请联系经销商。
- 如产品出现故障、损坏或需要维修，请联系经销商。

其他须知

排除故障

如果在使用本产品时感到任何异常，安排维修前请检查以下症状。

症状	可能的原因和解决方法
无法开机	→ 按住电源/强度按钮约3秒或以上(P.20)。
	→ 主机电量耗尽，请充电(P.13)。
未能充电	→ 正确地插入充电插头(另购)或USB充电线(P.13)。
	→ 请确保主机正确放置在充电底座上(P.13)。
机身过热	→ 产品正在连续使用。请关闭电源并等待至少一小时后再次使用。
强度级别不变	→ COOL模式无法选择强度级别。
COOL模式没有冰感	→ 连续使用COOL模式。请关闭电源并等待至少30分钟后再次使用。
	→ 产品在非建议的环境温度中使用。请在15°C至30°C的环境温度范围内使用。
EMS感觉过强 (有刺痛感、疼痛)	→ 按电源/强度按钮降低强度。
	→ 电极头表面没有完全接触皮肤。请使用镜子检查电极头表面是否完全接触皮肤。

症状	可能的原因和解决方法
EMS强度太低 (或感觉不到)	→ 按电源/强度按钮增加强度水平。
	→ 皮肤缺乏水分。使用前请用护肤品润湿皮肤及双手。
	→ 没有贴合在肌肉上。请将电极头沿着肌肉滑动 (P.24)。
	→ 电量不足。请充电。
护理温度过高 (在COOL模式下使用时除外)	→ 使用时没有滑动电极头。 除COOL模式外，请务必在护理时将电极头贴在皮肤上滑动。
	→ 速度太慢，加快滑动速度。
没有温热感	→ 正处于待机或自动关闭状态 (P.12)。请按模式按钮启动选择的模式 (P.17)。
	→ 皮肤缺乏水分。使用前请用护肤品润湿皮肤。
	→ 滑动的速度太快。稍微减慢移动速度。
	→ 充电不足。请充电。

常见问题

Q 每次应该使用多少爽肤水/精华？

A 建议使用化妆棉时，确保整个电极头上的化妆棉已完全润湿。
如认为不够湿润，建议补充更多爽肤水/精华。

Q 建议的使用频率和时间是多少？

A 建议按以下时间使用：
[日常护理]
• DAILY模式：每次护理3分钟，每天一次
[周间护理]
• CLEAN模式：每次护理3分钟，每天一次，每周2至3次。
• DYHP模式：每次护理5分钟，每天一次，每周2至3次。
• EYE CARE模式：每次护理2分钟，每天一次，每周2至3次。
-如担心眼睛周围皮肤干燥，建议每次护理2分钟，每天两次，每週5次。
• COOL模式：每次护理3分钟，每天一次。
-请按个人皮肤状况调整使用频率，例如每周2至3次。
请勿在同一天内使用日常护理和周间护理 (EYE CARE模式和COOL模式除外)。
如只单独使用一种模式，也请采用上述建议。

Q 在DAILY/CLEAN/DYHP/EYE CARE模式下使用时，感觉不到RF射频的温热感。

A 请缓慢地移动电极头或稍微用力按压皮肤表面，也有可能是化妆棉上的水分不够。请补充更多爽肤水/精华。

Q 化妆棉上没有看到导出的污垢。

A 即使眼睛看不见的污垢也会被导出。化妆棉上可见导出的污垢状态也因人而异。

Q 使用RF射频模式时，电极头没有温热感。

A RF射频不是让电极头发热，而是通过射频让真皮层发热。

产品规格

额定输入	5V DC 1.0 A (充电底座)
额定输出	9V DC 0.55 A(充电底座)
功率	约4.5 W (充电时)
电 池	锂离子电池
充 电 时 间	约3小时 * 实际充电时间会因剩余电量、充电环境及所使用的充电插头(另购)而异。
运 作 时 间	大约30分钟(按DYHP模式下最大输出功率) * 实际充电时间和运作时间会因剩余电量和充电环境而异。
外 形 尺 寸	主机(连化妆棉固定扣): 约W47 x D44 x H176 (mm)
产 品 重 量	主机(连化妆棉固定扣): 约210g
材 质	主机: ABS树脂和矽胶 电极头: PET树脂和不锈钢 手触电极: 不锈钢
生 产 国	日本
配 件	充电底座一个 USB充电线 (USB Type-C™)一条 化妆棉固定扣 (购买时已装置在主机电极头上) 使用说明书
建议环境温度	15°C至30°C

弃置产品

充电池

- 本产品内置充电池，必须由技术人员更换。
- 充电池属消耗品 (不属于保养范围内)。
- 电池一般可充电约300次。如完全充电后操作时间仍非常短，表示电池寿命可能已完结。
- 如需更换电池，请联系经销商。

弃置

- 请遵循当地政府的规定正确弃置本产品。
- 本产品使用锂离子电池。关于弃置电池，请参阅以下“弃置电池”和“取出电池”(P.34)。

弃置电池

本产品使用的锂离子电池是可回收资源。

- 弃置电池前，请必须将其从主机中取出。
- 取出电池前，请务必关闭电源并拔除充电器(另购)。
- 使用螺丝批取出电池时请小心不要弄伤自己。
- 取出电池时，请小心不要被硬物损坏。*否则可能会导致发热或起火。
- 请遵照当地政府规定弃置或回收本产品。

正确弃置产品


- 该标志表示，在英国和欧盟范围内，该产品不应与其他家庭垃圾一起弃置。为了防止不当处置废物可能对环境或人类健康造成危害，负责任地回收废物，以促进物资可持续再利用，请遵循当地政府的规定正确弃置本产品。



取出电池


1

用尖细的工具移除螺丝盖和橡胶垫，然后拆下螺丝。

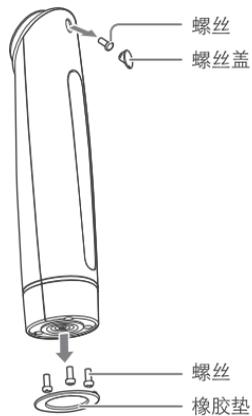


2

拆除底盖。

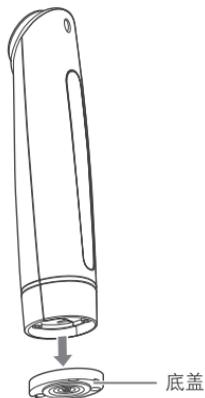


3

拆除后盖。

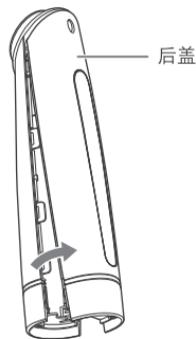


4

拆除电池连接线。

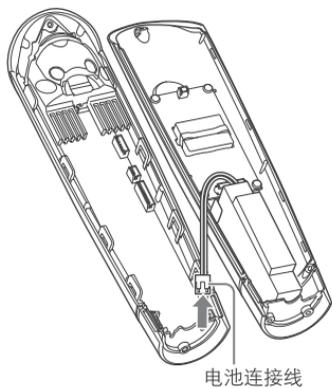

5

取出电池。

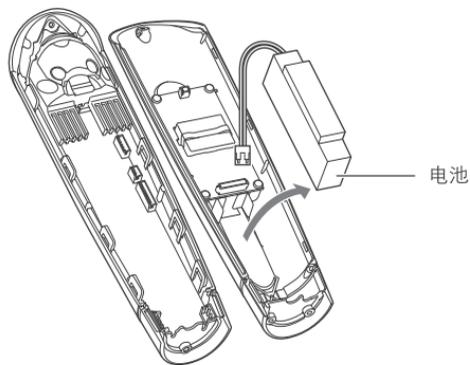

注意

● 上图用于弃置产品时操作图，并非用于维修产品。

除弃置产品外，请勿拆卸本产品。否则可能会导致火灾、触电或其他损伤。

