

雅萌

保管用

附保修卡

使用说明书

家用美容仪		Photo Plus Shiny		M18	
目录	前言	1	使用后	26	
	安全注意事项	1	须知	28	
	海外使用注意事项	9	●疑似故障	28	
	各部位的名称及功能	10	●常见问题	30	
	使用前	12	●产品规格	31	
	使用方法	15	售后服务	32	



No. _____

保 修 卡

凭卡修理

品 类	家用美容仪	型 号	M18
名 称	Photo Plus Shiny		
保 修	对 象	时 间	
	主 机	自 购 买 本 产 品 当 日 起 1 年 内	
※ 经 销 商	门店名称/地址/联系电话		
	请贴上标有购买日期的 明细或者将其与本质保书 一起保管。		

请经销商将带有※的必填栏填写完毕相关的信息,然后交回客户保管。

“雅萌”是ヤーマン（YA-MAN）株式会社の注册商标

制造厂家

ヤーマン株式会社

邮编135-0045 东京都江东区古石场1-4-4
日本官方网站 : <http://www.ya-man.com>

本保修卡承诺根据记录的内容免费维修。

左列“免费保修期”内发生故障时,请您携带本产品及保修卡前往购买本品的经销商进行维修。

- 如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期或没有购买明细,则此保修卡无效。
- 本保修卡不接受补办,请妥善保管。

前言

非常感谢您购买雅萌产品

- 为确保正确、安全使用，请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后，请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让给他人时，请务必附带使用说明书。

安全注意事项

- 使用前，请仔细阅读“安全注意事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时，请立即停止使用。
- 如果在故障状态下使用，可能会对身体产生不良影响，请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度，将因误操作而发生的状况分为“危险”、“警告”、“注意”。

●关于注意事项



危险 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。



警告 不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。



注意 不正当使用本产品可能会导致人身伤害或引起财物受损。

* 所谓财物受损，是指波及房屋、家具以及家畜、宠物的损害。

●关于标识符号



表示禁止的事项。



表示务必遵守的事项。



表示务必注意的事项。

危险（关于使用和保管）

● 以下人员请勿使用

可能会导致医用电子仪器误操作

◆ 正在使用以下医用电子仪器人员

心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器，人造心肺机等维持生命用医用电子仪器，心电图描写器等穿戴型医用电子仪器



禁止

警告（关于使用和保管）

● 具有以下情况人群, 请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

- 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者、自身免疫性疾病患者
- 酒后人群、无法表达自己意识的人群、无法感知温度以及刺激的人群

● 以下部位请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

- 体内接受过金属植入等外科手术的部位、骨折部位、皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常的部位
- 口腔内、阴部、粘膜处、眼球、眼皮（眼窝）、喉咙、凸起的痣、病毒性疣

● 以下人群请慎重, 使用前请咨询专业医生后再使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

- 高血压患者、急性病患者、传染病患者、恶性肿瘤和血液病患者、糖尿病等高度末梢循环功能障碍导致的知觉障碍、神经障碍者
- 皮肤病患者、遗传性皮炎患者、易过敏体质人群、发热或体温异常者、住院且服药人群、孕期以及哺乳期人群、高度近视者（-6D以上）
- 接受过整形外科或美容外科手术的人群、接受整形外科、美容外科手术仍在恢复期的部位（如出血、肿胀、结痂等）

※若自身无法判断是否可以使用时, 请先征询专业医生的意见。



禁止

 警告（关于使用和保养）

● 请勿在肌肤较薄的部位、骨骼上方处长时间使用。
会造成肌肤及身体的损伤。

● 请勿用于面部以外的部位。
会引起受伤。

● 请确保滑动使用（EYE、COOL模式除外），请勿长时间贴于同一部位使用，请勿用于护理头无法完全贴合的部位。
会造成烫伤或低温烫伤。

● 请勿投入火中或在高温、高热环境下充电、使用以及放置。
会引起发热、着火或故障。

● 请勿在易燃物品附近使用（酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、喷雾等）。
会引起发热、着火或受伤。

● 请勿在下列环境中保管或使用。

- 灰尘多、阳光直射的场所
- 易倾斜、震动、碰撞的场所；屋外
- 电磁波或磁场较强的场所
- 儿童可触碰到的场所；有油烟、水蒸气的场所
- 温度变化剧烈的场所（空调、暖气旁边等）

会引起火灾、触电、事故或故障等。

● 散发异味及异常发热时停止使用。
会引起损坏或着火。



禁止

● 请勿将重物压在主机上，使用时请勿跌落或碰撞。
会引起故障或受伤。



禁止碰撞

● 请勿放置于不稳定的场所。请勿跌落或碰撞主机。
会引起机械故障，造成脚部受伤等。



禁止跌落

● 请勿让儿童使用及避免残疾人士单独使用。未成年人请在征得监护者同意并陪同下使用。
会引起故障或受伤。



使用限制

● 请勿让无法表达自己意愿、肌肤感知能力非常不敏感的人士使用。
会引起故障或受伤。

● 请将主机、AC适配器置于儿童接触不到的场所，勿让儿童使用或玩耍。
会引起故障或受伤。



散发异味及
异常发热时
禁止使用

● 请勿用于操作说明书中注明的以外用途。
会引起受伤、产品故障等。



禁止用于
其他用途

警告（关于使用和保管）

- 请避免在饮水处、浴室内以及洗澡时使用。
主机沾水后,可能会引起触电、短路、故障或着火。
- 请勿用水冲洗主机,或使其沾水、浸水。
主机沾水后,可能会引起触电、短路、故障或着火。



禁止有水
处使用

- 请勿拆分、修理和改造主机。
会造成火灾、触电或受伤。
维修事宜请咨询经销商。



禁止拆机

- 初次使用时,请务必事先进行肌肤适应性测试。
会造成事故或受伤。
- 正在进行牙齿治疗的人、牙齿内有填充物的人,请调低档位,调整使用部位后再使用。
EMS可能会造成面颊、下颚有较强的刺激感,若感到强烈不适时,请立即停止使用并咨询专业医生。
- 主机混入水、异物等情况,请立即关闭电源停止使用,并联系经销商。
会造成火灾或触电。



务必遵守

警告（关于使用和保管）

- 请勿放置在火旁、烈日下、浴室等高温潮湿的场所。请勿投入火中。请勿在加热、高温的环境下充电、使用和放置。
另外、请勿靠近发热器具。
本产品内置充电电池。会引起发热、着火或破裂。



火灾警告

- 请勿放入微波炉或高压容器中。
会引起发热、着火或破裂。



破裂警告

注意（关于使用和保管）

- 请勿集中在一处强力按压使用。
强力按压或者集中在一处使用的话，容易造成肌肤受伤。
- 请勿将护理头与其他金属物质碰撞。
会造成发热、火灾、故障、破损等。
- 使用前，请确认护理头是否有开裂、破损、变形等问题。如发现有，请勿使用。
会造成肌肤损失、故障等。
- 请勿在极热、极寒等极端环境下使用。
推荐使用环境温度：约15°C~30°C。



禁止

注意（关于使用和保管）

- 请勿使用酒精、稀释剂、苯、洗甲水、汽油等溶剂、化学品、研磨粉等擦拭主机或充电底座。
会造成主机表面划伤。
- 请勿给宠物使用。
会导致受伤。
- 电源开启时，请勿放置于地板或家具上。使用后，请立即关闭电源。
会造成家具损伤或导致受伤。
- 电源开启时，请勿与其他电子产品（电热毯、被炉等）接触使用。
会造成故障或受伤。
- 请勿连续使用COOL模式。
连续使用的话，会造成冷感体感越来越弱。
请间隔30分钟以上再使用。
- 请勿与去角质护肤品或去角质面膜搭配使用。
会造成肌肤问题。



禁止

- 使用时请摘掉金属饰品（手表、项链、戒指、耳环等）。
会造成事故或受伤。
- 初次使用或尚未适应前，请务必从1档开始使用。
会造成事故或受伤。
- 使用中若感到不适，请立即停止使用。
会造成事故或受伤。



务必遵守

注意（关于使用和保管）

- 护理头和肌肤之间请及时补充护肤品,保持水润。
护肤品过少时传导性会变差,可能会引起肌肤问题。
- 肌肤表面有刺痛感的情况,请调低档位、更换使用部位,并补充化妆水等滋润皮肤后再使用。
会造成皮肤刺痛感。
- 使用前,请先清洁护理头。
会引起肌肤问题。
- 使用中若感到不适,请立即停止使用。
肌肤感到不适时, 请立即停止使用。
- 请根据下列时间和频率进行使用。
 - 【日护理】
 - DAILY模式: 1次3分钟, 1天1次, 可每天使用(不与周护理同一天使用)
 - 【周护理】
 - 「CLEAN」模式: 1次3分钟, 1周2-3次
 - 「DYHP」模式: 1次5分钟, 1周2-3次
 - 「EYE」模式: 1次2分钟, 1周2-3次(眼周干燥时,可最多1天2次, 1周5天)
 - 「COOL」模式: 1次3分钟, 1周2-3次(可根据个人需求每天使用)

请勿同时使用【日护理】和【周护理】。
- 请勿同一部位(连续「EYE」模式除外)。
若想同一部位再次使用, 请至少间隔24小时以上。
过度使用可能会损伤肌肤。
上述时间和频率仅供参考, 请结合自身肌肤状态, 进行使用。
- 使用后,请参照【使用后】(P.26) 要求,对主机上的脏污或护肤品进行清理。
会造成事故或故障。



务必遵守

警告 (关于电源)

- 请勿损坏、加工、任意弯折、拉扯、扭拧、捆扎充电用USB充电线。
请勿在USB充电线上放置重物,或扭拧等,造成USB充电线破损,会引起火灾或触电。



禁止粗暴使用

- 移动、拿起产品时,请勿拉扯USB充电线。
会引起触电、短路、火灾或接触不良等。



禁止拉扯充电线

- USB充电线受损或松动时,请停止使用。
会引起触电、短路、火灾或接触不良等。
维修事宜请咨询经销商或拨打雅萌中国官方总代理客户服务热线(P.32)进行咨询。



禁止使用已破损充电线

- 从主机或插座上拔下USB充电线时,请务必手持USB前端拔出(请勿触碰金属部位)。
另外,请勿湿手插拔。
会引起触电、短路、火灾。



拔下插头

- 护理机器时,请务必关闭电源。不使用时,请拔掉USB充电线。
另外,请勿湿手插拔。
会引起触电、短路、火灾。

- 请勿让USB充电线沾水、浸水或水洗。
会引起触电、短路、火灾。



禁止沾水

- 请使用充电底座进行充电,并确保USB充电线切实插入。
会引起触电、短路、火灾。



务必遵守

- 本产品请务必使用原装USB充电线。另外,使用AC适配器(非标配)时,请使用符合国家通用标准4706.1要求的适配器,请直接插入墙上插座,勿使用排插。
会引起触电、短路、火灾。

- 请确认好充电端口与USB充电线未残留化妆品或沾水后再充电。
会引起触电、短路、火灾。

- 万一发生异常,请立即切断电源,停止使用。
发生功能异常、冒烟、异响、异味等不良的情况,请立即停止使用。

- 雷电天气、地震等情况,请立即停止使用并切断电源。正在充电的情况下,请拔出USB充电线。

- 充电底座内有化妆品残留时,请勿充电。



禁止

海外使用注意事项



警告

- 请使用充电底座进行充电。
会造成触电、火灾或短路。



务必遵守

- 请确认插头、电压情况后再使用。
会造成触电、火灾或短路。




火灾警告

- 有时因地区、住宿地不同,插头形状、电压也稍有不同。请务必确认后再使用。
- 关于插头转换器请咨询经销商。


各个部位的名称和功能

主机

● 正面

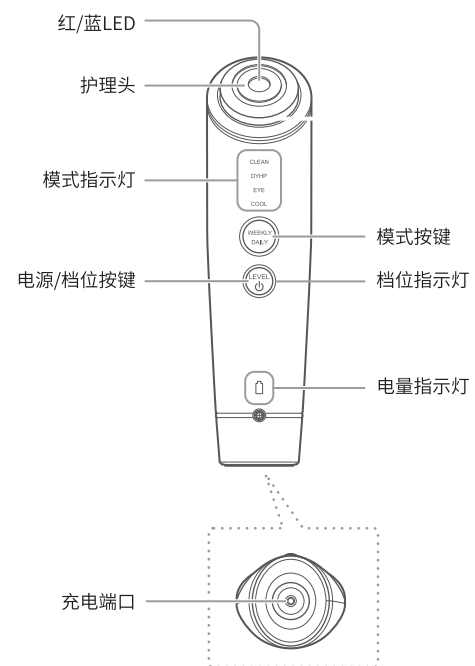

● 背面

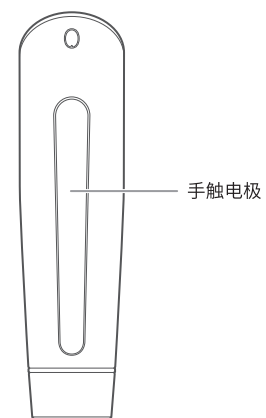

配件

● 充电底座



● 化妆棉固定扣 (购买时, 已装置在主机护理头上)



可将化妆棉固定在护理头上。(P.18)

● 充电用USB线 (USB Type-C™)*

● 使用说明书 (附保修卡)

※本机专用配件, 充电时务必搭配使用。

※为提升品质, 主机和配件的设计和规格如有改变, 恕不另行通知。

功能

提醒功能

操作时间过半时, 会响起【嘀】的提示音。
每个模式的操作时间, 请参考P.16~17。

待机功能 (仅支持周护理)

模式结束时响起【滴滴滴】的提示音, 下一个模式指示灯开始闪烁并进入待机状态 (待机状态 = 功能停止运行状态)。
每个模式的操作时间, 请参考P.16~17。
再次短按模式按键, 指示灯闪烁中的模式开始启动。
COOL模式结束时, 会发出【滴滴】的声音, 自动关机。


自动断电功能

待机状态保持5分钟后, 会发出【滴滴】的提示音, 自动关机。


使用前

充电

使用家用插座

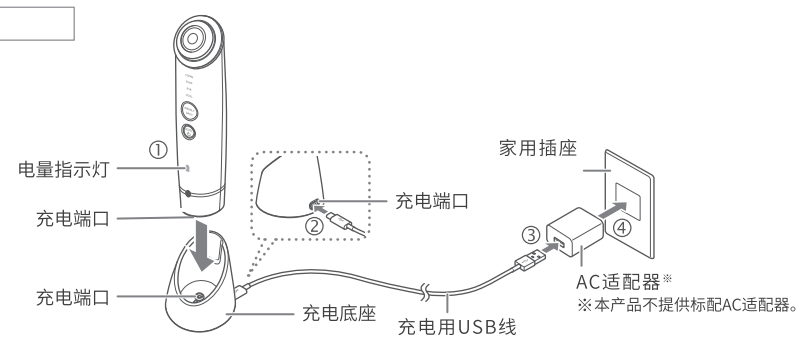

使用电脑

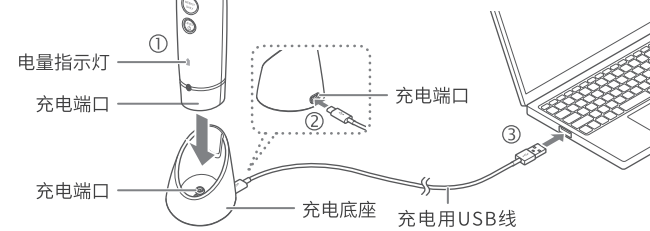

请参考上图，充电时使用USB线连接充电底座进行充电。

※ 经过10秒后仍无法正常充电，请确认USB线或AC适配器（非标配）的插口是否松动。

充电中	电量指示灯闪烁(白灯)。
充电结束	电量指示灯闪烁5秒后(白灯), 灭灯。
充电时间	约3小时(室温约25℃) 因充电环境、剩余电量以及AC适配器(非标配)的不同, 充电时间也稍有不同。
使用时间	约30分钟(DYHP模式最大输出时) 因使用环境、使用档位、剩余电量的不同, 可使用时间也会稍有不同。

电量指示灯表示方式。

电量指示灯	
白灯	电量充足。
亮红灯	电量不足, 请充电。
红灯闪烁	即将关机, 请充电。

注意

- 使用AC适配器(非标配)充电时, 请勿使用排插, 直接插入墙壁插座充电。
- 首次充电时, 请务必充满电以后再使用。
- 初次使用或长时间不使用时, 即使电量显示充足, 也可能只能使用很短时间。请充电后再使用。
- 请使用原装USB充电线。
- 请勿在浴室、洗漱台等高温高湿的场所使用。

肌肤适应性测试

第一次使用时,请务必提前测试产品与肌肤的适应性。



注意

- 为防止发生肌肤问题,请务必事先测试。
- 测试部位出现起疹、发红、发痒、刺痛等异常情况时,请立即停止测试。
- 肌肤感觉异常时请勿使用。

1

用肥皂等产品清洁手臂内侧,并用毛巾等擦干。

请务必完全擦干,不留任何水分。

2

请在肌肤上涂上护肤品,并选择DYHP模式的1档测试3分钟 (P.19)。

3

请确认肌肤无异常情况。

如果24小时内肌肤没有泛红或发烫等异常情况,即可使用本产品。



使用方法

使用注意事项

使用前，请仔细阅读下列注意事项。

- 初次使用本产品时，务必做过肌肤适应性测试后再使用（P.14）。
- 请务必参考使用手法滑动使用。（眼部、冰敷模式除外）
- 使用RF(射频)时，根据护肤品的功能以及品牌的不同，温感也会有所不同。
- 请勿用于上眼睑、眼眶骨内肌肤。
- 使用时，请务必紧握手触电极。
- 推荐使用环境温度：约15°C~30°C。

模式介绍

	模式	技术	是否搭配化妆棉	推荐护肤品 ^{※1}	时间	档位	使用频率 (参考)
日护理	DAILY	• EMS • 离子导入 • LED (红)	×	化妆水或精华	约 3 分钟	3 档	每天 ^{※2} (不与周护理模式同一天使用)
周护理	CLEAN	• RF • 离子导出 • 震动 (仅离子导出时)	√	化妆水	约 3 分钟	3 档	2~3 次/周
	DYHP	• RF • DYHP超渗透导入 • LED (红) • EMS	×	精华或面膜	约 5 分钟	3 档	
	EYE	• RF • 微电流	×	眼部护肤品	约 2 分钟	3 档	2~3 次/周 ^{※3}

	模式	技术	化妆棉	推荐护肤品 ^{※1}	时间	档位	使用频率 (参考)
周护理	COOL	• 冰敷 • LED (蓝)	×	乳液或面霜 ^{※4}	约 3 分钟	-	2~3 次/周 ^{※5}

※1 使用个人护肤品时,请务必使用水溶性护肤品。请勿使用油性、磨砂类护肤品。
会造成机器故障或肌肤问题。

※2 请勿与周护理模式同一天使用(EYE、COOL模式除外)。


※3 眼周干燥时,可最多1天2次,1周5天。

※4 为加强保湿、护理效果,可使用乳液、面霜等进行护肤后再使用本模式。

※5 可根据个人需求每天使用。

化妆棉的使用方法

1 从护理头上取下化妆棉固定扣。

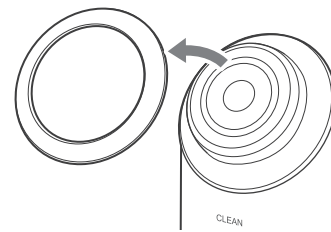

2 将1张化妆棉放于护理头上,再将化妆棉固定扣推入,固定好化妆棉。
•固定扣无法固定化妆棉的时候,请更换更大更薄的化妆棉。厚款化妆棉较难固定,使用时请先对半撕开。
•如化妆棉过厚,肌肤对RF的温热感觉可能会变弱。

3 请使用化妆水充分湿润护理头上的化妆棉。
•搭配护肤品时,务必确保护肤品完全沾湿护理头。

注意

• 如化妆棉变得干燥,请及时补充护肤品。

基本使用方法

1

卸妆、清洁脸部。

- 去除肌肤油脂和脏污,保持肌肤干净清爽。
- ※ 上妆后也可使用冰敷模式。

2

根据护理需求,搭配护肤品使用。

- ※ 使用时,请先将护肤品充分涂抹于肌肤上。
- ※ 需注意,使用周护理的CLEAN模式时,请先在护理头上装置化妆棉,并用化妆水浸润化妆棉后再使用。


化妆棉的安装方式请参考P.18。

3

开机

长按电源/档位按键 (约3秒以上)

【滴滴】声后,模式按键灯(DAILY)亮灯,DAILY模式启动。

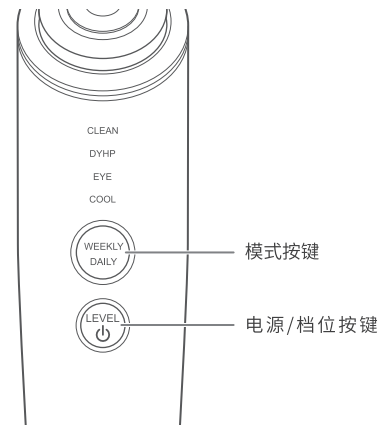


4

选择需求模式

长按模式按键, 切换日/周护理; 短按模式按键, 切换周护理的4个模式。

选择日护理时, 模式按键 (DAILY) 亮灯。


选择周护理时, 模式按键 (WEEKLY) 和所选模式指示灯同时亮灯。

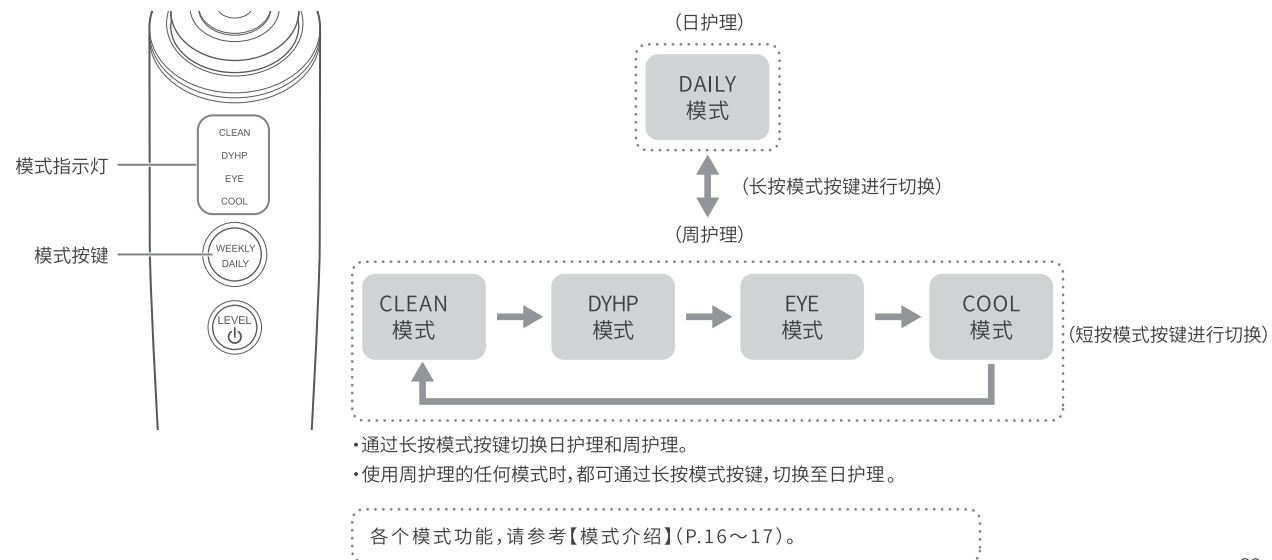

5

选择需求档位(强度)(COOL模式除外)

•短按电源按键/档位按键,【嘀】声后切换档位。

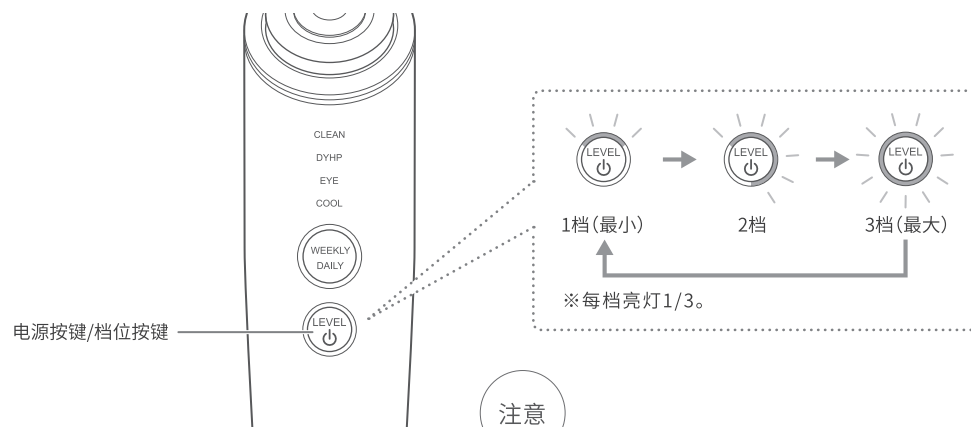

注意

- 初次使用时,请从1档开始。
- 肌肤感到疼痛时表示档位过高,请调低档位后再使用。

6

使用时,请紧握手触电极(背部银色金属电极条)。

- 如不握住手触电极,可能会无法正常使用。

8

护理后,请进行仪器的清洁与保养。

- 使用后可按照个人需求决定是否再进行肌肤护理。

7

请将整个护理头表面贴于肌肤使用。

- 日护理结束后会自动关机。
- 周护理的各个模式结束后,进入待机状态(COOL模式除外)。

短按模式按键,进入下一个护理模式。

- 中途想要关闭电源时,请长按电源/档位按键。

注意

- 每次使用结束后,请对仪器进行清洁和保养(P.26)。

注意

- 使用时,请务必确认护理头完全贴于肌肤上。

滑动方式

- 参考滑动速度：2cm/秒。
※如果热感变强，请加快滑动速度。
- 操作时间过半时，会想起【嘀】声提醒换脸使用。


日护理

如下图所示，请按照箭头方向滑动。

注意


- 使用时，护理头请务必完全接触肌肤。
- 务必滑动使用（眼部、冰敷模式除外）。同一处连续使用会造成肌肤低温烫伤。
- 请勿贴于上眼睑、眼眶骨内肌肤使用。

- 如箭头所示
绕圈使用
- 不可使用部位。

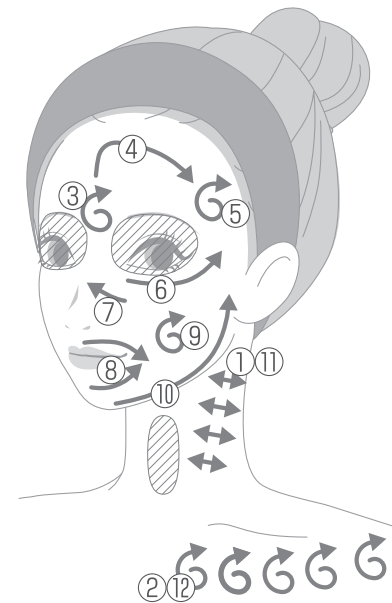


CLEAN模式

如下图所示，请按照箭头方向滑动。

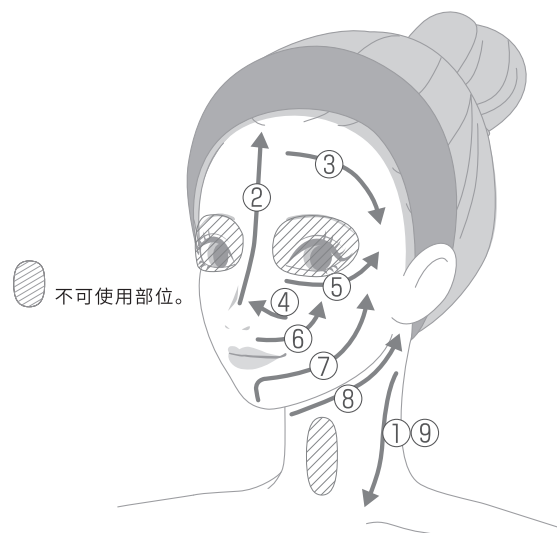


DYHP模式

如下图所示，请按照箭头方向移滑动。

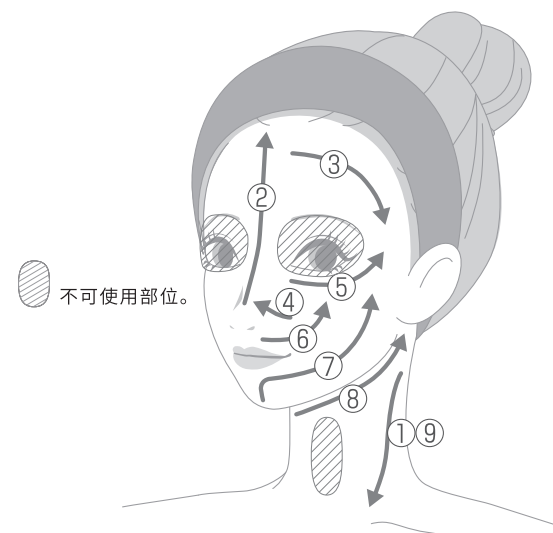

EYE模式

沿眼头至眼尾的方向，以【点按→离开→移动】的步骤重复进行护理。
贴脸停留时间为3秒左右。
眼周感到干燥时，可最多1天2次，1周5天。
※请勿持续贴于同一部位使用3秒以上。
※请勿贴于肌肤滑动使用。

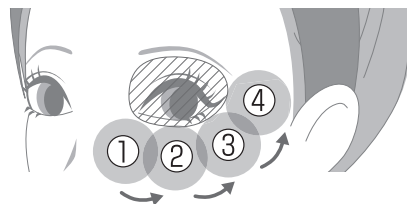

 不可以使用部位：上眼睑、眼眶骨内肌肤
※可使用于眼周（下眼睑、眼尾）

COOL模式

用于面部时，请以【点按→离开→移动】的步骤重复按压使用。

使用后

保养方法

每次使用后,请及时清洁保养,保持主机洁净。

警告

- 保养时请勿充电,并切断电源。

1

拧干沾湿了的毛巾,将机身及护理头上的污渍擦拭干净。
清洗固定扣时,请先将其从机身上取下。

2

用干布擦除所有部件上的水渍后再妥善保管。

注意

- 主机和充电底座请勿进水、沾水。
- 请清洁好护理头上的化妆品后再收纳。
- 充电端口请勿残留水分及护肤品。
- 请勿使用碱性洗涤剂、酒精、稀释剂、汽油、洗甲水等液体,以及药物、磨砂粉等进行擦拭。



保管方法

- 长时间不使用时,请清洁好主机后再收纳。
- 不使用时,请拔掉USB充电线。
- 请勿保管在壁炉、电热器、浴室等高温高湿,以及阳光直射、易跌落的场所。
- 请保管在儿童接触不到、干净通风的场所。

维护和检测

- 长时间未使用时,使用前请务必确认本产品处于正常、可安全操作的状态下再使用。
- 本产品操作异常时,请在送交维修前参照【疑似故障】(P.28)内容,确认故障。故障仍未能排除时,请咨询经销商。
- 本产品出现故障、划伤时,请咨询经销商。

须知

疑似故障

本产品使用过程中如果感觉到异常,请在送交维修前确认以下状况。

症状	可能原因和解决方法
无法开机	→ 长按电源/档位按键3秒钟以上(P.19)。
	→ 电量不足,请充电(P.12)。
不充电	→ 请确认AC适配器(非标配)和USB充电线是否正确连接好(P.12)。
	→ 主机和充电底座接触不正确,请正确连接(P.12)。
机身发热	→ 连续使用。关闭电源静置1小时以上。
档位(强度)不变	→ COOL模式无档位选择。
COOL模式没有冰感	→ 连续使用COOL模式。关闭电源静置30分钟以上。
	→ 在非推荐使用环境中使用。推荐使用环境15℃~30℃。
EMS过强(刺激、疼痛)	→ 按电源/档位按键调低档位。
	→ 护理头没有全部接触肌肤。请在镜子中确认护理头完全接触肌肤后再使用。

以下状况	可能原因和解决方法
EMS强度太低（感觉不到）	→ 短按电源/档位按键调高档位。
	→ 肌肤干燥。请适量增加护肤品等保持肌肤湿润。
	→ 没有贴合面部肌肉位置，请将护理头沿着肌肉位置滑动使用（P.23）。
灼热（COOL模式除外）	→ 使用时，没有滑动护理头。眼部、冰敷模式除外都需要滑动使用。
	→ 滑动速度较慢。请稍微提高滑动速度。
无热感	→ 待机模式/自动关机（P.11）。短按模式按键，启动所需模式（P.16）。
	→ 肌肤干燥。请适量增加护肤品，保持肌肤湿润。
	→ 滑动速度较快。请稍微降低滑动速度。

常见问题

Q 化妆水一次使用多少合适？

A 搭配化妆棉使用时，建议将化妆水完全浸润化妆棉。
请根据个人情况，及时补充化妆水等，保持肌肤水润。

Q 推荐使用时间和频率是多少？

请根据下列时间和频率进行使用。
【日护理】
• DAILY模式：1次3分钟，1天1次，可每天使用（不与周护理模式同一天使用）
【周护理】
• 「CLEAN」模式：1次3分钟，1周2-3次
• 「DYHP」模式：1次5分钟，1周2-3次
• 「EYE」模式：1次2分钟，1周2-3次（眼周干燥时，可最多1天2次，1周5天）
• 「COOL」模式：1次3分钟，1周2-3次（可根据个人需求每天使用）
请勿同时使用【日护理】和【周护理】（眼部模式除外）。

Q 使用CLEAN、DYHP、EYE模式时，感觉不到温热感。

A 慢慢移动护理头的同时，稍微用力按压，使护理头和肌肤接触更充分。
另外，可能是护肤品不足，请及时补充。

Q 化妆棉上没有看到导出的脏污。

A 眼睛不容易看见的脏污也会被导出。
污垢被导出后的附着状态会因人而异。

Q RF输出时，护理头没有热感。

A RF不是让护理头发热，而是通过射频让真皮层发热。

产品规格

额 定 输 入	5 V = 1 A (充电底座)
额 定 输 出	9 V = 0.55 A (充电底座)
使 用 电 池	锂电池
充 电 时 间	约3小时 ※搭配用的AC适配器(非标配)的不同,充电时间也稍有不同。
使 用 时 间	约30分钟 (DYHP模式最大输出时) ※因充电环境、电池剩余电量、使用档位、AC适配器 (非标配)的不同,使用时间也稍有不同。
外 形 尺 寸	主机(附固定扣): 约W47×D44×H176(mm)
产 品 重 量	主机(附固定扣): 约 210 g
材 质	主机: ABS树脂/硅胶 护理头: PET树脂/不锈钢 手触电极: 不锈钢
制 造 国 家	日本
配 件	充电底座 1个 充电用USB线(USB Type-C™) 1根 固定扣 1个(包装时, 装置在主机护理头上) 使用说明书(附保修卡)
推 荐 使 用 环 境	15°C~30°C

售后服务

充电电池

- 充电电池为消耗品（不在质保范围内）。
- 充电后使用时间极短时，可考虑电池寿命问题（充电次数大约是300次）。
- 需要更换充电电池时，请咨询经销商。

关于废弃

- 废弃本产品时，请依照当地法律规定进行废弃。
- 本产品使用锂电池，请依照当地法律进行废弃(P.33~34)。




关于电池废弃

本机使用充电锂电池，是可回收的重要资源。


- 本机内置充电电池，废弃前请务必取出。
- 拆卸电池时，请关闭电源，拔出AC适配器（非标配）。
- 拆卸电池时，需要使用螺丝刀，请注意安全，避免受伤。
- 拆卸电池时，请避免划伤电池。※可能会导致电池发热、起火等。
- 取出的电池请交给当地回收部门处理。

电池拆卸方法


1 先使用尖细的工具，撬开螺钉盖和橡胶垫后，拆掉螺钉。

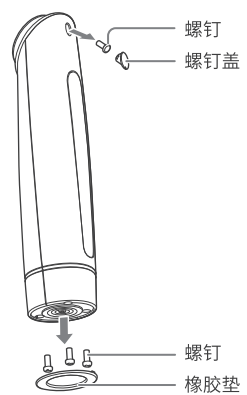


2 拆除底盘。

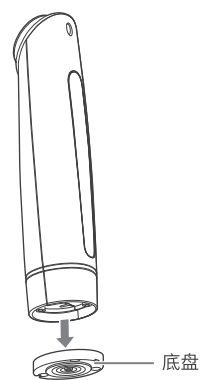


3 拆除后盖。

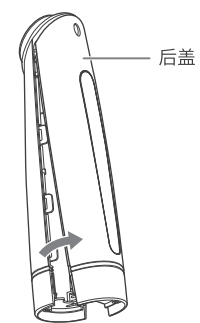

4 拆除电池连接线。

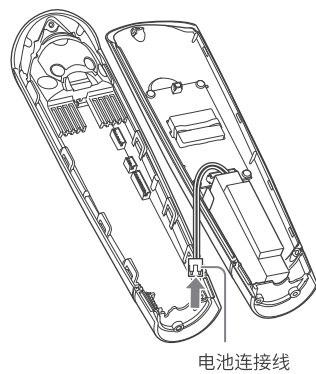

5 取出电池。

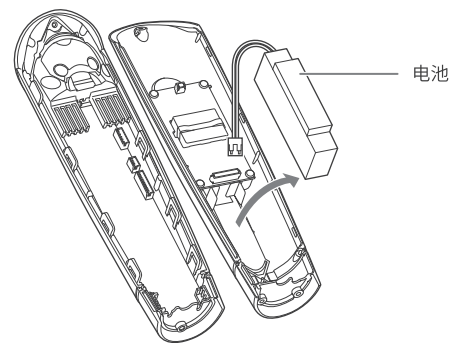


注意 ● 上图为废弃产品时的操作图,并非修理图纸,如自行拆卸导致主机故障,请恕无法提供正常的售后服务。会造成故障、火灾等。

有害物质或元素的说明

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
螺丝	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上述打“×”的部件,符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部分)。						
 环保使用期限 此标识指期限(十年),电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变,用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。						




Memo

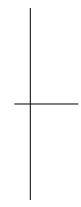A large rectangular area defined by a dotted line, intended for writing a memo. It occupies most of the page's vertical space below the header and above the footer.



Memo

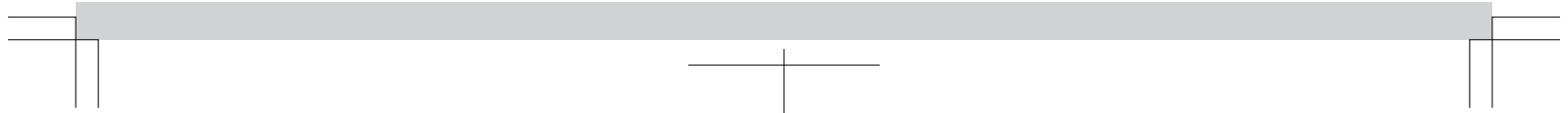A large rectangular area defined by a dotted line, intended for writing a memo. It occupies most of the central part of the page.

关于保修

- 正常使用过程中如出现故障，自购买当日起 1 年内保修（耗材除外）。
- 另外，超过保修期后，寄送产品的运输费用由客户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障，按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也可能产生费用，请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障，请联系经销商。

免费维修的相关规定

1. 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行。使用时所出现的故障，可携带本产品前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
2. 保修期间，产品发生故障并需要接受免费维修时，请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商处接受免费维修。
3. 住址搬迁时，请提前与购买本产品的经销商联系。
4. 保修期间，以下情况不属于无偿保修的对象范围。
 - (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤。
 - (2) 购买后，因使用过程中致使本品倾倒、跌落等造成的故障及损伤。
 - (3) 因火灾、地震、水灾及其他自然灾害、公害或电压异常等造成的故障及损伤。
 - (4) 因与本产品连接的其他电器设备的异常所造成的故障及损伤。
 - (5) 电池及消耗品等零部件更换时。
 - (6) 非一般家用情况（例如：需长时间使用的商用情况）使用时，造成的故障及损伤。
 - (7) 装载在车辆或船舶等使用时造成的故障及损伤。
 - (8) 购买后，因运输、移动及跌落等所造成的故障及损伤。
 - (9) 本保修卡中所规定的范围之外的情况。
 - (10) 本保修卡的必填栏中未填写购买年月日、客户姓名、经销商等信息或没有经销商盖章，以及填写信息被改动过时。

※ 本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定约束，但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明确之处，可向购买本产品的经销商咨询。

※ 因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿保修对象范围外。