

No. _____

保修卡

凭卡保修

品名	家用美容仪	型号	HRF-10T
名称	RF射频美颜仪		
免费维修	对象：主机	期限：自购买本产品当日起1年内	
※ 经销商	门店名称/地址/联系电话		
	请将购买当日的详细资料贴于此处或与保修卡一并保管		

请经销商将带※的必填栏填写完毕相关的信息，然后交回客户保管。

免费维修时，仅对本说明书中所记载的指定对象部件进行免费修理。

上述【免费保修期】内如发生故障时，请您携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销店进行维修。

●如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期，或没有购买明细，则此保修卡无效。

●本保修卡不接受补办，请妥善保管。

〈免费维修的相关规定〉

- 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行。使用时所出现的故障，可携带本产品前往购买本产品的经销商接受免费维修。
- 保修期间，产品发生故障并需接受免费维修时，请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商接受免费维修。
- 住址搬迁时，请提前与购买本产品的经销商联系。
- 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法接受本书中所记载经销商的免费维修时，请联系雅萌客户服务热线中心。
- 保修期间，以下情况不属无偿保修的对象范围。
 - (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤。
 - (2) 购买后，因使用过程中致使本品倾倒、跌落等所造成的故障及损伤。
 - (3) 因火灾、地震、水灾及其他自然灾害、公害或电压异常等造成的故障及损伤。
 - (4) 因与本品连接的其他电气设备的异常所造成的故障及损伤。
 - (5) 电池及消耗品等零部件更换时。
 - (6) 非一般家用情况（例如：需长时间使用的商用情况）使用时，造成的故障及损伤。
 - (7) 装载在车辆或船舶等使用时造成的故障及损伤。
 - (8) 购买后，因运输、移动及跌落等所造成的故障及损伤。
 - (9) 本保修卡中所规定的范围之外的情况。
 - (10) 本保修卡的必填栏中未填写购买年月日、客户姓名、经销商等信息或没有经销商盖章，以及填写信息有被改动时。

※ 本保修卡对免费保修的时间及条件进行了一定的约束，但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如过了保修期的修理尚有不明之处，可向购买本产品的经销商咨询。

※ 因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿保修对象范围外。

“雅萌”是ヤーマン株式会社の注册商标。

ヤーマン株式会社

日本东京都江东区古石场 1-4-4

〒135-0045

日本官网：https://www.ya-man.com/

HRF10-G-001CML


雅萌 使用说明书

保管用
附保修卡

家用美容仪

RF射频美颜仪

HRF-10T

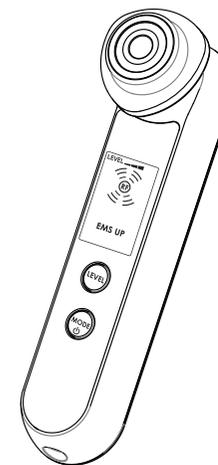

目录

安全注意事项	1
使用注意事项	6
特点	7
产品说明	7
使用前	8
护理	13
使用后	17
故障排除	18
售后服务	21
●产品规格	22
●关于保修	22
保修卡	

衷心感谢您购买雅萌公司的产品。

- 为了您的安全，使用产品前请仔细阅读本使用说明书。
- 阅读后请妥善保管本使用说明书，以便日后参考。
- 如将本产品转让给他人使用时，请务必同时附上本使用说明书。

安全注意事项

安全注意事项

- 使用前, 请仔细阅读所有的【安全注意事项】, 并且做到安全及正确的使用本产品。
- 请按照本使用说明书的指示操作。
- 如出现异常情况, 请立即停止使用并联系当地的经销商进行维修。
- 在故障状态下使用, 会对身体造成不良影响及构成危险, 请立刻停止使用。
- 本说明书所列举的注意事项对您的安全非常重要, 请务必遵守。
- 注意事项分为“危险”、“警告”及“注意”三项, 并清楚列明危险程度, 以及错误操作能造成的危害。

● 关于三类注意事项

 危险	不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。
 警告	不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。
 注意	不正当使用本产品可能导致人身伤害, 或引起财物损失。 ※ 财物损害是指: 对房屋、财产以及家畜、宠物等扩大性损害。

● 关于三类标示符号

 该符号表示禁止进行的事项。
 该符号表示务必遵守的事项。
 该符号表示务必注意的事项。

危险



禁止

请勿在以下情况使用。
否则可能会导致医疗仪器发生故障。

- ◆ 使用医疗仪器的人群
 - 人工肺等植于体内的辅助仪器
 - 心脏起搏器等植于体内用的仪器
 - 心电图等便携式装置

警告

安全注意事项

以下人群请不要使用。
否则容易引发事故、或导致皮肤及身体问题。

- 正接受治疗 • 发育期和青春期 • 急性疾患
- 结核性疾病 • 发热性疾病 • 高血压 • 传染性疾病
- 癌症 • 血液疾病 • 内脏疾病 • 皮肤病 • 过敏体质
- 过敏性皮炎 • 皮肤有炎症 • 疲劳过度
- 敏感肌肤或脆弱性肌肤 • 身体抱恙 • 酒后
- 怀孕期间、经期期间、哺乳期间 • 正服用安眠药
- 因物理刺激等会引起起斑 • 正接受牙齿治疗
- 因长期服用类固醇、荷尔蒙等药物以及肝功能障碍而引起的毛细血管扩张



禁止

对于以下身体部位, 或存在以下情况, 请勿使用。
否则容易引发事故、或导致皮肤及身体问题。

- 切伤 • 曾接受整形手术之部位 • 口内、阴部、粘膜等
- 日晒伤导致皮肤发炎或红肿 • 粉刺、痤疮
- 皮肤化脓并有炎症 • 皮肤上有发痒或病理性色素
- 浮起黑痣 • 病毒性疣 • 喉结核 • 眼球
- 眼睑和眼睛周围 (冰敷模式除外)

※ RF LED模式的LED灯光可照射眼睑以及眼睛周围。
操作使用时, 请先闭上眼睛, 电极面需距离皮肤5厘米以上。
请勿直视LED灯。
若不能确定自己是否有上述状况, 请事先征求医生意见。



禁止

请勿长时间贴于同一位置、
请在皮肤上滑动使用。请勿
使用于电极面无法触及的地方。
否则可能会导致烧伤或低温烫伤。



禁止

请勿在火中、加热装置、高温
的地方充电、使用或放置。
本产品使用内置充电式电池。
否则可能会导致仪器过热、
起火、爆裂。



对使用者
的限制

请将本产品放置在小孩无法触
及的地方。请勿让小孩使用。
否则可能会引发事故或导致人
身伤害。



用途外
禁止

请勿作使用说明书以外的其
他用途使用。
否则可能会导致人身伤害
或机件故障。

警告



禁止

请勿在易燃物质（如酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂或定型喷雾）附近使用。否则可能会导致火灾、触电或身体伤害。



禁止不当操作

请勿损伤、加工、用力弯曲、拉扯、扭曲或捆扎电线。此外，将电线放置于重物之下或被夹紧，可能会导致电线破损、起火、触电。



禁止使用延长线

本产品需要使用专用电源适配器。使用时，适配器的插头请务必直接插入电源插座，请勿使用延长线。否则可能会导致触电、短路或起火。



禁止使用已破损电源插座

请勿使用已损坏的电源适配器或有松动的插座。否则可能会导致触电、短路、起火。如需修理，请联络当地经销商。



对使用者的限制

请勿让无法表达自己意愿的人士使用。以及避免让残障人士使用。否则可能会导致事故身体受伤。



禁止在水源附近使用

请避免主机或电源适配器沾湿或用水清洗。请勿在水源附近、浴室或沐浴时使用。否则可能会导致触电、短路、起火。



出现异味或异常发热时禁止使用

出现异味、异常发热时，请停止使用。否则可能会导致主机损坏、起火。



禁止拆解

请勿自行拆解维修或改装。否则可能会引发火灾、触电或身体受伤。如需维修，请联络当地经销商。



务必遵守

充电前，请确认电源适配器的插头以及插座没有沾水。否则可能会导致触电、短路、起火。



务必遵守

闲置及进行清洁时，请先关闭电源。否则可能会导致触电、短路、起火。

警告



务必遵守

请使用100~240V交流电流。请确认电源适配器插头完全插入插座。否则可能会导致火灾、触电或事故。



拔出电源适配器

闲置时，请将插头从插座中拔出。请勿以沾湿的双手拔出或插入电源插座。否则会导致、触电、短路、起火。



拔出插头

拔出电源适配器前，请手握插头前端拔出，请勿以沾湿的双手拔出或插入电源插座。否则会导致触电、短路、起火。



注意起火

请勿放置于靠近火源、炙热阳光下、浴室等高温潮湿地方。此外，请勿放置于加热电器附近。否则可能会导致过热、起火，进而造成仪器破裂。



拔出电源适配器

万一发生异常情况时，请立即拔出电源适配器。若出现运行异常、冒烟、异响或异味时，请停止使用。

注意



禁止

P.2中所述的禁止使用部位请勿使用。正在接受牙齿治疗或牙齿中有填充物人群，有可能会因离子、EMS刺激而引起不适。若出现此种情况，可以降低离子、EMS强度或调整使用部位后再使用。



禁止

请勿在下述情况使用。否则可能会导致机件故障、人身伤害或引发事故。

- 肌肤出现红疹、炎症、瘙痒等异常情况时，请勿使用。
- 仪器摔跌或碰撞造成损坏时，请勿使用。
- 请勿用于需要过度连续使用的商用环境。

注意



禁止

请勿使用酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂等溶剂擦拭主机。否则可能会损伤主机表面。



禁止

请勿用作宠物护理。否则可能会导致宠物受伤。



禁止

请勿让电极面与金属接触。否则可能会导致仪器故障、人身伤害。



禁止跌落

请勿放置于不稳定的地方。请避免主机摔跌或受到碰撞。否则可能会引起机件故障或因主机跌落导致砸伤。



务必遵守

RF LED模式时，请不要直视LED灯。使用LED灯对眼睛周围、眼睑进行护理时，请先闭上眼睛，且电极面需距离皮肤5厘米以上。否则可能会令眼睛或皮肤受到伤害。



务必遵守

请务必遵守下列事项。否则可能会导致机件故障、人体受伤或引发事故。
请勿长时间使用于同一位置上。使用时，请留意皮肤状态。
日晒后，请勿与去角质产品或膏状面膜一同涂抹使用。使用后，请务必切断电源。



务必遵守

使用期间如发现身体感觉异常，请停止使用。使用期间或使用后如肌肤出现异常情况，请停止使用并向专业医生咨询。



务必遵守

初次使用及尚未适应时请先使用强度1。否则可能会引发事故，导致人体伤害。



务必遵守

请勿持续使用冰敷模式。若持续使用，冰感会减弱。若需再次使用，起码要间隔30分钟才能再使用。

使用注意事项

警告



务必遵守

只可连接100~240V交流电流使用。否则可能会导致火灾、触电及事故。



起火注意

请务必确认插头形状以及电压后才使用。否则可能会导致机身发热、起火或故障。

- 使用与原装适配器插头形状不同的插头时，请使用插头转换器（非原装配件）。
- 有时因地区、住宿地不同，插头形状、电压也稍有不同。请务必确认后使用。
- 关于插头转换器请咨询经销商。

特点


本产品是以RF射频深层温热功能（以下简称为RF）进行皮肤温热、离子洁面、离子保湿、EMS、振动、激光护理的家用美容仪。

使用者可按个人的皮肤状态及需要，选择各模式组合进行护理程序。

- RF...射频温热深层*皮肤，让肌肤可于合适状态下进行护理。与一般的温热产品不同，能更快、更深层温热皮肤为本产品的特点。*深达角质层
- 离子清洁...一般洗面难以除去的污垢可通过离子导出功能吸出面部。
- 离子保湿...离子保湿功能滋润和改善皮肤，让滋润成分护肤品更好、更快速地渗透到皮肤。
- EMS...肌电刺激提拉面部肌肉。
- 震动...微振动柔软皮肤，帮助渗透。
- 光美容...LED光照射皮肤达到焕肤效果。
- 冰敷...冷却皮肤、收缩毛孔，令皮肤更加紧致。


产品说明

● 主机

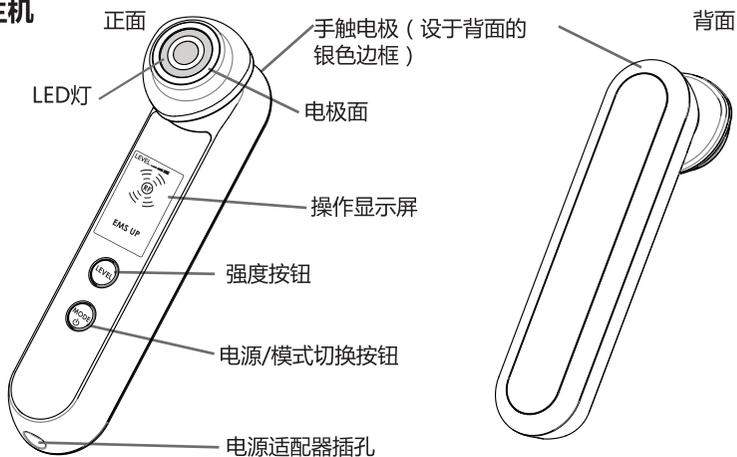

● 化妆棉固定扣 （银色金属圈）

※购买时已装置于主机的电极面之上。
※将化妆棉固定扣装置于电极面之上。

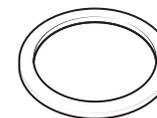

● 电源适配器




※为提升品质，主机和配件的设计和规格如有改变，恕不另行通知。

使用之前

操作显示屏

● 显示屏·按钮

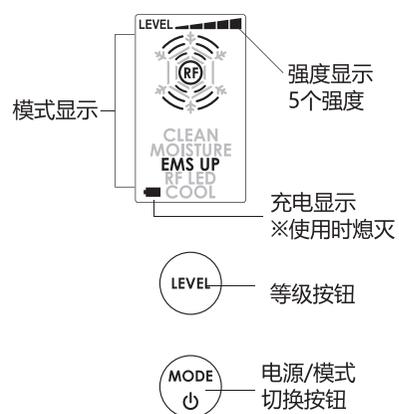

- 长按电源/模式按钮3秒，开启电源。（自动进入RF 清洁模式。）
- 各模式进行时可按电源/模式按钮切换至其他模式。
- RF 清洁模式、RF 保湿模式、RF EMS UP 模式中选择强度，强度分为5级，可按强度按钮选择合适强度。
- 长按电源/模式按钮关闭电源。

※RF温度不能调节。

● 模式显示

每次按电源/模式按钮，将以
RF 清洁模式→RF 保湿模式→RF EMS UP→RF LED→冰敷模式→RF 清洁模式（重复）
的次序切换。

模式	RF 清洁模式	RF 保湿模式	RF EMS UP	RF LED	冰敷模式
功能	RF/离子清洁	RF/离子保湿	RF/EMS	RF/LED	冰敷
模式指示	LEVEL RF CLEAN	LEVEL RF MOISTURE	LEVEL RF EMS UP	 RF LED	 COOL

※进行RF 清洁模式、RF 保湿模式、RF EMS模式护理时，模式显示屏上的 RF 会显示或隐藏，
当发出简短一声“蜂鸣声”，表示RF已启动操作（模式显示屏显示 RF 字样）。
当发出两声“蜂鸣声”，表示离子或EMS已启动操作（模式显示屏的 RF 字样消失）。

● 强度显示

选择RF 清洁模式或RF 保湿模式后，按下强度按钮，可选择离子输出强度。

选择RF EMS UP 模式后，按下强度按钮，可选择EMS强度。


强度共分为五级，请选择个人舒服的强度进行护理。

每次按下强度按钮，将以强度1→强度2→强度3→强度4→强度5→强度1

<重复>的顺序切换强度。

※RF温度固定，不能改变。


※初次使用美容仪或皮肤未适应时，请务必从强度1开始。

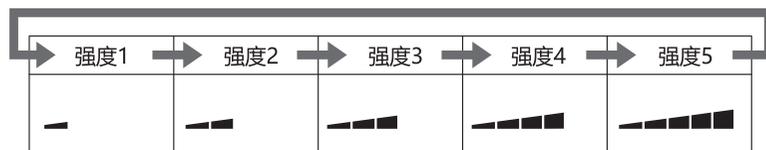

● 充电显示

充电时，充电显示灯会闪烁。
充电完毕后，充电显示灯会长亮。

※使用时不会亮起。

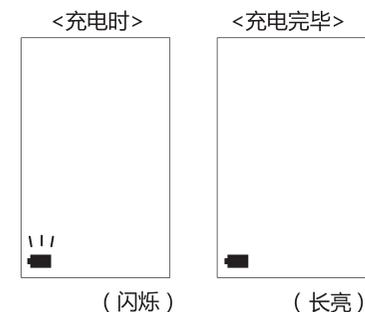

● 待机显示及自动关闭 (Auto-Off)

RF 清洁模式、RF 保湿模式、RF EMS UP、RF LED模式完毕后两分钟，
电源/模式按钮会闪烁，此时将进入待机状态（非操作中状态）。

按下电源/模式按钮可启动闪烁指示的模式。

如停止操作两分钟，响起两声“蜂鸣声”后，电源会自动关闭（Auto-Off）。

只有冰敷模式结束后，不会切换至待机状态，而且会自动关机（Auto-Off）。
（响起两声“蜂鸣声”后，电源关闭）。

充电方式

本产品可使用充电电池或连接着电源适配器一同使用。
使用充电电池时，请务必先进行充电。

- 初次使用（首次使用或长时间空置没有使用）时，请务必先进行充电。并确认充电指示灯显示是由闪烁变为长亮后再使用。

● 建议充电时间

充电时间	使用时间
约2.5小时	约40分钟

- ※充电环境 请保持约25°C室温环境下。
- ※此为充满电池后立即使用的操作时间。
- ※使用时间会因使用方式、使用强度及使用环境而有异。
- ※充电时间会因充电电池残余电量、使用环境而有差异。

● 充电方式

- 1 将电源适配器插头插入连接主机的充电插口中。
- 2 将电源适配器插头插入插座。
 - 本产品仅适用提供的专用电源适配器。
 - 使用时，请将适配器插头直接插入插座，请勿使用延长线。
 - 充电开始时，充电显示灯为闪烁。充电完成后，充电显示灯会长亮。
- 3 充电完毕后，请将电源适配器的插头从插座中拔出，同时将连接主机的充电插头也拔出。

模式

模式	特点	功能	化妆棉	建议使用化妆品	时间	强度	使用频率
RF清洁模式 显示： CLEAN	深层※1温热皮肤，将一般洗脸难以去除的污垢导出，让皮肤更清亮和干净。	· RF · 离子清洁 · 震动	有	滋润化妆水※2	约3分钟	离子：5级	每周2~3次
RF保湿模式 显示： MOISTURE	深层※1温热皮肤，让护肤品更易渗透至角质层，让皮肤更加水润。	· RF · 离子保湿 · 震动	有 无	滋润化妆水※2 面膜	约3分钟	离子：5级	
RF EMS UP 显示： EMS UP	深层※1温热皮肤，EMS刺激肌肉，紧致肌肤，令肌肤更富有弹性。 ※颈部及肩部也可使用。	· RF · EMS	有	滋润化妆水※或保湿霜	约3分钟	EMS：5级强度	
RF LED 显示： RF LED	深层※1温热皮肤，通过LED光的照射，焕发肌肤新活力。	· RF · LED	无	滋润化妆水※或保湿霜	约3分钟	无	
冰敷※3 显示： COOL	冰敷模式冷却皮肤，能改善皮肤弹性和皮肤纹理。	· 冷敷	无		约3分钟	无	


※深达角质层

- 使用时，请贴于皮肤上滑动进行（冰敷模式除外）
- ※1深达角质层
- ※2请务必使用水溶性护肤品。请勿使用油性、磨砂膏等类型的护肤品。
- ※3使用冰敷模式后，主机会发热，请勿连续使用。
使用后请关闭电源，并待主机休息约30分钟后再使用。

护理

化妆棉的装置方法

1 从电极面取下主化妆棉固定扣。

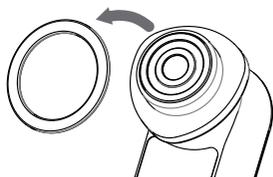

2 将一块化妆棉放于电极面上，再将化妆棉固定扣推入，固定好化妆棉。

※ 如化妆棉固定扣难以固定好化妆棉时，请使用相对较薄材质的化妆棉。

※ 如化妆棉过厚，肌肤对RF的温热感觉可能会变弱。

3 请使用化妆水或保湿霜充分湿润美容仪电极面上的化妆棉。

※ 化妆水及保湿霜须完全沾满电极面。

※ 若使用清爽型化妆水，肌肤对RF的温热感觉可能会变弱。

※ 本产品非防水设计，使用后请将残留于电极面上的化妆水及保湿霜擦拭干净。请勿用水清洗。

基本使用方法

● 使用注意事项

- 请务必在皮肤上滑动使用。如持续贴于同一部位上可能会导致灼伤。
- 使用RF射频时会因为皮肤的状态而感觉温度有异。
- 请勿用于眼睑和眼睛周围的护理（冰敷模式除外）。
※ RF LED模式的LED灯光可照射眼睑和眼睛周围。使用时，请闭上眼睛，且电极面需距离皮肤5厘米以上。
- 请不要直视RF LED模式的LED灯光。
- 手握主机时请务必确保能触到手触电极。
- 建议使用环境温度为 15°C ~ 30°C。

● 护理方法

- 1 请先清洗脸上的化妆品。
 - 去除脸上的油脂及污垢，确保皮肤在洁净的状态。
 - ※ 上妆后可使用冰敷模式，提高妆容的贴服度。
- 2 使用前，请先装置上化妆棉，并用化妆水湿润。
- 3 长按电源/模式按钮（约3秒）开启电源。可选择模式及强度。
 - 按电源/模式按钮选择模式。
 - 按强度按钮选择强度。
 - ※ RF强度无法调节。
 - ※ 初次使用时或尚未适应时，请务必使用强度1。
- 4 手握主机时，请务必确保触到背面的手触电极。
- 5 参考 P.15~P.16，将电极面贴于皮肤上滑动。
 - 模式结束后约2分钟，会进入待机状态（冰敷模式结束后电源会自动关闭。）
 - 按电源/模式按钮进入下一个模式，或长按电源/模式按钮（约3秒）关闭电源。
 - ※ 使用时，请务必注意电极面完全接触到皮肤。
- 6 护理完毕后进一步修护皮肤。
按个人需求，适当涂上其它护肤品。
- 7 拆除化妆棉、擦拭残留于电极面或化妆棉固定扣上的污垢及化妆水等护肤品。
 - ※ 本产品非防水设计，使用后请将残留在电极面上的护肤品彻底擦拭干净。请勿用水清洗。

护理方法

RF模式使用方法

建议滑动的速度：每秒移动2cm

※如感到过热，可稍微加快滑动速度。


- 使用时，请务必确认电极面完全贴于皮肤上。
- 使用时，请务必在皮肤上滑动使用。如持续贴于同一部位上可能会导致烫伤或低温灼伤。
- 请勿贴于眼睑和眼睛周围使用。

<RF 清洁模式 · RF 保湿模式 · RF LED模式>

请按箭头指示的方向于皮肤上滑动使用。

RF LED模式的LED灯光可照射眼睑以及眼睛周围进行护理。但使用时，请先闭上眼睛，且电极面需距离皮肤5cm以上。

护理

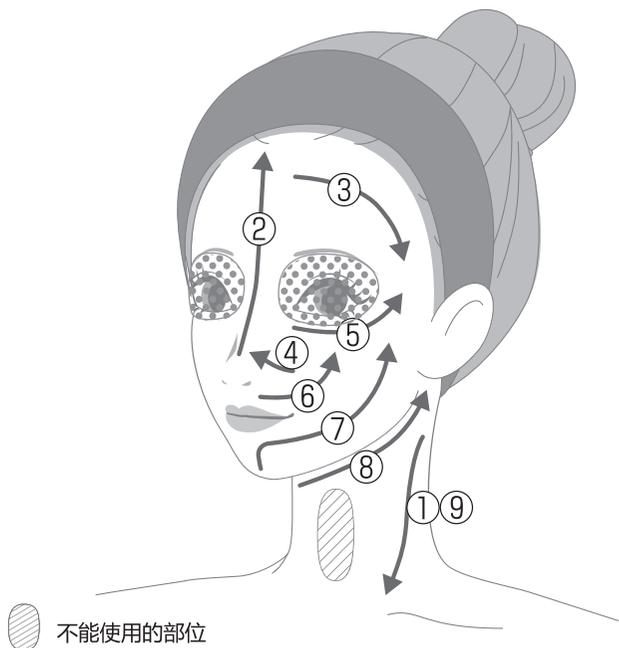



 不能使用的部位

 仅在LED模式LED灯光下才能使用的部位
※使用时，请先闭上眼睛，且电极面需距离皮肤5cm以上

<RF EMS UP模式>

请按箭头指示的方向于皮肤上滑动使用。

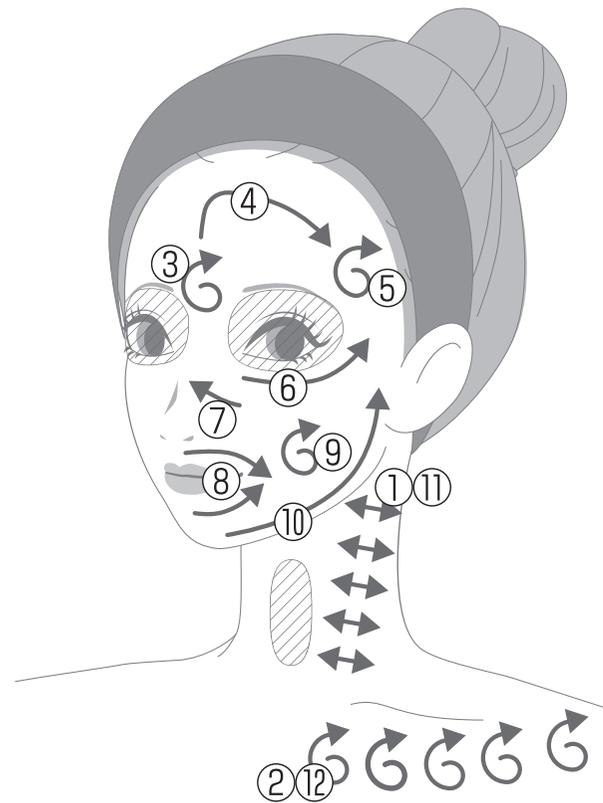

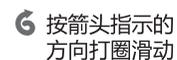 按箭头指示的方向打圈滑动

 不能使用的部位

<冰敷 模式>

重复【紧贴→松开→移动】的步骤在面部进行护理。

※可用于眼睑和眼睛周围。

护理

为保持本产品清洁，每次使用后请进行清洁。

● 清洁及保养方法

- 1 关闭电源并将电源适配器拔出。
- 2 请用水沾湿毛巾并拧干，将电极面及化妆棉固定扣上的污渍擦拭干净。
 - 清洁化妆棉固定扣时，请先从主机上拆除。
 - 请勿使用碱性清洗剂、酒精、稀释剂、汽油、卸甲油等溶剂清洁。
 - 请勿在残留化妆水或保湿霜的状态下闲置本机。

- 3 电极面以及化妆棉固定扣以外的污渍，请用干布擦拭干净。

保管方法

- 长期不使用本机时，请清洁本机后再妥善保管。
- 不使用时，请关闭电源并将电源适配器插头拔掉，再妥善保管。
- 请勿将本机放置在暖炉等加热装置附近、浴室等高温潮湿的地方、阳光直射下、或不稳定的地方。
- 请将本机放置在儿童无法触及的地方。

关于维护点检

- 本机长时间闲置、需要再次使用时，使用前请务必确认本机处于正常、可安全操作的状态后再使用。
- 本机若出现操作异常、送修前，可先参考本说明书“故障排除”（P.18~P.19）的内容确认故障。故障仍未能排除时，可咨询当地经销商。
如本产品发生故障或有破损，可联系当地经销商。

常见故障

症状	推测原因	解决方法
无法开机	没有长按电源/模式按钮	长按电源/模式按钮3秒，电源开启
	电量不足	请充电或接上电源适配器再使用
充电后仅能操作数分钟	充电电池寿命已完结（可充电次数：300次）	请联络当地经销商或雅萌中国官方总代理（P.21） ※请勿自行更换电池，否则可能会导致故障
	按错按钮	长按电源/模式按钮，重新开启电源
	待机状态/自动关闭	长按电源/模式按钮（P.10）
无法充电（充电显示没有闪烁）	电源适配器没有完全插入插座（或使用延长线）	将电源适配器插头插入插座
	电源适配器没有连接到主机	将电源适配器插头插入主机
		请同时按下强度按钮和电源/模式按钮，重置。主机可能会重新充电。
主机发热	连续使用	请关闭电源，并待机休息1小时以上

症状	推测原因	解决方法
冰敷模式没有冰感	持续使用冰敷模式	请关闭电源, 并让主机休息30分钟以上
	在建议室温范围外使用	请在15°C ~ 30°C环境下使用
离子·EMS强度过强 (感动过热或刺痛)	设定的强度过高	请按强度按钮调节强度
	电极面没有完全贴在肌肤上	使用时电极面需要完全贴在皮肤上
离子·EMS强度过弱 (没有感觉)	设定的强度过低	请按强度按钮调节强度
	肌肤水分不足或过于干燥	请用化妆水或保湿霜湿润皮肤后再使用, 同时请轻轻沾湿双手
感觉不到EMS模式	没有贴在皮肤上	使用时请将电极面贴在肌肤上 (P.16)
RF温度过热	电极面长时间持贴在肌肤上	请勿将电极面持续贴在同一部位上
	滑动速度过慢	请加快滑动速度
感觉不到RF温热	处于待机状态/自动关闭 (P.10)	长按电源/模式按钮开启电源
	肌肤水分不足或过于干燥	使用化妆水或保湿霜湿润皮肤后再使用
	滑动速度过快	请减慢滑动速度
RF强度没有变化		无法改变RF温热强度 (仅离子和EMS可切换强度)
不震动		仅在RF清洁模式、RF保湿模式下震动

常见问题

问题	解答
每次使用多少化妆水或保湿霜	依据本产品的特点, 使用的化妆水以及保湿霜越多, 皮肤的温热感更明显。建议使用化妆棉时, 将化妆水及保湿霜完全湿润化妆棉。如感觉化妆水及保湿霜不足时, 可适当补充分量。
洗澡时, 可否使用?	本产品非防水设计, 请勿在沐浴时使用。
使用后皮肤发红	这是由于RF射频温热产生的现象。如感觉不适, 可使用冰敷模式或其它冷冻方式帮助肌肤降温。
面部以及手部的刺痛感	这是受到离子清洁模式、离子保湿模式和EMS的微电流刺激所致。可按强度按钮调节强度。请使用个人合适的强度。初次使用时或尚未适应时, 请务必使用强度1。
使用RF 清洁模式、RF保湿模式、RF EMS UP、RF LED模式时, 感觉不到RF温热	请减慢在皮肤上的滑动速度或尝试加强按压在皮肤上的力度。可能因为化妆棉的湿润度不足引致, 请补充化妆水或保湿霜。RF会重复启闭操作。有 (RF) 显示时, RF处于启动状态。
化妆棉没有沾上污垢	眼睛不容易看见的污垢也会被导出。污垢被导出后的附着状态会因人而异。
RF的电极面没有温热感	RF并非由电极面发热, 而是透过电力作用温热肌肤。

售后服务

●关于充电电池

- 充电电池为消耗品（不在保修范围内）。
- 如完全没充电后可操作使用时间较短，表示电池寿命可能已完结（充电电池寿命：约充电300次）。
- 如需更换电池，请联系当地经销商。

●关于废置产品

- 丢弃本产品时，请按照地方政府相关规定丢弃。
- 本产品使用锂离子充电电池。



●产品规格

额定电压	DC9V 2.0A
消耗功率	约13W
使用电池	锂电池
充电时间	约2.5小时 ※根据充电环境不同，充电时间不同
外形尺寸	主机（附化妆棉固定扣）：约W44×D57×H190（mm）
重量	主机（附带化妆棉固定扣）：约220g
材质	主机：ABS树脂 面板：PC 电极面：PET树脂/铜（镀铬） 手触电极：ABS树脂（镀铬）
生产国家	日本
附件	化妆棉固定扣、电源适配器
建议使用环境	15℃～30℃

●关于保修

- 正常使用过程中如出现故障，以购买当天起1年内保修（耗材除外）。
- 另外，超过保修期后，寄送产品的运输费用由客户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障，按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也有可能产生费用，请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障，请与经销商取得联系。