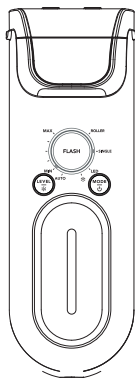




使用说明书

家用光学脱毛美肤仪
Rei Beauté Cool Power YJEA9N

各部位的名称与功能

机身

※本说明书所采用的图片为安装滚轮护理头时的产品图片。
※氙灯为消耗品。

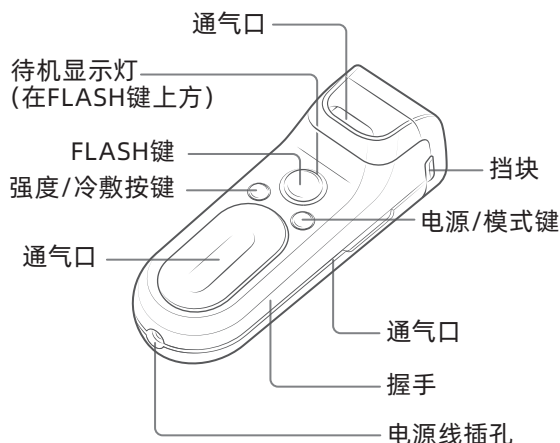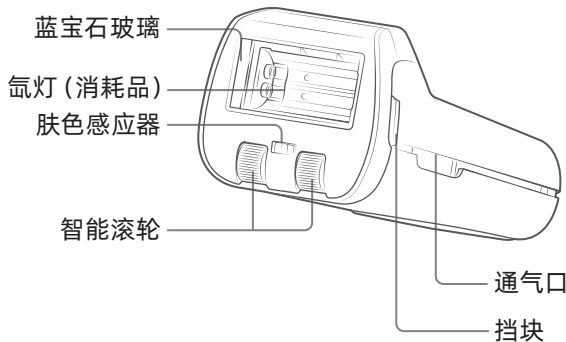

配件

● 滚轮护理头



● LED护理头



● 局部护理头



● 精准护理头



- 电源适配器
- V部位设计小工具
- 使用说明书 (附保修卡)

模式

选择脱毛的模式和档位

按下【电源/模式】键可切换脱毛模式。按下【强度/冷却】键可调节护理强度。
模式和档位将按照以下顺序变更。

滚轮护理头

<模式>

→ 单发模式 → 滚轮模式

<档位>

→ 1(最小档位) → 2 → 3 → 4 → 5(最大档位) → 自动档位(AUTO)

<冷敷功能>

→ 冷敷开启 → 冷敷关闭

※长按强度/冷却按键可开启或关闭冷敷模式。

LED护理头

<模式>

→ 单发模式 → 蓝绿色LED模式

<档位> 单发模式

→ 1(最小档位) → 2 → 3 → 4 → 5(最大档位)

<档位> 蓝绿色LED模式

→ 1(最小档位) → 3 → 5(最大档位)


连续照射 单次照射

局部护理头/精准护理头

<模式> 单发模式


<档位>

→ 1(最小档位) → 2 → 3 → 4 → 5(最大档位)

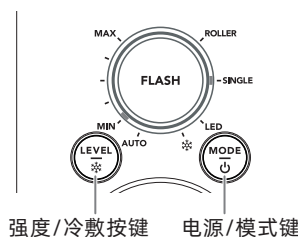

强度/冷却按键 电源/模式键

档位显示

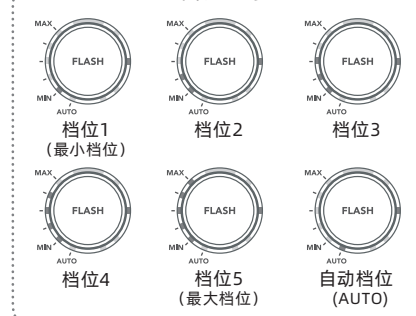

各护理头可使用的模式、档位及功能请参考下表。



滚轮护理头



LED护理头



局部护理头




精准护理头

模式	滚轮模式	○	—	—	—
	单发模式	○	○ (红色LED)	○	○
	蓝绿色LED模式	—	○ (蓝绿色LED)	—	—
档位	自动档位(AUTO)	○	—	—	—
功能	冷敷功能	○	—	—	—

推荐使用部位

单发模式


(适用于所有护理头)

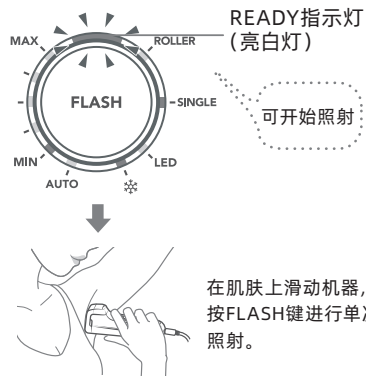


滚轮护理头




LED护理头

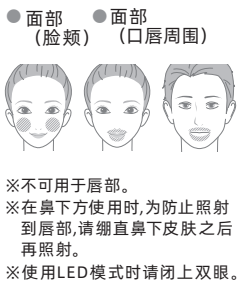

局部护理头

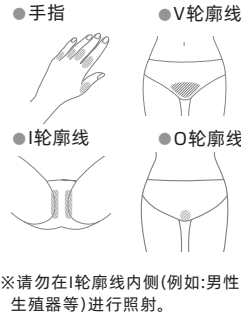


精准护理头

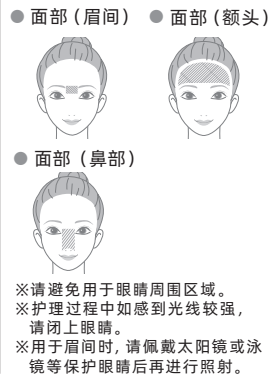


滚轮模式

(仅适用于滚轮护理头)

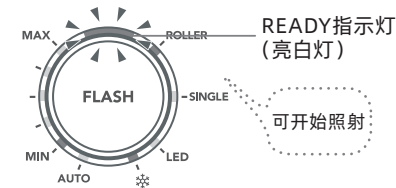


推荐使用部位

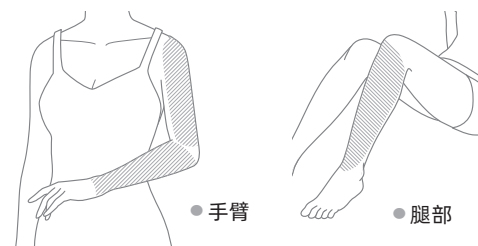


蓝绿色LED模式

(仅适用于LED护理头)

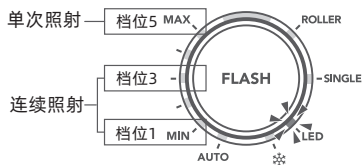


推荐使用部位

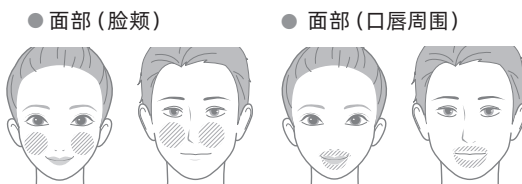

冷敷功能

(仅适用于滚轮护理头)

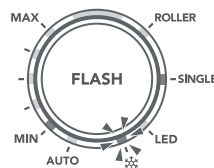

长按强度/冷敷按键可开启或关闭蓝宝石玻璃冷敷功能。

连续照射时 (最多5次), 请在肌肤表面轻轻滑动机器进行护理。
单次照射时, 请按FLASH键并移动位置, 逐次进行照射护理。
※如LED光线过强, 请闭上眼睛使用。

使用方法

1

准备工作


请用剃须刀等工具剃除需要护理部位的毛发。



2

安装护理头并打开电源


请长按电源/模式键。

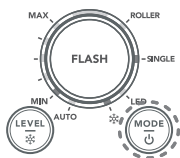

3

选择模式


请按电源/模式键。

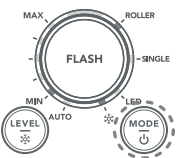

4

选择档位

请按强度/冷敷按键。

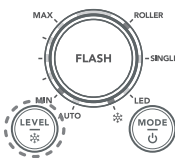

5

照射闪光

将出光口贴紧肌肤进行脱毛护理。



注意

- 请根据护理部位选择合适的护理头。使用不当可能导致烫伤。
- 请勿直视出光口, 并确保周围人员也不要直视出光口, 否则可能造成眼睛损伤。
- 请做好日常保湿护理, 避免肌肤干燥。肌肤过于干燥可能影响产品效果。
- 面部护理时, 请确保出光口紧贴肌肤。如果未完全贴合, 强光可能会刺激眼睛。