

使用方法



家用光学脱毛美肤仪

Rei Beauté Cool Pro YJEA6W

各部位的名称与功能


机身

※本说明书所采用的图片为安装滚轮护理头时的产品图片。
※氙灯为消耗品。

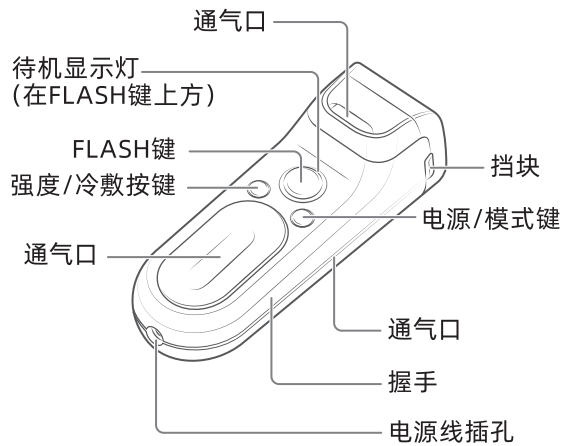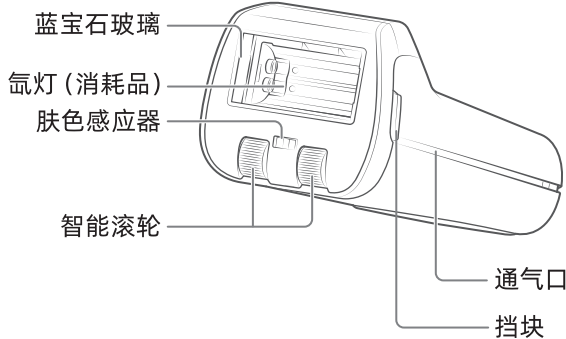


配件


• 滚轮护理头

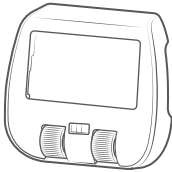

• LED护理头

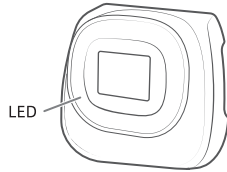

• 局部护理头

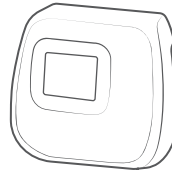

• 电源适配器

• V部位设计小工具

• 使用说明书 (附保修卡)

模式

选择脱毛的模式和档位

按下电源/模式键可更改脱毛模式。

按下强度/冷却按键可更改脱毛护理的强度。

模式和档位将按照以下顺序变更。

滚轮护理头

<模式>

→ 单发模式 → 滚轮模式※

※在使用LED护理头和局部护理头时, 无法选择滚轮模式和自动档位。

<档位>

→ 1(最小档位) → 2 → 3 → 4 → 5(最大档位) → 自动档位(AUTO)

<冷却功能>

→ 冷却开启 → 冷却关闭

※长按强度/冷却按键可开启或关闭冷却模式。

LED护理头

<模式>

→ 单发模式 → LED模式

<档位>

→ 1(最小档位) → 2 → 3 → 4 → 5(最大档位)

※LED模式的强度不能调节。


局部护理头

<模式>

单发模式


<档位>

→ 1(最小档位) → 2 → 3 → 4 → 5(最大档位)

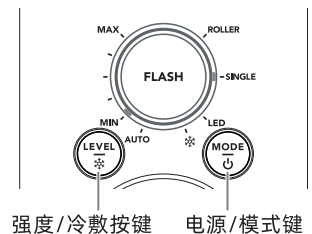

强度/冷却按键 电源/模式键


档位显示

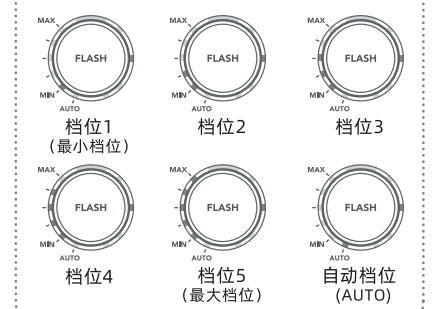


推荐使用部位

单发模式


(适用于所有护理头)

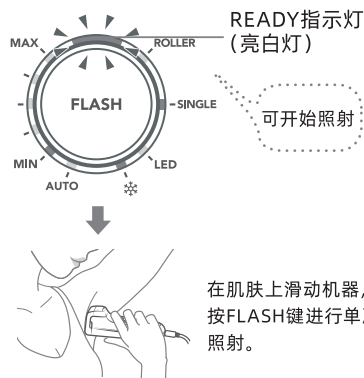


滚轮护理头

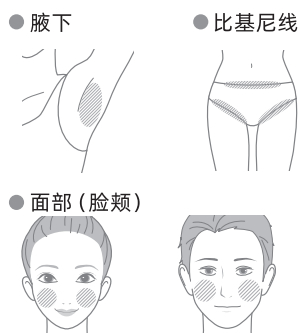

LED护理头


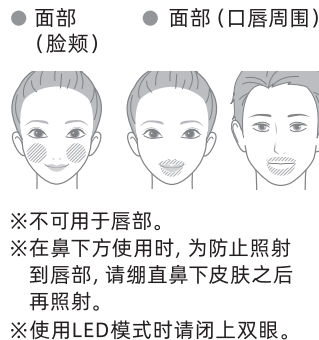


局部护理头

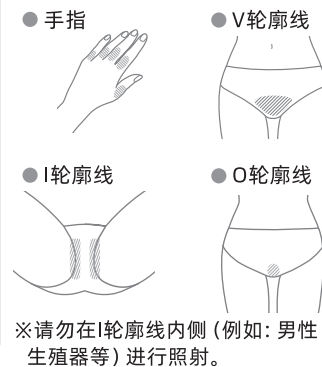


滚轮模式

(仅适用于滚轮护理头)

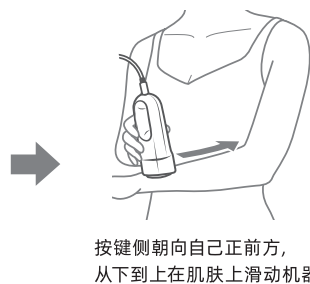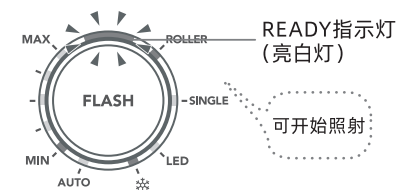


推荐使用部位

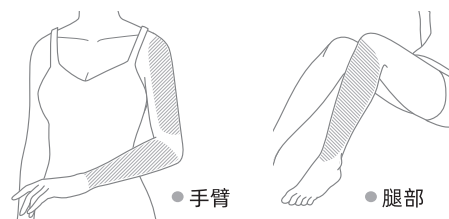


LED模式

(仅适用于LED护理头)

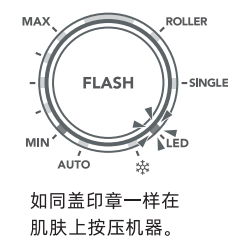


推荐使用部位

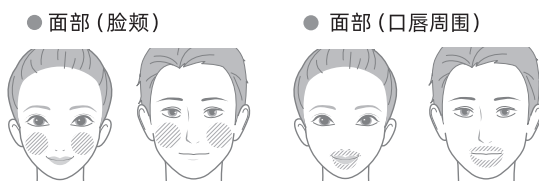

冷敷功能

(仅适用于滚轮护理头)

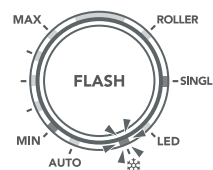

长按强度/冷敷按键可开启或关闭蓝宝石玻璃冷敷功能。

使用方法

1

准备工作


请用剃须刀等工具剃除需要护理部位的毛发。



2

安装护理头并打开电源


请长按电源/模式键。

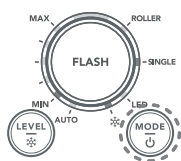

3

选择模式


请按下电源/模式键。

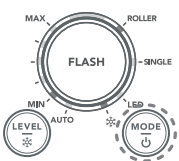

4

选择档位

请按下强度/冷敷按键。

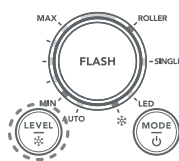

5

照射闪光

将出光口贴紧肌肤进行脱毛护理。



注意

- 请配合脱毛的部位选择护理头。随意使用可能会导致烫伤。
- 请勿直视出光部位。也请确保周围的人不会直视。否则可能会损伤眼睛。
- 平时注意做好保湿等护理, 避免肌肤干燥。如果肌肤干燥, 可能导致产品无法正常发挥功效。
- 护理面部时, 出光口应紧贴肌肤使用。如果出光口没有紧密贴合, 会感觉到出光刺眼。