

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 禁止 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。本製品を使用される前に必ず医師にご相談ください。
◆ 医用電気機器を使用している人
・ベースメーカーなど体内植込式医用電気機器
・人工心肺など生命維持用医用電気機器
・心電計などの装着型医用電気機器

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 禁止 次のような人は使用しない。
● 心臓疾患、障害及びその疑いのある人
● 幼児や自分で意思表示できない人
● 温度や刺激の感覚が自覚できない人
● 自己免疫疾患のある人
子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
事故やトラブルの原因となります。

- 禁止 本製品は乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

- 必ず守る 次のような人は歯科医師に相談のうえ、使用する。
歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医師に相談してください。歯科医師から抗生素の投薬を受けている場合は、本製品またはその他の口腔衛生補助器具を使用する前に歯科医師に相談してください。

- 禁止 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
目や鼻、耳、舌の裏、のどなどのデリケートな部位。本製品は強い水圧で噴射するため、これらのデリケートな部位に深刻な傷害を与える可能性があります。
※ ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

- 禁止 タンクに熱湯をいれない。水またはぬるま湯(40°C以下)を使用する。
やけどの原因となります。

- 禁止 一般的なうがい薬や口腔洗浄液など決められた液剤以外使用しない。
けが・故障の原因となります。
過剰な連続使用はしない(業務用としての使用など)。
発熱・故障の原因となります。

- 禁止 本製品にヨウ素、アルカリ塩(食塩水)、または水に溶けない高濃度のエッセンシャルオイルを使用しない。
本製品の性能が低下し、製品寿命が短くなります。また、製品保証の対象外となります。

- 必ず守る 本製品を水中に沈めたり放置しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 禁止 次のような場所で機器を充電や保管をしない。
・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外

- 禁止 ノズルは家族や他人と共用しない。
感染・トラブルの原因となります。

- 禁止 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。
故障の原因となります。

- 用途以外 禁止 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
歯科医師の指示がある場合はそれに必ず従ってください。事故・けがの原因となります。

- 屋外禁止 本製品を屋外で使用しない。エアロゾル(スプレー)製品を使用している場所や酸素吸入を行っている場所で操作しない。
けが・故障の原因となります。

- 分解禁止 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
※ 本製品にはお客様ご自身で修理できる部品はありません。

- 必ず守る 専用のノズルや付属品のみを使用する。
事故・けがの原因となります。

- 必ず守る 本製品をご使用の前に、口腔内のアクセサリーを取り外す。
けがの原因となります。

- 必ず守る 1日2回、1回1分(最大5分)までの使用を守る。
舌や口腔内を傷める原因となります。連続して使用する場合は2時間以上間隔をあけてください。
※ あくまで目安のため、ご自身の状態をよく見てご使用ください。

- 必ず守る 使用環境温度を守る。
使用環境温度は5~35°Cです。使用する場所の室温を確認してください。
故障・破損の原因となります。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。

⚠ 警告 (電源に関して)

- 必ず守る 必ず直流5V 1.0A のACアダプター(市販品)を使用する(無料保証は国内のみ)。
火災・感電・故障の原因となります。

- 必ず守る 必ず専用の充電用 USB ケーブルを使用する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 禁止 口腔内に傷などの異常を起こしている場合は使用しない。
けがの原因となります。

購入前のご注意

- ・ 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ・ カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせはヤーマンコールセンターまで 受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話

0570-550-637 (通話料有料)

個人情報の取り扱いについて

ヤーマン株式会社及びその関連会社はお客様の個人情報やご相談内容をその対応や修理、他のサービスのみに利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お買い求め、ご相談は当店へ

詳しい製品の説明や動画は[こちら](#)から

ジェットフロス 公式サイト



ヤーマン株式会社

東京都江東区古石場 1-4-4

www.ya-man.com

このカタログの内容は2024年03月現在のものです。一部の製品は取り扱いのない店舗がございます。

PR-JF-1

YAMAN

美容機器のヤーマン、歯科医と開発

ジェットフロス



美容機器の ヤーマンが考える、 口腔健康美の新常識。

新しい美のカタチに挑み続けるヤーマン。

口腔美に挑戦するヤーマンの想い。

それはただ単純な審美領域を追い求めるのではない、

健康な生活と共存する“真美”を追い求める精神。

革新的なモノづくりの考えで、

日本の歯科医と共同開発し、口腔健康美の常識を変える。



ジェットフロスは歯科医と共同開発



日本人の口腔ケアや生活環境を考え開発

「ジェットフロス」は、水流によって歯垢などの汚れを落とす口腔洗浄器です。

その水流には回転が加えられており、細く真っ直ぐに歯周ポケットの奥まで届きます。この「トルネード水流」が汚れの除去をサポートします。

さらに「BOOSTモード」を使い一時的に水流の強さを高めることで、複雑な箇所の汚れを除去します。

また、初心者の方に水流がやさしい「ソフト回転ノズル」や、「水の飛び散りを防止する機能」も搭載し、使いやすい設計を実現しました。

日本の住環境にも合う、コンパクトでスタイリッシュな「ジェットフロス」を活用し、これから日本の口腔ケアの新たなスタンダードを築けることを期待しています。

共同
開発者



医療法人社団ソワン
にしかわデンタルクリニック
西川博史 院長

歯周ポケットの奥の汚れも除去。 歯周病対策に「ジェットフロス」

歯周病対策の口腔ケアとしては、100%のブラッシングが一番の理想ですが、私が歯ブラシを使って磨いたとしても、100%というのはなかなか達成できません。そこで、「ジェットフロス」のような、水流で歯と歯の間の汚れや歯周ポケットの奥の汚れの除去をサポートしてくれる口腔ケアが重要です。

歯と歯の間は約0.003mm～0.012mmの隙間です。そのような場所にはどうしても歯ブラシの毛先は届かないで、水流による汚れの除去が効率的です。また、歯周ポケットには約1～2mmしか歯ブラシの毛先はありません。約3～4mmなど深い歯周ポケットにある汚れを除去するためには、「ジェットフロス」のような水流で汚れをかき出すことがとても大切です。

歯周病になりにくい口腔環境を作るために、「ジェットフロス」による歯周や歯間部のお手入れはとても有効だと考えています。

ジェットフロス
推奨者



医療法人社団つじむら歯科医院
つじむら歯科医院グループ 総院長
辻村傑 先生
iACD 国際総合歯科学会日本支部会長
IDHA 国際歯科衛生士学会世界会長


インプラントをしている方にも おすすめ「ジェットフロス」

口腔内はとても複雑な環境になっています。食べ物の残りかすやプラークがあると、それがインプラントの予後にも影響します。インプラント周囲炎を防ぐためにもプラークの除去は重要です。しかし、歯と歯の間の汚れなどはフロスや歯間ブラシでも取りにくいものがあるため、水流によるお手入れは有効な手段です。

もちろん、インプラントをしていない方でも、歯並びが悪い場合や矯正器具などが口の中にあると、さまざまな隙間が生じます。そこを細かく清掃することは大変な作業ですので、隅々まで洗浄可能な口腔洗浄器が役に立ちます。

歯ブラシやフロス、歯間ブラシを使った後、それでもなお残るプラークなどの汚れをさらにしっかり落とすには、水流の強さに特徴を持つ口腔洗浄器「ジェットフロス」が効率的であると考えます。

ジェットフロス
推奨者

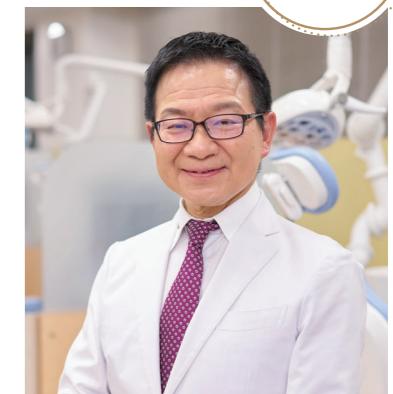

医療法人徳洲会
東京西徳洲会病院 副院長
歯科口腔外科 センター長・部長
佐野次夫 先生
医学博士
日本口腔外科学会専門医・指導医
厚生労働省認定歯科医師臨床研修指導医

※ 当社から先生方に依頼をし、いただいたコメントを編集して掲載しています。個人の見解であり、効果効能を保証するものではありません。

ジェットフロスの特長



BOOSTモード

最大レベルよりも
水圧を一時的に強くできるモード。
気になる部分のケアに。



初心者でも安心の機能とコンパクト設計



水の飛び散りを防ぐ機能を搭載



広範囲をやさしい使用感で
ケアできるノズルが付属



収納や持ち運びに便利

ねじれながら真っ直ぐに放たれる トルネード水流




細く鋭い独自の「トルネード水流」が
歯間部と歯周の汚れを除去

確かな plaque 去除性能


強力トルネード水流で
最大 **99.8%**^{*}
plaque 去除

※人工歯を使用して10秒間あてた部分の除去率

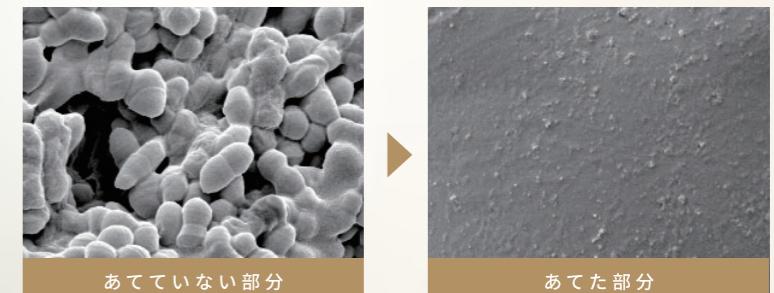

ブラッシングのみと比べ
最大 **345%**^{*}
plaque 去除

※4週間の使用によるPCR値の減少率の比較

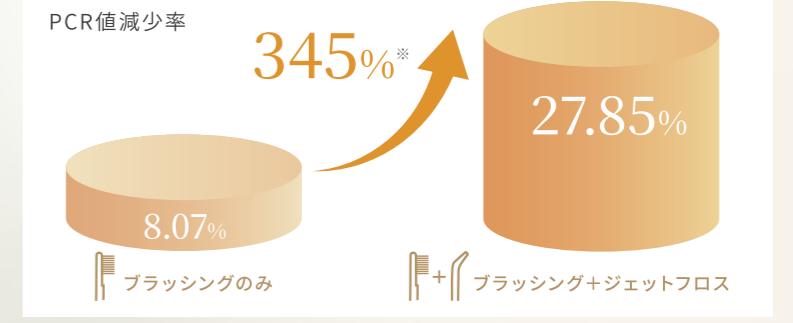

コンパクトで使いやすい

ジェットフロスMINI



初心者モード
BOOSTモード
3段階の水圧調節
防水仕様^{※2}(IPX7)
本体にノズル収納可^{※1}
充電式

セーフティアシストセンサー
BOOSTモード
6段階の水圧調節
防水仕様^{※2}(IPX7)
本体にノズル収納可^{※1}
充電式



水圧調節は3段階+BOOSTモード。

お好みに合わせて水流の強さを調節できます。



ノズルは本体に収納可能^{※1}。
持ち運びにも便利。




防水仕様^{※2}(IPX7)なので、
お風呂でも使用できます。



防水仕様^{※2}(IPX7)なので、
お風呂でも使用できます。



ノズルは本体に収納可能^{※1}。
持ち運びにも便利。

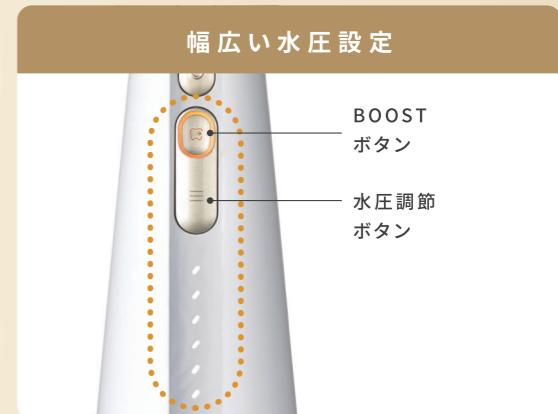

水圧調節は6段階+BOOSTモード。
口腔内の状態やお好みに合わせて水流の強さを
細かく調節できます。

初心者モード

電源ボタンを押している間のみ
ノズルから水が噴射され、はな
すと止まるモードです。
水圧レベルを「弱」に設定して
いるときに動作します。初心者
の方に便利なモードです。



MINI・EX共通 ノズル

ジェットノズル

トルネード水流で
しっかり洗浄



舌クリーナーノズル

舌のケアに



ソフト回転ノズル

広範囲を
やさしい使用感でケア



歯列矯正ノズル(別売)

歯列矯正器具まわりの
汚れを除去



水の飛び散りを防ぐ セーフティアシストセンサー

電源がオンの状態でノズルを
口腔内から出すと、自動的に
電源がオフに。また、ノズルを
口腔内に入れないとき電源はオ
ンになりません。



HOW TO USE

ノズルを取り付ける

STEP 1

カチッと音がするまでノズルをノズル差込穴に差し込んでください。



給水する

STEP 2

給水ふたを開けて、いっぱいになるまで水またはぬるま湯(40°C以下)を入れてください。



水圧のレベルを選択する

STEP 3

水圧調節ボタンを押して、レベルを選択してください。



口腔洗浄を開始する

STEP 4

ノズルを口腔内に入れてから、電源ボタンを押して電源をオンにしてください。



ラインアップ機能一覧



ジェットフロスEX
YOI-2000W
4 540790 432033

セーフティアシストセンサー	—	●
初心者モード	●	—
BOOSTモード	●	●
水圧調節機能	3段階+BOOSTモード	6段階+BOOSTモード
水圧	約40~70PSI BOOSTモード時 約85PSI	約20~70PSI BOOSTモード時 約85PSI
お風呂で使用可 ^{※1} (IPX7)	●	●
本体内ノズル収納	●	●
付属ノズル	ジェットノズル 1本 ソフト回転ノズル 1本 舌クリーナーノズル 1本	ジェットノズル 2本 ソフト回転ノズル 1本 舌クリーナーノズル 1本
その他付属品	充電用USBケーブル、収納ポーチ、取扱説明書	充電用USBケーブル、収納ポーチ、取扱説明書
タンク容量	約165mL	約220mL
一回の給水で連続使用できる時間	約35秒(レベル強)	約45秒間(レベル6)
電源方式	充電式	充電式
使用電池	リチウムイオン蓄電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間 ^{※2}	約2~3時間	約5~6時間
満充電後の連続使用時間 ^{※3}	約20分(レベル強)	約30分(レベル6)
定格電源	DC5V 1.0A ^{※4}	DC5V 1.0A ^{※4}
製品質量	約210g	約280g
外形寸法 ^{※5} (高さ×幅×奥行)	約125mm×50mm×59mm	約201mm×70mm×83mm

※1 IPX7等級(水深1メートルに30分間水に浸しても有害な影響が生じる水の侵入が無い)検査をクリアしています。

※2 電池残量や充電環境、ACアダプターによって、充電時間は前後します。

※3 動作時間は使用環境によって変わります。

※4 ACアダプターは付属しません。充電の際は5V 1.0AのACアダプター(USB-A)をご用意ください。

※5 ノズルを除く本体のみの寸法。YOI-1000Wはタンクを縮めた状態。

別売り品一覧



ジェットノズル
2本入り

YOI-JN2-1



ソフト回転ノズル
2本入り

YOI-SN2



歯列矯正ノズル
2本入り

YOI-OD2



舌クリーナーノズル
1本入り

YOI-TC1



ノズル用
UV除菌ケース

YOI-UV01W



4 540790 443237



4 540790 432132



4 540790 432330



4 540790 443138



4 540790 391538