

No. \_\_\_\_\_

# 保証書

持込修理

|           |  |                 |  |
|-----------|--|-----------------|--|
| 品名        | 家庭用美容器                                 | 型番              | AYS-35                                     |
| 形名        | スイングビート                                |                 |  |
| 無料修理保証    | 対象部分                                   | 期間              |  |
|           | 本体(のせ台含む)・リモコン<br>※本体カバー、腰当て用クッションは除く。 | お買い上げ日から<br>1年間 |  |
| 店名・住所・電話  |  |                 |  |
| ※販売社名     |  |                 | ご購入日のわかる明細を貼付<br>または本保証書とあわせて<br>保管してください。 |
| <b>見本</b> |  |                 |  |

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様にお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったり、お買い上げ日・お買い上げ店がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## ・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。  
その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」  
(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>) および  
「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)  
をご確認ください。

## ・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ  
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

## ・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

### 製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター 受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)



[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

 Exa Beauté

保管用


保証書付

# 取扱説明書

家庭用美容器

スイングビート

AYS-35

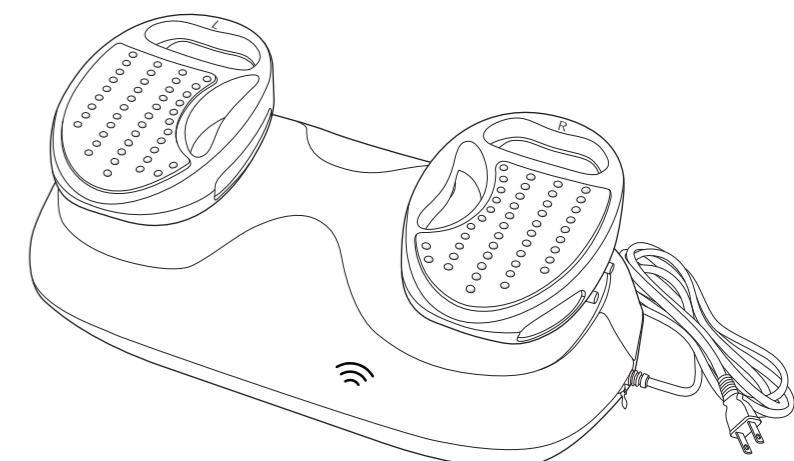

## もくじ

|          |    |
|----------|----|
| 安全上のご注意  | 1  |
| 各部のなまえ   | 6  |
| ご使用の前に   | 7  |
| 使いかた     | 9  |
| 使い終わったら  | 15 |
| こんなときには  | 18 |
| アフターサービス | 20 |
| ●製品仕様    | 20 |
| ●保証について  | 21 |
| 保証書      | 23 |

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について(次は図記号の例です。)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



## 危険

次に該当する人は使用しない。



医用電気機器の誤作動を招く原因となります。

- 医用電気機器を使用している人
  - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
  - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
  - ・心電計などの装着型医用電気機器

# 警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- ・幼児や自分で意思表示できない人
- ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
- ・妊娠初期から出産直後までの人
- ・自己免疫疾患のある人
- ・腰や首、各関節及び製品使用部位に疾患がある人



### 禁止

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人
- ・感染症疾患の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・有熱性疾患の人
- ・高血圧の人や血液疾患のある人
- ・発熱している人
- ・糖尿病などの高度な末梢循環機能障害による知覚障害のある人
- ・神経障害のある人
- ・骨折中の人の皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・通院して薬を服用中のアレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・酒気帯びの場合
- ・頭・腹部前面・骨折をしている部位
- ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご連絡ください。



### 禁止

過剰な連続使用はしない。  
(業務用としての使用など)

ケガ・発熱・故障などの原因となります。高負荷状態が続くと安全装置が作動し、停止します。



### 禁止

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。

火災・感電・ケガの原因となります。



### 禁止

電源コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



### 傷んだ コードプラグ 使用禁止

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



### 禁止

異臭・異常発熱したときは使用しない。

そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



### 衝撃禁止

本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。



## 警告

安全上のご注意



禁止

本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけたりしない。ケガ・故障の原因となります。

コード引張り  
移動禁止

電源コードを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。感電・ショート・発火・断線の原因となります。

水かけ  
禁止

本体や電源コードを水につけてたり、水をかけたり、水洗いしない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

タコ足配線  
禁止

タコ足配線をしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを抜く

電源コードを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での使用をしない。熱器具に近づけない。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



使用者の制限

子供に使わせない。  
事故・ケガの原因となります。



禁止

子供を本体の上に乗せたり、遊ばせたりしない。  
事故・ケガの原因となります。

用途以外  
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外に使用しない。  
ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・ケガの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

のせ台を外した状態で電源を入れない。  
ケガ、故障の原因となります。



プラグを抜く

お手入れするときは必ず電源をオフにし、使用しないときは電源コードをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。  
発熱・発火・故障の原因となります。



## 警告

安全上のご注意



禁止

腕、足、顔や首、腰の周辺にアクセサリーや時計などの硬い物を着けたまま使用しない。  
事故・ケガの原因となります。



必ず守る

衣服のベルトのバックル、ズボンのボタン等の硬い物は外して使用する。  
ケガ、肌トラブルの原因となります。



禁止

ペットには使用しない。  
ケガの原因になります。



必ず守る

のせ台の隙間への手や指、衣類などのはさみ込みに注意する。  
ケガの原因となります。



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。



必ず守る

本製品を使用したまま眠らない。  
ケガ・肌トラブルの原因となります。



屋外禁止

屋外で使用しない。  
本体の故障・誤作動の原因となります。



必ず守る

必ず交流100Vで使用する。  
(無料修理は国内のみ)  
火災・感電の原因となります。  
※海外では使用できません。



必ず守る

自分で意思表示ができない人、身体の不自由な人の使用は控える。  
事故・ケガの原因となります。



必ず守る

途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。  
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル弱から使用する。  
事故・ケガの原因となります。




必ず守る

使用後は毎回、「使い終わったら」(P.15)を参照して、製品に付着した汚れなどを取り除く。  
故障・肌トラブルの原因となります。


# 各部のなまえ

各部のなまえ

## ●本体

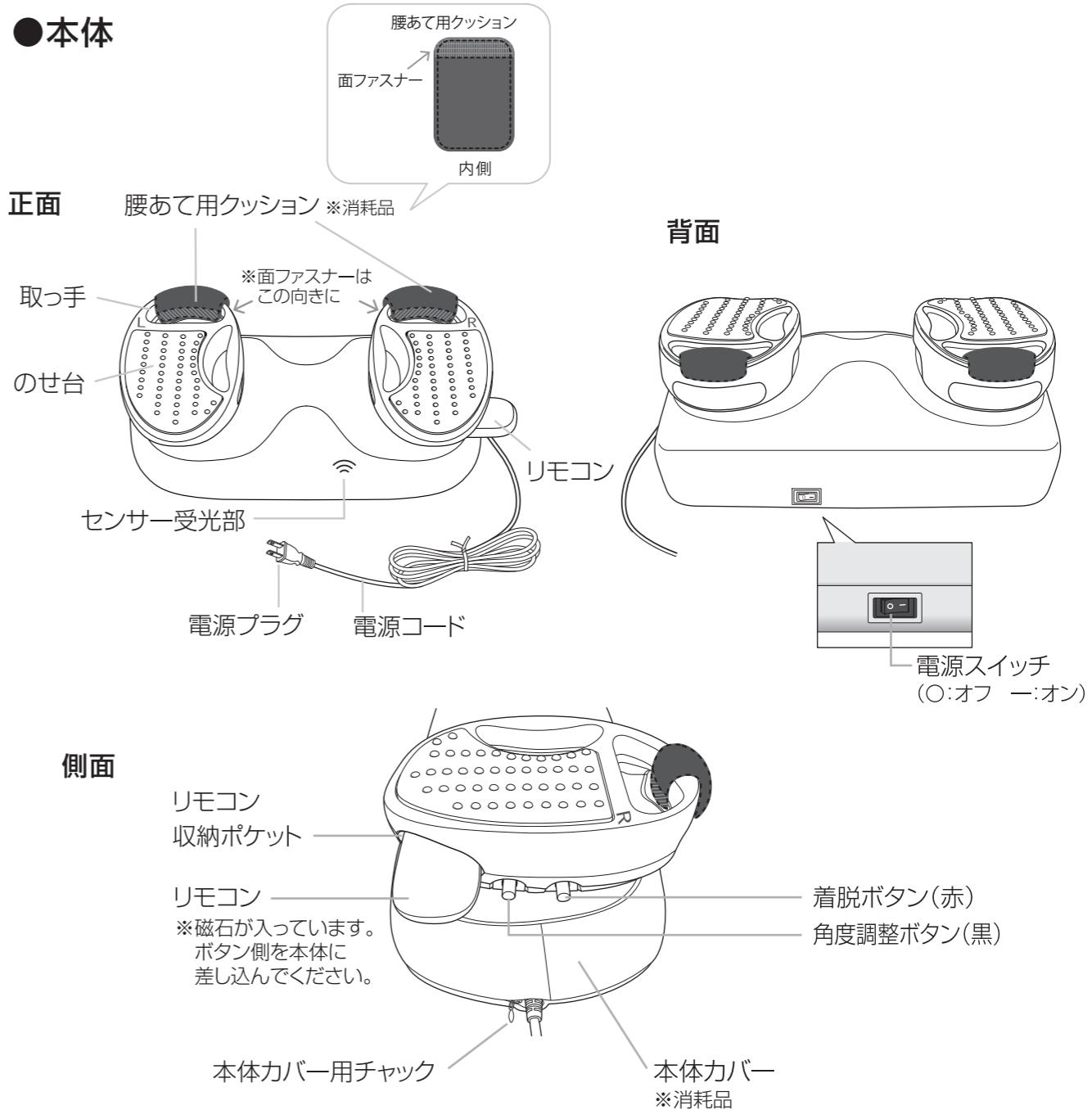

## ●リモコン

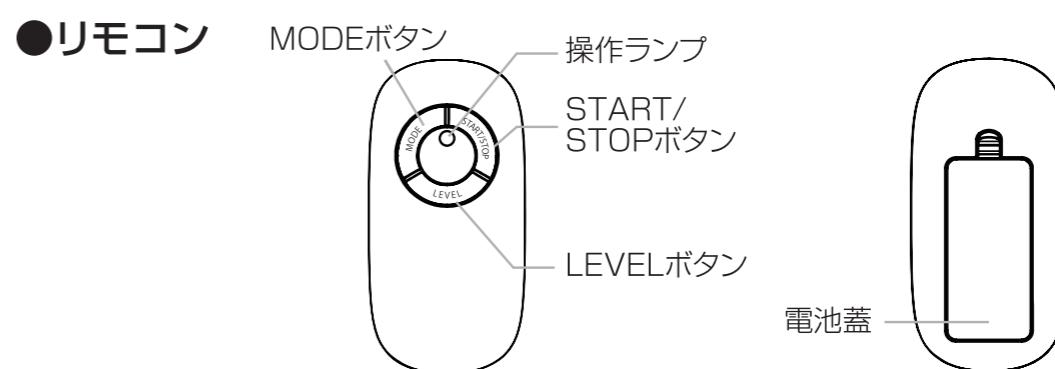

本体および付属品のデザイン・仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

# 注意

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・1日1部位10分(全身30分)までの使用とする。
- ・体調にあわせて使用する。
- ・使用後は必ず電源を切る。

万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。

動作不良・発煙・異音・異臭をするなど、異常状態のまま使用しないでください。

本体は必ず硬く水平で安定した場所に設置する。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

設置場所によっては設置跡や傷がつくおそれがあります。必要に応じ、ゴムマット等の滑りにくいものを敷いてください。なお、毛足が長い絨毯や不安定なものはそれ自体を傷める恐れがあるので避けてください。



使用中にかゆみ、痛みを感じる場合は、使用を中止する。

事故・肌トラブルの原因となります。



肌が赤くなったり、異常を感じるときは、使用を中止する。

事故・肌トラブルの原因となります。



使用前に可動部(のせ台)が、まわりの床や椅子、壁にあたらないことを確認する。

製品の故障や家財の損傷の原因となります。



保管する際には、色移りをしてよい布を被せる、またはビニール袋などに入れて保管する。

色の薄い壁などには、色移りする可能性があります。

# ご使用の前に

## リモコンの操作方法

リモコンはセンサー受光部(P.6参照)に向けて操作してください。操作ランプが光っても、動作が切り替わらない場合があります。反応が悪い場合は、本体に近づけて操作してください。

### ●START/STOPボタン

動作のオン/オフを切り替えます。

### ●MODEボタン

モードの変更ができます。

スタンダードモード(電源オン時) ⇄ オートモード

### ●LEVELボタン

スタンダードモード使用時に運動の強さを変更できます。

弱 → 中 → 強


※オートモードはレベルの選択はありません

### ●操作ランプ

各ボタンを押すと赤点灯します。

リモコン操作の際は電源スイッチの反対側の本体のセンサー受光部に向けて操作してください。

リモコンをセンサー受光部に向いていなかったり、本体の反対側に向けたりすると正常に反応しないことがあります。

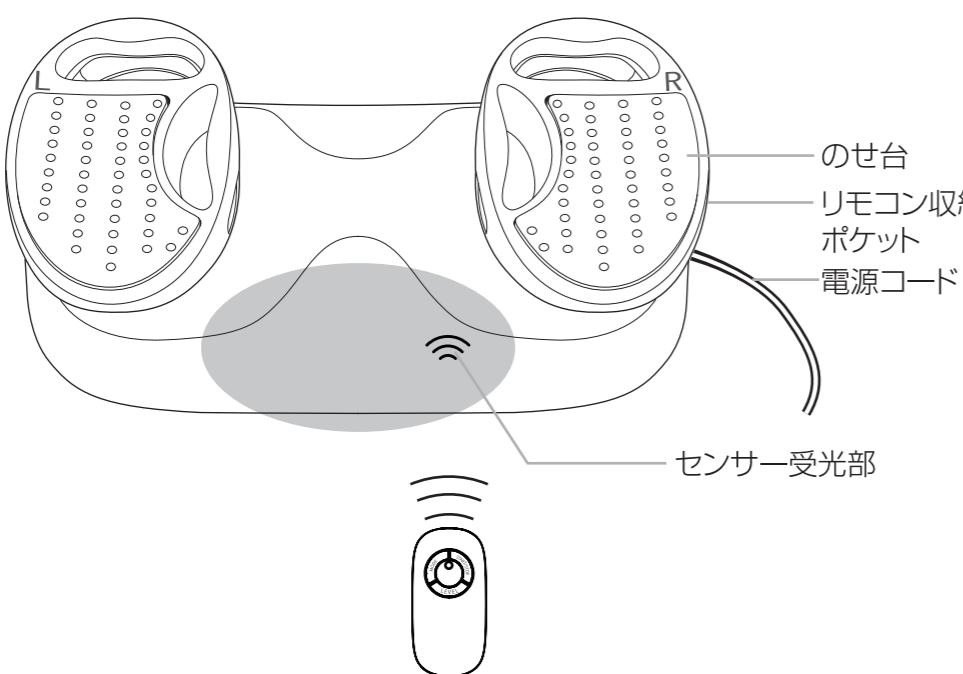

## モードについて

| モード       | 特長                             | オートオフ |
|-----------|--------------------------------|-------|
| スタンダードモード | 運動の強さをお好みで選択できます。<br>弱、中、強の3段階 | 10分   |
| オートモード    | 強から始まり、自動で運動の強さが切り替わります。       |       |

### ●オートオフ機能


動作開始から5分経過すると、本体から音がなります。10分経過すると、自動的に電源がオフになります。途中でモードを変更しても、時間はリセットされません。(続けて使用する場合は、再度START/STOPボタンを押してください。)

※TVなどの音がある環境では聞こえにくい場合があります。

## 乾電池の入れかた

単四形乾電池×2本(別売)

電池蓋を開けて、+・-の極性を確認し、正しい向きでセットしてください。

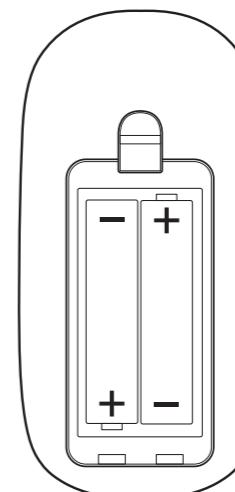


### ●リモコンの電池蓋を閉じる際は 右図の位置を押し込んでください。

カチッとなり蓋が閉まります。

正しく閉まっていないと

使用中に蓋が落ちることがあります。

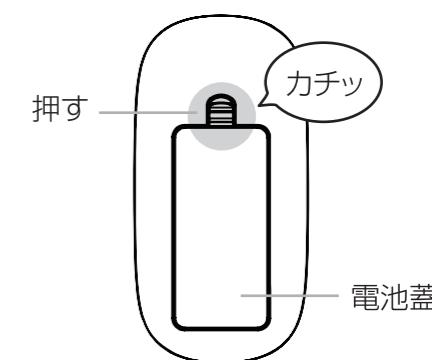

# 使いかた

## 使用上のご注意

ご使用になる前に、この「使用上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 1日1部位10分(全身30分)までの使用としてください。**  
(1部位:両太もも、両ふくらはぎ、両腕など)  
※急な運動による皮膚刺激でかゆみを感じことがあります。
- 皮膚との直接の摩擦を避けるため、**  
破れても良いコットンパンツやくつ下、袖つきの服を着て使用してください。  
(袖や装飾物が巻き込まれないよう注意してください。)  
※摩擦によるかゆみ又は敏感な皮膚にはアレルギーが生じことがあります。
- 本製品はお子様のご使用には適しません。作動中はけがをする恐れがありますので、使用者以外は絶対に触れないようご注意ください。
- ご使用にならない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。  
また、持ち運ぶ際には必ず電源スイッチを切ってください。
- 必ずのせ台が左右正しく装着されているか確認してください。  
誤った向きで取り付けると、本体と乗せ台が擦れて、故障の原因となります。また、のせ台との摩擦により、製品や床・椅子、敷物を破損するおそれがあります。
- 本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。  
ケガ・故障の原因となります。  
無理に力を加えると安全装置が作動し、動作が停止する場合があります。  
停止したときは電源コードをコンセントから抜いて1時間以上休ませてください。
- 左右ののせ台に均等に体重をかけ、重心が一方に偏らないようにしてください。
- 過剰な連続使用はしないでください。  
モーターの特徴上、無理な連続使用は本製品に負荷がかかり、性能を低下させる原因となる可能性があります。  
高負荷状態が続くと安全装置が作動し、停止します。  
停止したときは電源コードをコンセントから抜いて1時間以上休ませてください。
- 可燃性の液体、ガスなどの近くでは使用しないでください。
- 製品を水やその他の液体で濡らさないでください。
- 指定された用途や人体以外には使わないでください。
- 製品を分解したり改造したりしないでください。
- のせ台の隙間への手や指、衣類などのはさみ込みに注意してください。
- アクセサリー類は必ずはずしてからご使用ください。  
巻き込み、はさみ込み等の思わぬ事故の原因となります。


## 使いかた



- 1日1部位10分(全身30分)までの使用としてください。  
(1部位:両太もも、両ふくらはぎ、両腕など)
- 皮膚との直接の摩擦を避けるため、破れても良いコットンパンツやくつ下、袖つきの服を着て使用してください。
- 本体とのせ台との間に衣服や手などをはさまないように、ご使用の際は充分ご注意ください。また電源コードをはさんだまま使用しますと、故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 本体後ろの電源スイッチをオン(一側を押す)にします。

※必ず安全な場所に置いてから  
電源スイッチをオンにして  
ください。

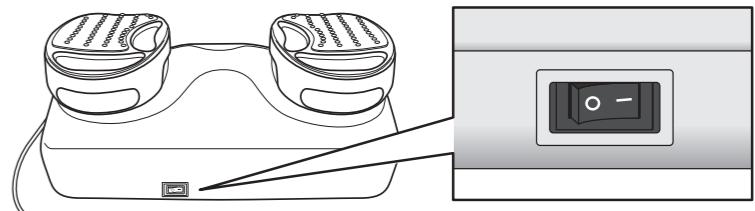

- 3 のせ台にお手入れしたい部位を当ててください。
- 4 リモコンのSTART／STOPボタンを押すとスタートします。  
モード:スタンダード レベル:弱
- 5 お好みでモード、レベルを選択してください。  
モードの変更:MODEボタン レベルの変更:LEVELボタン  
※モードについては(P.8)を参照  
※オートモードはレベルの選択はありません

- 6 1部位につき約5分の使用が目安です。  
※5分たつと本体から音が鳴ります。TVなどの音がある環境では聞こえにくい場合があります。

- オートオフ機能**  
動作開始から5分経過すると、本体から音がなります。10分経過すると、自動的に電源がオフになります。途中でモードを変更しても、時間はリセットされません。  
(続けて使用する場合は、再度START／STOPボタンを押してください。)

- 途中で終了する時は必ずリモコンでストップさせてから  
電源スイッチをオフ(○側を押す)にしてください。

## 角度調整の方法




角度調節の際は電源スイッチがオフ(○側に押す)になっていることを確認する。  
ケガ・故障の原因になります。

- 角度調整ボタン(黒)を押しながらのせ台を回転させると、のせ台の角度を調整できます。(3段階)

お好みの角度に調整してご使用ください。

- 正しい取り付け角度(3段階)


電源スイッチと電源コードの位置関係を確認してください。

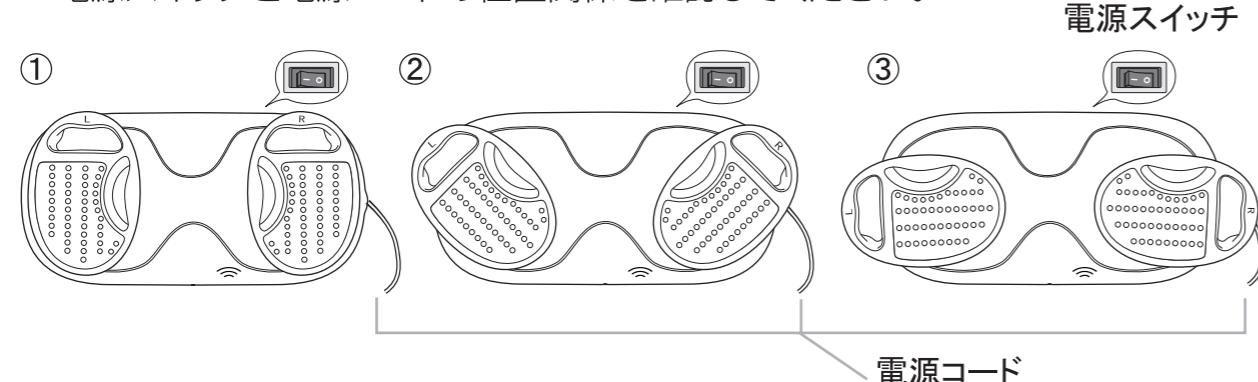

下記のような誤った向きで取り付けると、本体とのせ台が擦れて故障の原因となります。

- 誤った取り付け方法(一例)

誤った向きではのせ台が固定されません。

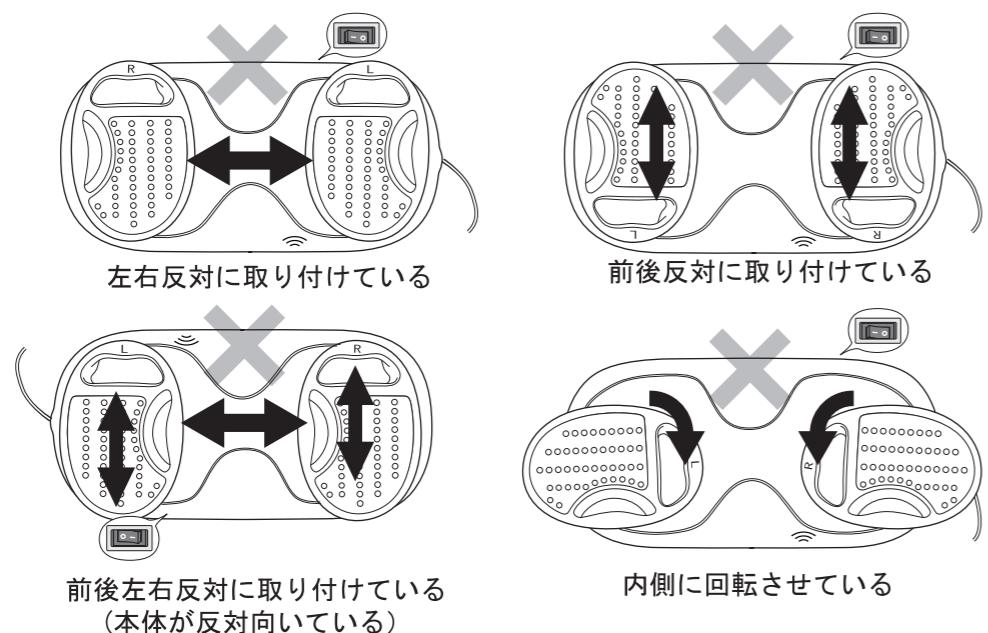

## 各部位への使いかた



●1日1部位10分(全身30分)までの使用としてください。  
(1部位:両太もも、両ふくらはぎ、両腕など)

●お肌や筋肉が慣れるまで、使用目安(1部位5分)よりも少ない時間で使用してください。また必ずレベル[弱]から始め、慣れてから強さを調節してください。


●皮膚との直接の摩擦を避けるため、破れても良いコットンパンツやくつ下、袖つきの服を着て使用してください。

●本体とのせ台との間に衣服や手などをはさまないように、ご使用の際は充分ご注意ください。また電源コードをはさんだまま使用しますと、故障の原因となりますので絶対におやめください。

●本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。

●本体を立てて使用する場合は、図のように破損してもよい厚手のタオルを使い、本体を支えて使用してください。

のせ台との摩擦により、製品や床・椅子、敷物を破損するおそれがあります。

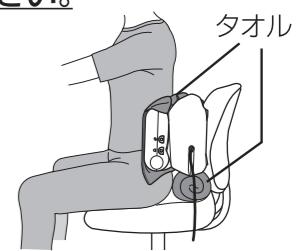

- 角度調整ボタン(黒)を押しながら、のせ台の角度を変更することができます。(P.11参照)


使用目安:各部位約5分(1部位:両太もも、両ふくらはぎ、両腕など)

### 【ウエスト】

椅子やソファに本体を立てかけて(センサー受光部を下向き)、背中をのせ台に軽くあてて、使用します。角度を広げると、より広範囲のケアが可能になります。

図のように破損してもよい厚手のタオルを使い、本体を支えて使用してください。

・破損してもよい厚手のタオルを使い、本体を支えて使用してください

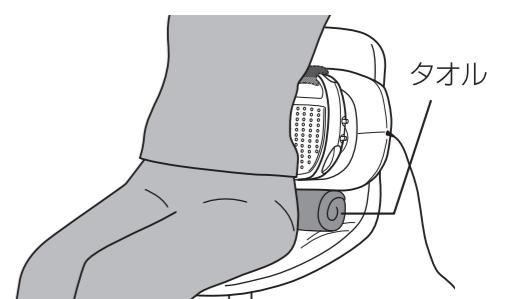



※無理に押しつけたり、負荷をかけたりしないでください。  
故障の原因となります。

※腰あて用クッションの面ファスナーが服に接触しないよう注意してください。面ファスナーが服とこすれば外れたり、服を傷つける原因となります。

※摩擦によって色移りする可能性があります。  
色移りしてもよい服装で使用してください。

※摩擦によるかゆみや赤みが  
生じやすい方はさらに厚手  
のタオル等を本体と使用部  
位の間に挟んでから使用し  
てください。

のせ台が椅子や床に接してしまうと、  
破損する恐れがあります。

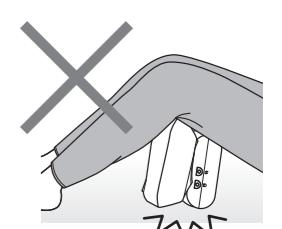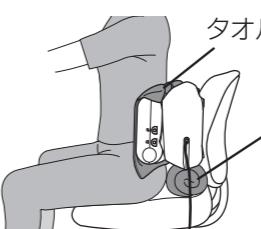


本体を立てて使用する際は、可動部(のせ台)が床や椅子、敷物などにあたら  
ないことを確認してください。

のせ台との摩擦により、製品や床・椅子、敷物を破損するおそれがあります。

ウエスト以外の部位に使用する場合は、腰あて用クッションを取り外してご使用ください。

## 【太もも】

本体を裏返して、のせ台を太もの上にのせて、リモコンを利用して使用します。

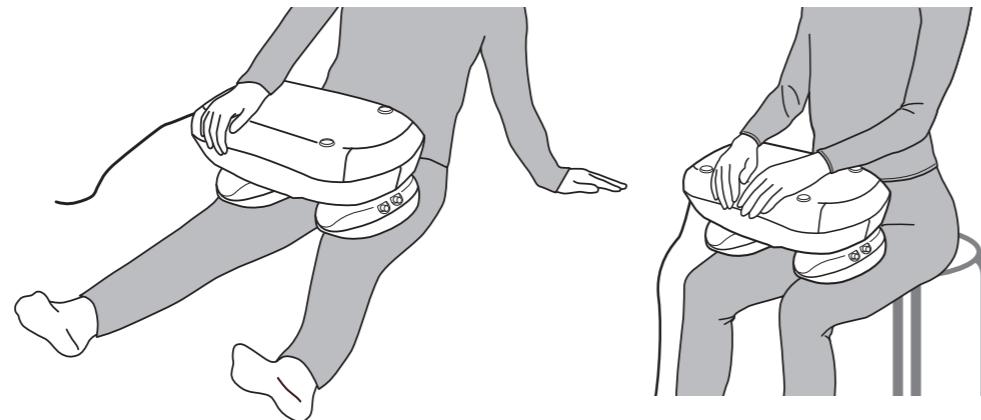

タオルやクッションなどを用いて本体を斜めに置いた後、太もの後ろ側をのせ台に軽くのせて使用します。

※必ずお尻を床につけ、楽な姿勢で行ってください。

※床などの破損を防ぐため、図のように破損してもよい厚手のタオルを使い、本体を支えて使用してください。



## 【ふくらはぎ】

のせ台にふくらはぎを軽くのせて使用します。上半身は仰向けになった状態でも使用できます。

※必ずお尻を床につけ、楽な姿勢で行ってください。



のせ台に足裏またはかかとを軽くのせて使用します。

※足裏をのせる場合は、必ずくつ下を着用してください。

※のせ台の上に立ち上がったり、無理な力を加えないようにしてください。



## 【顔】

のせ台に二の腕をのせて、両手のこぶしを両ほほにあてて使用します。

※ひじを立てると痛いので  
避けてください。

※髪の毛の巻き込みに注意  
してください。




使い  
かた

## 【腕】

取っ手をつかんで使用します。  
本体は机の上、または太股の上においても  
使用できます。

※腕に使用する際には、無理に手首に力を  
入れないでください。

※親指を取っ手の内側に入れて握らないで  
ください。摩擦によってケガをする恐れが  
あります。

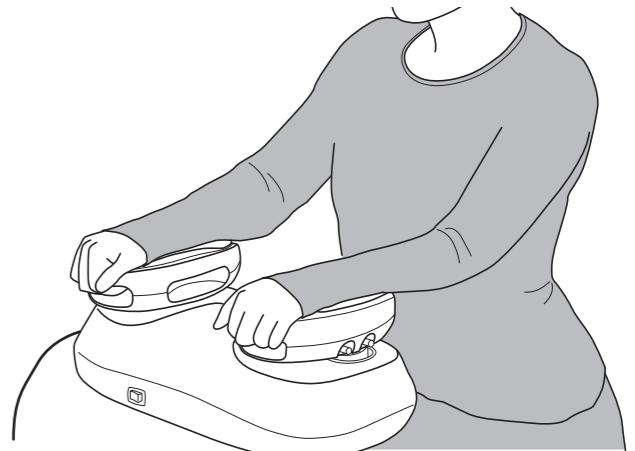

使い  
かた

二の腕をのせ台に軽くのせて使用すること  
もできます。  
お好みに合わせて、角度を調節してください。  
※髪の毛の巻き込みに注意してください。

### ●安全装置について

無理に力を加えると、安全装置が働き、動作が停止することがあります。  
これは安全装置が働いたためであり、故障ではありません。

無理に押しつけず、軽い力で使用してください。停止したときは電源コードをコンセント  
から抜いて1時間以上休ませてください。

### ●オートオフについて

動作開始から5分経過すると、本体から音がなります。10分経過すると、自動的に電源  
がオフになります。途中でモードを変更しても、時間はリセットされません。  
(続けて使用する場合は、再度START/STOPボタンを押してください。)

※製品から出る音は、TVなどの音がある環境では聞こえにくい場合があります。

# 使い終わったら

## ●リモコンの紛失を防ぐため、使い終わったらリモコン収納ポケットに入れてください。

※磁石が入っています。ボタン側を本体に差し込んでください。

## お手入れのしかた

本体を清潔に保つために、定期的にお手入れをしてください。



- お手入れするときは、必ず電源をオフ(○側を押す)にし、電源コードをコンセントから抜く。  
感電・ショート・発火の原因となります。

## ●本体のお手入れ

### 1 電源がオフ(○)になっていることを確認する。

- 電源コードをコンセントから抜いてください。

### 2 タオルなどの乾いた布で、表面の汚れを拭き取る。

汚れがひどい場合は、水で湿らせて固くしぼった布で、汚れを拭き取る。

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 本体は水洗いしないでください。

## ●本体力バーのお手入れ

### 1 着脱ボタン(赤)を押しながら、のせ台を回転させながら軽く引っぱり、本体から外す。

### 2 本体力バー用チャックを開け、本体力バーを本体から取り外す。

### 3 表面に付いたほこりなどを取り除く。 汚れがひどい場合は、中性洗剤でつけおき洗いする。

(ぬるま湯で5~10分程度)


- 塩素系、酸素系、および酵素系漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯機の使用や、ドライクリーニングは避けてください。

## 4 陰干して乾燥させてから本体に取りつけます。


※のせ台が本体に装着された状態ではカバーはつけられません。

## 5 のせ台を本体に装着する。

- 本体を電源コードが右側になるように置きます。
  - のせ台の右側(R)、左側(L)を確認して、本体の差し込み部に取り付けます。
- ※誤った向きで取り付けると、本体と乗せ台が擦れて、故障の原因となります。  
また、のせ台との摩擦により、製品や床・椅子、敷物を破損するおそれがあります。

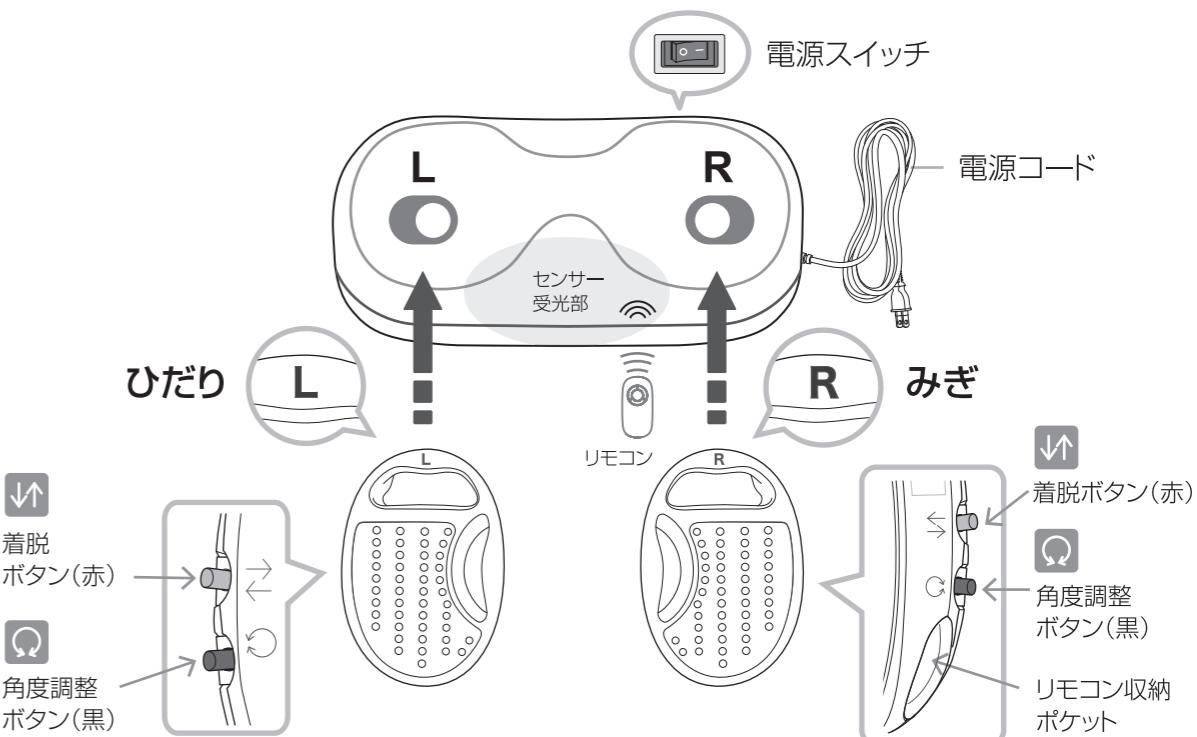

- のせ台は「カチッ」と音がするまで本体に押し込みます。

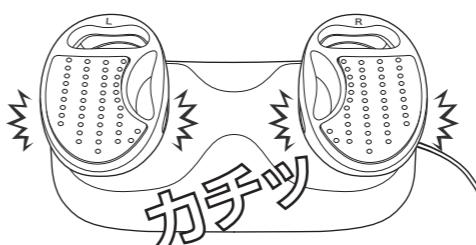

※きちんとまつないと  
「のせ台外れ」が起こりやすくなります。

- のせ台が正しく取り付けられたか確認します。

※角度調整ボタン(黒)を押しながらのせ台を回し、  
下図のように回転すれば正常に取り付けられています。



## ●腰あて用クッションのお手入れ

- 1 本体から腰あて用クッションを取り外す。
- 2 表面に付いたほこりなどを取り除く。  
汚れが気になる場合は、5~10分程度水かめるま湯につけて手洗いしてください。中性洗剤、漂白剤類は使用しないでください。  
・洗濯機や乾燥機の使用や、ドライクリーニングは避けてください。
- 3 陰干しで乾燥させてから本体に取りつけます。

使い終わったら

## 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、電源コードを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、急激な温度変化のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間保管する場合、防虫剤は使用しないでください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.18)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.20)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

## 困ったときは

### 最初に確認すること

- 本体後ろの電源スイッチはオン(一側を押す)になっていますか
- リモコンの電池は不足していませんか
- リモコンはセンサー受光部に近づけて操作していますか

| こんな症状             | 考えられる原因  | 処置方法   |
|-------------------|--|--|
| レベルが変更できない        | → オートモードを使用している<br>→ 電源スイッチがオフ(○)になっている<br>→ START/STOPボタンを押していない<br>→ オートオフ(約10分)になった<br>→ 高負荷状態で使用した | → レベルの変更はスタンダードモードのみで可能です<br>→ 電源スイッチをオン(ー)にしてください<br>→ リモコンのSTART/STOPボタンを押してください<br>→ 再度使用する場合はリモコンのSTART/STOPボタンを押してください<br>→ 安全装置が作動しています<br>1時間以上休ませてください |
| 動作しない             | → リモコンのランプが点かない<br>→ リモコンのランプが点滅や点灯したままになる   | → 電池を交換してください  |
| 使用後に肌が赤くなる(かゆくなる) | → 長時間使用した<br>→ 皮膚への摩擦  | → 1日1部位10分(全身30分)までの使用してください<br>→ 異常ではありません<br>時間の経過で元に戻ります  |
| リモコンがカラカラ音がする     | → カラカラ音がすることは仕様のため、不具合ではございません   | → リモコン操作時に操作ランプが点灯していれば異常ありません   |

こんなときには

# アフターサービス

## よくあるご質問

| Q                         | A   |
|---------------------------|---|
| スイングビートを使用したまま眠っても大丈夫ですか? | 長時間の運動・接触による肌トラブルの原因になりますので、製品を使用したまま眠らないでください。         |
| 治療中または治療後の経過観察中の使用はできますか? | 心臓手術後、ギックリ腰、腰痛、腰椎の損傷、胃や腸の症状悪化などの治療中、治療直後の方は、使用しないでください。 |

こんなときには

## 廃棄について

本製品を廃棄される場合は、各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

### ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など  
**0120-776-282**(通話料無料)  
携帯電話・PHS  
**0570-550-637**(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みあっております。

お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

## ●製品仕様

|         |  |
|---------|--|
| 定格電源    | AC100V 50/60Hz   |
| 消費電力    | 最大約50W   |
| 外形寸法    | 約W470×D225×H190(mm)  |
| 製品質量    | 約3.7kg(リモコンは除く)  |
| 電源コード長さ | 約2m  |
| リモコン電源  | DC 3V 単四形乾電池×2本  |
| 製造国     | 中国   |
| 材質      | 本体:ABS樹脂／シリコンゴム<br>リモコン:ABS樹脂<br>カバー:ポリエチル<br>腰あて用クッション:ポリエチル  |
| セット内容   | 本体(のせ台含む)…1台<br>専用リモコン ……1個<br>本体カバー ………1枚(本体に初めから装着されています。)<br>腰あて用クッション…2個(本体に初めから装着されています。)<br>※単四形乾電池は同梱しておりません。<br>別途お買い求めください。 |

アフターサービス

## ●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。※本体力バー、腰あて用クッションは消耗品です。  
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.20）にご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
  - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
    - (イ)お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
    - (ロ)電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
      - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
  - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- (ハ)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(二)火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合  
(ホ)落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合  
(ヘ)改造・分解の形跡がある場合  
(ト)説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合  
(チ)保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合  
(リ)弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合  
(ヌ)製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合  
(ル)その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断し場合

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。