


美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器
スイングビート
AYS-35

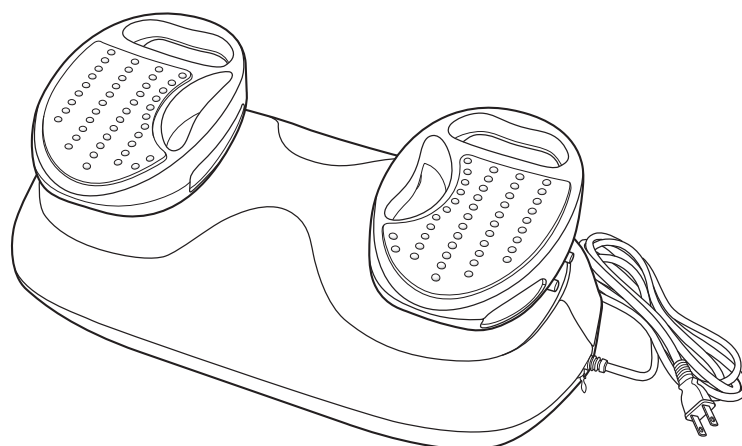

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	6
ご使用の前に	7
使いかた	9
使い終わったら	15
こんなときには	17
アフターサービス	19
●製品仕様	19
●保証について	20
保証書	23

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です。)

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招く原因となります。



禁止

●医用電子機器を使用している人

- ・ ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・ 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・ 心電計などの装着型医用電子機器

警告

次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因になります。



禁止

●医師の治療を受けている人 ●急性疾患 ●結核性疾患
●発熱している人 ●高血圧 ●悪性腫瘍 ●血液疾患 ●内臓疾患
●疲労が激しい人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
●眠気をさそう薬を服用中の人 ●妊娠中、生理中 ●知覚障害の人
●骨粗しょう症の人 ●ねんざ、肉離れ ●骨折中の人
●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を
起こしている人

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

過剰な連続使用はしない。
(業務用としての使用など)

ケガ・発熱・故障などの原因
となります。高負荷状態が続
くと安全装置が作動し、停止
します。



禁止

引火性のもの(アルコール・シン
ナー・ベンジン・除光液・スプ
レーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・ケガの原因とな
ります。



禁止

本体の上に乗ったり立ったり
しない。
ケガ・故障の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

電源コードが傷んだり、コン
セントの差し込みがゆるいと
きは使用しない。
感電・ショート・発火の原因とな
ります。修理はお買い上げの販
売店窓口にご相談ください。



無理な扱い
禁止

電源コードを破損、加工、束ね
るなど無理に力を加えない。
また、重いものを乗せたり、
挟み込んだりしない。電源
コードが破損し、火災・感電
の原因となります。



衝撃禁止

本体に重い物を置いたり、使
用中に落下させたりなど、強
い衝撃を与えない。
ケガをしたり、本製品が故障
する原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使
用しない。
そのまま使用すると破損・
発火の原因となります。



使用者の制限

子供に使わせない。
事故・ケガの原因となります。



警告



コード引っ張り
移動禁止

電源コードを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。



禁止

子供を本体の上に乗せたり、遊ばせたりしない。

事故・ケガの原因となります。



水かけ
禁止

本体や電源コードを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外に使用しない。

ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。



タコ足配線
禁止

タコ足配線をしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



プラグを抜く

電源コードを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

のせ台を外した状態で電源を入れない。

ケガ、故障の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での使用をしない。熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



プラグを抜く

お掃除するときは必ず電源をオフにし、使用しないときは電源コードをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

警告



禁止

腕、アシ、顔や首、腰の周辺にアクセサリーや時計などの硬い物を着けたまま使用しない。事故・ケガの原因となります。



禁止

ペットには使用しない。ケガの原因になります。



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。本体の表面に損傷を与える原因となります。



屋外禁止

屋外で使用しない。本体の故障・誤作動の原因となります。



必ず守る

自分で意思表示ができない人、身体の不自由な人の使用は控える。事故・ケガの原因となります。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル弱から使用する。事故・ケガの原因となります。



必ず守る

衣服のベルトのバックル、ズボンのボタン等の硬い物は外して使用する。ケガ、肌トラブルの原因となります。



必ず守る

のせ台の隙間への手や指、衣類などはさみ込みに注意する。ケガの原因となります。



必ず守る

本製品を使用したまま眠らない。ケガ・肌トラブルの原因となります。



必ず守る

必ず交流100Vで使用する。
(無料修理は国内のみ)
火災・感電の原因となります。
※海外では使用できません。



必ず守る

途中で気分が悪くなったり、肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

使用後は毎回、「使い終わったら」(P.15)を参照して、製品に付着した汚れなどを取り除く。故障・肌トラブルの原因となります。



注意



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・ 同じ部位に10分以上の使用は避ける。
- ・ 体調にあわせて使用する。
- ・ 使用後は必ず電源を切る。



必ず守る

**使用中にかゆみ、痛みを感じ
る場合は、使用を中止する。**

事故・肌トラブルの原因となります。



必ず守る

**肌が赤くなったり、異常を感じ
るときは、使用を中止する。**

事故・肌トラブルの原因となります。




必ず守る

**万一、異常が発生したら、電
源をすぐに切る。**


動作不良・発煙・異音・異臭
がするなど、異常状態のま
ま使用しないでください。

各部のなまえ


●本体

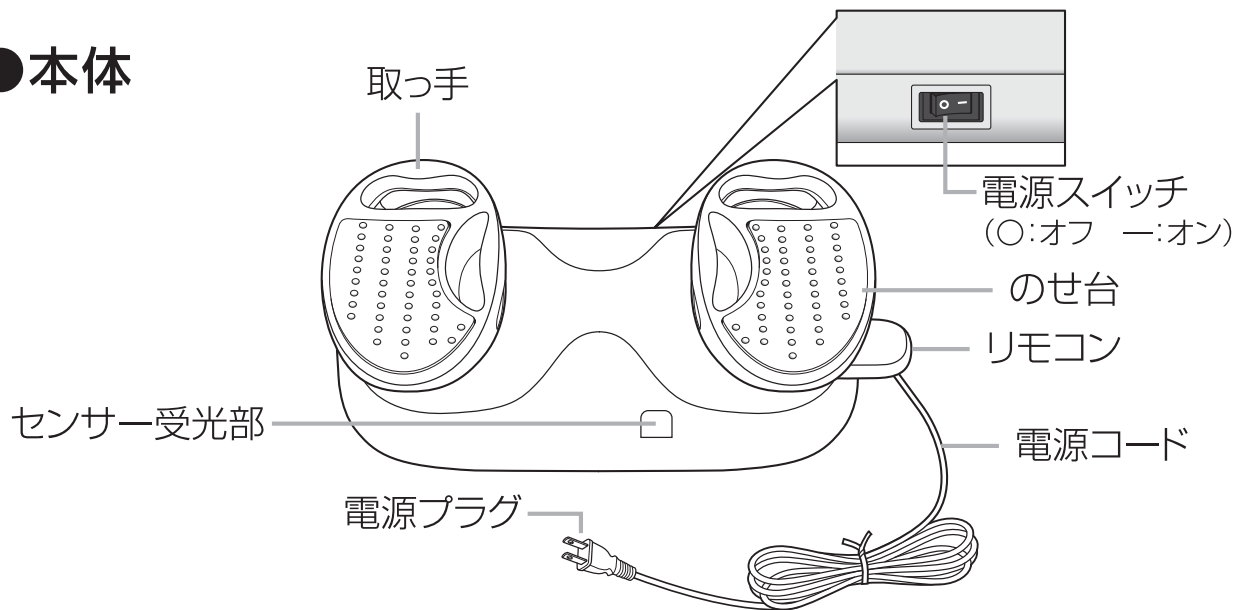


各部のなまえ

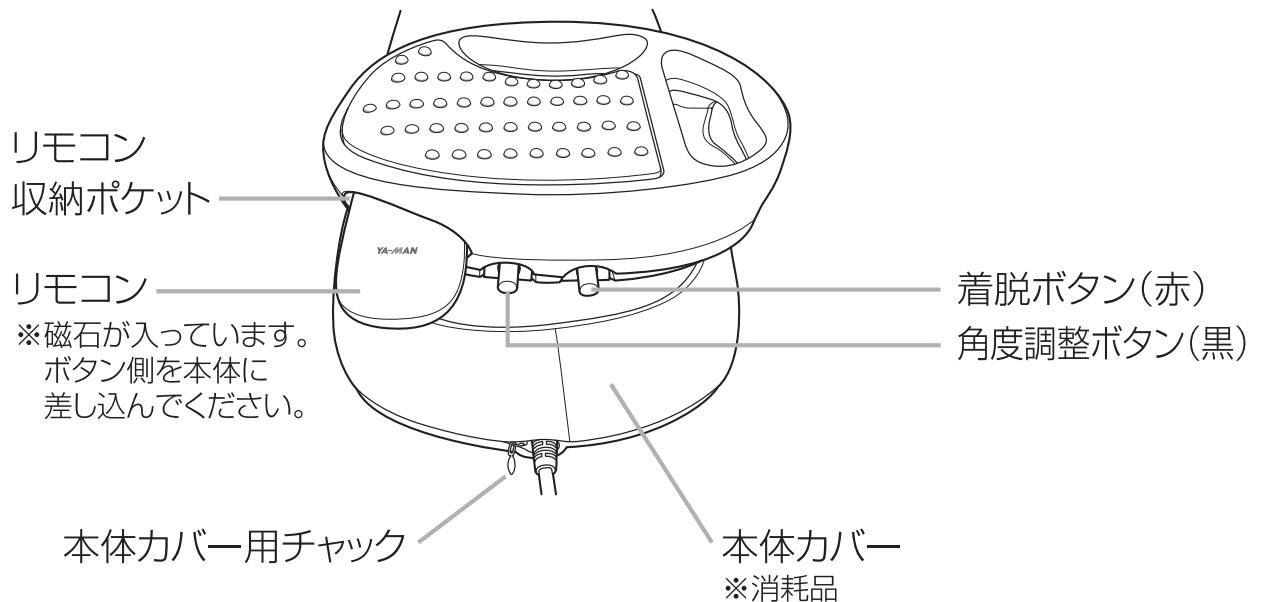

●リモコン

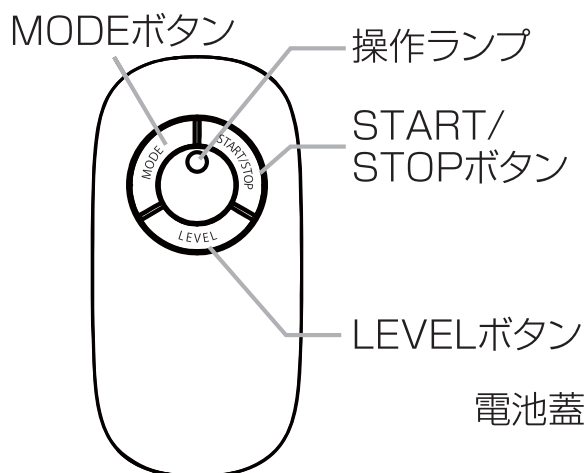

※リモコンの電池蓋を閉じる際は下図の位置を押し込んでください。パチッと音がして蓋が閉まります。正しく閉まっていないと使用中に蓋が落ちることがあります。

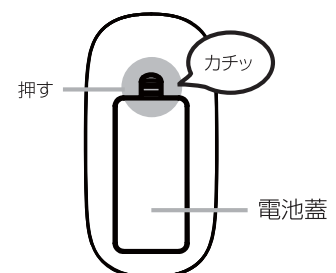

ご使用前に

リモコンの操作方法

リモコンはセンサー受光部(P.6参照)に向けて操作してください。操作ランプが光っても、動作が切り替わらない場合があります。反応が悪い場合は、本体に近づけて操作してください。

●START/STOPボタン

動作のオン/オフを切り替えます。

●MODEボタン

モードの変更ができます。

スタンダードモード(電源オン時) ⇄ オートモード


●LEVELボタン

スタンダードモード使用時に運動の強さを変更できます。

弱 → 中 → 強


●操作ランプ

各ボタンを押すと赤点灯します。

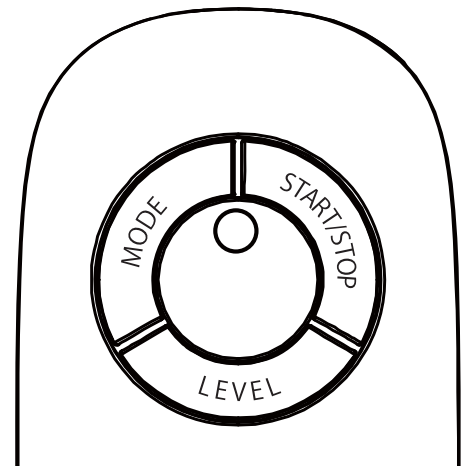

リモコン操作の際は本体のセンサー受光部に向けて操作してください。

リモコンをセンサー受光部に向けていなかったり、本体の反対側に向けたりすると正常に反応しないことがあります。

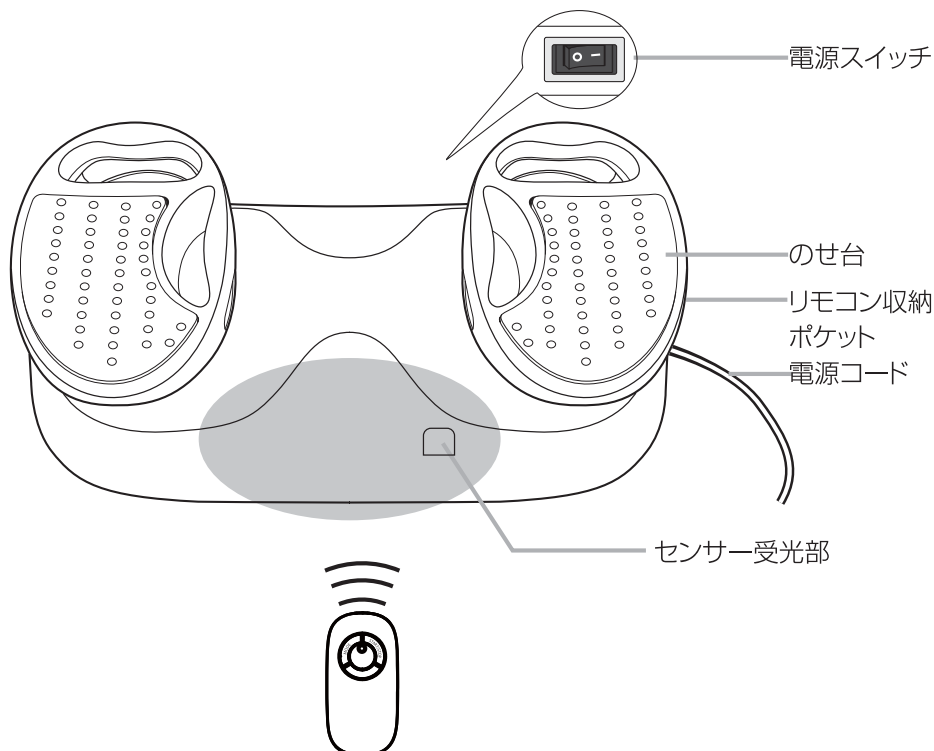

モードについて

モード	特 長	オートオフ
スタンダードモード	運動の強さをお好みで選択できます。 弱、中、強の3段階	10分
オートモード	強から始まり、自動で運動の強さが切り替わります。	

●オートオフ機能

動作開始から5分経過すると、ピッピッと音がなります。10分経過すると、自動的に電源がオフになります。途中でモードを変更しても、時間はリセットされません。

乾電池の入れかた

単四形乾電池×2本(別売)

電池蓋を開けて、+・-の極性を確認し、正しい向きでセットしてください。

使いかた

使用上のご注意

ご使用になる前に、この「使用上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 同じ部位に集中して10分以上、全身で30分以上連続して使用しないでください。
(1部位:両太股、両ふくらはぎ、両腕など)

※急な運動による皮膚刺激でかゆみを感じることがあります。

- 本製品をご使用の際は、できるだけ皮膚との直接の摩擦を避けるため、破れても良いコットンパンツや袖つきの服を着て使用してください。(袖や装飾物が巻き込まれないよう注意してください。)

※摩擦によるかゆみ又は敏感な皮膚にはアレルギーが生じることがあります。

- 本製品はお子様のご使用には適しません。作動中はけがをする恐れがありますので、使用者以外は絶対に触れないようご注意ください。

- ご使用にならない時は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
また、持ち運ぶ際には必ず電源スイッチを切ってください。

- 本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。

故障の原因となることがあります。

無理に力を加えると安全装置が作動し、動作が停止する場合があります。

- 過剰な連続使用はしないでください。

モーターの特徴上、無理な連続使用は本製品に負荷がかかり、性能を低下させる原因となる可能性があります。

高負荷状態が続くと安全装置が作動し、停止します。

停止したときは電源コードをコンセントから抜いて1時間以上休ませてください。

- 可燃性の液体、ガスなどの近くでは使用しないでください。

- 製品を水やその他の液体で濡らさないでください。

- 指定された用途や人体以外には使わないでください。

- 製品を分解したり改造したりしないでください。

- のせ台の隙間への手や指、衣類などのはさみ込みに注意してください。

- アクセサリ類は必ずはずしてからご使用ください。

巻き込み、はさみ込み等の思わぬ事故の原因となります。

使いかた



注意

- 同じ部位に集中して10分以上、全身で30分以上連続して使用しないでください。
(1部位:両太股、両ふくらはぎ、両腕など)
- 本製品をご使用の際は、できるだけ皮膚との直接の摩擦を避けるため、破れても良いコットンパンツや袖つきの服を着て使用してください。
- 本体とのせ台との間に衣服や手などをはさまないように、ご使用の際は充分ご注意ください。また電源コードをはさんだまま使用しますと、故障の原因となりますので絶対にお止めください。
- 本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - 2 本体後ろの電源スイッチをオン(ー)にします。
※必ず安全な場所に置いてから電源スイッチをオンにしてください。
 - 3 のせ台にお手入れしたい部位を当ててください。
 - 4 リモコンのSTART／STOPボタンを押すとスタートします。
モード：スタンダード レベル：弱
 - 5 お好みでモード、レベルを選択してください。
モードの変更：MODEボタン レベルの変更：LEVELボタン
※モードについては(P.8)を参照
※オートモードはレベルの選択はありません
 - 6 1部位につき約5分の使用が目安です。
(5分たつとピッピッと音が鳴ります。)
 - オートオフ機能
動作開始から5分経過すると、ピッピッと音がなります。10分経過すると、自動的に電源がオフになります。途中でモードを変更しても、時間はリセットされません。
(続けて使用する場合は、再度START／STOPボタンを押してください。)
- 途中でトリートメントを終了する時は必ずリモコンでストップさせてから電源スイッチをオフ(○)にしてください。

角度調整の方法




角度調整の際は電源スイッチがオフ(O)になっていることを確認する。
ケガ・故障の原因となります。

- 角度調整ボタン(黒)を押しながらのせ台を回転させると、のせ台の角度を調整できます。(3段階)

好みの角度に調整してご使用ください。

- 正しい取り付け角度(3段階)


電源スイッチと電源コードの位置関係を確認してください。

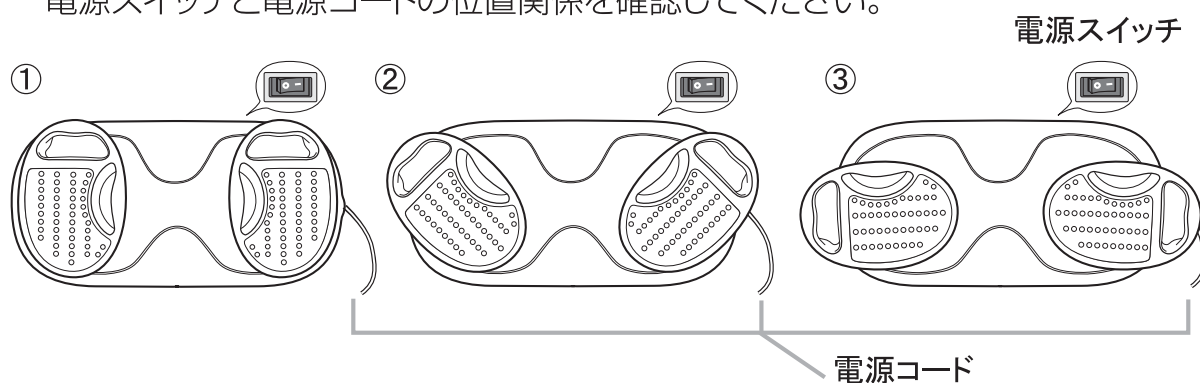

下記のような誤った向きで取り付けると、本体とのせ台が
擦れて故障の原因となります。

- 誤った取り付け方法(一例)

誤った向きではのせ台が固定されません。

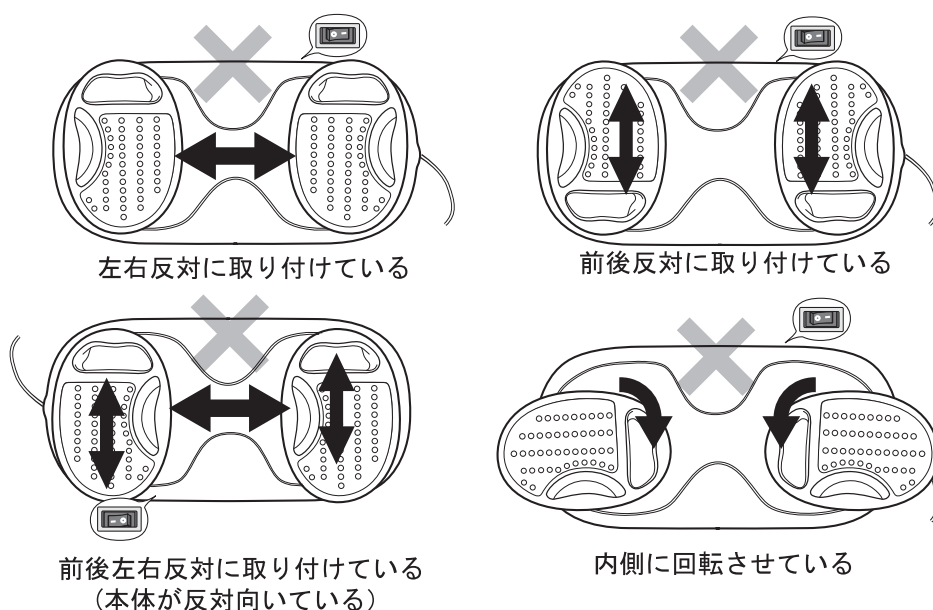

各部位への使いかた



- 同じ部位に集中して10分以上、全身で30分以上連続して使用しないでください。
(1部位:両太股、両ふくらはぎ、両腕など)
- お肌や筋肉が慣れるまで、使用目安(1部位5分)よりも少ない時間で使用してください。また、必ずレベル「弱」から始め、慣れてから強さを調整してください。
- 本製品をご使用の際は、できるだけ皮膚との直接の摩擦を避けるため、破れても良いコットンパンツや袖つきの服を着て使用してください。
- 本体とのせ台との間に衣服や手などをはさまないように、ご使用の際は充分ご注意ください。また電源コードをはさんだまま使用しますと、故障の原因となりますので絶対にお止めください。
- 本体の上に立ったり、本体に全体重をあずけないでください。

- 角度調整ボタン(黒)を押しながら、のせ台の角度を変更することができます。
(P.11参照)

使用目安:各部位約5分(1部位:両太股、両ふくらはぎ、両腕など)

【太股】

本体を裏返して、のせ台を太股の上にのせて、リモコンを利用して使用します。



クッションなどを用いて本体を斜めに置いた後、太股の後ろ側をのせ台に軽くのせて使用します。




【ウェスト】

椅子やソファに本体を立てかけて、背中をのせ台に軽く当てて、使用します。角度を広げると、より広範囲のケアが可能になります。

※無理に押しつけたり、負荷をかけたりしないでください。故障の原因となります。

※摩擦によるかゆみや赤みが生じやすい方はさらに厚手のタオル等を本体と使用部位の間に挟んでから使用してください。

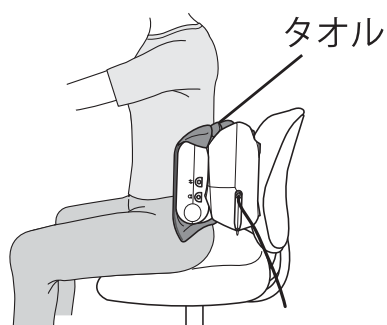

【ふくらはぎ】

のせ台にふくらはぎを軽くのせて使用します。上半身は仰向けになった状態でも使用できます。

※必ずお尻を床につけ、楽な姿勢で行ってください。



のせ台に足裏またはかかとを軽くのせて使用します。



【顔】

のせ台に二の腕をのせて、
両手のこぶしを両ほほに当てて
使用します。

※ひじを立てると痛いので
避けてください。

※髪の毛の巻き込みに注意
してください。



【腕】

取っ手をつかんで使用します。
本体は机の上、または太股の上
においても使用できます。

※腕に使用する際には、無理に手首に
力を入れないでください。

※親指を取っ手の内側に入れて握ら
ないでください。摩擦によってケガ
をする恐れがあります。

二の腕をのせ台に軽くのせて使用
することもできます。
お好みに合わせて、
角度を調節してください。

※髪の毛の巻き込みに注意してください。



●安全装置について

無理に力を加えると、安全装置が働き、動作が停止することがあります。
これは安全装置が働いたためであり、故障ではありません。
無理に押しつけず、軽い力で使用してください。停止したときは電源コードをコン
セントから抜いて1時間以上休ませてください。

●オートオフについて

動作開始から5分経過すると、ピッピッと音になります。10分経過すると、自動的
に電源がオフになります。途中でモードを変更しても、時間はリセットされません。

使い終わったら

●リモコンの紛失を防ぐため、使い終わったらリモコン収納ポケットに入れてください。

※磁石が入っています。ボタン側を本体に差し込んでください。

お掃除のしかた

本体を清潔に保つために、定期的にお掃除をしてください。



警告

●お掃除するときは、必ず電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

●本体のお掃除

1 電源がオフ(○)になっていることを確認する。

・電源コードをコンセントから抜いてください。

2 タオルなどの乾いた布で、表面の汚れを拭き取る。汚れがひどい場合は、水で湿らせて固くしぼった布で、汚れを拭き取る。

・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

・本体は水洗いしないでください。

●本体カバーのお掃除

1 着脱ボタン(赤)を押しながら、のせ台を回転させながら軽く引っぱり、本体から外す。

2 本体カバー用チャックを開け、本体カバーを本体から取り外す。

3 表面に付いたほこりなどを取り除く。 汚れがひどい場合は、中性洗剤でつけおき洗う。 (ぬるま湯で5～10分程度)

・塩素系、酸素系、および酵素系漂白剤は使用しないでください。


・洗濯機の使用や、ドライクリーニングは避けてください。

4 陰干しで乾燥させてから本体に取りつけます。

※のせ台が本体に装着された状態ではカバーはつけられません。

5 のせ台を本体に装着する。

- ・「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
- ・本体を電源コードが右にくる向きに置き、取っ手が奥になる向きで、のせ台を装着してください。

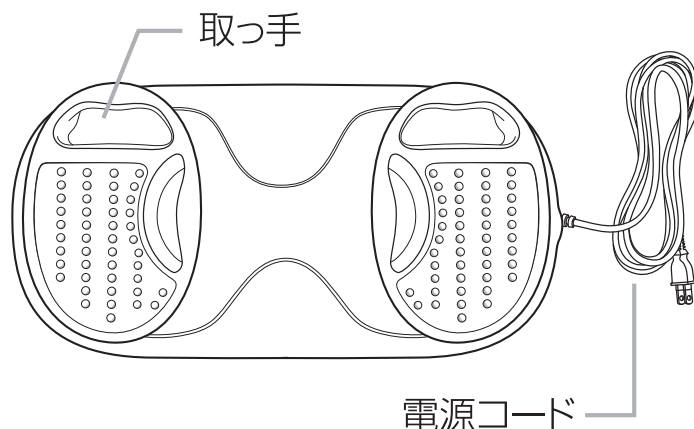

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、電源コードを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、急激な温度変化のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間保管する場合、防虫剤は使用しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.17)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.19)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

最初に確認すること

- 本体後ろの電源スイッチはオン(ー)になっていますか
- リモコンの電池は不足していませんか
- リモコンはセンサー受光部に近づけて操作していますか

こんな症状	考えられる原因	処置方法
レベルが変更できない	オートモードを使用している	レベルの変更はスタンダードモードのみで可能です
動作しない	電源スイッチがオフ(○)になっている	電源スイッチをオン(ー)にしてください
	START/STOPボタンを押していない	リモコンのSTART/STOPボタンを押してください
	オートオフ(約10分)になった	再度使用する場合はリモコンのSTART/STOPボタンを押してください
	高負荷状態で使用した	安全装置が作動しています1時間以上休ませてください
	リモコンの電池が不足している	電池を交換してください
リモコンのランプが点かない	リモコンの電池が不足している	電池を交換してください
トリートメント後に肌が赤くなる(かゆくなる)	長時間使用した	1日1部位10分(全身30分)までの使用としてください
	皮膚への摩擦	異常ではありません時間の経過で元に戻ります

よくあるご質問

Q	A
スイングビートを使用したまま眠っても大丈夫ですか？	長時間の運動・接触による肌トラブルの原因になりますので、製品を使用したまま眠らないでください。
治療中または治療後の経過観察中の使用はできますか？	心臓手術後、ギックリ腰、腰痛、腰椎の損傷、胃や腸の症状悪化などの治療中、治療直後の方は、使用しないでください。

アフターサービス

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

固定電話など

 **0120-776-282**(通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637**(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

●製品仕様

定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大約50W
外 形 寸 法	約W470×D225×H190(mm)
製 品 質 量	約3.7kg(リモコンは除く)
電源コード長さ	約2m
リモコン電源	DC 3V 単四形乾電池×2本
製 造 国	中国
材 質	本体:ABS樹脂／シリコンゴム リモコン:ABS樹脂 カバー:ポリエステル
セ ッ ト 内 容	本体……1台 専用リモコン……1個 本体カバー……1枚 (本体に初めから装着されています。) ※単四形乾電池は同梱しておりません。 別途お買い求めください。

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。※本体カバーは消耗品です。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.19)にご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輻・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

保証書

No.

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	AYS-35
形名	スイングビート		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入時のレシート・明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- ・ 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。
- ・ 利用目的
お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社
〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282**(通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

※9:00～17:00(十・日・祝日除く)



www.ya-man.com