

No.

## 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	EP-9
形名	トルネードEMSリフト		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ		期間: お買い上げ日から1年間
店名・住所・電話 ※販売者名	<p>見本</p> <p>ご購入された際の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管して下さい。</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印のお客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだつたりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

\* 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

\* ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

## 個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

## 利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

EP9-3-002X

美容家電のパイオニア

YA-MAN


保管用  
保証書付

## 取扱説明書

家庭用美容器

トルネードEMSリフト

EP-9

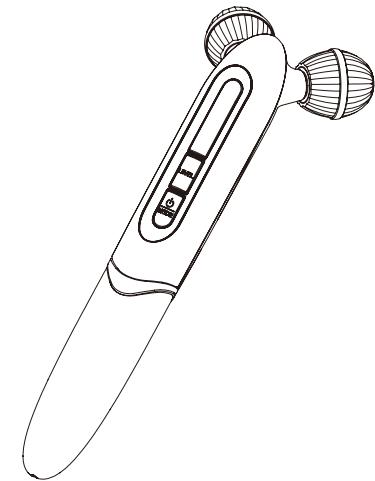

## もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	7
各部のなまえ	8
特長	9
ご使用の前に	10
使いかた	14
使い終わったら	18
こんなときには	19
アフターサービス	21
●製品仕様	22
●保証について	22
保証書	23

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



**危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害<sup>\*</sup>の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電子機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



警 告

次に該当する人は使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- 妊娠中の人の人、授乳中の人の人
- 成長過程の人
- 医師の治療を受けている人
- 黒皮症の人
- 皮膚感覚の弱い人
- アトピー性皮膚炎やアレルギー体質の人
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- 皮膚に炎症やかゆみ、ホテリなどの異常のある人
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 疲労の激しい人
- 眠気を誘う薬を服用中の人の人
- 酒気帯びの人の人
- 皮膚トラブルがある人
- 体調がすぐれない人



禁 止

次に該当する場合や、または部位には使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- 急性疾患
- 悪性腫瘍
- 有熱性疾患
- 結核性疾患
- 伝染病疾患
- 内臓疾患
- 膨らんだホクロ
- 切り傷
- 整形手術部位
- 目やくぼみの周辺、眼球
- ウイルス性のイボ
- のどぼとけ
- 頭部
- インプラントの上
- 口内や陰部、粘膜など
- にきび
- 血液疾患
- 皮膚の薄い部位(骨のすぐ上)
- 血压異常時
- 指や耳、鼻などの局所的部位

\*ご自分で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁 止

サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。

本体が高温になり、ケガやけどの原因となります。



禁 止

皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁 止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。



## 警告



浴室に放置しない。浴室内や水の入った容器の近くで充電しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・ケガの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。  
また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



自分で意思表示ができる人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。  
事故やケガをする原因となります。



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
ケガをしたり、製品が故障する原因となります。



ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しみがゆいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



異臭・異常発熱したときは使用を中止する。  
破損・発火の原因となります。



子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。  
事故やケガをする原因となります。



不安定な場所に置かない。  
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。  
ケガをしたり、本体が故障する原因となります。



## 警告



必ず守る

ACアダプター差込口に水が付着していないことを確認してから充電する。  
感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

使用しないとき・お掃除するときは必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

歯の治療を受けている人は、EMSの使用を控えるか部位をずらして使用する。

歯の治療中は、ほほ・あごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合があります。効果に影響はありませんが、強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

リフトモードは、慣れるまではレベル1で使用する。  
肌を傷める原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。  
発熱・発火・破裂の原因となります。



ACアダプターを抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはACアダプターをすぐに抜く。  
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

コンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



## 注意



使用後は水気をよく切り、本体に水が付着したまま放置しない。  
本体が故障する原因となります。



本体を水中に入れない。  
本体が故障する原因となります。



本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない  
本体が変形したり溶けたりする原因となります。



本体にヒビやメッキ剥がれがあったり、ローラーに不具合がある場合は使用しない。  
肌を傷める原因となります。



本体をアルコール・シンナー・ベンジン・ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。



必ず守る  
使用した後に本体が濡れている場合は、本体を立てて振り、ローラーについた水分を取り除く。  
使用後は、本体を十分に乾燥させてから湿気の少ないところに保管する。  
故障の原因となります。



電源をオンにした状態ではかの美容機器や電気製品に接触させない。  
金属のものに接触させない。  
ケガや本体が故障する原因となります。



洋服のボタンやベルトのバックルの上から使用しない。  
本体が故障する原因となります。



ペットには使用しない。  
ケガをする原因となります。



必ず守る  
水道の蛇口からでる強い水圧を当てたり、水中に入れたりしない。  
本製品は生活防水に対応しています。(IPX4相当) シャワーなどのやさしい流水に対しての防滴仕様であり、水道の蛇口からでる強い水圧や水中には対応していません。浴室など水周りでの使用時は十分にお気をつけください。



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・同じ箇所に設定時間以上の使用は避ける。
- ・肌の状態にあわせて使用する。
- ・肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- ・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源を切る。



必ず守る

使用中は皮膚の挟み込みに注意する。強く挟み込んだ状態で使用しない。

ローラーは「つまむ」「離す」を繰り返しながら回転します。ローラーが「つまむ」タイミングのときに、皮膚を挟み込みすぎないように、本体と肌の角度を調整しながらご使用ください。



必ず守る

EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。

レベルは少しづつ調整してください。



必ず守る

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または水で肌を湿らせてから使用する。  
そのまま使用すると、肌を傷める原因となります。



必ず守る

使用中に疲労を感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

力を入れて肌にこすりつけない。特に、首筋などローラーの間に肌が挟まりやすい部位に使用する場合は力を入れすぎない。

肌を傷める原因となります。



必ず守る

必ず化粧を落として使用する。化粧品等の成分が変色する恐れがあります。



必ず守る

同一部位に設定時間以上の使用は避ける。

トリートメントが終了した後に、再度同一部位に使用する場合は、4時間以上時間をあけてください。

# 海外でのご使用について

## 警 告

海外でのご使用について



必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。

※海外からの修理保証への依頼には日本国内で配送、受取が可能な連絡先、住所が必要になります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

# 各部のなまえ


## ●本体



各部のなまえ

## ●付属品

### ACアダプター

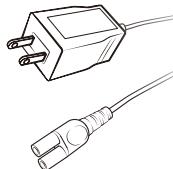


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本製品は、V字型のローラーにマイクロカレント、EMS機能を搭載した家庭用美容器です。  
※本製品は、顔専用機です。身体へのご使用は出力が低くEMSの刺激を感じない場合があります。

## ●トルネードローラー

2つのローラーが、曲線を描くように回転して刺激を与えます。  
ローラーを動かすことで、「もみだす」「おしだす」「つまみだす」というエステ手技をご自宅で体感できます。

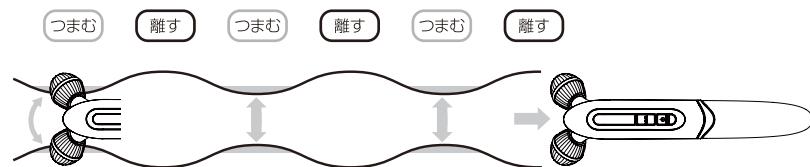

## ●マイクロカレント（スキンケアモード）

微弱電流でスキンケアトリートメントをします。  
年齢サインを感じやすい目もとにもおすすめです。  
※マイクロカレントはお肌に電気を通しますが、微弱電流のため刺激は感じません。

## ●EMS（リフトモード）

電気の力で筋肉を刺激することができます。レベルは4段階から選択できます。  
※使い始めは、必ずレベル1からご使用ください。

## ●オートオフ機能


電源をオンにしてから約10分経過すると、自動的に電源がオフになります。  
続けてご使用になる場合は、再度、電源/モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください。  
※途中で電源をオフにする際は、電源/モードボタンを長押し(約3秒)してください。

## ●防滴仕様

本製品は生活防水に対応しており、浴室など水周りでの使用が可能です。ただし、シャワーなどのやさしい流水に対しての防滴仕様であり、水道の蛇口からなる強い水圧や水中には対応していません。使用時は十分にお気をつけください。  
※本体の防水性能は、JIS保護等級IPX4の性能を有しています。  
※ACアダプターは防水仕様ではありません。

## 表示部の見かた

本体の動作や充電の状態は、ランプの点灯と点滅でお知らせします。

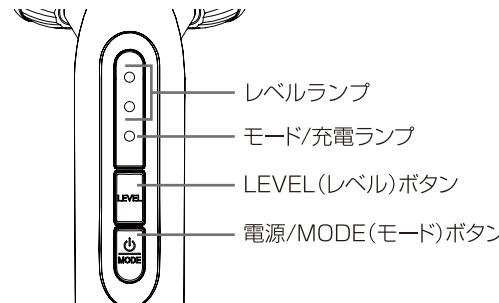

### ・モード切り替え

電源/モードボタンを長押し(約3秒)すると、電源がオンになります。  
電源がオンの状態で電源/モードボタンを押すたびに、下記のようにモードを切り替えできます。




・スキンケアモード：青ランプ点灯  
マイクロカレントでお肌をケアします。  
目もとにもお使いいただけます。

・リフトモード：緑ランプ点灯  
筋肉をEMSで刺激するケアをします。

### ・レベル切り替え(リフトモードのみ)

レベルボタンを押すとEMSレベルを選択できます。レベルボタンを押すたびに、下図のように切り替わります。レベル1から使い始め、慣れてきたら無理のないレベルを選んでご使用ください。

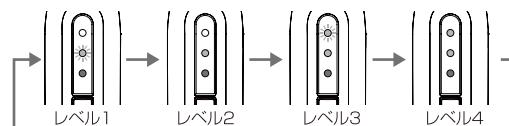


※使い始めは必ずレベル1でご使用ください。

※＊は点滅、。は点灯を表します。

### ・充電表示

ACアダプターをコンセントに差し込むとモード/充電ランプが赤点滅します。  
充電が完了すると赤点灯に変わります。

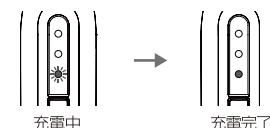

## 充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電を行ってください。

使用中にモード/充電ランプが5回赤点滅してから消灯した場合、電池の残量が不足しています。アダプターを差し込み充電してください。

充電しながら本体を使用することはできません。

購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了するまで使用しないでください。

## ●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約2時間


※充電環境 室温約25°Cにおいて  
※満充電直後からの動作時間です。  
※電池の残量や充電環境によって、  
充電時間は前後します。

※初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、短時間しか使用できないことがあります。

※充電時間、動作時間は使用モード、使用レベル、使用環境によって変わります。

## 1 本体のキャップを外してACアダプター差込口にアダプタープラグを差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込む。

- ・ ACアダプター差込口に水滴がついている場合は、必ず拭き取ってください。
- ・ 充電中はモード/充電ランプが赤点滅します。
- ・ 充電が完了すると、赤点灯に変わります。
- ・ 必ずアダプターと本体の凹凸を確認してから差し込んでください。

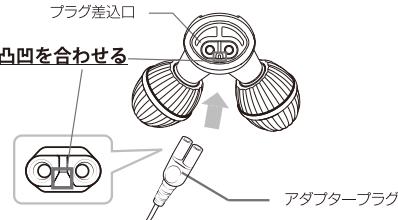

## 2 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。



- 本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。
- ACアダプター差込口に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火の原因となります。

## 肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

### 1 肌を清潔な状態にします。

- ・ 腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。

### 2 腕の内側に化粧品(ジェル・化粧水)または水を塗り、リフトモードで約3分間製品を使用します。

- ・ プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



### 注意

- ・ 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・ 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・ お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

## オーバートリートメント


各部位に指定した目安時間(P.16,17)を守ってお使いください。  
目安を超えて使用するとお肌に負担がかかり(オーバートリートメント)肌トラブルの原因となります。

## 持ちかたとお肌へのあてかた

通常はキャップをはめて、図のように本体を持ってください。

※トリートメント中に本体を強く握るとボタンが押されて


誤作動することがあります。その場合は、ボタンが押されないように、握る位置や強さを変えてください。

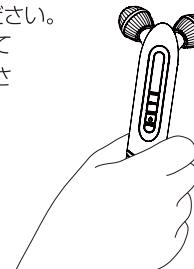


## 持ちかたとお肌へのあてかた（続き）

ローラーがお肌をつまむ強さは、本体をあてる角度と進行方向によって変わります。下図を参考に、お好みの角度でご使用ください。

<押す場合>

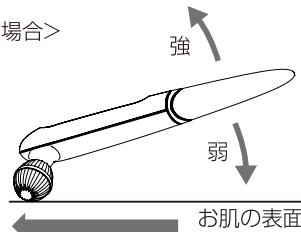

<引く場合>

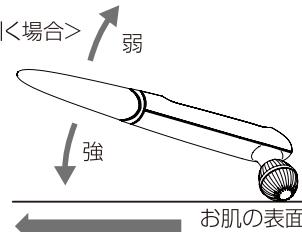

### 必ず2つのローラーをお肌にあててご使用ください

EMSをご使用の際は水や化粧水でお肌をぬらした状態で2つのローラーを同時にお肌にあてるこ<sup>ト</sup>により刺激が感じられます。



### ローラーをお肌に軽くあてながら転がす。

- ・ローラーのみでのトリートメントのときは電源を入れる必要はありません。
- ・お肌に強く押さないでください。
- ・お顔に使用する場合は、下から上へ、顔の中心から外側へ転がしてください。
- ・リフトモードの場合は、気になる部位で止めて使用してください。

グリップをお肌から離して転がすなど、ローラーをあてる角度を調整しながら使用してください。



注意

#### ●使用中は皮膚の挟み込みに注意する。強く挟み込んだ状態で使用しない。

ローラーは「つまむ」「離す」を繰り返しながら回転します。ローラーが「つまむ」タイミングのときに、皮膚を挟み込みすぎないように、本体とお肌の角度を調整しながらご使用ください。

#### ●力を入れてお肌にこすりつけない。特に、首筋などローラーの間にお肌が挟まりやすい部位に使用する場合は力を入れすぎない。お肌を傷める原因となります。

## 使いかた

### 使用上のご注意

ご使用になる前に、この「使用上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

#### ●必ず化粧を落として使用してください。

化粧品等の成分が変色する恐れがあります。

#### ●トリートメントする前に、アクセサリー類(ネックレス、ピアスなど)は、必ず外してください。

トリートメント時に、アクセサリー類を巻き込むことがあります。

#### ●髪の毛を束ねたり、ヘアバンドなどで固定してからトリートメントしてください。

トリートメント時に、髪の毛を巻き込むことがあります。特にみあげ周りや短い髪の毛は、しっかりと固定してください。

#### ●髪の毛がからみついたときは、本機を停止させてから髪の毛をほどいてください。

#### ●衣服の上からローラーを回転させると、生地を傷める原因になります。

#### ●初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電を行ってから使用してください。

充電しながら本体を使用することはできません。

使いかた


### 各モードの使いかた

#### ●スキンケアモード(マイクロカレント)

- ・ローラーとマイクロカレントの微弱電流で、お肌の表面をトリートメントします。
- ・マイクロカレントはお肌に電気を通しますが、微弱電流のため刺激は感じません。

#### 1 電源/モードボタンを長押し(約3秒)して、電源をオンにする。

- ・モード/充電ランプが青点灯します。

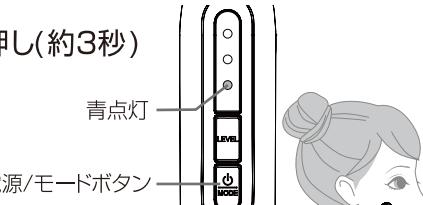


#### 2 ローラーをお肌に軽くあてながら転がす。

- ・ローラーの動かし方は「各部位のトリートメント(P.16,17)を参照ください。

#### 3 トリートメントが終わったら、電源/モードボタンを長押し(約3秒)して、電源をオフにする。

- ・すべてのランプが消灯します。
- ・電源/モードボタンを長押し(約3秒)押さなくても、電源をオンにしてから約10分経過すると、自動的に電源がオフになります。

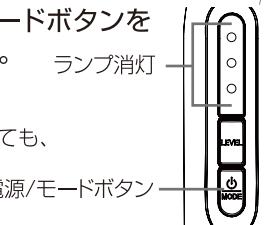


## ●リフトモード(EMS)

EMSで表情筋を刺激します。

お肌が乾いた状態では、EMSの刺激を感じにくくなる場合があります。  
EMSが弱いと感じる場合は、お肌を水や化粧水でぬらしてからご使用ください。  
フェイスマスクの上からの使用もオススメです。

- 1 電源をオンにし、  
電源/モードボタンを押して、  
リフトモードを選択する。

- ・モード/充電ランプが緑点灯します。
- ・レベルランプが1つ白点滅します。

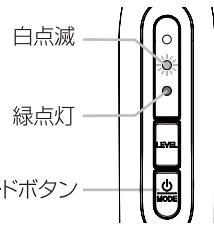

- 2 レベルボタンを押して、EMSのレベルを選択する。  
・レベル表示の詳細は「表示部の見かた」(P.10)を参照ください。

- 3 ローラーをお肌に軽くあてながら、  
EMSの刺激を感じる場所でローラーを止める。

- ・ローラーの動かし方は「各部位のトリートメント」(P.16,17)を  
参照ください。
- ・お肌に強く押しあてすぎないでください。
- ・使い始めは必ずレベル1から使用してください。



- 4 トリートメントが終わったら、電源/モード  
ボタンを長押し(約3秒)して、電源をオフにする。

## 各部位のトリートメント

### 【フェイス】

●スキンケアモード／リフトモードまたはローラーのみでのトリートメント 【1日10分まで】

①ローラーを下向きに持ち、  
首すじに沿って上から下へ動かす。


②額からこめかみに向かって  
ジグザグと動かす。

③口角から耳の横に向かって動かす。

④フェイスラインから耳の横に向かって動かす。

⑤最後に①と同様に首すじに沿って上から下へ動かします。

- ・ローラーのみでのトリートメントのときは電源を入れる必要はありません。
- ※ローラーはお肌に軽くあて、強く押しあてないでください。

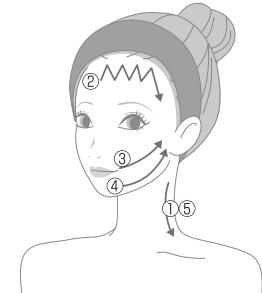

リフトモード使用時は、

- ・水や化粧水でお肌をぬらしてください。
- ・お好みで、ローラーを気になる部位に止めて、表情筋を刺激してください。
- ・フェイスマスクの上からの使用もオススメです。

# 使い終わったら

## 【目もと】 ※まぶたの上には使用はできません

●スキンケアモードまたはローラーのみでのトリートメント【1日3分まで】

①頬骨に沿うようにローラーを軽くあて、内側から外側へ転がす。

- ・スキンケアモードはほとんど刺激を感じません。  
※目のきわには、リフトモードを使用しないでください。  
ケガの原因になります。
- ※ローラーは、お肌に軽くあて、強く押しあてないでください。



## 【デコルテ・肩】 ※のどぼとけには使用できません

●スキンケアモード/リフトモードまたはローラーのみでのトリートメント  
【1日10分まで】

・デコルテ(首・鎖骨)


①鎖骨に沿って内側から外側に動かします。

②ローラーを下向きに持ち、首すじに沿って上から下へ動かす。

・肩

③ローラーを下向きに持ち、首の付け根から外側に向かって動かす。

・ローラーのみでのトリートメントのときは電源を入れる必要はありません。  
※ローラーはお肌に軽くあて、強く押しあてないでください。

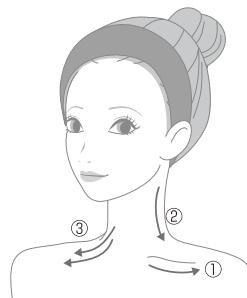

リフトモード使用時は、

- ・水や化粧水でお肌をぬらしてください。
- ・お好みで、ローラーを気になる部位に止めて、表情筋を刺激してください。
- ・フェイスマスクの上からの使用もオススメです。


## お掃除のしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。




お掃除の際は、必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。

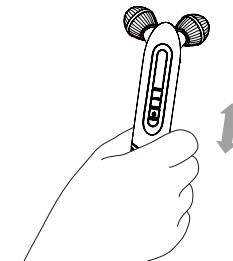

2 入浴中に使用した場合は、本体を立てて上下に振り、本体についての水分を取り除く。

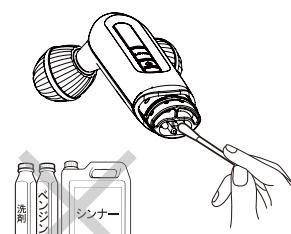

3 タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れや水分を拭き取る。

- ・ACアダプター差込口やキャップ内部、ローラーに水分が残らないよう、十分に拭き取ってください。細かい部分は、綿棒などを使用して水分を拭き取ってください。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・皮脂、メイクの油分や化粧水・ジェルなどの汚れが残らないよう、十分に拭き取ってください。

4 風通しの良い場所で乾燥させる。


- ・湿ったままの状態で放置しないでください。故障やにおいの原因となることがあります。

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>→ 電源/モードボタンを長押ししていない</li><li>→ 充電がされていない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>電源/モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください</li><li>充電してください「充電のしかた」(P.11)参照</li></ul>
充電しても数分しか使えない	<ul style="list-style-type: none"><li>→ 充電池の残量不足</li><li>→ 充電池の寿命</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません</li></ul>
リフトモードの刺激が弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>→ 設定レベルが低い</li><li>→ お肌に水分がたりないまたは乾燥している</li><li>→ 使用中に電源/モードボタンを押している</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>レベルを上げてください</li><li>お肌を水やミセルでぬらしてからご使用ください</li><li>使用中は電源/モードボタンを押さないでください</li></ul>
リフトモードの刺激を感じない	<ul style="list-style-type: none"><li>→ 充電が無くなった</li><li>→ 2つのローラーが同時にお肌にあたっていない</li><li>→ 身体(肩より下)に使用している</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>充電してください「充電のしかた」(P.11)参照</li><li>2つのローラーをお肌にあててください</li><li>本製品は顔専用機です。身体へのご使用は出力が低く刺激を感じない場合があります</li></ul>
スキンケアモードの刺激が弱い	→ マイクロカレントはほとんど刺激を感じません	

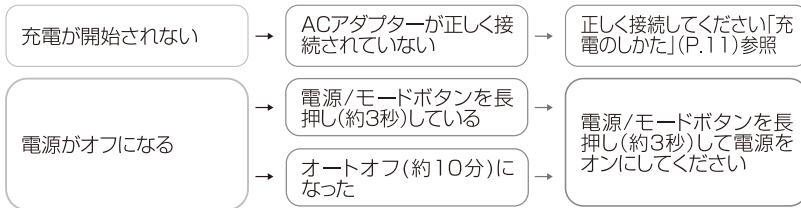

## よくあるご質問

Q	A
1日何分使用すれば良いですか?	トリートメントの仕方によってかわります。 詳しくは、「各部位のトリートメント」(P.16、P.17)を参照ください。
力を入れてローラーを転がす方が良いですか?	<ul style="list-style-type: none"><li>●力を入れすぎるとお肌を傷める原因となります。特にお顔へのご使用は力を入れずにやさしくローラーを転かしてください。</li><li>●ご自身が心地良く感じる強さでローラーを転がしてください。</li></ul>
浴室で使用できますか?	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品は防滴仕様ですので、浴室など水周りでの使用が可能ですが、シャワーなどのやさしい流水に対しての防滴仕様であり、水道の蛇口からなる強い水圧や水中には対応していません。</li><li>●お肌がぬれないと、ローラーでお肌をつまみにくくなる場合があります。その場合は、ローラーをお肌に押しあててつまむ力を調節してください。</li></ul>
サウナや岩盤浴で使用できますか?	サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険がありますので絶対に使用しないでください。
浴室以外でもリフトモードは使用できますか?	お肌が乾いた状態ではリフトモードの刺激を感じにくくなる場合があります。リフトモードの体感が弱いと感じる場合は、お肌を水や化粧水でぬらしてからご使用ください。
敏感肌なのですが使用しても大丈夫ですか?	<ul style="list-style-type: none"><li>●使い始めは二の腕などの目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。</li><li>●お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。</li></ul>
化粧の上から使用できますか?	ファンデーション等の成分が変色することがあるので、化粧を落としてからご使用ください。

# アフターサービス

## ●充電池について

- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。
- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

## ●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



## ●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

**ヤーマンコールセンター** ☎ 0120-776-282(通話料無料)  
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) ☎ 0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと  
お電話がつながりやすくなっています。

## ●製品仕様

定 格	DC5V 0.8A
消 費 電 力	約3.0W
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
防 水 機 能	JIS保護等級 IPX4
外 形 尺 法	本体 :約W58xD165xH38(mm)
製 品 質 量	本体 :約75g
製 造 国	日本
材 質	ABS樹脂
付 属 品	ACアダプター…………1個

## ●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店または左記ヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。