

使いかた動画

<https://bit.ly/2v5siyX>

取扱説明書

家庭用美容器 メディリフト EP-14

- ・安全にお使いいただくために、裏面の「安全上のご注意」も必ずお読みください。
- ・保証書は裏面に記載されています。

©2018 YA-MAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 無断複製および転載を禁ずる。

EP14-001

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
 ・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
 ・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

付属品


- ACアダプター*
- 充電用USBケーブル(マイクロUSB)*
- シリコーンマスク
- 取扱説明書(保証書付)

※本製品以外では使用しないでください。


本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

各部のなまえとたらき

コントローラー

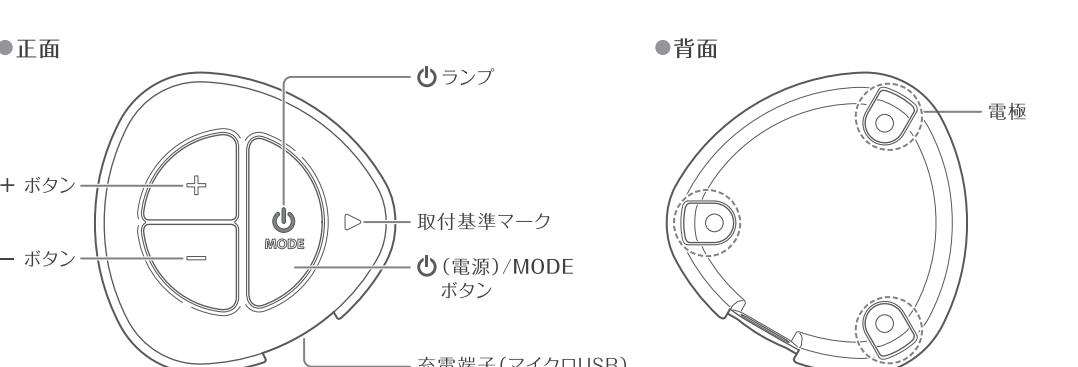

シリコーンマスク

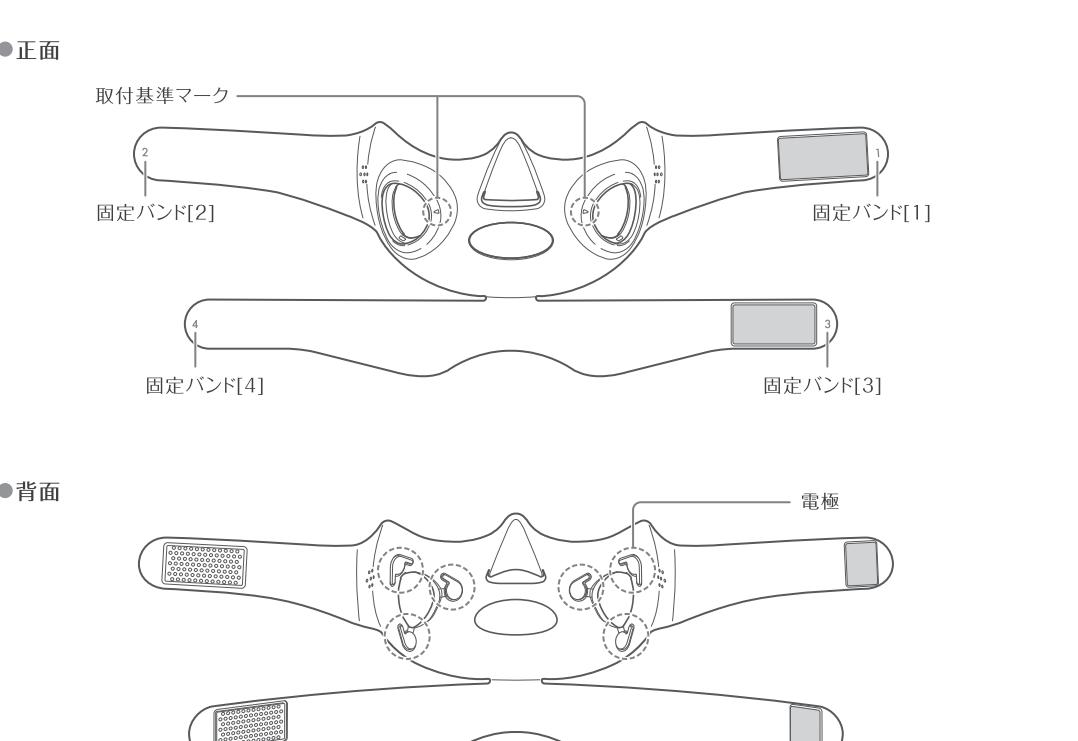

はたらき


オートオフ機能

電源をオンにして、モードを設定してから約1分が経過すると、「ビビッ」と音が鳴り、自動で電源がオフになります。

使用途中でモード変更するとその点から約1分後にオフとなるため、使用時間にご注意ください。

お使いになる前に

充電する

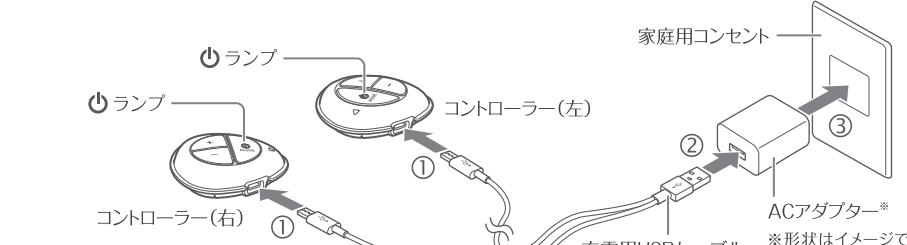

- ・コントローラーを図のように接続すると、充電が始まります。充電中は①ランプが紫色に点滅します。
- ・充電が完了すると、①ランプが消灯します。充電用USBケーブルを外してください。
- ・空温約5°Cの場合、約1.5時間で満充電となり、約5時間動作可能です。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

ご注意

- ・コントローラーと充電端子に水滴などがある場合は、しっかり拭き取ってください。水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ・充電用USBケーブルとACアダプターは付属のものをご使用ください。
- ※市販品では正常に充電できない場合があります。

お肌へのプレテスト

本製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

△ 注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用してください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

1 二の腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどで拭き取る


2 洗ったところにお手持ちのゲル(油分を含まないタイプ)を塗り、3つの電極が二の腕に触れるようにもう片方の手で押さえ、「オートモード」、「レベル1(最小)」で約3分間使用する

- ・シリコーンマスクにコントローラーを取り付けた状態でテストしてください。左右どちらかのシリコーンマスク裏面の電極3箇所をお肌に密着させてください。
- ・電源オン時は「オートモード」、「EMSレベル(強さ)」は「レベル1(最小)」に設定されています。
- ・使いかたについては、「ケアする」を参照してください。

3 ゲルを拭き取り、お肌に異常がないことを確認する


24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ、本製品をご使用ください。

4

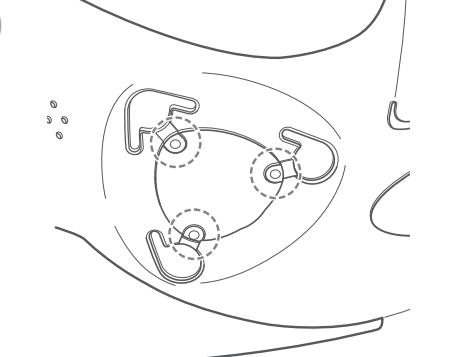

- シリコーンマスクを裏返して、シリコーンマスクとコントローラーの電極がずれていないことを確認してください。

5

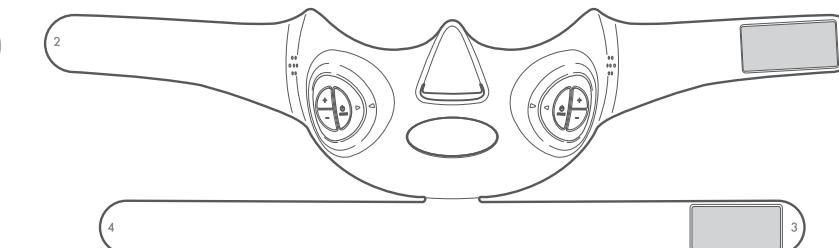

5



- シリコーンマスクがしっかりと顔に装着されていることを、鏡などで確認します。
- ・顔の形によってはシリコーンマスクがフィットせず、浮きがみられることがあります。左右6箇所の電極が確実に触れていればケアは可能です


EMSを感じない?

EMSの体感に左右差がある?


- ・お肌の水分量が不足している
マスクに触れるお肌をローションや美容液、ジェルなどで十分に保湿してください。
- ・コントローラーがマスクから浮いている
コントローラーの電極がマスクから浮いていると、お肌にEMSが流れません。正しく取付できているか、確認してください。
- ・左右の筋肉量の違い
頬の筋肉量は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。左右それぞれでお好みのレベルを設定してください。
- ・シリコーンマスク電極とお肌がしっかりと触れていない
電極とお肌がしっかりと触れていないとEMSを感じにくいことがあります。シリコーンマスクの装着位置を調整して筋肉にしつこくEMSの刺激が届く左右の位置をご確認ください。

3 お好みのEMSレベル(強さ)を選ぶ

左右のコントローラーの+/ボタンを同時に押します。

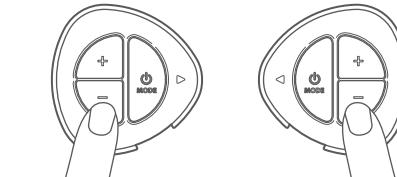

- ・EMSレベル(強さ)は6段階で調節できます。
- ・レベル(最小)またはレベル6(最大)に達すると、「ビビッ」と音が鳴ります。

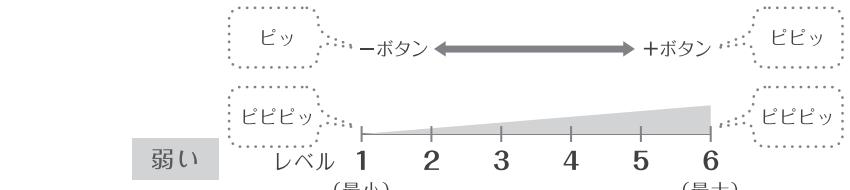

ご注意

- ・初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル(最小)」に設定してご使用ください。
- ・お肌が乾いたりシミや美容液、ジェルなどを途中でつけ足してください。一度電源をオフにし、シリコーンマスクをはずしてからつけてください。
- ・ビビリビリした痛みを感じるほど、EMSレベル(強さ)を上げないです。

4 終了する

- モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。
- 電源がオフになると、「ビビッ」と音が鳴ります。
- 残った美容液などはお肌になじませてください。

途中で停止したいときは、左右の①(電源)・MODEボタンを同時に1秒以上押して電源をオフしてください。

1日1回程度をを目安に使用ください。

※モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。

※上記はあくまで目安です、お肌の状態をみながらご使用ください。

※お肌に異常が生じないか、よく注意して使用してください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

※連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあけることをおすすめします。

使い終わったら

お手入れのしかた(コントローラー)


使用後はコントローラーを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

シリコーンマスクからコントローラーを外します。

コントローラーの外しかた

シリコーンマスクを広げながらコントローラーを押し出します。

- ・広げる際に過度な力を加えないでください。シリコーンマスクの破損の原因となります。

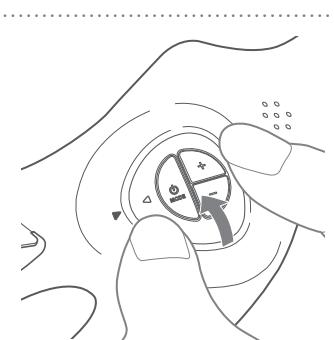

警告

- ・お手入れの際は、必ず電源をオフにする
感電・ショート・発火の原因となります。
- ・水洗いはしない
本製品は防水製品ではありません。
故障の原因となります。

1 水で湿らせて固しほった柔らかい布等で汚れを拭き取る

汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。

△ 注意

- ・ローションや美容液、ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



お手入れのしかた(シリコーンマスク)

使用後はシリコーンマスクを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

シリコーンマスクからコントローラーを外します。

1 コントローラーを取り外して、シリコーンマスクをぬるま湯で洗う


汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。

2 タオルなどの乾いた布で拭き取る

電極に水滴やゲルなどが残らないう、十分に拭き取ってください。

3 風通しの良い場所で乾燥させる

汚れや水分が残ったまま放置すると、カビや変色、においの原因になります。

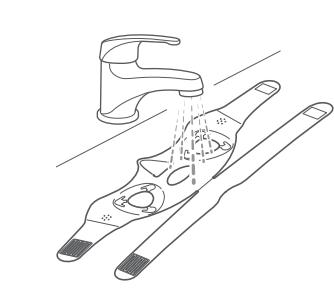

△ 注意

- ・ローションや美容液、ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
- ・熱湯を使用しないでください。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



安全上の注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理な使い方をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守りください。
- 注意区分は、危険や損害の大きさと切迫の程度で明示するために、誤った取り扱いをして生じる想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

△ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

△ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

△ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物の損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および畜産・ペットにかかる極大損害を示します。

●記図号について

○ してはいけないことを示しています。

! しなければならないことを示しています。

! 注意しなければならないことを示しています。

△ 危険（ご使用、保管に関して）

● 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くことがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・バースピーカーなど体内植込式医用電気機器・人工心肺など生命維持用医用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器

△ 警告（ご使用、保管に関して）

● 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人・高血圧

・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎

・皮膚トラブルがある人・敏感肌またはお肌の弱い人・物理的刺激などによる病的なシミのある人

・疲労が強いため、休憩を取らない人・酒気帯びの人・妊娠中・生理中・授乳中の人は

・眠気をさうぞう感覚を服用する人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人

・スティロード系リモコンの長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人

・目や顔の手術を受けた人・目や前に疾患のある人、および治療中の人の・強度近視の人（-6D以上）

● 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・切り傷・手術後手術合併症をした部位・口内や粘膜など

・にきび・皮膚が化粧品や乳液を吸収している部位・かゆみやはれの部位・皮膚の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

● 業務用等、過剰な連続使用をしない。

けがや故障の原因となります。

● 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

事故やけがの原因となります。

● 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。

事故やけがの原因となります。

● 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

事故やけがの原因となります。

● 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや故障の原因となります。

● 异常・異常発熱したときは使用しない。

そのまま使用すると破損や火災の原因となります。

● 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

● 不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。

けがや故障の原因となります。

● 本体に重い物を置いたり、使用中に落させたりなど、強い衝撃を与えない。

けがや故障の原因となります。

△ 注意（ご使用、保管に関して）

● 頭以外には使用しない。

けがの原因となります。

● ペットには使用しない。

けがの原因となります。

● 他の電気製品（美容機器等）と併用しない。

禁物・肌トラブル・誤動作の原因となります。

*メディリフトシリーズ製品との併用は可能な場合もございます。ご購入いただいた製品の取扱説明書をご確認ください。

● 使用前に電極の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。

お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。

● 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。

● 沖室などの多湿環境・水中に放置しない。サウナや岩盤浴には持ち込みない。

けがや故障の原因となります。

● 屋外で使用しない。

故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と処置方法

→ (電源) MODEボタンを約1秒長押ししてください。

→ 電池残量がありません。充電してください。

→ モードを設定してから約10分後に、自動で電源がオフになります。

→ 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください。

→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

→ 充電用USBケーブルを本体に差し込んでください。

→ 一ボタンでEMSのレベルを下げてください。

→ お肌が乾燥しています。ローションや美容液、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

→ +ボタンでEMSのレベルを上げてください。

→ 電極が正しく肌にあたっていません。シリコーンマスクを正しく装着してください。

→ お肌が乾燥しています。ローションや美容液、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

製品仕様

定格電源	DC5V 0.5A
------	-----------

消費電力	最大約1.5W(充電時)
------	--------------

使用電池	リチウムイオン蓄電池
------	------------

充電時間	約1.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
------	------------------------------

動作時間	約5時間(満充電の状態から) ※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
------	--

外形寸法	シリコーンマスク: 約W620×H180(mm) コントローラー: 約W50×H50×D15(mm)
------	---

品質量	シリコーンマスク: 約140g コントローラー: 約17g(1個)
-----	--------------------------------------

材質	シリコーンマスク: シリコン コントローラー: PC樹脂
----	---------------------------------

製造国	シリコーンマスク: 中国製 コントローラー: 日本製
-----	-------------------------------

付属品	シリコーンマスク: 1個 ACアダプター: 1個 充電用USBケーブル(マイクロUSB): 1本 取扱説明書(保証書付)
-----	---

推奨環境温度	10°C~40°C
--------	-----------

オススメの化粧品

メディリフト ゲル

内 容 量: 50g

品 番: YML0001

単品価格: ¥3,800(税抜)



メディリフト スキンタイトニングマスク

内 容 量: 5枚入り

品 番: YML0006

単品価格: ¥4,000(税抜)



関連製品

メディリフト サポートバンド

品 番: SA-419

単品価格: ¥1,500(税抜)

<https://bitly/2TcmQzw>



保証について

● 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。

また、保証期間を過ぎたものには料金をご負担いただきます。

● 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。

● 保証期間中にも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。

● 万一、故障が生じた場合は、販売店または上記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。

2. 保証期間中に有料修理となる場合の場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。

3. ご転居の場合は、事務局にお問い合わせください。

4. ご贈答品ご購入時に記入するお買上げ販売店名の記入または押印がない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。

5. 保証期間中でも、つま先の有料修理になります。

(イ) 使用上の誤