

# Medi Lift

## 取扱説明書

ウェアラブルEMS美顔器  
メディリフト アクア EX  
EPM-20

### はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~9)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

# 使いかたの流れ

1

電極に  
ゲルを  
のせる

電極(左右6箇所)に  
ゲルを適量のせて  
ください。



※入浴しながらの  
使用の場合は  
不要です。

2

装着する

顔にシリコン  
マスクを装着して  
ください。



3

電源を  
オンにする

左右の+ボタンを  
1秒以上  
押してください。



4

モードを  
選択する

左右の+ボタンを  
長押しして  
モードを選択  
してください。



5

EMS  
レベルを  
選ぶ

左右の+/-ボタンを  
押してください。



6

終了する

自動で電源が  
オフになります。

# もくじ

---

安全上のご注意 ————— p3

各部のなまえとはたらき —— p10

お使いになる前に ————— p12

使いかた ————— p14

使い終わったら ————— p21

お知らせ ————— p24

●故障かな?と思ったら —— p24

●よくあるご質問 ————— p26

●製品仕様 ————— p29

アフターサービス ————— p30

## ■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### 注意区分について

 **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 図記号について

 してはいけないことを示しています。

 しなければならないことを示しています。

 注意しなければならないことを示しています。

## ⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。  
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
  - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
  - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
  - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

## ⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。  
事故やトラブルの原因となります。
  - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
  - ・自分で意思表示できない人
  - ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
  - ・自己免疫疾患のある人
 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
  - ・急性疾患の人
  - ・感染症疾患の人
  - ・悪性腫瘍のある人
  - ・有熱性疾患の人
  - ・高血圧の人や血液疾患のある人
  - ・発熱している人
  - ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
  - ・神経障害のある人
  - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
  - ・通院して薬を服用中の人
  - ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。  
事故やトラブルの原因となります。
  - ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
  - ・酒気帯びの場合
  - ・頭部
  - ・口内や陰部、粘膜など
  - ・眼球
  - ・まぶた(眼窩)
  - ・のど
  - ・膨らんだホクロ
  - ・ウイルス性のイボ
  - ・骨折をした部位
  - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位
 ※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。  
(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
  - ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位
- 業務用等、過剰な連続使用をしない。
- コントローラーを水の中に入れない。  
けが・故障の原因となります。



禁止

## 警告（ご使用、保管に関して）

- 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。
  - 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。自分で意思表示ができない人に使わせない。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
- けがの原因となります。



使用者の  
制限

- 不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶつかけたりしない。重いものを置かない。
- けが・故障の原因となります。



落下・  
衝撃禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
- けが・故障の原因となります。



用途以外  
禁止

- 異臭・異常発熱したときは使用しない。
- そのまま使用すると破損や発火の原因となります。



異臭・  
異常発熱時  
使用禁止

## ⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 顔以外には使用しない。
- ペットには使用しない。  
けがの原因となります。
- 他の電気製品(美容機器等)と併用しない。  
肌トラブル・誤動作の原因となります。  
※メディリフトシリーズ製品との併用は可能な場合もございます。ご購入いただいた製品の取扱説明書をご確認ください。
- 使用前に電極の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。  
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 水中につけない。水の中に落とさない。  
サウナや岩盤浴には持ち込まない。  
けが・故障の原因となります。



禁止

- 屋外で使用しない。  
故障の原因となります。



屋外禁止

- 歯の治療中の人(インプラント・矯正・銀歯等)、歯に詰め物がある人は、レベルを調節して使用する。  
EMSの刺激により歯に違和感を覚えることがあります。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。  
お肌に合わないときはご使用をおやめください。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル(強さ)をレベル1にしてから使用する。  
事故・けがの原因となります。必ずお肌の様子を見ながらご使用ください。



必ず守る

## 注意（ご使用、保管に関して）

- お肌表面がピリピリした痛みを感じた場合は、EMSレベル（強さ）を下げる。  
そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。
- 連続で使用する場合（10分以上使用された場合）は5時間以上間隔をあける。  
上記はあくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。連続使用はけが・発熱などの原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」（P.21）を参照して、製品に付着したゲルなどを取り除く。  
故障・肌トラブルの原因となります。
- 以下の項目は必ず守る。
  - ・設定時間以上の使用は避ける。
  - ・ピーリングケアとの併用は控える。  
事故・けが・本体が故障する原因となります。
- お肌と電極の間に、常にゲルや水などの水分があるようにする。  
お肌が乾いたら電源がオフの状態、シリコンマスクをはずしてからつけ足す。  
水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。



必ず守る

## ⚠ 警告 (電源に関して)

- ACアダプター、充電用USBケーブルおよび充電台を破損・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。

ACアダプター、充電用USBケーブルおよび充電台が破損し、火災・感電の原因となります。



無理な扱い  
禁止

- ACアダプター、充電用USBケーブルおよび充電台を引っ張ってコントローラーを移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。



コード  
引っ張り  
移動禁止

- ACアダプター、充電用USBケーブルおよび充電台が傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止

- ACアダプター、充電用USBケーブルおよび充電台を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ  
禁止

- 使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプターと充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。

- ACアダプターおよび充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを  
抜く

## 警告 (電源に関して)

- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガスや燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



発火注意

- 交流100V～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)  
ACアダプターおよび充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。海外での使用の際は、必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

火災・感電・故障の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- 必ず専用のACアダプターおよび充電用USBケーブルを使用する。ACアダプターは、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。

- 充電端子にゲルや水滴が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

※付属の充電用USBケーブルは充電専用です。



必ず守る

## ■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

### 付属品


- シリコンマスク
- ACアダプター\*
- 充電用USBケーブル（マグネット式）\*
- 充電台
- 取扱説明書（保証書付）

※本製品以外では使用しないでください。

### コントローラー（左用／右用）

左用のコントローラーのイラストで各部を説明しています。


#### ● 正面

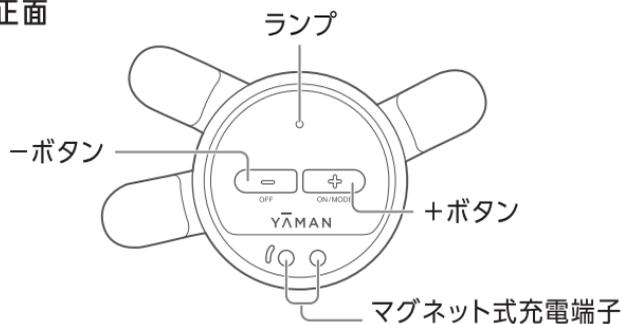

+ボタン…電源オン、モード切り替え、EMSレベルを上げられます。


-ボタン…電源オフ、EMSレベルを下げられます。

#### ● 背面

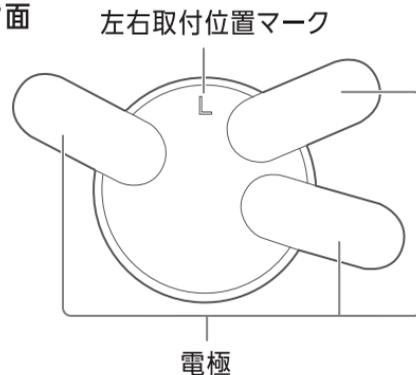


## シリコンマスク

### ●正面

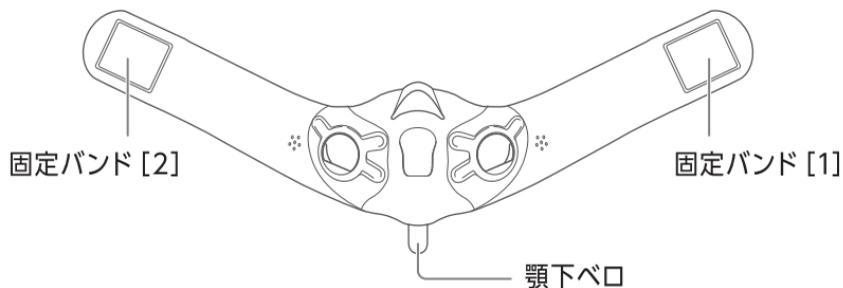

### ●背面

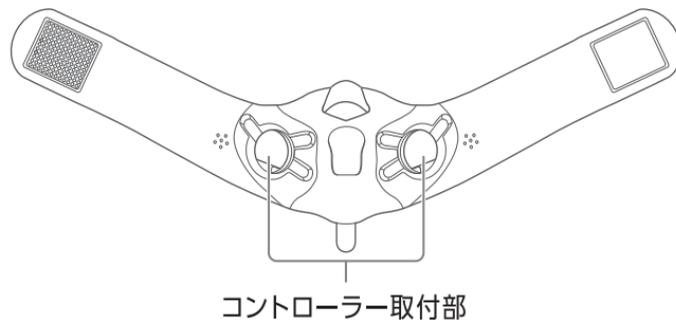

## はたらき

### オートオフ機能

電源をオンにしてからオートモード（約10分）、バーストレッチモード、バスアップモード（約5分）が経過すると、自動で電源がオフになります。

### 防水機能


※あらゆる方向からの噴流水においても有害な影響がない

本製品はIPX5の防滴仕様になっています。シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、浴室や水周りでの使用には十分お気をつけください。

## ■ お使いになる前に


### 充電する

USBケーブルをACアダプターとの接続側コネクタから充電台に通します。

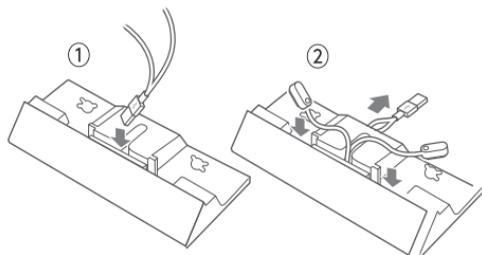

コントローラー  
(右・裏面)

コントローラー  
(左・裏面)

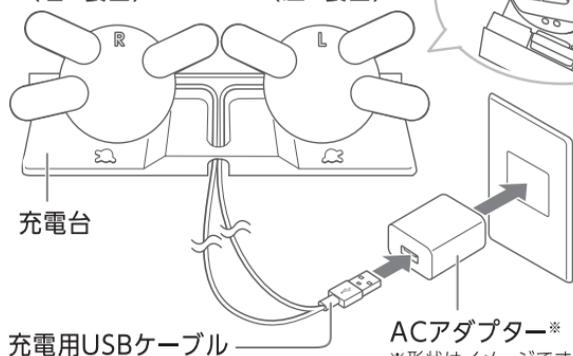

(正面)

ACアダプター※  
※形状はイメージです。

※充電台を使用しなくても充電可能です。

### 注意

- コントローラーと充電端子に水滴などが付いている場合は、しっかり拭き取ってください。水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。

充電中	ランプが赤色に点滅。
充電完了時	ランプが1分点灯後、消灯。
充電時間	約2時間(室温約25℃)
動作時間	約4.5時間

※ 電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

- マグネット式充電端子は正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると充電が開始されません。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ACアダプターは付属のものをご使用ください。市販品では正常に充電できない場合があります。

## お肌へのプレテスト

本製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

- 1 二の腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る
- 2 洗ったところにお手持ちのゲル（油分を含まないタイプ）を塗り、3つの電極が二の腕に触れるようにもう片方の手で押さえ、オートモード「レベル1」で約3分間使用する
  - 使いかたについては、「ケアする」(P.19)を参照してください。



- 3 ゲルを拭き取り、お肌に異常がないことを確認する
  - 24時間以内にお肌に異常（赤みやほてり）を感じなければ、本製品をご使用ください。


## 注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

## ■ 使いかた

### 準備

#### 1 シリコンマスクにコントローラー（2個）を取り付ける

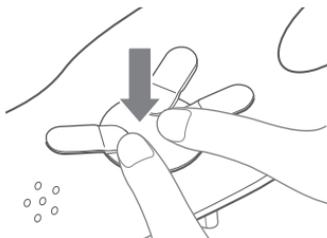

左右取付位置マークを確認し、シリコンマスク裏の溝にコントローラーを押し込みます。

- 取り付け時にコントローラーのボタンを押さないでください。
- コントローラーの電源はオフの状態で行ってください。

#### 2 お肌を整え、髪が長い場合はまとめる



メイクを落として洗顔したあと、お手持ちの水溶性化粧品でお肌を整えてください。

入浴しながら使用する場合はお肌を水で濡らしてください。

- メイクの上から使用するとお肌が黒くなる場合があります。


### 注意

- 取り付け時に過度な力を加えないでください。シリコンマスクの破損の原因となります。
- 美容オイルなど、油分を含むタイプの化粧品は使用しないでください。シリコンマスクの劣化の原因となります。

## 装着する

### 1 シリコンマスクを裏返し、 電極（左右6箇所）にお手持ち のゲルなどを適量のせる

（入浴しながらの使用の場合は不要です）

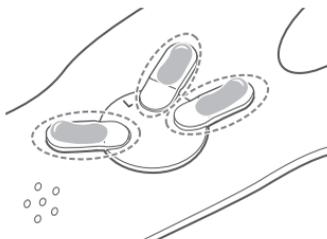

- オススメの化粧品：メディリフト モイスチャーセラム(P.32)
- 電極以外にゲルが付着しないようにしてください。

### 2 シリコンマスクを顔に合わせる




- 目元、鼻、口の位置を合わせてください。
- 髪の毛の挟み込み、固定バンドのねじれがないことをご確認ください。

#### ポイント

- 上を向きながら口もと、フェイスラインの気になる部分を引き上げた状態で装着するとより効果的です。

- 3 固定バンド①②を耳が隠れるように斜め上へ引き上げ、面ファスナーでしっかりと固定する

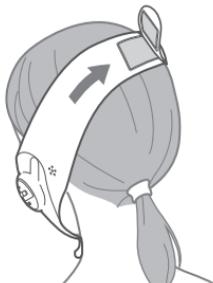

#### ポイント

- 頭頂部から後頭部の間で固定バンドがすべらずにしっかりと止まる位置で固定してください。
- 後頭部で髪を結び、固定バンドを固定するとより固定しやすくなります。

- 4 顎下ベロを引っ張り、フェイスライン全体をマスクが覆うように調整する



**注意** ● 締め付けにご注意ください。

## 5 シリコンマスクがしっかりと顔に装着されていることを、鏡などで確認する




- シリコンマスクがフィットせず、浮きがみられる場合もありますが、左右6箇所 of 電極が確実に触れていればケアは可能です。

## 注意

- シリコンマスク裏の電極（左右 6 箇所）が、必ずお肌にあっていることを確認してください。接点がゆるいとEMSの効果が得られない場合があります。
- オイルタイプの流さないヘアトリートメントを髪につけた場合は、髪が乾いてから本製品をご使用ください。
- お肌と電極の間には、常にゲルや水などの水分があるようにしてください。水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。
- 電極部分を強くこすると色が移ることがあります。


## 1 電源をオンにする

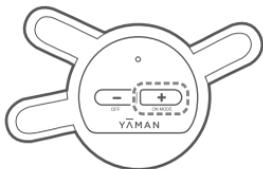

左右のコントローラーの+ボタンを同時に1秒以上押します。

- 「ピー」と音が鳴り、ランプが紫色に点灯します。
- 電源オン時はEMSレベル（強さ）は「レベル0（出力なし）」に設定されています。

## 2 お好みのモードを選ぶ

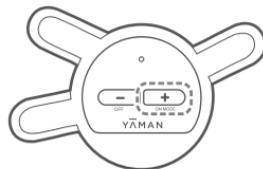

モード名	ランプ表示	推奨環境
オートモード	紫	室内
バーストレッチモード	青	浴室内で入浴しながら
バスアップモード	赤	浴室内で入浴しながら

+ボタンを1秒以上押してモードを切り替え、使いたいモードを選択します。


- 「ピー」と音が鳴りモードが切り替わります。
- オートモード → バーストレッチモード  
→ バスアップモードの順に切り替わり、  
もう一度1秒以上押すとオートモードに戻ります。

※ 「ピッ」という音は、EMSレベルの切り替えの音です。

### 3 お好みのEMSレベル（強さ）を選ぶ

左右のコントローラーの  
+/-ボタンを短押しします。

- +/-ボタンを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、レベルが切り替わります。
- お肌が乾いたら、ゲルなどを途中でつけ足してください。一度電源をオフにし、シリコンマスクをはずしてからつけ足してください。
- EMSレベル（強さ）は10段階で調節できます。レベル0（出力なし）またはレベル10（最大）に達すると、「ピー」と音が鳴ります。
- **動作中に電子音が聞こえることがありますが、異常ではありません。**

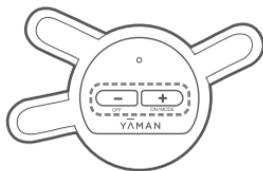

#### ポイント

- EMSを感じない、EMSの体感に左右差がある場合は「故障かな?と思ったら」(P.24)を参照してください。

### 注意

- 入浴する際に、本体をお湯の中に落とさないようご注意ください。
- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
- ピリピリとした痛みを感じるほど、EMSレベル（強さ）を上げないでください。
- 入浴しながらケアしている際に体が熱くなったら無理せずお風呂から上がってください。

### 4 終了する

- 電源をオンにしてからオートモード約10分、バーストレッチモード、バースアップモード約5分が経過すると、自動で電源がオフになります。
- 途中で停止したいときは、左右のコントローラーの-ボタンを1秒以上押し続けて電源をオフにしてください。
- 1日1回程度を目安にご使用ください。オートモードは1日1回10分。バーストレッチモード、バースアップモードはそれぞれ1日1回5分。（1日にバースモードを両方使用したい場合は、お肌のご様子を見ながら計10分以内でご使用ください。
- ※連続で使用する場合（10分以上使用された場合）は、5時間以上間隔を空けてください。

## ■ 使い終わったら

### お手入れのしかた（コントローラー）

使用後はコントローラーを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。


シリコンマスクからコントローラーを外します。

### 1 水で湿らせて固くしぼった柔らかい布等で汚れを拭き取る

- 汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。
- ゲルなどが付着した状態で放置しないでください。

## 注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにしてください。  
感電・ショート・発火の原因となります。
- 水洗いはしないでください。  
シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、浴室や水周りでの使用には十分お気をつけください。  
故障の原因となります。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

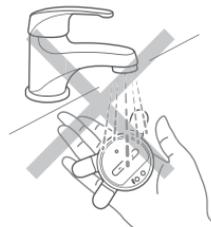

## お手入れのしかた（シリコンマスク）

使用後はシリコンマスクを清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。  
シリコンマスクからコントローラーを外します。

### 1 シリコンマスクをぬるま湯で洗う



### 2 タオルなどの乾いた布で拭き取る

- 溝に水滴やゲルなどが残らないよう、十分に拭き取ってください。
- 汚れが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。

### 3 風通しの良い場所で乾燥させる

- 汚れや水分が残ったまま放置すると、カビや変色、においの原因になることがあります。

## お手入れのしかた（コントローラー・USBケーブル）

端子が汚れているとうまく充電できないことがあります。定期的にコントローラーとUSBケーブルのお手入れをしてください。  
安全のため、USBケーブルはACアダプターをコンセントから外し、充電台からUSBケーブルを外してください。

### 1 綿棒で端子（マグネット部分）の汚れを拭き取る。



## 注意

- 熱湯を使用しないでください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



## 保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、コントローラーとコンセントからACアダプターと充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。

## 保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.24)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.31) までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

## ■ お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

### こんな症状

### 考えられる原因と対処法

#### EMSが弱い (感じない)

- +ボタンでEMSレベルを上げてください (P.20)。
- 電極が正しくお肌にあっていません。シリコンマスクを正しく装着してください (P.15)。
- ゲルの量が足りていません。電極にゲルを足してください。
- 電池残量が少なくなっています。充電してください (P.12)。
- お肌の水分が不足しています。水か水溶性の化粧品でお肌を保湿してください。

#### EMSが強い (ピリピリする・痛い)

- -ボタンでEMSレベルを下げてください (P.20)。
- お肌が乾燥しています。ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

#### 左右のEMSに 差を感じる

- 電極の汚れをふき取ってください (P.22)。
- 電極が正しくお肌にあっていません。シリコンマスクを正しく装着してください (P.15)。
- ゲルの量が足りていません。電極にゲルを足してください。
- 左右それぞれのEMSレベルを調整してください。
- 左右の開始タイミングがずれると刺激の強弱に時間差が生じます。
- 電池残量が少なくなっています。充電してください (P.12)。
- 頬の筋肉量や筋肉の位置は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。マスクの装着位置を調整して筋肉に刺激のある位置を探してください。

## こんな症状

## 考えられる原因と対処法

### 電源が入らない

- + ボタンを1秒以上押してください (P.19)。
- 電池残量がありません。充電してください (P.12)。

### 充電しても 数分しか使えない

- 電源をオンにしてからオートモード約10分、バーストレッチモード、バスアップモード約5分が経過すると、自動で電源がオフになります。
- 電池残量が少なくなっています。充電してください (P.12)。
- 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター (P.31) にご連絡ください。
- 正しく充電できていません。赤ランプが点滅して充電を開始しているか確認してください。

### 充電が開始されない

- ACアダプターをコンセントに差し込んでください (P.12)。
- 充電用USBケーブルを本体に取り付けてください (P.12)。
- コントローラー・USBケーブルの端子が汚れていないか確認してください (P.22)。

### モードの切替が できない

- + ボタンを1秒以上押してください (P.19)。  
「ピー」という音が鳴りモードが切り替わります。  
※ 「ピッ」という音はEMSのレベルの切替の音です。

### 動作中に 電子音が聞こえる

- 正常な動作音です。故障ではありません。

## よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A 1日1回程度を目安にご使用ください。

- オートモードは1日1回約10分。
- バスストレッチモード、バスアップモードは1日1回約5分。  
(1日にバスモードを両方使いたい場合は、計10分以内でご使用ください。)

※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

※連続で使用する場合(10分以上使用されたい場合)は、5時間以上間隔を空けてください。

Q 連続で使用することはできますか？

A 本製品は1日1回、10分間の使用をおすすめします。連続で使用する場合は、5時間以上間隔をあけてください。

Q ゲルは1回どれくらい使用すればよいですか？

A 電極1つに対し、パール粒1粒分程度ご使用ください。  
ゲルの量が少ないとピリピリと感ずることがあります。

Q 浴室で使用できますか？

A お風呂場での使用可能です。バスストレッチ/アップモードは入浴しながらの使用がおすすめです。  
※本体は水中に沈めないでください。

Q 睡眠中に使用できますか？

A 睡眠中は使用しないでください。

Q 顔の左右で刺激が異なります

A 顔は左右非対称のため、顔の左右で刺激が異なる場合があります。左右のEMSレベルを調整してください。

Q お肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが

A EMSの刺激によるものです。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

Q 違和感や疲労感があるのですが

A EMSの刺激によるものです。顔に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 歯が痛くなるのですが

A 歯の治療中や銀歯がある場合は歯が痛くなる場合があります。違和感がある場合は、EMSレベルを下げてご使用ください。

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q お肌に赤みが出たのですが

A シリコンマスクの圧迫により一時的に赤みが出ることがあります。翌日まで続く場合は医師にご相談ください。

Q 顔にマスクの跡が残るのですが

A マスクは伸縮性のシリコンでできており、ゴムバンドで物理的に持ち上げることがを目的としているため、顔を圧迫するように設計されています。お肌の状態によっては跡が残ることがありますが、時間が経つと消えますのでご安心ください。

Q メディリフトシリーズの他の製品との併用はできますか？

A メディリフト ネック (EPN-10) との併用は可能です。同じ日にメディリフト アイを使用したい場合は、5時間以上間隔を空けてご使用ください。

Q 電極を拭いたら黒く汚れたのですが

A 電極部分を強くこすると色移ることがあります。ケア中にお肌が汚れることはありませんのでご安心ください。

## 製品仕様

定 格 電 源	DC5V 0.5A
消 費 電 力	最大約1W (充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約4.5時間(満充電の状態から) ※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	シリコンマスク：約W615×H170 (mm)      コントローラー：約W90×H55×D20 (mm)
製 品 質 量	シリコンマスク：約120g      コントローラー：約28g (1個分)
材 質	シリコンマスク：シリコン      コントローラー：ABS樹脂
製 造 国	シリコンマスク：中国製      コントローラー：日本製
付 属 品	シリコンマスク…………… 1個 ACアダプター…………… 1個 充電台…………… 1個 充電用USBケーブル(マグネット式)…………… 1本 取扱説明書(保証書付)
推 奨 環 境 温 度	10℃～40℃

## ■ アフターサービス

### 充電電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P. 31)にご相談ください。

### 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



### ● 内蔵電池の取出方法


この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をOFFにし、充電アダプターを抜いてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って処理をお願い致します。


## 操作STEP

※左(L)コントローラーの場合です。右(R)も同じ方法で取り出してください。


- ① マイナスドライバーなどを使って、パネルを外します。

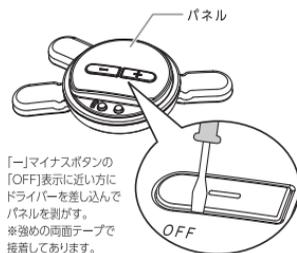


- ② 3ヶ所のゴム栓とネジを外します。

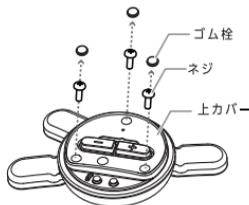

- ③ 上カバーを外し、3ヶ所のネジを外します。

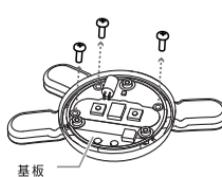

- ④ 基板を裏返し、2本のケーブルを切断してバッテリーを取り外します。

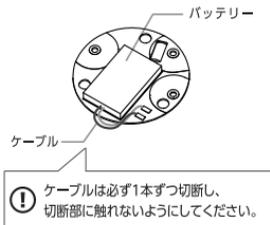

- ⑤ 切断したケーブル同士が接触しないよう、セロテープなどで挟んで固定します。



この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。  
お客様ご自身で分解・修理した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

## 日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

### ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。※月曜日はお電話が混みっております。

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

## 日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

## オススメの化粧品

### メディリフト モイスチャーセラム

内容量 : 50g

品番 : YML0029



商品詳細・お買い求めは

ヤーマンコールセンター (P.31) にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

Memo

## 保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.31）にご相談ください。

### 無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
  5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
    - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
    - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
    - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合  
接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
      - ① 使用上の誤り
      - ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下
      - ③ 弊社以外の第三者による修理・改造
      - ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
      - ⑤ 接続する他の機器の異常
      - ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
      - ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電
      - ⑧ 非純正部品の使用
      - ⑨ 車両・船舶への搭載
      - ⑩ 海外でのご使用
- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
- (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
- (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
- (ト) 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合
- (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
- (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
- (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
- (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. \_\_\_\_\_

## 保証書

持込修理

品名	ウェアラブルEMS美顔器	型番	EPM-20
形名	メディリフト アクア EX		
無料修理保証	対象部分	期間	
	コントローラーのみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話  ご購入日のわかる明細書を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- ・補修用性能部品の保有期間  
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。  
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。  
※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。
- ※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様の買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。
- ・個人情報の取扱いについて  
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。
- ・利用目的  
お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入 ・ ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

☎ 0120-776-282

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com