

# Medi Lift

## 取扱説明書

家庭用美容器

メディリフト ネック

EPN-10

### もくじ

はじめに……………	1	お知らせ……………	27
安全上のご注意……………	1	● 故障かな?と思ったら……………	27
各部のなまえとはたらき……………	9	● よくあるご質問……………	28
お使いになる前に……………	12	● 製品仕様……………	30
使いかた……………	15	アフターサービス……………	31
使い終わったら……………	25		

## はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

## 安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### ●注意区分について



#### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



#### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



#### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### ●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



## 警告 (ご使用、保管に関して)

- 引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。

爆発・火災のおそれがあります。



禁止

- 通電したまま放置しない。

火災・事故のおそれがあります。

- 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

事故・けがの原因となります。



使用者の  
制限

- 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けが・故障の原因となります。



用途以外  
禁止

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因となります。



異臭・  
異常発熱時  
使用禁止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 不安定な場所に置かない。また、機器(本体・付属品等)を落としたり、ぶついたりしない。

けが・故障の原因となります。



落下禁止

- 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

けが・故障の原因となります。

- 使用中、首の周りが熱く感じたら我慢せずに使用を中止する。

低温やけどのおそれがあります。



必ず守る

## 注意 (ご使用、保管に関して)

---

- 首以外には使用しない。  
けがの原因となります。
- 他の電気製品(美容機器等)と併用しない。  
肌トラブル・誤動作の原因となります。  
※メディリフト/メディリフト アクア/メディリフト プラス/メディリフト アイとの併用は問題ありません。
- ペットには使用しない。  
けがの原因となります。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用する。お肌に合わない時は使用しない。
- 使用前に電極の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。  
お肌の傷などのトラブル・症状悪化の原因となります。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 浴室内などの多湿環境・水中に放置しない。サウナや岩盤浴には持ち込まない。  
けが・故障の原因となります。
- 浴室内や水の入った容器の近くで充電しない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止

- 
- 屋外で使用しない。  
故障の原因となります。



屋外禁止

## 注意 (ご使用、保管に関して)

- 連続で使用する場合は、以下の目安時間の間隔をあける。  
ヒーターとモイスチャーパルス機能のみ(レベル0)の場合:4時間以上  
EMS機能を使用する(レベル1~4)場合:10時間以上  
上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。連続使用は、けが・発熱などの原因となります。
- 途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、直ちに首から本体を外し、使用を中止する。  
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずEMSレベル(強さ)をレベル1にしてから使用する。  
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。  
事故・けがの原因となります。必ずお肌の様子を見ながら使用してください。
- 肌表面がピリピリした痛みを感じた場合は、EMSレベル(強さ)を下げる。  
そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した美容液などを取り除く。  
故障・肌トラブルの原因となります。
- 以下の項目は必ず守る。  
事故・けが・故障の原因となります。
  - ・設定時間以上の使用は避ける。
  - ・お肌の状態にあわせて使用する。
  - ・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起している場合は使用しない。
  - ・日焼け直後やピーリングなどによるケアとの併用は控える。



## 注意 (ご使用、保管に関して)

---

- お肌と電極の間に、常にシートマスクや美容液などの水分があるようにする。お肌が乾いたら電源がオフの状態で、本体をはずしてからつけ足す。  
水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果の低下や肌トラブルの原因となります。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用する。  
お肌に合わない時はご使用をおやめください。
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。  
事故・故障のおそれがあります。
- 使用時には身体から金属類(ネックレス)を外す。  
肌トラブルの原因となります。
- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。  
充電中の場合はACアダプターをコンセントから抜く。



必ず守る

## 警告 (電源に関して)

- ACアダプターおよび充電用USBケーブルを破損・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。ACアダプターおよび充電用USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



- ねじれたコードをそのまま収納しない。  
断線・感電の原因となります。

- ACアダプターおよび充電用USBケーブルを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。  
感電・ショート・発火・断線の原因となります。



- ACアダプターおよび充電用USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- ACアダプターや充電用USBケーブル、本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガスや燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。  
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



- 使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。使用しないときは、本体とコンセントからACアダプターと充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



- ACアダプターおよび充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。

## 警告 (電源に関して)

- 交流100V～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)  
ACアダプターおよび充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。  
火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。  
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。
- 必ず専用のACアダプターおよび充電用USBケーブルを使用する。ACアダプターは、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。  
※付属の充電用USBケーブルは充電専用です。
- 充電端子に美容液や水滴が付着していないことを確認してから充電する。  
感電・ショート・発火の原因となります。
- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。  
充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。




必ず守る


# 各部のなまえとはたらき

## 本体

右側面

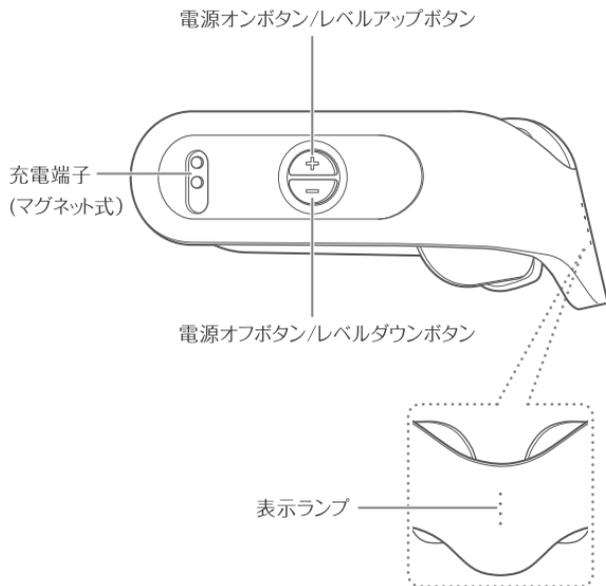

上面部

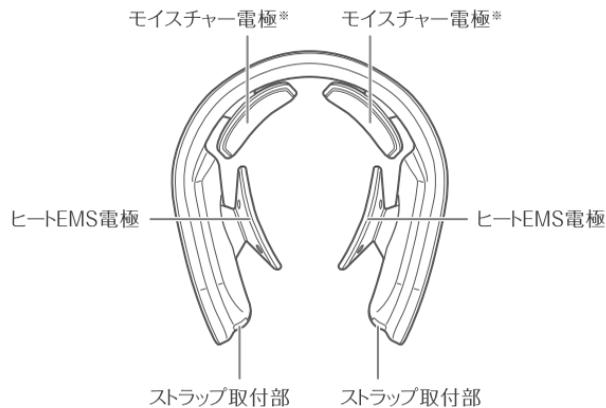

※モイスチャー電極からEMSは出力されません。


## 付属品

---

● ACアダプター※



● 充電用USBケーブル(マグネット式)※

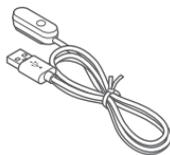

● ストラップ

● 取扱説明書(保証書付)

※本製品以外では使用しないでください。

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

## はたらき

---

### オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、「ピーピー」とブザー音が鳴り、自動で電源がオフになります。

### EMS

電氣的に筋肉を刺激します。  
ヒートEMS電極から出力します。  
EMSの波形が変わるときに「ピッ」というブザー音でお知らせします。

### ヒーター機能

ヒーター機能で首周りを温めます。  
ヒートEMS電極から出力します。

### モイスチャーパルス


モイスチャーパルスで角質層まで  
潤いの浸透をサポートします。

### 充電残量お知らせ

電池残量が少なくなると「ピーピーピー」とブザー音が鳴り、電源がオフになります。

### ストラップの取り付けかた

本体装着時に、電極がうまくお肌にあたらぬ方や、サイズが合わず落下の危険性がある方は、ストラップをご使用ください。  
化粧品により電極が滑りやすい場合も、ストラップのご使用がおすすめです。

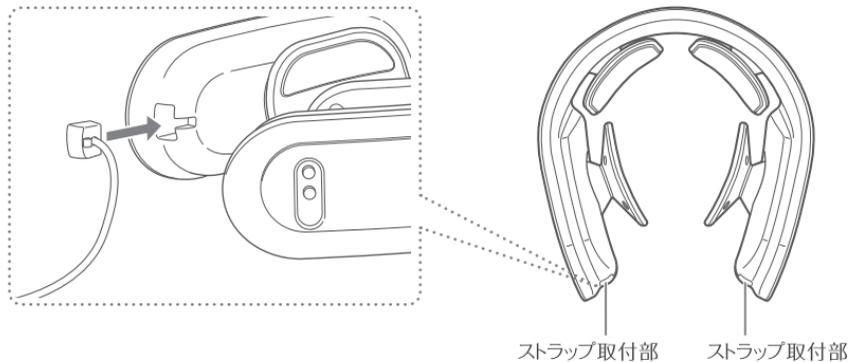


ストラップをストラップ取付部2箇所に角度を合わせて差し込みます。  
ストラップの使いかたについては、「ストラップの使いかた」(P.18)を参照してください。

※ストラップ取付部に左右の指定はありません。

# お使いになる前に

## 充電する

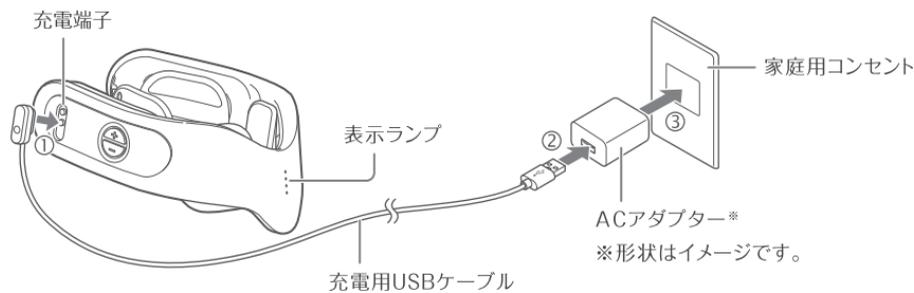

- ・ 本体と充電用USBケーブルを図のように接続すると、充電が始まります。充電中は表示ランプが順番に赤色点滅します。
- ・ 充電が完了すると、表示ランプが赤色点灯に変わり、1分後に消灯します。充電用USBケーブルを外してください。
- ・ 室温約25℃の場合、約3時間で満充電となり、約3.5時間動作可能です。  
電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。
- ・ 電池残量が少なくなると「ピーピーピー」とブザー音が鳴り、電源がオフになります。

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

---

---

## ご注意

- ・マグネット式充電端子は正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると充電が開始されません。
- ・本体とマグネット式充電端子に水滴などがついている場合は、しっかり拭き取ってください。水滴などが付着したまま充電すると、故障の原因となります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ・充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。

## お肌へのプレテスト

---

本製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

- 1 首を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る
- 2 首にお手持ちの美容液などを塗る
- 3 4つの電極が首に触れるようにしっかりと本体を装着し、EMSレベル1で約3分間使用する
  - ・電源オン時は、EMSレベル(強さ)は「レベル0」に設定されています。
  - ・使いかたについては、「本体を装着する」(P.15)、および、「ケアする」(P.22)を参照してください。
- 4 美容液などを拭き取り、お肌に異常がないことを確認する  
24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ、本製品をご使用ください。

---

### 注意

- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

# 使いかた

## 基本的な使いかた

### 動画で確認する

使いかたを動画で確認することもできます。  
下記のQRコードを読み込んでください。

<https://ymn.cm/VaXqjk>



### 本体を装着する

首が清潔な状態で、お手持ちの基礎化粧品で十分に保湿してからご使用ください。

1



髪を束ねるなどして、本体に髪の毛を挟みこまないようにします。


### ご注意

・美容オイルなど、油分を含むタイプの化粧品を使う場合は、本体内側のゴム部分に付着しないようにご注意ください。本体の劣化の原因になります。また付着した場合は、拭き取ってください。

2

## お手持ちの美容液などを首周り全体に塗る

- ・使用量の目安:直径約1cmのさくらんぼ1粒程度
- ・EMSはお肌と電極間に水分がないと感じにくくなります。常に水分がある状態を保ってください。

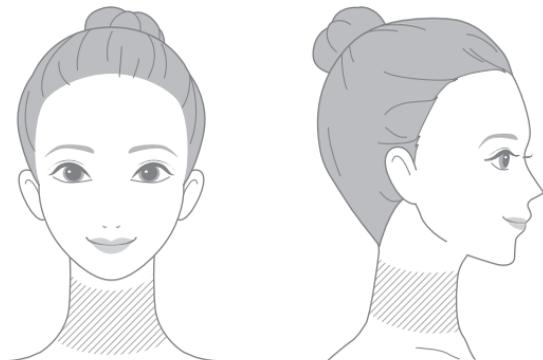

### ● オススメの化粧品(P.32)

デイリーケア:メディリフトゲル  
スペシャルケア(週1~2回):メディリフト ネックシートマスク

※どちらも毎日のスキンケアとしてもお使いいただけます。


※ストラップを使用する場合は、本体にストラップを取り付けた状態で、頭を通し、ストラップを首にかけてください。

※ストラップの使いかたは、「ストラップの使いかた」(P.18)を参照してください。

## 3

## 本体を軽く開きながら、首に装着する

- ・左右のヒートEMS電極を内側に凹ませてから、電極間の空間を広くした状態で軽く開いてください。
- ・絶対に本体を強く開かないでください。約10cm以上開くと、故障の原因となります。

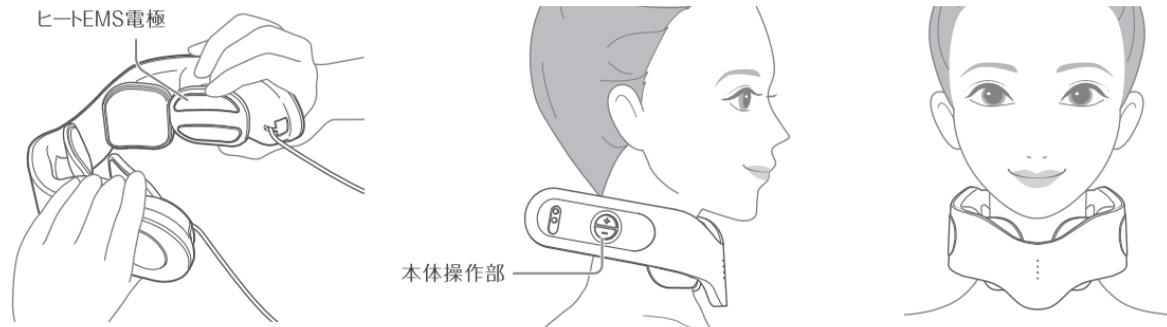


- ・上記イラストのように、必ず本体操作部が首の右側に来るように装着してください。
- ・4つの電極が、确实にお肌に触れていることを確認します。
- ・髪の毛の挟みこみにご注意ください。

※ケア方法について詳しくは、P.22～24をご参照ください。

## ストラップの使いかた

ストラップを使用する場合は、次の手順でストラップを調節してください。


### ● ストラップの各部のなまえ

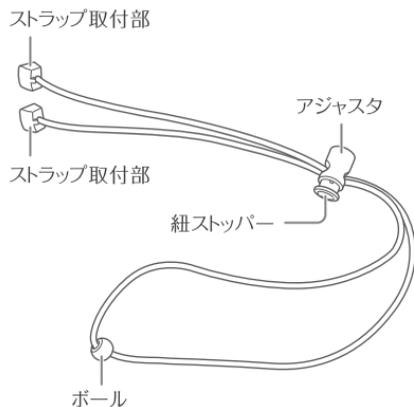

1

### ストラップを首にかけて、本体を装着する

・本体へのストラップの取り付けかたは、「ストラップの取り付けかた」(P.11)を参照してください。

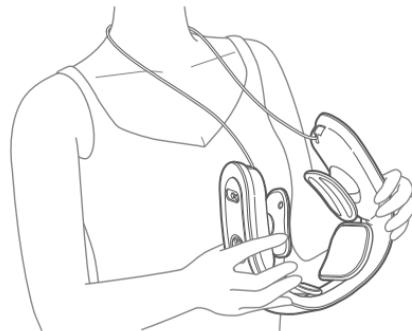

### ご注意

・ストラップを首にかけ、本体を首に装着しないままぶらさげないでください。本体の落下・故障・けがの原因となります。

2

## 片方の手でアジャスタを持ち、首の後ろにあてる


- ・本体を首に装着した状態で、必ずおこなってください。
- ・アジャスタをあてる際に、ストラップの紐がからまない状態であててください。



3

## もう一方の手で、ボールをつまむ


- ・アジャスタを持った状態のまま、ボールをつまんでください。

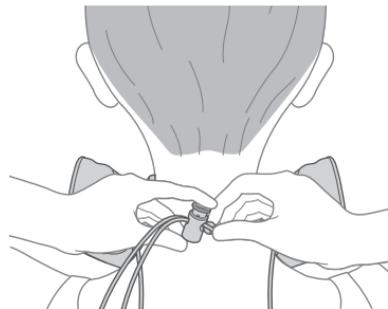

4


アジャスタの紐ストッパーを軽く押し  
ながら、ボールを後方に引っ張る

・ストラップが左右均等になるように、引っ張ってください。

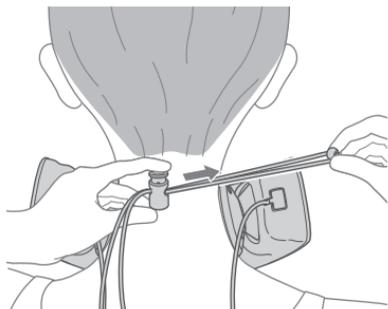

5

本体がしっかりと固定されるまで、  
ストラップを調節する

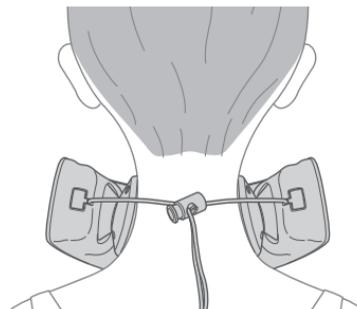

・ストラップの調節完了です。

ご注意

・アジャスタを手で持った状態で紐を後ろに引っ張らないと、ストラップが本体のストラップ取付部から外れてしまう場合があります。

必ずアジャスタを手で持った状態で、調節してください。

## EMSを感じない？

### EMSの体感に左右差がある？

#### ・お肌の水分量が不足している

お手持ちのローションや美容液、ゲルなどで十分に保湿してください。「メディリフトゲル」(P.32)のご使用がオススメです。EMSの刺激を強めたい場合は、ヒートEMS電極に美容液などをたっぷりのせてください。スペシャルケアとしてメディリフトネックシートマスク(P.32)のご使用もオススメです。

左右の水分量の違いが体感に現れることがあります。また、電極部分のお肌への触れ具合によっても体感が異なる場合があります。

## ご注意

- ・本体の電源はオフの状態 で本体を装着してください。
- ・髪をまとめた状態で装着してください。
- ・装着時に、本体に髪を挟まないようにご注意ください。
- ・本体の電極(左右4箇所)が、必ずお肌に当たっていることを確認してください。接触がゆるいと正しく使用できない場合があります。接触がゆるいときは、ストラップを取り付けてご使用ください。
- ・オイルタイプの流さないヘアトリートメントを髪につけた場合は、本体に付着しないよう注意してください。
- ・お肌と電極の間には、常に美容液などの水分があるようにしてください。水分が少ないと正しく使用できず、体感の低下や肌トラブルの原因となります。


## ケアする

使いかたに慣れるまでは、鏡を見ながら操作をしてください。

1

### 電源をオンにする

- ・電源オンボタンを約1秒以上長押しします。
- ・電源オン時は、EMSレベル(強さ)は「レベル0 (EMS出力なし)」に設定されています。

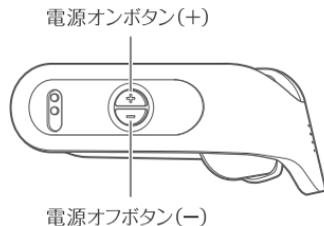


電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。

途中で停止したいときは、電源オフボタンを約1秒以上長押しして、電源をオフにしてください。

2

### お好みのEMSレベル(強さ)を選ぶ


- ・レベルアップボタン(+)/レベルダウンボタン(-)を押します。

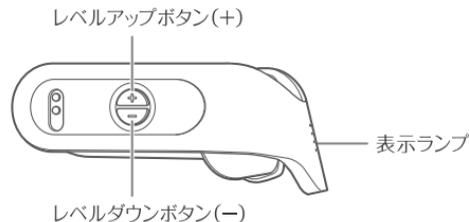

- ・EMSはレベル1からレベル4まで調節できます。
- ・レベルの数だけ表示ランプが青点灯します。
- ・レベル0(電源オン時)は、ヒーターとモイスチャーパルスのみを使用になります。
- ・ヒーターとモイスチャーパルスのレベルは変更できません。ヒーターが温まるまで約1分かかります。
- ・設定されたレベルによって異なる音が鳴ります(P.23)。
- ・ヒーター機能とモイスチャーパルス機能は常時オンになります。
- ・EMSの波形が変わるときに「ピッ」というブザー音でお知らせします。

レベル	ブザー音	表示ランプ
レベル0 (電源オン時)	ピー	1つ点滅
レベル1	ピッ	1つ点灯
レベル2	ピピッ	2つ点灯
レベル3	ピピピッ	3つ点灯
レベル4	ピピピピッ	4つ点灯
レベル0の状態 -ボタンを押したとき*	ピーー	-
レベル4の状態 +ボタンを押したとき*	ピーー	-

※レベル0の状態で-ボタンを押したとき、またはレベル4の状態  
で+ボタンを押したときは、“ピーー”と音が鳴り、上限下  
限をブザー音でお知らせします。

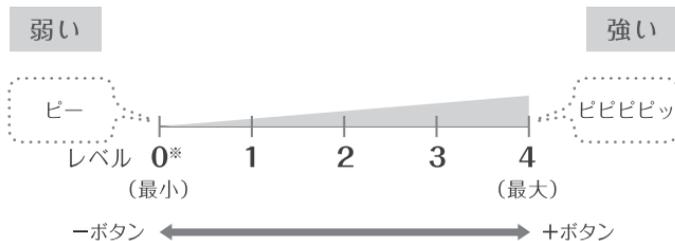

※レベル0でも、ヒーターとモイスチャーパルスは出力しています。

### ご注意

- ・初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
- ・お肌が乾いたら、美容液などを途中でつけ足してください。一度電源をオフにし、本体をはずしてからつけ足してください。
- ・ビリビリとした痛みを感じるほど、EMSレベル(強さ)を上げないでください。

---

### 3

## 終了する

電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。  
電源がオフになると、“ピーピー”と音が鳴ります。  
残った美容液などはお肌になじませてください。

途中で停止したいときは、電源オフボタンを約1秒以上長押しして、電源をオフにしてください。

---

## ご注意

- ・1日1回程度を目安にご使用ください。(最大1日2回まで)
  - ※上記はあくまでも目安です。お肌の状態をみながらご使用ください。
  - ※お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
  - ※連続で使用する場合は、ヒーターとモイスチャーパルス機能のみを使用するとき(レベル0)は4時間以上、EMS機能を使用するとき(レベル1~4)は10時間以上あけることをおすすめします。

## 使い終わったら

### お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

#### 警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。
- 水洗いはしない。  
本製品は防水製品ではありません。故障の原因となります。



1

#### 水で湿らせて固くしぼった柔らかい布等で汚れを拭き取る

・汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。

#### 注意

- ゲルや美容液などが付着した状態で放置しないでください。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。



## 保管のしかた

---

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、本体と壁面コンセントからACアダプターと充電用USBケーブルを抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないで、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

---

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.27)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.31)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

# お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ 電源オンボタンを約1秒以上長押ししてください。
	→ 電池残量がありません。充電してください(P.12)。
充電しても数分しか使えない ブザー音が鳴り、電源がオフになる	→ 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
	→ 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.12)。
	→ 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.31)にご連絡ください。
充電が開始されない	→ ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください(P.12)。
	→ マグネット式充電端子が正しい向きで接続されているか確認してください。
EMSが強い (ビリビリする・痛い)	→ レベルダウンボタンでEMSのレベルを下げてください(P.22)。
	→ お肌が乾燥しています。美容液などを塗って、お肌を湿らせてください。
EMSが弱い (感じない)	→ レベルアップボタンでEMSのレベルを上げてください(P.22)。
	→ 電極が正しくお肌にあっていません。ストラップを調節するなどして、本体を正しく装着してください(P.18)。
	→ お肌が乾燥しています。美容液などを塗って、お肌を湿らせてください。 メディリフトゲルやメディリフト ネックシートマスク(P.32)がオススメです。
ヒーターが温まらない (温まりが弱い)	→ 温まるまで約1分間かかります。
	→ 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.12)。
途中でブザー音が鳴る	→ EMSの波形が変わるときに「ピッ」というブザー音でお知らせします。

## よくあるご質問

---

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A 1回10分程度を目安にご使用ください。  
※電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。  
※上記はあくまでも目安です。お肌の調子をみながらご使用ください。  
※お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

Q 連続で使用することはできますか？

A 本製品は1日1回、10分間の使用をおすすめします。連続で使用する場合は、ヒーターとモイスターパルス機能のみを使用するとき(レベル0)は4時間以上、EMS機能を使用するとき(レベル1~4)は10時間以上あけることをおすすめします。

Q 美容液などは1回どれくらい使用すればよいですか？

A 首周り全体に、メディリフトゲルを直径約1cmのさくらんぼ1粒程度塗ります。本製品の特長として、美容液などを多く使用したほうがよりEMSの体感を得ることができます。少ないとピリピリと感ずることがあります。

Q お風呂場で使用できますか？

A 本製品は防水製品ではありません。使用しないでください。

Q 睡眠中に使用できますか？

A 睡眠中は使用しないでください。

---

Q 肌に発疹、炎症、かゆみが出たのですが

A EMSの刺激によるものです。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

Q 違和感や疲労感があるのですが

A EMSの刺激によるものです。首に違和感が無くなるまでしばらく使用を控えてください。

Q 妊娠中は使用できますか？

A 妊娠中や出産直後には使用しないでください。かかりつけの医師にご相談ください。

Q 日焼け直後、剃毛した直後に使用できますか？

A 炎症の原因になる場合があります。お肌にトラブルが起こった場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

Q 肌に赤みが出たのですが

A ヒーターや本体の圧迫により一時的に赤みが出ることがあります。翌日まで続く場合は医師にご相談ください。

Q メディリフト/メディリフト アクア/メディリフト プラスまたはメディリフト アイと同時に使用できますか？

A 本製品は、メディリフト/メディリフト アクア/メディリフト プラスまたはメディリフト アイと同時に使用することができます。  
※メディリフト/メディリフト アクア/メディリフト プラスとメディリフト アイは同時に使用することはできません。

## 製品仕様

定 格 電 源	DC5V 0.5A	推 奨 環 境 温 度	10℃～40℃
消 費 電 力	最大約2.5W(充電時)	使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間(※充電環境によって、充電時間は前後します。)		
動 作 時 間	約3.5時間(満充電の状態から)(※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。)		
外 形 寸 法	約144mm×163mm×70mm(W×D×H)		
製 品 質 量	約250g	製 造 国	日本
材 質	本体:ABS樹脂、PC樹脂/医療グレードシリコン 電極部(前側):ABS樹脂、クロムメッキ      電極部(側面):ステンレス		
付 属 品	充電用USBケーブル(マグネット式) ……1本      ストラップ ……1個 ACアダプター ……1個      取扱説明書(保証書付)		

## アフターサービス

### 充電電池について

---

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

### 廃棄について

---

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



### お問い合わせ先

---

#### ●日本国内からのお問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

#### ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

#### ●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

Memo

## 保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.31)にご相談ください。

### 無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
  - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
  - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
  - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
  - (リ) 保証書のご提示がない場合。
  - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. \_\_\_\_\_

## 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	EPN-10
形名	メディリフト ネック		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本 体	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<p>ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">見本</h1>		

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間  
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて  
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ  
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的  
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

販売店様へのお願ひ 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com