

美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用
保証書付


取扱説明書

家庭用美容器

毛穴ソニック美顔器

サークルピーリングプロ

HDS-30

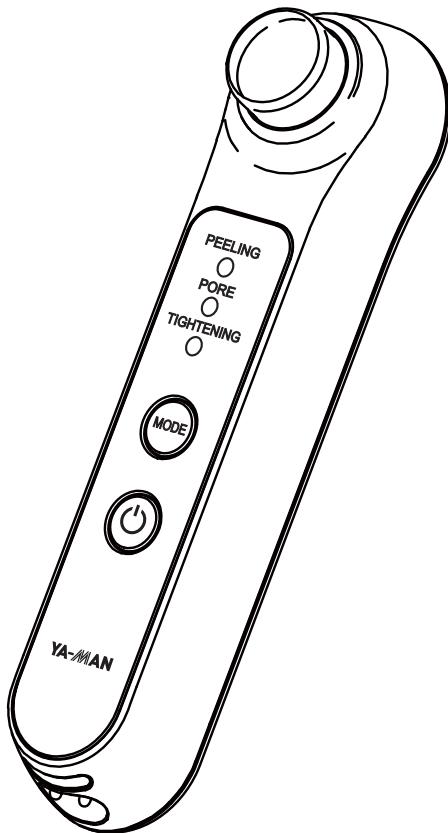

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	6
ご使用の前に	7
使いかた	9
使い終わったら	13
こんなときには	15
アフターサービス	17
●製品仕様	18
●保証について	18
保証書	裏表紙

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電子機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

警 告

安全上のご注意

次のような人は使用しない。



禁 止

- 事故やトラブルの原因となります。
- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患
 - ・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患
 - ・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質
 - ・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
 - ・敏感肌または肌の弱い人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
 - ・妊娠中、生理中、授乳中・眠気をさそう薬を服用中の人
 - ・物理的刺激などによる病的なシミのある人・歯の治療中の人
 - ・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など・にきび
- ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・力ヨミやほてりのある部位
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球
- ・まぶた、目のまわり

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



必ず守る

交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

※海外からの修理保証への依頼は日本国内で配達、受取可能な連絡先、住所が必要となります。



用途以外
禁 止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、本機が故障する原因となります。



禁 止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

警告

安全上のご注意



無理な扱い
禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

コンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプター
を抜く

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

水の中に落とさない。水の中につけない。

ACアダプターは浴室や湿気の多い所で使用しない。保管しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しこみがゆいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



ACアダプター
を抜く

使用しないときは必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし、ACアダプターをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



タコ足配線
禁止

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差しこみ、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因となります。

警告



使用者の制限

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。
事故やケガをするおそれがあります。



使用者の制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
事故やケガをするおそれがあります。



落下禁止

不安定な場所に置かない。
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。
本体が故障する原因となります。
また、足の上などに落とすとケガの原因となります。

安全上のご注意

注意



必ず守る

使用中に疲労を感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

使用時間を守って使用する。
過度の使用は肌を傷める原因となります。



必ず守る

肌表面にピリピリした痛みを感じた場合は、部位をずらして使用する。またはジェルや水を補充する。
そのまま使用すると、肌を傷める原因となります。



必ず守る

本機を1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントする。
止めたままトリートメントすると、肌を傷める原因となります。



必ず守る

力を入れて肌にこすりつけない。
肌を傷める原因となります。



必ず守る

ヘッドと肌との間に、常にジェルや水があるように、途中でジェルや水を補充する。
そのまま使用すると、肌を傷める原因となります。

! 注 意



禁 止

肌の弱い人は、1モード1回の使用で、同じ箇所に2回以上使用しない。
過度なピーリングは、肌を傷める原因となります。



禁 止

初めて使用する前に必ず
プレテストを行ってから使
用する。
事故やケガの原因となり
ます。



禁 止

電源をオンにした状態では
かの美容器機や電気製品
に接触させない。
ケガや本体が故障する原因
となります。



禁 止

ペットには使用しない。
ケガをするおそれがあります。



禁 止

化粧品(使用に適さないも
のを除く)、水以外使用し
ない。

肌トラブル、故障の原因とな
ります。

〈使用に適さない化粧品〉
・オイル・スクラブ系・刺激
の強い化粧水



禁 止

手にジェルや水が付いたま
ま使用しない。

手が滑って思わぬ事故を招
いたり、本体とボタンの隙
間に入り込み故障の原因と
なります。




禁 止

本体をアルコール・シンナー・
ベンジン・ネイルリムーバー
などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える
おそれがあります。

各部のなまえ


●本体

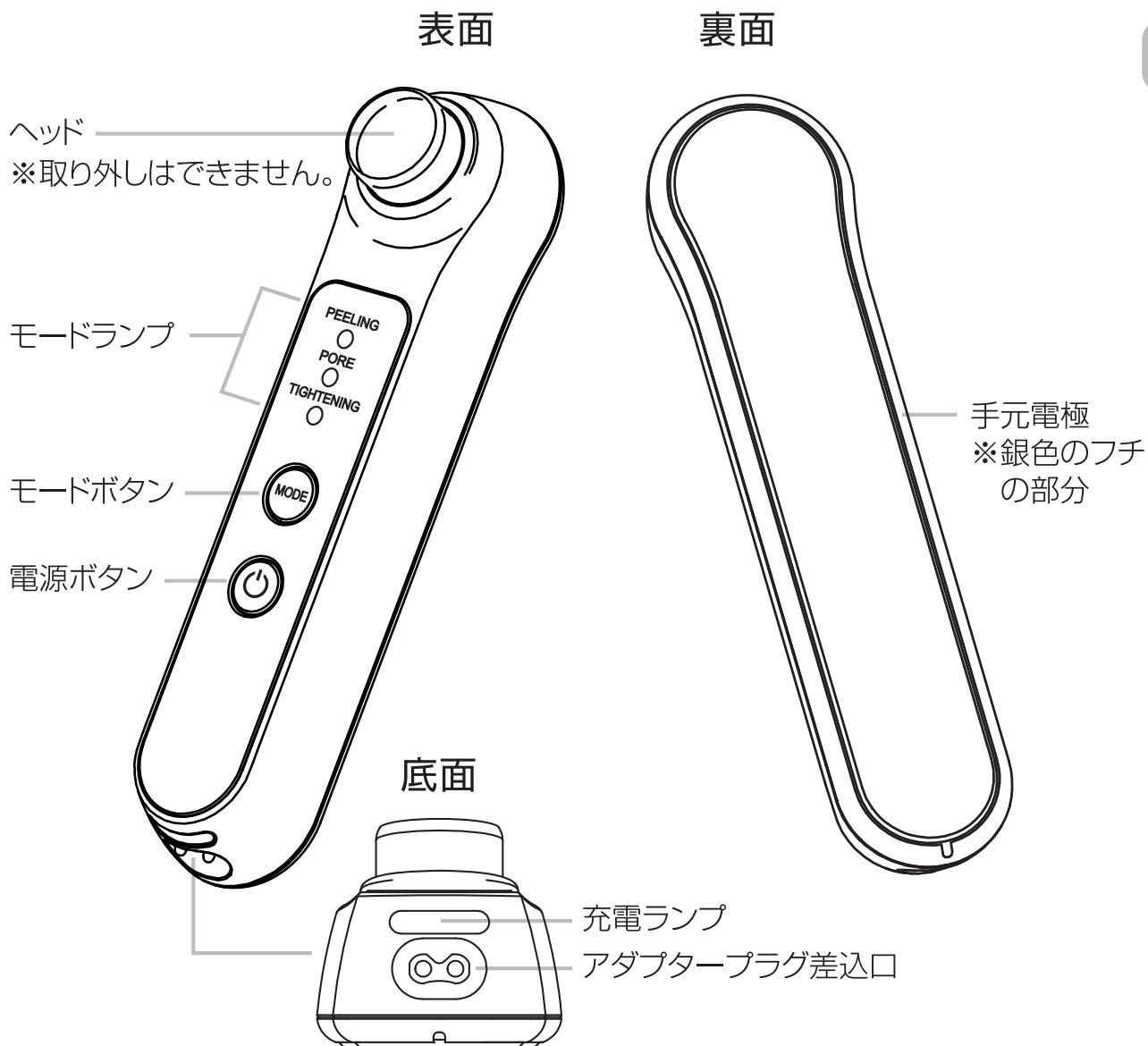

各部のなまえ

●付属品

ACアダプター

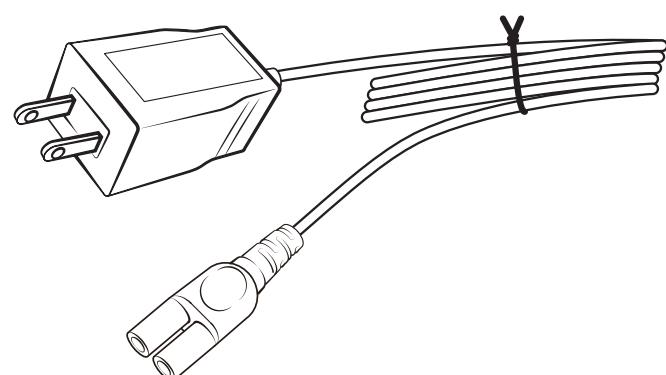

ご使用の前に

●モードの切替

トリートメントモードは3種類あり、電源がONの状態でモードボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。

※トリートメント方法についてはP9～P12をご覧ください。

途中で電源をOFFしたい場合は電源ボタンを長押し(約3秒)してください。



ご
使
用
の
前
に

●自動電源オフ

本製品は自動電源オフ機能を備えています。

各モードの動作開始時から約3分で電源がオフになります。

トリートメントの途中でモードを変更しても、変更後から約3分で電源がオフになります。

お肌へのプレテスト

製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、必ず皮膚トラブルが起きないか相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にします。

腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。

2 腕の内側に化粧品(油分を含まないジェル・化粧水)または水を塗り、毛穴モード(PORE)で約1分間使用します。

・ プレテストをした部分はこすらないでください。

3 24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり等)がないことを確認してから使用してください。



注意

- ・ 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・ 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・ お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

充電のしかた


初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。

1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。

2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

- ・本体の充電ランプが点灯し、充電が開始されます。
ランプが消灯したら充電完了です。
- ・電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。

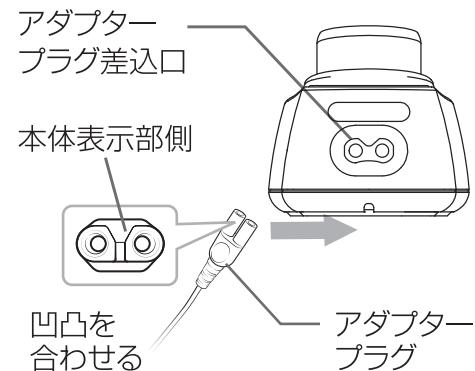

3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



警告

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2~3時間	約30分

※使用環境 室温約25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です。
※電池の残量や使用環境によって、
充電時間は前後します。

使いかた

●使用の目安

※使用は週に1～2回程度。

ご使用する際は、1日1回、5分以内を目安にご使用ください。

過度な使用は肌に負担をかけて、トラブルの原因となります。

基本の使いかた

●トリートメントのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

※油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※クレンジングジェルと併用の場合は、メイクをしたまま角質モードからお使いください。

2 肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認してください。

※肌に異常がある部分には使用しないでください。

※肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

※目のまわりや、耳のまわりに使用しないでください。

3 電源ボタンを長押し(約3秒)し電源を入れる。



注意

初めて使用するときはプレテストを行なう。(P.7参照)

力を入れて肌にこすりつけない。

ヘッドと肌の間には、常にジェルや水があるように、途中で補充する。

乾いた肌に使用すると、肌を傷める原因となります。

ヘッドは1ヶ所に止めず、常に移動させながらトリートメントする。

止めたままトリートメントすると、肌を傷める原因となります。

化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外使用しない。

肌トラブル、故障の原因となります。

〈使用に適さない化粧品〉

・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水

防水性機能について

・本製品は防水性能を表すIPX4(JIS防水保護等級)に相当します。

※完全防水仕様ではありません。水中にしづめたり、流水を3分以上あて続けないでください。

各種モードの使いかた

●角質モード:PEELING

使用の目安時間:2分

超音波で肌表面の古い角質を取り除きます。

お顔全体にお使いください。

1 使用前に化粧を落とし、肌にしっかりとジェル等の化粧品、または水を付けます。

※クレンジングジェルと併用の場合は、メイクをしたままの状態で角質モードからお使いください。

2 肌に本体をやさしくあてて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※本機を1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントしてください。

※2回以上同じ箇所にあてず、あてる箇所をずらしてください。



・ 使用後は化粧品で適宜、肌を整えてください。

使いかた

本体の動かし方

使用禁止部位

※本体を矢印→の方向に動かす。

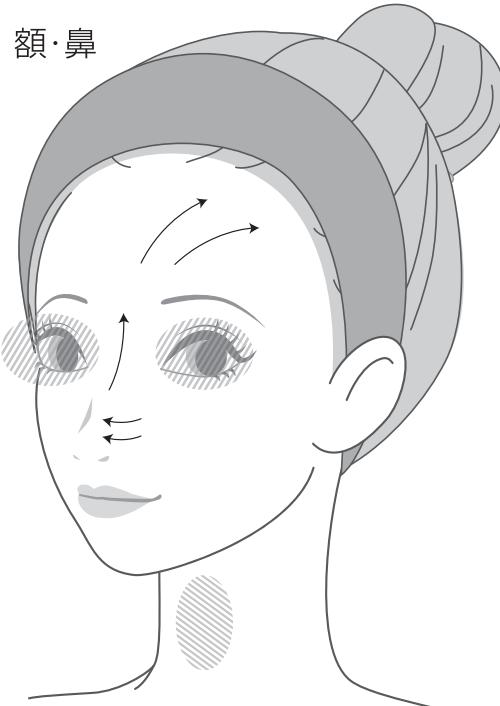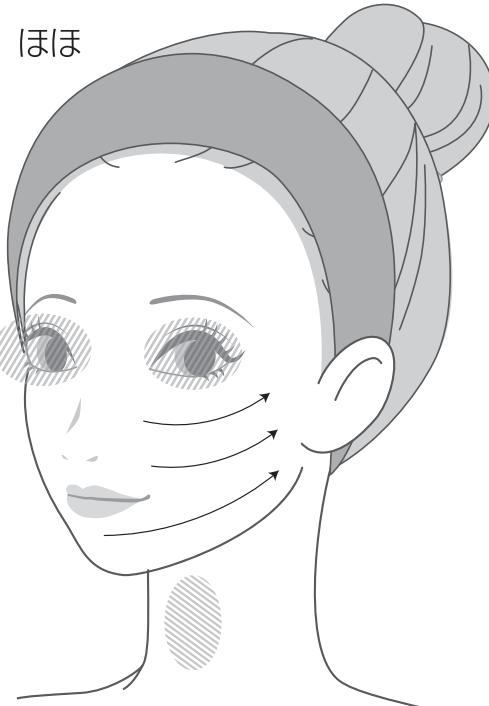

●使用時のポイント

肌にジェル等の化粧品、または水がなくなった場合は再度、肌に付けてください。

・温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後に肌が温まった状態で使用していくと効果的です。また、スチーマーとの併せ使いもオススメです。

●毛穴モード:PORE

使用の目安時間:1分

超音波+イオンクレンジングで毛穴の汚れを取り除きます。小鼻まわり、あご、眉間など毛穴が気になる部位にお使いください。


- 1 使用前に化粧を落とし、肌にしっかりとジェル等の化粧品または水を付けます。
- 2 毛穴が気になる部位に本体をやさしくあてて、くるくると動かします。1部分5回転を目安にしてください。

使いかた

※本機を1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントしてください。

※2回以上同じ箇所にあてず、あてる箇所をずらしてください。

- ・ご使用の際は必ず本体の手元電極に触れた状態で使ってください。
- ・手元電極をしっかりとぎることでイオントリートメントができます。

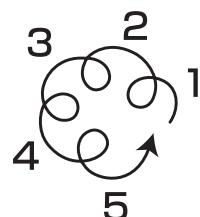


本体の動かし方

使用禁止部位

※本体を矢印→の方向に動かす。

口もと・鼻横

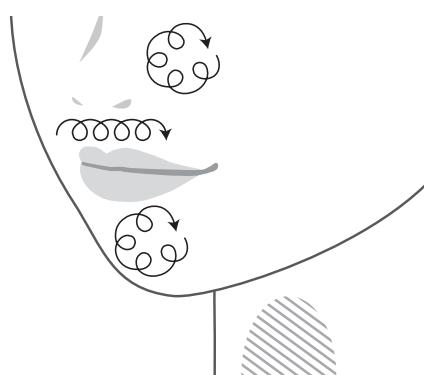

鼻・眉間



●ひきしめモード:TIGHTENING 使用の目安時間:2分

超音波+電気刺激で肌をひきしめます。

お顔全体にお使いください。

- 1 肌が清潔な状態で、とろみのある化粧水、乳液、ジェルなどのスキンケア化粧品をたっぷり塗ります。

2 肌に本体をやさしくあてて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※本機を1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントしてください。

※2回以上同じ箇所にあてず、あてる箇所をずらしてください。

- ・ご使用の際は必ず本体の手元電極に触れた状態で使ってください。

- ・手元電極をしっかりとぎることで電気刺激をします。

- ・使用後は乳液やクリームなどで適宜、肌を整えてください。

本体の動かし方

使用禁止部位

※本体を矢印→の方向に動かす。

お顔全体



①～④の順に本体を動かしてください。

使いかた

モードを組み合わせた使いかた

洗顔

お顔全体を洗浄します。

角質モード

ジェルなどを肌に付け、お顔全体にあてる。

毛穴モード

ジェルなどを肌に付け、毛穴の気になる部位にあてる。

ひきしめモード

スキンケア化粧品を肌に塗り、お顔全体にあてる。

※角質モード・毛穴モードはスチーマーを浴びながらの使用もオススメです。

※クレンジングジェルと併用の場合は、メイクをしたままの状態で角質モードからお使いください。

使い終わったら

お掃除のしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。



警告

お掃除の際は、必ず電源をオフにする。


感電・ショート・発火の原因となります。

使い終わったら

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 ヘッドについている汚れを
流水で流す。

- ・ ジェルや水などを使用した場合は、
しっかりと汚れを洗い流してください。
- ・ 本体は決して水に浸けないでください。
故障の原因となります。

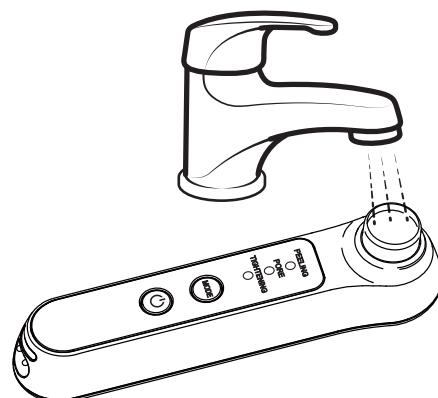

3 タオルなどの乾いた布で、本体
表面の汚れやヘッドと本体の水
分を拭き取る。

- ・ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、
ベンジン、除光液などは使用しないで
ください。



保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 本体やヘッドに付着した水はしつかり拭きとてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.15)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.17)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

使い終わったら

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ 電源ボタンを長押し(3秒)していない → 充電がされていない	→ 電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください → 充電してください(P.8)
充電しても数分しか使えない	→ 充電不足 → 充電池の寿命	→ 販売店またはヤーマンコールセンター(P.17)にご連絡ください
充電が開始されない	→ ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.8)
超音波が痛い	→ お肌が乾燥している → 強くこすりついている	→ ジェルをお肌に塗ってください → 軽くすべらせてください
イオンがない(感じない)	→ 手元電極に触れていない → 使用したい部位をぬらしていない → 感じ方には個人差があります	→ 手元電極をしっかりとぎつて使用してください → ジェルや水でたっぷりとぬらしてください
超音波が弱い	→ ヘッドがお肌に密着していない → 充電残量がない	→ ヘッド面全体をお肌にあててください → 充電してください(P.8)
全てのモードランプが点滅する	→ 充電不足	→ 充電してください(P.8)

こんなときには

よくあるご質問

Q	A
ピーリングする箇所にジェルをぬる理由は?	超音波やイオンをまんべんなく直接伝える為です。乾いた肌には絶対に使わないでください。
使用時間、使用頻度の目安はありますか?	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用は週に1~2回程度。 使用する際は、1日1回、5分以内を目安にご使用ください。 ※あくまで目安となります。ご自分のお肌の様子を見ながらご使用ください。 ● 1部位に10分以上使用しないでください。 ● お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。 ● 肌の弱い人は、1モード1回の使用で、同じ箇所に2回以上使用しないでください。
肌が赤くなるのですが	<ul style="list-style-type: none"> ● ヘッドを強くこすると、お肌を傷める原因となります。ヘッドはお肌の上を軽くすべらせるように動かしてください。また、ヘッドと肌との間には、常にジェル等の化粧品や水があるよう補充しながらご使用ください。
本体を動かしにくいのですが?	<ul style="list-style-type: none"> ● ジェル等の化粧品や水が不充分な場合、ヘッドを滑らかに動かせません。滑りをよくするために、お肌にジェル等の化粧品や水をたっぷり塗ってから本製品をご使用ください。
お手入れや保管はどうするのですか?	<ul style="list-style-type: none"> ● ヘッド部分を水洗いした後は、乾いた布で本体とヘッド表面の水分を拭き取った後に、保管してください。(ただし、水中にしづめないようにしてください) ● 高温多湿の場所では保管しないでください。
浴室で使用できますか?	本体は浴室で使用いただけますが、強い水流を長時間かけ続けたり、水の中に浸けることはできませんので、ご注意ください。
肌にピリピリ感を感じることはありますか?	個人差により微弱電流による刺激を感じることがあります。また、日焼けをしたり、肌に異常がある場合は使用を中止して専門医にご相談するか、症状が落ちつくまでご使用をお控えください。
化粧の上から使用できますか?	メイクの上からご使用の場合は、クレンジングジェルと併用して角質モードからお使いください。
使用する際はジェルしか使えませんか?	<p>水溶性のジェルでご使用ください。スクラブなどの刺激の強いものは使用しないでください。</p> <p>また、以下の化粧品は、お肌のトラブルや本製品が故障する原因となりますので、使用しないでください。</p> <p>〈使用に適さない化粧品〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水 等

こんなときには

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



Li-ion

お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) 0120-776-282 (通話料無料)
携帯電話・PHS 0570-550-637 (通話料有料)

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

●製品仕様

定 格	DC5.0V 0.8A
消 費 電 力	約3W(充電時)
充 電 時 間	約2~3時間 ※使用環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	約W43xD40×H169(mm)
製 品 質 量	本体:150g
材 質	本体:ABS樹脂／ポリカーボネート／ステンレス
製 造 国	日本
付 属 品	ACアダプター 1個

●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間保証いたします。（消耗品、付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.17)にご相談ください。

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	HDS-30
形名	毛穴ソニック美顔器 サークルピーリングプロ		
無料修理保証	対象部分：本体のみ		期間：お買い上げ日から1年間

店名・住所・電話

※販売者名

ご購入日
明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管

見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。
- 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など



0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS



0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

HDS30-1-006JEC