

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	HRF-10
形名	フォトプラス		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ		期間: お買い上げ日から1年間
店名・住所・電話 ※販売者名	<p>見 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p>本</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印のお客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

* 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

HRF10-6-001

YAMAN
TOKYO JAPAN

保管用


保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

フォトプラス

HRF-10

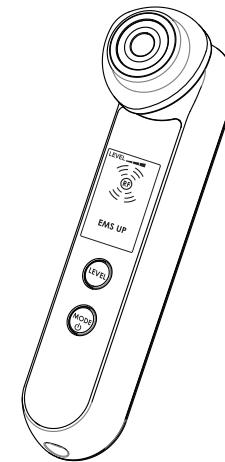

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
特長	7
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
使いかた	13
使い終わったら	17
こんなときには	18
アフターサービス	21
●製品仕様	22
●保証について	22
保証書	23

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電気機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
- 人工心肺など生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器



禁止



警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- 自分で意思表示できない人
- 温度や刺激の感覚が自覚できない人
- 自己免疫疾患のある人

次の人をご使用前に医師にご相談ください。

- 急性疾患の人
- 感染症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 有熱性疾患の人
- 高血圧の人や血液疾患のある人
- 発熱している人
- 糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
- 神經障害のある人
- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- 通院して薬を服用中の
- アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際して肌に不安のある人



禁止

次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
- 酒気帯びの場合
- 口内や陰部、粘膜など
- 眼球・まぶた(眼窩)(COOLモード以外)
- のど

膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をした部位

美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)



禁止

同じ箇所にあて続けない。
必ずお肌の上を動かしながら
使用する。ヘッド面全体があ
たらない部分に使用しない。
やけど・低温やけどの原因
となります。



使用者の
制限

子供の手の届かない場所に
保管し、使わせない。
事故やケガをする原因とな
ります。



禁止

火中投入・加熱・高温での
充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内
蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因と
なります。



用途以外
禁止

取扱説明書に記載されてい
る用途以外には使用しない。
ケガをしたり、本機が故障す
る原因となります。



警告



禁 止

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・ケガの原因となります。



タコ足配線
禁 止

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。
また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



使用者の
制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
事故やケガをする原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因となります。



必ず守る

アダプタープラグやプラグ差込み口に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。



無理な抜い
禁 止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



水場使用
禁 止

本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。(水につけたり、洗ったりしない)
また、水場・浴室内・入浴時に使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



必ず守る

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。



警告



必ず守る

交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
ACアダプターは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。



プラグ
を抜く

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。
感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。
また、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



注意



禁 止

以下の項目は行わない。

- 事故やケガ、本体が故障する原因となります。
- お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- 落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
- 業務用等、過剰な連続使用をしない。



必ず守る

RF LEDモードのLED光を直接のぞき込まない。
LED光で目のまわり、まぶたへのケアをするとときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。
目やお肌を傷める原因となります。

海外でのご使用について

海外でのご使用について



注意



禁止

本体をアルコール・シンナー・
ベンジン・除光液などの溶剤で
拭かない。

本体の表面に損傷を与える
原因となります。



禁止

電極ヘッドを金属にあてない。
故障・ケガの原因となります。



禁止

COOLモードを連続して使用しない。

連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。
再度使用する時は30分以上間をあけてから使用してください。



禁止

歯の治療をした人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調節する。

歯の治療をした人、歯に詰め物がある人は、イオン・EMSの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。イオン・EMSのレベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・同じ箇所にあて続けない。
- ・お肌の状態にあわせて使用する。
- ・日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源を切る。



必ず守る

使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

使用中、使用後にお肌の異常がみられるときは使用を中止し、
医師にご相談ください。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故やケガをする原因となります。



警告



必ず守る

必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

特長


本製品は、RF深層温熱(以下RF)でお肌を温めながら、イオンクレンジング、イオンモイスチャー、EMS、振動、フォト、冷却でケアを行うフェイス用美容器です。ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各モードを組み合わせ、ケアを行うことができます。

- RF…お肌を深部*まで温めることで、よりケアに適した状態にすることができます。
- イオンクレンジング… 洗顔では落としきれない汚れを、イオンの力で吸着することができます。
- イオンモイスチャー… イオンの力で化粧水をよりお肌に浸透*させることができます。
- EMS… 電気の力で筋肉を刺激することができます。
- 振動… 細かなバイブレーションにより、ケアをサポートします。
- フォト… お肌にLED光をあてることでケアします。
- 冷却… お肌を冷やすことで、お肌を引き締めることができます。

*角質層まで

各部のなまえ


●本体

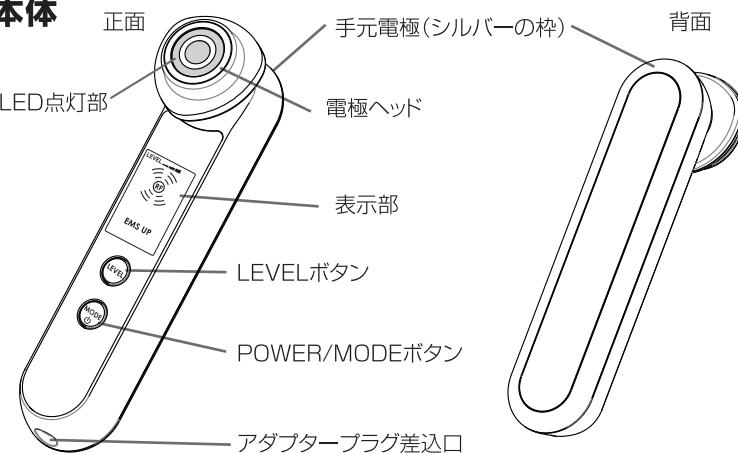


●コットンストッパー

(シリバーリング)

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。
※コットンを電極ヘッドに固定できます。

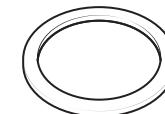

●ACアダプター

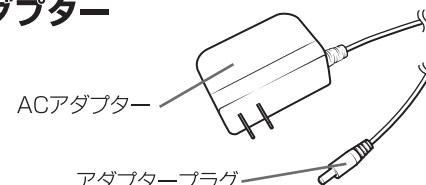


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

表示部の見かた




●表示部・ボタン

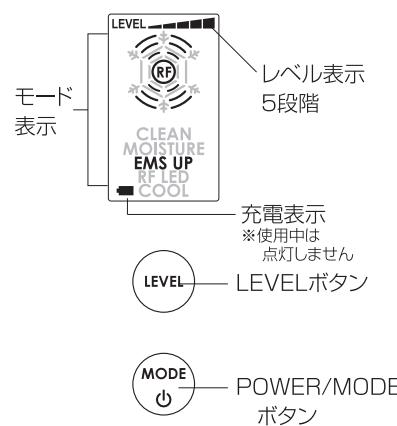


- POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにします。
(自動的にCLEANモードがスタートします。)
- 各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
- CLEAN・MOISTURE・EMS UPモードではレベルを選択することができます。レベルは5段階あり、LEVELボタンで選択することができます。
- POWER/MODEボタンを長押しすると電源オフになります。
※RFのレベルは選択できません。

●モード表示

POWER/MODEボタンを押すと、
CLEAN→MOISTURE→EMS UP→RF LED→COOL→CLEAN(繰り返し)…
の順にモードが切り替わります。

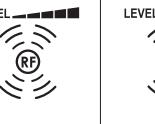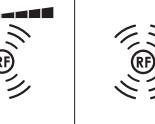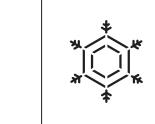モード	CLEAN	MOISTURE	EMS UP	RF LED	COOL
機能	RF / イオン クレンジング	RF / イオン モイスチャー	RF / EMS	RF / LED	冷却
モード表示	LEVEL  CLEAN	LEVEL  MOISTURE	LEVEL  EMS UP	 RF LED	 COOL

※CLEAN・MOISTURE・EMS UPモードのケア時に
モード表示のは表示・非表示を繰り返します。「ピッ」という音がするとRF
が動作します(モード表示のが表示)。
「ピピッ」という音がするとイオンまたはEMSが動作します(モード表示のは非表示)。

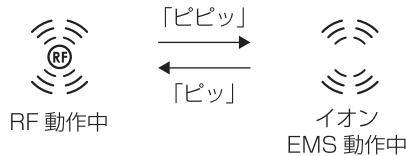

●レベル表示


・LEVEL/振動ボタンを押すと、イオン導出入とEMSのレベルを選択することができます。
・レベルは5段階あります。心地よいと感じるレベルを選択してください。

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5
-	-	-	-	-

※CLEANモード、MOISTUREモードではイオンの強弱を選択できます。
※EMS UPモードではEMSの強弱を選択できます。
※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
※RF LED・COOLモードのレベルは選択できません。
※RFのレベルは選択できません。

●充電表示

充電中は充電表示が点滅します。
充電が完了すると充電表示が点灯します。
※ACアダプターで充電中も使用することができます。
※使用中は点灯しません

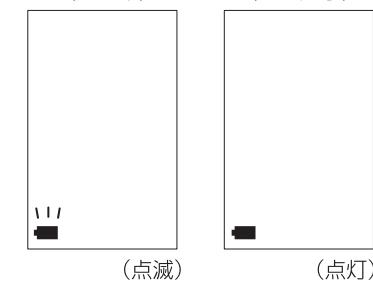

●スタンバイ表示・オートオフ(自動電源オフ)

CLEANモード・MOISTUREモード・EMS UPモード・RF LEDモードが終了すると「ピッピッピッ」と音が鳴り、約2分間、次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態となります(動いていない状態です)。
POWER/MODEボタンを押すと点滅表示しているモードがスタートします。
約2分間操作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。
COOLモードの終了時のみ、スタンバイにはならずに自動で電源が切れます(オートオフ)。(「ピッピッ」と音がなり、電源が切れます)。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

- 1 お肌を清潔な状態にします。
 - ・腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。
- 2 腕の内側に化粧品(ジェル・化粧水)または水を塗り、MOISTUREモードで約3分間製品を使用します。
 - ・プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。

- **注意**
- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
 - ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
 - ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

充電のしかた

本製品は充電池、またはACアダプターを接続しての使用ができます。

充電池で使用する場合は、必ず充電してから使用してください。

- 使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2.5時間	約40分

※充電環境 室温約25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です
※動作時間は使用モード・使用レベル・
　使用環境によって変わります
※電池の残量、使用環境によって、
　充電時間は前後します

●充電のしかた

- 1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
 - 必ず専用のACアダプターを使用してください。
 - ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
 - 充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。
- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

各モードについて


モード	特長	機能	推奨	時間	レベル	使用頻度(目安)
CLEAN	お肌の深部まで ^{※1} 温めながら、洗顔では落としきれない汚れを吸着し、すっきり肌に整えます。	・RF ・イオン ・グレンジング ・振動	RFブースターパッド ティーブクレンズ ^{※3} (またはコットン+お手持ちの化粧水 ^{※2})	約3分	イオン: 5段階	
MOISTURE	お肌の深部まで ^{※1} 温めながら、お肌の角質層まで美容成分を浸透させ、みずみずしいお肌に導きます。	・RF ・イオン ・モイスチャー ・振動		約3分	イオン: 5段階	週に 2~3回
EMS UP	お肌の深部まで ^{※1} 温めながら、筋肉を刺激し、ハリのあるお肌に整えます。 ※首や肩にもご使用になります。	・RF ・EMS	RFブースターパッド クリアティーブモイスチャー ^{※3} (水分が足りない場合はパウチに残った化粧液を継ぎ足してください。)	約3分	EMS: 5段階	
RF LED	お肌の深部まで ^{※1} 温めながら、お肌に光をあててケアします。	・RF ・LED(赤)		約3分	なし	
COOL	冷やすことでハリとキメの整ったお肌に導きます。	・冷却	そのままお肌に当ててください。	約3分	なし	毎日 でも可

- 各モードの動作時間はモード選択から約3分間です。
 - 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(COOLモード使用時以外)
 - CLEAN・COOLモード以外のコットンの有無は、お好みで選択していただいて問題ございません。
- ※COOLモード使用後は本体や電極ヘッドが熱くなります。連続で使用しないでください。
使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
- ※RF、LED、冷却のレベルは選択できません。
- ※1 角質層まで
- ※2 お手持ちの化粧品をお使いいただく場合は必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因になります。
- ※3 P.21参照

使いかた

コットンの付けかた

1 本体からコットンストッパーを外す。

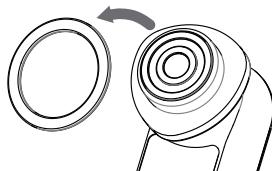

2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、薄手のコットンを使用してください。

※コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

※さらつとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧水……RF ブースターパッド(P.21)・とろみのある化粧水

※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

基本の使いかた

●使用上の注意

●必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

●RFは使用時のお肌の状態によって、温度の感じかたが変わります。

●まぶた(眼窩)、目のまわりは使用しないでください(COOLモード使用時以外)。

※RF LEDモードのLED光はまぶた(眼窩)、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

●RF LEDモードのLED光を直接のぞき込まない。

●必ず手元電極に触れるように持ってください。

●推奨環境温度15°C~30°C

●ケアのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
※COOLモードはメイクの上からでもご使用になります。

2 必要な場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。

3 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。モード、レベルを選択する。

・POWER/MODEボタンでモードを選択してください。
・LEVELボタンでレベルを選択してください。
※RFのレベルは選択できません。
※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

4 背面の手元電極(背面のシルバーの枠)に触れるように本体を持つ。

5 P.15~16を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

・各モードが終了すると約2分間スタンバイ状態(COOLモード終了時は電源オフ)になります。
POWER/MODEボタンを押して次のモードをスタートさせるか、POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにします。
※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりとお肌にあててください。

6 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

・COOLモード終了時は、自動で電源が切れます。

7 ケア終了後お肌を整える。

・適宜クリームなどを塗布してください。

8 コットンを外し、電極ヘッドやコットンストッパーに付いた汚れや化粧水やゲルを拭き取る。

※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

お肌へのあてかた

RFモードの使いかた

本体を動かすスピードの目安: 1秒間に2cm

※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。

また、コットンを使用すると熱さを防ぐことができます。

・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。

・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温などの原因となります。


・まぶた(眼窩)には電極ヘッドをあてないでください。

CLEAN・MOISTURE・RF LEDモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

RF LEDモードはまぶた(眼窩)にLED光をあててケアできます。

その際、RF ブースターパッド、またはコットンを外し目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。

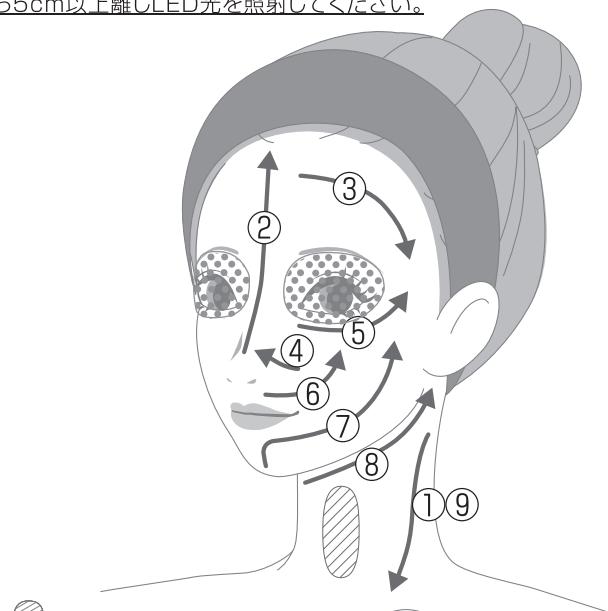


● 禁用部位

● LEDモードのLED光のみ使用可能な部位

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

<EMS UPモード>

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

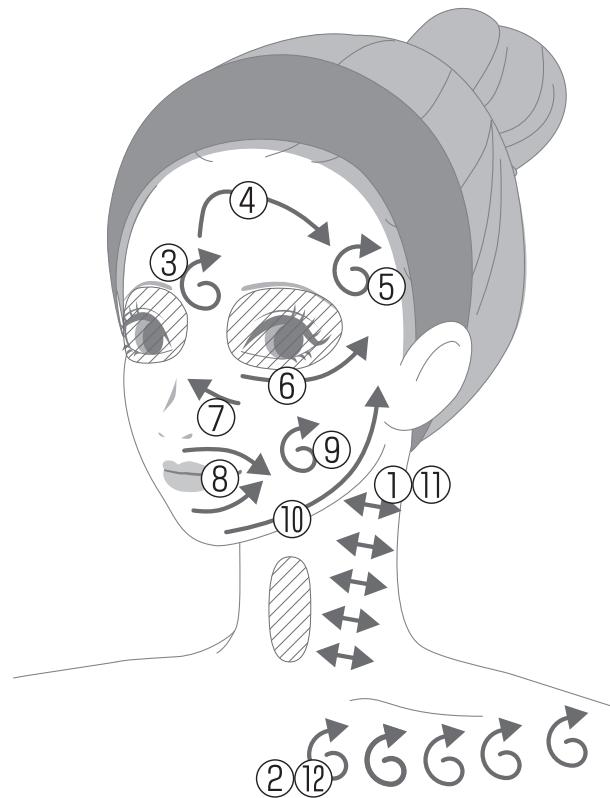

● 矢印のように
くるくる動かす

● 使用できない部位

<COOLモード>

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※まぶた(眼窓)にもご使用いただけます。

使い終わったら

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。

●お手入れ・保管のしかた

- 1 電源をオフにして、ACアダプターを外す。
- 2 電極ヘッドの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。コットンストッパーは水洗いする。
 - ・コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
 - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
 - ・化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。
- 3 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.18～P.19)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ POWER/MODEボタンを長押ししていない → 充電不足	→ POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにしてください → 充電をしてください またはACアダプターを接続して使用してください
充電しても数分しか使えない	→ 充電池が寿命(充電回数の目安:300回)を過ぎた → ボタンを間違えて押してしまった → スタンバイ状態/オートオフになっている	→ 販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください(P.21) ※故障の原因となるためお客様では交換できません → POWER/MODEボタンを長押しして再度電源をオンにしてください → POWER/MODEボタンを押してください(P.10)
充電が開始されない (充電表示が点滅しない)	→ ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない(タコ足配線など) → アダプタープラグが本体に差し込まれていない	→ ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください → アダプタープラグを本体に差し込んでください → LEVELボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押してリセットしてください 充電が開始される場合があります
本体が熱い	→ 連続使用した	→ 電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください

こんな症状

考えられる原因

処置方法

COOLモードで冷えない

→ COOLモードを連続使用した
→ 推奨環境温度以外で使用している

→ 電源をオフにして30分以上本体を休ませてください
→ 15℃～30℃の環境で使用してください

イオン・EMSが強い(ピリピリする・痛い)

→ 設定レベルが高い
→ 電極ヘッド全体がお肌にあたっていない

→ LEVELボタンでレベルを下げてください

→ 電極ヘッド全体をお肌にあててください

イオン・EMSが弱い(感じない)

→ 設定レベルが低い
→ お肌に水分が足りない

→ LEVELボタンでレベルを上げてください

→ お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください

→ 手を軽く湿らせてください

EMSを感じない

→ 筋肉に沿ってあてていない

→ 電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.16)

RFが熱い

→ 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けている

→ RF出力中は必ず動かしながらあててください

→ 動かすスピードが遅い

→ 少し速く動かしてください

→ コットンを使用していない

→ 熱さを防ぐためにコットンを使用してください

RFの熱さを感じない

→ スタンバイ状態/オートオフになった(P.10)

→ 電源を入れ直すか、POWER/MODEボタンを押してモードをスタートさせてください。

→ お肌に水分が足りないまたは乾燥している

→ お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください

→ 動かすスピードが速い

→ 少しゆっくり動かしてください

RFのレベルが変わらない

→ RFのレベルは変更できません(レベル切り換えはイオンとEMSのみ)

振動しない

→ CLEAN、MOISTUREのみ振動します

よくあるご質問

Q

A

化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか?

本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水やゲルでぬれるくらい使用してください。化粧水やゲルが少ないと感じたら付け足すことをお勧めします。

お風呂で使用できますか?

本製品は防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。

使用後にお肌がほてります

RFの温めによるものです。気になる場合はCOOLモード、保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。

顔や手にピリピリ感があります

イオンクレンジング・イオンモイスチャー・EMSによる電気刺激です。LEVELボタンでレベル調節が可能です。心地よいと感じる強さで使用してください。初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

CLEAN・MOISTURE・EMS UP・RF LEDモード使用時にRFの温まりを感じません

電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。また、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。RFはオンとオフを繰り返しています。表示部に **RF** と表示されているときにRFがオンしています。

コットンに汚れが付きません

目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。

RFで電極ヘッドが温まりません

RFは電極ヘッドを温めるのではなく、電気の力でお肌を温めるものです。

アフターサービス

●充電池について

- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。



●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282**(通話料無料)
受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
携帯電話・PHS **0570-550-637**(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

オススメの化粧品



RFブースターパッド ディープクレンズ

商 品 名: RFブースターパッド ディープクレンズ
内 容 量: 1箱あたりシート1種×15包セット(約1.5ヶ月～2ヶ月分)
品 番: YRF0003
单 品 価 格: ¥3,000(税抜)



RFブースターパッド クリアディープモイスチャー

商 品 名: RFブースターパッド クリアディープモイスチャー
内 容 量: 1箱あたりシート1種×15包セット(約1.5ヶ月～2ヶ月分)
品 番: YRF0004
单 品 価 格: ¥3,000(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.21)に
お問い合わせください。

WEBサイト www.ya-man.com

※予告なく販売を終了する場合があります。



●製品仕様

定 格	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約13W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	本体(コットンストッパー付):約W44×D57×H190(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約220g
材 質	本体:ABS樹脂 パネル:ポリカーボネート/アクリル樹脂 電極ヘッド:PET樹脂/銅(クロムメッキ) 手元電極:ABS樹脂(クロムメッキ)
生 産 国	日本
付 属 品	コットンストッパー、ACアダプター
推奨環境温度	15℃～30℃

●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。
- また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)に
ご相談ください。