

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	HRF-11-SE
形名	フォトプラス Smart		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ 期間: お買い上げ日から1年間		
店名・住所・電話 ※販売者名	<p>見 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p>本</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・捺印のお客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書を持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●既定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日・お買い上げ店舗がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・ 補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。・ 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)

www.ya-man.com

HRF11SE-4-001

YAMAN
TOKYO JAPAN

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器
フォトプラス Smart



HRF-11-SE

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
特長	7
各部のなまえ	7
ご使用の前に	9
使いかた	15
スマートレンズの使いかた	20
使い終わったら	23
こんなときには	24
アフターサービス	29
●製品仕様	30
●保証について	30
保証書	31

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電子機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

禁止

禁止



警 告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患
- 発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患
- 内臓疾患・皮膚病・アレルギー体质・アトピー性皮膚炎
- 皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
- 敏感肌またはお肌の弱い人・体調がすぐれない人
- 酒気帯びの人・妊娠中・生理中・授乳中
- 眠気をさそう薬を服用中の人は
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人
- 過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 目や顔の手術を行った人・目や顔に疾患のある人および治療中の人は
- 強度近視の人(-6D以上)



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 切り傷・手術(整形手術を含む)をした部位・口内や陰部、粘膜など
- にきび・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやほてりのある部位
- まぶた(COOLモード使用時以外)、
目のまわり(EYE CARE、COOLモード使用時以外)
※LED光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、
電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。LED光は直接のぞき込みないでください。

ご自分で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

同じ箇所にあて続けない。
必ずお肌の上のを動かしながら
使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。

やけど・低温やけどの原因
となります。



禁止

火中投入・加熱・高温での
充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因と
なります。



禁止

子供の手の届かない場所に
保管し、使わせない。

使用者の制限

事故やケガをする原因と
なります。



禁止

取扱説明書に記載されている
用途以外には使用しない。
ケガをしたり、本製品が故障
する原因となります。

警告

-  禁止
引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。火災・感電・ケガの原因となります。
-  タコ足配線 禁止
本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。
-  使用者の制限
自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。事故・ケガの原因となります。
-  異臭・異常発熱時 使用禁止
異臭・異常発熱したときは使用を中止する。破損・発火の原因となります。
-  必ず守る
アダプタープラグやプラグ差込み口に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火の原因となります。
-  無理な扱い 禁止
ACアダプターを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、ACアダプターが破損し、火災・感電の原因となります。
-  傷んだコードプラグ 使用禁止
ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
-  水場使用 禁止
本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。(水につけたり、洗つたりしない)また、水場・浴室・入浴時に使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。
-  分解禁止
分解や修理・改造はしない。火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
-  必ず守る
使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。感電・ショート・発火の原因となります。

- ## 警告
-  必ず守る
交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ) ACアダプターは根元まで確実に差し込む。火災・感電・事故の原因となります。
-  ACアダプター を抜く
使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。感電・ショート・発火の原因となります。
-  ACアダプター を抜く
万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。
-  プラグ を抜く
本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。
-  発火注意
火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。また、熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂の原因となります。

- ## 注意
- 以下の項目は行わない。
事故・ケガ・故障の原因となります。
- お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
 - 落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
 - 業務用等、過剰な連続使用をしない。
-  禁止
LED光を直接のぞき込まない。
LED光で目のまわり、まぶたへのケアをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。
目やお肌を傷める原因となります。

海外でのご使用について



注意



本体をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



電極ヘッドを金属にあてない。
故障・ケガの原因となります。



COOLモードを連続して使用しない。

連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。

再度使用する時は30分以上間をあけてから使用してください。



歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調節する。

必ず守る

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、イオン・EMSの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。イオン・EMSのレベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。



以下の項目は必ず守る。

事故・ケガ・故障の原因となります。

- ・同じ箇所にあて続けない。
- ・お肌の状態にあわせて使用する。
- ・日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源をオフにする。



使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。



初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故・ケガの原因となります。



警告



必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ず確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

特長

本製品は、RF深層温熱(以下RF)でお肌を温めながら、イオンクレンジング、イオンモイストチャー、マイクロカレント、EMS、振動、フォト、冷却でケアするフェイス用美容器です。ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各モードを組み合わせ、ケアすることができます。


- RF…お肌を深部^{※1}まで温めることで、よりケアに適した状態にすることができます。
- イオンクレンジング… 洗顔では落としきれない汚れを、イオンの力で吸着することができます。
- イオンモイスチャー… イオンの力で化粧水をお肌に浸透^{※1}させることができます。
- マイクロカレント… 微弱電流で目もとをケアします。
- EMS… 電気の力で筋肉を刺激することができます。
- 振動… 細かなバイブレーションにより、ケアをサポートします。
- フォト… お肌にLED光をあてることでケアします。
- 冷却… お肌を冷やすことで、お肌を引き締めることができます。
- スマホ連動… 付属のスマートレンズを使用して専用アプリで肌測定すると、お肌の状態に合わせたおすすめコースでケアすることができます。^{※2}

※1 角質層まで

※2 iOSのみ

各部のなまえ

●本体

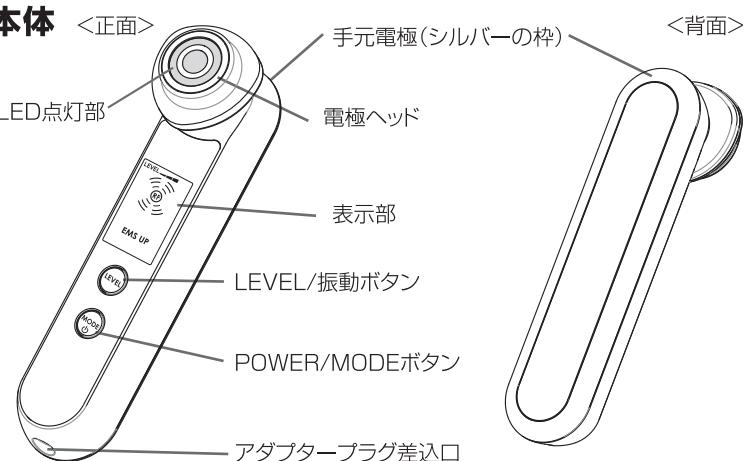


各部のなまえ

【付属品】

●コットンストッパー (シルバーリング)

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。
※コットンを電極ヘッドに固定できます。

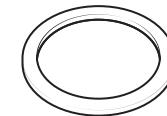

●スマートレンズ




※iPhone専用(Androidスマートフォンには対応していません)


●スマートレンズ 専用ゴム

※お使いのスマートフォンに適した専用ゴムを取り付けてから使用してください。
※専用ゴムの詳細は「専用ゴムの取り付け方について」(別紙)を参照してください。

●ACアダプター

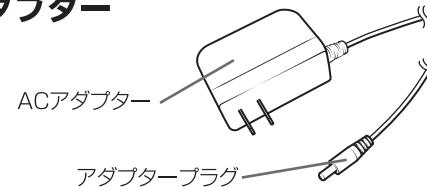

●USBケーブル(スマートレンズ用)

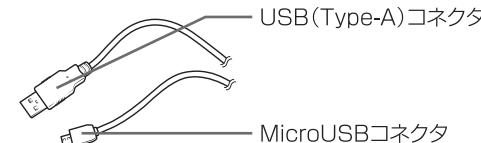

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。


特長／各部のなまえ

8

ご使用の前に

表示部の見かた

●表示部・ボタン

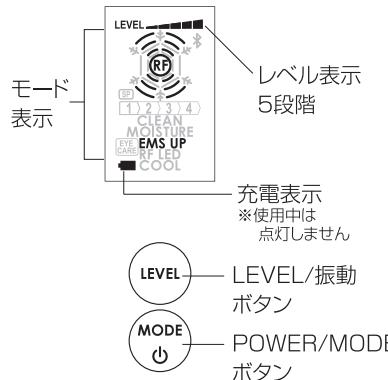

- POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにします。
(SPモードのスタンバイ状態になります。)
- 各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
ただし、SPモード動作時は、開始/停止を切り替えます。
- SP·CLEAN·MOISTURE·EMS UPモードではレベルを選択することができます。レベルは5段階あり、LEVEL/振動ボタンで選択することができます。
※EYE CARE、RF LED、COOLモードのレベルは選択できません。
- LEVEL/振動ボタンを約3秒長押しすると、振動のオン/オフを選択することができます。
※SPモード時は振動のオン/オフが選択できません。
- POWER/MODEボタンを約3秒長押しすると電源オフになります。

●モード表示

POWER/MODEボタンを押すと、SP→CLEAN→MOISTURE→EYE CARE→EMS UP→RF LED→COOL→SP(繰り返し)…
の順にモードが切り替わります。

モード	SP	CLEAN	MOISTURE	EYE CARE	EMS UP	RF LED	COOL
機能	お肌の状態によって異なる (P.13 参照)	RF/振動/ イオンクレンジング	RF/振動/ イオンモイスチャー	マイクロ カレント	RF/EMS	RF/ LED (赤)	冷却/ LED (青)
モード表示	SP	LEVEL 	LEVEL 		LEVEL 		

※CLEAN·MOISTURE·EMS UPモードのお手入れ時にモード表示のは表示・非表示を繰り返します。「ピッ」という音がするとRFが動作します(モード表示のが表示)。
「ピピッ」という音がするとイオンまたはEMSが動作します(モード表示のは非表示)。

●レベル表示


LEVEL/振動ボタンを押すとレベルを選択できます。

心地よいと感じるレベルを選んでください。

LEVEL/振動ボタンを押すたびにレベルが切り替わります。

※EYE CARE、RF LED、COOLモードのレベルは選択できません。

※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

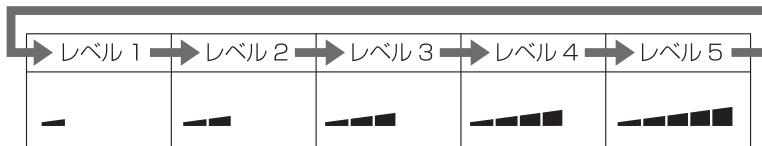


●充電表示

充電中は充電表示が点滅します。

充電が完了すると充電表示が点灯します。

※使用中は点灯しません。

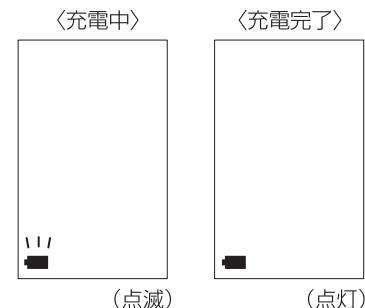

●振動機能

CLEANモード、MOISTUREモード使用時にLEVEL/振動ボタンを約3秒長押しすると、振動のオン/オフを選択することができます。

※振動のリズムは自動的に切り替わります。

※SPモード時は振動のオン/オフができません。

●スタンバイ表示・オートオフ(自動電源オフ)

CLEAN・MOISTURE・EYE CARE・EMS UP・RF LEDモードが終了すると、次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態となります(動いていない状態です)。

※POWER/MODEボタンを押すと、点滅表示しているモードがスタートします。

※約2分間操作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。

※COOLモード終了時は、スタンバイにはならずに「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。

[SPモード]

- SPモード開始時、および各ステップが終了するたびに次のステップ表示が点滅します(スタンバイ状態)。次のステップへの切り替え時は「ピッピッ」と音がなります。
- SPモード終了時は、スタンバイにはならずに「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。
- 約10分間操作しないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。

[スマートレンズ]

電源を入れてから約30分経過すると、自動で電源が切れます(オートオフ)。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

1 お肌を清潔な状態にします。

- 腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。

2 腕の内側に化粧品(ゲル・化粧水)または水を塗り、 MOISTUREモードで約3分間製品を使用します。

- プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



注意

- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

本体の充電のしかた

本製品は充電式で、コードレスでの使用またはACアダプターを接続しての使用ができます。コードレスで使用する場合は、必ず充電してから使用してください。

- 使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2.5時間	約40分

※充電環境 室温約25℃において
※満充電直後の動作時間です。
※動作時間は使用モード・使用レベル
使用環境によって変わります。
※電池の残量、使用環境によって、
充電時間は前後します。

●充電のしかた

1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。

2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

- 必ず専用のACアダプターを使用してください。
- ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
- 充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。

3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、 アダプタープラグを本体から抜く。

各モードについて

モード	特長	機能	推奨	時間	レベル	使用頻度(目安)
SP 表示: SP	肌測定時のお肌の状態に合わせたおすすめコースが自動で選択されます。	RF・イオンクレンジング・イオンモイスチャーチャー・EMS・振動・LED・冷却のいずれかが自動で選択されます。	—	—	—	週に2~3回
CLEAN 表示: CLEAN	洗顔では落としきれない汚れを吸着し、すっきり肌に整えます。	・RF ・イオンクレンジング ・振動	RFブースターパッド毛穴ディープクレンズ ^{※3} (またはコットン+お手持ちの化粧水 ^{※2})	約3分	イオン:5段階	週に2~3回
MOISTURE 表示: MOISTURE	お肌の角質層まで美容成分を浸透させ、みずみずしいお肌に導きます。	・RF ・イオンモイスチャーチャー ・振動		約3分	イオン:5段階	週に5回
EYE CARE 表示: MOISTURE <small>[EYE CARE]</small>	マイクロカレントの微弱電流で目もとにハリをあたえながらケアします。	・マイクロカレント	RFブースターパッドクリアディープモイスチャーチャー ^{※3} (水分が足りない場合はパウチに残った化粧液を継ぎ足してください。)	約2分	なし	週に5回
EMS UP 表示: EMS UP	筋肉を刺激し、ハリのあるお肌に整えます。 ※首や肩にもご使用になります。	・RF ・EMS		約3分	EMS:5段階	週に2~3回
RF LED 表示: RF LED	お肌の深部まで ^{※1} 温めながら、お肌に光(赤)をあててケアします。	・RF ・LED		約3分	なし	週に2~3回
COOL 表示: COOL	冷却と光(青)によりハリとキメの整ったお肌に導きます。	・冷却 ・LED	そのままお肌に当てください。	約3分	なし	毎日でも可


- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)
- CLEAN・COOLモード以外のコットンの有無は好みで選択していただいて問題ありません。
- ※COOLモード使用後は本体や電極ヘッドが熱くなります。連続で使用しないでください。
使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
- ※EYE CARE、RF LED、COOLのレベルは選択できません。
- ※1 角質層まで
- ※2 必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。
- ※3 P.29参照

●SPモード

SPモードでは、肌測定時のお肌の状態に合わせたおすすめコースでのケアができます。専用アプリから本体へおすすめコースを送信すると、SPモードでのケアがStep1から開始されます。

開始手順

- 1 電源をONになると「SP」と表示され、SPモードのスタンバイ状態になります。
- 2 スマートフォンのBluetoothをオンにします。
- 3 おすすめコース画面のBluetoothマークが「＊接続」になったことを確認し、本体にBluetoothマークが表示されたことを確認してから、アプリでおすすめコースを送信します。
- 4 化粧水などの準備を整え、美顔器のPOWER/MODEボタンを押して、Stepをスタートします。
ひとつのStepが終了すると、次のStepのスタンバイ状態になります。
- 5 すべてのStepでケアを行うと、おすすめコースが完了し、自動で電源が切れます(オートオフ)。

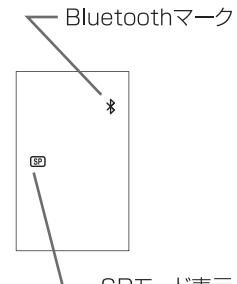


※おすすめコースや肌測定など、スマートレンズとアプリの使いかたについては、『アプリクイックガイド』を参照してください。

使いかた

コットンの付けかた

1 本体からコットンストッパーを外す。

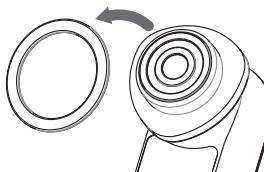

2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、薄手のコットンを使用してください。

※コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

※さらっとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧水 …… RFブースターパッド・とろみのある化粧水

※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

基本の使いかた

●使用上の注意

●必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

●RFは使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温度の感じかたが変わります。

●まぶた、目のまわりは使用しないでください(EYE CARE・COOLモード使用時以外)。

※LED光はまぶた、目のまわりに照射できます。

その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

●LED光を直接のぞき込まないでください。

●必ず手元電極に触れるように持ってください。

●推奨環境温度15°C~30°C

●ケアのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※COOLモードはメイクの上からでもご使用になります。

2 必要な場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。

※CLEANモードではコットンの使用を推奨しております。

コットンをご使用にならない場合は、CLEANモード終了後にお水または化粧水を含ませたコットンでお肌を拭き取ってください。

3 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。モード、レベル、振動を選択する。

・POWER/MODEボタンでモードを選択してください。

・LEVEL/振動ボタンでレベルを選択してください。

・LEVEL/振動ボタンを約3秒長押しし、振動のオン/オフを選択してください。(振動がないモードもあります。)

※EYE CARE、RF LED、COOLモードのレベルは選択できません。

※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

※SPモードについては、「SPモード」(P.14)、および『アプリケイクガイド』を参照してください。

4 背面の手元電極(背面のシルバーの枠)に触れるように本体を持つ。

5 P.17~18を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

・各モードが終了するとスタンバイ状態(約2分間)になり、POWER/MODEボタンを押すと次のモードがスタートします。(COOLモード、およびSPモードの終了時は、自動的に電源がオフになります。)

※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりとお肌にあててください。

6 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

7 ケア終了後お肌を整える。

・適宜クリームなどを塗布してください。

※使用後は毎回本体のお手入れをしてください。(P. 23参照)

お肌へのあてかた

CLEAN・MOISTURE・EMS UP・RF LEDモードの基本的な使いかた

本体を動かすスピードの目安：1秒間に約2cm

※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。


- 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温などの原因となります。
- まぶた、目のまわりには電極ヘッドをあてないでください。

CLEAN・MOISTURE・RF LEDモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

RF LEDモードはまぶた、目のまわりにLED光をあててケアできます。

その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。

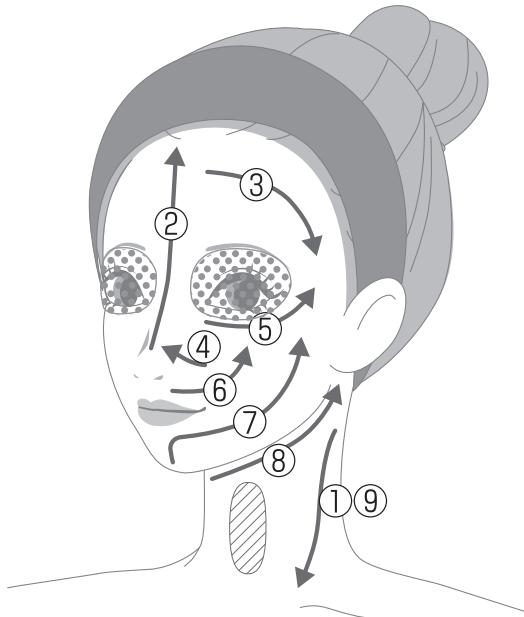


● 使用できない部位

● RF LEDモードのLED光のみ使用可能な部位

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

<EMS UPモード>

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

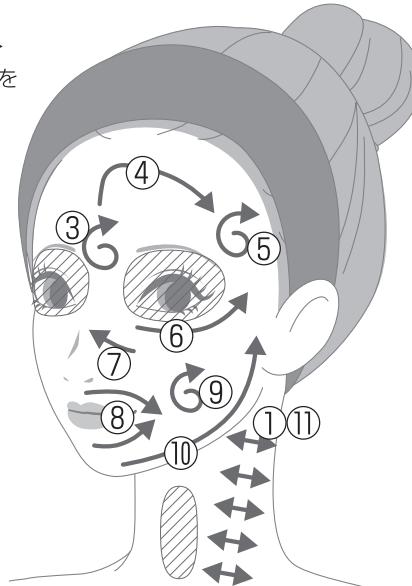

● 矢印のように
くるくる動かす

● 使用できない部位




<EYE CAREモード>

頭から目尻に向かってスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。上まぶたは避けてください。押しあて時間の目安は約3秒です。

※目もと(下まぶた、目尻)には使用可

※押しあてながら動かさないでください。

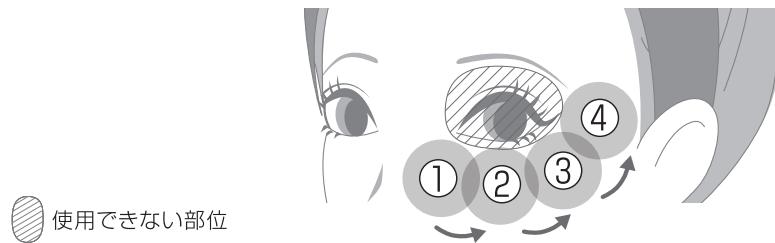

<COOLモード>

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※まぶた、目のまわりにもご使用いただけます。

※まぶたにあてる際には、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。


◆気になるところに3分間の集中ケア

朝のメイク前や、時短ケアにおすすめの、気軽に3分でできるケアをご紹介します。

●目もと EMS UPモード

RFの温めとEMSの筋肉刺激で、
目もとをスッキリさせます。

※お手入れ時間
片目:1分30秒

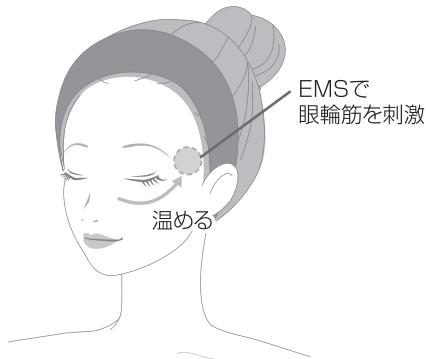

●口もと EMS UPモード+RF LEDモード

EMS UPモードで気になるライン
の筋肉を刺激し、RF LEDモードで
お肌のハリをアップします。


※お手入れ時間
片方:EMS UP 1分
RF LED 30秒



スマートレンズの使いかた

スマートレンズを使用して、専用アプリで肌測定をすると、お肌の状態に合わせたおすすめのモードでケアすることができます。(SPモード)

ここでは、スマートレンズの充電方法や取り付けかたなどを説明します。スマートレンズを使用したアプリの使いかたについては、『アプリクイックガイド』を参照してください。

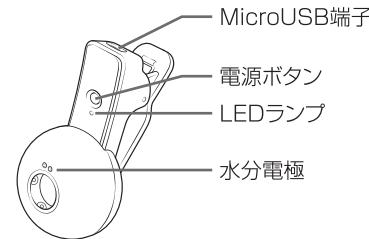

●LEDランプ表示

スマートレンズの動作によって、LEDランプの色が変わります。

- ・緑点灯:電源オン
- ・青点灯:Bluetooth接続中
- ・赤点灯:充電中(赤点滅5回:充電残量なし)
- ・赤点滅5回:充電残量なし

●充電のしかた

初めてご使用になるときは、必ず充電してから使用してください。

充電時間の目安:約2時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。

1 スマートレンズのMicroUSB端子に、USBケーブルのMicroUSBコネクタを差し込む。

2 パソコン等のUSBポートにUSBコネクタを接続する。

- ・LEDランプが赤点灯して、充電が開始されます。
- ・充電が完了すると、LEDランプが消灯します。

※壁面コンセントを使用して充電する場合は、お手持ちのUSB充電器に接続してご使用ください。

●スマートレンズの取り付けかた


※スマートフォンのケースカバーを外してから取り付けてください。

※お使いのスマートフォンに適した専用ゴムを取り付けてから使用してください。


1 iPhoneとスマートレンズの向きと位置を合わせる。

iPhoneの外カメラに、iPhoneカメラ装着部を合わせます。

※両方のレンズの中心が合うように、合わせてください。

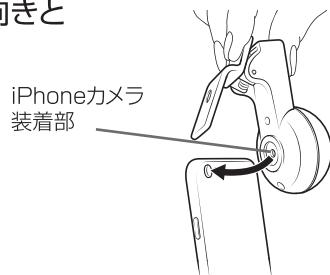

2 クリップでスマートレンズを固定する。

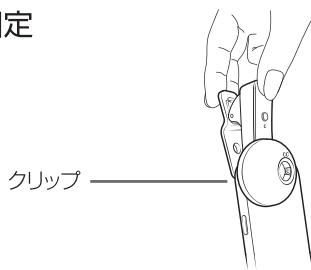

測定の不確かさについて

本製品による測定については以下の要件により、測定結果にばらつきの発生する場合がありますのでご了承ください。

- ・測定ポイントの曖昧さ(目尻と鼻が交差する点)
- ・化粧水の有無や皮脂が拭き取れてない場合(環境条件の影響)
- ・iPhoneカメラ精度によるばらつき(測定装置の分解能の限界)
- ・測定部屋の温湿度など(外部からの情報の値の不正確さ)

●お手入れのしかた


・スマートレンズのお肌に触れる部分と水分電極は、乾いた布で拭き取ってください。濡れたり、汚れたりした状態で使用すると、適切な肌測定ができません。

※水分電極付近に化粧水などが残っていると、肌測定の結果に影響する場合があります。

・撮影画像の写りが悪くなったり、ゴミが気になる場合は、市販のカメラ用ブロアー(ほこりを吹き飛ばす道具)で清掃を行ってください。

※アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

※レンズを直接綿棒などで拭いたりしないでください。キズがつく原因となり、正しく測定できなくなる場合があります。

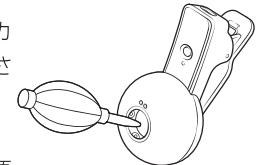

アプリのインストールのしかた

付属のスマートレンズを使用して肌測定をしたり、肌測定の結果によるおすすめコースでのお手入れをするには、スマートフォンにアプリをインストールする必要があります。以下の手順でアプリのインストールを行ってください。

※Androidには対応していません。

1 App Storeでアプリを検索し、ダウンロードする。

「FotoPlusSmart」を検索してください。

アプリが使用できるようになると、アイコンが追加されます。



2 アプリを開き、画面の指示に従ってユーザー登録をする。

以降の操作については、『アプリクイックガイド』を参照してください。

※アプリの初回起動時にユーザー登録を完了しないと、アプリを使用できません。

※アプリの新規登録時は、スマートフォンが通信圏内であることを確認してから登録してください。

※登録内容を変更する場合は、アプリを削除し、再度インストールしてください。

アプリを削除すると、履歴も削除されますので、ご注意ください。

使い終わったら

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。

●お手入れ・保管のしかた

- 1 電源をオフにして、ACアダプターを外す。
- 2 電極ヘッドの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。コットンストッパーは水洗いする。
 - ・コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
 - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
 - ・化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。
- 3 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.24～P.25)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.29)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときは

困ったときは

☆…スマートレンズ

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ POWER/MODEボタン（☆電源ボタン）を長押ししていない	→ POWER/MODEボタン（☆電源ボタン）を約3秒長押しして電源をオンにしてください
充電しても数分しか使えない	→ 充電不足 → 充電池が寿命（充電回数の目安：300回）を過ぎた → ボタンを間違えて押してしまった → スタンバイ状態/オートオフになっている（P.11）	→ 充電をしてください またはACアダプターを接続して使用してください → 販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください（P.29） ※故障の原因となるためお客様では交換できません → POWER/MODEボタンを長押しして再度電源をオンにしてください → POWER/MODEボタンを押してください（P.11）
充電が開始されない （充電表示が点滅しない）	→ ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない（タコ足配線など） → アダプタープラグが本体に差し込まれていない	→ ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください → アダプタープラグを本体に差し込んでください
本体が熱い	→ 連続使用した	→ 電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください

こんな症状

考えられる原因

処置方法

COOLモードで冷えない

→ COOLモードを連続使用した
→ 電源をオフにして30分以上本体を休ませてください

イオン・EMSが強い(ピリピリする・痛い)

→ 推奨環境温度以外で使用している
→ LEVEL / 振動ボタンでレベルを下げてください

イオン・EMSが弱い(感じない)

→ 設定レベルが高い
→ 電極ヘッド全体をお肌にあたっていない

→ 設定レベルが低い
→ LEVEL / 振動ボタンでレベルを上げてください

EMSを感じない

→ 筋肉に沿ってあてていない
→ 電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.18)

RFが熱い

→ 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けている
→ RF出力中は必ず動かしながらあててください

→ 動かすスピードが遅い
→ 少し速く動かしてください
温かさの感じ方には個人差があります
→ 使用時間を短くしてください

RFの熱さを感じない

→ スタンドバイ状態/オートオフになった(P.11)
→ 電源を入れ直すか、POWER/MODEボタンを押してモードをスタートさせてください。

→ お肌に水分が足りないまたは乾燥している
→ お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください

→ 動かすスピードが速い
→ 少しゆっくり動かしてください

LED、COOLのレベルが変わらない

→ レベル切り換えはイオンとEMSのみです

振動しない

→ SP、CLEAN、MOISTUREモードのみ振動します
LEVEL / 振動ボタンを約3秒長押ししてください(CLEAN・MOISTUREモードのみ)

よくあるご質問

Q

A

化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか?

本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。
目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水やゲルでぬれるくらい使用してください。
ゲルはパール粒2つ分程度使用してください。
化粧水やゲルが少ない感じたら付け足すことをお勧めします。

お風呂で使用できますか?

本製品は防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。

使用後にお肌がほてります

RFの温めによるものです。
気になる場合はCOOLモード、保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。

顔や手にピリピリ感があります

イオン・EMSによる電気刺激です。
LEVEL / 振動ボタンでレベル調節が可能です。心地よいと感じる強さで使用してください。
初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

CLEAN・MOISTURE・EMS UP・RF LEDモード使用時にRFの温まりを感じません

電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。
また、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。
RFはオンとオフを繰り返しています。表示部に  と表示されているときにRFが動作します。

EYE CAREモードの体感がありません

マイクロカレントはほとんど刺激を感じません。
化粧水やゲルが足りない、押し当てる時間が短い、コットンが厚いと、温熱の体感を得にくくなります。

コットンに汚れが付きません

目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。

RFで電極ヘッドが温まりません

RFは電極ヘッドを温めるのではなく、電気の力でお肌を温めるものです。

Bluetoothがつながりません

スマートフォンのBluetooth機能がONになっていることを確認してください。
・本体…SPモードになっていることを確認してください。
・スマートレンズ…電源がONになっていることを確認してください。

Q	A
アプリを使用するとどのようなことができるですか？	付属のスマートレンズを使用することで、ご自身の肌測定することができます。肌測定の結果は、アプリからお肌のキメやシミなどが写真とグラフで確認できます。また、肌測定時のお肌の状態に合わせたケアをおすすめし、本体に送信することでおすすめコースによるお手入れができます。 スマートレンズを使用したアプリの詳細については、『アプリクイックガイド』を参照してください。
アプリが起動できないのですが	アプリの初回起動時にユーザー登録を完了しないと、アプリを使用できません（『アプリクイックガイド』参照）。 ※アプリの新規登録時は、スマートフォンが通信圏内であることを確認してから登録してください。
アプリの肌測定ができません	スマートフォンとスマートレンズのBluetooth通信が確立されていないと、肌測定ができません。 スマートフォンのBluetooth機能とスマートレンズの電源をオンにしてアプリを使用してください（『アプリクイックガイド』参照）。 また、水分電極がお肌に触れていることを確認してください。
アプリからおすすめコースを送信できません	アプリからおすすめコースを送信するには、本体とスマートフォンが以下の状態であることを確認してください。 ・本体が「SPモード」になっていること ・スマートフォンのBluetooth機能がオンになっていること SPモードの設定については、「SPモード」（P.14）を参照してください。

Bluetooth® 機能について

●本製品は、Bluetooth 機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。

●Bluetooth 機能を使用した通信にデータや情報の漏えいが発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本製品は、2.4GHz 全帯域（2,402MHz～2,480MHz）で使用できます。変調方式は周波数変調を採用し、主搬送波を変調する信号の性質は、副搬送波を使用しないデジタル信号の単一チャネルです。伝送情報の型式は、データ伝送・遠隔測定・遠隔指令に該当します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

●Bluetooth 機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、ヤーマンコールセンター（P.29）までお問い合わせください。

●本製品およびすべての Bluetooth 機能搭載機器は、Bluetooth SIG が定めている方法で Bluetooth 標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

●本製品についてのご注意


改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

●電波に関わるご注意

国や地域によって、法律により Bluetooth 機能が使用できない場合があります。ご購入された国や地域以外の使用については、各国および地域の当局に確認ください。

商標

- ・ Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, inc. が所有する登録商標であり、ヤーマン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- ・ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
- ・ Android は Google LLC の商標です。
- ・ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づいて使用しています。
- ・ App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

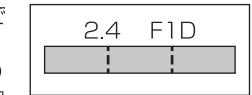

アフターサービス

●充電池について

- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.29)にご相談ください。

●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



●日本国内からのお問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など
受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) 0120-776-282(通話料無料)
携帯電話・PHS 0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

オススメの化粧品



RFブースターパッド 毛穴ディープクレンズ

商品名: RFブースターパッド 毛穴ディープクレンズ
内容量: 1箱あたりシート1種×15包セット(約1.5ヶ月～2ヶ月分)
品番: YRF0003
単品価格: ¥3,000(税抜)



RFブースターパッド クリアディープモイスチャー

商品名: RFブースターパッド クリアディープモイスチャー
内容量: 1箱あたりシート1種×15包セット(約1.5ヶ月～2ヶ月分)
品番: YRF0004
単品価格: ¥3,000(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.29)にお問い合わせください。

WEBサイト www.ya-man.com

※予告なく販売を終了する場合があります。



●製品仕様

定 格	本体:DC9V 2.0A スマートレンズ:DC5V 0.5A
消 費 電 力	本体:約13W スマートレンズ:約1.0W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	本体:約2.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。 スマートレンズ:約2時間
外 形 尺 法	本体(コットンストッパー付):約W44×D57×H190(mm) スマートレンズ:約W45×D59×H83(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約220g スマートレンズ:約40g
材 質	・本体 ABS樹脂/ポリカーボネート/アクリル樹脂 電極ヘッド:PET樹脂/黄銅(クロムメッキ) 手元電極:ABS樹脂(クロムメッキ) ・スマートレンズ ABS樹脂/ポリカーボネート 水分電極:黄銅(クロムメッキ)
生 産 国	日本
付 屬 品	コットンストッパー、スマートレンズ、スマートレンズ 専用ゴム、ACアダプター、USBケーブル
推奨環境温度	15°C～30°C

●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品・付属品は除く)。
- また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.29)にご相談ください。