

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	HRF-20L
形名	フォトプラス EX スムース		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ		期間: お買い上げ日から1年間
店名・住所・電話 ※販売者名	見本 ご購入の際も明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印のお客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定印欄が空欄のままだつたりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変・公害や異常電圧による故障および損傷。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ (<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>) をご参照ください。

利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正當な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

HRF20L-1-001

YAMAN
TOKYO JAPAN

保管用

保証書付

取扱説明書

家庭用美容器
フォトプラス EX スムース

HRF-20L



もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
特長	7
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
使いかた	13
使い終わったら	17
こんなときには	18
アフターサービス	21
●製品仕様	21
●保証について	22
保証書	23

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。



禁止

医用電気機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電気機器を使用している人

- ベースメーカーなど体内植込式医用電気機器
- 人工心肺など生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器



警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- 医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患
- 結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患
- 悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質
- アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
- 体調がすぐれない人・酒気帯びの人
- 妊娠中、生理中、授乳中・眠気をさそう薬を服用中の
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人
- 過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患のある人、および治療中の
- 強度近視の人(-6D以上)



禁止 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷・手術(整形手術を含む)をした部位・美容施術をした部位
- 口内や陰部、粘膜など・にきび
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・力ヨミやほてりのある部位
- 膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球
- まぶた(COOLモード使用時以外)、

目のまわり(EYE CARE, COOLモード使用時以外)

※RF LEDモードのLED光はまぶた、目のまわりに照射できます。 その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。LED光は直接のぞき込まないでください。

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

同じ箇所にあて続けない。
必ずお肌の上を動かしながら
使用する。ヘッド面全体があ
たらない部分に使用しない。
やけど・低温やけどの原因
となります。



禁止

火中投入・加熱・高温での
充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内
蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因と
なります。



使用者の制限

子供の手の届かない場所に
保管し、使わせない。
事故やケガをする原因と
なります。



用途以外 禁止

取扱説明書に記載されている
用途以外には使用しない。
ケガをしたり、本製品が故障
する原因となります。



警告

禁止	引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。火災・感電・ケガの原因となります。
タコ足配線 禁止	本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。
使用者の制限	自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。事故やケガをする原因となります。
異臭・異常発熱 禁止	異臭・異常発熱したときは使用を中止する。破損・発火の原因となります。
必ず守る	アダプタープラグやプラグ差込み口に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火の原因となります。
無理な扱い 禁止	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
傷んだコード プラグ 使用禁止	ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
水場使用 禁止	本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。(水につけたり、洗ったりしない)また、水場・浴室内・入浴時に使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。
分解禁止	分解や修理・改造はしない。火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
必ず守る	使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。感電・ショート・発火の原因となります。



警告

必ず守る	交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)ACアダプターは根元まで確実に差し込む。火災・感電・事故の原因となります。
ACアダプターを抜く	使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。
発火注意	火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。また、熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂の原因となります。



注意

禁止	以下の項目は行わない。 事故やケガ、本体が故障する原因となります。 ・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。 ・落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。 ・業務用等、過剰な連続使用をしない。
禁止	RF LEDモードのLED光を直接のぞき込まない。LED光で目のまわり、まぶたへのケアをするとときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。目やお肌を痛める原因となります。

海外でのご使用について



注意



本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



電極ヘッドを金属にあてない。
故障・ケガの原因となります。

禁 止



ペットには使用しない。
ケガの原因となります。



不安定な場所に置かない。
本体を落としたり、ぶつけたりしない。



本体の故障原因となります。
また、足の上などに落とすとケガの原因となります。



COOLモードを連続して使用しない。

連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。

必ず守る



歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調節する。

必ず守る

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人はイオン・EMSの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。イオン・EMSのレベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。



敏感肌またはお肌の弱い人は、以下を守りながら使用する。

必ず守る

使用前は必ずプレテストを行い、お肌に合うイオン・EMSレベルを確認してください。
また必ずお肌の上を動かしながら使用し、強く擦りつけないでください。



以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

必ず守る

- ・同じ箇所にあて続けない。
- ・お肌の状態にあわせて使用する。
- ・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源を切る。



使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

必ず守る

使用中、使用後にお肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師にご相談ください。



初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

必ず守る

事故やケガをする原因となります。



警告



必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

特長

本製品は、RF深層温熱(以下RF)でお肌を温めながら、イオンクレンジング、イオンモイスチャーラー、マイクロカレント、EMS、振動、フォト、冷却でケアを行うフェイス用美容器です。ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各モードを組み合わせ、ケアを行うことができます。


- RF…お肌を深部^{※1}まで温めることで、よりケアに適した状態にすることができます。一般的なヒーターと違い、すぐに温まることが特長です。
- イオンクレンジング…イオンの力で、洗顔では落としきれない汚れを吸着することができます。
- イオンモイスチャーラー…イオンの力で化粧水をよりお肌に浸透^{※1}させることができます。
- アイケア…マイクロカレントの微弱電流で目もとをケアします。
- EMS…中周波×低周波のダブル波で深層表情筋^{※2}まで刺激することができます。
- 振動…細かなバイブレーションにより、ケアをサポートします。
- フォト…お肌にLED光(赤色)をあてることでケアします。
- 冷却…お肌を冷やすことで、お肌を引き締めることができます。

※1角質層まで

※2表情筋の一部(しゅうじゆう筋、側頭筋、口角挙筋、翼突筋、頬筋、オトガイ筋)を表した造語です。

各部のなまえ

●本体

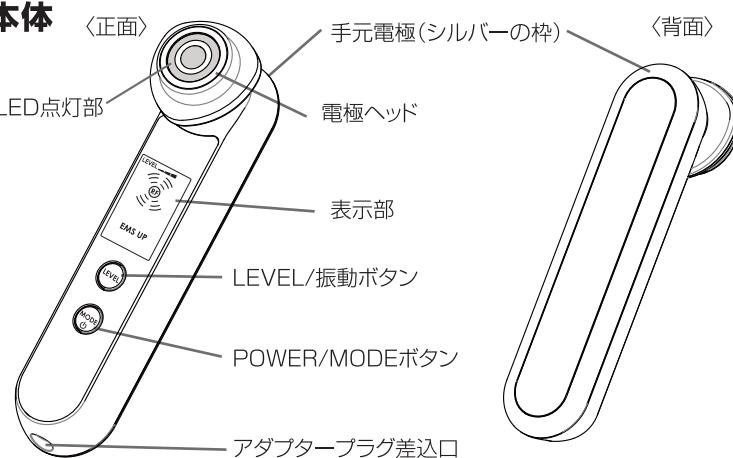


●コットンストッパー


(シリバーリング)

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。

※コットンを電極ヘッドに固定できます。

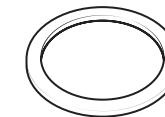

●ACアダプター

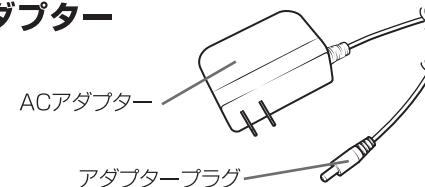


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

表示部の見かた


●表示部・ボタン

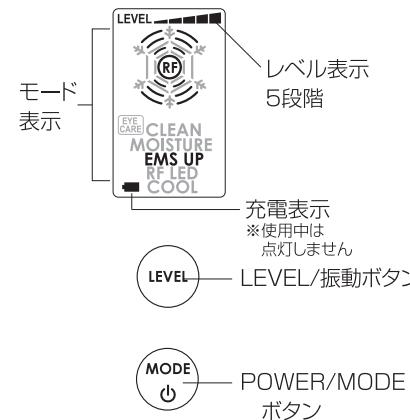


- POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにします。
(自動的にCLEANモードが開始します。)
- 各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
- CLEAN・MOISTUREモードではイオン、EMS UPモードではEMSのレベルを選択することができます。レベルは5段階あり、LEVEL/振動ボタンで選択することができます。
- CLEAN・MOISTUREモードではLEVEL/振動ボタンを約3秒長押しして振動をオン/オフにすることができます。
- POWER/MODEボタンを長押しすると電源オフになります。
- ※EYE CARE・EMS UP・RF LED・COOLモードでは振動しません。
- ※EYE CARE・RF LED・COOLモードはレベル選択はできません。
- ※RFのレベルは選択できません。

●モード表示

POWER/MODEボタンを押すと、
CLEAN→MOISTURE→EYE CARE→EMS UP→RF LED→COOL→CLEAN(繰り返し)…の順にモードが切り替わります。

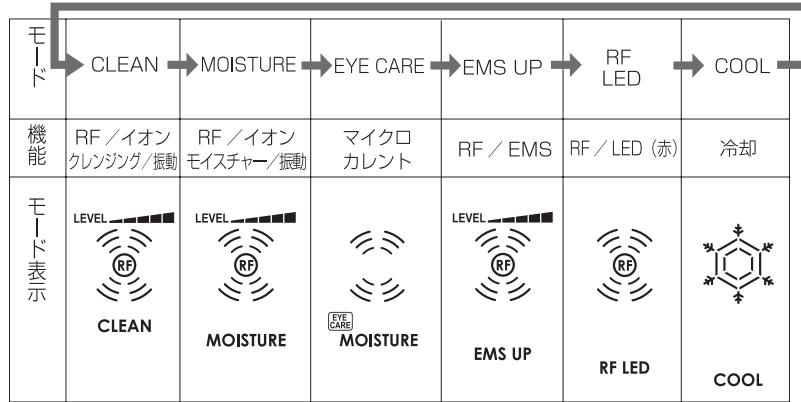


※CLEAN・MOISTURE・EMS UP モードのケア時に
モード表示の(RF)は表示・非表示を繰り返します。

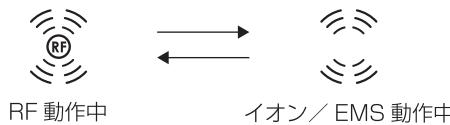

●レベル表示


LEVEL/振動ボタンを押すと、イオンとEMSのレベルを選択することができます。

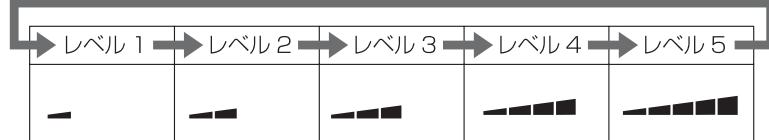

※CLEAN モード、MOISTURE モードではイオンの強弱を選択できます。
※EMS UP モードでは EMS の強弱を選択できます。
※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
※EYE CARE・RF LED・COOLモードのレベルは選択できません。
※RFのレベルは選択できません。

●充電表示

充電中は充電表示が点滅します。
充電が完了すると充電表示が点灯します。
※ACアダプターで充電中も使用することができます。
※使用中は点灯しません

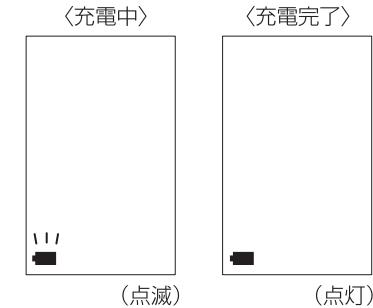

●スタンバイ表示・オートオフ(自動電源オフ)

CLEANモード、MOISTUREモード・EYE CAREモード・EMS UPモード・RF LEDモードが終了すると「ピッピッピッピ」と音が鳴り、約2分間、次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態となります(動いていない状態です)。

POWER/MODEボタンを押すと点滅表示しているモードがスタートします。
約2分間操作をしないと「ピッピッピ」と音があり、自動で電源が切れます(オートオフ)。
COOLモードの終了時のみ、スタンバイにはならず自動で電源が切れます(オートオフ)。(「ピッピッピ」と音があり、電源が切れます。)

●振動機能

- CLEANモード、MOISTUREモード使用時にLEVEL/振動ボタンを約3秒以上長押しすると、振動のオンオフを選択することができます。
- ※振動のリズムは自動的に切り替わります。
- ※EYE CARE・EMS UP・RF LED・COOLモードは振動しません。

お肌へのプレテスト

製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

- 1 お肌を清潔な状態にします。
 - 腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。
- 2 腕の内側に化粧品(ゲル・化粧水)または水を塗り、MOISTUREモード・EMS UPモードで約3分間製品を使用します。

- プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。
- 初めて使用する際はレベル1からご使用ください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。

充電のしかた

本製品は充電式のため、コードレス、またはACアダプターを接続しての使用ができます。充電池で使用する場合は、必ず充電してから使用してください。

- ・使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2.5時間	約40分

※充電環境 室温約25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です
※動作時間は使用モード・使用レベル・
使用環境によって変わります
※電池の残量、使用環境によって、
充電時間は前後します

●充電のしかた

- 1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
 - ・必ず専用のACアダプターを使用してください。
 - ・ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
 - ・充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。
- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

各モードについて

モード	特長	機能	推奨	時間	レベル	使用頻度(目安)
CLEAN	洗顔では落としきれない汚れを吸着し、すっきり肌に整えます。	・RF ・イオンクレジシング ・振動	RFブースターパッド ディープクレンズ ^{*3} (またはコットン+お手持ちの化粧水 ^{*2})	約3分	イオン:5段階	週に2~3回
MOISTURE	お肌の角質層まで美容成分を浸透させ、みずみずしいお肌に導きます。	・RF ・イオンモイスチャー ・振動		約3分	イオン:5段階	
EYE CARE	マイクロカレントの微弱電流で目もとにハリをあたえながらケアします。	・マイクロカレント	RFブースターパッド クリアディープモイスチャー ^{*3} (水分が足りない場合はパウチに残った化粧液を継ぎ足してください。)	約2分	なし	週に5回
EMS UP	筋肉を刺激し、ハリのあるお肌に整えます。 ※首や肩にもご使用になれます。	・RF ・EMS		約3分	EMS:5段階	週に2~3回
RF LED	お肌の深部まで ^{*1} 温めながら、お肌に光をあててケアします。	・RF ・LED(赤)		約3分	なし	
COOL	冷やすことでハリとキメの整ったお肌に導きます。	・冷却	そのままお肌にあててください。	約3分	なし	毎日でも可

- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)
- ・CLEAN・COOLモード以外のコットンの有無は、お好みで選択していただいて問題ございません。

※COOLモード使用後は本体が熱くなります。連続で使用しないでください。
使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。

※1 角質層まで


※2 お手持ちの化粧品をお使いいただく場合は必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因になります。

※3 P.22参照

使いかた

コットンの付けかた

1 本体からコットンストッパーを外す。

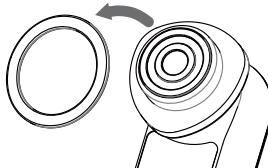

2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、薄手のコットンを使用してください。

※コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

※さらっとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧水 …… RF ブースターパッド・とろみのある化粧水

※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

基本の使いかた

●使用上の注意

●必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

●RFは使用時のお肌の状態によって、温度の感じかたが変わります。

●まぶた、目のまわりは使用しないでください(EYE CARE、COOLモード使用時以外)。

※RF LEDモードのLED光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

●RF LEDモードのLED光を直接のぞき込まない。

●必ず手元電極に触れるように持ってください。

●推奨使用環境温度15°C~30°C

●ケアのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※COOLモードはメイクの上からでもご使用になります。

2 必要な場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。

3 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。モード、レベルを選択する。

・POWER/MODEボタンでモードを選択してください。

・LEVEL/振動ボタンでレベルを選択してください。

・LEVEL/振動ボタンを約3秒長押しし、振動のオンオフを選択してください。(CLEANモード、MOISTUREモード使用時)

※EYE CARE、EMS UP、RF LED、COOLモードは振動しません。

※EYE CARE、RF LED、COOLモードはレベルを選択できません。

※RFのレベルは選択できません。

※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

4 背面の手元電極(背面のシルバーの枠)に触れるように本体を持つ。

5 P.15~16を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

・各モードが終了すると約2分間スタンバイ状態(COOLモード終了時は電源オフ)になります。

POWER/MODEボタンを押して次のモードをスタートさせるか、POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにします。

※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりお肌にあててください。

6 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

・COOLモード終了時は、自動で電源が切れます。

7 ケア終了後お肌を整える。

・適宜クリームなどを塗布してください。

8 コットンを外し、電極ヘッドやコットンストッパーに付いた汚れや化粧水やゲルを拭き取る。


※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

お肌へのあてかた

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

<CLEAN・MOISTUREモード・RF LEDモード>

- 熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。または、コットンなどを使用すると熱さを抑えることができます。
- 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
一箇所にあて続けるとやけど・低温などの原因となります。
- まぶた、目のまわりには電極ヘッドをあてないでください。

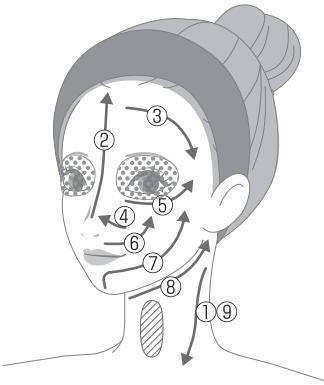

● 使用できない部位

● LED光のみ使用可能な部位
(使い方はP.16参照)
(RF LEDモードのみ)
※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から
5cm以上離してください。


本体を動かすスピードの目安: 1秒間に2cm



<EYE CAREモード>

目頭から目尻に向かってスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※押しあてながら動かさないでください。

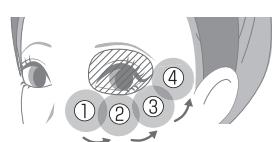


● 使用できない部位: 上まぶた
※下まぶた、目尻には使用可

押しあてる時間の目安: 一箇所約3秒



目もとの乾燥が気になる方は片側約2分、
計4分の使用がおすすめです。

<EMS UPモード>

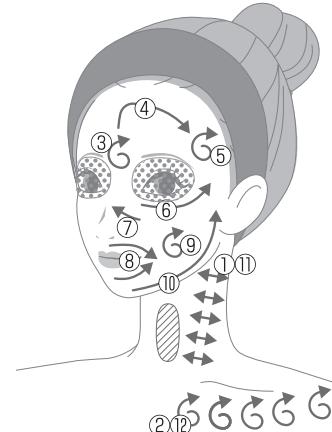

● 使用できない部位

● 矢印のようにくるくる動かす

● LED光のみ使用可能な部位
(使い方は下記参照)

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から
5cm以上離してください。



<COOLモード>

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※まぶた、目もともご使用いただけます。



● LED光(RF LEDモード)での目のまわり、まぶたへのケア

RFブースターパッド、またはコットンは外して目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して光をかざしてください。



使い終わったら

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。

●お手入れ・保管のしかた

- 1 電源をオフにして、ACアダプターを外す。
- 2 電極ヘッド・コットンストッパーの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。
 - ・コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
 - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
 - ・化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。
- 3 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.18 ~P.19)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	→ POWER/MODEボタンを長押ししていない → 充電不足	→ POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにしてください → 充電をしてください またはACアダプターを接続して使用してください
充電しても数分しか使えない	→ 充電池が寿命(充電回数の目安:300回)を過ぎた → ボタンを間違えて押してしまった → スタンバイ状態/オートオフになっている	→ 販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください(P.21) ※故障の原因となるためお客様では交換できません → POWER/MODEボタンを約3秒長押しして再度電源をオンにしてください → POWER/MODEボタンを押してください(P.10)
充電が開始されない (充電表示が点滅しない)	→ ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない(タコ足配線など) → アダプタープラグが本体に差し込まれていない	→ ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください → アダプタープラグを本体に差し込んでください → LEVEL/振動ボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押してリセットしてください。充電が開始される場合があります
本体が熱い	→ 連続使用した	→ 電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください

こんな症状

考えられる原因

処置方法

COOLモードで
冷えない

→ COOLモードを連続使用
した
→ 推奨使用環境温度以外
で使用している

→ 電源をオフにして30分以
上本体を休ませてください
→ 15℃～30℃の環境で
使用してください

イオン・EMSが強い
(ピリピリする・痛い)

→ 設定レベルが高い
→ 電極ヘッド全体がお肌に
あたっていない

→ LEVEL/振動ボタンでレ
ベルを下げてください

→ 電極ヘッド全体をお肌に
あててください

イオン・EMSが弱い
(感じない)

→ 設定レベルが低い
→ お肌に水分が足りない
または乾燥している

→ LEVEL/振動ボタンでレ
ベルを上げてください

→ お肌を化粧水やゲルで湿
らせてからご使用ください
手を軽く湿らせてください

EMSを感じない

→ 筋肉に沿ってあててい
ない

→ 電極ヘッドを筋肉に沿って
あててください(P.16)

RFが熱い

→ 電極ヘッドをお肌に長時
間あて続けている
→ 動かすスピードが遅い

→ RF出力中は必ず動かし
ながらあててください

→ 少し速く動かしてください

RFの熱さを感じない

→ スタンバイ状態/オートオ
フになった(P.10)
→ お肌に水分が足りない
または乾燥している
→ 動かすスピードが速い

→ POWER/MODEボタン
を押してください(P.10)

→ お肌を化粧水やゲルで湿
らせてからご使用ください

→ 少しゆっくり動かしてください

RFのレベルが変わ
らない

→ RFのレベルは変更できま
せん(レベル切り替えはイオン
とEMSのみ)

振動しない

→ LEVEL/振動ボタンを約
3秒長押ししてください
(振動はCLEAN・MOIS
TUREモードのみ)

ケア時に「カチッ」と音
が鳴る

→ RFとイオンまたはEMS
が切り替わる音です

よくあるご質問

Q

使用頻度、使用時間の
目安は?

A

使用頻度の目安: CLEAN, MOISTURE, EMS UP, RF LEDモードの場合は、週に2～3回。EYE CAREモードの場合は週に5回、COOLモードは毎日でも使用可能です。

使用時間の目安: CLEAN, MOISTURE, EMS UP, RF LED, COOLモード(3分)、EYE CAREモード(2分)1日2回以上、同じモードのご使用はお控えください。過度な使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

Q

化粧水やゲルは1回ど
れくらい使用すればよ
いですか?

本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全體が化粧水やゲルでぬれるくらい使用してください。化粧水やゲルが少ないと感じたら付け足すことをお勧めします。

Q

お風呂で使用できま
すか?

本製品は防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。

Q

CLEAN・MOISTURE・
EMS UP・RF LEDモー
ド使用時にRFの温まり
を感じません

電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。また、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。RFはオンとオフを繰り返しています。表示部に **RF** と表示されているときにRFがオンしています。

Q

EYE CAREモードの
体感がありません

マイクロカレントはほとんど刺激を感じません。

Q

コットンに汚れが付きま
せん

目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。

Q

RFで電極ヘッドが温まり
ません

RFは電極ヘッドを温めるのではなく、電気の力でお肌を温めるものです。

アフターサービス

●充電池について

- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。

●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



●日本国内からのお問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など
受付 9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS
0570-550-637 (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

●製品仕様

定 格	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約13.5W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	本体(コットンストッパー付):約W44×D57×H190(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約220g
材 質	本体:ABS樹脂 パネル:ポリカーボネート/アクリル樹脂 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス 手元電極:ABS樹脂(クロムメッキ)
生 産 国	日本
付 属 品	コットンストッパー、ACアダプター
推奨環境温度	15°C～30°C

●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。

オススメの化粧品



RFブースターパッド ディープクレンズ

商 品 名: RFブースターパッド ディープクレンズ
内 容 量: 1箱あたりシート1種×15包セット(約1.5ヶ月～2ヶ月分)
品 番: YRF0003
单 品 価 格: ¥3,000(税抜)



RFブースターパッド クリアディープモイスチャー

商 品 名: RFブースターパッド クリアディープモイスチャー[®]
内 容 量: 1箱あたりシート1種×15包セット(約1.5ヶ月～2ヶ月分)
品 番: YRF0004
单 品 価 格: ¥3,000(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.21)に
お問い合わせください。

WEBサイト www.ya-man.com

※予告なく販売を終了する場合があります。

