

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	HRF-20L-2
形名	フォトプラス EX スムース S		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	ご購入日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		
	見本 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※製造から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせて頂く場合がございます。

その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ

「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)

および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>) をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>) をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの規則は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)



www.ya-man.com

YAMAN

TOKYO JAPAN

保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

フォトプラス EX スムース S

HRF-20L-2



もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
特長	7
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
使いかた	13
使い終わったら	17
こんなときには	18
アフターサービス	22
●製品仕様	24
●保証について	25
保証書	27

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

HRF20L2-3-001

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。

- 医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人・自分で意思表示できない人
- ・温度や刺激の感覚が自覚できない人・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください

- ・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人
- ・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人
- ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
- ・神経障害のある人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の人
- ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合
- ・口内や陰部、粘膜など・眼球・上まぶた(COOLモード以外)・下まぶた、目尻(EYE CARE、COOLモード以外)・のど
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をした部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
- ※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
- ・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位



禁止

同じ箇所にあって続けない。
必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。
やけど・低温やけどの原因となります。



禁止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



使用者の制限

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。遊ばせない。
事故やケガをする原因となります。



用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。

警告



禁止

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・ケガの原因となります。



タコ足配線
禁止

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。
また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



使用者の
制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。
事故やケガをする原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因となります。



必ず守る

アダプタープラグやプラグ差し込み口に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。



無理な扱い
禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



水場使用
禁止

本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。(水につけたり、洗ったりしない)
また、水場・浴室・入浴時に使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



必ず守る

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

警告



必ず守る

交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)ACアダプターは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグ
を抜く

使用しないときは本体やコンセントからACアダプターを抜く。必ず先端のプラグを持って引き抜く。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。
また、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の原因となります。

注意



禁止

以下の項目は行わない。
事故やケガ、本体が故障する原因となります。
・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
・落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
・業務用等、過剰な連続使用をしない。

⚠ 注意



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



禁止

電極ヘッドを金属にあてない。
故障・ケガの原因となります。



禁止

ペットには使用しない。
ケガの原因となります。



落下禁止

不安定な場所に置かない。
本体を落としたり、ぶつけたりしない。

本体の故障原因となります。
また、足の上などに落とすとケガの原因となります。



禁止

COOLモードを連続して使用しない。

連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。
再度使用する時は30分以上間を空けてから使用してください。



必ず守る

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調節する。

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人はイオン・EMSの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。イオン・EMSのレベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。



必ず守る

敏感肌またはお肌の弱い人は、以下を守りながら使用する。

使用前は必ずプレテストを行い、お肌に合うイオン・EMSレベルを確認してください。
また必ずお肌の上を動かしながら使用し、強く擦りつけないでください。



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。
・お肌の状態にあわせて使用する。
・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。



必ず守る

使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

使用中、使用後にお肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師にご相談ください。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故やケガをする原因となります。

海外でのご使用について

⚠ 警告



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認くださいのうえでご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

特長


本製品は、RF深層温熱（以下RF）でお肌を温めながら、イオンクレンジング、イオンモイスチャー、マイクロカレント、EMS、振動、フォト、冷却でケアを行うフェイス用美容器です。ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各モードを組み合わせ、ケアを行うことができます。

機能	特長
RF	お肌を深部*1まで温めることで、よりケアに適した状態にすることができます。一般的なヒーターと違い、すぐに温まることが特長です。
イオンクレンジング	イオンの力で、洗顔では落としきれない汚れを吸着することができます。
イオンモイスチャー	イオンの力で化粧水をよりお肌に浸透*1させることができます。
マイクロカレント	微弱電流で目もとをケアします。
EMS	中周波×低周波のダブル波で深層表情筋*2まで刺激することができます。
振動	細かなバイブレーションにより、ケアをサポートします。
フォト	お肌にLED光（赤色・青色）をあてることでケアします。
冷却	お肌を冷やすことで、お肌を引き締めることができます。

※1角質層まで


※2表情筋の一部（しゅう眉筋、側頭筋、口角挙筋、翼突筋、頬筋、オトガイ筋）を表した造語です。

各部のなまえ

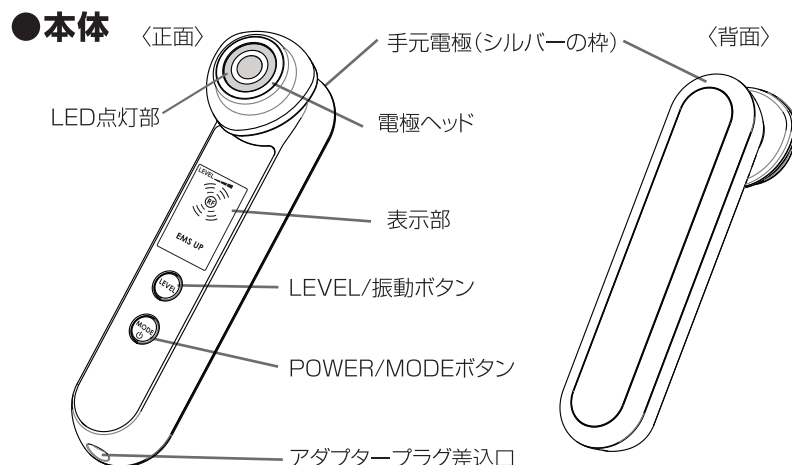


●コットンストッパー（シルバーリング）

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。
※コットンを電極ヘッドに固定できます。

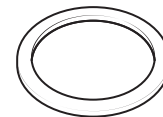

●ACアダプター

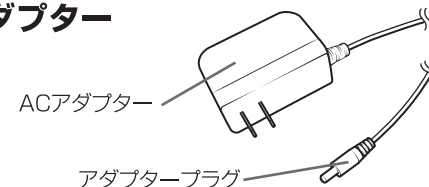


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

表示部の見かた

●表示部・ボタン

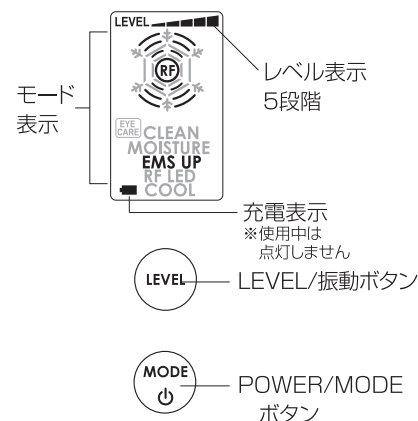


- ・ POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにします。（自動的にCLEANモードが開始します。）
- ・ 各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
- ・ CLEAN・MOISTUREモードではイオン、EMS UPモードではEMS、RF LEDモードではRFのレベルを選択することができます。レベルは5段階あり、LEVEL/振動ボタンで選択することができます。
- ・ POWER/MODEボタンを長押しすると電源オフになります。
※EYE CARE・EMS UP・RF LED・COOLモードでは振動しません。
※EYE CARE・COOLモードはレベル選択はできません。

●モード表示

POWER/MODEボタンを押すと、
CLEAN→MOISTURE→EYE CARE→EMS UP→RF LED→COOL→CLEAN(繰り返し)・・・の順にモードが切り替わります。

※CLEAN・MOISTURE・EMS UP モードのケア時に
モード表示のは表示・非表示を繰り返します。

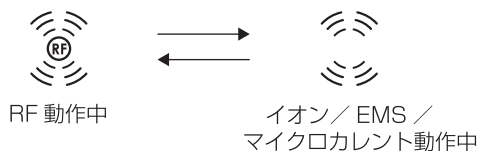

各モードについて

モード	モード表示	特長	機能	時間	レベル	使用頻度（目安）	おすすめ化粧品	お手持ちの化粧品の場合	
								使える化粧品※2	コットン
CLEAN		洗顔では落としきれない汚れを吸着し、すっきり肌に整えます。	・RF ・イオン ・クレンジング ・振動	約3分	イオン：5段階	週に2～3回	RFブースターパッド 毛穴ディープクレンジス※3	コットン＋化粧水（とろみのある化粧水がおすすめです）	あり
MOISTURE		お肌の角質層まで美容成分を浸透させ、みずみずしいお肌に導きます。	・RF ・イオン ・モイスチャー ・振動	約3分	イオン：5段階			・化粧水（とろみのある化粧水がおすすめです） ・美容液、シートマスク	コットンの有無はお好みで選択してください。
EYE CARE		マイクロカレントの微弱電流で目もとにハリをあたえながらケアします。	・マイクロカレント	約2分	なし	週に5回	RFブースターパッド クリアディープモイスチャー（水分が足りない場合はパウチに残った化粧液を継ぎ足してください。） またはフローレスセラムモイスチャー、フローレスセラム スムース※3	・化粧水（とろみのある化粧水がおすすめです） ・目もと用美容液、シートマスク	
EMS UP		筋肉を刺激し、ハリのあるお肌に整えます。 ※首や肩にもご使用になれます。	・RF ・EMS	約3分	EMS：5段階	週に2～3回		・化粧水（とろみのある化粧水がおすすめです） ・美容液、シートマスク	
RF LED		お肌の深部まで※1 温めながら、お肌に光をあててケアします。	・RF ・LED（赤）	約3分	RF：5段階				
COOL		冷却と光（青）によりハリとキメの整ったお肌に導きます。	・冷却 ・LED（青）	約3分	なし	毎日でも可	そのままお肌にあててください（乳液などでお肌を保湿してからのご使用がおすすめです）	なし	

・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(EYE CARE・COOLモード使用時以外)
・CLEAN・COOLモード以外のコットンの有無は、お好みで選択していただいても問題ございません。
※COOLモード使用後は本体が熱くなります。連続で使用しないでください。
使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。

●レベル表示

LEVEL/振動ボタンを押すと、イオンとEMS、RFのレベルを選択することができます。


- ・CLEANモード、MOISTUREモードではイオンの強弱を選択できます。
 - ・EMS UPモードではEMSの強弱を選択できます。
 - ・RF LEDモードではRFの強弱を選択できます。
- ※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
※EYE CARE・COOLモードのレベルは選択できません。



※1 角質層まで
※2 お手持ちの化粧品をお使いいただく場合は必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因になります。
※3 P.26参照

●充電表示

充電中は充電表示が点滅します。
充電が完了すると充電表示が点灯します。
※ACアダプターで充電中も使用することができます。
※使用中は点灯しません。

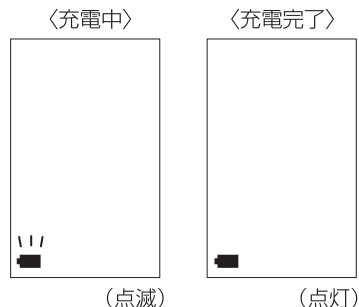

●スタンバイ表示・オートオフ(自動電源オフ)

CLEANモード・MOISTUREモード・EYE CAREモード・EMS UPモード・RF LEDモードが終了すると「ピッピッピッ」と音が鳴り、約2分間、次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態となります(動いていない状態です)。

POWER/MODEボタンを押すと点滅表示しているモードがスタートします。

約2分間操作をしないと「ピッピッ」と音になり、自動で電源が切れます(オートオフ)。
COOLモードの終了時のみ、スタンバイにはならず自動で電源が切れます(オートオフ)。「ピッピッ」と音になり、電源が切れます。

●振動機能

・CLEANモード、MOISTUREモード使用時にLEVEL/振動ボタンを約3秒以上長押しすると、振動のオンオフを切り替えることができます。

※振動のリズムは自動的に切り替わります。

※EYE CARE・EMS UP・RF LED・COOLモードは振動しません。

お肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

- 1 お肌を清潔な状態にします。
・腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。
- 2 腕の内側に化粧品(ゲル・化粧水)または水を塗り、
MOISTUREモード・EMS UPモードで約3分間製品を使用します。
・プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。
・初めて使用する際はレベル1からご使用ください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。

充電のしかた

本製品は充電式のため、コードレス、またはACアダプターを接続しての使用ができます。

- ・使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2.5時間	約40分

※充電環境 室温約25℃において
※満充電直後からの動作時間です
※動作時間は使用モード・使用レベル・
使用環境によって変わります
※電池の残量、使用環境によって、
充電時間は前後します


●充電のしかた

- 1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
・必ず専用のACアダプターを使用してください。
・ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
・充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。
- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

使いかた

コットンの付けかた

1 本体からコットンストッパーを外す。

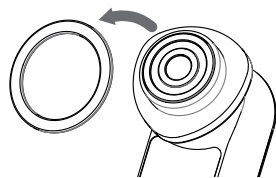

2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、薄手のコットンを使用してください。

※コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。化粧水の量が少なくムラがあるとコットンが熱くなることがあります。

※さらっとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧品……RFブースターパッド・フローレスセラム・とろみのある化粧水

※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

基本の使いかた

●使用上の注意

●必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。

●RF(ラジオ波)は使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。

●上まぶた(COOLモード以外)、下まぶた、目尻(EYE CAREモード、COOLモード以外)は使用しないでください。

※LED光は上まぶた、下まぶた、目尻に照射できます。その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。LED光は直接のぞき込まないでください。

●ケアのしかた

1 メイクを落として洗顔する。

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※COOLモードはメイクの上からでもご使用になれます。

2 必要な場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。

※使用する化粧品、コットンの有無によっては、非常に熱く感じる場合があります。

熱いと感じる場合は、以下をお試しください。

- ・ヘッドを速く動かす
- ・コットンの使用をやめる
- ・使用する化粧品を変える

3 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。モード、レベルを選択する。

・POWER/MODEボタンでモードを選択してください。

・LEVEL/振動ボタンでレベルを選択してください。

・LEVEL/振動ボタンを約3秒長押しし、振動のオンオフを選択してください。

(CLEANモード、MOISTUREモード使用時)

※EYE CARE、EMS UP、RF LED、COOLモードは振動しません。

※EYE CARE、COOLモードはレベルを選択できません。

※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

4 背面の手元電極(背面のシルバーの枠)に触れるように本体を持つ。

5 P.15～16を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。

・各モードが終了すると約2分間スタンバイ状態(COOLモード終了時は電源オフ)になります。

POWER/MODEボタンを押して次のモードをスタートさせるか、POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにします。

※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりとお肌にあててください。

6 POWER/MODEボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

・COOLモード終了時は、自動で電源が切れます。

7 ケア終了後お肌を整える。

・適宜クリームなどを塗布してください。

8 コットンを外し、電極ヘッドやコットンストッパーに付いた汚れや化粧水やゲルを拭き取る。


※本製品は防水製品ではないため、使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取ってください。また、水洗いしないでください。

お肌へのあてかた

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。動作時間の半分が経過すると「ピッ」とブザー音でお知らせします。顔の反対側のケアにうつりましょう。

<CLEAN・MOISTUREモード・RF LEDモード>

- ・ 熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。
- ・ 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- ・ 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
一箇所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。
- ・ 上まぶた、下まぶた、目尻には電極ヘッドをあてないでください。

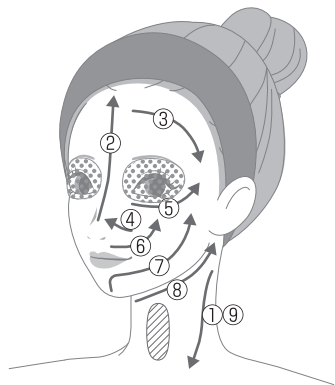

 使用できない部位

 LED光のみ使用可能な部位
(使い方はP.16参照)

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から
5cm以上離してください。


本体を動かすスピードの目安：1秒間に2cm



<EYE CAREモード>

目頭から目尻に向かってスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※押しあてながら動かさないでください。

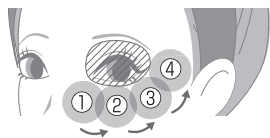


 使用できない部位：上まぶた
※下まぶた、目尻は使用可

押しあてる時間の目安：一箇所約3秒



目もとの乾燥が気になる方は片側約2分、
計4分の使用がおすすめです。

<EMS UPモード>

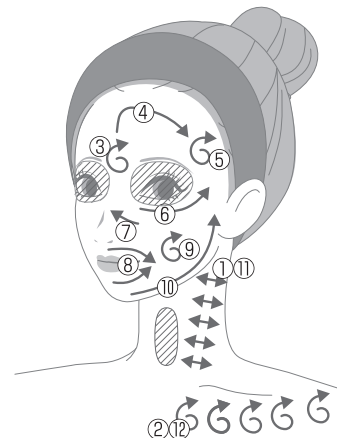

 使用できない部位

 矢印のようにくるくる動かす




<COOLモード>

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。



●LED光(RF LEDモード・COOLモード)での上まぶた、下まぶた、目尻へのケア

RFブースターパッド、またはコットンは外して目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して光を当ててください。

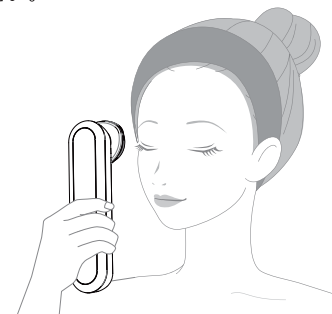

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。

●お手入れ・保管のしかた

1 電源をオフにして、ACアダプターを外す。

2 電極ヘッド・コットンストッパーの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。

- ・コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。

3 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.18～P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	POWER/MODEボタンを長押ししていない	POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにしてください
	充電不足	充電をしてください またはACアダプターを接続して使用してください
充電しても数分しか使えない	充電池が寿命(充電回数の目安:300回)を過ぎた	販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください(P.24) ※故障の原因となるためお客様では交換できません
	ボタンを間違えて押してしまった	POWER/MODEボタンを約3秒長押しして再度電源をオンにしてください
	スタンバイ状態/オートオフになっている	POWER/MODEボタンを押してください(P.11)
充電が開始されない (充電表示が点滅しない)	ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない(タコ足配線など)	ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください
	アダプタープラグが本体に差し込まれていない	アダプタープラグを本体に差し込んでください
		LEVEL/振動ボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押してリセットしてください。充電が開始される場合があります

こんな症状	考えられる原因	処置方法
「ピーピーピー」となって電源が切れます	充電不足	充電をしてください。 ACアダプターを接続して 使用してください
本体が熱い	連続使用した	電源をオフにして1時間以上 本体を休ませてください
COOLモードで 冷えない	COOLモードを連続使用 した	電源をオフにして30分以上 本体を休ませてください
	推奨使用環境温度以外 で使用している	15℃～30℃の環境で 使用してください
イオン・EMSが強い (ピリピリする・痛い)	設定レベルが高い	LEVEL/振動ボタンでレ ベルを下げてください
	電極ヘッド全体がお肌に あたっていない	電極ヘッド全体をお肌に あててください
イオン・EMSが弱い (感じない)	設定レベルが低い	LEVEL/振動ボタンでレ ベルを上げてください
	お肌に水分が足りない または乾燥している	お肌を化粧水やゲルで湿 らせてからご使用ください 手を軽く湿らせてください
EMSを感じない	筋肉に沿ってあててい ない	電極ヘッドを筋肉に沿っ てあててください(P.16)
RFが熱い	電極ヘッドをお肌に長時 間あて続けている	RF出力中は必ず動かし ながらあててください
	動かすスピードが遅い	少し速く動かしてください
	RFLEDモードの場合：設 定レベルが高い	LEVEL/振動ボタンでレ ベルを下げてください
	使用する化粧品、コット ンの有無によるもの	・ヘッドを速く動かす ・コットンの使用をやめる ・使用する化粧品を変える

こんな症状	考えられる原因	処置方法
RFの熱さを感じない	スタンバイ状態/オートオ フになった(P.11)	POWER/MODEボタン を押してください(P.11)
	お肌に水分が足りない または乾燥している	お肌を化粧水やゲルで湿 らせてからご使用ください
	動かすスピードが速い	少しゆっくり動かしてください
	RFLEDモードの場合：設 定レベルが低い	LEVEL/振動ボタンでレ ベルを上げてください
振動しない		LEVEL/振動ボタンを約 3秒長押ししてください (振動はCLEAN・MOIS TUREモードのみ)
ケア時に「カチッ」と音 が鳴る		RFとイオンまたはEMS が切り替わる音です

よくあるご質問

Q	A
使用頻度、使用時間の目安は？	使用頻度の目安：CLEAN、MOISTURE、EMS UP、RF LEDモードの場合は、週に2～3回。EYE CAREモードの場合は週に5回、COOLモードは毎日でも使用可能です。 使用時間の目安：CLEAN、MOISTURE、EMS UP、RF LED、COOLモード(3分)、EYE CAREモード(2分) 1日2回以上、同じモードのご使用はお控えください。過度な使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか？	本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。 目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水やゲルでぬれるくらい使用してください。化粧水やゲルが少ないと感じたら付け足すことをお勧めします。
お風呂で使用できますか？	本製品は防水製品ではありません。お風呂では使用しないでください。
CLEAN・MOISTURE・EMS UP・RF LEDモード使用時にRFの温まりを感じません	電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。 また、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。 CLEAN・MOISTURE・EMS UPモードでは、RFはオンとオフを繰り返しています。表示部に RF と表示されているときにRFがオンしています。 RF LEDモードではRFのLEVEL調整ができます。LEVEL/振動ボタンでレベルを上げてください。
EYE CAREモードの体感がありません	マイクロカレントはほとんど刺激を感じません。
コットンに汚れが付きます	目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。
RFで電極ヘッドが温まりません	RFは電極ヘッドを温めるのではなく、電気のお肌を温めるものです。

アフターサービス

●充電電池について

- ・ 充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・ 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・ 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)にご相談ください。

●廃棄について

- ・ 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・ 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。
廃棄方法については、下記「電池の廃棄について」と「電池の取り出しかた」(P.22～P.23)をご確認下さい。



電池の廃棄について


この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- ・ 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- ・ 電池を取る前には必ず電源をOFFにし、ACアダプターを抜いてください。
- ・ 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- ・ 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- ・ 取り出した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って、処理してください。


電池の取り出しかた

下図1～4を参照し、電池を取り出してください。


- 1 先の細いものなどを使って、外カバーを取り外す。

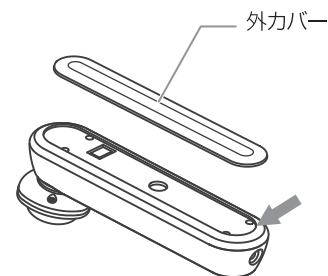


2 内カバーの4ヶ所のネジを外す。

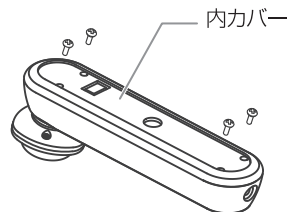

3 内カバーを外して裏返し、電池のコネクタを外す。

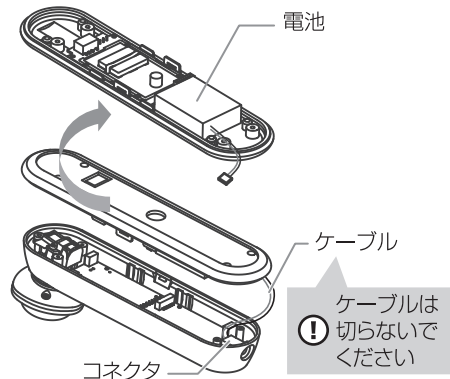

4 プラスチック製の薄いヘラ、コインなどを電池下に差し込み、電池を取り外す。

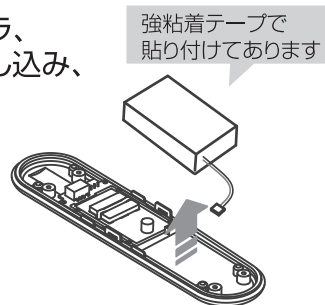

※この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

●日本国内からのお問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)
受付 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
携帯電話・PHS **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混み合っております。

●日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

●製品仕様

定 格	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約13.5W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約2.5時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	本体(コットンストッパー付): 約W44×D57×H190(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付): 約220g
材 質	本体: ABS樹脂 パネル: ポリカーボネート/アクリル樹脂 電極ヘッド: PET樹脂/ステンレス 手元電極: ABS樹脂(クロムメッキ)
生 産 国	日本
付 属 品	コットンストッパー、ACアダプター
推奨環境温度	15℃~30℃

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.24）にご相談ください。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り
 - ② お買い上げ後の輸送・転倒・落下
 - ③ 弊社以外の第三者による修理・改造
 - ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - ⑤ 接続する他の機器の異常
 - ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電
 - ⑧ 非純正部品の使用
 - ⑨ 車両・船舶への搭載
 - ⑩ 海外でのご使用
 6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご提示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
 - (ヌ) 製造から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※ その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

おすすめの化粧品



RFブースターパッド 毛穴ディープクレンズ

内 容 量: 15包セット
品 番: YRF0003
単 品 価 格: ¥3,300 (税込)



RFブースターパッド クリアディープモイスチャー

内 容 量: 15包セット
品 番: YRF0004
単 品 価 格: ¥3,300 (税込)



フローレスセラム スムース

内 容 量: 80g
品 番: CS19004
単 品 価 格: ¥3,300 (税込)



フローレスセラム ハイドレイティング

内 容 量: 80g
品 番: CS21004
単 品 価 格: ¥3,300 (税込)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター（P.24）にお問い合わせください。

WEBサイト www.ya-man.com

※ 予告なく販売を終了する場合があります。

