

# YA-MAN

エステ発想のヤーマン。

保管用  
保証書付


# 取扱説明書

家庭用美容器

フェイササイズPlus

## Facercise Plus

IB-19

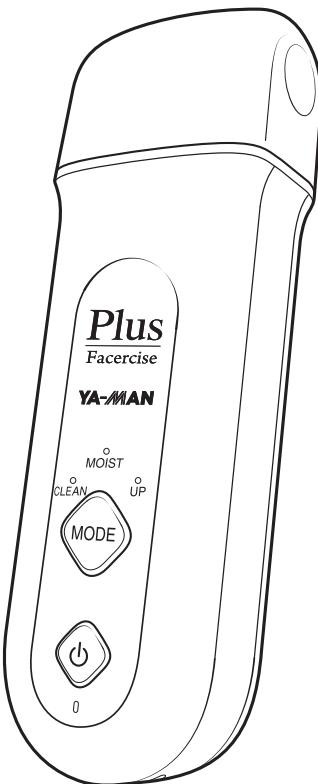

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品をほかの人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



## 危険

次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招く原因となります。

◆医用電子機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

# 警告

## 次に該当する人は使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁 止

- ・妊娠中の人は、授乳中の人は
- ・アトピー性皮膚炎
- ・金属アレルギー体質の人
- ・皮膚感覚の弱い人
- ・虫歯など歯の治療を受けている人
- ・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ・皮膚に炎症やかゆみ、ホテリなどの異常のある人
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・疲労の激しい人
- ・酒気帯びの人
- ・黒皮症の人
- ・アレルギー体質の人、敏感肌の人
- ・医師の治療を受けている人
- ・成長過程の人
- ・体調がすぐれない人
- ・眠気を誘う薬を服用中の場合

## 次のような場合、または部位には使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁 止

- ・急性疾患
- ・有熱性疾患
- ・伝染病疾患
- ・結核性疾患
- ・皮膚病
- ・ウイルス性のイボ
- ・整形手術部位
- ・口内や陰部
- ・のどぼとけ
- ・心臓疾患
- ・血圧異常時
- ・悪性腫瘍
- ・血液疾患
- ・切り傷
- ・膨らんだホクロ
- ・まぶた、目のくぼみの周辺、眼球
- ・にきび

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁 止

## 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。



分解禁止

## 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

用途以外  
禁 止

## 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、本機が故障する原因となります。

異臭。  
異常発熱時  
使用禁止

## 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因となります。

# 警告

安全上のご注意



無理な扱い  
禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。  
また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



タコ足配線  
禁止

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差しこみ、タコ足配線にしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



使用者の  
制限

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。  
事故やケガをする原因となります。



水場使用  
禁止

本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。また、水場では使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



# 警告



傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



落下禁止

不安定な場所に置かない。  
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。  
本体が故障したり、ケガをする原因となります。



使用者の  
制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。  
事故やケガをする原因となります。



必ず守る

交流100V～240Vで使用する(日本国内専用)。  
火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

使用しないとき・お手入れをするときは必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。

# 警告



## 発火注意

火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所やほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。  
発熱・発火・破裂の原因となります。



## プラグを抜く

本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。



## ACアダプターを抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また充電をしているときは、ACアダプターをすぐに抜く。  
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



## ACアダプターを抜く

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全上のご注意

# 注意



## 禁 止

コンタクトレンズを装着して、目のまわりのお手入れをしない。  
目を傷める原因となります。



## 禁 止

顔・頭皮・デコルテのお手入れ以外には使用しない。  
ケガをする原因となります。



## 禁 止

電源をオンにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させない。  
ケガや本体が故障する原因となります。



## 禁 止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。



## 禁 止

ペットには使用しない。  
ケガをする原因となります。

## 注意



20分以上連続して使用しない。続けて使用する場合は60分以上間をあけてから使用する。

**必ず守る** 本体が発熱する原因となります。



使用中に疲労を感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。

**必ず守る** 翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



使用頻度・お手入れ時間(P.11参照)に従ってトリートメントする。

**必ず守る** 過度の使用は肌を傷める原因となります。



頭皮に使用する際は、髪の毛を巻き込まないように注意する。

**必ず守る** 髪の毛がからみついたときは、電源をオフにしてから髪の毛を外してください。



ヘッド表面に割れや、ゴミなどの付着がないか確認してから使用する。

**必ず守る** ケガや肌を傷める原因となります。

# もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
充電のしかた	8
トリートメントをしましよう	11
トリートメントの前に	11
使いかた	13
トリートメントが終わったら	18
お手入れのしかた	18
保管のしかた	19
保守・点検について	19
こんなときには	20
困ったときは	20
よくあるご質問	21
アフターサービス	23
充電池について	23
廃棄について	23
お問い合わせ先	23
●製品仕様	24
●保証について	26
保証書	27

# 各部のなまえ


各部のなまえ

## ●本体





## ●付属品

### ・ ACアダプター

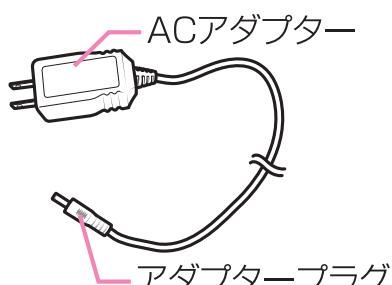

### ・コットンストッパー ・トリートメントブック

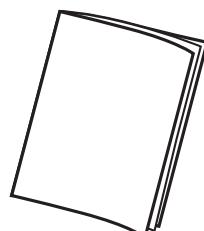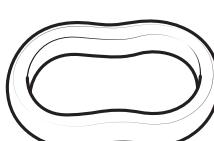

### ・ オンリーミネラル アクアリフト モイスチャーローション(試供品3回分)

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

# ご使用の前に

## ●自動電源オフ

- 電源をオンにしてからボタン操作をしないで(スタンバイ状態)約2分経過すると、自動的に電源がオフになります。
- 1つのモードを開始してから約5分経過すると、動作が停止してスタンバイ状態になります。
- 各モードを開始してから合計して約20分経過すると、自動的に電源がオフになります。

## ●充交両用

- 本機は充電池とACアダプターのどちらでも使用することができます。
- 充電池でのご使用中に充電池残量が少なくなると、充電ランプが赤点滅し、電源がオフになります。充電をするか、ACアダプターを接続してご使用ください。  
※電源がオフの状態でないと、充電できません。

## 充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・ 購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。
- ・ ACアダプターを接続したまま使用しているときは、**同時に充電することはできません**。
- ・ 以下のようなときは充電してから、再度ご使用ください。
  - 電源がオンにならない(モード表示ランプが点滅しない)。
  - 動作中、何度も停止する。

## ●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約40分


※充電環境 室温約25°Cにおいて  
満充電直後からの動作時間です。

※電池の残量や充電環境によって  
充電時間は前後します。

※充電中は充電ランプが赤点滅します。

## ●充電のしかた

- 1 本体下部にあるプラグカバーを開き、アダプタープラグをプラグ差込口に差し込む。


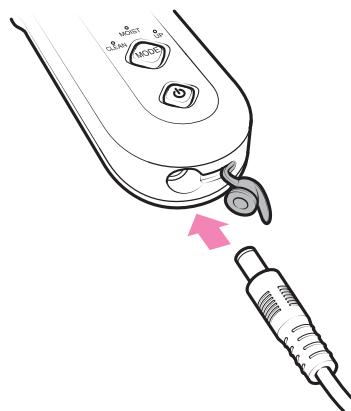


- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

- 充電ランプが赤点滅し、充電が開始されます。
- 電源がオフの状態でないと、充電できません。
- 充電ランプが点滅しない場合は、ACアダプターとアダプタープラグを差し直してください。

それでも充電ランプが点滅しない場合は、「充電できないときは(リセットのしかた)」(P.10)を参照して、本体をリセットしてください。

充電ランプが赤点灯に変わったら充電完了です。

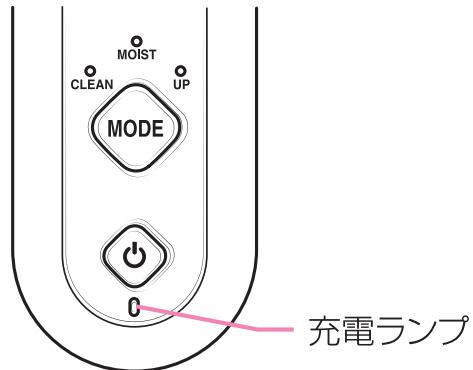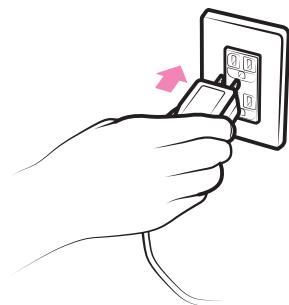

- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。プラグカバーを閉じる。



警告


本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。


## ●充電できないときは(リセットのしかた)

充電が開始されない(充電ランプが点滅しない)場合は、以下の手順に従って本体をリセットしてください。

- 1 本体下部にあるプラグカバーを開き、アダプタープラグをプラグ差込口に差し込む。

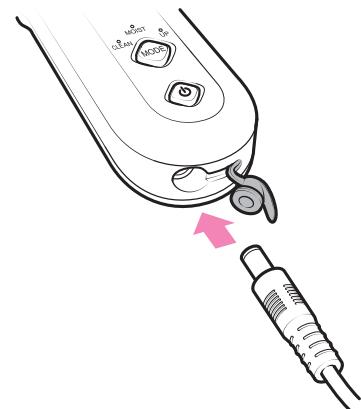


- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

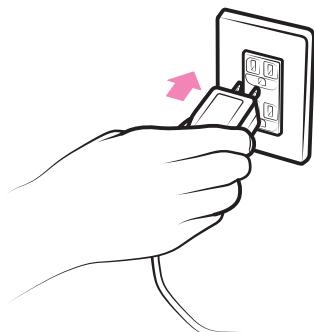

- 3 MODEボタンを押しながら電源ボタンを押す。

- ・充電ランプが赤点滅し、充電が開始されます。

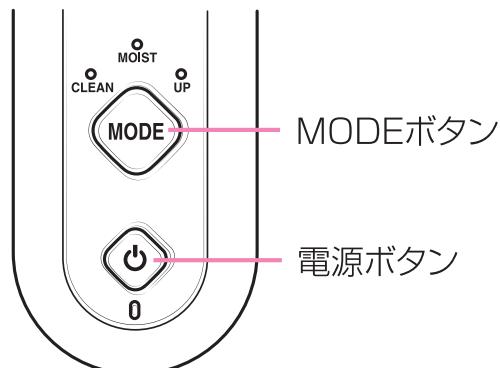

- 4 充電完了。プラグカバーを閉じる。

- ・充電ランプが赤点灯に変わったら充電完了です。

# トリートメントをしましょう

## トリートメントの前に

### ●モードと使用頻度・お手入れ時間について

モード	機能	コットン	使用頻度・ お手入れ時間
CLEAN (クリーン)	高速タッピングとイオンクレンジングを行います。 手洗顔では落としにくいお肌の汚れを浮かせます。	あり	1日1回 約5分
MOIST (モイスト)	速く細かなタッピングとイオントリートメントを行います。 お顔に塗った美容成分を角質層に浸透させ、 お肌を保湿します。	なし	週2~3回 約5分
UP (アップ)	ゆっくり大きくタッピングします。 お顔の筋肉トレーニングに向いています。	なし	1日1回 約8分

※イオン(CLEAN・MOIST)の感じ方には個人差があります。  
人によってはイオンを感じないことがあります。



#### 注意

20分以上連続して使用しない。続けて使用する場合は60分以上間をあけてから使用する。

本体が発熱する原因となります。


## ●キャップの外しかた

キャップ側面の丸いくぼみに指をかけて、引き抜いてください。



## ●パッチテストをする(MOISTモード)

- ・「使いかた」(P.14)のMOISTモードの使いかたを参照して、二の腕の内側など、お肌のやわらかい部分に水または化粧水を塗って2~3分ほど使用し、24時間放置してください。
- ・24時間以内に、お肌に異常(赤みやホテリ)があらわれないことを確認してください。

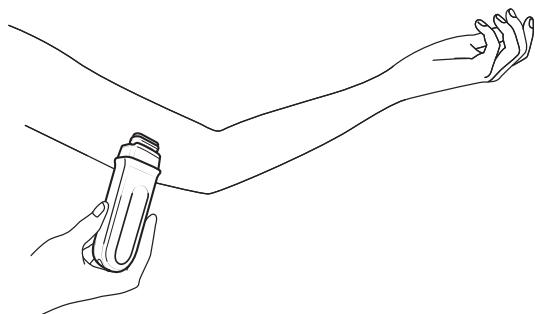

## ●お肌の準備

メイクを落として洗顔する。

- ・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。



# 使いかた

本機は、トリートメントのモードによって使いかたが異なります。

モードについて詳しくは、「モードと使用頻度・お手入れ時間について」(P.11)を参照してください。


## ●モードの選びかた

MODEボタンを押して、モードを選択する。

- ボタンを押すたびに、以下のようにモードが切り替わります。



- 選択したモードのランプがオレンジ点灯し、すぐに動作が始まります。

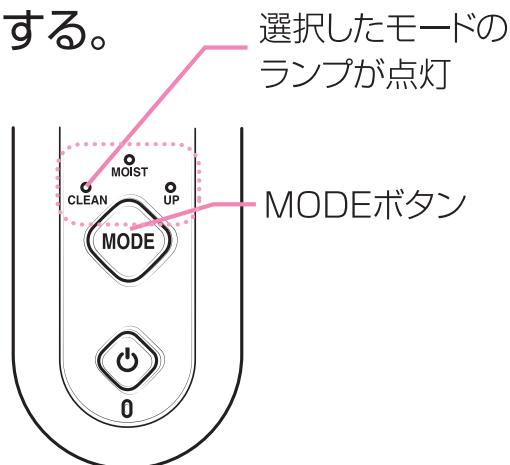

トリートメントをしましょう

モード別に以下の手順でトリートメントしてください。

CLEANモード : 1. コットンをヘッドにつけ、美容液を含ませる  
2. 電源をオンにし、**CLEANモード**を選択する  
3. 手元電極を持ちながらトリートメントする

MOISTモード : 1. お顔に化粧水を塗る  
2. 電源をオンにし、**MOISTモード**を選択する  
3. 手元電極を持ちながらトリートメントする

UPモード : 1. お顔に付属の美容液を塗る(※美容液を塗らなくても使用できます)  
2. 電源をオンにし、**UPモード**を選択する  
3. トリートメントする

※詳しい使いかたについては、「トリートメントのしかた」(P.14)を参照してください。


## ●トリートメントのしかた

### 1 本体とお肌の準備をする。

#### ●CLEANモードの場合

①コットンストッパーでコットンをヘッドに固定する。

- ・コットンは市販品をご使用ください。
- ・CLEANモードの場合は、必ずヘッドにコットンをつけてください。

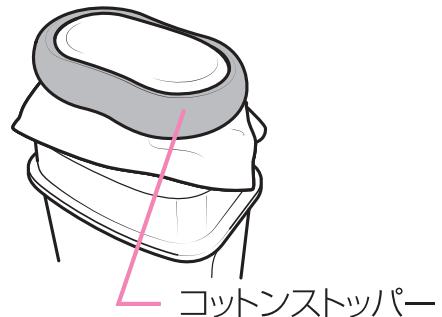

②コットンに水溶性の化粧水や美容液を含ませる。

- ・オンリーミネラル アクアリフトモイスチャーローション、またはお手持ちの化粧水や美容液をご使用ください。
- ・美容液などが不足していると、トリートメントの効果が十分に得られません。

#### ●MOISTモードの場合

水溶性の化粧水または美容液をお顔に塗る。

- ・MOISTモードの場合は、ヘッドにコットンをつける必要はありません。


#### ●UPモードの場合

付属の美容液をお顔に塗る。

- ・美容液を塗らなくても使用できます。
- ・UPモードの場合は、ヘッドにコットンをつける必要はありません。


### 2 電源ボタンを長押しして、電源をオンにする。

- ・モード表示ランプが点滅します（スタンバイモード）。
- ・スタンバイ状態のままボタン操作をしないで約2分経過すると、自動的に電源がオフになります。

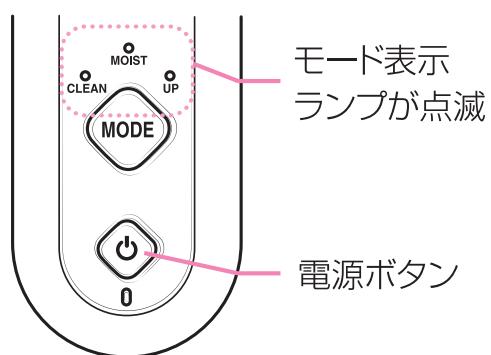

### 3 MODEボタンを押して、モードを選択する。

- 選択したモードのランプがオレンジ点灯し、すぐに動作が始まります。

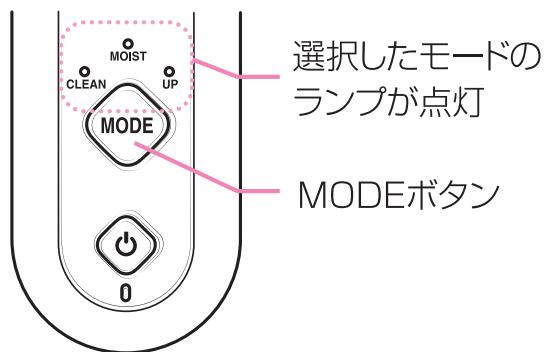

### 4 CLEANモード・MOISTモードの場合は、手元電極に触れるように本体を持つ。

- 必ず本体背面の手元電極に触れるように持ってください。手元電極に触れていないと、トリートメントが正常に行われませんのでご注意ください。

- 手元電極を持つ手が乾燥している場合は、ウェットティッシュで手を拭くなどして水分を補ってください。
- UPモードの場合は、手元電極に触れる必要はありません。



【背面】

## 5 トリートメントしたい部位にヘッドをあて、トリートメントする。

- ゆっくり移動させながら、お顔全体にヘッドをあてます。
- 下から上に、お顔の中心から外側に向かってヘッドを移動させてください。


※ 1つのモードを開始してから約5分経過すると、動作が停止してスタンバイ状態になります。



トリートメントをじまじょり

### ●お肌へのあてかた


- 詳しいトリートメント方法については、『トリートメントブック』を参照してください。
- 本体と肌表面が垂直になるように持ってください。
- お肌からヘッドを離しきみにして、ヘッドが飛び出したときにお肌に軽く触れる程度にあててください。
- 強く押しあてないでください。

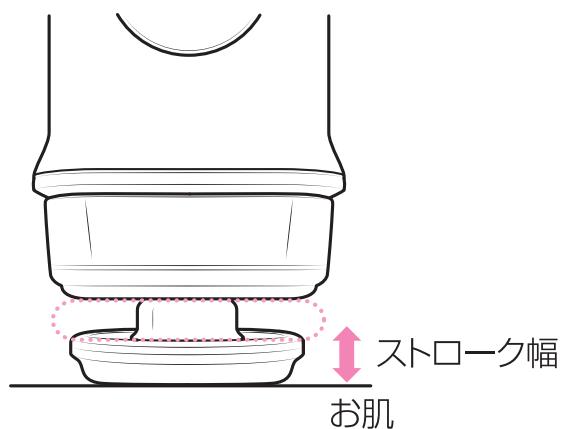

## 6 トリートメントが終わったら、電源ボタンを押して、電源をオフにする。

- モード表示ランプが消灯します。

電源ボタンを押さなくても、各モードを開始してから合計して約20分経過すると、自動的に電源がオフになります。

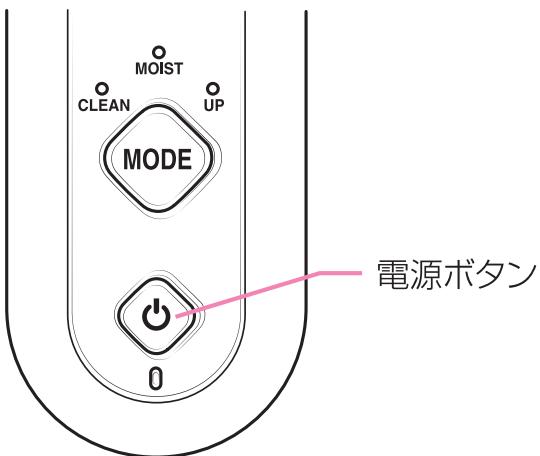

## 7 本体のお手入れをする。

- ヘッドについていた美容液や汚れを拭き取ってください（「お手入れのしかた」(P.18)参照）。



### 注意

- 使用中に疲労を感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。  
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 20分以上連続して使用しない。続けて使用する場合は60分以上間をあけてから使用する。  
本体が発熱する原因となります。
- 長時間連続で同じ箇所に使用しない。  
肌を傷める原因となります。
- 頭皮に使用する際は、髪の毛を巻き込まないように注意する。  
髪の毛がからみついたときは、電源をオフにしてから髪の毛を外してください。
- まぶた、目のくぼみの周辺、眼球へのトリートメントはしない。  
目や肌を傷める原因となります。
- コンタクトレンズを装着して、目のまわりのお手入れをしない。  
目を傷める原因となります。

# トリートメントが終わったら

## お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



**警告**

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。




2 ヘッドの美容液や汚れは、水を含ませてかたく絞ったタオルで拭き取る。

- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

本体は防水仕様ではありません。  
決して水洗いしないでください。



3 表面の汚れをタオルなどの乾いた布で拭き取る。

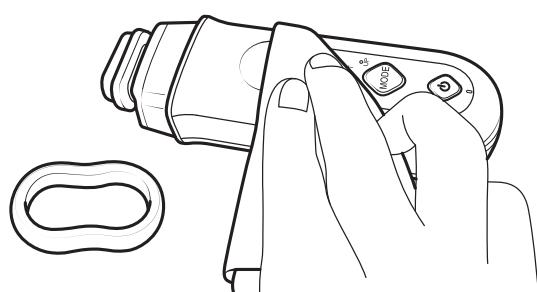

トリートメントが終わったら

## 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンセンター(P.23)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

トリートメントが終わったら

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	電源ボタンを押していない 充電がされていない	電源ボタンを長押しして電源をオンにしてください 充電してください(P.8) またはACアダプターを本体に接続して使用してください
充電ランプが点滅している	充電池の残量不足	充電してください(P.8) またはACアダプターを本体に接続して使用してください
充電しても数分しか使えない	充電不足	充電してください(P.8) またはACアダプターを本体に接続して使用してください
充電が開始されない ( 充電ランプが赤点滅しない )	ACアダプターがコンセントに差し込まれていない アダプタープラグが本体に差し込まれていない	ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.9) アダプタープラグを本体に差し込んでください(P.9) 本体をリセットしてください(P.10)
タッピングが強い	強く押しあてている お肌とヘッドの距離が近すぎる	お肌に軽く触れる程度にあててください ヘッドが飛び出したときにお肌に軽く触れる程度にあててください
タッピングが弱い	お肌とヘッドの距離が遠すぎる 充電池の残量不足	お肌に軽く触れる程度にあててください 充電してください(P.8) またはACアダプターを本体に接続して使用してください

こんなときには

## よくあるご質問

Q	A								
どのように使えばよいですか？	ヘッドが一番飛び出したところがお肌にあたるようにし、お顔の中心から外に向かってトリートメントしてください。								
トリートメント時間はどれくらいがいいですか？	<table border="1"> <thead> <tr> <th>モード</th><th>使用頻度・お手入れ時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLEAN(クリーン)</td><td>1日1回 約5分</td></tr> <tr> <td>MOIST(モイスト)</td><td>週2～3回 約5分</td></tr> <tr> <td>UP(アップ)</td><td>1日1回 約8分</td></tr> </tbody> </table>	モード	使用頻度・お手入れ時間	CLEAN(クリーン)	1日1回 約5分	MOIST(モイスト)	週2～3回 約5分	UP(アップ)	1日1回 約8分
モード	使用頻度・お手入れ時間								
CLEAN(クリーン)	1日1回 約5分								
MOIST(モイスト)	週2～3回 約5分								
UP(アップ)	1日1回 約8分								
集中的に同じ部位をトリートメントしても大丈夫ですか？ すべてのモードを一度に使用しても大丈夫ですか？	問題ありません。CLEAN→MOIST→UPの順にお使いいただけます。ただし、痛みや疲労を感じた場合は、ただちにご使用を中止してください。なお、ご使用時に長時間、かゆみを感じる場合はご使用をお控えください。								
化粧水や美容液を使わないとトリートメントできませんか？	CLEANモードでは、水溶性の化粧水や美容液をコットンにつけてご使用ください。MOISTモードでは水溶性の化粧水や美容液をお顔に塗ってご使用ください。 UPモードでは、化粧品を使わずにご使用いただけます。								
どんな美容液を使えばいいですか？	<p>お手持ちの化粧水や美容液を使用することができます。ただし、水溶性の化粧品のみお使いください。以下の化粧品は、お肌のトラブルや本体が故障する原因となりますので、使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オイル状のもの(油性ジェル、クリーム)</li> <li>・肌に対して刺激性が高いもの(スクラブ剤、パック液など)</li> <li>・コットンにしみ込ませることができないもの(パウダー、固形、練り状クリーム)</li> <li>・顔用以外の化粧品</li> </ul> <p>また、ヤーマンでは本製品と一緒にご使用いただける化粧品『オンリーミネラル アクアリフトモイスチャーローション』(P.25)を用意しています。アクアリフトモイスチャーローションのご購入については、ヤーマンコールセンター(P.23)にお問い合わせください。</p>								

こんなときには

Q	A
化粧水や美容液は1回にどれくらい使用すればよいですか？	<p>CLEANモードのときは、コットン全体に化粧水や美容液がいきわたる程度。</p> <p>MOISTモードのときは、お肌が充分にうるおう程度。</p> <p>UPモードのときは化粧水や美容液をご使用しなくてもトリートメントできますが、付属の化粧品と一緒にご使用いただくことをお勧めします。</p>
イオンを感じないのですが、故障ですか？	イオンの感じ方には個人差があり、人によっては感じないことがあります。
頭皮にも使用できますか？	ご使用いただけます。頭皮にご使用の際は、髪の毛がひっかかるないように、髪留めなどで固定してからご使用ください。
敏感肌なのですが使っても大丈夫ですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い始めは二の腕などの目立たないところへご使用いただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。</li> <li>●お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。</li> </ul>
お手入れや保管はどうするのですか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヘッドについた美容液や汚れは、水を含ませてかたく絞ったタオルで拭き取ってください。表面の汚れは乾いた布で拭き取ってください。</li> <li>●高温多湿の場所では保管しないでください。</li> </ul>
お風呂場で使用できますか？	本製品は防水仕様ではありません。 水まわりや湿度の高い環境では使用しないでください。
充電しないと使用できませんか？	<p>ACアダプターを接続したまま使用することができます（同時に充電はできません）。</p> <p>ただし、初回や長期間使用しなかったときは、一度完全に充電が完了するまで使用しないでください。</p>
本体が熱いのですが？	約20分使用した場合や本体が熱くなった場合は、電源をオフにし、60分以上休ませてください。

# アフターサービス

## 充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます  
(充電回数は300回が目安です)。

## 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

**ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282**

受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと  
お電話がつながりやすくなっております。ぜひご利用ください。

アフターサービス

## ●製品仕様

定 格	DC 6.0V / 1.5A
消 費 電 力	約3W
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	約W48xD34xH148(mm) ※キヤップ装着時
製 品 質 量	約155g ※キヤップ装着時
材 質	本体:ABS樹脂・メタクリル樹脂 イオンヘッド・手元電極:ABS樹脂(めつき処理) コットンストッパー:シリコーンゴム
製 造 国	中国
付 属 品	ACアダプター ..... 1個 コットンストッパー ..... 1個 トリートメントブック ..... 1冊 アクアリフトモイスチャーローション..... 試供品3回分

## 別売品



### オンリーミネラル アクアリフトモイスチャーローション

ナノ化した美容成分が角質層のすみずみまで浸透。  
オールインワンローション

商品名：オンリーミネラル アクアリフトモイスチャーローション

(販売名:アクアL モイスチャーローション)

内容量：150mL

品 番：OM12041



### フェイササイズPlus専用 スカルプヘッド

大きめのヘッドで頭皮を心地よく刺激します。

商 品 名：フェイササイズプラス スカルプヘッド

品 番：RRSE113

外形寸法：約W54×D40×H25(mm)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.23)に  
お問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

<http://www.ya-man.com/>



## ●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品は除く)。
- ・保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、送料ご負担のうえ実費で修理させていただきます。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
  5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。  
(ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。  
(ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ト) 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。  
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。  
(リ) 保証書のご提示がない場合。  
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

### ■本製品の保証・修理などに関するお問い合わせ

**ヤーマンコールセンター ☎ 0120-776-282**

受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。ぜひご利用ください。

No. \_\_\_\_\_

## 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器		型番	IB-19
形名	フェイササイズPlus			
お客様	ご芳名	様		
	ご住所	〒□□□-□□□	（　　）	
※お買い上げ日	年 月 日		象部分	期間
			本体	お買い上げ日から 1年間
※販売者名	店名・住所・電話  ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。			
修理メモ				

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままで、本書は有効とはなりません。空欄は予めお客様ご自身でご記入ください。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

## ・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

## ・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

TEL 0120-776-282

※9:00～17:00(土・日・祝日除く)

[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

IB19-2-001