

No. \_\_\_\_\_

## 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	IB-30T
形名	吸引エステローラー リポボディ スリム エクストラ		
無料修理保証	対象部分: 本体		期間: お買い上げ日から1年間
※販売者名 店名・住所・電話	<b>見本</b> ご購入日のうち6ヶ月を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンカールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。  
 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。  
 (ロ) お買い上げ後の転倒・落などによる故障および損傷。  
 (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
 This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに記載した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- ・個人情報の取扱いについて  
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

## 利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンカールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

IB30T-1-002X

美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用


保証書付

## 取扱説明書

家庭用美容器  
吸引エステローラー  
リポボディ スリム エクストラ

ACETINO  
Electro Beauté

IB-30T

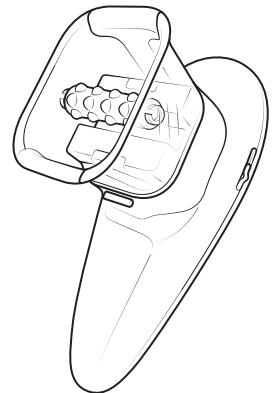

## もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
使いかた	11
使い終わったら	18
こんなときには	20
アフターサービス	24
●製品仕様	25
●保証について	26
保証書	27

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品をほかの人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



**危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



**危険**

次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電子機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



**警告**

次に該当する人は使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。

- 妊娠中の人の、授乳中の人の、生理中の人の皮膚に異常、または障害のある人
- アレルギー体質の人、敏感肌の人
- アザ(紫斑)のできやすい人
- 皮膚感覚の弱い、または過敏な人
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- 皮膚に炎症やかゆみ、ホテリなどの異常のある人
- 物理的刺激などによる病的なしみのある人
- 体质、疾患または特定薬剤の長期使用等により、出血傾向にある人
- 疲労の激しい人
- 体調のすぐれない人



**禁止**

次のような場合、または部位には使用しない。

事故、肌や身体のトラブルを生じるおそれがあります。

- 急性疾患
- 有熱性疾患
- 感染症疾患
- 内臓疾患
- 糖尿病
- 切り傷
- 手術部位(整形含む)
- 膨らんだホクロ
- 酒気帯び
- 顔
- 首
- 心臓疾患
- 血圧異常時
- 悪性腫瘍
- 結核性疾患
- できもの等の皮膚疾患
- 骨折部位
- 月経時の腹部
- ウィルス性のイボ
- 口内や陰部などの粘膜
- 眠気を誘う薬を服用中の場合
- 乳輪・乳首



**禁止**

※ご自分で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



**必ず守る**

交流100V~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。



**禁止**

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。



**分解禁止**

分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



**禁止**

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、製品が故障する原因となります。

## 警告



**無理な扱い  
禁止**

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

**プラグを抜く**

本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。感電・ショート・発火の原因となります。

**ACアダプター  
を抜く**

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。感電・ショート・発火の原因となります。

**発火注意**

火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所やほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂の原因となります。

**水場使用  
禁止**

本体やACアダプターのコードなどに水がかからないようにする。また、水場では使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。

**傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止**

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しみがゆいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

**ACアダプター  
を抜く**

使用しないときは必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。

**ACアダプター  
を抜く**

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし、ACアダプターをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

**タコ足配線  
禁止**

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。

**発熱時  
使用禁止**

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。破損・発火の原因となります。

**使用者の  
制限**

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。事故やケガをするおそれがあります。

**使用者の  
制限**

自分で意思表示ができる人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。事故やケガをするおそれがあります。

## 警告



**不安定な場所に置かない。  
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。**

本体が故障する原因となります。また、足の上などに落とすとケガの原因となります。

### 落下禁止

**必ず守る**

使用中に疲労を感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

**必ず守る**

使用時間を守って使用する。過度の使用は肌を傷める原因となります。1部位2~3分を目安に使用し、5分以上使用しないでください。

**必ず守る**

肌表面にピリピリした痛みを感じた場合は、EMSの出力を下げたり、部位をずらして使用する。またはジェルや水を補充する。そのまま使用すると、肌を傷める原因となります。

**必ず守る**

本体を1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントする。止めたままトリートメントすると、肌に紫斑(しはん)ができるなど、肌を傷める原因となります。

**必ず守る**

力を入れて肌にこすり付けない。肌を傷める原因となります。

**必ず守る**

EMS使用時はヘッドと肌との間に、常にジェルや水があるように、途中でジェルや水を補充する。そのまま使用すると、肌を傷める原因となります。

## 注意



## ⚠ 注意



顔に使用しない。

本製品は、体専用です。肌に紫斑ができるなど、肌を傷める原因となります。



初めて使用する前に必ずパッチテストを行ってから使用する。使い始めや慣れるまでは、LIPOモードは1、LIPO+EMSレベルは1から使用する。EMSの刺激を感じなくても無理にレベルを上げない。事故やケガの原因となります。身体にならしてからレベルを調整してください。



電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。ほかの電気製品(電気毛布・敷布・こたつなど)との同時使用はしない。ケガや本体が故障する原因となります。



ペットには使用しない。  
ケガをするおそれがあります。



肌の弱い人は、同じ箇所に3回以上使用しない。

肌に紫斑ができるなど、肌を傷める原因となります。



強く吸いすぎたと感じた場合は、速やかにリリースボタンを押し、肌からカップを離す。肌に紫斑ができるなど、肌を傷める原因となります。



手にジェルや水が付いたまま使用しない。

手が滑って思わぬ事故を招いたり、本体とボタンのすき間に入り込み故障の原因となります。



カップを本体にしっかりと奥まで差し込んで固定する。

吸引の力が弱まったり、故障の原因となります。



本体をアルコール・シンナー・ベンジン・ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与えるおそれがあります。

## ⚠ 警告



必ず交流100~240Vで使用する。(保証は国内のみ)

火災・感電の原因となります。

※海外からの修理保証への依頼には日本国内で配送、受取が可能な連絡先、住所が必要となります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。


発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。  
必ずご確認のうえご使用ください。


- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

# 各部のなまえ

## ●本体

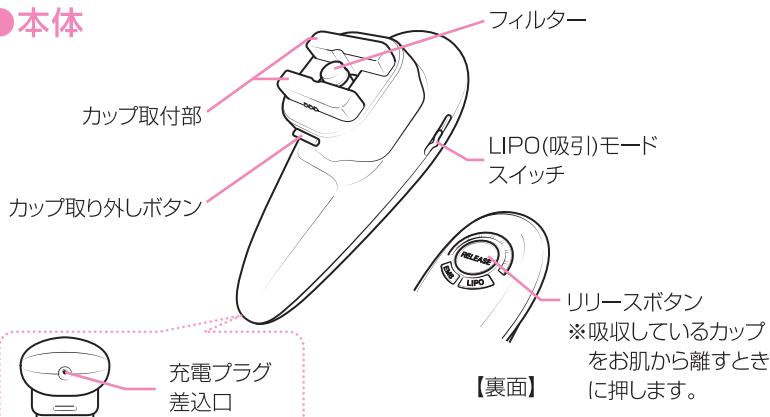

### ・カップ(小)

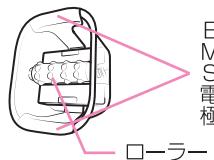


腕などの狭い範囲への  
使用におすすめです。

### ・お手入れ用ピンセット

フィルターを交換するときに  
使用します。


### ・充電台

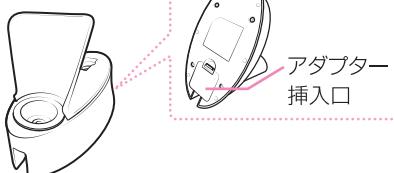

ACアダプターは購入時、充電台に取りつけてあります。


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

### ・カップ(大)

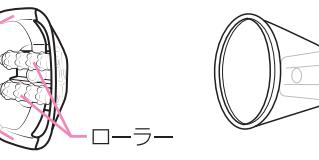

脚やお腹などの広い範囲  
への使用におすすめです。

### ・バストカップ

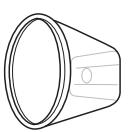

バストケアにおすすめです。


### ・お掃除用ブラシ

カップやローラーをお掃除  
するときに使用します。

### ・ACアダプター

※必ず付属のものを使用してください。


ACアダプター

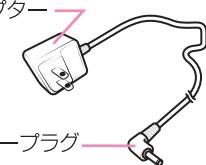

アダプタープラグ

# ご使用の前に

## 操作表示部と操作方法

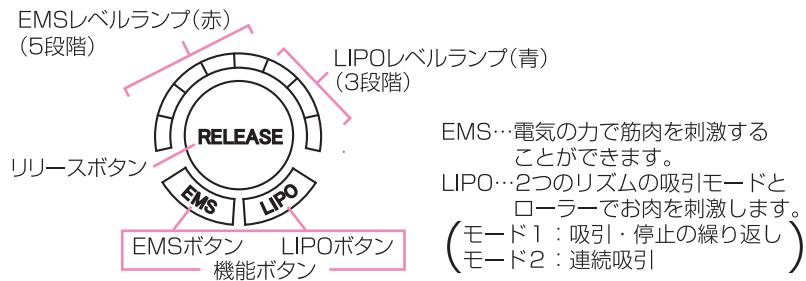

## ●機能ボタン(EMSボタン/LIPOボタン)

EMSボタンを約3秒長押しすると、EMSが開始します。EMSがオンの状態でEMSボタンを押すと下記の順番でEMSレベルが変わり、EMSレベルランプの点灯(赤)でレベルを表示します。  
※使い始めや、慣れるまではレベル1からご使用ください。

レベル1(電源オン)→レベル2→レベル3→レベル4→レベル5

LIPOボタンを約3秒長押しすると、吸引が開始します。LIPO(吸引)がオンの状態でLIPOボタンを押すと下記の順番で吸引レベルが変わり、LIPOレベルランプの点灯(青)でレベルを表示します。  
※使い始めや、慣れるまではレベル1からご使用ください。

レベル1(電源オン)→レベル2→レベル3

※電源がオンのとき、EMSボタンまたはLIPOボタンを約3秒長押しすると、電源がオフになります。

※ボタンを押してオフにしなくても、動作開始から約10分経過すると、自動的に電源がオフになります。

## 充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・購入後初めて充電を行う際は、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。また、充電をしながら本製品の操作はできません。

## ●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約2~3時間	約30分

※使用環境 室温約25℃において  
※満充電直後の動作時間です。  
※電池の残量や使用環境によって、  
充電時間は前後します。

## ●充電のしかた

### <充電台を使用する場合>

1 ACアダプターをコンセントに差し込む。

2 本体の充電プラグ差込口と充電台の充電プラグを合わせて取り付ける。


- ・本体のランプが点滅し、充電が開始されます。ランプが消灯したら充電完了です。
- ・ランプが点灯しない場合は、本体の向きを確かめてください。右図の向きになるように本体を置いてください。
- ・電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。



3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

### <充電台を使用しない場合>

1 充電台のアダプター挿入口のふたを開ける。

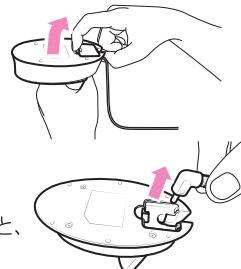

2 アダプタープラグを持って充電台から取り外す。

※外出先で使用する際は、充電台を取り外すと、持ち運びしやすくなります。

3 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。

4 ACアダプターをコンセントに差し込む。

- ・必ず専用のACアダプターを使用してください。
- ・ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないようにしてください。
- ・本体のランプが赤点滅し、充電が開始されます。ランプが消灯したら充電完了です。

5 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。



### 警告

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。

## カップの取り付けかた／取り外しかた


使用部位に合わせてカップ(小)、またはカップ(大)、バストカップのいずれかを取り付けてから使用してください。

### ●取り付けかた

1 フィルターが取り付いていることを確認する。  
※取り付いていない場合は必ずフィルターを取り付けてください。


2 本体のカップ取付部とカップの形状を合わせて、カチッとなるまで、カップを押し込む。

- ・カップが本体から外れないように、必ず根元まで取り付けてください。しっかりと取り付いてないと吸引しない場合があります。

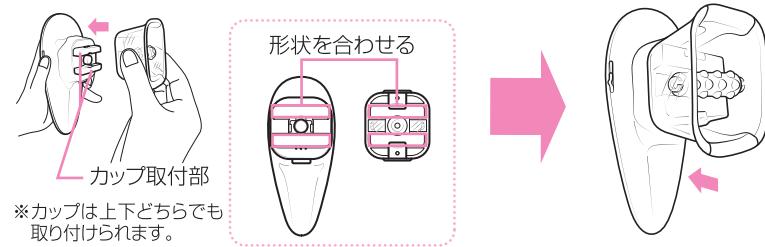

### ●取り外しかた

1 カップ取り外しボタンを押しながら、カップを引っ張り取り外してください。

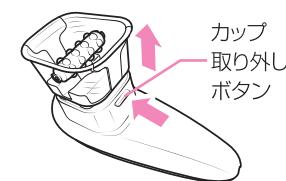

### 警告

必ずカップ取り外しボタンを押してカップを本体から取り外す。無理に取り外すと破損の原因となります。

# 使いかた

## 使用上のご注意

お肌がやわらかい人や皮膚のたるんでいる部位、または使いかたによってはカップがお肌に吸い付き、離れにくい場合があります。しばらく経つと紫斑(しほん)になるおそれがありますので、以下の項目を必ず守ってください。

※万一、紫斑ができた場合は、ただちに使用を中止してください。紫斑の程度にもよりますが、1週間程度で自然に治ります。

### ●使用時間をする。

1部位2~3分程度、全身で1回30分以内を目安にご使用ください。

1部位に5分以上使用しないでください。

### ●顔や首に使用しない。

### ●本体は1箇所に止めずに、常に移動させながらトリートメントする。

### ●力を入れて肌にこすり付けたり、強く押し当てたりしない。

### ●強く吸いすぎたと感じた場合は、速やかにリリースボタンを押し、肌からカップを離す。

### ●初めて使用する前に、必ずパッチテストを行ってから使用する。

### ●使い始めや慣れるまではLIPOモードは1、LIPO・EMSレベルは1から使用する。

### ●長時間使用せず、1部位5分以内の使用時間を守る。

### ●カップを本体にしっかりと奥まで差し込んで固定する。吸引の力が弱まる原因となります。

### ●お肌にジェルや水を塗ってから使用する。お肌の表面が乾いた状態だとカップが滑らかに移動できない場合があります。

### ●手にジェルや水が付いたまま使用しない。手が滑って思わぬ事故を招いたり、本体とボタンのすき間に入り込み故障の原因となります。

### ●吸引後は一時にお肌が赤くなることがあります。赤みが1日以上経過しても引かない場合は直ちに使用を中止してください。


赤みがなくなりましたら、お肌の状態をみてご使用ください。

## カップの外しかた

初めてご使用になるときは、必ず二の腕などの目立たないところでカップを離す練習をしてください。




お肌からカップを離すときは、  
リリースボタンを押す

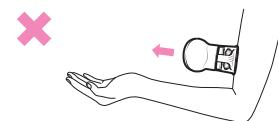

## トリートメントのしかた

### 1 カップを取り付ける。

- ・カップの取り付けかたについては、「取り付けかた」(P.10)を参照してください。

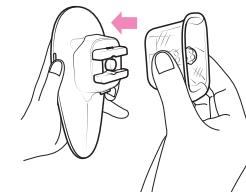

### 2 使用したい機能ボタン(EMSボタン/LIPOボタン)を長押し(約3秒)し、電源をオンする。

- ・選択した機能のレベルランプが点灯します。

### 3 機能ボタン(EMSボタン/LIPOボタン)を押して機能を選択する。

### 4 EMSボタン、LIPOボタンを押してそれぞれのレベルを選択する。

※使いはじめはレベル1からご使用ください。

※バストカップ使用時はEMSを使用できません。

## 5 LIPOモードスイッチをスライドさせて、モードを選択する。


### <モード1 吸引・停止 繰り返し>

吸引と停止を継続的に繰り返します。


※初めてお使いになるときは、モード1から使用してください。

### <モード2 連続吸引>

停止することなく、連続して吸引し続けます。

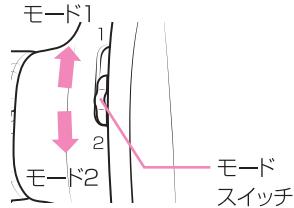

※お肌からいつでもカップを離せるよう、リリースボタンに指をそえて、本体を持ってください。

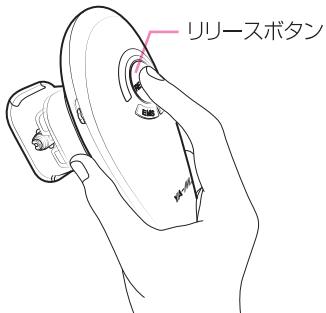

## 6 使用したい部位にジェルや水をつける。

※お肌の表面が乾いた状態だとカップが滑らかに移動できない場合があります。

※手についたジェルや水はよくふいてからトリートメントしてください。

手が滑りやすくなり、思わぬ事故を招いたり、本体とボタンのすき間にジェル等が入ると、故障の原因となります。

## 7 カップをお肌に密着させ、トリートメントする。

・カップを常に移動させてトリートメントします。

(動かす早さの目安: 1秒間に2~3cm)

・1部位2~3分を目安にトリートメントしてください。

・お肌がやわらかい人や皮膚のたるんでいる部位は、お肌を引っ張り、伸ばしながら移動させてください。

・お肌に強く押しあてないでください。

・お肌に密着したカップを離す場合は、リリースボタンを押してください。

・部位ごとのトリートメントのしかたについては、「トリートメントのポイント」(P.15)を参照してください。



## 8 トリートメントが終わったら、機能ボタン(EMSボタン/LIPOボタン)を長押し(約3秒)し電源をオフにする。

・電源を入れてから10分で自動的に電源がオフになります。

●吸引後は一時にお肌が赤くなることがあります。赤みが一日以上経過しても引かない場合はただちに使用を中止してください。

赤みがなくなりましたら、お肌の状態をみてご使用ください。

●長時間使用せず、1部位5分以内の使用時間を守る。

過度の使用は肌を傷める原因となります。

●顔や首には使用しない。

●本体を1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントする。

●肌の弱い人は、1回のトリートメント中に同じ箇所に3回以上使用しない。

●力を入れて肌にこすり付けたり、強く押し当てるといしない。

●電源をONにした状態で、他の美容器や電気製品に接触させない。ケガをしたり、本体が故障する原因となります。

●EMSの刺激を感じなくとも無理にレベルを上げない。身体にならしてからレベルを調整してください。

●肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、一旦お肌から離し、出力を下げたり、部位をずらして使用する。またはジェルや水を補充する。

そのまま使用すると、肌を傷める原因となります。



注意

## トリートメントのポイント

お肌の表面が乾いた状態では、カップを滑らかに移動できない場合があります。上手にトリートメントをするために、お肌にジェルや水を塗ってから本製品をご使用ください。

手についたジェルや水はよくふいてからトリートメントしてください。手が滑りやすくなり、思わぬ事故を招いたり、本体とボタンのすき間にジェルが入ると、故障の原因となります。

※ジェルや水を使用した場合は、使用後に必ずカップとローラーを水洗いしてください。

※強く吸いすぎたと感じた場合は、速やかにリリースボタンを押し、肌からカップを離してください。肌に紫斑ができるなど、肌を傷める原因となります。

※トリートメントに慣れるまでは、LIPOモードは1、LIPO・EMSレベルは1でご使用ください。


※カップが移動しづらい場合は、小カップを使用するか、大カップを使用のときは、RELEASEボタンを軽く押しながらスライドさせてください。またはジェルを追加してください。

## ●使用できる部位


腕・脚・お腹・背中・腰・ヒップ・バスト(バストカップ装着時)に使用できます。  
お顔や首は肌トラブルの原因となるため、使用しないでください。

## ●お腹まわり・ウエスト

●腰上からそけい部に流し込むように移動させてください。

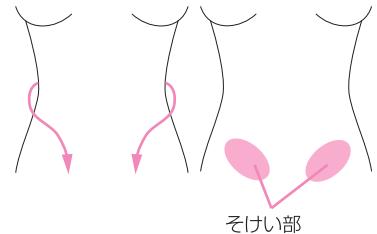


●左右に大きく動かしてほぐします。  
※おへそには使用しないでください。

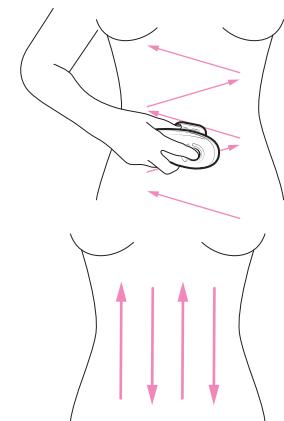

●胸の下と下腹部の間を上下するように移動させます。最後はそけい部に向かって流し込みます。


## ●脚

●ひざ下全体を上下させるように移動させ、最後はひざ裏に流し込みます。

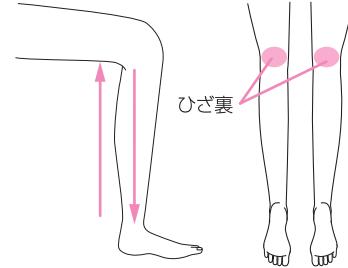

●太もも全体を上下させるように移動させ、最後はひざ上から脚の付け根に向かって流し上げます。

※たるんでいる部位では肌を引っ張り、伸ばしながら移動させてください。  
肌トラブルの原因となります。

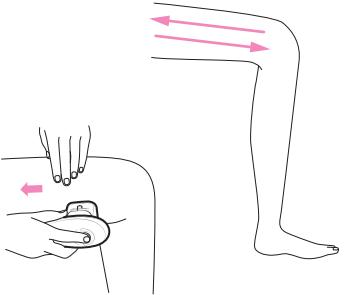


## ●ヒップ

●ものの付け根から上へ向かって、ヒップアップさせる感覚で移動させます。



## ●二の腕

●ひじと腕の付け根の間を移動させ、最後は付け根へ向かって流します。

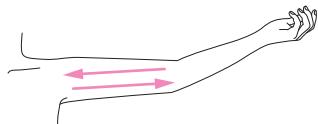

# 使い終わったら

## お掃除のしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。



### 警告


お掃除の際は、必ず電源をオフにする。

感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体からカップを取り外す。

- ・カップの取り外しかたについては、「取り外しかた」(P.10)を参照してください。

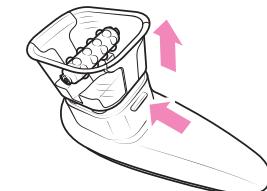

3 お手入れ用ピンセットを使ってフィルターを交換する。

交換の目安：1ヶ月に1回程度

※吸引が弱くなってきたと感じたらフィルターを交換してください。(P.24)



4 カップとローラーについている汚れを洗い流す。

- ・ジェルや水などを使用した場合は、しっかりと汚れを洗い流してください。
- ・取りにくい汚れは、お掃除用ブラシをお使いください。



5 タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れやカップとローラーの水分を拭き取る。

- ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ・本体は防水仕様ではありません。決して水洗いしないでください。





## ●バスト

※バストカップをご使用ください。カップ(小)、カップ(大)は使用しないでください。  
※EMSはご使用できません。バストカップ装着時はEMSを出力しないでください。  
※強く吸いすぎたと感じた場合は、速やかにリリースボタンを押し、肌からカップを離してください。

●背中、脇下からバストの上に向かって流し込みます。

※バストには、LIPO モード1・レベル1でご使用ください。

※乳輪・乳首には使用しない。

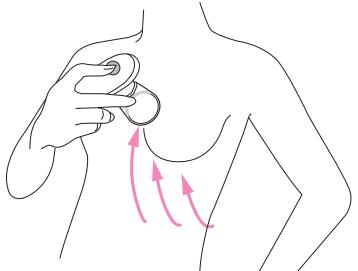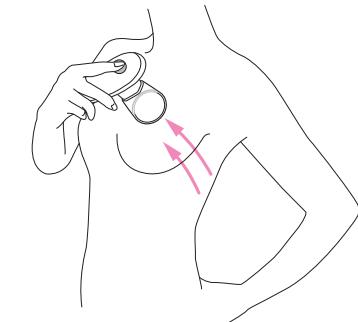

●お腹、脇腹から、バストの内側を通り、バストの上に向かって流し込みます。

※バストには、LIPO モード1・レベル1でご使用ください。

●顔や首には使用しない。

●本体は1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントする。  
●長時間使用せず、1部位5分以内の使用時間を守る。  
●肌の弱い人は、1回のトリートメント中に同じ箇所に3回以上使用しない。

●力を入れて肌にこすり付けたり、強く押し当てたりしない。

●強く吸いすぎたと感じた場合は、速やかにリリースボタンを押し、肌からカップを離す。

肌に紫斑ができるなど、肌を傷める原因となります。

●吸引後は一時的にお肌が赤くなることがあります。赤みが1日以上経過しても引かない場合はただちに使用を中止してください。

赤みがなくなりましたら、お肌の状態をみてご使用ください。

●バストカップ使用時はEMSを出力しないでください。



# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

### こんな症状

### 考えられる原因

### 処置方法

電源が入らない

EMSボタン・LIP0ボタンを押していない

EMSボタン・LIP0ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください

充電しても数分しか使えない

ACアダプターで充電している

本製品は充電中には使用できません  
充電をしてからACアダプターを外してご使用ください

充電が開始されない

充電不足

充電してください(P.8~9)

電池の寿命

販売店またはヤーマン  
コールセンター(P.24)  
にご連絡ください

ACアダプターがコンセントに差し込まれていない

ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.8~9)

アダプタープラグが充電台に差し込まれていない

アダプタープラグを充電台に差し込んでください(P.8~9)

本体が充電台にしっかりとセットされていない  
／本体の向きが合っていない

本体を充電台の充電プラグに差し込んでください(P.8~9)

本体が熱い

1時間以上間をあけてから使用してください

## 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法	こんな症状	考えられる原因	処置方法
EMSが痛い	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ヘッド面全体が肌に触れていない</li> <li>→ レベルが高い</li> <li>→ お肌が乾燥している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ カップ全体が肌に触れるようにしてください</li> <li>→ EMSボタンでレベルを下げてください</li> <li>→ ジェルや水をお肌に塗ってください。</li> </ul>	使用中に本体を移動できない	強く吸引しすぎている	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ モード2からモード1に変更して使用してください</li> <li>→ リリースボタンを押してカップの吸引を解除してください</li> <li>→ お肌を引っ張り、伸ばしながら使用してください</li> </ul>
EMSがない(感じない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 使用したい部位をぬらしていない</li> <li>→ レベルが低い</li> <li>→ 感じにくい部位にあてている</li> <li>→ 感じ方には個人差があります</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ジェルや水でたっぷりとぬらしてください</li> <li>→ EMSボタンでレベルを上げてください</li> <li>→ あてる部位を変えてください(P.15)</li> </ul>	お肌の表面が乾燥している		お肌にジェルや水をたっぷり塗ってください
吸引する力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ カップがお肌に密着していない</li> <li>→ 充電残量がない</li> <li>→ カップが正しく取り付けられていない</li> <li>→ カップが汚れている</li> <li>→ フィルターが汚れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ カップにすき間ができるないようにお肌にあててください</li> <li>→ 充電してください(P.8~9)</li> <li>→ カップをしっかりと取り付けて固定してください(P.10)</li> <li>→ 使用後はカップとローラーを水洗いしてください(P.18)</li> <li>→ フィルターを交換してください(P.18)</li> </ul>			

# アフターサービス

## よくあるご質問

Q	A
使用時間、使用頻度の目安はありますか?	<ul style="list-style-type: none"><li>●全身で1回30分以内(1部位2~3分程度) 1部位につき週に2~3回 ※あくまで目安となります。ご自分のお肌の様子を見ながらご使用ください。</li><li>●1部位に5分以上使用しないでください。</li><li>●お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。</li></ul>
肌が赤くなってしまい ます	お肌を吸引してトリートメントしているため、一時的にお肌が赤くなることがあります。ただし、あまり強く吸引しすぎると、内出血するおそれがあります。 吸引が強いと感じる場合は、LIPOモードをモード1で使用してください。また、1箇所に止めず、常に移動させながらトリートメントしてください。
本体を移動しにくいの ですが	<ul style="list-style-type: none"><li>●お肌の表面が乾いた状態では、カップを滑らかに移動できない場合があります。上手にトリートメントするために、お肌にジェルや水を塗ってから本製品をご使用ください。</li><li>●お肌がやわらかい人や皮膚のたるんでいる部位は、お肌を引っ張り、伸ばしながら移動させてください。</li></ul>
カップが肌から離れないのですが	リリースボタンを押すと、お肌からカップを離すことができます。
お手入れや保管はどう するのですか?	<ul style="list-style-type: none"><li>●乾いた布で本体表面の汚れを拭き取った後に、保管してください。</li><li>●カップやローラーの汚れを水洗いしてください。 特にジェルや水を使用した後は、必ず水洗いしてください。</li><li>●高温多湿の場所では保管しないでください。</li></ul>
お風呂場で使用できま すか?	本製品は防水仕様ではありません。 水周り、サウナ、湿度の高い環境や高度の高い環境では使用しないでください。

こんなときには

## 充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

## 消耗品について

- カップ(小)、カップ(大)、バストカップ、フィルターは消耗品です。(保証対象外)
- 必要な際は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

## 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

### ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

固定電話など

**0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

**0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと  
お電話がつながりやすくなっています。

アフターサービス

## ●製品仕様

定 格	DC5.0V 0.5A
消費 電 力	約3W(充電時)
充 電 時 間	約2~3時間 ※使用環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	約W154xD63xH62(mm)(本体のみ・カップは除く)
製 品 質 量	約180g(本体のみ・カップは除く)
材 質	本体 :ABS樹脂 カップ :ポリカーボネート ローラー :ABS樹脂・シリコーンゴム
製 造 国	中国
付 属 品	充電台 ..... 1個 ACアダプター ..... 1個 (DC5.0V/0.5A) カップ(小) ..... 1個 カップ(大) ..... 1個 バストカップ ..... 1個 お手入用ピンセット.... 1個 お掃除ブラシ ..... 1個 フィルター ..... 10枚

## ●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間保証いたします(消耗品は除く)。  
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、  
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)に  
ご相談ください。