

美容家電のパイオニア

YA-MAN

保管用
保証書付


取扱説明書

ACETINO

Dual Cyclone

アセチノデュアルサイクロン

IB-35S

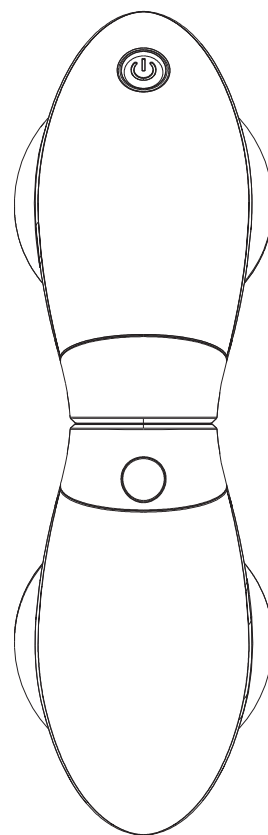

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
ご使用の前に	6
使いかた	8
使い終わったら	16
こんなときは	16
●アフターサービス	17
●製品仕様	17
保証書	裏表紙

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- ・注意事項は、危害や損害の大きさと切迫を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり*物的損害の発生が想定される内容。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



警告



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



無理な扱い 禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。
また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



いたんだ コードプラグ 禁止

電源コードやACアダプターが
いたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
ショート・火災・感電の原因となります。



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。
※海外からの修理保証への
依頼は日本国内での配送、
受取可能な連絡先、住所が
必要となります



警告

次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 医療機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
- 医師の治療を受けている人 ●成長過程の人 ●急性疾患
- 結核性疾患 ●発熱している人 ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体質 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病
- アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌の弱い人 ●疲労が激しい人
- 皮膚トラブルがある人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
- 眠気をさそう薬を服用中の人 ●妊娠中、生理中、授乳中
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人 ●歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷 ●整形手術をした部位 ●口内や陰部、粘膜など
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●にきび
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ●カユミやほてりのある部位
- 膨らんだホクロ ●ウイルス性のイボ ●のどぼとけ ●頭部
- 心臓の真上(みぞおち周り) ●皮膚の薄い部分(骨のすぐ上)
- まぶた、目のまわり、目のくぼみの周辺、眼球
- 目および耳の周辺 ●鼻骨

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



プラグ抜く

使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。
また、濡れた手で抜き差しはしない。コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。



必ず守る

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。また、タコ足配線しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

そのまま使用すると破損・発火の原因になります。



警告



必ず守る

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガをしたり、本体が故障する原因となります。



**落下衝撃
禁止**

不安定な場所に置かない。また、落としたり、ぶつけたりしない。

落下により故障やケガの原因になることがあります。



破裂注意

電子レンジや高圧容器にいれない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

火の中に投入・加熱しない。火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所では、放置使用しない。また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



**使用者の
制限**

子供への使用は避ける。
また、身体の不自由な人には付添なしで使用させない。
皮膚感覚の弱い人、意思表示の出来ない人は使用しない。

ケガをするおそれがあります。



必ず守る

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。
充電中の場合はACアダプターをコンセントから抜く。



必ず守る

充電する際は電源コードが無理な角度で曲がっていないか確認する。

電源コードは余裕を持って取り扱ってください。
無理な角度のまま使用すると故障の原因となります。



必ず守る

肌に異常がみられるときは使用を中止する。

必要以上に押し付けて使用すると赤くなりやすいのでご注意ください。個人差がありますが、通常赤みは時間の経過と共に引いていきます。使用中、使用後に肌に異常がみられる場合や、翌日以降も赤みが引かない場合は医師にご相談ください。



必ず守る

使用後は必ず電源を切る。

充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。



禁止

必要以上に押し付けて使用しない。
過度に押し付けると過熱による故障や肌を傷める原因になります。



必ず守る

ACアダプターに水など液体をこぼさないよう注意する。

万一こぼれたときは、ショート、感電の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



注意



必ず守る

顔に使用するときには親機のみで、リフティングアタッチメントをLOモードにして使用する。顔にはボディアタッチメントを使用しない。髪の毛を巻き込まないように注意する。



禁止

本製品を頭部に使用しない。
毛髪を巻き込むおそれがあります。顔や肩に使用する際は毛髪の巻き込みに注意してください。



禁止

強く押し当てず、1ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり1ヶ所に集中して使用すると肌を傷める可能性があります。



必ず守る

皮膚(脂肪)が柔らかい人、脂肪が厚い人は皮膚を伸ばすようにして使用する。

皮膚(脂肪)が著しく柔らかい方は、肌を傷める可能性があります。

皮膚(脂肪)が柔らかい方は、使用する部位の皮膚を伸ばすようにしてご使用ください。



禁止

衣類の上から使用しない。

衣類の上から使用すると、衣類を巻き込んだり、傷つけたりすることがあります。

衣類の上からの使用を避け、肌へ直接使用してください。但し、上記の皮膚(脂肪)が柔らかい方、脂肪が厚い方は【傷んでもよい】肌着の上からご使用いただいて構いません。安全性を高めることができます。



必ず守る

ボディアタッチメントを初めてご使用の際は、お腹や脚などに使用する場合でも、LOモードで使用する。

使い方に慣れてからHIモードにしてください。



禁止

本体を傾けて使用しない。

アタッチメントは肌に対して必ず垂直に、かつ軽くあててください。傾けて使用すると肌が引っ張られて肌を傷めるおそれがあります。



必ず守る

長時間使用せず、1部位1回5分の使用時間を守る。

二の腕などの細かい部位は、1回3分を目安とする。

長時間の連続使用はお避けください。過度なご使用は肌を傷める可能性があります。




禁止

床や家具、ペットなどに使用しない。

事故やケガ、故障の原因になります。

各部のなまえ




●本体

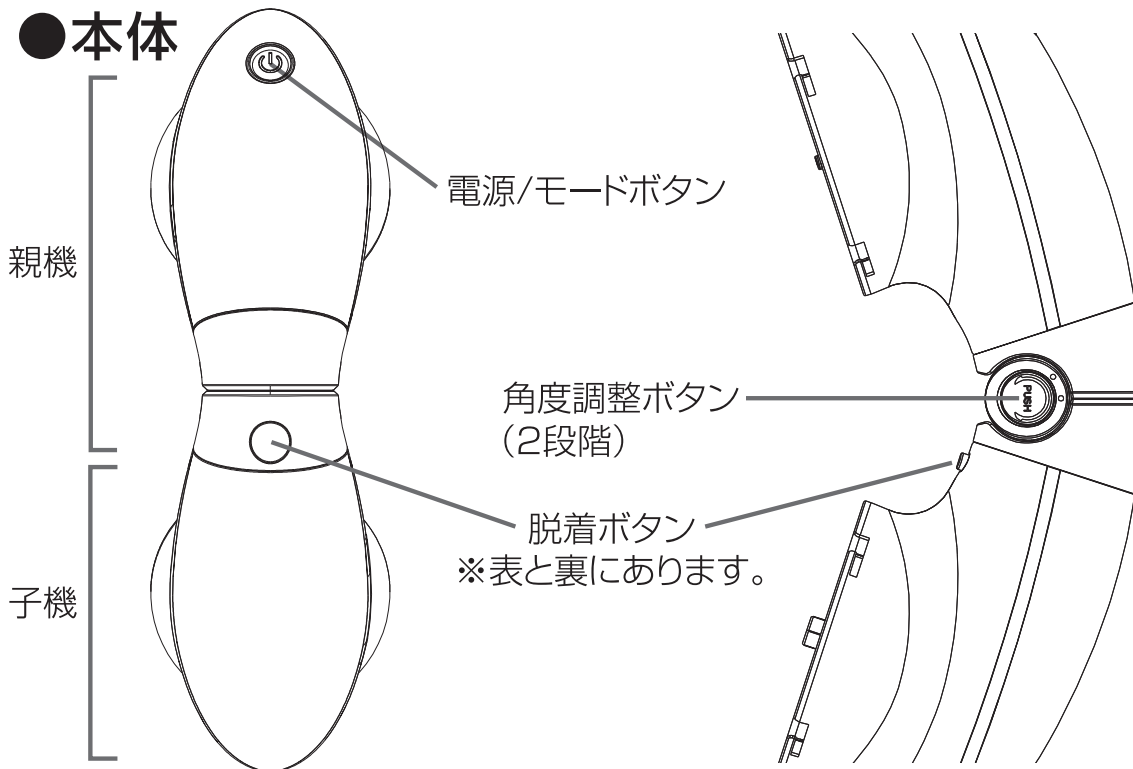

●アタッチメント


- ・ ボディアタッチメント
- ・ リフティングアタッチメント(フェイス用)

※お顔とボディと両方に使用できます。

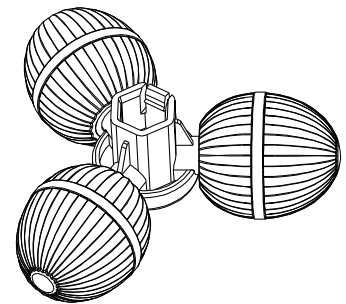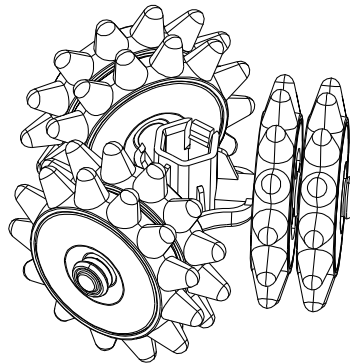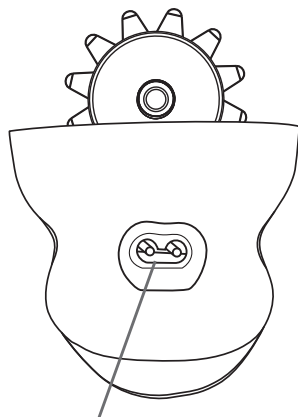

●付属品


- ・ ACアダプター

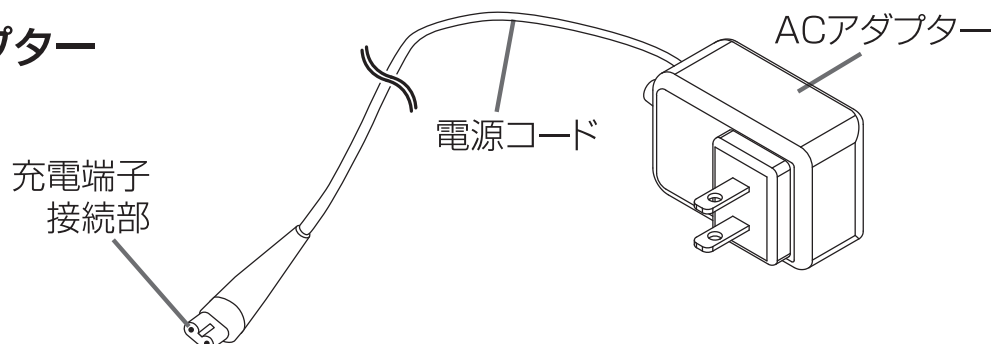

※本体・付属品のデザイン、仕様は、品質向上のため、予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

表示LED

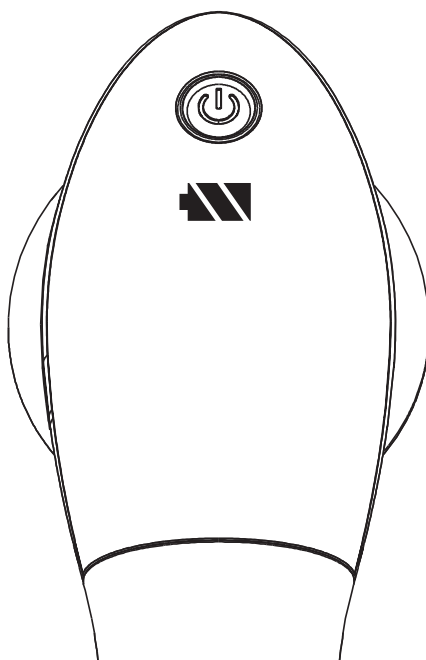


LOモード	ボタン周辺が青色に点灯します。
HIモード	ボタン周辺が赤色に点灯します。
充電時	充電中は  マークが点滅します。 充電が完了すると点灯に変わります。
停止機能	各モードのランプが点滅します。 ※8ページ「安全装置について」をご覧ください。
電池切れ	電池切れになると  マークが点滅します。
充電残量	 →  →  → 

充電のしかた

- 使い始め(または長期間使用しなかったとき)は充電を行ってください。
 - 使用中に電池が無くなると、マークが点滅し停止します。
 - 充電を開始する前に、必ず本体の水気をよく抜き取ってください。
- ※端子接続部に水滴が付着した状態で絶対に充電しないでください。

- 1 ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
- 2 端子接続部にACアダプターを奥までしっかり差し込んでください。

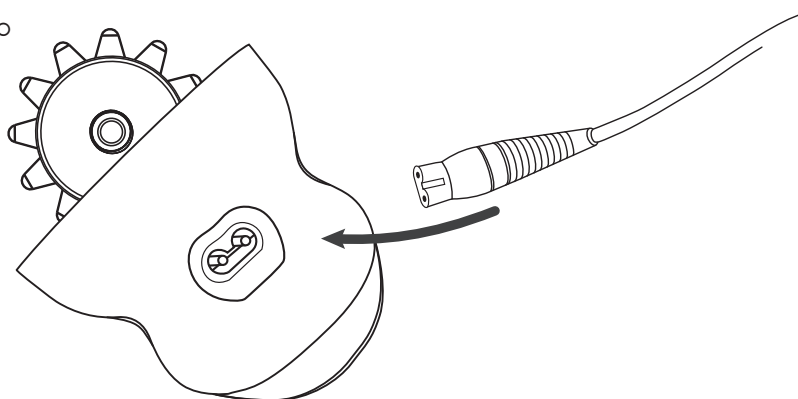

- 3 マークが点滅し、充電を開始します。
- 4 約4時間でマークが点灯し、充電が完了します。
ACアダプターを家庭用コンセントから抜いて、
本体を取り外してください。

- 目安として、約30分間使用することができます。
- ※使用できる時間は、環境や設定するモードにより異なります

※本商品はACアダプターを差し込んだ状態では使用できません。



注意

- ACアダプターをタコ足配線にすると充電されにくくなる場合があります。
- 壁のコンセントに直接接続してください。
- 10秒経っても表示ランプが点灯しない場合、ACアダプターが正しく差し込まれているか、本体が正しく装着されているか、もう一度確認してください。

使いかた

使用上の注意



注意

- ・強く押し当てず、1ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり1ヶ所に集中して使用すると肌を傷める可能性があります。
- ・長時間使用せず、1部位1回5分の使用時間を守る。
二の腕などの細かい部位は、1回3分を目安としてください。
長時間の連続使用は避けてください。
過度なご使用は肌を傷める可能性があります。
- ・皮膚(脂肪)が柔らかい人、脂肪が厚い人は皮膚を伸ばすようにして使用する。
皮膚(脂肪)が著しく柔らかい方は、肌を傷める可能性があります。
皮膚(脂肪)が柔らかい方は、使用する部位の皮膚を伸ばすようにして使用してください。または、【傷んでもよい】肌着を着用した上から使用すると肌を傷めにくくなります。
- ・一部位ごとに一旦スイッチをOFFにして次の部位に移る。
- ・心臓の上はお手入れをしない。
- ・骨のすぐ上(くるぶし、ひざ、ひじ等)、へそへの使用は避ける。
- ・本体を振り回さない。アタッチメントが外れてケガをする恐れがあります。
- ・アタッチメントを本体に取り付けた状態で、故意に手で回さない。
- ・せっけんやオイルがついた場合は必ず洗い落とし、本体を落とさないよう注意する。

使
い
か
た

安全装置について

長時間連続で使用したり、トリートメント中に本体を強く押し付け過ぎると回転が停止することがあります。

これは安全装置が働いた為であり、故障ではありません。

その際はLEDが点滅し、押し付け過ぎにより肌を傷めるおそれがあることをお知らせします。

強く押し当て過ぎている状態ですので、表示LEDが点滅しないよう、使用部位に軽く当ててください。

10秒間この状態が続くと安全装置が働き、自動的に電源がOFFになります。

防水性について

- ・本製品は防水性能を表すIPX7(JIS規格)に相当します。

※IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに製品を沈め、約30分間放置後に取り出したときに、製品内部に浸水がないことを意味します。

- ・シャワーや浴槽でご使用いただけます。
- ・充電する際は高温多湿な場所を避け、水気のない安定した場所で行ってください。
- ※ACアダプターは防水ではありません。

●本体の角度調節方法

本体の角度調整ボタンを押しながらカチッと音になるまで矢印の方向へ倒してください。
角度は2段階で調整可能です。


※必ず角度調整ボタンを押してから、角度を変えてください。

※親機と子機の接続部に、指を挟まないよう、十分にご注意ください。


※必ず電源をOFFにして行ってください。

※電源をONにしたままの角度調整はしないでください。

使
い
か
た

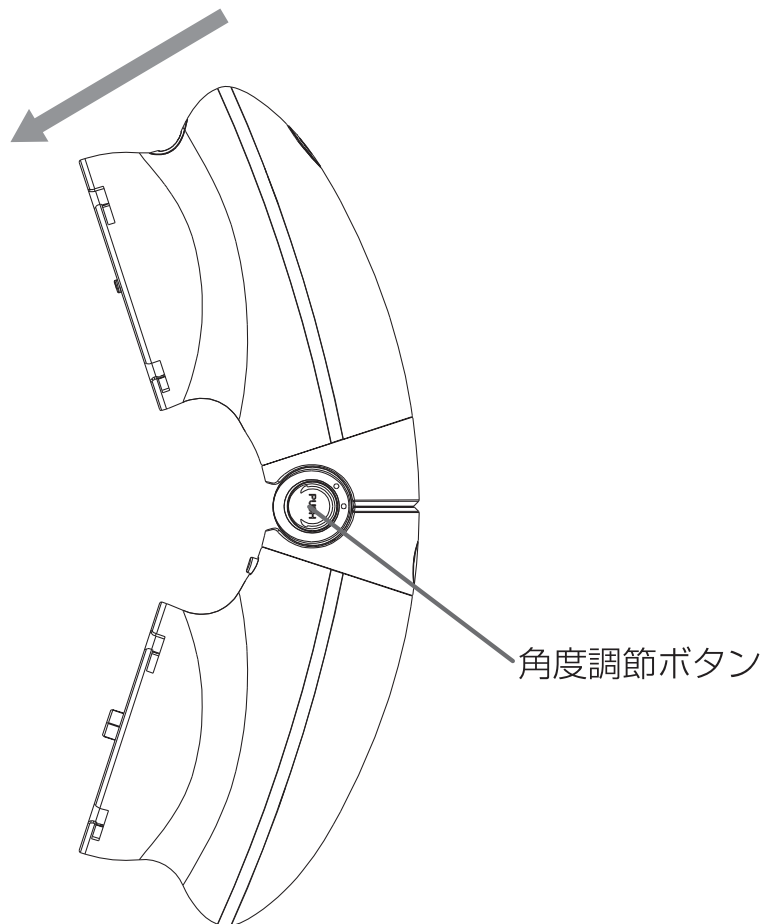


■開いた状態

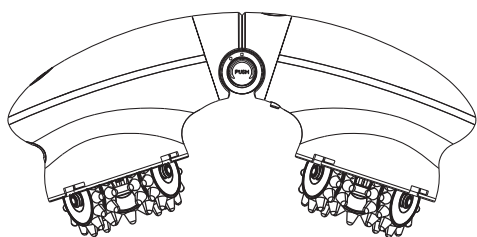

お腹、お尻など広い部分に

■閉じた状態

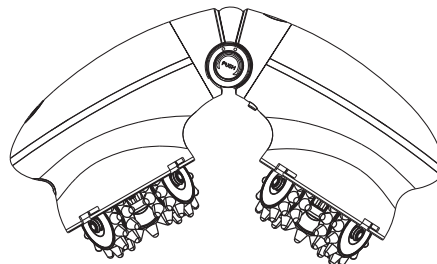


ふくらはぎ、二の腕など
細かい部分に

●本体の着脱方法

顔や細かい部分(腕・ふくらはぎ等)には、着脱し、親機のみで使用できます。
本体に付いている表裏の脱着ボタンを2つ同時に押しながら矢印の方向に引っ張ってください。

本体を戻す際は、向きを合わせ、カチッと音になるまで差し込んでください。

※顔に使用する場合は、必ず親機のみで使用して下さい

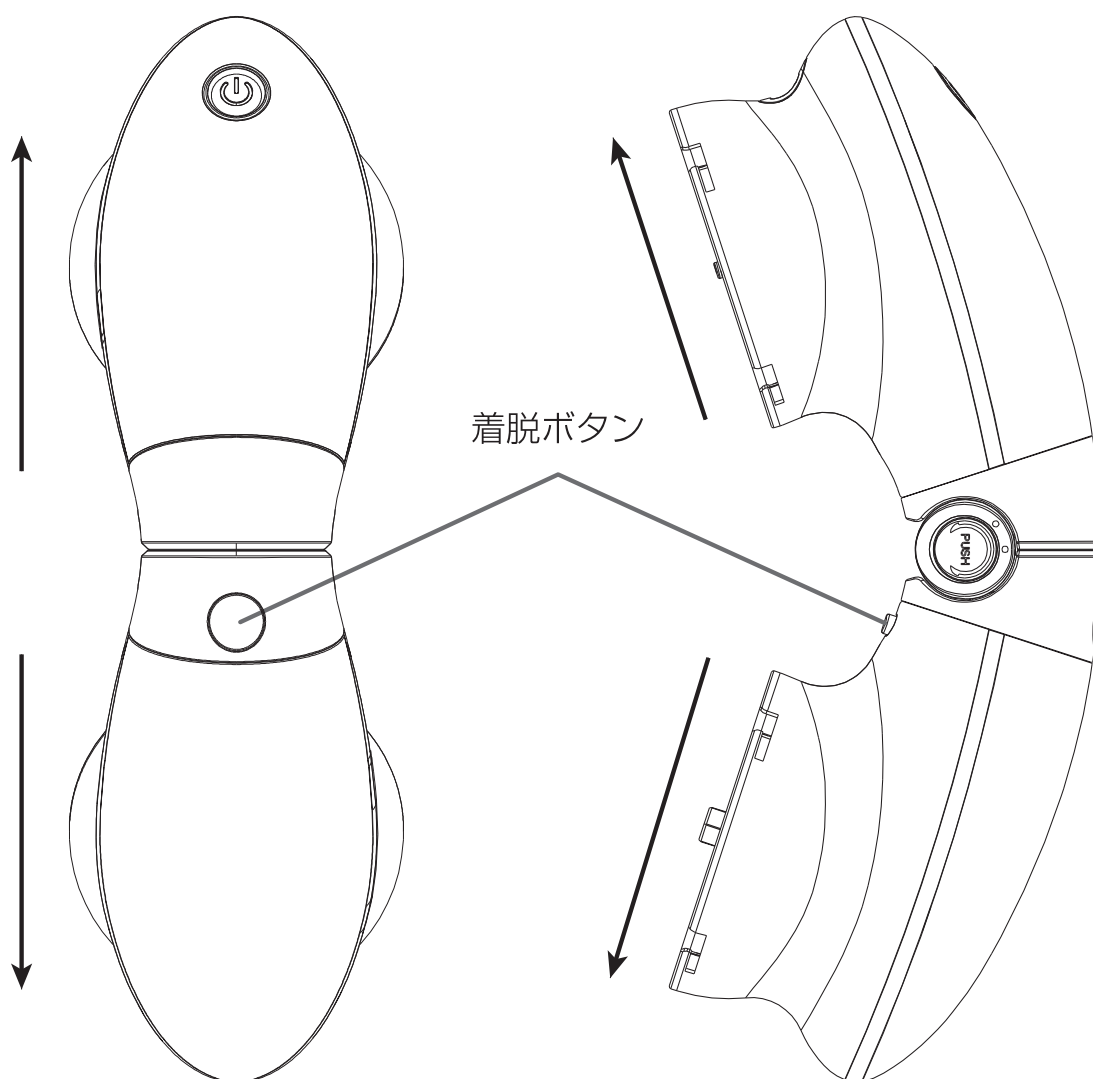

- ※着脱をした際、子機(電源ボタンがついていない方)は動作しません。
- ※親機と子機の接続部に、指を挟まないよう十分にご注意してください。
- ※着脱の際、本体を落とさないようご注意ください。
- ※着脱の際は、必ず電源をOFFにしてください。
- ※電源をONにしたままの着脱はしないでください。



●アタッチメントの着脱方法

本体のアタッチメント取付部をアタッチメントの本体取付部にまっすぐ差し込みます。取付部同士の向きが合わないとき差し込みにくいことがあります。差し込む向きを調節しながら取り付けてください。

取り外す際は、アタッチメントをつかみ、まっすぐに引き抜いてください。

※斜め方向や、回しながら引き抜こうとすると、取付部が変形するおそれがありますのでご注意ください。

取付け部の向き形状を確認する

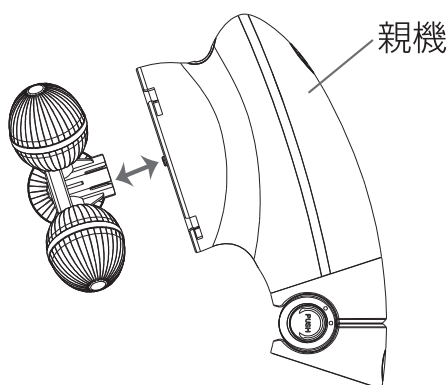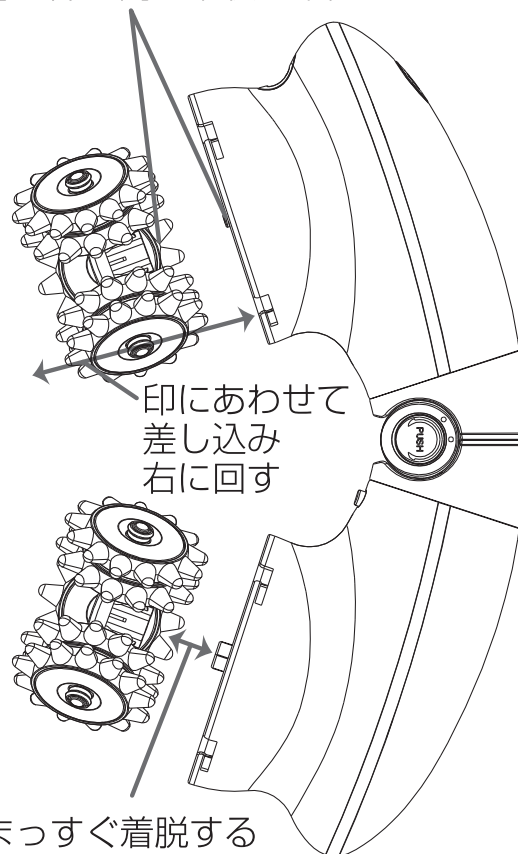

[フェイス]

[ボディ]




注意

- ・ リフティングアタッチメントを顔に使用するとき、必ずLOモードで親機のみで使用してください。
- ・ ボディアタッチメントはボディ専用です。顔には使用しないでください。ボディアタッチメントを初めてご使用の際は、お腹や脚などに使用する場合でもLOモードで使い方に慣れてから、HIモードにしてください。
- ・ 髪の毛を巻き込まないよう注意してください。

トリートメント開始手順

- 1 本体にアタッチメントを取り付けます。用途に合わせてボディ・リフティングアタッチメントを選んでください。
※アタッチメントの着脱方法は11ページ「アタッチメントの着脱方法」をご覧ください。

- 2 図のように本体を持ちます。
※使用部位に合わせて使いやすい持ち方で使用してください。
※中央付近をしっかりと握り、使用してください。
(端のみを持つと落下する恐れがあります。)
※せっけんなどが付いた場合は、しっかりと洗い流してから使用してください。

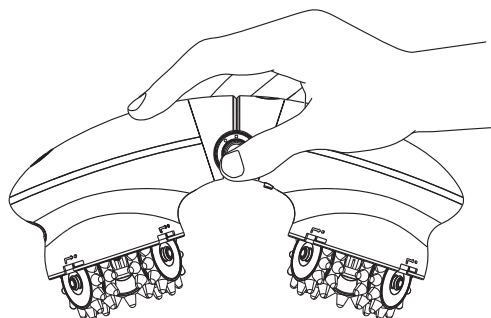

使
い
か
た

- 3 電源ボタンを約1秒長押しして電源をONします。

- ・電源をONするとLOモード(右回転)が自動的にスタートします。
 - ・電源ボタンを押すと下記のようにモードが切り替わります。
お好みのモードに設定してトリートメントしてください。
- ※回転方向は、アタッチメント側から見た時の方向です。



LOモード	低回転でボディ・顔に使用可能なモード
HIモード	高速回転でボディ専用のモード ※顔には使用しないでください。

- ・回転方向はお好みで選んで頂いて構いませんが、適度に回転方向を変えて頂き体にとって単調な刺激にならないようにしましょう。

- 4 13ページの「部位ごとの使用方法」に従って、体の各部位に使用します。

※1部位1回約5分、全身で合計30分の目安を守って使用してください。
二の腕などの細かい部位は、1回3分を目安としてください。

- 5 使用後は電源をOFFし、保管してください。

- ・電源ボタンを約2秒長押ししてください。

自動電源OFF

本製品は自動電源OFF機能を備えています。
各モードの動作開始時から約15分で電源がOFFになります。
トリートメントの途中でモードを変更しても、トリートメント開始から約15分で電源がOFFになります。

部位ごとの使用方法

ボディ


- ・ボディへの使用はお好みでHIモード、LOモードを選んで使用してください。
 - ・1ヶ所に固定して当てずに、常に動かしてください。また、強く押しあてないでください。
 - ・体毛のある部位は絡まるおそれがあるので、事前に剃ってください。
 - ・使用後白い粉状のものが付着することがありますが、これは肌の角質です。
 - ・使用後は肌を清潔に保つようにしてください。
- ※一部位1回約5分を目安に使用してください。
※二の腕などの細かい部位は、1回3分を目安としてください。

●おへそ周り、わき腹

[おへそ周り]


へその周りに当ててゆっくりと円を描くように移動させます。

※へそには当てないでください。

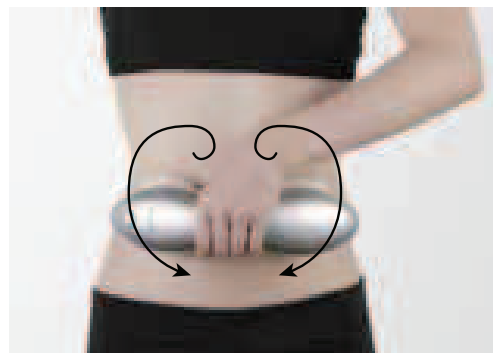

[わき腹]

わき腹に当ててゆっくり上下に移動させます。

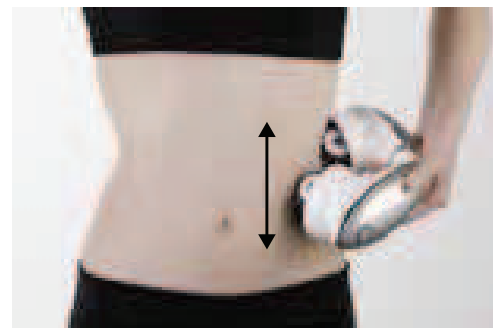


●足首～太もも

1 足首に当てて、内ももの付け根まで脚のラインに沿ってゆっくりと移動させます。

2 外側も同様に足首からももの付け根付近までゆっくりと移動させます。

※骨の出ている部位は避けてください。

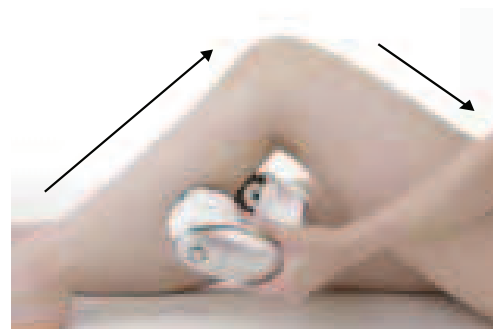

●おしり

ももの付け根からおしりの上部に向かって当てます。



●二の腕

ひじからわきの方へ向かって当てます。




使
い
か
た



注意

- ・強く押し当てない。1ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に押し付けたり、1ヶ所に集中して使用すると肌を傷めるおそれがあります。
- ・肌に対して傾けて使用しない。
必ず垂直にアタッチメントを軽くあててください。

強く押し当て過ぎて使用していると、回転が止まる事があります。
安全装置が働いた為であり故障ではありません。

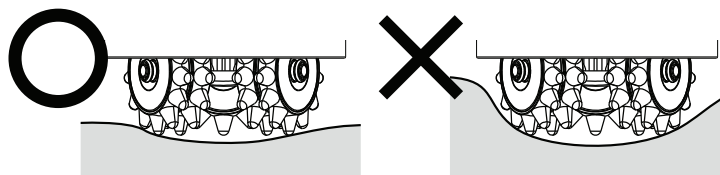

肌に食い込む程押し付けない

フェイス

必ず本体を着脱し、親機のみを使用する。

頬に軽く当て、持ち上げるように移動させます。

頬が持ち上がる回転方向で使用してください。

※必ずリフティングアタッチメントをLOモードで使用してください。


※回転を切り替える時は、一度顔からはなしてから切り替えてください。

※髪の毛の生え際付近に使用する際は髪の毛を巻き込まないように鏡を見ながら使用してください。

また、長い髪の毛は結んでからご使用ください。

※ピアス、イヤリングははずしてからご使用ください。

※眼のまわりには使用しないでください。

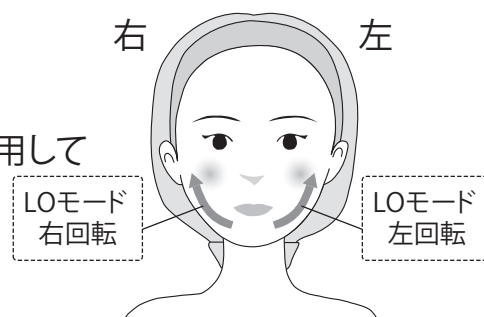

注意




フェイストリートメント時のご注意

安全のため次の注意を必ず守ってご使用ください。

守らないと肌を傷めるおそれがあります。

- ・肌には柔らかく当て、決して強く押し当てないでください。
- ・痛みや異常を感じた際はすぐに使用を中止してください。

- ・必ずLOモードを使用する。
- ・顔にはボディアタッチメントを使用しない。
- ・髪の毛を巻き込まないように注意する。
- ・顔の肌に対して傾けて使用しない。

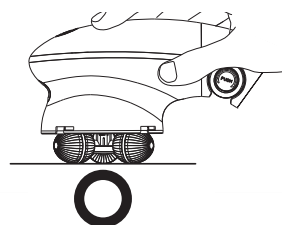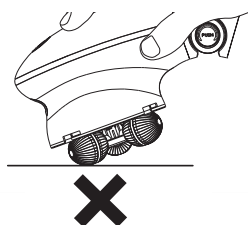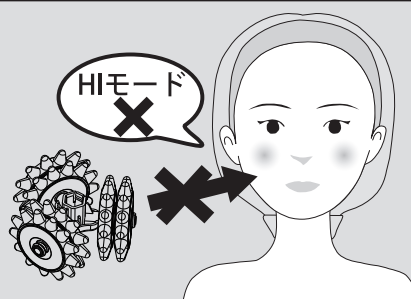

使い終わったら

お掃除のしかた

- 本体やアタッチメントに付いた汚れは使用後、毎回取り除いてください。
- 本体やアタッチメントは水洗いができます。
水洗い後は乾いた布や綿棒を使い、水気をよく拭いてください。
※水滴が付いた状態で放置しないでください。
本体やアタッチメントが劣化する恐れがあります。
※ACアダプターは防水ではありません。
- 収納する前にかたく絞ったタオルか、乾いた布で本体表面のほこりや水分を軽く拭き取ってください。
- 本体のアダプター差込口は綿棒などで水気をよく拭いてください。
洗剤やシンナー等の溶剤は、本体を傷めますので絶対に使わないでください。



使い終わったら／こんなときには

こんなときには

修理サービスを依頼する前に、下記の項目をご確認ください。

こんなときは	考えられる原因	対処法
アタッチメント が回らない	● 充電が不十分	充電してください。(P.7参照)
	● アタッチメントに異物が挟まっている	電源OFFにして取り除いてください。
	● 安全装置がはたらいしている	電源を切り、一時間程度クールダウンしてから使用してください。(P.8参照)
本体が熱い	● 長時間連続運転している	電源を切り、一時間程度クールダウンしてから使用してください。(P.12参照)
	● 強く押さえすぎている	押し当てる力を緩めてください。
	● アタッチメントに異物が挟まっている	電源OFFにして取り除いてください。
電源が切れる／ 表示LEDが 点滅する	● 強く押し当てている	安全装置が働いている可能性があります。 軽く当ててください。(P.8参照)
	● 15分経つと自動で電源が切れます	再度電源を入れ直してください。
	● 充電が不十分	充電してください。(P.7参照) ※約4時間の充電で約30分使用できます。

アフターサービス

●充電池について

- ・ 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・ 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・ 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

●廃棄について

- ・ 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・ 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) 携帯電話・PHS **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火~金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

●製品仕様

定 格	DC10V／0.5A
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約4時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	約W80×D255×H100 (mm)
製 品 質 量	約590 g(アタッチメントは除く)
付 属 品	ACアダプター 1個 ボディアタッチメント 2個 リフティングアタッチメント..... 1個

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	IB-35S
形名	アセチノデュアルサイクロン		
無料修理保証	対象部分：本体	期間：お買い上げ日から1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	見 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・ 個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/info/privacy.html>)をご参照ください。

・ 利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)



www.ya-man.com