



取扱説明書

家庭用美容器
フォトシャイン
IS-101

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~12)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

給水する


給水タンク、ミストタンクに給水して、本体に取り付けてください。



2

電源を オンにする


ON/OFFボタンを押してください。

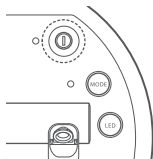

3

モードを選ぶ

MODEボタンを押してください。

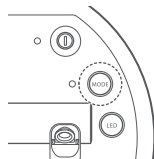

4

スチーム/ ミスト/LED を浴びる



5

終了する

本体を10分以上放置し、熱を冷ましてください。

安全上のご注意	p 3
各部のなまえとはたらき	p 13
お使いになる前に	p 17
使いかた	p 22
使い終わったら	p 29

お知らせ	p 40
●製品仕様	p 40
●故障かな?と思ったら	p 41
アフターサービス	p 45

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 警告 (電源に関して)

- 電源コードが傷んでいる、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

- 電源コードが破損したら使用しない。
お買い上げの販売店窓口にて修理・点検を依頼してください。
危険ですのでご自身でコード交換をしないでください。

- 電源コードは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

タコ足配線
禁止

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切り、電源コードをコンセントから抜く。
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。
- 必ず交流100Vで使用する(無料修理は国内のみ)。
火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 使用後やお掃除するときは必ず電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

プラグを
抜く

注意（電源に関して）

- 電源コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを
抜く

⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・医師の治療を受けている人 ・急性疾患 ・結核性疾患 ・発熱している人 ・高血圧 ・伝染病疾患 ・悪性腫瘍
 - ・血液疾患 ・皮膚病 ・アレルギー体質 ・アトピー性皮膚炎 ・皮膚トラブルがある人 ・疲労が激しい人
 - ・熱さを自覚できない人 ・敏感肌またはお肌の弱い人 ・てんかん ・体調がすぐれない人 ・酒気帯びの人
 - ・妊娠中、生理中、授乳中 ・眠気をさそう薬を服用中の人
 - ・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
 - ・物理的刺激などによる病的なシミのある人
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・切り傷 ・口内や陰部、粘膜など ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ・かゆみやほてりのある部位
 - ・ウイルス性のイボ
- 事故 ・トラブルの原因となります。



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 使用中および使用後や停止後に水が残った状態で傾けたり、持ち運んだりしない。
やけどの原因となります。
- 本製品を連続して使用しない。
本体が高温になります。再度使用する時は1時間以上間を空けてから使用してください。（ロングモード除く）
- 水道水・精製水以外の液体や粘性の高い(とろみのある)化粧品、また異物を給水タンクに入れない。
界面活性剤を含んだ洗剤や化粧品は絶対に入れない。
熱湯が飛び出し、やけど・けが・故障の原因となります。
- 水道水・精製水・化粧水以外の液体や粘性の高い(とろみのある)化粧品、また異物をミストタンクに入れない。界面活性剤を含んだ洗剤や化粧品は絶対に入れない。
ミスト吹出口の詰まりや故障の原因になります。
- 金属や磁石の近くで使用しない。
動作不良・本体が故障する原因となります。
- ぬれた手で使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 机の上など硬くて安定した水平な場所に設置する（傾斜面での使用はしない）。
布団や枕、絨毯の上などの不安定な場所に設置しない。
けがや本体が故障する原因となります。
- 引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 使用によりお肌に異常を感じた人は使用を中止する。

医師にご相談ください。

- 専用の給水タンクを取り付けて使用する。
直接水を本体に注ぎ込まない。

本体が故障する原因となります。

- 専用のミストタンクを取り付けて使用する。
本体が故障する原因となります。

- 使用中にLEDを直視し続けない。
事故・トラブルの原因となります。



必ず守る

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや本体が故障する原因となります。



用途以外
禁止

- 自分の意思表示をできない人には使わせない。子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。

未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

事故やけがの原因となります。



使用者の
制限

- 本体や電源コードなどに水がかからないようにする

（水につけたり、洗ったりしない）。

また、水場・浴室内・入浴時に使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



水かけ
禁止

- 屋外で使用しない。

本体が故障する原因となります。



屋外禁止

- 本体を落としたり、ぶついたりしない。

けがや本体が故障する原因となります。



落下禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、火中投下・加熱・高温での使用をしない。また、熱器具に近づけない。



発火注意

発熱・発火・動作不良の原因となります。

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



異常時
使用禁止

注意 (ご使用、保管に関して)

- スチーム/ミスト使用中や使用直後は吹出口付近に触れたり、ふさいだり、のぞいたりしない。
けがをする原因となります。
- スチームを切った後(約1分間)、透明なスチームが出るため、吹出口には近づかない。
やけどの原因となります。
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- ペットに使用しない。
けがの原因となります。
- 高温に弱いもの、熱いものの上には設置しない。
変形・変色などの原因となります。



禁止

- 使用中に給水タンクやミストタンクを外したり、水・化粧水を注ぎ足さない。また、本体内部には触れない。

赤点滅(P.44)した場合には、本体を十分に冷ましてから給水・化粧水を注入してください。突沸により熱い湯滴や蒸気が飛ぶおそれがあります。

- 持って移動するときは、傾けたり、逆さまにしたりしない。
 - ・ 傾けると水がこぼれ、本体の故障の原因となります。
 - ・ 持ち運びする際に落として異常が発生した場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。



禁止

- スチームは、2回以上連続で使用しないでください。

肌トラブルの原因となります。

※2つのモードを連続して使用しないこと
(ロングモード除く)

ロングモード時のスチームは顔に直接あてないように使用してください。

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 美容目的以外で使用しない。
- 吹出口から排水しない。
- 吹出口に手や先の鋭いものなどで触れない。



禁止

- スチーム使用時は、吹出口から20cm以上離れた位置で使用する。

近づきすぎるとやけどの原因となります。

- コンセントや電源コードにスチーム/ミストがかからないようにする。

漏電・感電・故障の原因となります。

- 以下の項目は必ず守る。

事故やけが、本体が故障する原因となります。

- ・ お肌の状態にあわせて使用する。
- ・ 日焼け直後や、ピーリング、剃毛した直後の使用は控える。



必ず守る

- 給水タンク、ミストタンク、および本体を清潔に保つため、使用後は毎回水・化粧水を捨て洗浄する。本体に水・化粧水が付着したときは、すぐに水分を拭き取る。

ぬれたまま放置すると故障の原因となります。

- 長期間使用しないときは、給水タンク、ミストタンク、および本体の中の水・化粧水を捨て洗浄し、十分に乾燥させてから保管する。

放置するとにおいやミスト吹出口の詰まりの原因となります。

- ミストを使用する前に、ミストタンクのキャップがしっかりと閉まっている事を確認する。

- 使用後は必ずミストタンクのキャップを閉じる。

- ミストタンクのキャップを閉めるときは、空気穴をふさがない。

ミスト吹出口から水（化粧水）がしみ出る場合があります。




必ず守る

■ 各部のなまえとはたらき


本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本体


●正面

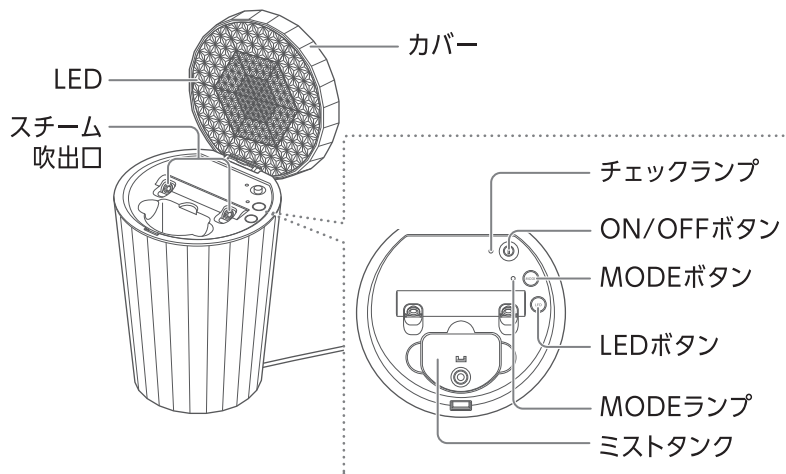

●背面

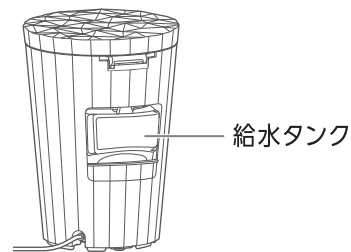

●底面

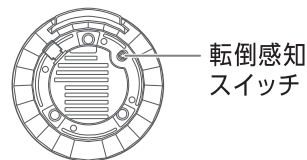


付属品

- 給水タンク※
(本体に取り付けて梱包)

- 計量カップ



- ミストタンク※
(本体に取り付けて梱包)

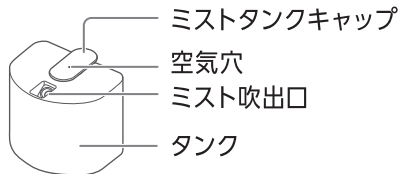

- 風よけフラップ※



- 取扱説明書 (保証書付)

※本製品以外では使用しないでください。

はたらき

安全機能

- 転倒感知スイッチ

使用中に本体を持ち上げたり、移動させたりすると、本体底面にある転倒感知スイッチが作動して動作が停止します。


- 空焚き防止

空焚きを感知するとチェックランプが赤点滅し、エラーを表示します。

モードの説明

本製品では、次のモードを使用してお肌のお手入れをしていただけます。

☀ :点滅 ● :点灯 - :消灯

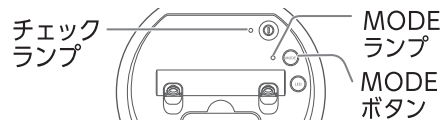

スチーム／ミスト／LEDの色	モード		時間	ランプ表示		説明
				チェック	MODE	
温スチーム単独 ● 赤色LED ● 黄色LED ● 橙色LED	1	スチーム	約12分	紫色 ●	赤色 ●	お肌をやわげりリラックスしたいときに 温スチーム (12分) 洗顔
	2	クリーン	約3分	紫色 ●	紫色 ●	メイク落としに 温スチーム (3分) 洗顔
冷ミスト単独 ● 青色LED ● 緑色LED	3	モイスト	約1分	紫色 ●	青色 ●	乾燥が気になるときに 洗顔 冷ミスト (25秒) 停止 (8秒) 冷ミスト (25秒)
温冷組み合わせ* ■ 温スチーム 赤色LED、橙色LED、黄色LED ■ 冷ミストスチーム 青色LED、緑色LED	4	シルクスキン	約8分	紫色 ●	青色 ☀	じっくり肌をケアしたいときに 洗顔 温スチーム (5分) 停止 (8秒) 冷ミスト (25秒) 温スチーム (2分) 停止 (8秒) 冷ミスト (25秒)
	5	トーンアップ	約4分	紫色 ●	紫色 ☀	メイク前のお手軽美容 洗顔 温スチーム (3分) 停止 (8秒) 冷ミスト (50秒)
LED照射なし	6	ロング	約7時間	紫色 ☀	-	長時間お肌をケアしたいときに 温スチーム (2分30秒) 停止 (60分) 温スチーム (1分30秒) (60分) 7回繰り返し


●LED照射について

電源をオンにして、モードを選択していない場合にLEDボタンを押すと、LEDの単独使用ができます。LEDボタンを押すごとに照射する色が次のように切り替わります。

※以降繰り返します。

3分経過すると自動的に消えます。(ブザー音：「ピッピッ」)

【LED単独モード】

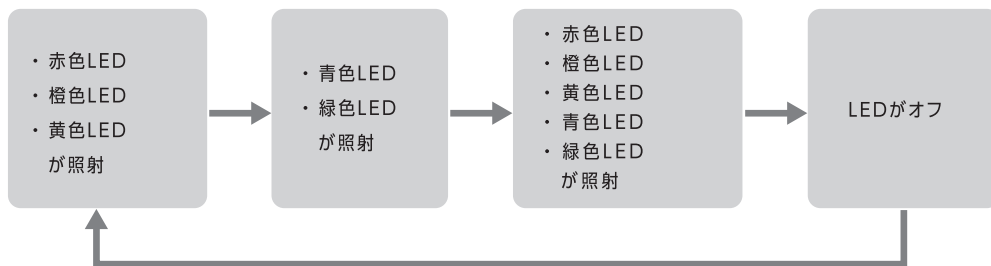

【温スチーム/冷ミスト噴霧中のLEDオフ】

温スチームや冷ミストのモード使用中にLEDボタンを押すと、LEDをオフにできます。

* スチーム噴射とミスト噴射時で照射されるLEDの組み合わせが異なります。
全色が同時に照射されるわけではありません。


■ お使いになる前に

設置

1 本体を平らな場所に設置する

机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。

- マットや絨毯の上では転倒感知スイッチが働き、作動しないことがあります。

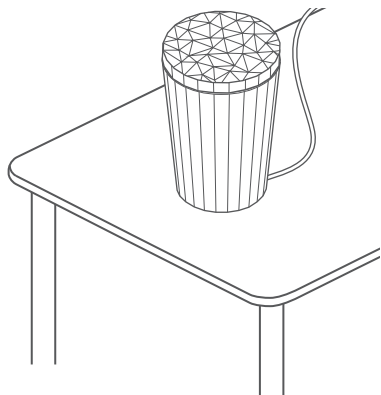


給水する・化粧水を注入する

1 給水タンクを取り外す

給水タンクの天面を押し下げながらなめに引いて取り外してください。

- 本体が倒れないように片手で押さえながら取り外してください。

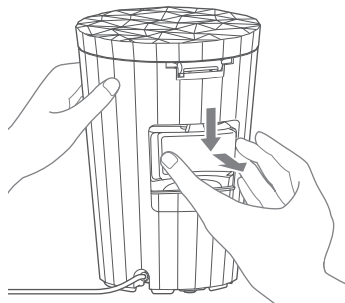

注意

- 本体が十分に冷めていることを確認してから給水してください。熱を持っている場合、突沸により熱い湯滴や蒸気が飛ぶおそれがあります。

2 給水タンクに水を入れる


キャップを外して給水タンクに水を入れ、
しっかりキャップを閉めてください。

- 持ち運ぶ際は、キャップ側を上向きにしてください。




3 給水タンクを取り付ける

給水タンクの向きを確認し、カチッというまで
押してください。

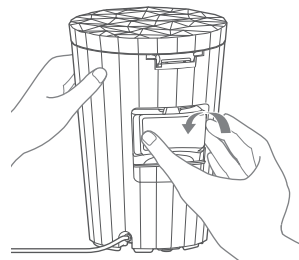

タンクを下から支えながら本体に入れます。

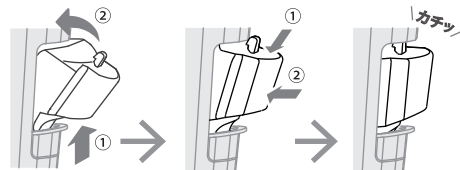


注意

- 水道水・精製水以外のものを給水タンクに入れないでください。動作中に熱湯が飛び出し、やけど・けがの原因となります。また、故障や本体寿命が短くなる原因となります。
- 給水タンクはしっかりと取り付けてください。給水タンクの取り付けが不十分では正常に作動しません。また、取り付けの際には、本体に水がかからないよう注意してください。

4 ミストタンクを取り外す

本体のカバーを開けて、ミストタンクを上を持ち上げて取り外してください。

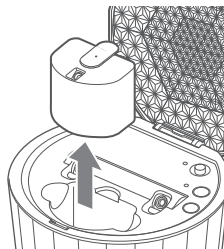


5 計量カップに水または化粧水を入れ、ミストタンクに入れる

キャップを開けてミストタンクに水または化粧水を入れ、しっかりキャップを閉じてください。

- 1回の注目安（最大）は3目盛り程度です。



← 3目盛り分

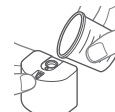

まわす


注意

- 水道水・精製水・化粧水以外のものや粘性の高い（とろみのある）化粧水をミストタンクに入れないでください。ミスト吹出口が詰まり、故障や本体寿命が短くなる原因となります。


6 ミストタンクを取り付ける

ミストタンクの向きを確認し、押し下げてください。

- キャップを閉じるときは、キャップの空気穴をふさがないでください。空気穴をふさいでキャップを閉めると、ミスト吹出口から水（化粧水）がしみ出る場合があります。

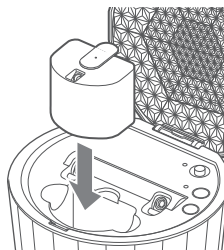

※一度入れた水は使い切ってください

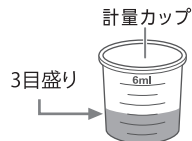

3目盛り以上ミストタンクに入れると、キャップからあふれたり、吹出口から勢いよく飛び出ることがあります。※空気穴を塞がない




注意

- ミストタンクは奥まで押し込んでください。
※ミストタンクのまわりにすきまがあるため、完全に固定はされませんが、奥まで差し込まれていれば問題ありません。
- ミストタンクの取り付けが不十分では正常に作動しません。
また、取り付けの際には、本体に水や化粧水がかからないよう注意してください。

風よけフラップを取り付ける


1 風よけフラップを取り付ける

突起をミストタンク横のくぼみに合わせて取り付けてください。

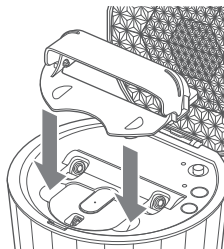

2 風よけフラップの角度を調整する


両側面を親指と人差し指で押さえて角度を調整してください。

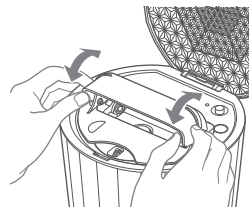

■ 使いかた


基本的な使いかた

1 電源コードを壁面コンセントに差し込む

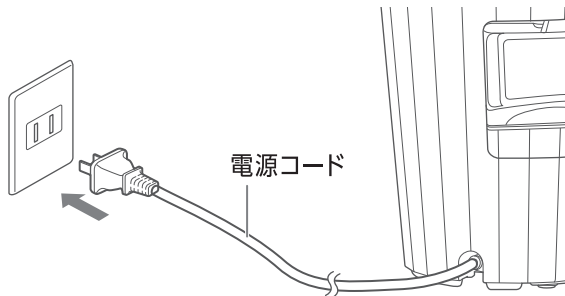


2 本体のカバーを開けて、電源をオンにする

ON/OFFボタンを押してください。
チェックランプが青色に点灯します（スタンバイ状態）。

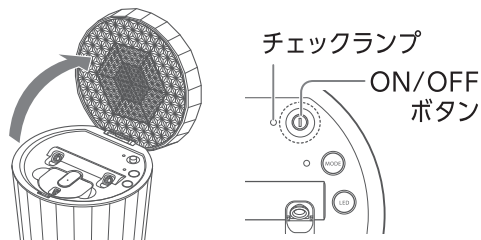

- モードを選択していない場合にLEDボタンを押すと、LEDの単独使用ができます（P.16）。

■ 電源ボタンについてご注意

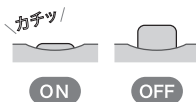

電源をONにする時は、ボタンが下がりがきいていることを確認してください。下まで押せていないと、電源ボタンがOFFの位置に戻ってしまうことがあります。

注意 ● 絶対にぬれた手で行わないでください。


3 MODEボタンを押してお好みのモードを選ぶ

しばらくするとスチーム/ミストが出ます。

- モードは以下から選べます。

詳細は、「モードの説明」(P.15)をご参照ください。

☀ :点滅 ● :点灯 — :消灯

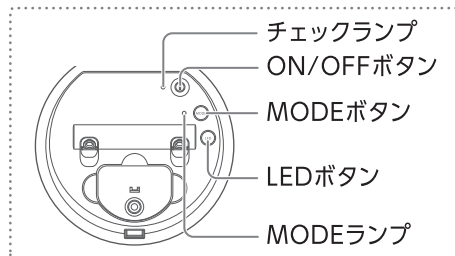

MODEボタンを押すごとに以下の順番で切り替わります。


モード		スタンバイ	スチーム	グリーン	モイスト	シルクスキン	トーンアップ	ロング	エラー表示	
		—	温	温	冷	温/冷	温/冷	温	給水	故障
ランプ表示	チェック (ランプの色)	青 ●	紫 ●	紫 ●	紫 ●	紫 ●	紫 ●	紫 ☀	赤 ☀	赤 ●
	MODE (ランプの色)	—	赤 ●	紫 ●	青 ●	青 ☀	紫 ☀	—	—	—
LEDの点灯		—	赤、橙、黄	赤、橙、黄	青、緑	赤、橙、黄 青、緑	赤、橙、黄 青、緑	—	—	—

- MODEボタンを押すごとにモードが切り替わります。
- モイストモードおよびシルクスキンモードは、ミストタンクに化粧水を入れて使用することをおすすめします。
- 途中でモードを変更したいときは、MODEボタンを押してください。その場合、給水タンクの水やミストタンクの水または化粧水が不足し途中で止まることがありますが、異常ではありません。

注意


- 水道水・精製水・化粧水以外のものや粘性の高い(とろみのある)化粧水をミストタンクに入れないでください。ミスト吹出口が詰まり、故障や本体寿命が短くなる原因となります。

4 LEDを使用しない場合は、LEDボタンを押して照射をオフにする

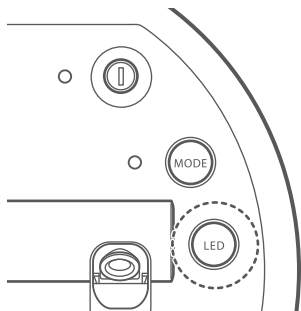

5 風よけフラップの角度を調整する

顔全体にスチーム/ミストがあたるように調整してください。

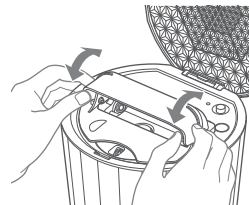

ポイント

- 両側面を親指と人差し指で押さえて角度を調整してください。

注意

- 吹出口付近は熱くなりますので、触れないでください。
 - スチームの吹出開始後、しばらくするとスチームが高温になるため、風よけフラップの角度調整はおやめください。
- やけどの原因となります。

6 スチーム/ミスト/LEDを浴びる



スチーム使用時は20cm以上、
ミスト使用時は5cm程度離れる

- 途中で止めたいときは、ON/OFFボタンを押してください。モードが終了するとスタンバイ状態 (P.22) に戻ります。
- 使用中にスチーム/ミスト量が変動することがありますが、異常ではありません。
- 本体を持ち上げたり傾けたりすると、スチーム/ミストが止まります。
- 衣服のぬれが気になるときは、首元にタオルを巻いてください。
- 空調の風の影響を受けない場所で使用してください。エアコンなどの風を受けると、スチーム及びミストが風に流されてまっすぐに届かないことがあります。
- ミストタンクに注入した水または化粧水は、毎回使い切ることをおすすめします。
- ミスト時に「ウー」と音が出ますがミスト発生音です。

ポイント

- ミストを浴びるときは、顔を動かしてあてたい部分に使用することをおすすめします。
- ミスト吹出口の先端に空気がたまっているとミストが出ない場合があります。ミストタンクキャップの空気穴部分を軽く押すとミストが出てきます。


7 ON/OFFボタンを押して電源をオフにする

- 使用後は熱くなっていますので、停止後約10分間は本体、風よけフラップに触れないでください。
また、本体のカバーを閉じないでください。
- スチーム使用後はお手持ちの化粧水をつけるなど、普段のお手入れをしてください。

■カバー開閉センサー

※動作中にカバーを閉じると、
動作を停止します

薄く見える黒い影はカバーの開閉を検知するためのものであり、異常ではありません。

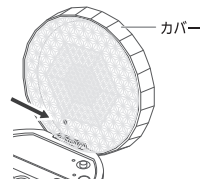


- 使用中にカバーを閉じない
蒸気がこもり、故障や変形の原因となります。
- スチーム使用時の湯滴注意
湯滴が飛び出すおそれがあるため、必ず吹出口から20cm以上離れて使用してください。
また、吹出口から湯滴が垂れることがありますが異常ではありません。MODEボタン付近に垂れた水滴は軽く拭き取ってください。
- 高温注意
スチーム使用時およびスチーム停止後約10分間は吹出口が熱くなっているため、絶対に触れないでください。
- 本体向き注意
コンセントや電源コードにスチーム/ミストがかからないようにしてください。水滴の付着により漏電・感電・故障の原因となります。
- スチームが熱く感じたら吹出口から顔を離してください。
- スチームは2回以上連続で使用しないでください。(ロングモード除く)
肌トラブルの原因となります。

注意

ロングモードの使いかた

1 本体を平らな場所に設置する

机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。
ベッドサイドで使用するときは、顔から約80cm離して寝具の周辺に設置してください。

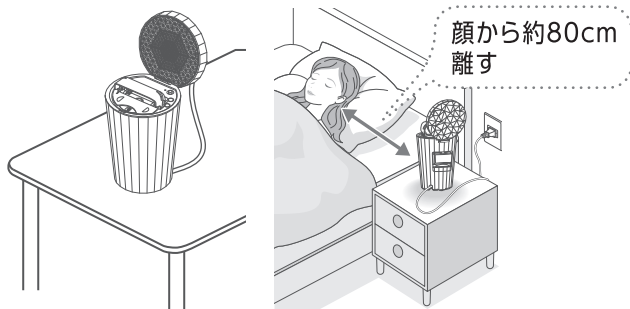

2 ON/OFFボタンを押して電源をオンにする


P.17～18の手順で給水タンクに給水し、電源をオンにしてください。

注意

- ベッドサイドで使用するときは、以下の点にご注意ください。
- 就寝中に誤って身体が本体や電源コードにあたらない場所に設置してください。
 - 電源コードは寝具と反対側に引き出してください。
 - お子様と一緒に休みになる際は、本体や電源コードに触れないよう、お子様とは反対側に本体を設置してください。

3 MODEボタンを押してロングモードを選ぶ

約7時間後に自動停止します(スタンバイ状態に戻ります)。

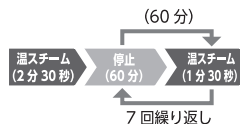

- 途中で止めたいときは、ON/OFFボタンを押してください。
モードが終了するとスタンバイ状態 (P.22) に戻ります。
- 使用中にスチーム量が変動することがありますが、異常ではありません。
- 本体を持ち上げたり傾けたりすると、スチームが止まります。
- スチームを直接顔にあてるモードではありません。
ベッドサイドで使用するときは、顔から約80cm離して設置してください。

4 ON/OFFボタンを押して電源をオフにする

- 使用後は熱くなっていますので、停止後約10分間は本体に触れないでください。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた


本体、給水タンク、およびミストタンクを清潔に保つため、使用後は毎回水または化粧水を捨ててください。

- 1 電源をオフにし、壁面コンセントから電源コードを抜く

本体を10分以上放置し、熱を冷ましてください。

- 2 給水タンクを取り外す

図の部分を下に押し、手前に引いて外します。

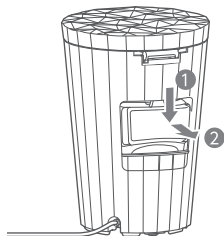

- 3 給水タンクの残り水を捨てる



- 4 ミストタンクを取り外し、残り水または化粧水を捨てる




警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

5 本体を傾けて本体内部の水を捨てる

- 徐々に傾けながら水を捨ててください。
- 本体内部に少し水が残りますが、衛生上問題ありません。

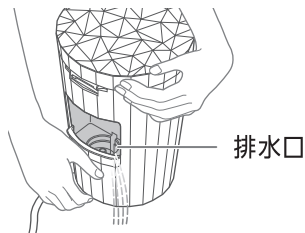


6 本体、給水タンク、およびミストタンクについて水滴を拭き取る

- ON/OFFボタンに水滴がついたら、よく拭き取ってください。

ポイント


- 本体だけでなく、以下の部分もお手入れをしてください。

LED/風よけフラップ

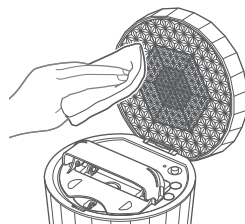

タオルなどの乾いた布で水滴を拭き取ってください。

ミスト吹出口

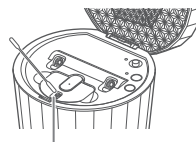

ミスト吹出口

吹出口に水がたまっている場合は、綿棒で優しく拭いてください。

ミストタンク (化粧水を使用した場合)

P.33～34の手順で水洗浄してください。

注意

- 使用後、本体内部の残り水は熱くなっていますので、手などにお湯がかからないよう注意してください。


定期的なメンテナンス（クエン酸洗浄）

スチームを快適にお使いいただくため、1ヵ月に一度を目安に給水タンクのメンテナンスをしてください。

1 クエン酸水を作る

給水タンクにクエン酸と適量の水を入れます。

クエン酸
小さじ1/3杯
(約2g)

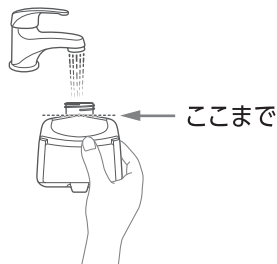

2 クエン酸水で煮沸する


手順①の給水タンクを本体に取り付け、スチームモード（12分）で動かします。

- スチームが停止したら、本体を10分以上放置して冷ましてください。
- 煮沸中のスチームを浴びないでください。

3 本体内部からカルキなどを洗い流す

給水タンクを取り外し、排水口からクエン酸水を排水します。

- カルキなどがなくなるまで、排水口から水を入れて左右に本体を揺らし、本体内部の水を排水してください。
- 給水タンクは水で洗い流してください。
- スチームの吹出口から排水しないでください。

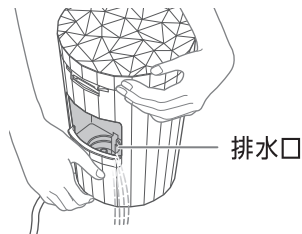

4 水で煮沸する

水を入れた給水タンクを本体に取り付け、スチームモード（12分）で動かします。本体を冷ました後に排水します。

- 汚れた水が出なくなるまで繰り返し行ってください。

ポイント

- クエン酸洗浄剤は市販されている粉末状のものをおすすめします。
- 「クエン酸100%」と表示されたものであれば、市販されている電気ポット用の洗浄剤が使用できますが、使用量は1回につき約2gをお守りください。
- ご利用の際は、クエン酸洗浄剤の注意事項をよくお読みください。
- 定期的な洗浄をせずに長期間ご使用になられた場合は、上記洗浄を複数回行ってください。

定期的なメンテナンス（水洗浄）


ミストを快適にお使いいただくため、10日に一度を目安にミストタンクのメンテナンスをしてください。

化粧水がミストタンクに入ったまま放置すると、固まってミスト吹出口の詰まりの原因になります。

化粧水使用後は毎回洗浄してください。

1 本体からミストタンクを取り外す

- 本体はぬらさないでください。故障の原因となります。

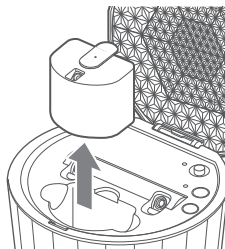

2 ミストタンクに水を半分程度入れて10回ほど振り、挿入口から水を捨てる

5回程度繰り返してください。


- ミストタンク内の汚れが気になる場合は、綿棒で掃除してください。

警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。


3 再度ミストタンクに水を半分程度入れて、本体にミストタンクを取り付ける

- 本体はぬらさないでください。故障の原因となります。

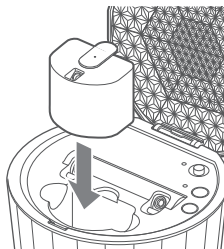

4 MODEボタンを押してモイストモードを選び、タンク内を空にする

ミスト吹出口から空気が出てくるまでモイストモードを作動してください。

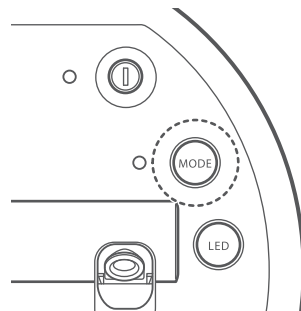

ミスト吹出口が詰まったときは

粘性の高い（とろみのある）化粧水を入れた場合などにすぐにミストタンクのミスト吹出口が詰まる場合があります。
化粧水を入れてもミストが出ない場合は、次のようにメンテナンスしてください。

1 ミストタンク内の化粧水を出す

本体からミストタンクを取り外してください。



2 ミストタンクに水を入れる

計量カップを使用してください。

タンクの半分程度まで入れてください。



3 キャップを閉じて10回程度振る

警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 化粧水を入れたまま放置をすると故障の原因になります。

4 ミストタンク内の水を捨てる



5 手順②～④を繰り返す

5回程度繰り返してください。

6 再度ミストタンクに水を入れる

計量カップを使用してください。
満タンになるまで入れてください。



7 ミストが噴霧されることを確認する

MODEボタンを押して、モイストモードを選んでください。

次回使用のため、ミスト吹出口から空気が出てくるまでモイストモードを作動してください。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。水分がついた状態で放置すると、故障や不具合の原因となります。
- 長期間使用しないときは、ミストタンク内部の残り水または化粧水を捨てて空にしてください。詰まりの原因となります。
- 本体を使用しないときは、ミストタンクのキャップをしっかりと閉めてください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

長期保管前のお手入れのしかた

本体内の残り水を蒸発させます。

あらかじめ、「お手入れのしかた」(P.29)の手順に沿ってお手入れを行ってください。

- ① 空にした給水タンクおよびミストタンクを本体に取り付ける
- ② 電源コードを壁面コンセントに差し込む
- ③ 電源をオンにし、クリーンモードを選ぶ
 - ・MODEボタンを2回押してください。
- ④ チェックランプが赤点滅に変わるまで待つ
 - ・本体内に水が残っている場合はスチームが出ますが、しばらくするとスチームが止まり、チェックランプが赤点滅に変わります。
- ⑤ 電源をオフにし、電源コードを壁面コンセントから抜く
- ⑥ 本体を冷ます(10分以上)
- ⑦ 給水タンク取り付け部や給水タンクについた水滴を拭き取る
- ⑧ ミストタンク取り付け部やミストタンクについた水滴を拭き取る

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.41)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.45) までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

製品仕様

定 格 電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	約550W
外 形 寸 法	約157mm×157mm×229mm (W×D×H)
製 品 質 量	約1.6kg (給水タンク/ミストタンク/風よけフラップ含む)
給水タンクの容量	約170mL
ミストタンクの容量	約3mL
製 造 国	日本
付 属 品	給水タンク 1個(本体に取り付けて梱包) ミストタンク 1個(本体に取り付けて梱包) 風よけフラップ 1個 計量カップ 1個 取扱説明書(保証書付)

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- ON/OFFボタンを押して電源をオンにしてください（P.22）。
- 本体が傾いています。机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。

**モードが
スタートしない**

- 給水タンク、ミストタンクを本体に挿入してください。
- スタンバイ状態になっています。MODEボタンを押して、お好みのモードにしてください。

**スチームが出ない
途中で止まる**

- 給水タンクがきちんと取り付けられていません（浮いています）。奥まで挿入してください。
- 給水タンクに水が入っていない、または空になっています（チェックランプが赤点滅）。
本体を10分以上冷ましてから給水タンクに水を入れてください。
- 本体が傾いています。机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。

**スチームの量が
変動する**

- スチームの量は一定ではなく変動することがあります。異常ではありません。
- エアコンなど風の影響を受けています。
風よけフラップを取り付けて、エアコンなどの風の影響を受けない場所で使用してください。

**スチーム中「ポコポコ」
という音がする**

- スチーム発生時の動作音（沸騰音）です。異常ではありません。

ミスト時に回りが濡れる

- 風の影響を受けるとスチームミストが流されて、まっすぐ届かないことがあります。
風の影響のない場所で使用してください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

ミスト中「ウー」 という音がする

- ミスト発生時の動作音です。異常ではありません。

ミストが出ない 途中で止まる

- ミストタンクがきちんと取り付けられていません（浮いています）。奥まで挿入してください。
- ミストタンクに水または化粧水が入っていない、または空になっています。本体を10分以上冷ましてからミストタンクに水または化粧水を入れてください。
- ミストタンクに粘性の高い（とろみのある）化粧水を入れるとミスト吹出口が詰まる場合があります。ミスト吹出口のお手入れをしてください（P.35）。
- ミスト吹出口の先端に空気がたまっている場合があります。ミストタンクキャップの空気穴部分を軽く押してください。
- 本体が傾いています。机の上など、硬くて平らな場所に設置してください。
- ミストタンクは奥まで挿入してください。ミストタンクのまわりには隙間があるため、完全に固定されませんが、奥まで差し込まれていれば問題ございません。

ミストの量が 変動する

- ミストの量は一定ではなく変動することがあります。異常ではありません。
- ミスト吹出口に水滴が付いています。吹出口のお手入れをしてください（P.30）。
- エアコンなど風の影響を受けています。風よけフラップを取り付けて、エアコンなどの風の影響を受けない場所で使用してください。

本体が熱くなる

- 通常使用でも次第に熱を持ちます。異常ではありません。再度使用するときは、1時間以上間をあけてから使用してください。

よくあるご質問

Q 使用頻度・使用時間の
目安は？

A 毎日ご使用可能です。温スチームは、別のモードであっても2回以上連続
で使用しないでください。(ロングモード除く)
肌トラブルの原因となります。

※ロングモード時のスチームは顔に直接あてないように使用してください。

Q LED単独で使用する際の
使用頻度は？

A 毎日使用可能です。
各LED単独モード1回の使用目安は3分です。
3分経過するとLEDが消灯します。

※LEDは直視し続けしないでください。

Q 美顔器と併用することは
できますか？

A ブライトリフト、フォトプラス プレステージ Sの同時併用が可能です。

Q ミストタンクやスチーム
タンクを取り外した底に、
水や化粧水がたまります。

A ミストタンクと本体の間に噴霧した水分が入り、水や化粧水がたまる場
合があります。その際は、水分をしっかりとふき取ってください。

エラー表示

エラーが発生した場合は、本体のチェックランプで確認できます。

赤点滅

給水タンクに水が入っていません。


電源をオフにし、10分ほど休ませてから、給水タンクに給水してください。

※すぐに給水すると、突沸により熱い湯滴や蒸気が飛ぶおそれがあります。

赤点灯

製品の故障が考えられます。

販売店またはヤーマンコールセンター（P.45）にご相談ください。

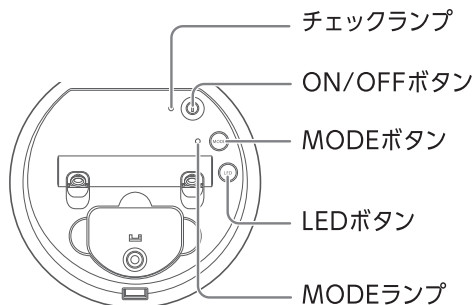

■ アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282**（通話料無料）

携帯電話・PHS

 **0570-550-637**（通話料有料）

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.45）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	IS-101
形名	フォトシャイン		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	見 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。 本		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)
をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com