


使用说明书

家用美容仪

Photo PLUS Prestige SS

M21

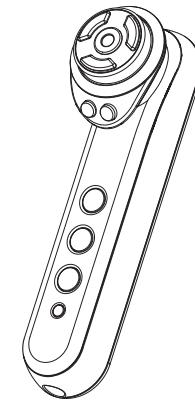

目录

安全注意事项	1
在日本以外地区使用时的注意事项	6
特点	7
各部位的名称	7
使用前	8
使用方法	13
使用完毕后	17
排除故障	18
售后服务	21
●产品规格	22

衷心感谢您选购YA-MAN的产品。

- 为确保正确、安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后,请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将该产品转让给他人时,请务必附带使用说明书。

安全注意事项

- 请仔细阅读所有指示内容,以确保能安全及正确地使用本产品。
- 请务必按照使用说明书的指示进行操作。
- 如发生异常情况,请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。
- 如果在机器故障的状态下进行使用,会有对身体造成不良影响的危险,请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容,请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度,将因错误操作而可能发生的状况分为“危险”、“警告”和“注意”。

●关于注意事项的区分

 **危 险** 如进行错误的操作,会有导致严重伤亡事故的危险性。

 **警 告** 如进行错误的操作,可能会导致严重伤亡事故。

 **注 意** 如进行错误的操作,有可能会导致人身伤害或财产损失※。
※所谓财产损失,是指波及房屋、家具以及家畜、宠物的损害。

●关于标示符号

 此符号表示禁止进行的事项。

 此符号表示务必遵守的事项。

 此符号表示需小心注意的事项。



危 险

处于以下情况的人士,请勿使用。

 否则可能会导致医用电子仪器发生故障。
◆正在使用医用电子仪器的人士。

- 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
- 人工心肺器等维持生命用医用电子仪器
- 心电计等穿戴式医用电子仪器



警 告

处于以下情况的人士,请勿使用。

否则可能会导致事故或意外。

- 正接受治疗的人士 · 成长或青春期 · 急性疾患
- 结核性疾患 · 发烧 · 高血压 · 传染病疾患
- 恶性肿瘤 · 血液疾患 · 内脏疾患 · 皮肤病 · 过敏性体质
- 敏感性皮炎 · 患有皮肤问题的人士 · 过度疲劳的人士
- 皮肤敏感或脆弱的人士 · 身体抱恙的人士 · 醉酒的人士
- 高度近视的人士(-6D以上) · 眼部或面部曾做过手术的人士
- 眼部或面部患有疾病的人士以及正在治疗中的人士
- 怀孕、经期、哺乳期 · 正服用安眠药的人士
- 有因物理性刺激等导致的病变斑的人士 · 正接受牙齿治疗的人士
- 因长期使用类固醇类激素药物或者肝功能障碍而引发毛细血管扩张的人士



禁止

对于以下身体部位,或存在以下状况,切勿使用,
否则可能会导致事故或受伤。

- 割伤 · 曾接受整形手术之部位 · 口腔内、阴部周围或粘膜
- 皮肤因过度日晒而刺痛发炎的人士 · 暗疮
- 皮肤溃烂化脓 · 皮肤上有发痒或病理性色素
- 过滤性疣或黑皮病 · 病毒感染性疣 · 喉核 · 眼球
- 眼睑,眼部周围(使用眼部模式及冷敷模式时除外)

※LED的光可以照射于眼睑或眼部周围。请闭上眼睛,并将电极头置于
距离肌肤5cm以上的位置进行使用。请勿直视LED光。

若不能确定自己是否有上述状况,请事先征求医生意见。



禁止

使用眼部模式及冷敷模式以外的模式时,请勿长时间用于同一位置上。使用时须于皮肤上滑动进行。请勿用于机器护理头部无法完全贴合的部位。

否则可能会导致灼伤或低温灼伤。



禁止

请勿将产品于火中放置或加热,请勿在高温地方使用或放置。

否则可能会导致发热、起火或破裂。



限制
使用对象

请放置于儿童无法触及的地方,不可让儿童使用。

否则可能会导致事故或受伤。



用途以外
禁止

请勿将机器用于使用说明书中所记载的用途以外的其他用途。

否则可能会导致身体受伤或产品故障。

警 告



请勿在易燃物质(如酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂或定型喷雾等)的附近使用。
否则可能会导致火灾、触电或身体受伤。



本产品必须使用专用的电源适配器。
此外，电源适配器必须直接插入墙壁上的电源插座，请勿使用延长线。
否则会导致触电、短路或起火。



请勿让神志不清者使用。此外，请避免残障人士单独进行使用。
否则可能会导致事故或意外。



若出现异味或异常发热，请停止使用。
否则可能会导致损坏或起火。



请在事先确认好电源适配器没有沾水的情况下，再进行充电。

否则会导致触电、短路或起火。



禁止不当处理

请勿损害、加工、用力弯曲、拉扯、扭曲及捆扎电源适配器。

将电源适配器放置于重物下或被夹紧，可能会导致电源适配器破损，并导致触电或起火。



禁止使用已损坏插座

请勿使用已损坏的电源适配器或已松动的插座。

否则会导致触电、短路或起火。

如需维修，请联络当地经销商。



禁止淋水

请勿在浴室内或有水的地方使用电源适配器。请勿让机身或电源适配器沾水，或用水清洗。

否则会导致触电、短路或起火。



禁止拆解

请勿自行拆解维修或改装。
否则可能会导致起火、触电或身体受伤。

如需维修，请联络当地经销商。



务必遵守

闲置及进行清洁时，请务必关闭电源。

否则会导致触电、短路或起火。



警 告



务必遵守

只可连接100~240伏特交流电使用。插入电源适配器时，必须确认完全插入。

否则可能会导致火灾、触电或事故。



拔除
电源适配器

闲置时请将插头从插座中拔除。此外，请勿用湿手拔插电源。

否则会导致触电、短路或起火。



当心火灾

拔除电源适配器时，请手握插头前端拔出。

此外，请勿用湿手拔插电源。

否则会导致触电、短路或起火。



拔除
电源适配器

如发生异常情况，请立即拔除电源适配器。

若出现运作异常、冒烟、发出怪声或有异味时，切勿继续使用。



注 意



禁止

请勿在禁止使用部位进行使用(P.2)。

正接受牙齿治疗或曾进行补牙人士，在进行离子、EMS、超脉冲刺激时，可能会感到不适。使用时，请降低强度并调整使用部位。



禁止

禁止以下事项。

否则可能会导致事故、受伤或机器故障。

- 皮肤出现红疹、发炎、痕痒等异常情况下请勿使用。
- 因机器掉落、碰撞造成损坏时请勿使用。
- 请勿作商业上使用或长时间连续使用。



注意



请勿以碱性洗涤剂、酒精、稀释液、汽油、指甲油卸除剂等擦拭机身。

否则可能会导致机器表面受损。



请勿用电极头触碰金属表面。
否则可能会导致故障或受伤。



请勿直视LED光。
在眼部周围或眼睑处使用LED光进行护理时,请闭上眼睛,
并将电极头置于距离肌肤5cm以上的位置进行使用。
否则可能会引起眼部或皮肤受伤。



请不要连续使用冷敷模式。
连续使用时,皮肤对冰冷温度的感觉会变弱。
请等待至少30分钟之后再次使用。



请务必遵守以下事项。

否则可能会导致事故、受伤或机器故障。

- 请勿长时间使用于同一位置上。
- 请根据个人皮肤状态进行使用。
- 请避免在日晒后立刻使用,以及避免在进行去角质护理或敷面膜时一并使用。
- 使用后必须切断电源。



使用时若感到身体不适,请停止使用。

使用时需留意查看身体皮肤是否出现异常情况。
如发现本产品不适合您的皮肤,请立即停止使用。



首次使用或尚未调节时,请务必使用强度1。

否则可能会导致事故或受伤。

在日本以外地区使用时的注意事项



警告



请务必使用100~240伏特交流电。
否则可能会导致起火、触电或故障。



请务必确认插头形状及电压后再进行使用。
否则可能会导致机器发热、起火或故障。

- 插头形状、电压可能会因地区及住宿地而有所不同。使用前请先进行确认。
- 关于电源适配器及插头的转换,请向旅行社或电器销售店查询。

特点

本产品通过RF射频功能(无线电波,以下简称为RF)进行皮肤温热,是具有离子洁面,离子保湿,EMS,Photo,微电流,冷敷功能的面部美容仪。


使用者可按个人皮肤状况及需要,选择各模式组合进行护理程序。

- RF: 温热达至深层肌肤※,让肌肤可于更合适状态下进行护理。
- 离子洁面: 一般洗面难以去除的污垢可透过离子导出功能吸出面部。
- 离子保湿: 独特波形的离子导入功能可让爽肤水更易渗透※至皮肤。
- EMS: 能够以微电流刺激肌肉。
- 照射: 以LED光照射肌肤进行护理。
- 微电流: 以微弱的电流针对眼部进行护理。
- 冷敷: 以冰冷温度贴于皮肤表面,让皮肤更紧致。
- 振动: 配合以微细震频进行护理。


※深至角质层

各部位的名称

● 本机 <正面>

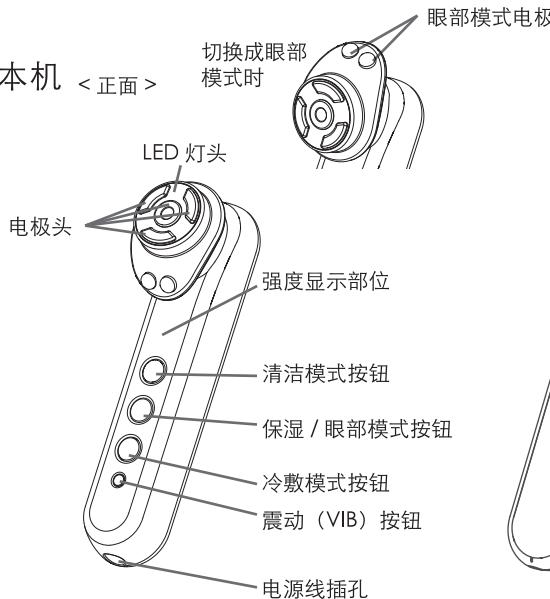

<背面>

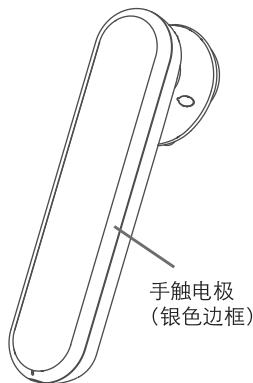

【配件】

● 化妆棉固定扣 (银圈)

※购买产品时已装置于机器的电极头上。
※能将化妆棉固定于电极头之上。




● 电源适配器

※为提升机器及配件的设计与规格的质量,如有更改将不作另行通知。

使用前

操作方法・显示部位的查看方法

● 操作显示部位及按钮

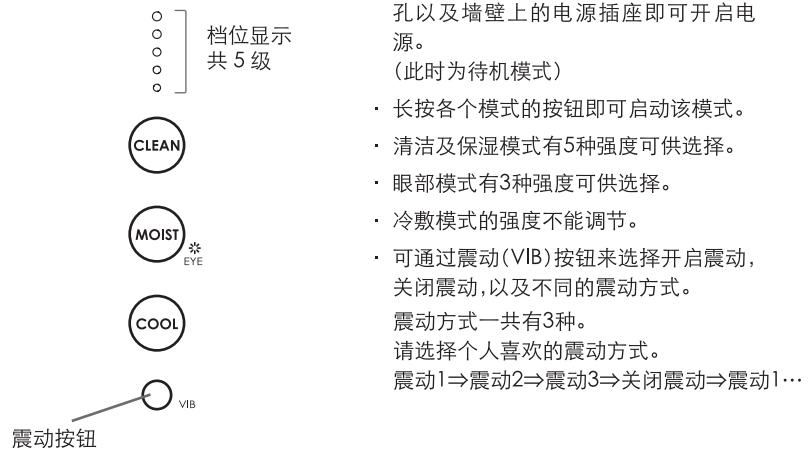

- 使用电源适配器连接机器上的电源线插孔以及墙壁上的电源插座即可开启电源。
(此时为待机模式)
- 长按各个模式的按钮即可启动该模式。
- 清洁及保湿模式有5种强度可供选择。
- 眼部模式有3种强度可供选择。
- 冷敷模式的强度不能调节。
- 可通过震动(VIB)按钮来选择开启震动,关闭震动,以及不同的震动方式。
震动方式一共有3种。
请选择个人喜欢的震动方式。
震动1⇒震动2⇒震动3⇒关闭震动⇒震动1…

模式


模式	按钮显示	LED 灯头	档位显示	按钮显示	使用前					使用前
待机	3 按钮闪烁				<ul style="list-style-type: none"> 使用时须于皮肤上滑动进行。(使用眼部模式或冷敷模式时除外) 保湿时可根据个人喜好选择使用或不使用化妆棉。 冷敷模式结束后, 机身及电极头会发热。请勿连续使用。使用后请将电源关闭, 并保证机器至少休息 30 分钟。 					
眼部模式待机 将电极头旋转 180 度时	将电极头旋转 180 度时				<p>※1 使用自备的护肤品时, 请务必使用水溶性产品。 ※2 请参阅 P.21 品或磨砂膏类产品。否则可能导致产品故障或对肌肤造成伤害。</p>					
眼部模式 将电极头旋转 180 度时	保湿按钮闪烁	档位显示	LED 灯头	特点	功能	推荐使用的爽肤水	操作时间	强度	使用频率 (建议)	
眼部模式 将电极头旋转 180 度时	保湿按钮快速闪烁	1 ~ 3 个灯亮	无	通过微电流使眼部皮肤更紧实, 以及通过 EMS 刺激眼部的肌肉来进行护理。	<ul style="list-style-type: none"> RF EMS (高周波) 微电流 震动 (可关闭) 	自备的眼部美容液 ^{*1}	约 3 分钟	EMS: 3 级	每周 5 次	
清洁模式	清洁按钮亮	1 ~ 5 个灯亮	红色 LED 灯亮	将一般洗脸难以去除的污垢吸出, 让皮肤更清爽干净。	<ul style="list-style-type: none"> RF EMS (高周波) 离子清洁 LED(红) 震动 (可关闭) 	RF Booster Pad Deep Cleansing ^{*2} (或化妆棉 + 自备的爽肤水 ^{*1})	约 3 分钟	离子 + : 5 级 EMS	每周 2 ~ 3 次	
保湿模式	保湿按钮亮	1 ~ 5 个灯亮	黄色及红色 LED 灯亮	让护肤品更易渗透至角质层, 使皮肤更加水润。	<ul style="list-style-type: none"> RF EMS (高周波) 离子保湿 超脉冲 LED(黄 + 红) 震动 (可关闭) 	RF Booster Pad Clear Deep Moisturizer ^{*2} (水分不足时, 请将残留在包装袋内的爽肤水添加后继续使用。)	约 5 分钟	离子 + : 5 级 EMS	每周 2 ~ 3 次	
冷敷模式 ※只有中央的电极头冷却	冷敷按钮亮	无	蓝色 LED 灯亮	冷敷及 LED 光 (蓝色) 可减少细纹使皮肤恢复弹性。	<ul style="list-style-type: none"> 冷敷 LED(蓝) 震动 (可关闭) 	请直接使用于皮肤。	约 3 分钟	无	每日	

●强度显示

清洁模式及保湿模式强度有5档，眼部模式强度有3档可供选择。

每次按下清洁按钮及保湿按钮，都将如下图所示进行切换。

※冷敷模式的强度不能调节。※首次使用或尚未适应时，请务必使用强度1。

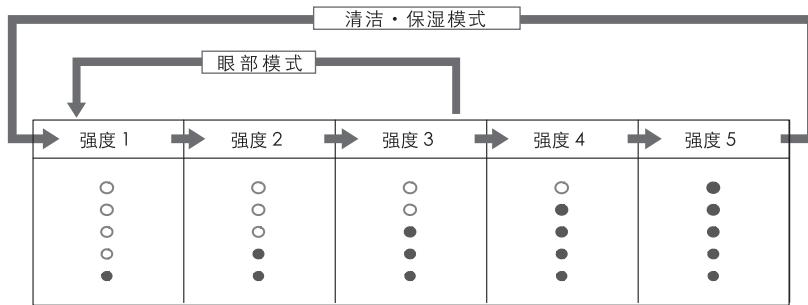

●切换成眼部模式

- 使用头部的两个电极来护理眼部肌肤的模式。
- 将头部旋转180度，即可在眼部模式与待机模式中进行切换。
只能按右图所示方向进行旋转。
只有将头部旋转180度后，才能使用眼部模式。
此外，将头部进行旋转后，无法使用其他模式。



※只能旋转180度。

●报时功能

操作时间进行到一半的时候，会发出“哔”的蜂鸣声。

有关各个模式的操作时间，请参阅P.9~10。

●待机模式

各模式操作时间结束后，会发出“哔哔”的蜂鸣声，并进入待机模式。

(功能停止的状态)有关各个模式的操作时间，请参阅P.9~10。

再次长按模式按钮，即可启动选定的模式。

预先进行肌肤测试

※第一次使用本产品或护肤品时，请务必预先测试产品与肌肤的适应性。

1 清洁肌肤。

- 用肥皂清洗手臂内侧，用毛巾等擦拭。

2 将护肤品(保湿霜或爽肤水)或清水涂抹再手腕内侧，并在保湿模式的强度1下使用本产品3分钟。

- 请勿擦拭或用水打湿肌肤测试处的皮肤。

如果24小时内肌肤没有出现异常情况(泛红或发烫)，则可以使用本产品。




注意

- 为防止发生肌肤问题，请务必事先测试。
- 实施部位出现发疹、泛红、发痒、刺激等异常情况时，请立即停止测试。
- 使用时需留意查看身体皮肤是否出现异常情况。如发现本产品不适合您的皮肤，请立即停止使用。

使用方法

化妆棉的装置方法

1 将化妆棉固定扣从机器上拆除。

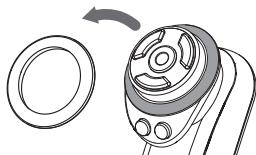

2 将1张化妆棉放于电极面上，再将化裝棉固定扣推入装上。

※如化妆棉固定扣无法将化妆棉稳定扣上,请使用较大且质料较薄的化妆棉。

因较厚的化妆棉固定起来比较困难,请对半撕开使用。

※如化妆棉过厚,会使皮肤对RF的温热感觉变弱。

3 将爽肤水或保湿霜沾于化妆棉上。

※爽肤水及保湿霜须完全沾满电极面。

※使用较清爽的爽肤水可能会令温热感觉减弱。

推荐使用的保湿产品: RF Booster Pad(P.21)或其他较粘稠的爽肤水

※如化妆棉变得干燥,请补充护肤品。干燥的化妆棉会较容易脱落。

基本使用方法

● 使用时的注意事项

- 使用时须于皮肤上滑动进行。如持续贴于同一部位上,可能会导致灼伤。
(使用眼部模式或冷敷模式时除外)
- 使用RF时会因护肤品的种类或皮肤的状态而感觉温度有异。
- 请勿用于眼部周围(眼部模式及冷敷模式时除外)。
※LED的光可以照射于眼睑或眼部周围。请闭上眼睛,并将电极头置于距离肌肤5cm以上的位罝进行使用。
- 请勿直视LED光。
- 手握机器时请务必确保能接触到手触电极。
- 推荐环境温度15°C~30°C

● 护理方法

1 请先清洗脸上的化妆品。

· 去除脸上油分及污垢,确保肌肤于洁净的状态。

※ 冷敷模式也可在化妆后使用。

2 必要时可装上化妆棉并加上爽肤水。

3 连接电源适配器并开启电源。

按下模式按钮选择模式及强度。

· 长按想要使用的模式的模式按钮启动该模式后,短按该模式按钮即可选择强度。

· 使用眼部模式时需要先将头部进行旋转。

※ 冷敷模式的强度不能调节。

※ 首次使用或尚未适应时,请务必使用强度1。

4 手握机器时请确保接触到背面的手触电极(背面银色边框

5 将电极头贴于皮肤上滑动。(使用方法请参阅P.15~16)

· 各模式结束后将进入待机模式,长按模式按钮可开始下个模式。

※ 使用时请务必把电极头完全贴于皮肤上。

※ 如想中途停止模式,请长按模式按钮。

6 将电源适配器从机器及墙壁上的电源插座中拔除,关闭电源。

7 护理后进一步修护肌肤。

· 请涂上适量的保湿乳作修护。


※ 请每次使用后都对机身进行保养。(参阅P.17)

护理方法

- 建议移动机器的速度: 每秒移动约2cm
※感到灼热时可稍微加快移动的速度。
- 操作时间进行到一半的时候会发出蜂鸣声进行提示(“哔”)
此时请对另一侧面部进行护理。
- 请将整个电极头表面贴于肌肤上使用。
- 使用时须于皮肤上滑动进行(眼部模式或冷敷模式时除外)。
如长时间使用于同一部位上, 可能会导致灼伤或低温灼伤。
- 请勿将电极头贴于眼睑或眼部周围使用。
眼部模式的电极可以用于眼部周围。

< 清洁模式 >

请按箭头指示的方向于皮肤上滑动使用。
可以使用LED光对眼睑及眼部周围进行护理。

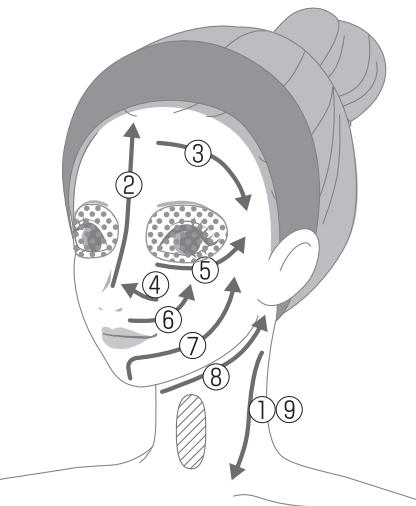

不能使用部位

只限LED光使用的部位
※请闭上眼睛, 并将电极头置于距离肌肤5cm以上的位置进行使用。

< 保湿模式 >

请按箭头指示的方向于皮肤上滑动使用。

如箭头指示的方式
打圈移动

不能使用部位

只限LED光使用的部位
※请闭上眼睛, 并将电极头置于距离肌肤5cm以上的位置进行使用。



< 眼部模式 >

将头部旋转180度, 使眼部模式的电极位于上方。
在2个电极都接触皮肤的状态下, 沿从眼头到眼尾的方向, 以「贴近→离开→移动」的步骤重复进行护理。
贴近时间大约在3秒左右。
※请勿将电极头贴于眼睑上使用。
※请勿连续贴近3秒以上。




请对照镜子进
行使用

不能使用部位

< 冷敷模式 >

用于面部时, 以「贴近→离开→移动」的步骤重覆按压使用。
※可用于眼下肌肤。
※用于眼下肌肤时, 请闭上眼睛, 并将电极头置于距离肌肤5cm以上的位置使用LED光进行照射。

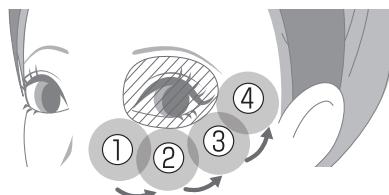

使用完毕后

保养方法

为保持本产品清洁,请于每次使用后进行清理。

- 1 拔除电源适配器。
- 2 请用水沾湿毛巾并卷起,将机身及电极头上的污垢擦拭去除。用水清洗化妆棉固定扣时,请先将其从机身上拆除。
 - 请勿使用水溶性清洁剂、酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂等清洁。
 - 请勿在残留爽肤水或保湿霜的状态下闲置本机。
- 3 用干布擦除所有部件上的水分后妥善保管。

保管方法

- 长时间不使用时,请在保养后进行妥善保管。
- 不使用时,请先将电源适配器拔除,并妥善保管。
- 请勿存放于火炉或加热器附近、浴室等高温潮湿地方、炽热阳光下及不稳固的地方。
- 请将本机放置于儿童无法触及的地方。

保养与检查

- 经长时间闲置后,请于再使用前先检查其操作是否正常及安全。
- 本机操作发生异常时,可先参照「排除故障」(P.18~P.19)进行检查。
如仍无法解决,请准备好购买时的相关明细单向当地经销商商进行咨询。
- 如本产品故障或受损,请咨询当地经销商。

排除故障

检查项目

状况	可能的成因	解决方法
无法开机	→ 未将电源适配器插入墙壁上的电源插座中。 → 电源适配器没有连接到机器	→ 连接电源适配器后即开启电源 → 请将电源适配器的电源线插入机器中
机身发热	→ 连续使用	→ 请关闭电源,并让机器休息最少1小时
RF、LED、冷敷、微电流、超脉冲无法选择强度		→ 可以选择强度的是EMS及离子功能
眼部模式没有反应	→ 头部不在正确的位置上 → 没有将眼部模式的电极贴于皮肤上	→ 将头部旋转够180度,否则无法使用眼部模式。请将头部旋至正确位置(参阅P.11) → 请将2个眼部模式的电极贴于皮肤上(参阅P.16)
没有振动	→ 震动功能处于关闭状态	→ 请按下震动(VIB)按钮开启震动功能
冷敷模式没有冰冷感觉	→ 连续使用冷敷模式 → 于推荐环境温度范围外使用时 → 外侧的电极头没有冷却	→ 请关闭电源,并让机器休息最少30分钟 → 请于15°C~30°C的环境下使用 → 只有内侧的电极头会进行冷却

状况	可能的成因	解决方法
感到灼热或疼痛	<ul style="list-style-type: none"> → 设定的强度过高 → 电极头没有完全贴于皮肤上 	<ul style="list-style-type: none"> → 请按模式按钮调低强度 → 请边照镜子确认边将电极头完全贴于皮肤上
EMS强度太低/感觉不到	<ul style="list-style-type: none"> → 设定的强度过低 → 皮肤的水分不足或太过干燥 → 没有按于肌肉上 	<ul style="list-style-type: none"> → 请按模式按钮调高强度 → 请用爽肤水或保湿霜调节皮肤的湿度后再使用 请将手稍微沾湿 → 使用时请将电极头贴于肌肉上(P.16)
灼热(冷敷模式使用时除外)	<ul style="list-style-type: none"> → 没有边移动电极头边进行使用 → 移动速度太慢 	<ul style="list-style-type: none"> → 除眼部模式及冷敷模式外,请务必使电极头于皮肤上滑动来进行使用。 → 请加快移动速度
感觉不到RF的温热	<ul style="list-style-type: none"> → 待机状态/ 自动关闭 (P.11) → 皮肤的水分不足或太过干燥 → 移动速度太快 	<ul style="list-style-type: none"> → 按下各个模式的按钮来启动该模式。 → 请用爽肤水或保湿霜调节皮肤的湿度后再使用 → 请减慢移动速度

常见问题

Q	A
每次应使用多少爽肤水或保湿霜?	以本产品特点来说,使用较多爽肤水及保湿霜的效果较佳。 建议使用化妆棉时,将爽肤水完全沾满电极头。 保湿霜请使用约为珍珠2粒大小的量。 如感觉爽肤水及保湿霜不足,建议进行补充。
是否可于入浴时使用?	本产品并非防水产品,请勿在浴室中进行使用。 此外,也请不要在有水的地方进行使用。
使用后肌肤发烫。	因RF的温热所产生现象。 可使用冷敷模式或保冷冰袋为皮肤降温。
面部及手部感到刺痛	这是受到离子清洁、离子保湿、EMS、超脉冲模式的微电流刺激所致。 可按模式按钮调节强度请选择个人合适的强度 首次使用或尚未适应时,请务必使用强度1。
使用清洁模式、保湿模式及眼部模式时感觉不到RF电极头的温热	请减慢移动电极头时速度,或尝试加强按于皮肤上的力度。 此外,也可能因爽肤水或化妆棉中的含水量不足所导致。请补充适量的爽肤水或保湿霜。
化妆棉上没有沾上污垢	眼睛不容易看见的污垢也会被导出。污垢被导出方式及黏附状况亦会因人而异。
RF电极头没有热力	RF并非由电极头发热,而是透过电流温热皮肤。

● 废弃

- 请遵照当地政府规定弃置产品。

● 日本以外国家有关保修咨询窗口

- 日本以外国家和地区，有关保修受理请详询购入店铺，或者通过雅萌YA-MAN全球官网(<https://www.ya-man.com/en/>)进行查询

推荐使用的化妆品



RF Booster Pad Pore Refining Deep Cleansing

商品名称：RF Booster Pad Pore Refining Deep Cleansing

容量：15 片 / 盒（可使用 1.5 ~ 2 个月）

编号：YRF0003

单品价格：3,000 日元（不含消费税）



RF Booster Pad Clear Deep Moisturizer

商品名称：RF Booster Pad Clear Deep Moisturizer

容量：15 片 / 盒（可使用 1.5 ~ 2 个月）

编号：YRF0004

单品价格：3,000 日元（不含消费税）

官方网站：www.ya-man.com

※可能不经通知而停止销售。



● 产品规格

额定	DC12V 3.0A
功率	约20W
外形尺寸	机身(含化妆棉固定扣): 约W50×D65×H185(mm)
产品重量	机身(含化妆棉固定扣): 约230g
材质	本体 ABS树脂 面板: 聚碳酸酯 电极头: PET树脂/不锈钢(镀铬) 手触电极: ABS树脂(镀铬)
生产国	日本
配件	化妆棉固定扣、电源适配器
推荐环境	15°C~30°C