

YAMAN

保管用  
保証書付

# 取扱説明書 巻くだけキュット

MN-A-51

このたびはヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり<sup>※</sup>物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## 警告

	分解や修理・改造はしない。 火災・感電・ケガの原因になります。 修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
	火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所や、ほこりっぽい場所では、放置・使用しない。また、熱器具に近づけない。 発熱・発火・破裂の原因となります。
	火の中に投入・加熱しない。 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には置かない。 (調理台、風呂場、加湿器のそばなど) 火災・感電・ケガの原因となります。
	異臭・異常発熱したときは使用を中止する。 そのまま使用すると破損・発火の原因になります。
	本体およびパンテージバンドを電子レンジや高圧容器にいれない。 発熱・発火・破裂の原因になります。
	子供への使用は避ける。 また、身体の不自由な人には、付添なしで使用させない。 皮膚感覚の弱い人、意思表示の出来ない人は使用しない。 ケガをする恐れがあります。

# ⚠ 警告



禁 止

次に該当する人は使用しない。  
事故や肌・身体のトラブルを生じる恐れがあります。

◆医用電気機器を使用している人：

- ・ペースメーカーなどの体内植込式医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器

◆妊娠中の人の、生理中の人の、授乳中の人の

◆アトピー性皮膚炎の人

◆過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症をおこしている人

◆肌が化膿し、炎症を起こしている人

◆アレルギー体质で、特に肌が敏感な人

- ・金属アレルギーの場合は使用を避ける

◆化粧品による皮膚炎を起こしている人

◆カユミやホテリのあるシミ、物理的刺激などによる  
病的なシミのある人

◆健康が特にすぐれない人

◆ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で  
毛細血管拡張を起こしている人

◆医師の治療を受けている人

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師に  
ご相談ください。

次のような場合、または部位には使用しない。

事故や肌・身体のトラブルを生じる恐れがあります。

◆急性疾患 ◆結核性疾患 ◆有熱性疾患

◆血圧異常時◆伝染病疾患 ◆悪性腫瘍

◆月経時の腹部への使用 ◆首・頭部

◆切り傷 ◆心臓疾患 ◆体調がすぐれない場合

◆飲酒や眠気を誘う薬を服用中の場合

◆疲労の激しい場合 ◆成長過程の人

## ⚠ 注意

 禁止	<p>極端に暑い所や寒い所では使用しない。 使用環境温度範囲は10℃～35℃です。</p>
	<p>電池が漏液したときは使用しない。 火災の原因となります。</p>
 必ず守る	<p>バンテージバンドは塩素及び酸素・酵素系漂白剤や合成洗剤によるお手入れは絶対にしない。 通電面が劣化する原因となりますので、バンテージバンドについた汗や皮脂汚れは、ぬらした柔らかい布で優しく拭き取ってください。</p>
	<p>本体に水などの液体をこぼさない。水洗いや、水まわりでの使用はさける。 故障の原因となることがあります。</p>
	<p>1ヶ月以上使用しない場合は電池を抜く。 電池の寿命劣化となります。</p>
	<p>EMSの刺激を感じなくとも無理に出力を上げない。 身体にならしてから強さを調整してください。筋肉がつる程の強さは必要ありません。</p>
	<p>両腕に使用する場合は必ず片腕ずつレベル1から始め、使い慣れてから強さを調節する。 いきなり強さを上げると、両腕のコントロールを失い危険です。</p>
 使用上の注意	<p>気分が悪くなったり肌に異常があらわれた場合には、直ちに使用を中止する。</p>
	<p>使用時には通電面の汚れをとり、バンドと肌を十分に湿らせる。 また、バンドと肌を密着させる。 通電状態が不安定となり、EMSの刺激を強く感じことがあります。</p>
	<p>次の場合、EMSの刺激を感じない場合があります。</p>
	<p>(1)室温が低い (2)身体が冷えている (3)肌が乾燥している</p>
	<p><b>対処法</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・入浴や保温具で身体を温めてください。</li><li>・肌またはバンテージバンドの通電面を水で湿らせてください。</li></ul>
	<p>(4)バンテージバンドと素肌が密着していない</p>
	<p><b>対処法</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・バンテージバンドは正しく装着し、たるまないようにしてください。 (P6、9 参照)</li></ul>
	<p>(5)バンテージバンドの通電面が汚れている</p>
	<p><b>対処法</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・通電面の汚れは、ぬれた柔らかい布で優しく拭き取ってください (P11 参照)</li></ul>
	<p>(6)バンテージバンドの通電面が消耗している</p>
	<p><b>対処法</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・新しいバンテージバンドをご購入ください (P14 参照)</li></ul>
<p>身体を動かすことにより、まれに刺激を強く感じことがあります。</p>	

# 各部のなまえ

## ●本体 (2個)




## ●付属品

- ・バンテージバンド……2枚

### [バンド内側]



### [バンド外側]

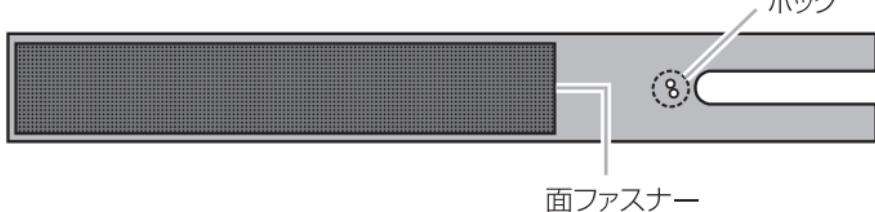

・コイン型リチウム電池(CR 2032)……2個(本体1個につき1個使用)

※電池の寿命は、ご使用になるモード・レベル・環境により異なります。

※付属品の電池はサンプル品ですので、消耗が早い場合があります。



表面(+) 裏面(-)

## ご使用の前に

### 電池の入れかた

電池フタをスライドさせてはずし、電池のプラス極(+マーク)が上になるように電池をセットします。



注意


- 本体についた水は、内部に入らないように注意してふき取ってください。
- 本体の脱着や電池の交換を行うときは、必ず電源をオフしてください。
- 電池を交換するときに、あやまって水が内部に入ってしまった場合には、そのままにせずに、充分にふき取って乾かしてください。

### 本体脱着のしかた

本体の脱着を行う際は、バンテージバンドを平らな場所に置いてください。  
※本体はそれぞれのバンテージバンドに1つずつ取り付ける必要があります。

#### ●取り付け方

本体側面をしっかりと持ち、ホックの真上から片方ずつ取り付けます。

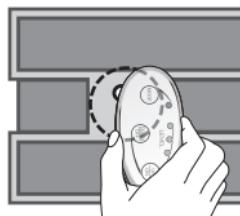

## ●取り外し方

無理に引っ張らず、バンテージバンドのホックを一つずつ外します。

※本体の装着向きは上下どちらでもご使用になります。

## バンテージバンドの装着方法

本製品のバンテージバンドは、板バネが封入されています。ケア部位にワンタッチで取り付けることができます。装着する前に、ケア部位を湿らせてから装着してください。


※装着する前に、あらかじめ本体を取り付けてから装着してください。

### 1 バンテージバンドをまっすぐに伸ばして、通電面(シルバーの2本線)をケア部位に押しあてる。



- ・バンテージバンドが自然に折れ曲がり、ケア部位に巻きつけます。
- ・板バネによる急な巻きつきに注意してください。

### 2 バンテージバンドを最後まで巻きつけ、面ファスナーで固定する。

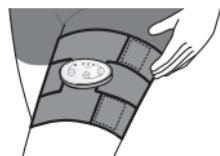

- ・取り外しの際は、板バネによる急な巻きつきに注意してください。

※腹部に装着するときは2つのベルトを面ファスナーでつなげてご使用ください。

### ◆腹部への装着方法について


① 2本のバンテージバンドを伸ばした状態で並べる。

下のイラストで示した位置で2本の面ファスナーを接着する。

② 通電面(シルバーの2本線)を腹部へ押しあてる。

③ 先に巻き付けた帯側を押さえながら、凹側を引っ張り体に巻き付ける。

※巻き付けた際に導通部が肌に密着していることを確認してから使用してください。

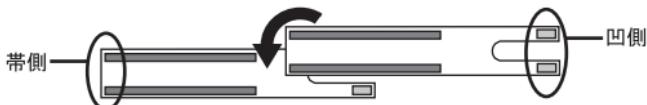




## 使用上の 注意

- バンテージバンドはきつめにしっかりと巻いてください。  
緩い状態で使用すると、EMSを感じなかつたり、強い刺激を感じることがあり、肌トラブルの恐れがあります。  
痛みや不快感を感じた場合、すぐに使用を中止し、通電面と肌が密着するようにしっかりと巻きつけて使用してください。

# ケアをしましょう

## 1 オン／アップボタンを長押し(約3秒) し、本体の電源を入れる。

- ・電源／モードランプが赤色に点灯します。(スタンバイ)
- ・本体の電源が入っただけでは何も刺激は感じません。
- ・この状態で30秒経過すると自動的に電源がオフします。

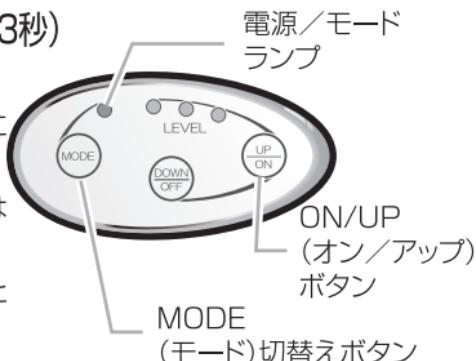

## 2 モード切替えボタンでモードを選択する。

リズムの異なる2つのモードを選べます。


設定状態は電源／モードランプで表示します。

	表示	内容
モード1	赤点灯	筋肉をトントンたたくような刺激
モード2	緑点灯	筋肉をギューと揉み出すような刺激

- ・通常は、モード2でのご使用をおすすめします。
- ・モード2の刺激が強いと感じる場合は、モード1をご使用ください。

### 3 レベルを調節する。

- ・オン／アップボタン、オフ／ダウンボタンを押して  
レベルを調節します。
- ・オン／アップボタンを1回押すごとに1レベル上がり、オフ／  
ダウンボタンを1回押すごとに1レベル下がります。
- ・出力中にモードボタンを  
押すと次のモードのレベル1になります。  
レベルは1～6まであり、設定状態はレベル表示ランプの  
点灯・点滅で表示します。

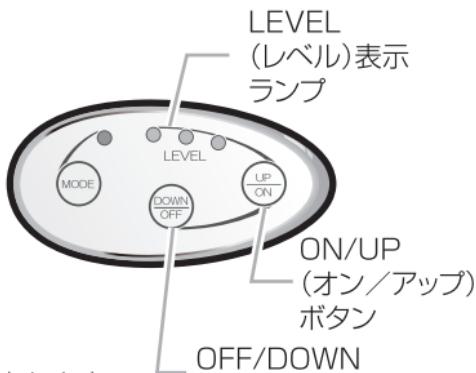

レベル表示ランプ

●消灯 ☀ 点滅 ○点灯

スタンバイ	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
●	☀	○	○☀	○○	○○☀	○○○

### 4 ケアを行う。

- ・ケアは必ずレベル1から始め、使い慣れてきたら強さを調整してください。  
無理に出力を上げず、適切な強さでケアを行ってください。  
筋肉がつる程の強さは適切ではありません。
- ・途中で中断したい場合は、オフ／ダウンボタンを長押し(約3秒)します。  
または、電源／モードランプが消えるまでオフ／ダウンボタンを繰り返し押します。  
使用開始から約10分で自動的に電源がオフします。



注意

- 使用中に身体を動かさないでください。刺激を強く感じることがあります。
- 使用時には通電面の汚れをとり、バンドとお肌を十分に湿らせてください。また、バンドとお肌を密着させてください。
- 慣れるまで、長時間のご使用は避けてください。
- 就寝中に使用はしないでください。

## EMS機能

EMSとは、電気的筋肉刺激のことです。微弱な電流を筋肉に流すことによって、筋肉に刺激を与え筋肉を動かす運動法です。  
(Electrical Muscle Stimulationの略)

## もし何も刺激を感じない時は？

- ・ 通電面全体がお肌に触れていないと  
刺激を感じません。  
バンテージバンドをお肌に密着させてください。
- ・ バンテージバンドがよれていたり、  
ねじれていたりすると刺激を感じません。
- ・ お肌が乾燥していると刺激は感じません。  
刺激を感じない場合は、お肌またはバンテージバンドの通電面を  
水で湿らせてください。  
オン／アップボタンを押して、徐々に強さ(レベル)を上げてください。

※EMSはお肌の状態や個人差によっても感じ方が異なります。

※水で湿らせてても通電が感じられない時には製品の使用を一旦中止し、販売店にご相談ください。

## EMSのご使用時間の目安

- 1部位1日1回、1回10分程度を目安にご使用ください。  
再度同じ部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
- ご自分の体調に合わせて使用時間を調節してください。

## 安心して長くお使いいただくために…

- バンテージバンドの通電面が汚れたり変色しても、電気を感じられればご使用に問題ありません。
- 本体の気になる汚れは水でぬらした柔らかい布で優しく拭き取りましょう。  
(本体をいためるのでアルコールや洗剤、シンナーなどの溶剤は使わないでください。11ページ参照)
- EMSの刺激を感じにくい時はバンテージバンドの通電面がしっかりとお肌に密着しているか確認してください。  
(お肌が乾燥しているときは、バンテージバンドを湿らせてください。  
6、9ページ参照)



注意

- 着用したまま高圧電流に近づかないでください。感電する恐れがあります。
- 金属アレルギーの人はご使用を避け、万一お肌に異常を感じた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 長時間にわたり濡れたまま他の繊維と接触させることを避けてください。
- 塩素・硫黄を含む素材との混用は絶対に避けてください。酸化・硫化による変色・機能劣化の恐れがあります。

# ケアが終わったら

## 本体のお手入れについて

- ◆かたく絞ったタオルか、乾いた布で本体表面のほこりをかるく拭き取ってください。アルコールや洗剤、シンナーなどの溶剤は、本体をいためますので絶対に使わないでください。  
本体の表示面を押さえたり、たたいたりしないでください。
- ◆1ヶ月以上使用しない場合は、電池を抜いてください。

## バンテージバンドのお手入れについて

- ◆使用後、通電面が汗や化粧品で汚れたら、毎回ぬらした柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- ◆洗濯機を使用しての洗濯はお避けください。
- ◆ドライクリーニングは絶対にしないでください。
- ◆塩素及び酸素・酵素系漂白剤や、合成洗剤は使用しないでください。白度を訴求する洗剤はバンテージバンドの銀纖維の劣化を招くので使用しないでください。
- ◆汗や皮脂汚れをぬらした布で拭き取った後は、陰干しで乾燥させてください。
- ◆電子レンジによる乾燥は火災の原因となりますので絶対にしないでください。
- ◆保管する際防虫剤は使用しないでください。
- ◆使用後は乾いた状態で、保管してください。  
(無理に折り曲げないこと)
- ◆直射日光、急激な温度変化、高温多湿の場所は避けて暗所に保管してください。



① バンテージバンドの通電面は、使用していくと若干変色する場合がありますが、異常ではありません。

※バンテージバンドは、使用回数が多くなると消耗・劣化しますので、古くなったら新しいものと交換してください。(保証対象外)

※付属品の追加購入などに関しましては、「消耗品について」(P.14)をご覧ください。

# こんなときには

## 故障かな?と思ったら

次の手順で操作し、EMSの刺激があることを確かめてください。

**1 本体に電池を入れ、バンテージバンドに装着する。**

電池の入れ方は5ページを参照してください。

**2 手のひらと通電面を水で十分に湿らせる。**

**3 電源をオンにし、モード、レベル調整をする。**

オン／アップボタンを1回押して、電源を入れ、さらにオン／アップボタンを1回押してモード1(赤点灯)のレベル1にしてください。

**4 通電を確かめる。**

バンテージバンドを平らに広げ、水でぬらした手のひらを、バンテージバンドの通電面全体に触れる様にのせる。

※上下の通電面が触れ合わないように、ご注意ください。

**5 オン／アップボタンを押して、徐々にレベルを上げてください。**

手のひらに刺激があれば問題ありません。

※手のひらに刺激を確認できなかった場合は、販売店にご相談ください。

# 修理サービスを依頼する前に

次のような場合は故障ではありません。

修理サービスを依頼する前に、もう一度お確かめください。

こんなときは	調べるところ
ランプが表示されない モード/レベルを変更できない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電池の向きが正しくセットされていますか。</li><li>●本体の電源は「ON」になっていますか。</li><li>●本体の電池収納部が汚れていませんか。</li><li>●電池が切れていませんか。</li></ul>
EMSの刺激を感じない	<ul style="list-style-type: none"><li>●オン／アップボタンを押していますか。</li><li>●通電面がお肌に触れていますか。</li><li>●お肌が乾燥していませんか。</li><li>●本体がバンテージバンドにきちんと、接続されていますか。</li><li>●バンテージバンドの通電面が、消耗していませんか。</li></ul>
電源が切れてしまう	<ul style="list-style-type: none"><li>●「電池の入れかた」(P.5)の手順で再度、電池を入れなおしてください。</li><li>●バンテージバンドがお肌に正しく触れていますか。</li><li>●スタンバイ状態が30秒間続くと自動的に電源がオフします。また、ケア開始より10分後自動的に電源がオフします。安全機能で故障ではありません。</li></ul>
電源が切れない	<ul style="list-style-type: none"><li>●オフ／ダウンボタンを、約3秒間長押ししていますか。</li></ul>

## ●仕様

定格	DC3V (CR2032)
外形寸法	本体：L57.0 × W28.5 × H12.5mm バンテージバンド：約530mm×100mm
製品質量	約11g(本体のみ/電池を除く)
付属品	バンテージバンド ..... 2枚 コイン電池(CR2032) ..... 2個

※付属品の電池はサンプル品ですので、消耗が早い場合があります。

# アフターサービス

## 廃棄について



本商品を廃棄される場合、自治体により回収方法が異なりますのでご確認の上、処分願います。

## 消耗品について

◆付属のバッテリージャンボは消耗品につき、保証の対象外です。

※消耗品の購入については、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、ヤーマンコールセンターまでお問い合わせください。

### ヤーマンコールセンター

受付 9:00～17:00  
(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など



**0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS



**0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。

## ●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
- また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、  
無料修理規定(P.15)の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンターにご相談ください。

No.

# 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MN-A-51
形名	巻くだけキュット		
無料修理保証	対象部分：本体のみ		期間：お買い上げ日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

ご購入日の明細を貼付  
または本保証書とあわせて  
保管してください。

**見本**

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものであります。  
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。  
●所定記入欄が空欄のままだりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。  
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の倒壊・落などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

### 個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

### 利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など

**0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

**0570-550-637** (通話料有料)



[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)