

# 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MS-10
形名	ミーゼ ディープコア		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ		期間: お買い上げ日から1年間
店名・住所・電話	 ご購入日付や販売店名を記入して貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		
※販売者名			

販売店様へのお願い 必ず印欄をご記入・ご捺印のお客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだとお買い上げ日がわからずシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合には有料修理になります。  
 (イ) 使用上の誤りや不当な修理による故障および損傷。  
 (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。  
 (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
 This warranty is valid only in Japan.

\* 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

\* ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
 また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
 これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637(通話料有料)




[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

MS10-1-001

myse

# 取扱説明書

## 家庭用美容器 ミーゼ ディープコア MS-10

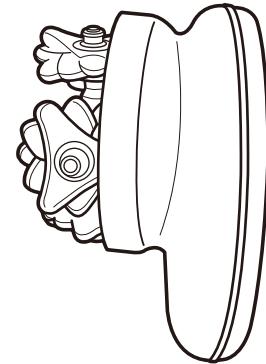

## もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
ご使用の前に	6
使いかた	8
使い終わったら	13
こんなときは	13
●アフターサービス	14
●製品仕様	14
保証書	裏表紙

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

保管用  
保証書付

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



誤った取り扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。




誤った取り扱いをすると、  
人が傷害を負ったり※物的損害の発生が想定される内容。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。



## 警告

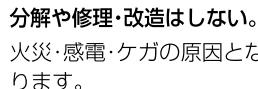

分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・ケガの原因とな  
ります。

修理はお買い上げの販売店  
窓口にご相談ください。



いたんだ  
コードプラグ  
禁止

電源コードやACアダプターが  
いたんだり、コンセントの差し込  
みがゆるいときは使用しない。  
ショート・火災・感電の原因と  
なります。



必ず守る

ACアダプターを差した状態で  
使用する場合は、必ず水気のな  
い室内で使用する。

ACアダプターを差した状態で  
浴室や洗面台などの水気のあ  
る場所で使用すると感電す  
る恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損  
したり、加工したり、無理に曲げ  
たり、引張ったり、ねじったり、  
たばねたりしない。

また、重いものを載せたり、は  
さみ込んだりすると、電源  
コードが破損し、火災・感電の  
原因となります。



必ず守る

必ず交流100~240Vで使用  
する。(無料修理は国内のみ)  
ACアダプターは根元まで確  
実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。



衝撃禁止

本体に重い物を置いたり、使用  
中に落下させたりなど、強い  
衝撃を与えない。

ケガ・故障の原因となります。



## 警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- 医師の治療を受けている人 ●成長過程の人 ●急性疾患 ●高血圧
- 結核性疾患 ●発熱している人 ●伝染病疾患 ●悪性腫瘍 ●皮膚病
- アレルギー体質 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●敏感肌またはお肌の弱い人
- アトピー性皮膚炎 ●疲労が激しい人 ●眠気をさそう薬を服用中の人は
- 皮膚トラブルがある人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
- 妊娠中、生理中、授乳中 ●物理的刺激などによる病的なシミのある人
- 目や顔に疾患がある人および治療中の人の(顔に使った場合)
- 歯の治療中の歯(フェイスアタッチメント使用時)
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●強度近視の人(-6D以上) ●目や顔の手術を行った人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷 ●整形手術をした部位 ●口内や陰部、粘膜など ●にきび
- 過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人 ●頭部
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ●力ヨミやほてりのある部位
- 膨らんだホクロ ●ウイルス性のイボ ●のどぼとけ ●鼻骨
- 心臓の真上(みぞおち周り) ●皮膚の薄い部分(骨のすぐ上)
- まぶた、目のまわり、目のくぼみの周辺、眼球 ●目および耳の周辺

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



プラグ抜く

使用しないときは電源プラグ  
をコンセントから抜く。

また、濡れた手で抜き差しは  
しない。コンセントから抜く  
ときは、電源コードを持たず  
に必ず先端のACアダプター  
を持って引き抜く。

感電やショートして発火する  
ことがあります。



必ず守る

ACアダプターに水など液体  
をこぼさないよう注意する。  
また、水場では充電しない。

万一こぼれたときは、ショ  
ート、感電の恐れがあります  
ので、直ちに使用を中止し、  
販売店の点検を受けてくだ  
さい。



発熱時  
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使  
用を中止する。

そのまま使用すると破損・  
発火の原因になります。



必ず守る

本製品には必ず専用のACア  
ダプターを使用する。また、タ  
コ足配線しない。

感電・ショート・発火の原因  
となります。



## 警告



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
ケガ・故障の原因になります。



電子レンジや高圧容器にいれない。  
発熱・発火・破裂の原因になります。



子供への使用は避ける。  
また、身体の不自由な人は付添なしで使用させない。  
皮膚感覚の弱い人、意思表示の出来ない人は使用しない。  
ケガをするおそれがあります。



充電する際は電源コードが無理な角度で曲がっていかないか確認する。

電源コードは余裕を持って取り扱ってください。  
無理な角度のまま使用すると故障の原因となります。



使用後は必ず電源を切る。  
充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜き、電源を切ってください。



お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。  
感電・ショート・発火の原因となります。



過度な連続使用はしない。  
(業務用としての使用など)  
ケガ・発熱などの原因となります。



不安定な場所に置かない。また、落としたり、ぶつけたりしない。  
落下により故障やケガの原因になることがあります。



火の中に投入・加熱しない。火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所では、放置使用しない。また、熱器具に近づけない。  
発熱・発火・破裂の原因となります。



地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。  
充電中の場合はACアダプターをコンセントから抜く。



お肌に異常がみられるときは使用を中止する。  
必要以上に押し付けて使用すると赤くなりやすいのでご注意ください。個人差がありますが、通常赤みは時間の経過と共に引いていきます。使用中、使用後にお肌に異常がみられる場合や、翌日以降も赤みが引かない場合は医師にご相談ください。



必要以上に押し付けて使用したり、1ヶ所に集中して使用しない。  
過度に押し付けると過熱による故障やお肌を傷める原因になります。



禁止

本製品を頭部に使用しない。  
毛髪を巻き込むおそれがあります。顔や肩に使用する際は毛髪の巻き込みに注意してください。



必ず守る

顔に使用するときは、フェイスアタッチメントをLOモードにして使用する。顔にはボディアタッチメントを使用しない。髪の毛を巻き込まないよう注意する。



禁止

電源OFFの状態でアタッチメントを手で回さない。  
モーターやギアの消耗を早め、故障の原因となります。



禁止

衣類の上から使用しない。  
衣類の上から使用すると、衣類を巻き込んだり、傷つけたりすることがあります。  
衣類の上からの使用を避け、お肌へ直接使用してください。但し、皮膚の巻き込みが気になる方は安全性を高めるため【傷めてもよい肌着等】の上からご使用ください。



必ず守る

アタッチメントに傷などの異常がないか確認してから使用する。異常がある場合は使用しない。



禁止

温泉や入浴剤入りの浴槽では使用しない。  
故障の原因となります。



## 注意



必ず守る

皮膚を巻き込まないよう注意して使用する。  
ケガ・肌トラブルの原因となります。



本体を傾けて使用しない。  
アタッチメントはお肌に対して必ず垂直に、かつ軽くあててください。傾けて使用するとお肌が引っ張られてお肌を傷めるおそれがあります。



必ず守る

ボディアタッチメントを初めて使う際は、部位に限らず、必ずLOモードで使用する。  
肌の様子をみながら使用する。使い方に慣れてからHIモードにしてください。



必ず守る

長時間使用せず、1部位1回5分の使用時間を守る。  
長時間の連続使用はお避けください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。



禁 止

床や家具、ペットなどに使用しない。  
事故やケガ、故障の原因になります。



必ず守る

充電をする際は、本体、充電端子に水気が残っていないか確認する。  
水気が残ったまま充電すると、故障の原因となります。




禁 止

アタッチメントは傷つけない。  
ケガ・肌トラブルの原因になります。


# 各部のなまえ

## ●本体

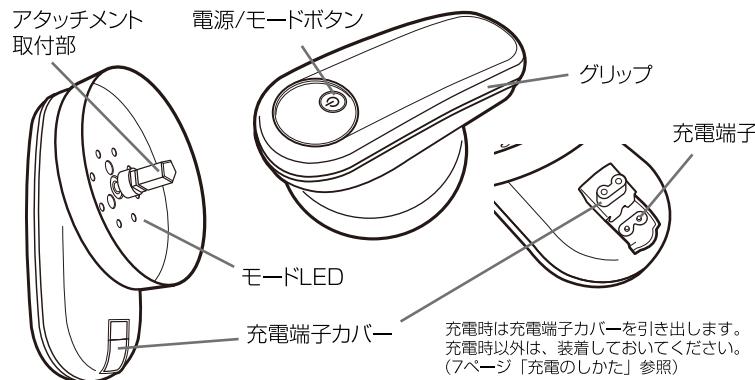


## ●アタッチメント

- ・ボディアタッチメント  
※ボディ専用です。

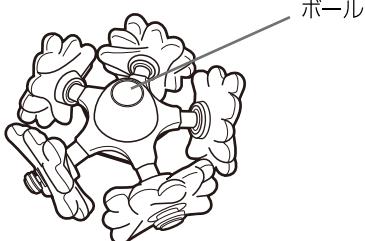


- ・フェイスアタッチメント  
※ボディにも使用できます。

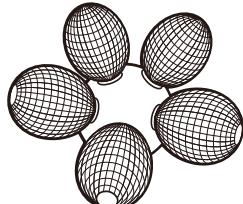

## ●付属品


- ・ACアダプター

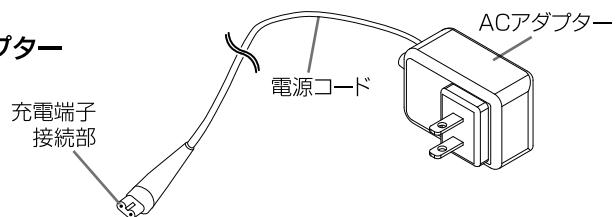

※本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

# ご使用の前に

## 表示部、モードLED

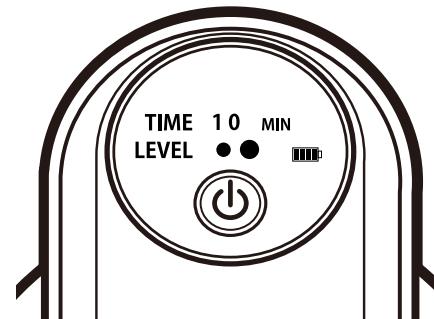

※表示部は、電源オフの状態では表示されません。ただし、充電中はマーク が点灯または点滅します。

LOモード	LEVEL表示左側の●（小さい丸）が点灯します。 モードLEDが青点灯します。
HIモード	LEVEL表示右側の●（大きい丸）が点灯します。 モードLEDが赤点灯します。
充電時	充電中は  マークが点滅します。 充電が完了すると点灯に変わります。
停止機能	モードLEDと表示部が点滅します。 ※10ページ「安全装置について」をご覧ください。
電池切れ	電池切れになると  マークが点滅します。
充電残量	→  →  →
カウントダウンタイマー	電源ONから自動電源OFFまでの10分間タイマーが表示されます。 ※1部位1回5分、合計で1日30分の目安を守って使用してください。

## お肌へのプレテスト

※製品を初めてご使用になる際は必ずプレテストしましょう。  
お肌と製品の相性を確認するため、アタッチメントごとにテストしてください。

- お肌を清潔な状態にし、LOモードで二の腕に5分間使用する。


24時間以内にお肌に異常を感じなければ使用できます。

※使用直後の赤み、かゆみは除く

## 充電のしかた

- 使い始め(長期間使用しなかったとき)は充電を行ってください。
- 使用中に電池が無くなると、■■■マークが点滅し停止します。
- 充電を開始する前に、必ず本体の水気をよく抜き取ってください。

- ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
- 本体の充電端子カバーをはずし、端子接続部にACアダプターを奥までしっかりと差し込んでください。

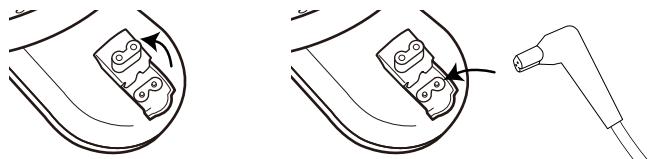

- 充電端子カバーは矢印の方向に引き出します。

- マークが点滅し、充電を開始します。

- 約3時間で ■■■マークが点灯し、充電が完了します。  
ACアダプターを家庭用コンセントから抜いて、  
本体を取り外してください。

- 目安として、約30分間使用することができます。  
(使用できる時間は、環境や設定するモードにより異なります)
- 本商品はACアダプターを差し込んだままで、ご使用できます。

※必ず電源をOFFした状態でACアダプターを抜き差して下さい。



### 注意

- 充電端子カバーはゴム製です。切れ防止の為、丁寧にお取り扱いください。
- ACアダプターをタコ足配線にすると充電されにくくなる場合があります。  
壁のコンセントに直接接続してください。
- 10秒経っても表示ランプが点滅しない場合、ACアダプターが正しく差し込まれているか、本体が正しく装着されているか、もう一度確認してください。
- お風呂等での使用後は、本体を十分乾燥させてください。特に充電端子は水分が残らないように、綿棒等でふき取ってください。

## 使いかた


### ケア開始手順

- 本体にアタッチメントを取り付けます。用途に合わせてボディ・フェイスアタッチメントを選んでください。

※アタッチメントの着脱方法は9ページ「アタッチメントの着脱方法」をご覧ください。

- 図のように本体を持ちます。

※使用部位に合わせて使いやすい持ち方で使用してください。

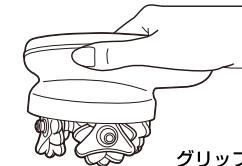


グリップを握る

- 電源ボタンを約3秒長押しして電源をONします。

- 電源をONするとLOモード(左回転)が自動的にスタートします。
- 電源ボタンを押すと下記のようにモードが切り替わります。  
好みのモードを選択してケアしてください。  
モード切替操作はゆっくり行ってください。

※回転方向は、本体を上から見た時の方向です。

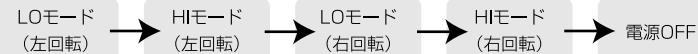

LOモード (モードLED: 青)	低速回転でフェイスとボディ両方に使用可能なモード
HIモード (モードLED: 赤)	高速回転でボディ専用のモード ※顔には使用しないでください。

- 適度に回転方向を変え、体に対して単調な刺激にならないようにしましょう。

- 11ページ「部位ごとの使用方法」に従って、  
体の各部位に使用します。

- 10分間のカウントダウンタイマーが表示されます。

※1部位1回5分、合計で1日30分の目安を守って使用してください。

- 使用後は電源をOFFし、本体のお掃除をしてください。

- 電源ボタンを約3秒長押ししても、電源をOFFすることができます。

### 自動電源OFF


本製品は自動電源OFF機能を備えています。

電源ONしてから約10分で電源がOFFします。

ケアの途中でモードを変更しても、電源ONしてから約10分で電源がOFFします。

## ●アタッチメントの着脱方法

本体のアタッチメント取付部をアタッチメントの本体取付部にまっすぐ差し込みます。取付部同士の向きが合わないしと差し込みにくいことがあります。差し込む向きを調節しながら取り付けてください。取り外す際は、アタッチメントをつかみ、まっすぐに引き抜いてください。斜め方向や、回しながら引き抜こうとすると、取付部が変形するおそれがありますのでご注意ください。

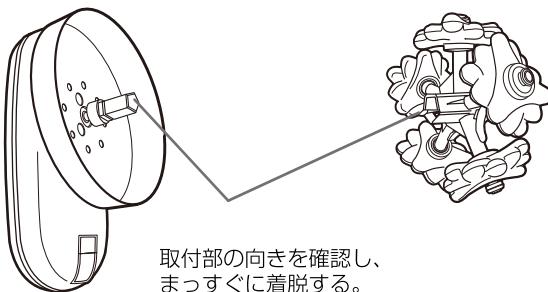

取付部の向きを確認し、まっすぐに着脱する。

- 注意**
- フェイスアタッチメントを顔に使用するときは、必ずLOモードで使用する。
  - ボディアタッチメントは顔に使用しない。  
ボディアタッチメントはボディ専用です。初めて使う際は、部位に限らず、必ずLOモードで使用してください。  
使いかたに慣れてからHIモードにしてください。
  - 髪の毛を巻き込まないよう注意する。

## 防水性について

- 本製品は防水性能を表すIPX7(JIS規格)に相当します。  
※IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに製品を沈め、約30分間放置後に取り出したときに、製品内部に浸水がないことを意味します。
- シャワーや浴槽でご使用いただけます。
- 充電する際は高温多湿な場所を避け、平らで安定した場所で行ってください。
- 水中でご使用の際は背面LEDと表示部が点滅（安全装置が作動）したら肌に当てる力を弱めてください。
- 水中でのご使用は本体に負荷がかかるため、通常より軽めの力でも安全装置が作動することがあります。

## 安全装置について

長時間連続で使用したり、ケア中に本体を強く押し付け過ぎたりするとモードLEDと表示部が点滅し、回転が停止することがあります。これは押しつけすぎにより、肌を傷めるおそれがあることをお知らせする安全装置が働いた為です。（故障ではありません）モードLEDと表示部が点滅しないよう肌には軽く当ててください。

10秒間この状態が続くと安全装置が働き、自動で電源がOFFします。  
安全装置が働いた場合は1時間程度本体を休ませてから使用してください。

## 使用上の注意

- 注意**
- 使用する前にアタッチメントを手で触り、傷や汚れなどの異常がないか必ず確認する。傷がある場合は、使用しない。
  - 強く押し当たらない。1ヶ所に集中して使用しない。  
必要以上に強く押し付けたり1ヶ所に集中して使用すると肌を傷める可能性があります。
  - お肌に対して傾けて使用しない。  
必ず肌に対してアタッチメントを垂直にし、軽くあててください。
  - 1部位1回5分の使用時間を守り、長時間の連続使用は避けてください。  
過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。
  - 皮膚を巻き込まないように注意して使用してください。  
皮膚の巻き込みが気になる場合は安全性を高めるため【傷めてもよい肌着等】の上からご使用ください。
  - まぶたや目の周りには使用しない。
  - 顔には必ずフェイスアタッチメントを使用し、ボディアタッチメントは使用しない。
  - 一部位ごとに一旦スイッチをOFFにして次の部位に移る。
  - 心臓の真上（みぞおち周り）は使用しない。
  - 骨のすぐ上（くるぶし、ひざ、ひじ等）、へそへの使用は避ける。
  - 本体を振り回さない。アタッチメントが外れてケガをする恐れがあります。
  - アタッチメントを本体に取り付けた状態で、故意に手で回さない。
  - アタッチメントに傷などの異常がないか確認してから使用する。  
異常がある場合は使用しない。アタッチメントは傷つけない。
  - お肌が乾燥している場合は化粧品等で保湿をしてから使用する。
  - フェイスアタッチメントをメイクの上から使用するとお肌が黒く汚れることがあります。ファンデーションによる汚れのため、メイクを落としてご使用ください。
  - 歯の治療中の人は使用しない。（フェイスアタッチメント使用時）
  - 髪の毛を巻き込まないよう注意する。

## 部位ごとの使用方法


- ボディへの使用はお好みでHIモード、LOモードを選んで使用してください。
- また、必ずお肌の様子を見ながらモードを調整してご使用ください。
- 1ヶ所に集中して使用しないでください。
- 体毛のある部位は毛が絡まるおそれがあるので、事前に剃ってください。
- 使用後白い粉状のものが付着することがありますが、これはお肌の角質です。使用後はお肌を清潔に保つようにしてください。

### ●お腹まわり、ウエスト

ヘその周りに当ててゆっくりと円を描くように移動させます。

※一部位1回5分を目安に使用してください。

※そばには当てないでください。

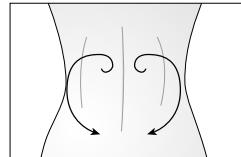



### ●足首～太もも

1 足首に当てて、内ももの付け根まで脚のラインに沿ってゆっくりと移動させます。

2 外側も同様に足首からももの付け根付近までゆっくりと移動させます。

※一部位1回5分を目安に使用してください。

※骨の出ている部位は避けてください。

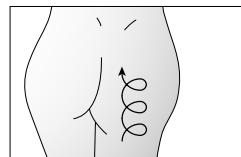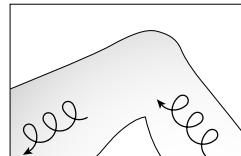

### ●おしり

ももの付け根からおしりの上部に向かって当てます。

※一部位1回5分を目安に使用してください。



### 注意

#### ・強く押し当てない。1ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に押し付けたり、1ヶ所に集中して使用するとお肌を傷めるおそれがあります。

#### ・お肌に対して垂直に使用する。


必ずお肌に対してアタッチメントを垂直にし、軽くあててください。

・使用する前にアタッチメントを手で触り、傷や汚れなどの異常がないか必ず確認する。傷がある場合は使用しない。アタッチメントは傷つけない。肌トラブル、故障の原因となります。

#### ・お肌に異常がみられるときは使用を中止する。

使用中に強く押し当て過ぎると回転が止まることがあります。

安全装置が働いた為であり故障ではありません。

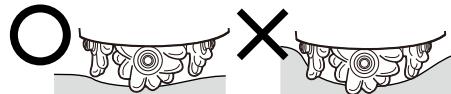

お肌に食い込む程押し付けない


## フェイス

※必ずフェイスアタッチメントを使用してください。

頬に軽く当て、持ち上げるように移動させます。頬が持ち上がる回転方向で使用してください。

※髪の毛の生え際付近に使用する際は髪の毛を巻き込まないよう鏡を見ながら使用してください。また、長い髪の毛は結んでからご使用ください。

※回転を切り替える時は、一度顔から離してから切り替えてください

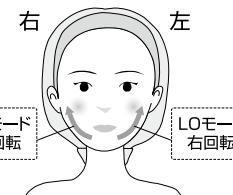

### フェイスケア時のご注意

安全のため次の注意を必ず守ってご使用ください。


守らないとお肌を傷めるおそれがあります。

- ・肌には軽く当て、決して強く押し当てない。
- ・痛みや異常を感じた際はすぐに使用を中止する。





### 注意

- ・まぶたや目のまわりには使用しない。
- ・フェイスアタッチメントをメイクの上から使用するとお肌が黒く汚れることがあります。ファンデーションによる汚れのため、メイクを落としてご使用ください。
- ・歯の治療中の人は使用しない。(フェイスアタッチメント使用時)
- ・アクセサリー(ピアス・イヤリング等)は外してから使用する。

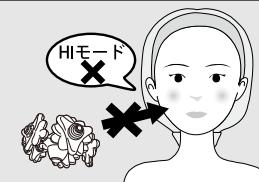

- ・HIモードでは使用しない。
- ・顔にはボディアタッチメントを使用しない。
- ・髪の毛を巻き込まないよう注意する。
- ・顔のお肌に対して垂直に使用する。

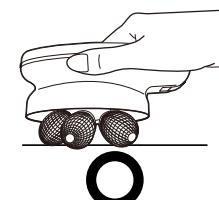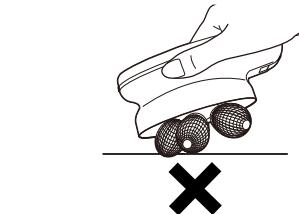

# 使い終わったら

## お手入れのしかた

■本体やアタッチメントに付いた汚れは使用後、毎回取り除いてください。

■本体やアタッチメントは水洗いができます。(ボディアタッチメント中央のボールは着脱できません。)

水洗い後は乾いた布や綿棒を使い、水気をよく拭いてください。

※水滴が付いた状態で放置しないでください。

本体やアタッチメントが劣化する恐れがあります。

■収納する前にかたく絞ったタオルか、乾いた布で本体表面のほこりや水分を軽く拭き取ってください。

■本体のアダプター差入口・充電端子は綿棒などで水気をよく拭いてください。

■アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



## こんなときは

修理サービスを依頼する前に、下記の項目をご確認ください。

こんなときは	考えられる原因	対処法
アタッチメントが回らない	●充電が不十分	充電してください。(P.7参照) ※約3時間の充電で約30分使用できます。
	●アタッチメントに異物が挟まっている	取り除いてください。
	●安全装置がはたらいている (P.10参照)	電源を切り、一時間程度本体を休ませてから使用してください。
本体が熱い	●長時間連続運転している	電源を切り、一時間程度本体を休ませてから使用してください。
	●強く押さえすぎている	押し当てる力を緩めてください。
	●アタッチメントに異物が挟まっている	取り除いてください。
電源が切れる／背面LEDが点滅する	●強く押し当てる	軽く当ててください。
	●10分経つと自動で電源が切れます	再度電源を入れ直してください。
	●充電が不十分	充電してください。(P.7参照) ※約3時間の充電で約30分使用できます。
	●安全装置がはたらいている (P.10参照)	電源を切り、一時間程度本体を休ませてから使用してください。

# アフターサービス

## ●充電池について

・充電池は消耗品です(保証対象外)。

・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。

・充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

## ●廃棄について

・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



## ●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

### ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など 0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS 0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

## ●製品仕様

定 格	DC10V／1.6A
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 尺 法	約W102×D152×H69(mm)
製 品 質 量	約300g(アタッチメントは除く)
付 属 品	ACアダプター ..... 1個 ボディアタッチメント ..... 1個 フェイスアタッチメント ..... 1個