

m y s é

取扱説明書

家庭用美容器

ミーゼ スパトレーナー

MS-60

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~9) を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1


本体を セットする

使用する部位に当たるように
製品を置いてください。

2

電源を オンにする


電源/モードボタンを
長押し(約3秒)してください。

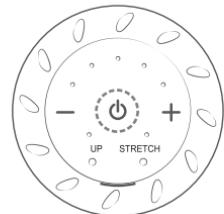

3

モード・ レベルを選ぶ


モードは電源/モードボタンを
レベルはレベルボタンを
短押ししてください。

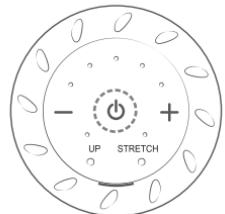

4

終了する

電源/モードボタンを
長押し(約3秒)してください。

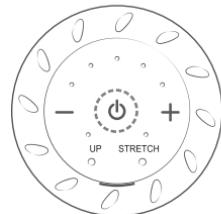

もくじ

| | | | |
|-------------|------|-------------|------|
| 安全上のご注意 | p 3 | お知らせ | p 21 |
| 各部のなまえとはたらき | p 11 | ●故障かな?と思ったら | p 21 |
| お使いになる前に | p 12 | ●よくあるご質問 | p 22 |
| 使いかた | p 15 | ●製品仕様 | p 24 |
| 使い終わったら | p 19 | アフターサービス | p 25 |

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをしてしまうと想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険 (ご使用に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器

・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

⚠ 警告 (ご使用に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人

・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人 ・妊娠初期から出産直後までの人は

次の人をご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人

・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末梢循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人は

・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人は

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球

・まぶた（眼窩） ・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位

・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位



禁 止

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

・外科手術（形成、整形、美容）等で体内に金属を埋め込んだ部位

⚠ 警告 (ご使用に関して)

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

- オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。

- 使用前に電極の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。



用途以外
禁止

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。

事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

⚠ 注意 (ご使用に関して)

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



禁止

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しづつ調節してください。
事故・けがの原因となります。

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 不安定な場所に置かない。また、機器(本体・付属品等)を落としたり、ぶつけたりしない。

けが・故障の原因となります。

- 浴槽で使用する際には、必ず吸盤を使用する。

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
 - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水に入った他の容器の近く（機器の使用は可）
 - ・ほこりの多い場所
 - ・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所（機器の使用は可）
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。
- 本体操作部の上に重い物を置いたり、乗ったり、立ったりしない。
故障の原因になります。
- 充電用USBケーブルが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター（P.25）にお問い合わせの上、充電用USBケーブルをお使いください。



禁止

- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。
故障の原因となります。
- 心臓を挟む配置での電極配置をしない。



禁止

- 本体/充電用USBケーブルは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



使用者の制限

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のUSBプラグを持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、充電中の場合は、USBケーブルプラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。

- 使用後および機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。

火災・事故のおそれがあります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。

充電が終わったら本体から充電用USBケーブルを外してください。



プラグを
抜く

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにして充電用USBケーブルを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 電池が漏液したときは使用しない。
火災の原因となります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。
事故・けがの原因となります。



禁止

- 停電した時は、直ちに電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜く。
事故のおそれがあります。
- 機器を移動する時は、電源スイッチを切り、充電用USBケーブルを抜く。
感電・事故の原因となります。
- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

プラグを
抜く

- 使用後は必ず本体の水分をふき取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

本体がぬれたままの状態で放置すると、故障の原因となります。

- 同一部位に10分以上の使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

- 折り曲げて保管しない。
事故・故障の原因となります。

- 衣類の上から使用しない。
事故・けがの原因となります。

- アクセサリー（ネックレス・ベルト・指輪・イヤリング等）は外してから使用する。
事故・けがの原因となります。



必ず守る

⚠ 警告 (電源について)

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。

感電・ショート、発火の原因となります。



禁止

- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い

禁止

- ACアダプター（市販品）／充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 充電用USBケーブルは、根元まで確実に差し込む。

火災・感電・やけどの原因となります。

- 充電用USBケーブルを引っ張って本製品を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。

- 充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 本体の充電部に化粧水などが付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 必ず直流5V1AのACアダプターを使用する。（無料保証は国内のみ）

また、急速充電のアダプターは使用しない。

火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告

- 必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。





発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

■ 本体

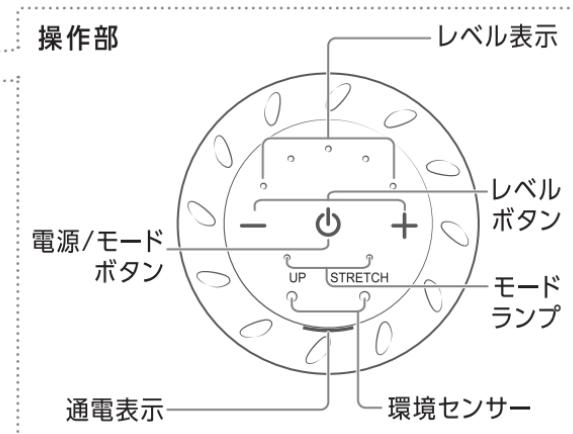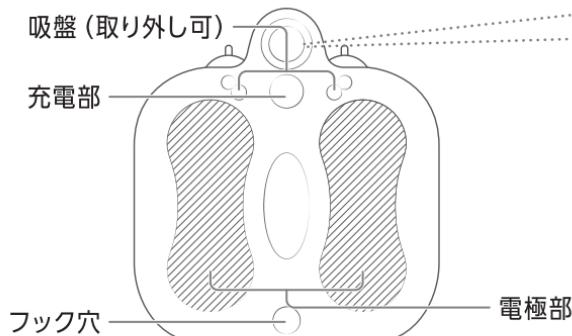

■ 付属品

- 吸盤
- 充電用USBケーブル
- 取扱説明書（保証書付）

■ はたらき

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。（モードを切り替えるとリセットされます）

防水仕様

本製品（充電用USBケーブルを除く）は、IPX8（JIS防水保護等級）の防水仕様です。
・濡れた状態では絶対に充電しないでください。
・充電用USBケーブルは防水ではありません。


環境センサー

水中と空気中を感知してEMSの出力を自動で調整します。


■ お使いになる前に

充電する

家庭用コンセントを使用する

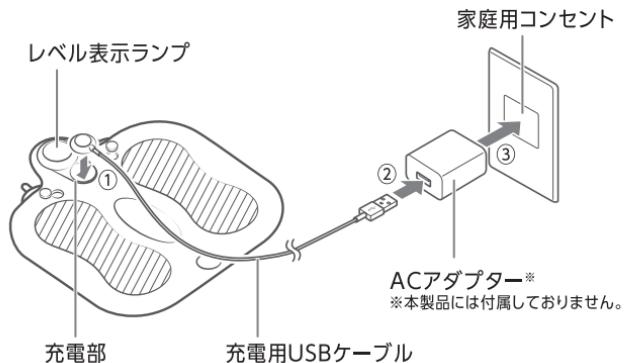

パソコンを使用する

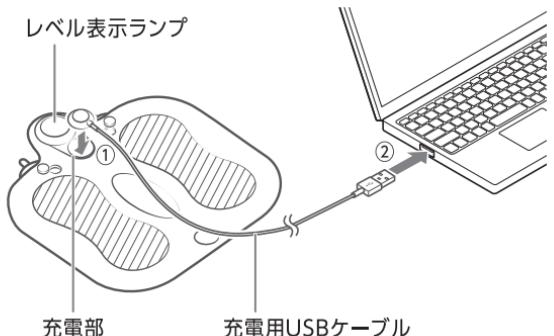

- 充電用USBケーブルを充電部に図のように接続すると、充電が始まります。充電中はレベル表示が点滅します。
- 充電が完了すると、1分間レベル表示が点灯した後、消灯します。充電用USBケーブルを本体の充電部から外してください。
- 室温約25°Cの場合、約2時間で満充電となり、約4時間動作可能です。

電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

<充電時間の目安>

| 充電時間 | 動作時間 |
|------|------|
| 約2時間 | 約4時間 |

※充電環境 室温25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です。
※電池の残量や使用環境によって、充電時間は前後します。

注意

- 本体に水滴がついている場合は、水滴をしっかりと拭き取ってください。
水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 充電したまま使用できません。使用前に充電用 USB ケーブルを外してください。電源を入れたまま充電しようとすると電源がオフになります。
- 浴室では絶対に充電しないでください。
- 購入後初めて使用するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してから使用してください。
- 必ず直流5V1AのACアダプターを使用してください。
また、急速充電のアダプターは使用しないでください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

- 1 腕を石鹼で洗い、タオルなどで拭き取る**

- 2 洗ったところに水や化粧水、ジェル（油分を含まないタイプ）などを塗り、UPモードのレベル1で約3分間使用する（P.15）**

- 3 異常がないことを確認する**

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、ご使用ください。



-
- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
 - 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
 - お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。


注意

■ 使いかた

| 水中で使う場合（推奨）

1日1回、同一部位は10分まで。再度使用する場合は24時間以上間隔をあけてください。


1 電源をオンにする

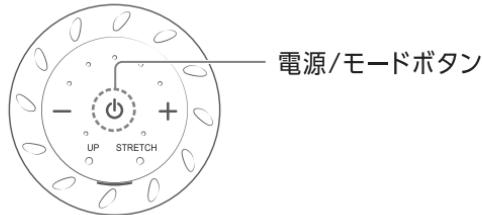

電源／モードボタンを長押し(約3秒)します。

- UPモードランプが白点灯して動作が始まります。
- 電源オン時はUPモードに設定されています。

2 モードを選ぶ

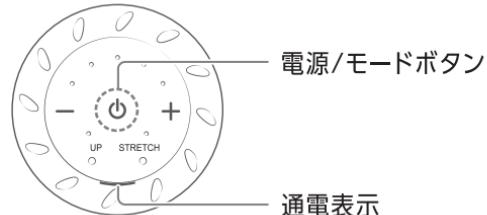

電源／モードボタンを短押しします。


- お肌を電極部にあてると通電表示が点灯し、お肌から電極部を離すと点滅します。
- 電源／モードボタンを押すたびに、以下のようにモードが切り替わります。

| モード | モード ランプ表示 | 特長 |
|---------|---------------------------|--|
| UP | ● UP ○ STRETCH | EMS低周波 筋肉をトントンと大きく動かします。 パンプアップ向きです。 |
| STRETCH | ○ UP ● STRETCH | EMS低・中・高周波 筋肉を心地よく刺激します。 ストレッチ向きです。 |

| 水中以外で使う場合


本製品は水中以外でもご使用できます。体感が弱い場合やピリピリする場合、本製品があたる部位に水、化粧水、ジェル（油分を含まないタイプ）などを塗ってご使用ください。

1 電源をオンにする

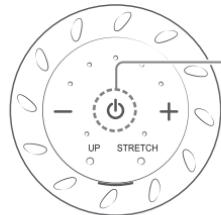

電源/モードボタン

2 モード・レベルを選ぶ

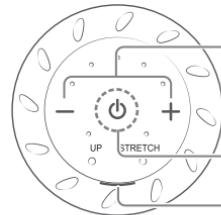

レベルボタン

電源/モードボタン

通電表示


使う

注意

- オイルやスクラブなど刺激の強いものは使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。
- 美容オイルやクリームなど、油分を含むタイプの化粧品は使用しないでください。電極の劣化の原因となります。

3 レベルを選択する

レベルボタンを押してレベルを調整してください。
EMSレベルはレベル1～10の10段階あります。
レベルボタンを押すごとに、レベルが切り替わります。

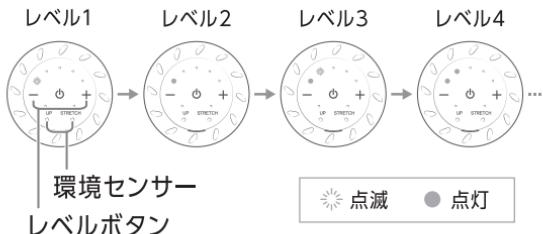

- 水中で使用する場合は、環境センサーを完全に水中に入れてください。
- 慣れるまではレベル1で使用してください。
- 痛みを感じない場合でも、無理にレベルを上げないでください。
- 慣れるまでは周りに支えがある場所で使用してください。転倒の原因となります。

注意

- 使用中に部位を変更する場合は、都度電源を切ってください。また、持ち運びの際は電源を落とし、電極部に触れないようにしてください。
- 立ったまま使用しないでください。
- シャンプー使用時に使用しないでください。

4 終了する

- 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。
- 途中で停止したいときは、電源／モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにしてください。

<おすすめ使用部位>

●ヒップ



●背中

本体を横向きにし、背中にあてて使用してください。



●太ももウラ



●太もも内側（内転筋）

電極部が両足の太ももにあたるよう折り曲げて使用してください。



●前腕



●足裏

必ず座った状態で使用してください。

●ふくらはぎ

■ 使い終わったら

お手入れのしかた

本製品を清潔に保つために、定期的にお手入れをしてください。

1 電源がオフになっていることを確認する

2 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- 汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。
- シート表面の黒いシリコン部分を拭き取ると、布が黒くなることがあります。色移りしても大丈夫な布で拭き取ることをおすすめします。

3 よく乾燥させる

- S字フックなどをフック穴にかけて干すと便利です。

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの薬剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。

- 注意**
- お手入れするときは必ず電源をオフにしてください。
感電・ショート・発火の原因となります。


- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
においや変色の原因となります。

- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、製品本体が腐食する原因となります。



| 保管のしかた

- 折り曲げて保管しないでください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、充電用USBケーブルを本体から外して保管してください。
- 子供の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 本体に付着した汚れはしっかり拭きとってから保管してください。
- 高温多湿の場所（火のそばや炎天下、浴室など）に放置しないでください。

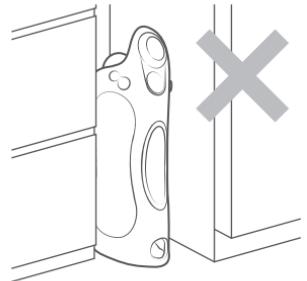

| 保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.21）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.25）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

| こんな症状 | 考えられる原因と処置方法 |
|---------------------------|---|
| 電源が入らない | → 電源/モードボタンを長押し(約3秒)してください。 |
| | → 電池残量がありません。充電してください(P.12)。 |
| 電源が切れる (充電しても数分しか使えない) | → 充電が不足しています。約2時間充電してください。 |
| | → オートオフ機能が働きました(P.11)。 |
| 充電できない、 または充電ランプが点滅しない | → 充電用USBケーブルが本体から離れていないか確認してください。ACアダプターをコンセントにしっかりと奥まで差し込んでください。 |
| | → すでに満充電になっています。充電完了後は1分間レベル表示が点灯した後、消灯します。 |
| EMSが強い (ピリピリする・痛い) | → -ボタンでEMSのレベルを下げてください。 |
| | → お肌が乾燥しています。水や化粧水、ジェルなどを塗って、お肌を湿らせてください。 |
| EMSが弱い (感じない) | → +ボタンでEMSのレベルを上げてください。 |
| | → (水中使用時)環境センサーが空気中と認識しています。環境センサーを水中へ完全に入れてください。 |
| | → (水中以外での使用時)お肌が乾燥しています。水や化粧水、ジェルなどを塗って、お肌を湿らせてください。 |

| よくあるご質問

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A 1日1回、同一部位は10分まで。再度使用する場合は24時間以上間隔をあけてください。

Q 睡眠中に使用できますか？

A 睡眠中は使用しないでください。

Q お風呂場で使用できますか？

A 本体は防水仕様ですので、お風呂・シャワー時にご使用いただけますが、水中に放置しないでください。
また、温泉や入浴剤入りのお風呂でのご使用は、成分上本体の故障や破損の原因となるため使用しないでください。

Q どのくらいの強さで使用すればよいですか？

A 使い始めは必ずレベル1からご使用ください。慣れてきたらお好みのレベルに調節してください。痛みを感じない範囲でご使用ください。

Q 敏感肌なのですが使用できますか？

A 始めに「お肌へのプレテスト」をお試しいただき(P.14)、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。
お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。ご自分で判断が難しい場合は医師にご相談ください。

Q 顔には使用できますか？

A 本製品は身体専用です。顔や首には使用しないでください。

Q 電極を拭いたら黒く汚れたのですが

A 電極部分を強くこすると色が移ることがあります。ケア中にお肌が汚れることはありませんのでご安心ください。

Q サウナや岩盤浴で
使用できますか？

A サウナや岩盤浴など、本体が高温になる場所ではやけどの危険があります
ので絶対に使用しないでください。

Q 他の美顔器との
併用はできますか？

A 本製品を使用する箇所と、別の箇所に使用する美顔器であれば併用は可能
です。

製品仕様

| | |
|-------------|---|
| 定 格 電 源 | DC5V 1.0A |
| 消 費 電 力 | 最大約5W (充電時) |
| 充電時間・動作時間 | 充電時間:約2時間 動作時間:約4時間 |
| 製 品 外 形 尺 法 | W356×D324×H20mm (本体のみ) |
| 製 品 質 量 | 約640g |
| 耐 荷 重 | 120kg |
| 製 造 国 | 中国 |
| 材 質 | シリコーン |
| 付 屬 品 | 吸盤 2個 充電用USBケーブル 1本 取扱説明書(保証書付) |

■ アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.25）にご相談ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - 使用上の誤り
 - お買い上げ後の輸送、転倒・落下
 - 弊社以外の第三者による修理・改造
 - 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - 接続する他の機器の異常
 - (家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - (説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電
 - 非純正部品の使用
 - 車両・船舶への搭載
 - 海外でのご使用

- 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - 改造・分解の形跡がある場合
 - 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合
 - 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No.

保証書

持込修理

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------|--|--|
| 品名 | 家庭用美容器 | 型番 | MS-60 | | |
| 形名 | ミーゼ スパトレーナー | | | | |
| 無料修理保証 | 対象部分 | 期間 | | | |
| | 本体のみ | お買い上げ日から 1年間 | | | |
| 店名・住所・電話 | | | | | |
| ※販売者名 | <p>ご購入日のわざと明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">見本</p> | | | | |

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経て修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」

(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

携帯電話・PHS

0570-550-637



www.ya-man.com