

m y s é

取扱説明書

家庭用美容器

ミーゼ V セラリフト

MS-78

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2～9)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みにになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

もくじ

安全上のご注意 ————— p2

海外でのご使用について ——— p10

各部のなまえとはたらき ——— p11

お使いになる前に ————— p13

使いかた ————— p18

使い終わったら ————— p24

お知らせ ————— p26

●故障かな?と思ったら ——— p26

●よくあるご質問 ————— p28

●製品仕様 ————— p32

アフターサービス ————— p33

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について

**危険**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

危険（ご使用に関して）

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告（ご使用に関して）

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人
 - ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人
- 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
- ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人
 - ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
 - ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
 - ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

- 次のような場合や部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・のど
 - ・膨らんだホクロ ・眼球 ・まぶた（眼窩） ・紫斑のしやすい人 ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
 - ・外科手術（形成、整形、美容）等で体内に金属を埋め込んだ部位
 - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

（施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等）

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



- 使用前にEMS電極や吸引ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。



- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。



- 機器や付属品は子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
 - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外　・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所　・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



警告 (ご使用、保管に関して)

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。



禁止

- お肌の弱い方は、1部位につき3回以上使用しない。

お肌に紫斑(しはん)ができるなど、お肌を傷める原因となります。



禁止

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



禁止

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにして充電用USBケーブルを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

- 通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。



禁止

 警告（ご使用、保管に関して）

- 地震や雷を感じた時や、停電した時は電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜く。
火災・感電・事故のおそれがあります。

**必ず守る**

- 充電が終わったときはACアダプター（市販品）をコンセントから抜く。
火災・事故のおそれがあります。

**必ず守る**

- 機器は不安定な場所に置かない。また、機器を落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすとケガの原因となります。

**落下禁止**

- 使用しないときや機器のお手入れするときは、必ず電源をオフにし、充電用USBケーブルを抜く。
火災・事故のおそれがあります。

**必ず守る**

- 火中投入・加熱・高温・高圧での使用・保管・充電をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。

**発火注意**

- 本製品は、防水仕様ではありません。
濡れた手で操作や水洗いはしないでください。
本体とボタンの隙間に入り込み故障の原因となります。

**水かけ
禁止**

注意 (ご使用、保管に関して)

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



禁止

- 以下使用時間の目安を守って使用する。
 - ・吸引を使用する場合 最大全顔5分
 - ・EMSのみ使用する場合 最大全顔10分再度使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。



必ず守る

過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

- 紫斑(しはん)が確認された場合は、直ちに使用を中止する。
症状が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 機器を1箇所に止めず、常に移動させながら使用する。
止めたまま使用すると、お肌に紫斑(しはん)ができるなど、お肌を傷める原因となります。



必ず守る

- 初めて使用するときや慣れるまでは、各モードを必ず以下レベルから使用する。
 - ・吸引モード：リズムLOW
 - ・EMSモード：レベル1
 - ・吸引+EMS：リズムLOW+レベル1※ヒーターはON/OFFのみ
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。



必ず守る

- LEDの光を直接のぞき込まない。
目を傷める原因となります。



禁止

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。



禁止

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。
EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりすることがあります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 使用後は、毎回「使い終わったら」(P.24)を参照し、機器(特に吸引ヘッド部、吸引口、電極)に付着した皮脂汚れや美容液等を拭き取ってください。また、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。



必ず守る

放置するとにおいや目詰まりの原因となります。

- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。



禁止

- 力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。



必ず守る

- お肌に対して、以下のような吸引使用をしない。
・垂直に引っ張る。
・同じ箇所を繰り返し使用する。
紫斑(しはん) やキズの原因になります。



禁止

- スムーズに動かせるように、電極とお肌との間に常に美容液やジェル、水分があるように、途中で補充する。
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。



必ず守る

- 吸引口を触らない。
故障の原因になります。



禁止

警告（電源に関して）

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線（タコ足配線）しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。



禁止

- 充電用USBケーブルの破損や傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。

感電・ショート、発火の原因となります。



禁止

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。
火災・感電・事故の原因となります。
※無料修理保証は国内でのご使用に限りです。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE

■ 各部のなまえとはたらき

本体

● 正面

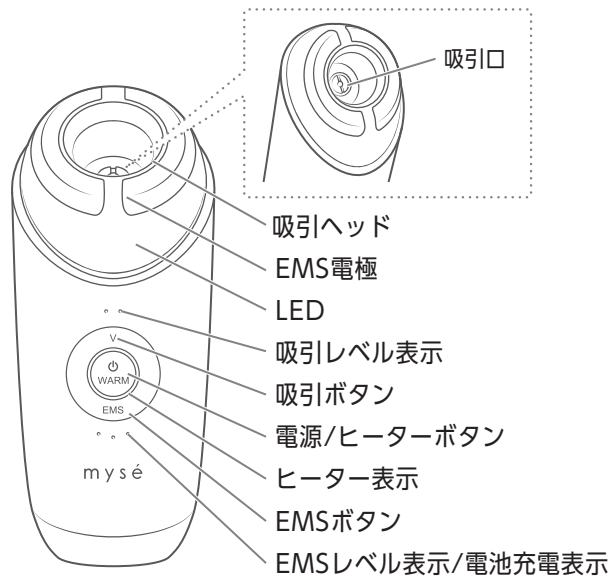


● 背面



付属品

- キャップ

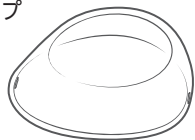

- 充電用USBケーブル (USB Type-C)
- 取扱説明書 (保証書付)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

搭載機能

スタンバイ機能

スタンバイ状態では、ヒーター表示が点滅します。
スタンバイ状態は最長5分とし、5分間操作がない場合は「ピー」と鳴り自動で電源が切れます。
スタンバイ状態になってからもう一度使用したい場合は吸引ボタン/EMSボタンを短押ししてください。

ヒーター機能

お肌を温めながらケアします。

オートオフ機能

ケアの途中でモード/レベル変更しても、動作開始時から約5分で電源がオフになります。途中で電源をオフにしたい場合は、電源/ヒーターボタンを長押し(約2秒)してください。

EMS

電気的に筋肉を刺激します。

吸引

お肌を物理的に吸引し、刺激します。

■ お使いになる前に


使用上のご注意

お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。


- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリング）を外してください。
事故・けがの原因となります。
- 必ずメイクを落として使用してください。
メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。
- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください（P.16）。
- 化粧品またはローション、ジェルでお肌を湿らせてから、直接お肌にあててください。
お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。
製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」（P.24）を参照して、製品に付着した皮脂汚れや化粧品などを取り除いてください。
故障や、肌トラブルの原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。
肌トラブルの原因となります。
- 電極とお肌の間に、常に化粧品などがあるようにし、少なくなったら途中で補充してください。
化粧品などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。
- 推奨環境温度は10℃～40℃です。

充電する

家庭用コンセントを使用する

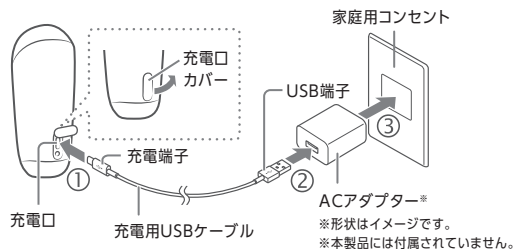

パソコンを使用する

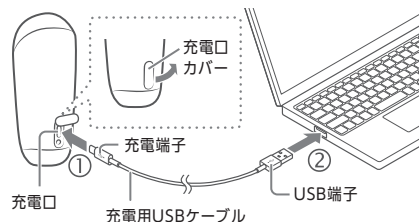

- 充電口カバーを開き、充電用USBケーブルを挿すと充電が開始されます。
充電中はEMSレベル表示/電池充電表示が点滅します。
- 充電が完了すると、EMSレベル表示/電池充電表示がすべて点灯し、約2分後に消灯します。
※充電完了後、ACアダプターを壁面コンセントから抜いてください。
- 室温約25℃の場合、約3時間で満充電となり、約25分動作します。
電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。
- 電池残量が少なくなると、ピッと5回鳴った後に電源がオフになります。

充電中	EMSレベル表示 / 電池充電表示が点滅
充電完了時	EMSレベル表示 / 電池充電表示が3つ点灯後、約2分後に消灯。 ※充電完了後、ACアダプターを壁面コンセントから抜いてください。
充電時間	約3時間（室温約25℃）
動作時間	約25分

※電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって、充電時間や動作時間は前後します。

注意

- 本体、充電端子、USB端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかりと拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- 初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ACアダプター（市販品）は記載されている電流値をご確認ください。1Aより低いものでは充電できない可能性があります。
- 充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。
- 浴室、洗面所など高温多湿な場所で充電しないでください。

お肌へのプレテスト

※初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。


1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

2 洗ったところに化粧品を塗り、電源をオンにして吸引モードとEMSモードをそれぞれ約2分間使用する (P.19)

必ず、吸引モードはリズムLOW、EMSモードはレベル1でテストを行ってください。

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間後にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。

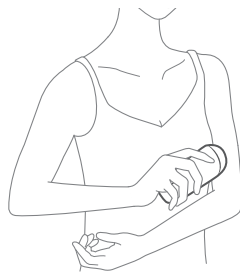

注意

- お肌と本製品の相性を確認するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

モード・レベル説明

- 吸引モードには、リズム (LOW/HIGH) とリフト (LOW/HIGH) の2つがあります。
 リズムモード…断続的にお肌を吸引します
 リフトモード…連続してお肌を吸引します
- EMSレベルは1～6から選択が可能です。
- 吸引モードとEMSモードは、同時使用でもそれぞれ単独でも使用できます。
- 電源/ヒーターボタンを短押しするとヒーターのオンオフができます。

モード	切替	LED	1回の使用時間目安	使用頻度目安
V (吸引)	リズム…LOW・HIGH リフト…LOW・HIGH	●V (吸引) のみ…白 ●V (吸引) とEMS…赤 ●EMSのみ…青 ●WARMのみ…LED消灯	吸引を使用した場合 全顔5分	毎日
EMS	レベル1～レベル6		EMSのみの場合 全顔10分	
WARM	ヒーターオン・ヒーターオフ			

<V (吸引) モード/レベル表示>


☀️ = 点滅

● = 点灯

○ = 消灯

リズム:LOW	リズム:HIGH	リフト:LOW	リフト:HIGH
☀️ ○	● ○	☀️ ☀️	● ●

<ヒーター オン/オフ表示>

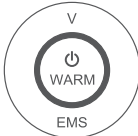ヒーターオフ	ヒーターオン
 点滅	 点灯

<EMSレベル表示>

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5	レベル 6
☀️ ○ ○	● ○ ○	☀️ ☀️ ○	● ● ○	☀️ ☀️ ☀️	● ● ●

■ 使いかた

■ 使用方法のご注意

- 吸引後は一時的にお肌が赤くなることがあります。お肌に赤みや紫斑（しはん）ができた場合は、ただちに使用を中止し、お肌を冷やしてください。その後、1週間ほど様子を見ていただき、症状が続く場合は医師にご相談ください。
- 万一、紫斑（しはん）ができた場合は、ただちに使用を中止してください。紫斑（しはん）の程度にもよりますが、1週間程度で自然に治ります。

■ 使用の目安

吸引モード・EMSモードは毎日ご使用いただけます。ただし、吸引を使用する場合1日最大全顔5分、EMSのみ使用する場合最大全顔10分を目安にご使用ください。

翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上あけてご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。

※過度な使用はお肌を傷める原因となります。

※オートオフ機能により電源オンから約5分が経過すると自動で電源がオフになります。続けてEMSモードを使用したい場合は、電源を再度オンにしてください。

基本的な使いかた

メイクを落とし、化粧品で十分に保湿してからご使用ください。

お手持ちの化粧品を使用する場合は、とろみのある化粧水や美容液をご使用ください。

オイルやスクラブなど刺激の強い化粧品や温感効果のある化粧品、脂肪燃焼成分を含む化粧品は使用しないでください。

製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

※お肌が乾いた状態では使用しないでください。


※お肌に異常がある部分には使用しないでください。

※化粧品を使用せずに本製品を使用する事はお控えください。

1 電源をオンにする


電源／ヒーターボタンを長押しします（約2秒）。

「ピー」と音が鳴り、ヒーター表示が点滅します。

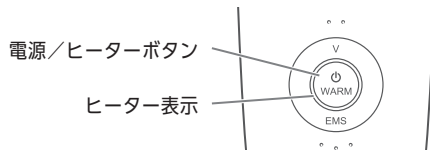

2 モードを選ぶ

- 吸引ボタンを短押しで吸引モードがオンになります。
- EMSボタンを短押しでEMSモードがオンになります。
- 電源／ヒーターボタンを短押しするとヒーターのオンオフができます。
- 吸引モードとEMSモードは、同時使用でもそれぞれ単独でも使用できます。

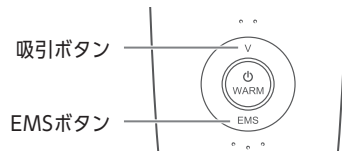

3 吸引・EMSレベルを選ぶ


吸引ボタンを短押しして、吸引レベルを選択します (LOW・HIGH)。

EMSボタンを短押しして、EMSレベルを選択します (1~6)。

電源/ヒーターボタンを短押しして、ヒーターのオンオフを選択します (P.17)。

※使い始めは必ず吸引モードはリズムLOW・EMSモードはレベル1で
ご使用ください。

※無理のないレベルを選んでご使用ください。

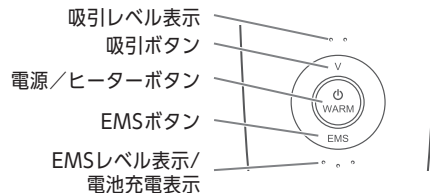

4 お肌にあてる

お肌に吸引ヘッドを軽くあてます。

各部位へのあてかたは、「各部位へのあてかた」(P.21) をご参照ください。

※お肌に強く押しあてすぎないでください。

※本製品は、1箇所止めず、常に移動させながら使用してください。

※お肌から離すときは、手首を返すように離してください。




手首を返すように離す

5 電源をオフにする

電源/ヒーターボタンを長押しします (約2秒)。

※電源オンから約5分が経過すると自動で電源がオフになります。

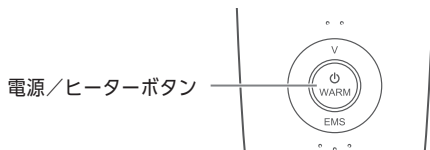

注意

- 使用中に疲労を感じたり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 力を入れてお肌にこすりつけない。
お肌を傷める原因となります。
- 推奨時間以上の使用は避ける。
再度使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
- 手に水や化粧水がついたまま使用しない。
故障や事故、ケガの原因となります。

各部位へのあてかた

以下のように吸引ヘッドをあてると効果的です。

吸引モード

使用目安：半顔2分半

※最大全顔5分

お肌から離すときは、手首を返すように離してください。

フェイスラインや頬の部分を下から上に引き上げるように動かしてください。

図の通り、①～④の順でスライドさせながらご使用ください。

※吸引モードは首に使用できません。

※オートオフ機能により電源オンから約5分が経過すると自動で電源がオフになります。

- 半顔2分半、全顔5分でご使用ください。
2分半で、もう片側のケアに移ってください。

吸引モードを使用できる部位（おすすめの使い方）

- ① あご下（フェイスライン）
- ② ほうれい線
- ③ 頬
- ④ こめかみ



各部位へのあてかた

以下のようにEMS電極をあてると効果的です。

EMSモード

使用目安：半顔5分

※最大全顔10分

図の通り、①～⑥の順でスライドさせながらご使用ください。

※オートオフ機能により電源オンから約5分が経過すると自動で電源がオフになります。続けてEMSモードを使用したい場合は、電源を再度オンにしてください。


- 半顔5分、全顔10分でご使用ください。
5分で、もう片側のケアに移ってください。

EMSモードを使用できる部位（おすすめの使い方）

- ① 首
- ② 顎下
- ③ 口元
- ④ 頬*

*口角と耳を結ぶ線が目安の位置です。

- ⑤ こめかみ
- ⑥ おでこ

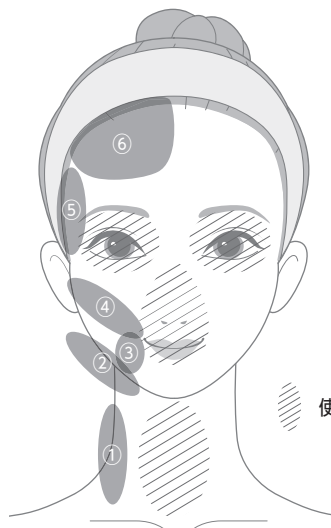

使用できない部位

使う

【使用時間についての注意】

吸引・EMSモードの最大使用時間を守ってご使用ください。

吸引モード：最大全顔5分 / EMSモード 最大全顔10分

（使用例）

A. 吸引・EMSモードをどちらも使用してケアする場合

- ① 吸引・EMSモードを同時に使用する場合 最大全顔5分
- ② ①に続けてEMSモードのみを使用する場合 最大全顔5分
合計1日10分まで

B. 吸引・EMSモードをそれぞれ単独で使用してケアする場合

- ① 吸引モードのみを使用する場合 最大全顔5分
- ② EMSモードのみを使用する場合 最大全顔10分
合計1日15分まで

※過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

注意

- EMSが歯の神経に刺激を与える場合があります。吸引ヘッドを強くあて過ぎず、レベルを下げるか、部位をずらしてご使用ください。特に歯の治療中の方、歯に詰め物がある方はご注意ください。
- 首すじにEMSモードを使用する場合は強く押しあてないように注意し、途中で気分が悪くなった際は直ちに使用を中止してください。※吸引モードは首に使用できません。
また、EMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた



警告

お手入れするときは必ず電源をオフにする
感電・ショート・発火・故障の原因となります。


使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1 タオルなどの布で汚れを拭き取る

- 電極は濡らしてかたく絞った布で拭き取り、その他の部分は乾いた布で拭き取ってください。
- 本体に水分が残らないよう、十分に拭き取ってください。

2 綿棒で吸引ヘッド/吸引口の汚れを拭き取る

※力をいれてこすりつけないでください。
故障の原因となります。

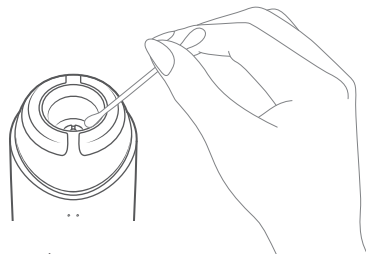

3 風通しの良い場所で乾燥させる

本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。

注意

- 水洗いしないでください。

本製品は、防水仕様ではありません。

- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、AC アダプター（市販品）のプラグを壁面コンセントから抜いてください。または、パソコンからUSB端子を抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置しないで、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.26）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.36）までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
電源が入らない	●電源／ヒーターボタンを約2秒長押ししてください。
	●電池残量がありません。充電してください(P.14)。
充電しても 数分しか使えない	●電池残量が少なくなっています。充電してください(P.14)。
	●電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.36)にご連絡ください。
	●寒い場所で充電や保管をしていると、短い時間しか使えないことがあります。暖かい場所にしばらく置いてから、再度お試しください。
充電が 開始されない	●本体に充電用USBケーブルをしっかり差し込んでください。
	●USB端子とパソコンを正しく接続してください(P.14)。
	●ACアダプター(市販品)のプラグを壁面コンセントに差し込んでください(P.14)。
電源がオフになる	●オートオフ機能(約5分)が、はたらきました。故障ではありません。連続して使用する際は、再度電源をオンにしてください(P.12)。
EMSが強い (ピリピリする・痛い)	●設定レベルが高いので、レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
	●お肌が乾燥しています。化粧品または化粧水、ローション、ジェルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

EMSが弱い

- 設定レベルが低いので、レベルを上げてください。
- お肌が乾燥している場合は、化粧品または化粧水、ローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。

EMSを感じない

- 電池残量が不足している場合は、充電してください(P.14)。
- お肌が乾燥している場合は、化粧品または化粧水、ローション、ジェルなどで湿らせてからご使用ください。
- 筋肉のつきかたによって感じにくい場所があります。
- EMSを選択していない可能性があります。EMSが選択されているか確認してください。

ヒーターが温まらない

- 浴室での使用時のほか、冬場や外気温が低い場合は、温かさを感じにくいことがあります。
- 電池残量が不足している場合は、充電してください(P.14)。
- ヒーター表示が点灯しているか確認してください(P.17)。

吸引が痛い

- レベルボタンでレベルを下げてください。
- 強くこすりつけず、軽くお肌に当てて手首を返すように離してください。

吸引が弱い

- レベルボタンでレベルを上げてください。

よくあるご質問

Q 使用頻度の
目安はありますか？

A

吸引モード・EMSモードは毎日ご使用いただけます。ただし吸引を使用する場合は最大全顔5分、EMSのみの場合は最大全顔10分を目安にご使用ください。

※お肌の状態を見ながらご使用ください。

※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

※翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上あけてご使用ください。

Q お肌が乾いた状態でも
EMSは使用できますか？

A

お肌が乾いた状態では、EMSモードを使用することはできません。EMSが弱いと感じる場合は、お肌を化粧品または化粧水、ローション、ジェルなどで湿らせてご使用ください。

Q お肌が乾いた状態でも吸
引できますか？

A

お肌が乾いた状態では、吸引モードを使用することはできません。

Q 敏感肌なのですが
使っても大丈夫ですか？

A

初めてご使用になるときは、必ずプレテスト(P.16)を行っていただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。
お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。

Q メイクの上から
使用できますか？

A

ファンデーションによりお肌が黒く汚れるおそれがあるため、メイクを落としてからご使用ください。

Q 部位によって同じEMSの
レベルでも刺激の感じが
違うことがありますか？

A

EMSは筋肉を刺激する機能のため、部位によっては刺激を感じにくい場合があります。

Q 浴室で使用できますか？

A

本製品は防水仕様ではありません。水回り(浴室等)や湿度の高い環境では使用しないでください。
また、濡れた手や化粧品がついた手で操作しないでください。本体とボタンの隙間に浸入し、故障の原因となります。

Q 本体を移動しにくいです。
肌から離れません

A

- お肌の表面が乾いた状態では、本体をなめらかに移動できない場合があります。お肌を水や化粧水などでたっぷりぬらして本製品をご使用ください。
- お肌に軽く密着させてから少なでるように動かし、すぐに手首を返すようにお肌から離す動作を繰り返しながら、1箇所止めずに、常に移動させてご使用ください。
- お肌のやわらかい/皮膚がたるんでいる部位は、お肌を引っ張り伸ばしながら移動させてください。

※吸引モード使用時に、お肌のやわらかい/皮膚がたるんでいる部位、または使い方によっては吸引ヘッドがお肌に吸い付き、離れにくい場合があります。強く吸い込まれていると感じた場合は、速やかにお肌から離してください。

万一、紫斑（しはん）ができた場合は、ただちに使用を中止してください。紫斑（しはん）の程度にもよりますが、1週間程度で自然に治ります。

症状が続く場合は、医師にご相談ください。

Q 肌が赤くなったのですが

A

- ・吸引モード使用時は、一時的にお肌が赤くなることがあります。吸引が強いと感じる場合やお肌に赤みや紫斑（しはん）ができた場合は、ただちに使用を中止してください。症状の程度にもよりますが、1週間程度で自然に治ります。症状が続く場合は、医師にご相談ください。
- ・お肌に強く押し当てたり、同じ場所に集中して使用したりすると、お肌を傷める原因となります。お肌に軽く密着させてから、手首を返すようにお肌から離し、常に移動させながらご使用ください。また、お肌の弱い方は、1部位につき同じところに3回以上使用しないでください。

Q 力を入れて
本体をあてるほうが
よいですか？

A

力を入れすぎるとお肌を傷める原因となります。特に顔へのご使用は力を入れずに優しく本体をあててください。ご自身が心地よく感じる強さで動かしてください。

Q クリームの上から
使用できますか？

A

油分が含まれている化粧品は推奨できません。化粧品または化粧水、ローション、ジェルなど、水溶性のものをご使用ください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 1A
消 費 電 力	約2W(充電時)
電 源 方 式	充電式
充 電 時 間	約3時間 ※充電残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は変わります。
動 作 時 間	約25分 ※充電残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は変わります。
外 形 寸 法	約W50×D50×H119(mm)
製 品 質 量	約140g
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリコン 吸引ヘッド:シリコン、ステンレス
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
製 造 国	中国
付 属 品	キャップ1個 充電用USBケーブル(USB Type-C) ..1個 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です（保証対象外）。
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます（充電回数は300回が目安です）。
充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください（P.34、P.35）。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



内蔵電池の取出方法


この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- ・電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- ・電池を取る前には必ず電源をOFFにし、充電ケーブルを抜いてください。
- ・電池を取り外す際は工具などを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- ・電池を取り外す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- ・取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。


取り外し方 ①～⑤を参照し、電池を取り外してください。

- ① 充電口カバーを外す。
- ② ドライバーを使って、ネジを外す。
- ③ マイナスドライバーなど先端の細いものを使い、底蓋を取り外す。

※ドライバーなどを使用する際は、けがをしないよう十分に気をつけてください。

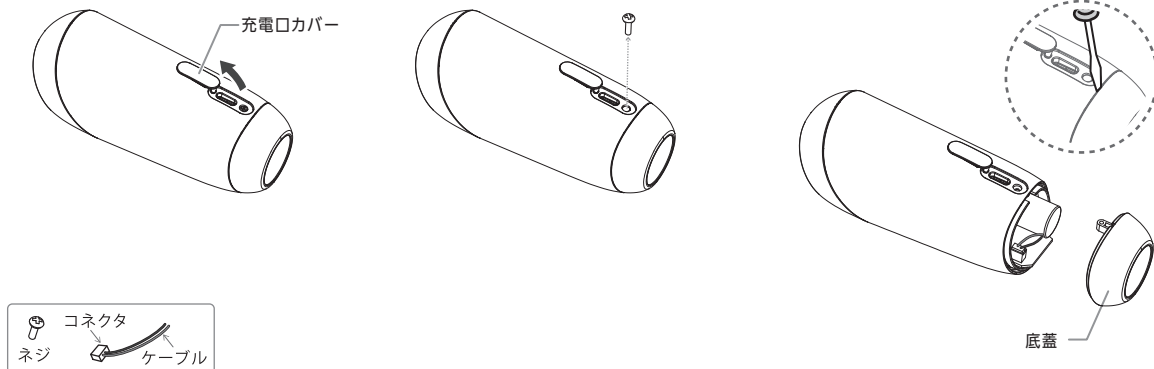


④ 電池ケーブルのコネクタ部分を抜く。

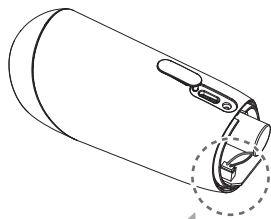

❗ ケーブルは切らないこと



⑤ 電池を取り外す。

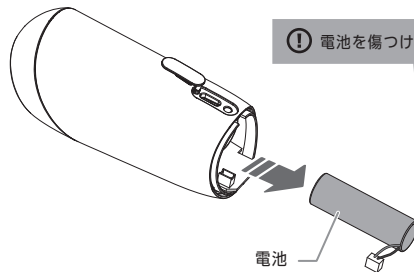

注意

- この手順は、充電池を廃棄するための手順であり、修理用の手順ではありません。
- お客様ご自身での修理は、故障の原因となりますのでお止めください。

お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282**（通話料無料）

携帯電話

 **0570-550-637**（通話料有料）

※ 修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※ 月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。



Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送・転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥（家庭用製品の業務用使用等）想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦（説明書等で指定がある場合）指定方法以外での給電 ⑧非純正品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用

- (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
- (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
- (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
- (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法（レンタル行為を含みます）でのご使用された場合
- (チ) 保証書又は明細書のご提示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
- (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
- (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
- (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	MS-78
形名	ミーゼ Vセラリフト		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

www.ya-man.com

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」
(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)
および「ヤーマン製品保証約款」
(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)
をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

