

m y s é

取扱説明書

家庭用美容器
スカルプリフト
MS-80

はじめに


このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～11)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1


アタッチメント
を取り付ける

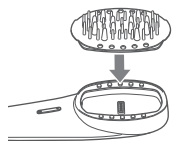

2

電源を
オンにする


電源／バイブレーション
ボタンを長押し
(約1秒)
してください。

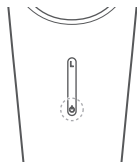

3

バイブレーション
のオン／オフを
選ぶ


電源／バイブレーション
ボタンを押して
ください。

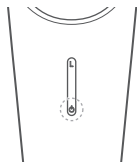

4

EMSの
レベルを選ぶ

レベルボタンを
押してください。

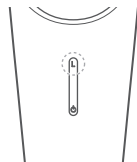

5

頭皮または
お肌にあてる

頭皮またはお肌を
ぬらした状態で
ご使用ください。



6

終了する

約10分後に、
自動で電源が
オフになります。

安全上のご注意	p 3
各部のなまえとはたらき	p 12
お使いになる前に	p 15
使いかた	p 20
使い終わったら	p 28

お知らせ	p 31
●困ったときは	p 31
●よくあるご質問	p 33
●製品仕様	p 35
アフターサービス	p 36

動画で確認する

- 使いかたを動画で確認することもできます。下記のQRコードを読み込んでください。

<https://ymn.cm/uto8FhX>



■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 危険（ご使用、保管に関して）

- 次に該当する人は使用しない。
 医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
 - ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような人は使用しない。
 - ・医師の治療を受けている人 ・成長過程の人 ・急性疾患 ・結核性疾患 ・発熱している人 ・高血圧 ・伝染病疾患
 - ・悪性腫瘍 ・血液疾患 ・内臓疾患 ・皮膚病 ・アレルギー体質 ・アトピー性皮膚炎 ・皮膚トラブルがある人
 - ・疲労が激しい人 ・敏感肌または頭皮の弱い人 ・体調がすぐれない人 ・酒気帯びの人 ・妊娠中、生理中、授乳中の人
 - ・眠気をさそう薬を服用中の人 ・物理的刺激などによる病的なシミのある人
 - ・過度の日焼けでお肌、頭皮がヒリヒリし、炎症を起こしている人 ・強度近視（-6D以上）の人 ・目や顔の手術を受けた人
 - ・目や顔に疾患がある人および治療中の人
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
 - ・切り傷 ・手術（整形手術を含む）をした部位 ・口内や陰部、粘膜など ・にきび ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
 - ・カユミやほてりのある部位 ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・のどぼとけ ・眼球 ・まぶた、目のまわり

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

事故 ・トラブルの原因となります。



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 水の中に落とさない。水の中につけない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、遊ばせない。

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。

事故・ケガのおそれがあります。



使用者の
制限

- 不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。

本体が故障する原因となります。

また、足の上などに落とすとケガの原因となります。



落下・
衝撃禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガ・故障の原因となります。



用途以外
禁止

- 異臭・異常発熱したときは使用しない。

そのまま使用すると破損や発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- お肌、頭皮に異常が生じていないかよく注意して使用する。
お肌、頭皮に合わないときは使用を中止する。

肌トラブルの原因となります。

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSにより頬・あごに刺激を強く感じたり、不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

注意（ご使用、保管に関して）

- 頭皮の弱い人は、状態を見ながら使用し、使用の目安を絶対を守る。
過度なケアは、頭皮を傷める原因となります。
- 次に該当する人は使用しない。
髪の手がからみつき、髪を傷める原因となります。
 - ・植毛をされている人。
 - ・部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の人。
- 初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使い始めや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
事故・ケガの原因となります。身体にならしてからレベルを調整してください。
- 電源をオンにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させない。
ケガ・故障の原因となります。
- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。
本体の変形・故障の原因となります。
- ペットには使用しない。
ケガをするおそれがあります。
- LEDの光を直接のぞき込まない。
目を傷める原因となります。



禁止

注意（ご使用、保管に関して）

- オイル、スクラブなどの刺激の強いものは使用しない。
肌トラブル、故障の原因となります。
- 本体をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与えるおそれがあります。
- 使用前に電極に傷や汚れなどの異常がないことを確認する。傷がある場合には使用しない。
肌トラブル・故障の原因になります。
- 連続して使用しない。
業務用等、過剰に連続使用すると、本体が熱をもちます。再度使用するときは 1 時間以上間をあけてからご使用ください。
- 使用禁止部位（P.4）には使用しない。
事故・ケガのおそれがあります。



注意（ご使用、保管に関して）

- 使用中に疲労を感じたり、お肌、頭皮に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 使用時間を守って使用する。1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。
過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。
- お肌、頭皮に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止する。電極とお肌との間に水などを補充する。
そのまま使用すると、お肌、頭皮を傷める原因となります。
- 力を入れて頭皮にこすりつけない。
頭皮を傷める原因となります。
- スムーズに動かせるように、電極とお肌との間に常に水分があるように、途中で補充する。
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」（P.28）を参照し、製品に付着した汚れ・水滴を拭きとってください。
- アタッチメントに傷などの異常がないか確認してから使用する。
異常がある場合は使用しない。
肌トラブル・故障の原因となります。



必ず守る

⚠ 警告 (電源に関して)

- ACアダプターおよびUSBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、ACアダプターおよびUSBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



無理な扱い
禁止

- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
ACアダプター
使用禁止

- ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



タコ足配線
禁止

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
- 使用しないときは必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし、ACアダプターをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



ACアダプター
を抜く

- コンセントからACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターの側面を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを
抜く

警告（電源に関して）

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。熱器具に近づけない。
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。



発火注意

本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。

- 交流100V～240Vで使用する。（無料修理は日本国内のみ）ACアダプターは根元まで確実に差し込む。



必ず守る

火災・感電・故障の原因となります。

■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

付属品

- ACアダプター
- 充電台 (USBケーブル付き) ※
- 取扱説明書 (保証書付)
- アタッチメント (スカルプ用／フェイス用)


※本製品以外では使用しないでください。

アタッチメント

● スカルプ用アタッチメント

頭皮専用です。

※お買い上げ時は、本体にセットされています。

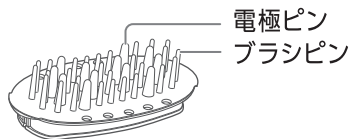

● フェイス用アタッチメント


顔・首・デコルテに使用できます。




アタッチメントはマグネット式で簡単に着脱可能です。詳細については、「アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた」(P.16) を参照してください。

本体

●正面

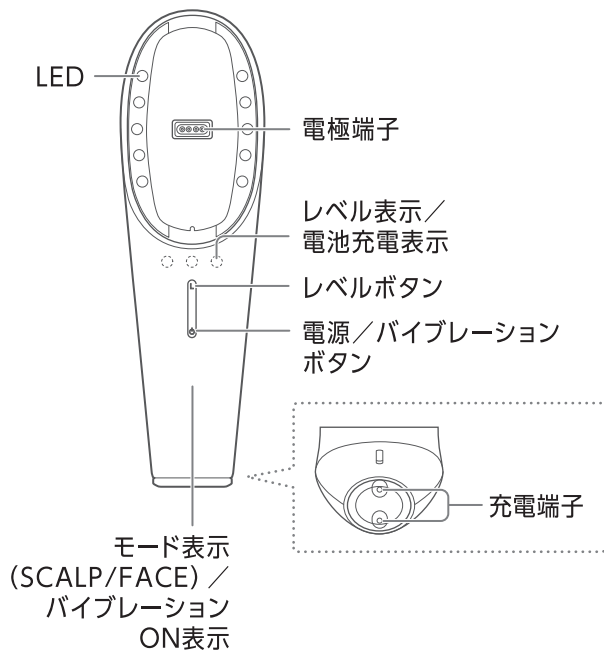

●背面

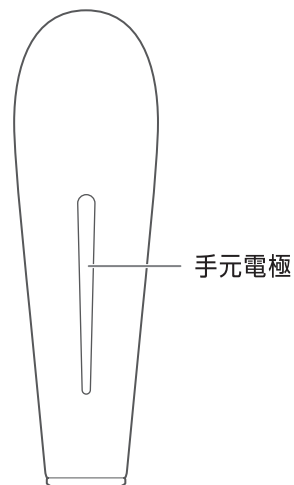

※ご使用時は、必ず手元電極に触れる
ようにしてください。

はたらき

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。

EMS

電氣的に筋肉を刺激します。

フォト

頭皮やお肌にLED光をあてることでケアします。

マイクロカレント

微弱電流で頭皮やお肌をケアします。

振動


細かなバイブレーションにより、頭皮やお肌を優しくタッピングし、ケアをサポートします。

防水仕様

本製品はIPX5（JIS 防水保護等級）の防水仕様です。
※完全防水仕様ではありません。水中にしばらく浸したり、流水を3分以上あて続けしないでください。
※ACアダプターおよび充電台は防水ではありません。

■ お使いになる前に

充電する

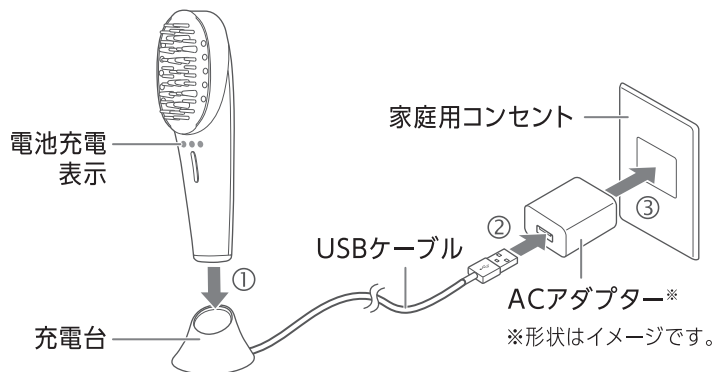

充電中	レベル表示/電池充電表示が点滅
充電完了時	レベル表示/電池充電表示が点灯。ACアダプターを壁面コンセントから抜いてください。
充電時間	約3時間（室温約25℃）
動作時間	約30分

※ 電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

- 本体は正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると充電が開始されません。
- 充電台の充電端子に触れるように置いてください。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。

注意

- 充電端子に水滴などが付いている場合は、しっかり拭き取ってください。水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。


｜ アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた

用途に合わせてスカルプ用アタッチメントまたはフェイス用アタッチメントを付け替えてご使用ください。

- スカルプ用アタッチメント：頭皮専用です。
- フェイス用アタッチメント：顔・首・デコルテに使用できます。

● 取り外しかた

- 1 アタッチメントの上部と下部の突起部分に指をかけて、持ち上げて取り外す

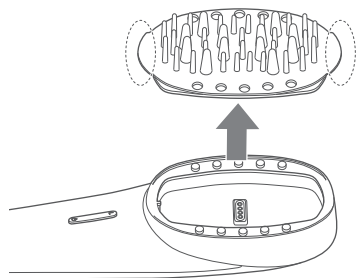


● 取り付けかた

- 1 本体にアタッチメントをはめ込む

- アタッチメントはマグネット式です。
- 自動でモード（SCALPモード／FACEモード）が切り替わります。

※アタッチメントは上下の形状が異なるため、はめ込むことができる向きが決まっています。無理にはめ込まないようにしてください。

※はめ込むときは、指を挟まないよう十分に注意してください。

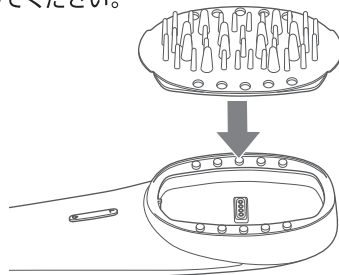

使用部位について

本製品は頭皮・顔・首・デコルテ専用の美容器です。

※頭皮・顔・首・デコルテ以外へは使用しないでください。

モードの切替

モードは次の2種類です。

- SCALPモード：頭筋を刺激して頭皮全体をストレッチします。スカルプ用アタッチメントをご使用ください。
- FACEモード：表情筋を刺激してお肌の引き締めケアを行います。フェイス用アタッチメントをご使用ください。

アタッチメントを取り付けると自動でモードが切り替わります。

※アタッチメントの取り付け方法については、「アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた」(P.16)を参照してください。


EMSレベルの調整

EMSレベルはレベル1、レベル2、レベル3の3段階あります。レベルボタンを押すごとに、レベルが切り替わります。

使いはじめは必ずレベル1からご使用ください。

※レベルを高くするとEMSの出力が強くなります。

※各モードのLEDの明るさ、およびバイブレーション、マイクロカレントはレベル調整できません。

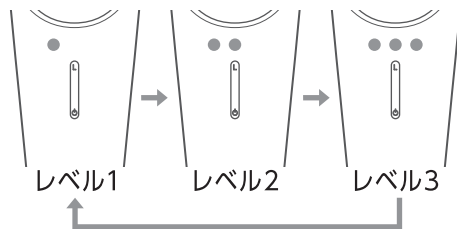

お肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストしましょう。


- スカルプ用アタッチメントをご使用ください。

1 お肌を清潔な状態にする

- 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。

2 腕の内側を水でぬらし、バイブレーションをオンにして、SCALPモードで約1分間動かしながら使用する

- レベル1でおこなってください。
- プレテストをした部分はこすらないでください。

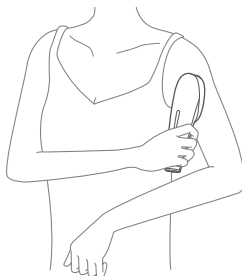

3 24時間以内にお肌に異常（赤みやほてりなど）がないことを確認してから使用する

注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

自動電源オフ

本製品は自動電源オフ機能を備えています。

各モードの動作開始時から約 10 分で自動で電源がオフになります。

- ケアの途中でレベルを変更しても、動作開始時から約 10 分で電源がオフになります。
※モードを途中で変更したときは、変更時から約 10 分で電源がオフになります。使用時間にご注意ください。
- 途中で電源をオフにしたい場合は電源／バイブレーションボタンを長押し（約 1 秒）してください。

■ 使いかた

使用の目安

- 1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。毎日ご使用できます。
- 翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。

※あくまでも目安です。頭皮やお肌の状態を見ながらご使用ください。

※過度な使用は頭皮やお肌を傷める原因となります。

準備

1 頭皮やお肌を清潔な状態にする

- 顔に使用するときには、必ずメイクを落としてからご使用ください。

2 頭皮やお肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認する

注意

- 頭皮やお肌に異常がある部分には使用しないでください。
- 使用中に頭皮やお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

3 アタッチメントを選んで、本体に取り付ける

- 自動でモード（SCALPモード／FACEモード）が切り替わります。
- アタッチメントの取り付け方法については、「アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた」（P.16）を参照してください。

4 頭皮またはお肌をぬらす

- 頭皮：水やシャンプー、トリートメントなど
- お肌：水や化粧水、ゲルなど

注意

- スカルプ用アタッチメントを頭皮以外に使用しないでください。
- フェイス用アタッチメントを顔・首・デコルテ以外に使用しないでください。
- オイルやスクラブなど刺激の強いものは使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。

各モードの使いかた

●SCALPモード（EMS+フォト（赤色LED）+マイクロカレント+振動ON/OFF可）

- スカルプ用アタッチメントをご使用ください。
- 水などで頭皮をぬらした状態、または入浴中にシャンプーで髪全体を泡立てた状態でのご使用をおすすめします。

1 電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して、電源をオンにする

2 電源／バイブレーションボタンを押して、バイブレーションのオン／オフを選ぶ

- 再度、電源／バイブレーションボタンを押すとバイブレーションがオフになります。

3 お好みのEMSレベル（強さ）を選ぶ

- レベルボタンを押すごとに、EMSのレベルが切り替わります。


※ご使用時は、必ず本体の手元電極に触れるようにしてください。手元電極に触れていないとマイクロカレントを使用できません。

注意


- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
 - 水の中に落とさない。
 - 水の中にしずめない。
- 故障・事故・ケガの原因となります。

4 ブラシ全体が頭皮にあたるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かす

※頭皮以外に使用しないでください。

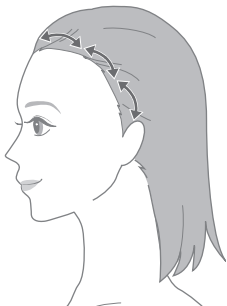

前頭筋+側頭筋をジグザグと細かく動かします。

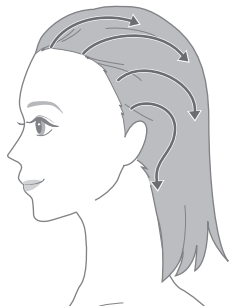

生え際から髪をとかすように後頭部に向かってゆっくり動かします。


注意

- 力を入れて頭皮にこすりつけない。
頭皮を傷める原因となります。
- スムーズに動かせるように、電極と頭皮の間に常に水分があるように、途中で補充する。
乾いた頭皮に使用すると、頭皮を傷める原因となります。
- オイル、スクラブなどの刺激の強いものは使用しない。
肌トラブル、故障の原因となります。

5 ケアが終わったら、電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して電源をオフにする

使用時のポイントと頭皮へのあてかた

- 水やシャンプー、トリートメントなどで先に頭皮をぬらすことで、スムーズに動かすことができます。
- 生え際から頭頂部に向かって頭皮をなぞるようにゆっくりと使用していただくのがおすすめです。頭皮に水分がなくなった場合は再度、頭皮に水やシャンプー、トリートメントなどを付けてください。
- 温かい蒸しタオルで頭皮を温めた後や、入浴後に頭皮が温まった状態で使用していただくのがおすすめです。
- ブラシ全体が頭皮に触れるように、垂直に軽くあててください。
- 強く押しあてないでください。

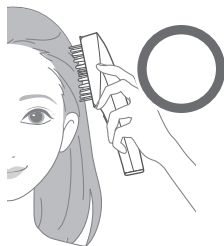

●FACEモード (EMS+フォト (赤色LED) +マイクロカレント+振動ON/OFF可)

- フェイス用アタッチメントをご使用ください。
- 入浴中や、水または化粧水、ゲルなどでお肌を湿らせた状態でのご使用をおすすめします。
- 必ずメイクを落としてからご使用ください。

1 電源／バイブレーション
ボタンを長押し (約1秒)
して、電源をオンにする

2 電源／バイブレーション
ボタンを押して、バイ
ブレーションのオン／
オフを選ぶ

- 再度、電源／バイブレーションボタンを押すとバイブレーションがオフになります。

3 お好みのEMSレベル
(強さ) を選ぶ

- レベルボタンを押すごとに、EMSのレベルが切り替わります。


※ご使用時は、必ず本体の手元電極に触れるようにしてください。手元電極に触れていないとマイクロカレントを使用できません。

注意

- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
 - 水の中に落とさない。
 - 水の中にしずめない。
- 故障・事故・ケガの原因となります。


4 すべてのソフト電極が顔にあたるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かす

使用できない部位：まぶた、目のまわり、首中央

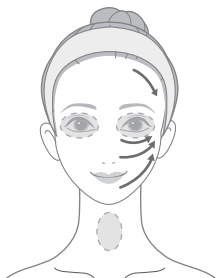

5 首とデコルテをケアする

※のどぼとけや鎖骨にあてないようにすべらせてください。
※必ずレベル1からご使用ください。

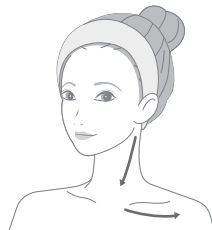

使用時のポイントと顔へのあてかた

- すべてのソフト電極がお肌に触れるように、お肌に垂直に軽くあててください。
- 強く押しあてないでください。



- 6 ケアが終わったら、電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して電源をオフにする

■ 使い終わったら

お手入れのしかた（本体）


使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

本体からアタッチメントを外します。

1 電源がオフになっていることを確認する

2 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す

3 アタッチメントの汚れを流水で流す

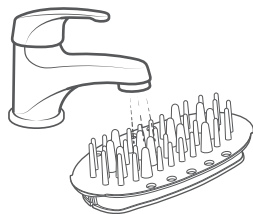

注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

4 タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れやアタッチメントの水分を拭き取る

- 汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。

※特に充電端子および電極端子の水分は必ず拭き取ってください。

ぬれたまま放置したり充電すると故障の原因となります。

5 風通しの良い場所で乾燥させる

- 化粧水やゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 本体は決して水にしずめないでください。また、熱湯を使用しないでください。故障の原因となります。



注意

- 水やお風呂の中にしずめたまま放置しない。本体が故障する原因となります。
- シャンプーやトリートメント（オイルタイプ以外）などを使った場合は、必ず水洗いする。本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。においや変色の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。本体がぬれたままの状態では放置すると、充電端子が腐食する原因となります。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをして保管してください。
- 本体や電極に付着した汚れはしっかり拭きとってから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.31～32)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.36)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合は、お買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
電源が入らない	●アタッチメントを取り付けないと電源は入りません。アタッチメントを取り付けてから電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）してください（P.16、P.22）。
	●電池残量がありません。充電してください（P.15）。
充電しても数分しか使えない	●電池残量が少なくなっています。充電してください（P.15）。
	●電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご連絡ください。 ※故障の原因となるためお客様では交換できません。
充電が開始されない	●ACアダプターをコンセントに差し込んでください（P.15）。
	●本体の向きが合っていません。本体を正しい向きで充電台に置いてください。
EMSが弱い（感じない）	●レベルボタンでEMSのレベルを上げてください（P.17）。
	●ブラシが正しくお肌にあたっていません。正しくあててください（P.24、P.26）。
	●お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

EMSが強い (痛い)

- レベルボタンでEMSのレベルを下げてください (P.17)。
- お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

スムーズに動かない

- 頭皮が乾燥しています。水やシャンプー、トリートメントで、頭皮を湿らせてください。
- お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

電源が切れる

- アタッチメントが正しく取り付けられていないと電源が切れます。正しく取り付けてください。
- 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。連続して使用する際は、再度電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して電源をオンにしてください。

よくあるご質問

Q 頭皮が赤くなるのですが

A ブラシおよび電極ピンで強くこすると、頭皮を傷める原因となります。頭皮の上を軽くすべらせるように動かしてください。また、電極ピンと頭皮との間には、常に水分があるように補充しながらご使用ください。

Q 本体を移動しにくいのですが？

A 頭皮の表面が乾いた状態では、本体をなめらかに移動できない場合があります。上手にケアをするために、頭皮を水などでたっぷりぬらして本製品をご使用ください。また、髪が長い場合は、ブラッシングして髪の絡まりをほどいてから使用してください。

Q お手入れや保管はどうするのですか？

- A
- 乾いた布で本体表面の汚れを拭き取った後に、保管してください。（P.28～29）
 - アタッチメントを本体から取り外し、必ず流水で水洗いしてください。（ただし、水中にしずめないようにしてください。）
 - 高温多湿の場所では保管しないでください。

Q 浴室で使用できますか？

A 本体は浴室で使用いただけますが、水中にしずめたり、流水を3分以上あて続けしないでください。また、浴室で充電はしないでください。

Q 頭皮にピリピリ感を感じることはありますか？

A 個人差により微弱電流による刺激を感じることがあります。頭皮に違和感を感じる場合は使用を中止して専門医にご相談ください。

Q 整髪料をつけたまま使用できますか？

A 肌トラブルの原因となるおそれがあるため、毛髪・頭皮は清潔な状態でご使用ください。

Q 使用する際は水以外は使用できませんか？

A 頭皮にはシャンプーやトリートメント、ヘアローション（オイルタイプ以外）など、顔には化粧水やゲルなどもご使用いただけます。オイル、スクラブなどの刺激の強いものは使用しないでください。肌トラブルや本製品が故障する原因となります。

<使用に適さない化粧品>

・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧品（シャンプー・トリートメント・化粧水）など

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 1.0A
消 費 電 力	最大約3W（充電時）
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約30分(満充電の状態から) ※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	約W54×D180×H56(mm) ※スカルプ用アタッチメント取付時 フェイス用アタッチメント：約W48×D89×H25(mm)
製 品 質 量	本体：約125.5g スカルプ用アタッチメント：約47g フェイス用アタッチメント：約38g
材 質	本体：ABS樹脂 充電台：ABS樹脂 スカルプ用アタッチメント：ABS樹脂、ステンレス フェイス用アタッチメント：ABS樹脂、ステンレス、シリコン
製 造 国	中国
付 属 品	スカルプ用アタッチメント 1個 フェイス用アタッチメント 1個 ACアダプター 1個 充電台(USBケーブル付:長さ約1m) 1個 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.


※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

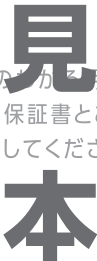品名	家庭用美容器	型番	MS-80
形名	スカルプリフト		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体・アタッチメント	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)
をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com