

取扱説明書

家庭用美容器	ルミナスリフト for Salon	PSM-120
--------	-------------------	---------

もくじ

はじめに……………	1	使い終わったら……………	27
安全上のご注意……………	1	お知らせ……………	29
海外でのご使用について……………	9	●故障かな?と思ったら……………	29
各部のなまえとはたらき……………	11	●よくあるご質問……………	31
お使いになる前に……………	13	●製品仕様……………	32
使いかた……………	19	アフターサービス……………	33



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

 **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

 してはいけないことを示しています。

 しなければならないことを示しています。

 注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

● 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

● 次のような人は使用しない。

事故・トラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人
次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人 ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

● 次のような場合や部位には使用しない。

事故・トラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球
・まぶた(眼窩) (COOLモードでは使用可) ・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位
・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位

※ 施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

※ LED光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際は目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

※ ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

● 過剰な連続使用はしない。(業務用としての使用など)

けが・発熱などの原因となります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。
 - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの(アルコール・シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。
- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- 使用前に電極部の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
肌トラブル・けがの原因となります。
- COOLモード使用時以外は同じ箇所にあて続けない。必ずお肌の上を動かしながら使用する。
ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。
やけど・低温やけどの原因となります。
- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。
- 引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。



禁止

- 電源コードが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター(P.33)にお問い合わせの上、専用電源コードをお使いください。
- 異臭・異常発熱したときは使用しない。
そのまま使用すると破損・発火の原因となります。
- 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。
- 不安定な場所に置かない。また、落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。
- 本体や充電台・ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。
- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。



禁止



異臭・
異常発熱時
使用禁止



衝撃禁止



落下禁止



使用者の
制限

警告 (ご使用、保管に関して)

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。

けが・故障の原因となります。



用途以外
禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ禁止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

- 初めて使用する前は必ずプレテストを行ってから使用する。

事故・けがの原因となります。

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSにより頬・あごに刺激を強く感じたり、不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。

- 機器(本体等)に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

警告 (ご使用、保管に関して)

- 電子レンジや高圧容器に入れない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



破裂注意

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



プラグを抜く

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、プラグを抜く。

充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜く。

火災・事故のおそれがあります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電のおそれがあります。

注意 (ご使用、保管に関して)

- 以下の項目は行わない。

事故やけが、本体が故障する原因となります。

・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。・落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。

・業務用等、過剰な連続使用をしない。

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用すると、お肌を傷める可能性があります。

- 電極部を金属・物にあてない。

発熱・発火・故障・破損の原因となります。

- 極端に暑い場所や寒い場所では使用しない。

使用環境推奨範囲は約15℃～30℃です。

- 不安定な場所や転倒しやすい場所では使用しない。

けが・故障の原因となります。



禁止

注意 (ご使用、保管に関して)

- 本体や充電台をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
表面に損傷を与える原因となります。
- ペットには使用しない。
けがの原因となります。
- 電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。
家具などの破損・けがの原因となります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- LEDの光を直接のぞき込まない。LED光で目のまわり、まぶたへのケアをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。
目やお肌を傷める原因となります。
- COOLモードを連続して使用しない。
連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。
再度使用する時は30分以上間をあけてから使用してください。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。

-
- 屋外で使用しない。
本体の故障・誤動作の原因となります。

-
- 使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外してください。
事故・けがの原因となります。
 - 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。



禁止



屋外禁止



必ず守る

注意 (ご使用、保管に関して)

- 電極とお肌の間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充する。
化粧品・水などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。
- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または化粧品・水・ゲルなどでお肌を湿らせてから使用する。
そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。
肌トラブルの原因となります。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 1回の使用で下記の時間以上使用しない。
CLEANモード:3分以上 MOISTモード:6分以上 COOLモード:3分以上
肌トラブルの原因となります。
- 同一部位に連続使用は避ける。
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。
あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
- 使用後は必ず電源を切り、毎回「使い終わったら」(P.27)を参照して、製品に付着した汚れなどを取り除く。
肌トラブル・故障の原因となります。
- 以下の項目を守って使用する。
事故やけが、本体が故障する原因となります。
 - ・同じ箇所にあて続けない。
 - ・お肌の状態にあわせて使用する。
 - ・日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。



必ず守る

警告 (電源に関して)

- 専用のACアダプター・充電用USBケーブル以外は使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

- ACアダプターおよび充電用USBケーブルを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

- ACアダプターおよび充電用USBケーブルを引っ張って製品を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。



コード引っ張り
移動禁止

- ACアダプターおよび充電用USBケーブルが傷んだり、壁面コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- ACアダプターや充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- 必ず交流100~240Vで使用する(無料修理は国内のみ)。ACアダプターおよび充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- 充電台にゲル・水(液体)が入った状態でACアダプターをコンセントに差し込まない(充電しない)。



必ず守る

海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100～240Vで使用する(無料修理は日本国内のみ)。
火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意


- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店などにご相談ください。

Memo


各部のなまえとはたらき

本体

●正面

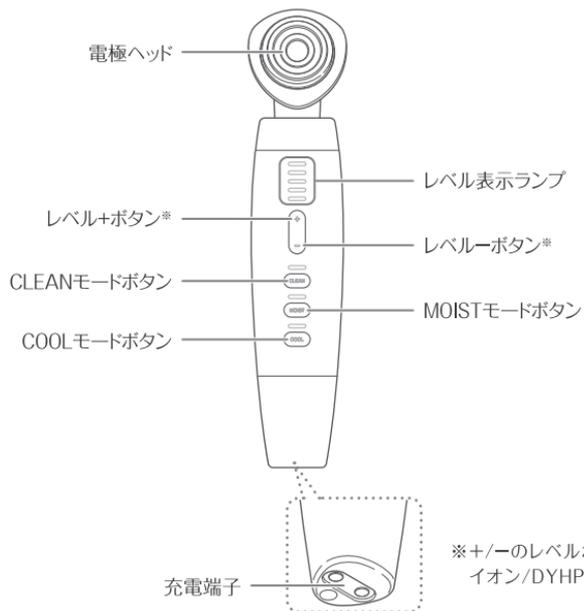

●側面

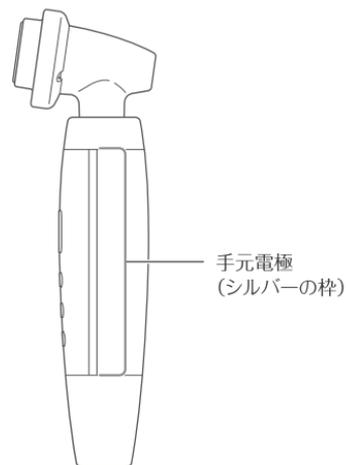


※+/-のレベルボタンではRF/EMS/
イオン/DYHPレベルが選択できます。

付属品

- 充電台



- コットンストッパー
(本体の電極ヘッドに取り付けて梱包)

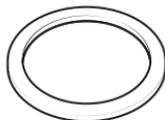

コットンを電極ヘッドに固定できます(P.20)。

- 充電用USBケーブル
(USB Type-C™)*

- ACアダプター

- 取扱説明書
(保証書付)

- ナリフトセラム100ml

※本製品専用です。付属しているもの以外は使用しないでください。


※本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

- RF(ラジオ波)・・・お肌を深部(角質層)まで温めることで、よりケアに適した状態にすることができます。
- イオンクレンジング・・・洗顔では落としきれない汚れを、イオンの力で吸着することができます。
- イオンモイスチャー・・・独自波形のイオン導入により化粧水をお肌(角質層まで)に浸透させることができます。
- DYHP・・・美容成分を角質層の深部まで届け、浸透させることができます。
- EMS・・・電気の力で筋肉を刺激することができます。
- フォト・・・お肌にLED光をあてることでケアします。
- 冷却・・・お肌を冷やすことで、お肌を引き締めることができます。

お使いになる前に

充電する

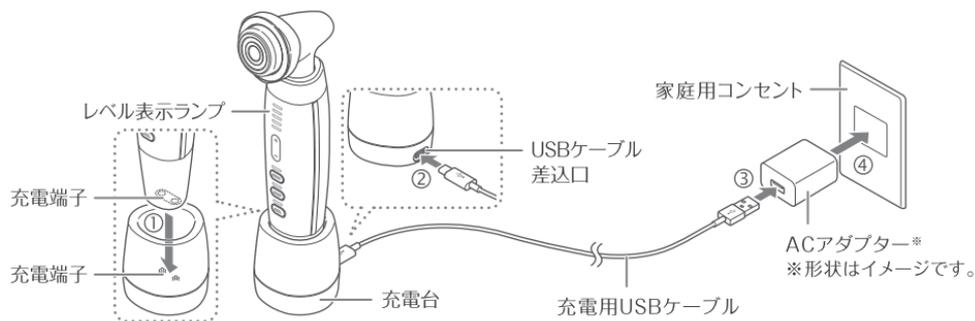

本製品を図のように充電用USBケーブルに接続された充電台に置くと、充電が始まります。


※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、本体と充電台の充電端子の向きがあっているか(充電台のUSBケーブル差込口が本体の背面にくるように)、充電用USBケーブルまたはACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

充電中	レベル表示ランプが順番に白色点滅。
充電完了時	レベル表示ランプが消灯。充電用USBケーブルを外してください。
充電時間	約3時間(室温約25℃) 電池残量や充電環境によって、充電時間は前後します。
動作時間	約40分 使用モード・使用レベル・使用環境によって、動作時間は変わります。

ご注意

- ・ACアダプターを使用する際は、タコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。
- ・充電台の中に水やゲルなどの液体が付着していない状態を確認してから、充電してください。充電台内に水やゲルなどの液体が付着していると、故障の原因となります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してから使用してください。
- ・ACアダプターおよび充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。
- ・浴室・洗面所など高温多湿な場所で充電しないでください。

モードについて

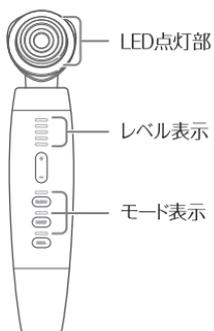モード	ボタン表示				
スタンバイ (各モード終了後、機能が停止している状態)			LED点灯部	レベル表示	モード表示
			<p>次におすすめのモード表示点滅(P.17参照)</p>		
CLEAN	  	特長	機能	動作時間	使用頻度(目安)
		洗顔では落としきれない汚れを吸着し、すっきり肌に整えます。	<ul style="list-style-type: none"> RF イオンクレンジング(+振動) LED (青) 	約3分 (1分30秒で「ピー」と、半顔使用目安のブザー音が鳴ります。)	週に2~3回
		LED点灯部	レベル表示	レベル	推奨化粧品
		LED(青)点灯	 1~5個点灯	RF + イオン : 5段階	コットン+ナノリフトセラム (またはコットン + お手持ちの化粧水*1)

モード	ボタン表示	特長	機能	動作時間	使用頻度(目安)
MOIST	 MOISTモード 表示点灯	お肌の角質層まで美容成分を浸透させ、みずみずしいお肌に導きます。	<ul style="list-style-type: none"> ・DYHP ・RF ・EMS (低周波~高周波) ・イオンモイスター(+振動) ・LED (赤) 	約6分 (3分で「ピー」と、半顔使用目安のブザー音が鳴ります。)	週に2~3回
		LED点灯部	レベル表示	レベル	推奨化粧品
		LED(赤)点灯	 1~5個点灯	RF + DYHP + イオン + EMS : 5段階	ナノリフトセラム
COOL	 COOLモード 表示点灯	冷却とLED (青)によりハリとキメの整ったお肌に導きます。	<ul style="list-style-type: none"> ・冷却 ・LED (青) 	約3分 (1分30秒で「ピー」と、半顔使用目安のブザー音が鳴ります。)	毎日でも可
		LED点灯部	レベル表示	レベル	推奨化粧品
		LED(青)点灯	なし	なし	そのままお肌にあててください。 (乳液などでお肌を保湿してから使用することで、より保湿効果を高めることもできます。)



※中央の電極ヘッドのみ冷却

タイマー機能

動作時間の半分が経過すると、ブザー音「ピー」でお知らせします。
各モードの動作時間は、P.15～16を参照してください。

スタンバイモード

モード終了時に「ピッピッピッ」とブザー音が鳴り、スタンバイモードになります。(機能が停止している状態です)。
各モードの動作時間は、P.15～16を参照してください。
もう一度モードボタンを短押しすると、選択したモードが開始します。
CLEANモード終了時は、MOIST、COOLモード表示が点滅し、MOISTモード終了時は、COOLモード表示が点滅します。

オートオフ機能

スタンバイ表示のまま約5分間操作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。
COOLモード終了後、自動で電源が切れます。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

- ⚠ 注意**
- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
 - 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
 - お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

完全に水分がなくなるまで、しっかり拭き取ってください。

2 お肌にお手持ちのゲル、化粧水、または水を塗り、MOISTモードのレベル1で約3分間使用する (P.19~23)

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。



使いかた

使用上のご注意


お使いになる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行なってください(P.18)。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
(COOLモード使用時以外)
- RF(ラジオ波)は使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。
- 目のまわりは使用しないでください(COOLモード使用時以外)。
※LEDの光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。
- LED光を直接のぞき込まないでください。
- 必ず手元電極に触れるように持ってください。
- 推奨環境温度15℃～30℃

コットンの付けかた

1

本体からコットンストッパーを外す

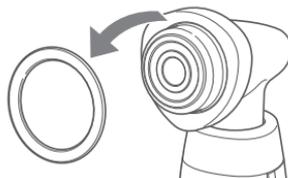

2

電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける

- ・コットンストッパーでコットンが止まりづらい場合は、大きめで、薄手のコットンを使用してください。厚手のコットンは止まりづらいため、半分に割いて使用してください。
- ・コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3

コットンにお手持ちの化粧水やゲルをつける

- ・電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

ご注意

- ・さらっとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。
おすすめ化粧品：ナノリフトセラム、とろみのある化粧水
- ・コットンが乾いてきたら化粧品をつぎ足してください。乾燥しているとコットンが外れやすくなる場合があります。
- ・化粧品の量が少なくムラがあるとコットンが熱くなる場合があります。

基本的な使いかた

1

メイクを落として洗顔する

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※COOLモードはメイクの上からでもご使用になれます。

2

お肌に化粧水やゲルを塗布する 必要な場合は、電極ヘッド部に コットンを付ける

コットンの付けかたは、P.20をご覧ください。

※使用する化粧品、コットンの有無によっては、非常に熱く感じる場合があります。熱いと感じる場合は、以下をお試しください。

- ・ヘッドを速く動かす
- ・コットンの使用をやめる
- ・使用する化粧品を変える


3

電源をオンにする

使用したいモードのモードボタン(CLEAN、MOIST、またはCOOLモードボタン)を長押しします。(約3秒以上)「ピピッ」と音が鳴り、モードボタンの上のLEDランプ(モード表示)が点灯します。

※途中で動作を終了したい場合は、いずれかのモードボタンを長押ししてください。

モードの途中でもご使用されたいモードボタンを押せばモードが切り替わります。

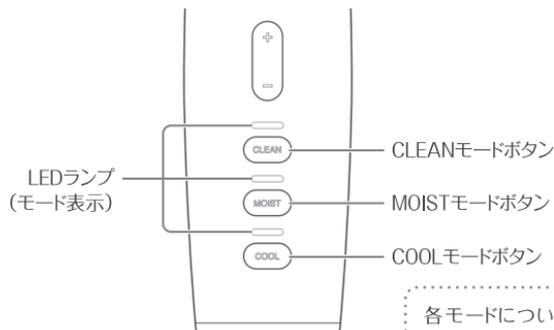


各モードについては、「モードについて」(P.15)をご覧ください。

4

(CLEAN・MOISTモードの場合のみ)

お好みのRF/DYHP/イオン/EMSレベル(強さ)を選ぶ

- ・レベル+ /-ボタンを押すたびに「ピッ」とブザー音が鳴りレベルが変わります。
- ・各レベルはレベル1～5まで調節できます。レベル5(最大)またはレベル1(最小)に達すると「ビピッ」とブザー音が鳴ります。
- ・CLEANモードは、RF/イオンレベルのみ調節できます。

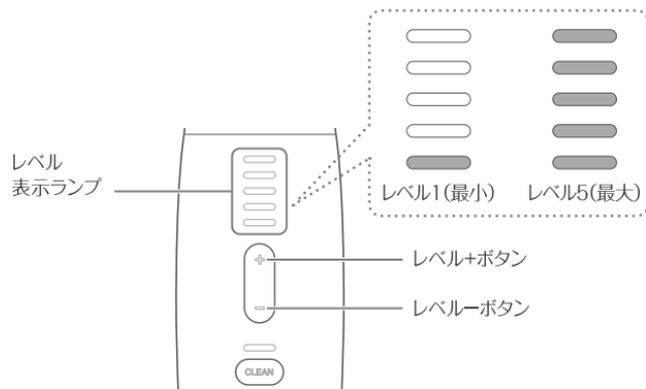

ご注意

- ・使い始めは必ずレベル1からご使用ください。
- ・無理のないレベルを選んでご使用ください。

5

本体側面の手元電極(シルバーの枠)に触れるように持つ

- ・手元電極に触れていないと、イオン機能が使用できません。

6

電極ヘッドをお肌にあてて動かす

- ・各モードが終了するとスタンバイ状態(COOLモード以外)になり、お好みのモードボタンを押すと次のモードがスタートします。
- ・途中で停止したい時は、いずれかのモードボタンを長押ししてください。

本体の動かしかたは、「お肌へのあてかた」
(P.24～26)をご参照ください。

ご注意

- ・使用中は必ず、電極ヘッドをお肌にしっかりあててください。

7

終わったら、お肌を整える

- ・ケアが終わったら、お肌についた化粧水・ゲルなどをなじませ、日頃お使いの基礎化粧品で仕上げをしてください。

ご注意

- ・使用後は毎回本体のお手入れをしてください(P.27)。

お肌へのあてかた


- ・本体を動かすスピードの目安:1秒間に約4cm
※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。
- ・動作時間の半分が経過すると「ピー」とブザー音でお知らせします。顔の反対側のケアにうつりましょう。

ご注意

- ・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください(COOLモード使用時以外)。一箇所にあて続けるとやけどや低温やけどの原因となります。
- ・まぶた、目のまわりには電極ヘッドをあてないでください。

CLEANモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。
まぶた、目のまわりはLEDの光をあててケアできます。

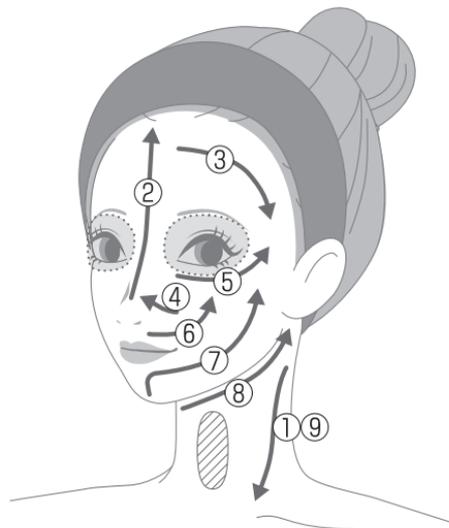

 使用できない部位

 LEDの光のみ使用可能な部位

目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

MOISTモード

半顔で約3分ケアをしてください(顔全体で合計約6分)。

●半顔(約3分)


導入波形が2分、筋トレ波形が約1分出力されます。それぞれ下図のように使用してください。

筋トレ波形は筋肉の体感を目安にあてかたを切り替えてください。

※LED光のみ目元にも使用可能です。目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。

導入波形 (2分)

①～⑨を4回以上繰り返してください。

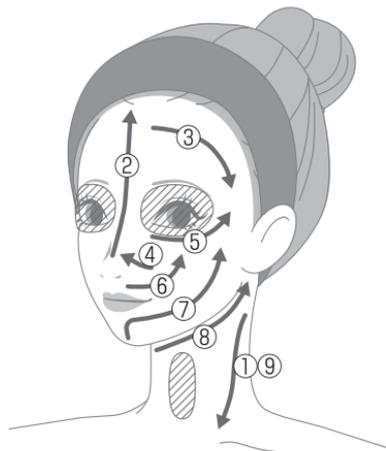

筋トレ波形 (1分)

(筋肉刺激を感じる時)

図の位置に15秒程度止めて使用してください。

使用できない部位



- ① こめかみ
- ② 鼻の横
- ③ 頬
- ④ 耳たぶの横

顔の反対側も
同様に行います。

COOLモード

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※目もとにもご使用いただけます。

※まぶたにあてる際は、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

警告

- お手入れするときは、充電していないこと、電源がオフになっていることを確認する。

1

本体・電極ヘッドの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いする。

2

全体を乾いた布で拭き、水分を拭き取ってから、保管する。

ご注意

- 本体や充電台を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 充電端子に水分が残らないようにしてください。
- 化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、壁面コンセントと本体や充電台からACアダプターと充電用USBケーブルを抜いてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.29)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.33)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ モードボタン(CLEAN、MOIST、またはCOOLモードボタン)を約3秒以上長押ししてください(P.21)。
	→ 電池残量が不足しています(レベル表示ランプの最上部が3回点滅後、電源がオフになります)。充電してください(P.13)。
	→ COOLモード使用後に本体が熱くなりすぎると安全機能により電源が入らなくなる場合があります(レベル表示ランプの最下部が3回点滅後、電源がオフになります)。30分以上本体を休ませてください。
充電できない	→ ACアダプターや充電用USBケーブルを正しく接続してください(P.13)。
	→ 本体と充電台の充電端子の向きが合っていません。向きを確認してください(P.13)。
	→ 本体が充電台に正しく設置されていません。正しく設置してください(P.13)。
本体が熱い	→ 連続して使用しています。電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください。
レベル(強さ)が変わらない	→ レベルが変わるのはCLEANモードのRF/イオンと、MOISTモードのRF/DYHP/イオン/EMSです。
COOLモードで冷えない	→ COOLモードを連続使用しています。電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
	→ 推奨環境温度以外で使用しています。15℃～30℃の環境で使用してください。
COOLモード時に、 外側の電極ヘッドが冷えない	→ 冷えるのは内側の電極ヘッドです。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
EMSが強い(ピリピリする・痛い)	→ レベラーボタンでEMSのレベルを下げてください。
	→ 電極ヘッド全体がお肌にあっていません。鏡で確認しながら、電極ヘッド全体をお肌にあててください。
	→ 使用する部位を調整してください。
EMSが弱い(感じない)	→ レベラーボタンでEMSのレベルを上げてください。
	→ お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください。 → 筋肉に沿ってあてていません。電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.25)。
熱い(COOLモード使用時以外)	→ 電極ヘッドを動かさずに使用しています。COOLモード使用時以外は必ず動かしながら使用してください。
	→ レベラーボタンでRFのレベルを下げてください。
	→ 動かすスピードが遅い可能性があります。少し速く動かしてください。
	→ 使用する化粧品、コットンの有無によっては、非常に熱く感じる場合があります。 熱いと感じる場合は、以下をお試しください。 ・ヘッドを速く動かす ・コットンの使用をやめる(MOISTモード) ・使用する化粧品を変える
熱さを感じない	→ スタンバイ状態/オートオフになっています(P.17)。各モードボタンを押して、モードをスタートさせてください(P.21)。
	→ お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください。
	→ レベラーボタンでRFのレベルを上げてください。 → 動かすスピードが速すぎると、お肌が温まらない可能性があります。少し遅く動かしてください。 また、動かすスピードが遅すぎると安全機能が働き、温感が制御されます。少し早く動かしてください。

よくあるご質問

- Q 使用頻度、使用時間の目安は？
- A 使用頻度の目安：CLEAN、MOISTの場合は週に2～3回。COOLは毎日でも使用可能。
使用時間の目安：CLEANモード(3分) MOISTモード(6分) COOLモード(3分)
1日2回以上、同じモードのご使用はお控えください。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
- Q 化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか？
- A 本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水でぬれるくらい使用してください。
ゲルはパール粒2つ分程度を使用してください。化粧水やゲルが少ないと感じたら、付け足すことをおすすめします。
- Q CLEAN・MOISTモード使用時にRFの温まりを感じないのですが
- A 電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。また化粧水や、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルをつけ足してください。
- Q コットンに汚れが付かないのですが
- A 目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。
- Q RFで電極ヘッドが温まらないのですが
- A RFは電極ヘッドを温めるのではなく、電気のお力でお肌を温めるものです。
- Q 振動をオフにすることはできますか？
- A 振動をオフにすることはできません。
-

製品仕様

電 源	DC5V 1.0A
消 費 電 力	約 4.5 W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※電池残量や充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約40分(満充電の状態から) ※使用モード・使用レベル・使用環境によって、動作時間は変わります。
外 形 寸 法	本体(コットンストッパー付):約W45×D66×H211(mm) 充電台:約W55×D54×H56(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約 230 g
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 電極ヘッド:ポリカーボネート樹脂/ステンレス 手元電極:ABS樹脂(クロムメッキ)
製 造 国	日本
付 属 品	充電台 1個 充電用USBケーブル(USB Type-C™) 1本 ACアダプター 1個 コットンストッパー 1個(本体の電極ヘッドに取り付けて梱包) ナノリフトセラム100ml 1個 取扱説明書(保証書付)
推 奨 環 境	15℃~30℃

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



日本国内からのお問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

携帯電話・PHS

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)  **0120-776-282** (通話料無料)  **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。

日本国外からのお問合せ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 当社は製品の機能を維持するための部品(補修用性能部品)を、製造終了後3年保有しています。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.33)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	PSM-120
形名	ルミナスリフト for Salon		
理保証	対象部分	期 間	
	本 体 の み	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">見本</div> <p>ご購入日の領引明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		

販売店様へのご願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- ・補修用性能部品の保有期間
当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。
※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
- ・個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。
- ・利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。


www.ya-man.com/biz/professional/