

保管用 保証書付



## 取扱説明書

家庭用美容器

ヒートソニックピーリング for Salon

PSM-160

### はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 使いかたの流れ

1

電源をオンにする

電源／モードボタンを  
長押し（約3秒）してください。

PEELING      MOIST      BODY  
C                C               C



2

モードを選ぶ

電源／モードボタンを  
押してください。

PEELING      MOIST      BODY  
C                C               C



3

レベルを選ぶ

レベルボタンを  
押してください。

PEELING      MOIST      BODY  
C                C               C



4

お肌にあてる

お肌を濡らした状態で  
ご使用ください。

# もくじ

安全上のご注意	p 3	お知らせ	p 27
各部のなまえ	p 10	アフターサービス	p 31
お使いになる前に	p 12	● 製品仕様	p 32
使いかた	p 18	● 保証について	p 33
使い終わったら	p 24	保証書	p 35

## ■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### 注意区分について



**危険**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
危険が切迫して生じることが想定される内容です。



**警告**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
可能性が想定される内容です。



**注意**  
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損  
害<sup>\*</sup>の発生が想定される内容です。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

### 図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

## ⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器・人工心肺など生命維持用医用電気機器

・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

## ⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人・自分で意思表示できない人・温度や刺激の感覚が自覚できない人

・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人

・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人・糖尿病などの高度な末梢循環機能障害による知覚障害のある人

・神経障害のある人・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の

・アレルギー体质、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合・口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた(眼窩)・のど

・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折した部位・美容医療施術後に出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位



禁 止

## ⚠ 警告 (電源について)

- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電のおそれがあります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、プラグを抜く。

充電が終わったときは AC アダプターをコンセントから抜いてください。



プラグを  
抜く

- 通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。



禁 止

- 電源コードが破損したら使用しない。

分解・改造をせず、修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁 止

- 専用の充電用USBケーブル以外は使用しない。

感電、ショート、発火の原因となります。



禁 止

- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ  
コードプラグ  
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線  
禁止

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。  
故障・けがの原因となります。



- 充電用USBケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。  
収納時にはコードのねじれを直してください。



- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 使用前にアタッチメントの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。



禁 止

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。本体・充電台・充電用USBケーブルは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の  
制限

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような場所で機器の使用・保管・充電をしない。

- ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
  - ・ほこりの多い場所
  - ・直射日光の当たる場所や屋外
  - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
  - ・強い電波や磁気の発生する場所
  - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
  - ・油煙、湯気の当たる場所
  - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
  - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁 止

- オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。



禁 止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 顔に使用するときはダブルピーリングモード・モイストリフトモードにして使用する。  
肌トラブルの原因となります。



- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



- シャワーや蛇口から出る強い水圧を当てたり、水中に沈めたりしない。

本体は防滴仕様です（IPX5）。シャワーや水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していませんので、故意に水をかけないでください。故障の原因となります。



- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。  
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。



- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。

他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。



- 車両運転中に使用しない。

事故やけがの原因となります。



## ⚠ 警告 (海外でのご使用について)

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する。

火災・感電・事故の原因となります。

※無料修理保証は国内でのご使用に限り  
ります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意


- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。

必ずご確認のうえご使用ください。

- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

## ■ 各部のなまえ

### | 本体

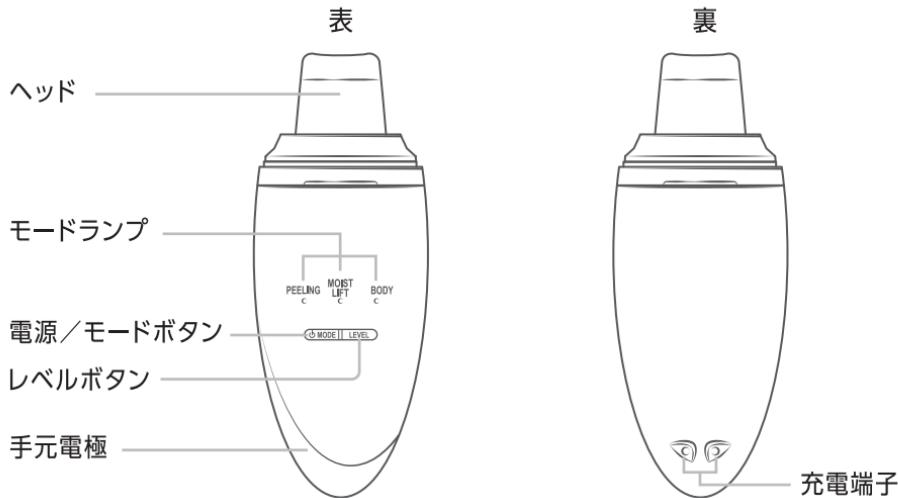


※イラストはワイドヘッド装着時です


## 付属品



ワイドヘッド\*

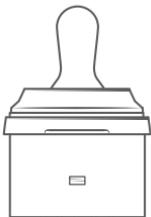

スプーンヘッド

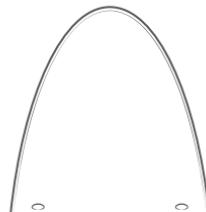

ワイドヘッド/スプーンヘッド  
共通キャップ・・・1個

取扱説明書(保証書付)

※本体に取り付いています。



※本製品専用です。付属しているもの  
以外は使用しないでください。


充電台(USBケーブル付き)

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。


## ■ 使いになる前に

### 充電する

家庭用コンセントを使用する

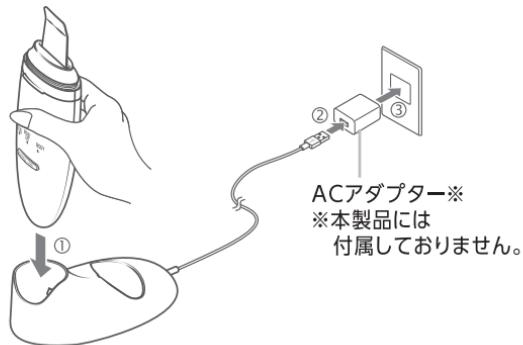

パソコンを使用する

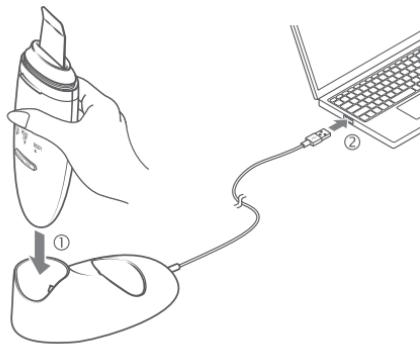

- 充電台の充電端子に触れるように置いてください。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。

初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。

その場合は、再度充電してからご使用ください。

充電中	モードランプが順に点灯
充電完了時	モードランプが全て点灯
充電不足	電源をオンにした時にすべてのランプが点滅 充電してください。
充電時間	約1.5-2.5時間 (室温28°C) 電池残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって充電時間は前後します。
動作時間	約30分 電池残量や充電環境によって動作は前後します。

## 注意

- 充電台は防水仕様ではありません。充電端子に水滴などがついている場合は、しっかり拭き取ってください。水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。

## はたらき

### オートオフ機能

各モード動作開始から約5分が経過すると自動で電源がオフになります。  
(モードを切り替えるとリセットされますが、同じモードでレベルを変更してもリセットされません。)

### 防水機能

本製品はIPX5 (JIS防水保護級) の防水仕様です。  
※完全防水仕様ではありません。水中に沈めたり、流水を3分以上あて続けないでください。

## 使用部位について

本製品には2種類のヘッドが付属しています。ヘッドにより使用部位を調整してください。  
ワイドヘッド：顔・ひじ・ひざ・かかと      スプーンヘッド：顔（小鼻・眉間・あごまわりにおすすめ）

## モードの切替

モードは3種類あり、電源がオンの状態で電源／モードボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。

途中で電源をオフにしたい場合は電源／モードボタンを長押し（約3秒）してください。

ヘッドが異なる場合、モードは切り替わりません。

- ダブルピーリングモード（超音波+イオンクレンジング+ヒーター<sup>※</sup>）  
ワイドヘッド・スプーンヘッドどちらも使用可能です。

※ワイドヘッドのみヒーター機能付きです。スプーンヘッド使用の場合はヒーター機能がありません。

- モイストリフトモード（超音波+イオンモイスチャー+ヒーター）  
ワイドヘッドをご使用ください。
- ボディモード（超音波+ヒーター）  
ワイドヘッドをご使用ください。

## レベルの調整

レベルはLOW、HIGHの2段階あります。

レベルボタンを押すたびレベルが切り替わります。

使いはじめは必ずLOWから使用してください。


※レベルを高くすると超音波が強くなります。

※各モードのイオンはレベル調整できません。

※ヒーターの温度調整はできません。

## モードランプ

LOW :点滅 HIGH :点灯

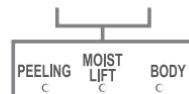

## お肌へのプレテスト

製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

### 1 お肌を清潔な状態にする。

腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。

### 2 腕の内側に水または化粧水を塗り、ダブルピーリングモードで約1分間動かしながら使用する。

- レベルはLOWでおこなってください。
- プレテストをした部分はこすらないでください。
- ワイドヘッドを使用してください。

### 3 24時間以内にお肌に異常（赤みやほてり等）がないことを確認してから使用する。


#### 注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

## ヘッドの脱着方法

使用部位に合わせてワイドヘッドまたはスプーンヘッドのいずれかを取り付けてから使用してください。

使用部位についてはP.18～P.23を参考にしてください。

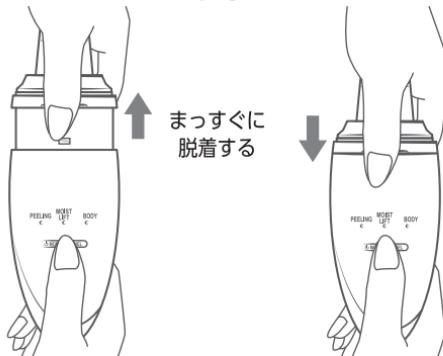

- 本体とヘッドの水分をよく拭き取ってから脱着する。
- 本体とヘッドの向きを合わせて、奥までまっすぐ差し込む。

取付部同士の向きが合わないと差し込むことが出来ません。  
差し込む向きを確認してから取り付けてください。

### 注意

- 取り外す際は、ヘッドをつかみ、まっすぐに引き抜く。  
ヘッドが緩むと、途中で電源が切れる場合があります。  
斜め方向に引き抜こうとすると、取付部が変形・破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ヘッドや接続部に傷や汚れなどの異常がないことを確認する。  
肌トラブル・故障の原因となります。

## ■ 使いかた

### | 使用の目安

使用は週に1~2回程度。

1回、1部位1モード5分（モイストリフトモードは10分）以内を目安にご使用ください。

※あくまでも目安です。お肌の状態を見ながらご使用ください。過度な使用はお肌を傷める原因となります。

※オートオフ機能により各モード動作開始から約5分が経過すると自動で電源がオフになります。続けて使用したい場合は、電源を再度オンにしてください。

### | 準備

#### 1 お肌を清潔な状態にする。

- ・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
- ・顔に使用するときは必ずメイクを落としてからご使用ください。

#### 2 お肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認する。

- ・お肌に異常がある部分には使用しないでください。
- ・眼球のまわりやまぶたには使用しないでください。
- ・使用中にお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

#### 3 ヘッドを選んで本体に取り付ける。

## | 各種モードの使いかた

### ●全モード共通

**1 霧吹き等でお肌にしっかりと水や化粧水を付ける。**

※モイストリフトモードの際は化粧水を付けてください。

**2 電源／モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。**

モイストモードはもう一度短押し、ボディモードは二度短押ししてください。

**3 お好みのレベルを選ぶ。**

**4 ケアする。**

- 
- ヘッドとお肌の間には、常に水や化粧水があるように、途中で補充する。

乾いたお肌に使用すると、お肌を傷める原因となります。

- ヘッドは1箇所に止めず、常に移動させながらケアする。

止めたままお手入れすると、お肌を傷める原因となります。

- 化粧水（使用に適さないものを除く）、水以外使用しない。

肌トラブル、故障の原因となります。

〈使用に適さない化粧品〉・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水・洗顔料

## 注意

## 使用時のポイントとお肌へのあてかた

- 霧吹きなどで、しっかりと水や化粧水を付けた状態でお肌に優しくあててお肌をなぞる様にゆっくりと使用していただくと効果的です。お肌に水がなくなった場合は再度、お肌に水を付けてください。
- 温かい蒸しタオルでお肌を温めた後や、入浴後にお肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。  
※ボディモードは顔に使用しないでください。  
※スプーンヘッド取り付け時はモイストリフト/ボディモードは使用できません。

## 注意

- 水の中に落とさない。
- 水の中につけない。
- 手に水や化粧水が付いたまま使用しない。  
故障や事故、ケガの原因となります。

## ●ダブルピーリングモード

お肌に本体をやさしくあてて、ゆっくりと矢印の方向に動かす。


- 使用後は化粧水や美容液などでお肌を整えてください。

※本製品は1箇所に止めず、常に移動させながら使用してください。


### スプーンヘッドのあてかた

※ワイドヘッドのみヒーター機能付きです。スプーンヘッド使用の場合はヒーター機能がありません。

- ・くるくる動かす場合

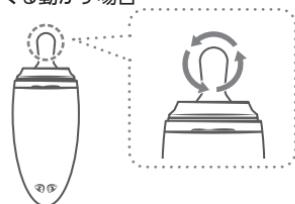

- ・前後に動かす場合

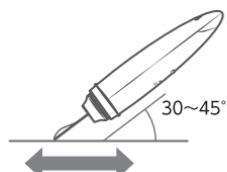

おすすめ使用箇所  
小鼻、眉間、あご周り



点線部が全てお肌に密着するようにあて、くるくる動かします。

### ワイドヘッドのあてかた



### 使用禁止部位



顔の中心に向かって毛穴に  
逆らうように動かしてください。



下から上方向に  
まんべんなく動かしてください。

## ●モイストリフトモード（ワイドヘッドのみ）


図のように約20～30度程の角度でお肌に本体をやさしくあてて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※ヘッドの表と裏に注意してお肌にあててください。


※本製品は1箇所に止めず、常に移動させながらお手入れしてください。

※スプーンヘッド取り付け時は、モイストリフトモードの使用はできません。

あてかた

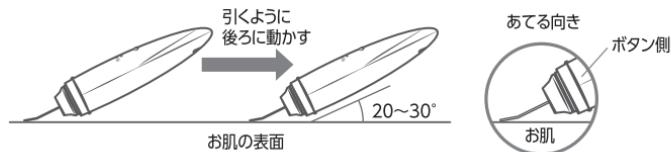

フェイスラインにそって下から上方向に動かしてください。

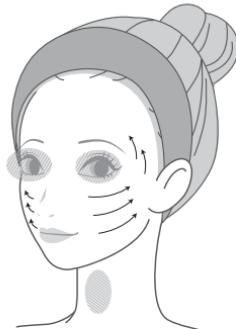

## ●ボディモード（ワイドヘッドのみ）

図のように約30～45度程の角度でお肌に本体をやさしくあてて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。


- 使用後は化粧水や美容液などでお肌を整えてください。

※ヘッドの表と裏に注意してお肌にあててください。


※本製品は1箇所に止めず、常に移動させながらお手入れしてください。

※スプーンヘッド取り付け時は、ボディモードの使用はできません。

### あてかた

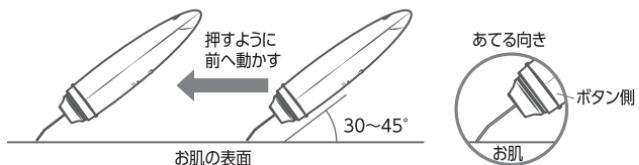


### ●ひじ

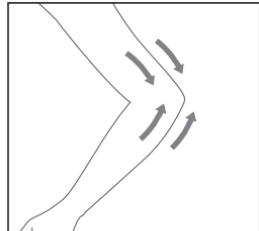


ヒザを軽く曲げ外から内方向にまんべんなく動かしてください。

### ●ひざ

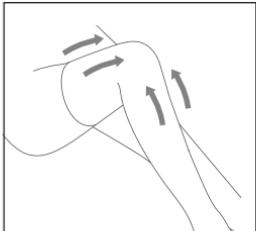

ヒザを軽く曲げ外から内方向にまんべんなく動かしてください。

### ●かかと

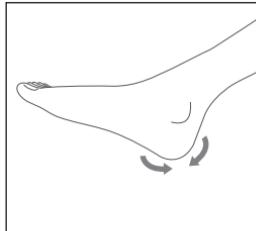

外から内方向にまんべんなく動かしてください。

## ■ 使い終わったら

### | お手入れのしかた



使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

**1** 電源がオフになっていることを確認する。

**2** 本体からヘッドを取り外す。

- ヘッドの取り外しかたについては、「ヘッドの脱着方法」(P.17) を参照してください。


**3** ヘッドの汚れを流水で流す

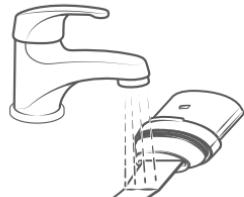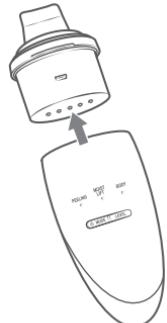

### 注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火の原因となります。

- 4 タオルなどの乾いた布や綿棒で、本体表面やヘッドと本体接続端子部分の汚れ・水分を拭きとる。

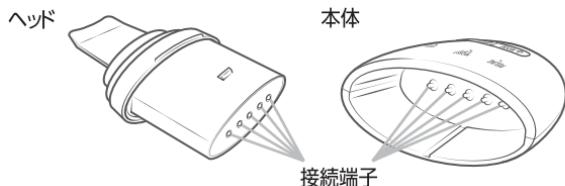

- 5 風通しの良い場所で乾燥させる。

## 注意

- アルコール・シンナー・ベンジン・ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。
- 本体・ヘッドは決して水の中につけないでください。故障の原因となります。
- 使用後は必ず水分を拭き取る。また浴室など高温多湿な場所に放置しない。  
本体が濡れたまま放置すると充電端子が腐食する原因となります。



## 保管のしかた

- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてヘッドにキャップを取り付けてから保管してください。
- ・本体やヘッドに付着した水はしっかり拭きとってから保管してください。
- ・使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプター（市販品）をコンセントから抜いて保管してください。
- ・火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- ・長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」（P.27～28）を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、販売店、または購入明細をご用意のうえヤマソコールセンター（P.31）までご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

## ■ お知らせ

### 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源／モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください</li><li>●ヘッドと本体それぞれの接続部に汚れや水がたまっています。タオルや布、綿棒等で汚れや水を取り除いてください (P.24)</li><li>●充電してください (P.12)</li></ul>
充電しても 数分しか使えない	<ul style="list-style-type: none"><li>●充電してください (P.12)</li><li>●ヘッドと本体それぞれの接続部に汚れや水がたまっています。タオルや布、綿棒等で汚れや水を取り除いてください (P.24)</li><li>●電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター (P.31) にご連絡ください</li></ul>
充電が開始されない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ACアダプター（市販品）や充電台ケーブルを正しく接続してください (P.12)</li><li>●本体が充電台にしっかりセットされていません。本体を正しく充電台に差し込んでください (P.12)</li></ul>

## こんな症状

## 考えられる原因と対処法

超音波が痛い	●ヘッドが局所的にお肌に触れています。正しくあててください。(P.21~P.23)
	●レベルボタンでレベルを下げてください
	●強くこすりつけています。軽くすべらせてください
超音波が弱い	●ヘッドが正しくお肌に触れていません。正しくあててください。(P.21~P.23)
	●ヘッドが正しく取り付けられていません。ヘッドをしっかり奥まで取り付けてください (P.17)
ヘッドが熱い	●1箇所に止めず、常に移動させながらお手入れしてください。
	●強くこすりつけています。軽くすべらせてください。
電源が切れる	●オートオフ機能（約5分）がはたらきました。故障ではありません。連続して使用する際は、再度電源をオンにしてください (P.14)
	●ヘッドが正しく取り付けられていません。ヘッドをしっかり奥まで取り付けてください (P.17)
	●ヘッドと本体それぞれの接続部に汚れがたまっています。タオルや布、綿棒等で汚れや水を取り除いてください (P.24)
全てのランプが点滅する	●充電不足です。充電してください (P.12)

## | よくあるご質問

Q ピーリングする箇所を水で濡らす理由は？

A 超音波をまんべんなくお肌へ伝える為です。乾いたお肌には絶対に使わないでください。

Q 使用時間、使用頻度の目安はありますか？

A ● 使用は週に1～2回程度。  
1回1部位1モード5分（モイストリフトモードは10分）以内を目安にご使用ください。  
※あくまで目安となります。ご自分のお肌の様子を見ながらご使用ください。  
※オートオフ機能により各モード動作開始から約5分が経過すると自動で電源がオフになります。続けて使用したい場合は、電源を再度オンにしてください。  
● お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。

Q お肌が赤くなるのですが

A ヘッドを強くこすると、お肌を傷める原因となります。ヘッドはお肌の上を軽くすべらせるように動かしてください。また、ヘッドとお肌との間には、常に水や化粧水があるように補充しながらご使用ください。

Q 本体を移動しにくいのですが？

A お肌の表面が乾いた状態では、ヘッドを滑らかに移動できない場合があります。上手にお手入れをするために、お肌に水や化粧水を塗ってからご使用ください。

**Q** 浴室で使用できますか？

**A** 本体は浴室でご使用いただけますが、強い水流を長時間かけ続けたり、水の中に浸けることはできませんので、ご注意ください。

**Q** 肌にピリピリ感を感じることはありますか？

**A** 個人差により微弱電流による刺激を感じることがあります。お肌に違和感を感じる場合は使用を中止して専門医にご相談ください。また、ヘッドが正しくお肌に触れていないと超音波によりピリピリ感を感じる場合があります。

**Q** 化粧の上から使用できますか？

**A** 本製品はメイク落としではございませんので、メイクを落としてからご使用ください。

**Q** 使用する際は水しか使えませんか？

**A** 化粧水をご使用いただけますが、スクラブなどの刺激の強いものは使用しないでください。

ただし、以下の化粧品は、お肌のトラブルや本製品が故障する原因となりますので、使用しないでください。

〈使用に適さない化粧品〉

- ・ オイル ・ スクラブ系 ・ 洗顔料
  - ・ 刺激の強い化粧水
- 等

**Q** 霧化しない  
水しぶきが全然出ない

**A** ヘッドが奥まで取り付けられているか、確認してください。ヘッドを一度外し、差し込み直してください。

水の量や角度、化粧水によっては、水しぶきが出にくい場合があります。プレート部分が汚れている場合（特に油分で）は水しぶきが出にくくなります。プレートの汚れをよく拭きとってください。

水の量や角度、化粧水によっては、水しぶきが出にくい場合があります。

## ■ アフターサービス

### | 充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。



Li-Ion

### | 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

### | お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

#### ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日・お買い上げ店舗が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。

## ■ 製品仕様

定 格 入 力	DC5.0V 0.5A(充電台)
定 格 出 力	DC5.0V 0.5A(充電台)
消 費 電 力	約1.5W (充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約1.5-2.5時間 ※使用環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約30分 (満充電の状態から、室温28°C) 電池残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって充電時間は前後します。
外 形 尺 法	約W55×D26×H141 (mm) (ワイドヘッド装着時)
製 品 質 量	本体:約57g ワイドヘッド:約36g スプーンヘッド:約34g
材 質	本体:ABS樹脂 ワイドヘッド/スプーンヘッド:ABS樹脂、ステンレス ワイドヘッド/スプーンヘッド共通キャップ:PC樹脂
製 造 国	中国
付 属 品	ワイドヘッド ※本体に取り付いています ..... 1個 スプーンヘッド ..... 1個 ワイドヘッド/スプーンヘッド共通キャップ ..... 1個 充電台(USBケーブル付き) ..... 1個 取扱説明書(保証書付)

## 保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.31）にご相談ください。

### 無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
  - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
    - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
    - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
    - 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。  
(ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。  
(ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ト) 車輪・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。  
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。  
(リ) 保証書のご提示がない場合。  
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。



No.

## 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	PSM-160
形名	ヒートソニックピーリング for Salon		
無料修理保証	対象部分		期間
	本体のみ		お買い上げ日から 1年間
店名・住所・電話  ※販売者名	<p>見 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p>本</p>		

\* 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

\* ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ  
(<http://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだりお買い上げ日・お買い上げ店舗がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)


[www.ya-man.com/biz/professional/](http://www.ya-man.com/biz/professional/)