

No. _____

保証書

持込修理

品名	サロン専売家庭用美容器	型番	PSM-20
形名	フォトプラス プレステージ for Salon		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	お買い上げ日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		
	見本 ご購入時の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡ください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるシール・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
(ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
(ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
(ト) 車輻・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
(リ) 保証書のご提示がない場合。
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。
- 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282(通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637(通話料有料)



www.ya-man.com

保管用
保証書付


取扱説明書

サロン専売家庭用美容器

フォトプラス プレステージ for Salon

RF RF Beauté

PSM-20

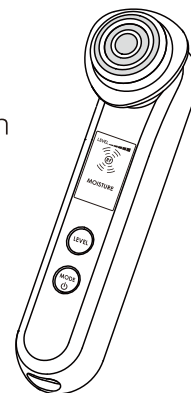

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
特長	7
各部のなまえ	7
ご使用の前に	8
使いかた	13
使い終わったら	17
こんなときには	18
アフターサービス	21
●製品仕様	22
●保証について	22
保証書	23

このたびは、ヤーマンプロフェッショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。



禁止

医用電子機器の誤動作を招く原因となります。

- ◆医用電子機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器

警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患
- ・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患
- ・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質
- ・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
- ・敏感肌または肌の弱い人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
- ・妊娠中、生理中、授乳中・眠気をさそう薬を服用中の人
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人・歯の治療中の人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など
- ・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・にきび
- ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・カユミやほてりのある部位
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼珠
- ・まぶた、目のまわり(MOISTURE, RF LED, COOLモード使用時以外)

※LEDの光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

LED光は直接のぞき込まないでください。

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

COOLモード使用時以外は同じ箇所にあって続けられない。必ず肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体が当たらない部分に使用しない。
やけど・低温やけどの原因となります。



禁止

火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂の原因となります。



使用者の制限

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。
事故やケガをする原因となります。



用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガをしたり、本機が故障する原因となります。

警告



禁止

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・ケガの原因となります。



タコ足配線
禁止

本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。
またACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



使用者の
制限

自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。
事故やケガをする原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因となります。



必ず守る

アダプタープラグやプラグ差し込み口に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。



無理な扱い
禁止

ACアダプターを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、ACアダプターが破損し、火災・感電の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



水かけ
禁止

浴室内、水場ではACアダプターを使用しない。本体やACアダプターを水につけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



必ず守る

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

警告



必ず守る

交流100～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。
※ 海外からの修理保証への依頼は日本国内で配送、受取可能な連絡先、住所が必要となります。



ACアダプター
を抜く

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



プラグ
を抜く

本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。
また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。
また、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがあるなど、異常状態のまま使用しないでください。

注意



禁止

使用禁止部位(P.2)には使用しない。

歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、イオン・EMS・ハイパーパルスの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。イオン・EMS・ハイパーパルスのレベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。



禁止

以下の項目は行わない。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。
・ 肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
・ 落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
・ 業務用等、過剰な連続使用をしない。

⚠ 注意



禁止

本体をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



禁止

電極ヘッドを金属にあてない。
故障・ケガの原因となります。



禁止

LEDの光を直接のぞき込まない。

LED光で目のまわり、まぶたへのトリートメントをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。

目や肌を傷める原因となります。



禁止

COOLモードを連続して使用しない。

連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。
再度使用する時は30分以上間を空けてから使用してください。



必ず守る

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・ 同じ箇所にあて続けない。
- ・ 肌の状態にあわせて使用する。
- ・ 日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
- ・ 使用後は必ず電源を切る。



必ず守る

使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

使用中、使用後に肌の異常がみられるときは使用を中止し、医師にご相談ください。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故やケガをする原因となります。

海外でのご使用について



警告



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

火災・感電・故障の原因となります。

※海外からの修理保証への依頼には日本国内で配送、受取が可能な連絡先、住所が必要になります。



発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

特長


本製品は、RF深層温熱(以下RF)でお肌を温めながら、イオンクレンジング、イオンモイスチャー、EMS、フォト、冷却でトリートメントを行うフェイス用美容器です。
ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各モードを組み合わせ、トリートメントを行うことができます。

- RF…お肌を深部*まで温めることで、よりトリートメントに適した状態にすることができます。
一般的なヒーターと違い、すぐに温まることが特長です。
- イオンクレンジング…洗顔では落としきれない汚れを、イオンの力で吸着することができます。
- 浸透ケア…独自波形のイオン導入により化粧水をお肌に浸透*させることができます。
- EMS…電気の力で筋肉を刺激することができます。
- フォト…お肌にLED光をあてることでトリートメントします。
- 冷却…お肌を冷やすことで、お肌を引き締めることができます。
- ハイパーパルス…独自波形の電気パルスで、化粧品の浸透をサポートします。
- 防滴仕様…生活防水に対応しており、浴室など水周りでの使用が可能です。
ただし、シャワーなどのやさしい流水に対しての防滴仕様であり、水道の蛇口から出る強い水圧や水中には対応していません。
使用時は十分にお気をつけください。

※角質層まで

※本体の防水性能は、JIS保護等級IPX4の性能を有しています。
※ACアダプターは防水仕様ではありません。
※浴室ではACアダプターを差した状態で使用しないでください。


各部のなまえ

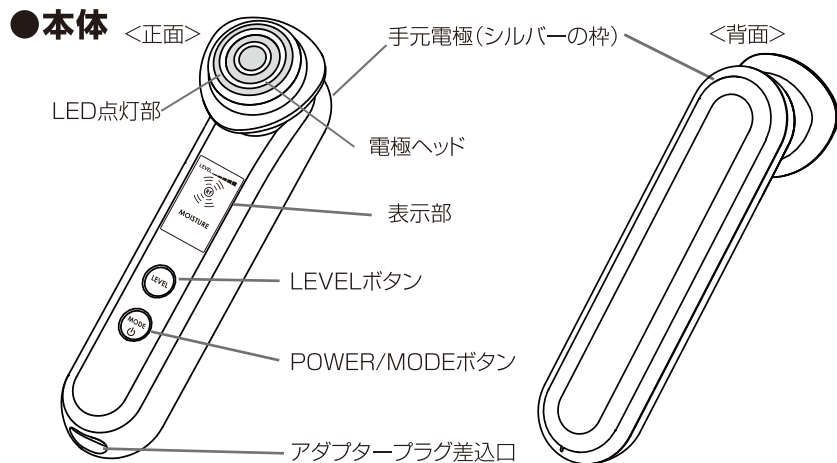


【付属品】

●コットンストッパー (シルバーリング)

※ご購入時は本体の電極ヘッドに付いています。
※コットンを電極ヘッドに固定できます。

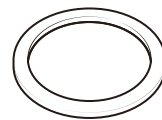

●ACアダプター

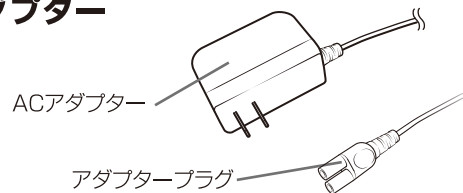


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用前に

表示部の見かた

●表示部・ボタン

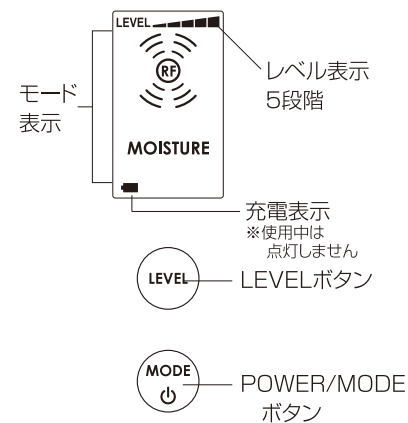

- ・POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにします。
(自動的にCLEANモードがスタートします。)
- ・各モード動作時にPOWER/MODEボタンを押すとモードが切り替わります。
- ・CLEAN・MOISTURE・EMS UPモードではレベルを選択することができます。
レベルは5段階あり、LEVELボタンで選択することができます。
※RF、LED、COOLのレベルは選択できません。
- ・POWER/MODEボタンを約3秒長押しすると電源オフになります。

●モード表示

POWER/MODEボタンを押すと、CLEAN→MOISTURE→EMS UP→RF LED→COOL→CLEAN(繰り返し)・・・の順にモードが切り替わります。

モード	CLEAN	MOISTURE	EMS UP	RF LED	COOL
機能	RF/ イオンクレンジング	RF/LED (赤・黄) イオンモイスタチャー/ ハイパーパルス/EMS	EMS	RF / LED (赤)	冷却/ LED (青)
モード表示	LEVEL   CLEAN	LEVEL   MOISTURE	LEVEL   EMS UP	 RF LED	 COOL

※CLEAN・MOISTUREモードのトリートメント時にモード表示のⓇFは表示・非表示を繰り返します。「ピッ」という音がするとRFが動作します(モード表示のⓇFが表示)。「ピピッ」という音がするとイオンまたはEMSが動作します(モード表示のⓇFは非表示)。


●レベル表示

CLEANを選択してからLEVELボタンを押すとイオンのレベルを選択できます。
MOISTUREを選択してからLEVELボタンを押すとイオン+ハイパーパルスのレベルを選択できます。
EMS UPを選択してからLEVELボタンを押すとEMSのレベルを選択できます。
レベルは5段階あり、心地よいと感じるレベルを選んでください。
LEVELボタンを押すたびにレベル1→レベル2→レベル3→レベル4→レベル5→レベル1(繰り返し)・・・の順にレベルが切り替わります。
※RF、LED、COOLのレベルは選択できません。

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5
				

●充電表示

充電中は充電表示が点滅します。
充電が完了すると充電表示が点灯します。
※使用中は点灯しません

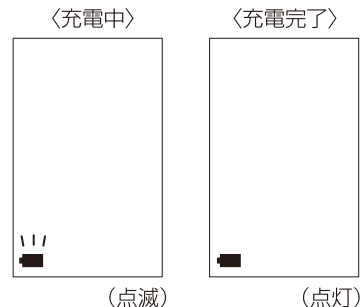

●スタンバイ表示・オートオフ(自動電源オフ)

CLEAN・MOISTURE・EMS UP・RF LEDモードが終了すると(各モード約3分)次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態*となります(動いていない状態です)。
※POWER/MODEボタンを押すと、点滅表示しているモードがスタートします。
※約2分間操作をしないと「ピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。

COOLモードの終了時のみ、スタンバイにはならず自動で電源が切れます(オートオフ)。
(「ピッ」と音がなり、電源が切れます)。

肌へのプレテスト

※製品や使用する化粧品を初めてご使用になる際は必ず相性をプレテストしましょう。

- 1 肌を清潔な状態にします。
・腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。
- 2 腕の内側に化粧品(ジェル・化粧水)または水を塗り、MOISTUREモードで約3分間製品を使用します。
・プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常を感じた場合は使用しないでください。

充電のしかた

本製品は充電式で、コードレスでの使用またはACアダプターを接続しての使用ができます。コードレスで使用する場合は、必ず充電してから使用してください。

- ・使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合は)必ず充電し、充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約30分

※充電環境 室温約25℃において。
 ※満充電直後からの動作時間です。
 ※動作時間は使用モード・使用レベル・使用環境によって変わります。
 ※電池の残量、使用環境によって、充電時間は前後します。

●充電のしかた

- 1 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。
 - ・必ず専用のACアダプターを使用してください。
 - ・ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
 - ・充電を開始すると充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。
- 3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体から抜く。

各モードについて

モード	特長	機能	コットン	おすすめの化粧品	時間	レベル	使用頻度(目安)
CLEAN	洗顔では落としきれない汚れを吸着し、すっきり肌に整えます。	・RF ・イオン ・クレンジング	あり※3 もしくはなし	とろみのある化粧水※2	約3分	イオン:5段階	週に2~3回
MOISTURE	お肌の角質層まで美容成分を浸透させ、みずみずしいお肌に導きます。	・RF ・イオン ・モイスチャー ・LED(赤・黄) ・ハイパーパルス ・EMS	あり※4 なし	とろみのある化粧水※2 シートマスク	約3分	イオン+ハイパーパルス:5段階	
EMS UP	筋肉を刺激し、ハリのあるお肌に整えます。 ※首や肩にもご使用になれます。	・EMS	あり もしくはなし	とろみのある化粧水※2 またはゲル	約3分	EMS:5段階	
RF LED	お肌の深部まで※1温めながら、お肌に光(赤)をあててトリートメントします。	・RF ・LED(赤)	なし	とろみのある化粧水※2 またはゲル	約3分	なし	
COOL	冷却と光(青)によりハリとキメの整ったお肌に導きます。	・冷却 ・LED(青)	なし		約3分	なし	毎日でも可


- ・各モードの動作時間はモード選択から約3分間です。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。(COOLモード使用時以外)
- ・コットンの有無はお好みで選択していただいて問題ありません。
- ※COOLモード使用後は本体や電極ヘッドが熱くなります。連続で使用しないでください。使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
- ※1 角質層まで
- ※2 必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因になります。
- ※3 CLEANモードをコットンなしで使用する場合は、モード終了後にお水または化粧水を含ませたコットンでお肌を拭き取ってください。
- ※4 コットンなしと比べて、一部刺激を弱く感じる場合があります。

●トリートメントのしかた

- 1 メイクを落として洗顔する。
・ 油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
※COOLモードはメイクの上からでもご使用になれます。
- 2 必要の場合はコットンを装着し、化粧水を付ける。
- 3 POWER/MODEボタンを**長押し**(約3秒)して電源をオンにする。モード、レベルを選択する。
・ POWER/MODEボタンでモードを選択してください。
・ LEVELボタンでレベルを選択してください。
※RF、LED、COOLのレベルは選択できません。
※初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
- 4 背面の手元電極(背面のシルバーの枠)に触れるように本体を持つ。
※充電端子に指を触れないようにお持ちください。
ビリビリと刺激を感じる原因となります。
- 5 P.15～16を参照して電極ヘッドをお肌にあてて動かす。
・ 各モードが終了するとスタンバイ状態(約2分間)になり、POWER/MODEボタンを押すと次のモードがスタートします。(COOLモード終了時は電源オフになります。)
※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりと肌にあててください。
- 6 POWER/MODEボタンを**長押し**(約3秒)して電源をオフにする。
※COOLモード終了時は自動的に電源がオフになります。
- 7 トリートメント終了後お肌を整える。
・ 適宜クリームなどを塗布してください。
※使用後は毎回本体のお掃除をしてください。(P. 17参照)

コットンの付けかた

- 1 本体からコットンストッパーを外す。

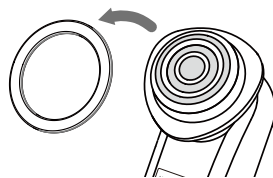

- 2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける。

※コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、大きめで、薄手のコットンを使用してください。厚手のコットンは止まりづらいため、半分に割いて使用してください。

※コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

- 3 コットンにお手持ちの化粧水やゲルを付ける。

※電極ヘッド面全体に化粧水やゲルがいきわたるように付けてください。

※さらっとした化粧水では、温感が弱くなる場合があります。

おすすめ化粧水……とろみのある化粧水

※使用後は電極ヘッドに付いた化粧水やゲルを必ず拭き取るか、軽く水洗いしてください。洗う際は水中に沈めないようにしてください。

基本の使いかた

●使用上の注意

- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- RFは使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温度の感じかたが変わります。
- まぶた、目のまわりは使用しないでください(MOISTURE, RF LED, COOLモード使用時以外)。
※LEDの光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。
- MOISTUREモード、RF LEDモードおよびCOOLモードのLED光を直接のぞき込まないでください。
- 必ず手元電極に触れるように持ってください。
- 推奨環境温度15℃～30℃

お肌へのあてかた

RFモードの使いかた

本体を動かすスピードの目安：1秒間に約2cm

※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。


- ・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。
- ・まぶた、目のまわりには電極ヘッドをあてないでください。

<CLEAN・MOISTURE・RF LEDモード>

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

まぶた、目のまわりはLEDの光をあててトリートメントできます。

その際、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。

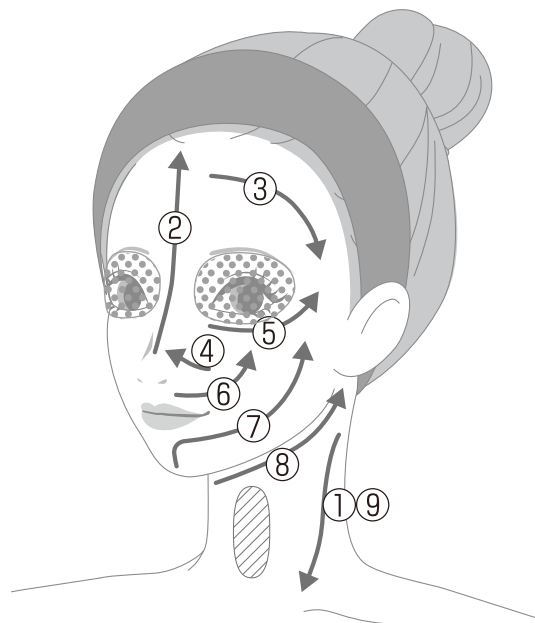


● 使用できない部位

● LEDの光のみ使用可能な部位

※目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。

<EMS UPモード>

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

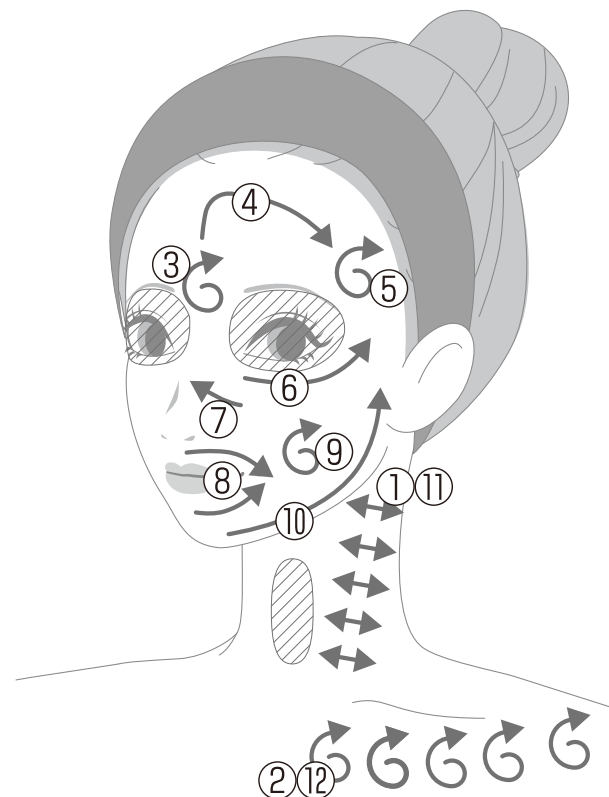

↻ 矢印のようにくるくる動かす ● 使用できない部位

<COOLモード>

お顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※目もとにもご使用いただけます。

※まぶたにあてる際は、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離しLED光を照射してください。

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お掃除をしてください。

●お掃除・保管のしかた

- 1 電源をオフにして、ACアダプターを外す。
- 2 電極ヘッド・コットンストッパーの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。コットンストッパーは水洗いする。
 - ・コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いし水分を拭き取ってください。
 - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
 - ・化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。
- 3 電極ヘッド・コットンストッパー以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.18～P.19)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	POWER/MODEボタンを長押ししていない	POWER/MODEボタンを約3秒長押しして電源をオンにしてください
	充電不足	充電をしてください またはACアダプターを接続して使用してください
充電しても数分しか使えない	充電池が寿命(充電回数の目安:300回)を過ぎた	販売店またはヤーマンコールセンターにご連絡ください(P.21) ※故障の原因となるためお客様では交換できません
	ボタンを間違えて押してしまった	POWER/MODEボタンを長押しして再度電源をオンにしてください
	スタンバイ状態/オートオフになっている(P.10)	POWER/MODEボタンを押してください
充電が開始されない (充電表示が点滅しない)	ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない(タコ足配線など)	ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください
	アダプタープラグが本体に差し込まれていない	アダプタープラグを本体に差し込んでください
		ACアダプターを壁面コンセントに差し込み電源オフの状態ではLEVELボタンとPOWER/MODEボタンを同時に押してください(リセット)
本体が熱い	連続使用した	電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください

こんな症状	考えられる原因	処置方法
COOLモードで冷えない	→ COOLモードを連続使用した	→ 電源をオフにして30分以上本体を休ませてください
	→ 推奨環境温度以外で使用している	→ 15℃～30℃の環境で使用してください
ピリピリする・痛い	→ 設定レベルが高い	→ LEVELボタンでレベルを下げてください
	→ 電極ヘッド全体がお肌にあたっていない	→ 電極ヘッド全体をお肌にあててください
EMSが弱い/感じない	→ 設定レベルが低い	→ LEVELボタンでレベルを上げてください
	→ お肌に水分が足りないまたは乾燥している	→ お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください 手を軽く湿らせてください
	→ 筋肉に沿ってあてていない	→ 電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.16)
熱い(COOLモード使用時以外)	→ 電極ヘッドをお肌に長時間あて続けている	→ COOLモード使用時以外は必ず動かしながら使用してください
	→ 動かすスピードが遅い	→ 少し速く動かしてください
RFの熱さを感じない	→ スタンバイ状態/オートオフになった(P.10)	→ 電源を入れ直すか、POWER/MODEボタンを押してモードをスタートさせてください。
	→ お肌に水分が足りないまたは乾燥している	→ お肌を化粧水やゲルで湿らせてからご使用ください
	→ 動かすスピードが速い	→ 少しゆっくり動かしてください
RF、LED、COOLのレベルが変わらない	→ レベル切り換えはイオン+ハイパーパルスとEMSのみです	

よくあるご質問

Q	A
化粧水やゲルは1回どれくらい使用すればよいですか？	本製品の特長として、化粧水やゲルを多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。 目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水でぬれるくらい使用してください。 ゲルはパール粒2つ分程度使用してください。 化粧水やゲルが少ないと感じたら付け足すことをおすすめします。
お風呂で使用できますか？	本製品は生活防水対応(IPX4)のため、お風呂場での使用が可能です。ただし、シャワーの飛沫などに対しての防滴仕様であり、水道の蛇口から出る水流や水中には対応していません。水の中には入れないようご注意ください。
使用後に肌がほてります	RFの温めによるものです。 気になる場合はCOOLモード、保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。
顔や手にピリピリ感があります	イオンクレンジング・イオンモイスチャー・EMS・ハイパーパルスによる電気刺激です。 LEVELボタンでレベル調節が可能です。心地よいと感じる強さで使用してください。 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
CLEAN・MOISTURE・RF LEDモード使用時にRFの温まりを感じません	電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。 また、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やゲルを足してください。 RFはオンとオフを繰り返しています。表示部に RF と表示されているときにRFがオンしています。
コットンに汚れが付きます	目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。
RFで電極ヘッドが温まりません	RFは電極ヘッドを温めるのではなく、電気のお肌を温めるものです。

●充電電池について

- ・充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約300回が目安です)。
- ・充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。

●廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)
携帯電話・PHS **0570-550-637** (通話料有料)
 受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
 ※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火~金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

●製品仕様

定 格	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約15W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
外 形 寸 法	本体(コットンストッパー付):約W50×D55×H190(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約270g
材 質	本体:ABS樹脂 パネル:ポリカーボネート、アクリル樹脂 電極ヘッド:PET樹脂/銅(クロムメッキ) 手元電極:ABS樹脂(クロムメッキ)
生 産 国	日本
付 属 品	コットンストッパー、ACアダプター
推 奨 環 境	15℃~30℃
防 水 機 能	JIS保護等級 IPX4

●保証について

- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご相談ください。