


取扱説明書

サロン専売家庭用美容器

アセチノヴェーダリフト BS for Salon

PSM-40

ACETINO

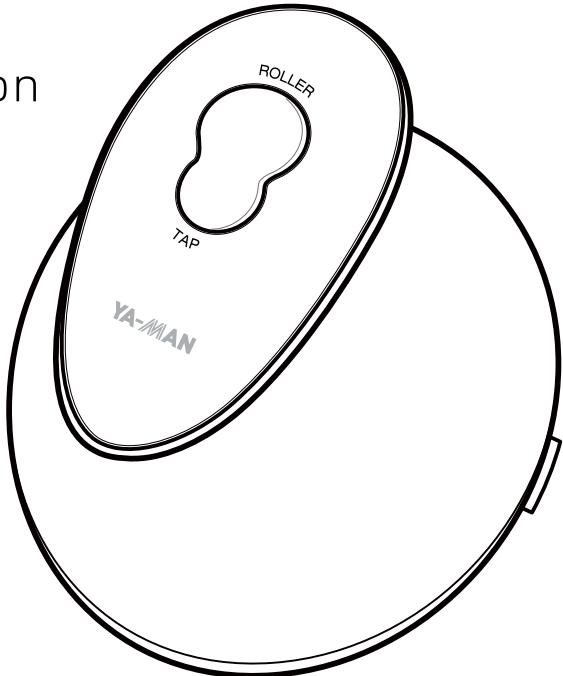

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	6
ご使用の前に	9
使いかた	11
使い終わったら	19
こんなときには	23
アフターサービス	25
●製品仕様	25
●保証について	26
保証書	27

このたびは、ヤーマンプロフェッショナル製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。



医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電子機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器

警告

次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患
- ・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患
- ・悪性腫瘍・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体质
- ・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
- ・敏感肌または肌の弱い人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
- ・妊娠中、生理中、授乳中・眠気をさそう薬を服用中の
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・歯の治療中の(フェイス用アタッチメント使用時)



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部、粘膜など・頬骨の上
- ・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・にきび
- ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・力ヨミやほてりのある部位
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・まぶた、眼球
- ・頭皮のキズ、皮膚炎・鼻・耳

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



使用者の制限

自分の意思表示をできない人には使わせない。子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供の手の届かない場所に保管する。

事故やけがの原因となります。



傷んだコードプラグ使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。


感電・ショート・発火の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

動作中にアタッチメントの間に指を入れない。
アタッチメントに指を挟み込み、けがをする原因となります。

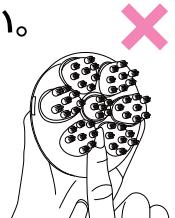

用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや本体が故障する原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

警告



無理な扱い
禁止

ACアダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。ACアダプターが破損し、火災・感電の原因となります。



浴室充電
禁止

浴室室内での充電は絶対にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



落下禁止

不安定な場所に置かない。
また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が故障する原因となります。



必ず守る

使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、頭皮や肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
万一、頭皮や肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。



必ず守る

充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因となります。



必ず守る

顔に使用するときは必ずLOモードで使用し、強く押しあてない。
事故やけがをする原因となります。



必ず守る

交流100V～240Vで使用する(日本国内専用)。ACアダプターは、根元まで確実に差し込む。海外での使用の際は必ずプラグ形状の電圧を確認のうえ使用する。

火災・感電・故障の原因となります。
※海外からの修理保証への依頼には日本国内で配達、受領が可能な連絡先、住所が必要となります。

⚠ 警告



必ず守る

使用しないとき・掃除するときは必ず電源をオフにする。

感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプターを抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

コンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。

また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。また、熱器具に近づけない。本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

⚠ 注意



禁止

次に該当する人は使用しない。

髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

- ・ 植毛をされている人。
- ・ 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。



禁止

次の項目は行わない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・ ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
- ・ 過度に1ヶ所に集中して使用しない。
- ・ 髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。



禁止

ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。

本体の変形や故障の原因となります。

注意



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。



禁止

水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体が故障する原因となります。



必ず守る

使用時間を守って使用する。
1部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用する。顔に使用するときは、顔全体で約5分、頭皮に使用するときは、頭皮全体で約5分を目安に使用する。
過度の使用は肌や頭皮を傷める原因となります。



必ず守る

入浴剤入りのお湯や温泉、サウナでは使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
においや変色・故障・やけどの原因となります。



必ず守る

使用するときは、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。



禁止

ペットには使用しない。
けがをする原因となります。



必ず守る

シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずLOモードから使用する。
事故やけがをする原因となります。



必ず守る

使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。




必ず守る

軽くあて、絶対に強くあてない。
けがや本体が故障する原因となります。
痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。


各部のなまえ

●本体

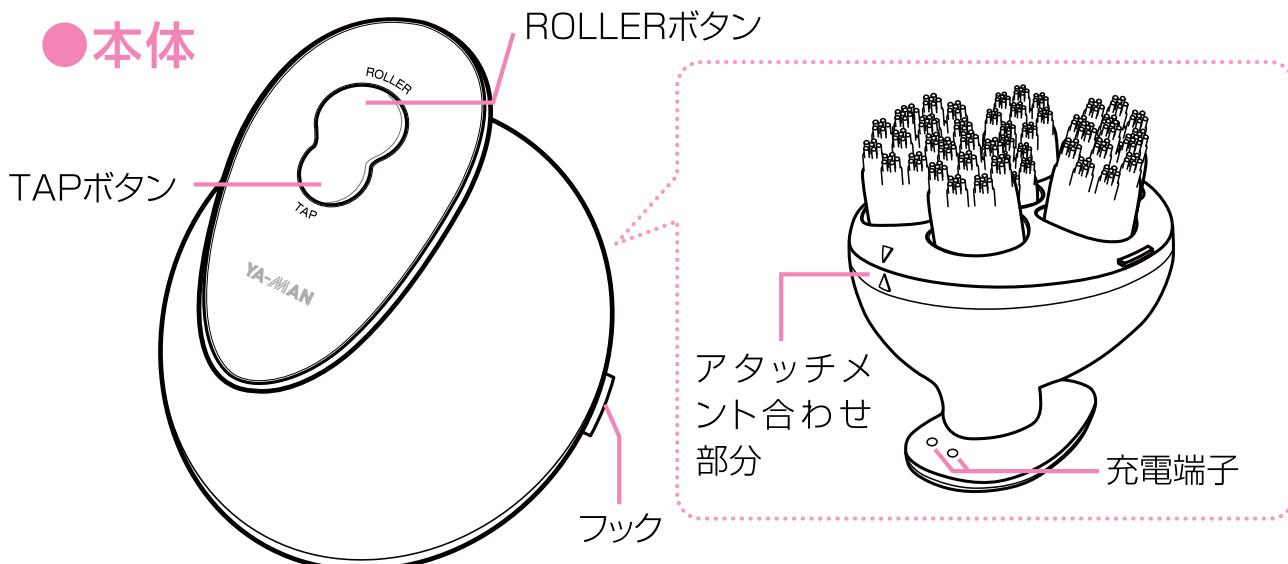

各部のなまえ

ヘッド用アタッチメントを外したところ

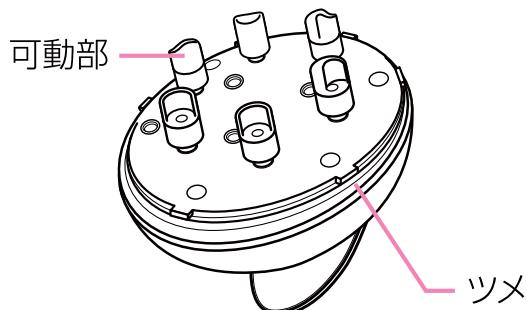


●付属品

・ヘッド用アタッチメント


頭皮専用です。

※お買い上げ時は、本体にセットされています。

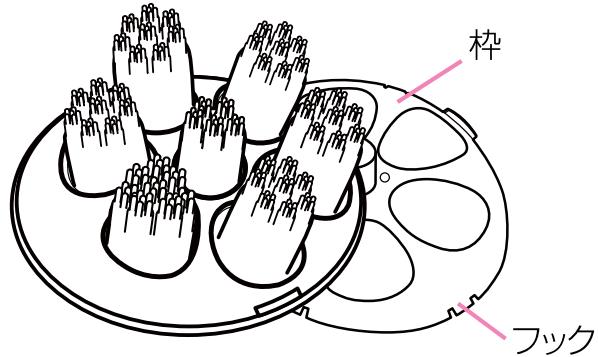

・フェイス用アタッチメント


お顔・首・肩に使用できます。

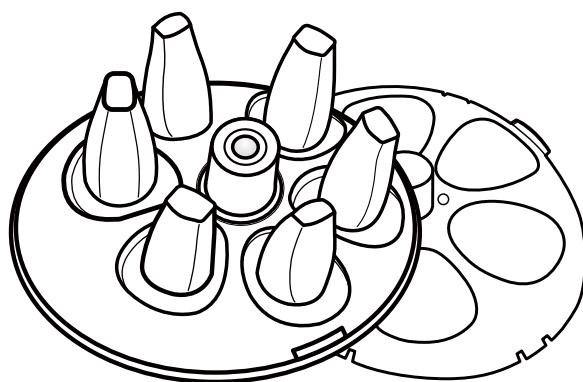

アタッチメントの枠は着脱可能です。枠の取り付けかたについては、「お掃除のしかた」の手順7(P.19~22)を参照してください。

※枠は、お買い上げ時アタッチメントにセットされています。

・充電台

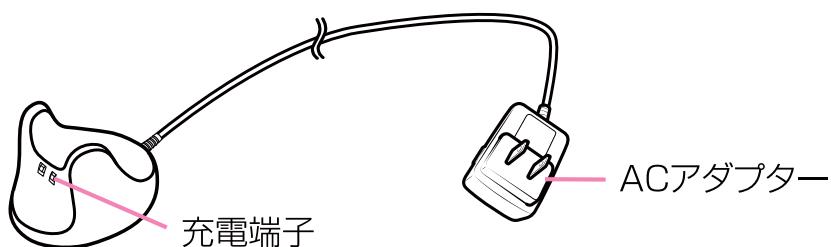

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

各部のはたらき

●ROLLERモードの特長

本製品は、ヘッド用とフェイス用の2種類のアタッチメントが付属しています。

ヘッド用…頭皮の皮脂洗浄やリラクゼーションをご使用ください。

フェイス用…フェイスラインのケアや、首・肩のリラクゼーションをご使用ください。

●TAPモードの特長

細かい振動の力で頭皮の汚れを浮かせたり、お肌の引き締めケアを行います。

●安全機能

アタッチメントを強く押しつけたり、髪の毛がからみつくなど一定の負荷がかかると、安全機能が働き、動作が一瞬停止します。

連続して数回強く押しつけるとモードランプが点滅し、電源が切れることができます。

安全機能が働かない程度の強さであててください。

電源が切れた場合は、再度電源をオンにしてからモードを選択してください。

●防水機能

本体は防水仕様(IPX7)になっています。シャワーや浴槽の中でも使用することができます。充電台は防水ではありません。



警告

●浴室内での充電は絶対にしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



注意

●水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。


本体が故障する原因となります。

●モードとランプ表示

●スピード表示ランプ(ROLLERモード)

ROLLERボタンを長押し(約3秒)すると、スピード表示ランプが1つ点灯し、電源がオン(LOモード)になります。電源がオンの状態でROLLERボタンを押すたびに、スピードが切り替わります。

LO → MID → HI → 停止
(電源オン)

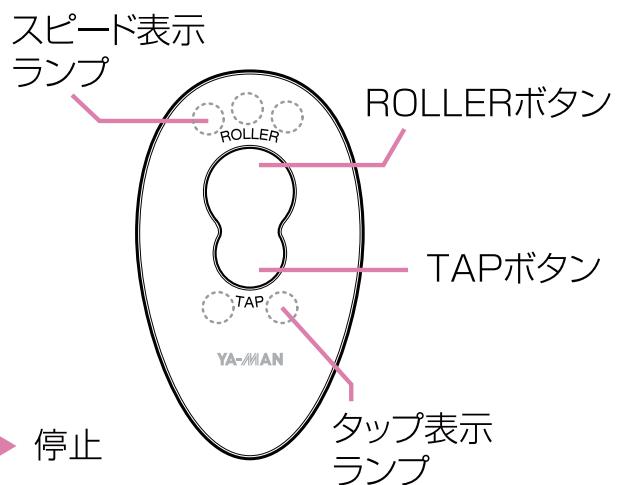

各部のなまえ

	ランプ表示	説明
LO	●○○	遅いスピードで動きます。初めて使用するときや使いかたに慣れるまでは、LOで使用してください。またお顔に使用するときはフェイス用アタッチメントでLOを選択し使用してください。
MID	●●○	中間のスピードで動きます。
HI	●●●	速いスピードで動きます。 使いかたに慣れてきたら使用してください。
停止	○○○	動作が停止します。

●タップ表示ランプ(TAPモード) バイブレーションを組み合わせて使用できます。

タップ1 → タップ2 → 停止
(電源オン)

TAPボタンを長押し(約3秒)すると、タップ表示ランプが1つ点灯し、電源がオン(タップ1)になります。電源がオンの状態でTAPボタンを押すとタップが切り替わります。お好みで使い分けてください。

	ランプ表示	説明
タップ1	●○	優しく振動します。初めて使用するときや、使いかたに慣れるまでは、タップ1を使用してください。また、お顔に使用するときはフェイス用アタッチメントでタップ1を選択し使用してください。
タップ2	●●	より多めの振動がお好みのかたにオススメです。
停止	○○	動作が停止します。

※動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。(オートオフ機能)
ROLLERモードとTAPモードは、別々でも同時にでも使用できます。

ご使用の前に

ご使用の前に

充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・ 購入後初めて充電を行うときは、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約20分


※充電環境 室温約25°Cにおいて
※満充電直後からの動作時間です。
※電池の残量や充電環境によって、
充電時間や動作時間は前後します。

1 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。


2 本体と充電台の充電端子が触れる ように充電台に置く。

- ・ 充電が開始されます。
- ・ 充電中は充電残量に応じて、ランプが順に点滅します。
- ・ 充電が完了すると、ランプが点灯に変わります。
- ・ 本体と充電端子の水滴をしつかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、故障の原因となります。
- ・ 電池の残量や充電環境によって、充電時間は前後します。

ランプが点灯しない場合は正しく充電できていません。
斜めにならないよう、真っ直ぐに置いてください。

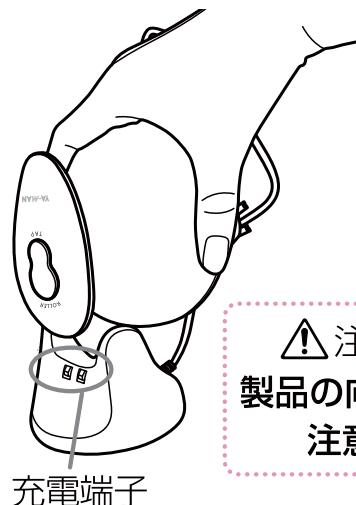

△注意
製品の向きに
注意

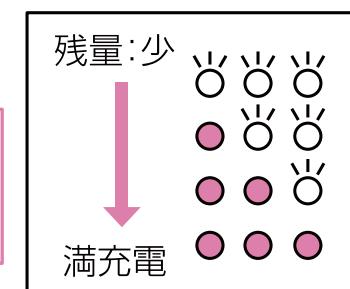

3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、 本体を充電台から外す。



警告

- 本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

用途に合わせてヘッド用アタッチメントまたはフェイス用アタッチメントを取り付けて使用してください。


- ・ ヘッド用アタッチメント : 頭皮専用です。
頭皮の皮脂洗浄やリラクゼーションに。
- ・ フェイス用アタッチメント : お顔・首・肩に使用できます。
フェイスラインのケアや首・肩のリラクゼーションに。

ご使用の前に

●取り付けかた


1 本体の可動部とアタッチメントの穴を合わせる。

※本体とアタッチメント合わせ部分の△のマーク(P.6)を合わせてください。

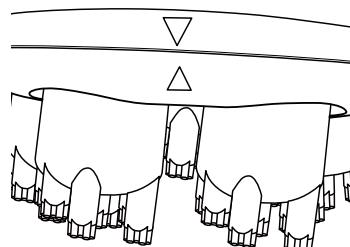


2 「カチッ」と音がするまでアタッチメントをはめ込む。

- ・ △のマークを合わせ、6ヶ所のツメにしっかりとはめ込んでください。
- ・ アタッチメントを取り付けにくい場合は、可動部と穴を合わせ、電源ボタンを押して電源をオンにします。(LOモード)
可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります。

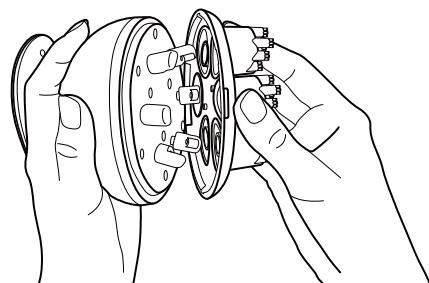


⚠ 注意
取り付け時の指の巻き込みに注意

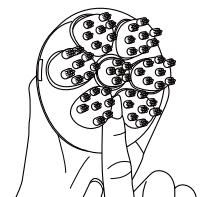

●取り外しかた

1 アタッチメントのフックに指をかけ、持ち上げて外す。

※アタッチメントを取り外したときに、可動部受けが外れた場合には、紛失しないようご注意ください。
また、ご使用の際には必ず可動部受けをアタッチメントに装着してご使用ください。

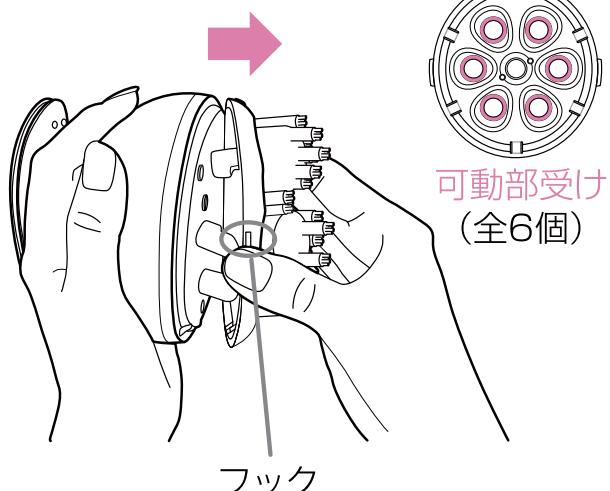

可動部受け
(全6個)

フック

使いかた



警告

- 頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある人は使用しない。
事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、頭皮や肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
万一、頭皮や肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

使いかた



注意

- 使用するときは、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
- 顔に使用するときは、必ずフェイス用アタッチメントを取り付けLOモード/タップ1で使用する。
- 次に該当する人は使用しない。
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。
 - ・植毛をされている人
 - ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人
- 次の項目は行わない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
 - ・過度に1ヶ所に集中して使用しない。
 - ・髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。
- 使用時間を守って使用する。下記の使用時間を目安に使用する。
過度の使用は肌や頭皮を傷める原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
においや変色・故障の原因となります。
- 軽くあて、絶対に強く押しあてない。
痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

使用時間の目安

- 1部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用してください。
お顔に使用するときは、顔全体で約5分、頭皮に使用するときは、頭皮全体で約5分を目安に使用してください。
過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。

頭皮の皮脂洗浄ケア

ヘッド用アタッチメントを使用します

1 シャンプーで髪全体を泡立てる。


- ・ほかの頭皮ブラシとの併用はオーバートリートメントの原因となりますのでおやめください。



使いかた



2 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりと持ってください。

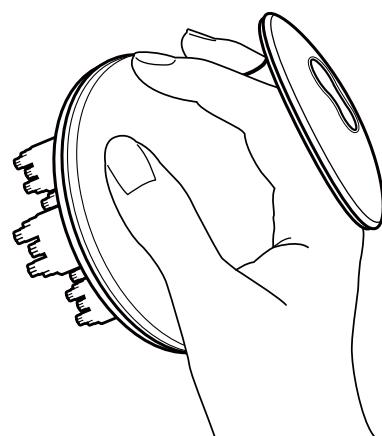


3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、お好みのパターンを選択する。

- ・ボタンを押すたびにパターンが切り替わります。(P. 8のモードとランプ表示 参照)
- ・初めてお使いになる場合は、LOモード／タップ1で使用してください。
- ・ブラシ全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。

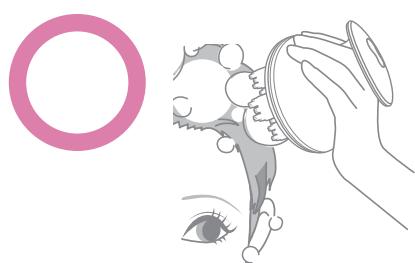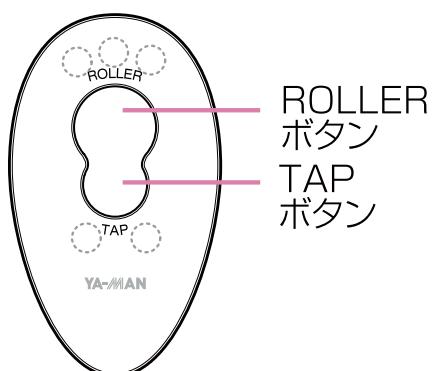

ブラシ全体が
頭皮にあたっている

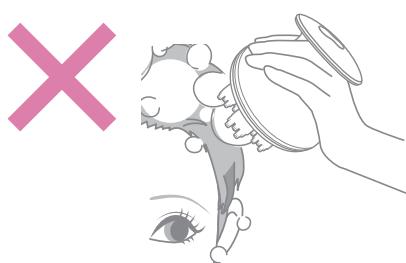

ブラシの一部が
頭皮から浮いている


4 前頭部と側頭部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくりすべらせる。
- ③ ①、②を2回くり返す。
 - ・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源が切れることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。




5 後頭部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 生え際から頭頂部へ向かって約5秒間かけてゆっくりすべらせる。

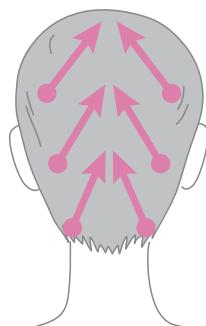


6 頭頂部と後頭部をケアする。

頭頂部(右図Ⓐ)に約20秒間軽くあてる。
右図のように頭頂部からえりあしに向かって約5秒ずつ押しあてて移動する。

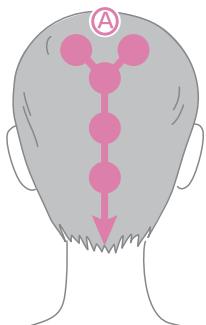

7 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

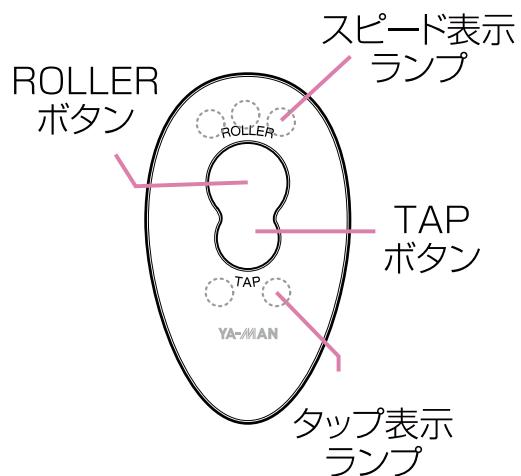

8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れをする。

- ・シャンプーを洗い流した後は、通常のお手入れをしてください（コンディショナー・トリートメント・ヘアパックなど）。



注意

- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

使いかた

フェイスラインのケア

必ずフェイス用アタッチメントを使用します

お肌をぬらした状態でのご使用をおすすめします。

入浴中や化粧水、ジェルなどでお肌を湿らせてご使用することをおすすめします。
メイクを落としてからのご使用をおすすめします。

1 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりと持ってください。




2 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、必ずLOモード／タップ1を選択する。

- ・お肌にアタッチメントを、垂直に軽くあててください。
- ・強く押しあてないでください。



アタッチメント全体がお肌に
垂直にあたっている

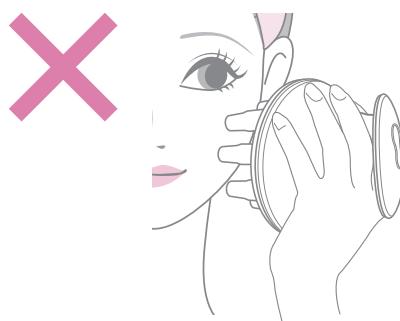

アタッチメントの一部が
お肌から浮いている



注意

- 顔、首、肩に使用する際は、必ずフェイス用アタッチメントを取り付け
LOモード／タップ1で使用する。
ヘッド用アタッチメントを使用したり、MID、HI、タップ2で使用すると
けがの原因となります。

3 お顔をケアする。

あごからこめかみにむけて、フェイスラインに沿つてゆっくりすべらせる。各10回くり返す。


- ・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源が切れることができます。お肌に軽くあててください。
- ※目もとと頬骨の上を避けてすべらせてください。
- ※アタッチメントを強く押しつけるとお肌を挟んで強い痛みを感じことがあります。
- 軽く押しかてて「気持ちいい」と感じる強さでご使用ください。
- ※洗顔料を使用した後は、必ずお顔を水で十分に洗い流してからご使用ください。



目もと、頬骨の上には
使用しない


4 首と肩まわりをケアする。

- ① 耳の後ろから鎖骨に向かって約5秒ずつ押しかてて移動させる。
- ② 鎖骨の下側を肩へ向かって約5秒ずつ押しかてて移動させる。
- ③ ①と②を3回くり返す。
- ※ のどぼとけや鎖骨にあてないようにすべらせてください。
- ④ 首の後ろ側と肩まわりを右図のように押しかてて移動させる。

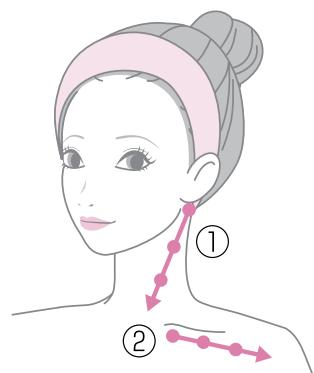

5 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

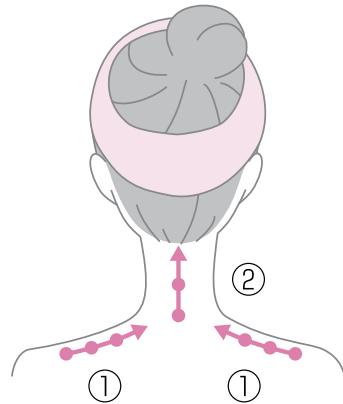

- 押しあてる
- 矢印の方向へ移動する
(すべらせない)

頭皮の揉み上げケア

ヘッド用アタッチメントを使用します

頭皮用トリートメント剤などを一緒に使うとき

育毛剤などの頭皮用トリートメント剤をご使用になる場合は、頭皮へ頭皮用トリートメント剤を塗布して通常の使いかたをした後、本製品を使用してください。


※頭皮用トリートメント剤を使用した後は、本製品を必ず水で十分に洗い流してください。

1 頭皮用トリートメント剤をつける。



2 図のように本体を持つ。

- 落とさないようにしっかりと持ってください。

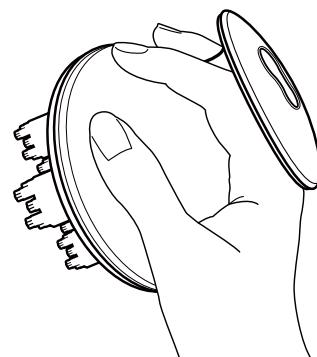

3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、お好みのパターンを選択する。

- ・ボタンを押すたびに、パターンが切り替わります。
- ・初めてお使いになる場合は、LOモード／パターン1から使用してください。
- ・アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。




ブラシ全体が頭皮に
垂直にあたっている



ブラシの一部が
頭皮から浮いている

4 側頭部をケアする。


- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 生え際から頭頂部へゆっくりすべらせる(約5秒)。
- ③ ①、②を2回くり返す。
 - ・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が
働いて電源が切れることがあります。安全機能が
働かない程度の強さであててください。

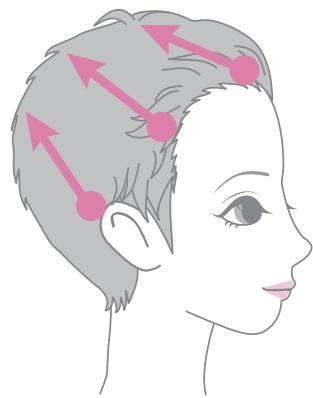

- 押しあてる
- 矢印の方向へ
すべらせる


5 後頭部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 中央に約5秒間軽くあてる。
- ③ 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ④ 左右の位置を変えて①～③を2回くり返し、
後頭部全体をケアする。

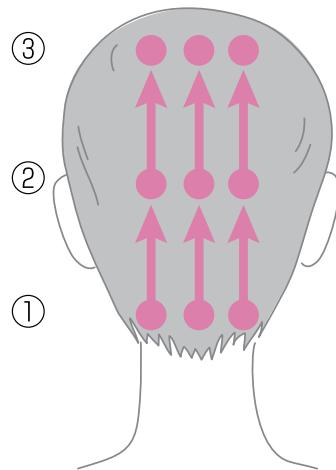

6 頭頂部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ③ 左右の位置を変えて①～②を2回くり返し、頭頂部全体をケアする。

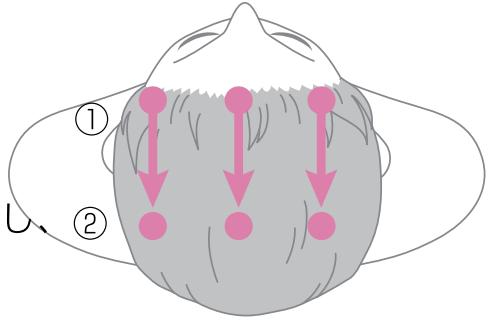

- 押しあてる
- 矢印の方向へすべらせる

7 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・ 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。



注意

- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。
- 本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

部位別モードの選びかた

※お好みに応じて各モードを組み合わせてパターンを選択してください。

※各部位の使用モードは必ず守ってください。

	頭皮	フェイス	首・肩
ROLLER	LO MID HI	LOのみ	LO MID HI
TAP	タップ1 タップ2	タップ1のみ	タップ1 タップ2

お掃除のしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お掃除をしてください。



警告

使用しないとき・お掃除するときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

使い終わったら

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す。

- ・アルカリ洗剤やアルコール、
シンナー、ベンジン、除光液などは
使用しないでください。




3 本体からアタッチメントを取り外す。


- ・アタッチメントの取り外しかたについては、「取り外しかた」(P.10)を参照してください。

4 アタッチメントを枠から取り外す。

※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引つ張ると破れことがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

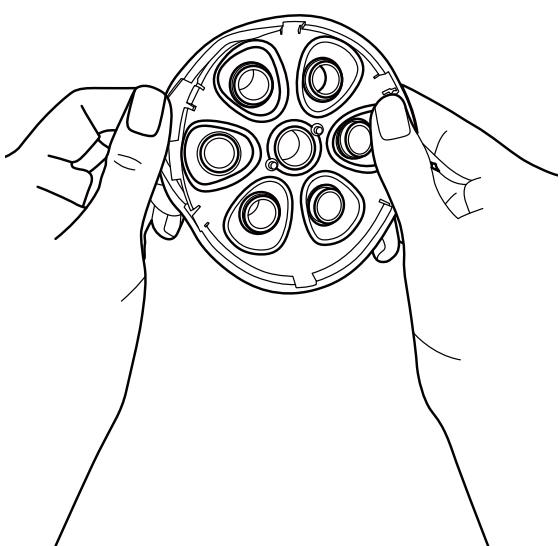

5 うすめた中性洗剤でアタッチメントと枠についている汚れを落とした後、水で洗い流す。

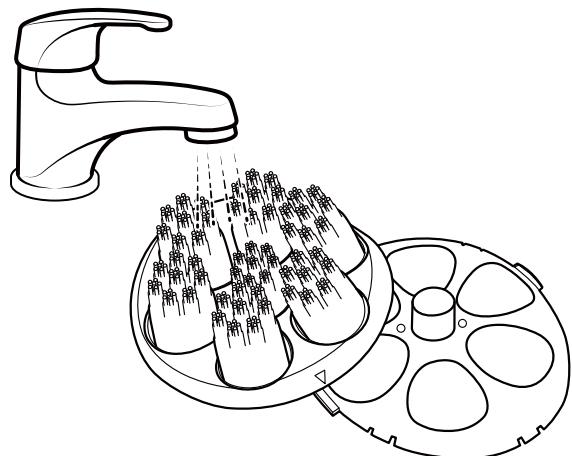

6 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・枠の水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。


- 特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
- 湿ったままの状態で放置しないでください。
故障やにおいの原因となることがあります。

7 アタッチメントに枠を取り付ける。

- ・アタッチメント・枠の表裏上下を確認して取り付けてください。アタッチメントの表側の上部に△マークがあります。

※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れことがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。


- ①アタッチメント中央の突起と穴、左右にあるフックと穴を合わせてください。
- ②アタッチメント中央の突起を、枠中央の穴に押し込んでください。
- ③枠左右のフックにアタッチメントの穴を引っかけてください。
- ④アタッチメントの縁を枠に巻きつけるように取り付けてください。

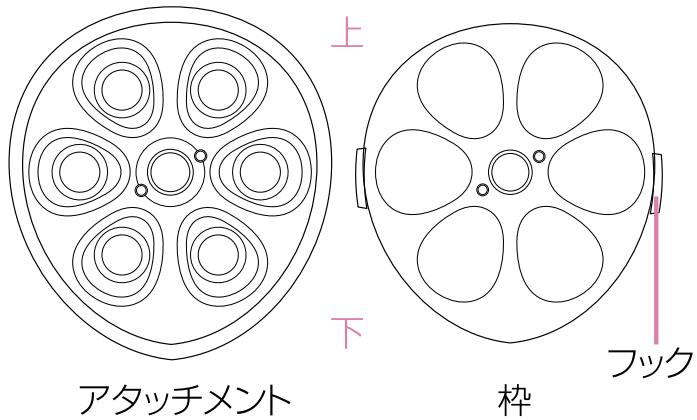


アタッチメント

枠


フック

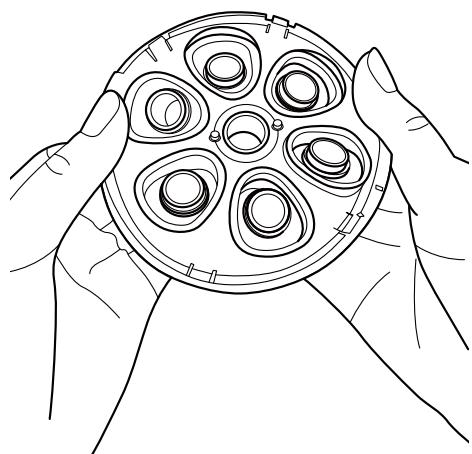

アタッチメント中央の突起を、
枠中央の穴に押し込んでください。

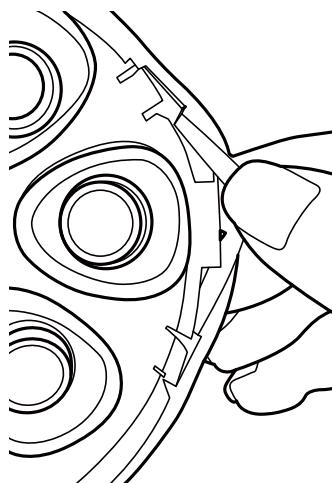

左右のフックに穴を
引っかける。

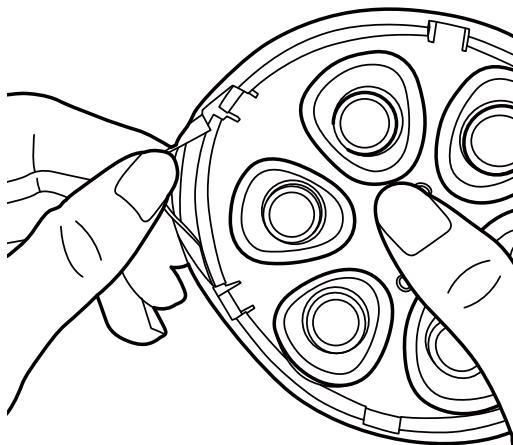

アタッチメントの縁を
枠に巻き付けるように取り付ける。



注意

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体が故障する原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
においや変色の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食し、故障の原因となります。

使い終わったら

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食し、故障の原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.23)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.25)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんなときには

こんな症状

考えられる原因

処置方法

電源が入らない

→ ROLLERボタンまたはTAPボタンを押していない

→ いずれかのボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください

充電しても数分しか使えない

→ 充電池の残量不足

→ 壁面コンセントで充電してください(P.9)

充電池の寿命

→ 販売店またはヤーマンコールセンター(P.25)にご連絡ください
※故障の原因となるためお客様では交換できません

充電が開始されない

→ ACアダプターがコンセントに差し込まれていない

→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.9)

→ 充電台に本体がしっかりとセットされていない

→ 充電端子の水滴を拭き取り、本体と充電台の充電端子が触れるように置いてください。

途中で停止する

→ 充電池の残量不足

→ 充電してください(P.9)

→ オートオフ機能が働いた

→ 動作を開始してから約5分経過すると自動的に停止します(P.8)

→ 安全機能が働いた(P.7)

→ 肌に当てる強さを弱くしてください

よくあるご質問

Q	A
どれくらいの頻度で使用すれば良いですか？	<p>●1部位1回約5分、1日合計20分を目安にご使用ください。お顔に使用するときは、顔全体で約5分、頭皮に使用するときは、頭皮全体で約5分を目安にご使用ください。</p> <p>過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。</p> <p>●お肌や頭皮に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。</p>
乾いた髪に使用してもかまいませんか？	頭皮のケアとして、乾いた髪に使用することもできます。
頭皮以外にも使えますか？	フェイス用アタッチメントはお顔や首と肩にもご使用になります。 ※顔に使用するときは、必ずLOモード／タップ1にしてください。 ※ヘッド用アタッチメントでお顔・首・肩に使用すると、お肌を傷める原因となります。
アタッチメントがうまく取り付けられないのですが	アタッチメントを取り付けにくい場合は、可動部と穴を合わせ、ボタンを長押して電源をオンにします。可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります（「取り付けかた」（P.10）参照）。 ※取り付けの際は指を巻き込まないよう十分に注意してください。
うまくアタッチメントが取り外せないのですが	アタッチメントの左側か右側のフックに指をかけて、そのまま持ち上げて外してください。
お風呂で使用中に水泡が出てきます	異常ではありません。
お風呂で使用後、本体を振ると水の入った音がします	異常ではありません。 本体・アタッチメントの水分をよく拭き取り風通しの良い場所で乾燥させてください（「お掃除のしかた」（P.19～21）参照）。

こんなときには

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など **0120-776-282**(通話料無料)
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) 携帯電話・PHS **0570-550-637**(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと
お電話がつながりやすくなっています。

●製品仕様

定 格	DC5V 500mA
消 費 電 力	約3W(充電時)
外 形 尺 法	本体:約W97xD105xH103(mm)(アタッチメント除く) コードの長さ:約1.1m
製 品 質 量	本体:約287g(アタッチメント除く)
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、 アタッチメント:シリコン、ポリカーボネート 充電台:ABS樹脂
製 造 国	中国
セ ッ ト 内 容	本体 1台 ヘッド用アタッチメント 1個 フェイス用アタッチメント 1個 充電台 1台

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、送料ご負担のうえ実費で修理させていただきます。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	サロン専売家庭用美容器	型番	PSM-40
形名	アセチノヴェーダリフト BS for Salon		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話 ※販売者名	見本 <small>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</small>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社
〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター

固定電話など
 **0120-776-282** (通話料無料)
携帯電話・PHS
 **0570-550-637** (通話料有料)

※9:00~17:00(土・日・祝日除く)



www.ya-man.com