

取扱説明書

家庭用美容器

ブルーム レッド

S10

もくじ

はじめに	1
安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
各部のなまえとはたらき	7
お使いになる前に	9
使いかた	11
使い終わったら	16
お知らせ	18
● 故障かな?と思ったら	18
● よくあるご質問	19
● 製品仕様	20
アフターサービス	21



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

● 次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電子機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器・人工心肺など生命維持用医用電子機器・心電計などの装着型医用電子機器



禁 止

警告 (ご使用、保管に関して)

● 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患
- ・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・敏感肌またはお肌の弱い人
- ・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
- ・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・妊娠中・生理中・授乳中・眠気をさそう薬を服用中の人は
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・強度近視の人(−6D以上)・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人、および治療中の人は



禁 止

● 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- ・切り傷・整形手術をした部位・口内や陰部・粘膜など・にきび・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやほてりのある部位
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ・眼球・まぶた・目のまわり

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

● 同じ箇所にあて続けない。必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。 やけど・低温やけどの原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 本体やACアダプターおよびUSBケーブルに水がかからないようにする。（水につけたり、洗ったりしない）

また、水場・浴室内・入浴時に使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。



水場使用
禁止

- 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。



禁 止

- 引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。

火災・感電・けがの原因となります。

- 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。

事故やけがをする原因となります。

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

事故やけがをする原因となります。



使用者の
制限

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがをしたり、本製品が故障する原因となります。



用途以外
禁止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。

また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

● 6分以上連續で使用しない。

肌トラブルの原因となります。

● 以下の項目は行わない。

事故やけが、本体が故障する原因となります。

- ・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- ・落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
- ・業務用等、過剰な連続使用をしない。



禁
止

● 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。

● 電極ヘッドを金属にあてない。

故障・けがの原因となります。

● ベットには使用しない。

けがの原因となります。

● 不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶつけたりしない。

本体の故障原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。



落
下禁
止

● 以下の項目は必ず守る。

事故やけが、本体が故障する原因となります。

- ・同じ箇所にあて続けない。
- ・お肌の状態にあわせて使用する。
- ・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
- ・使用後は必ず電源を切る。



必
ず守
る

● 使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

● 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故やけがをする原因となります。

⚠ 警告（電源に関して）

- 本製品には専用のACアダプターおよびUSBケーブルを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



- ACアダプターおよびUSBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、ACアダプターおよびUSBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



- ACアダプターおよびUSBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 本体やコンセントからACアダプターおよびUSBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

感電・ショート・発火の原因となります。



- 使用しないときはACアダプターおよびUSBケーブルをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、ACアダプターおよびUSBケーブルをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



警告（電源に関して）

- 充電端子とUSBケーブルに水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、USBケーブルを本体から抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 交流100～240Vで使用する。（無料修理は日本国内のみ）
ACアダプターおよびUSBケーブルは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。



必ず守る

海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。（無料修理は日本国内のみ）
火災・感電・故障の原因となります。
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。



必ず守る

- ・付属のアダプタープラグ以外の形状を使用する場合は、プラグ変換アダプター（付属品ではありません）をご使用ください。
- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。




発火注意


各部のなまえとはたらき

本体

●正面

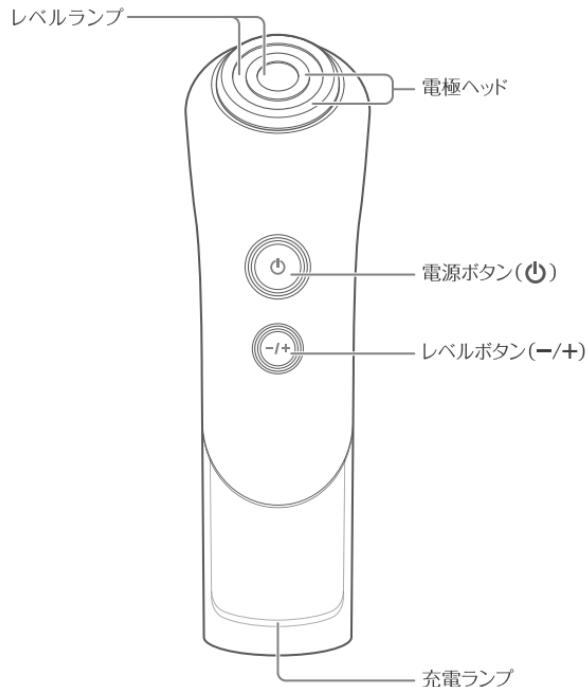

●背面

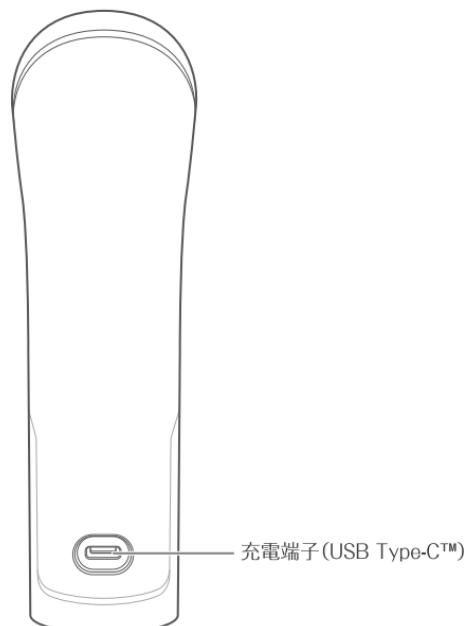

付属品

- ACアダプター
- USBケーブル(USB Type-C™)
- フローレスゲル
- 取扱説明書（保証書付）

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

・USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

はたらき

安全機能

● 温度センサー

お肌や電極ヘッドの温度が高くなってくると、安全のため出力を低くします。

また、高温になり過ぎると、安全のため電源がオフになります(レベルランプ点滅とブザー音5回でお知らせ)。

その場合は、約30分間本体を休ませてください。

● モーションセンサー

本体の動きを検知し、電極ヘッドを同じ箇所にあて続けている場合は、安全のため出力を停止します。

本体を動かす速度が遅くなると、モーションセンサーの働きにより温感が弱まることがあります。

オートオフ機能

電源をオンにしてから約6分が経過すると、自動的に電源がオフになります(ブザー音:「ピーピー」)。

タイマー機能

使用時間の目安は顔全体で約6分です。3分経過するとブザー音でお知らせします(ブザー音:「ビビビッ」)。

充電目安表示


充電池の残量が少なくなったことを電源をオンにした時にお知らせします(レベルランプ点滅とブザー音6回でお知らせ)。

1回6分使用したら充電することを推奨します。満充電になるか、40分以上充電しないと、次回電源オン時にも表示します。


お使いになる前に

充電する

家庭用コンセントを使用する

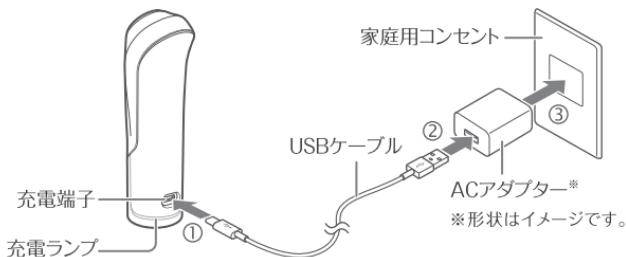

パソコンを使用する

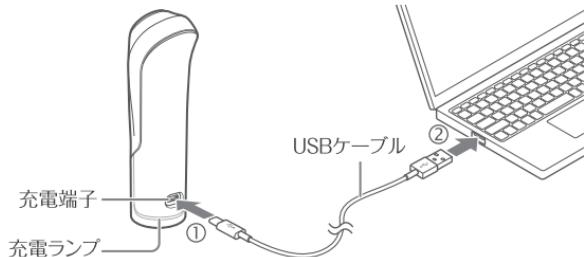

- ・充電中は本体底面の充電ランプが点滅します。
- ・充電が完了すると、本体底面の充電ランプが約5秒間点滅後に消灯します。ACアダプターおよびUSBケーブルを外してください。
- ・室温約25°Cの場合、約3時間で満充電となり、約20分間動作可能です。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

※約10秒経っても充電が開始しない場合は、USBケーブルの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

ご注意

- ・本体と充電端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、故障の原因となります。
 - ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
 - ・初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
 - ・USBケーブルとACアダプターは付属のものをご使用ください。
- ※市販品では正常に充電できない場合があります。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

⚠ 注意


- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

1 腕の内側を石鹼で
洗い、タオルなどで
拭き取る



2 電極ヘッドの中央にフロー
レスゲル(パール粒(大)1
粒程度)をのせ、電源をオ
ンにして約3分間動かしな
がら使用する(P.11)

必ずレベル1でテストを行ってください。

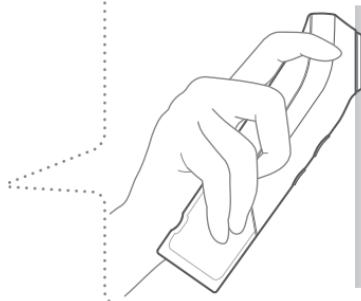

3 お肌に残ったフローレス
ゲルをなじませ、異常が
ないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやは
りを感じなければ、本製品をご使
用ください。

持ちかたとお肌へのあてかた

図のように本体を持ち、電極ヘッド
全体をお肌にあててゆっくり動か
してください。

・必ず電極ヘッド全体をお肌にあ
て、動かしながら使用してくだ
さい。

使いかた


基本的な使いかた

必ずメイクを落とし、洗顔してからご使用ください。

1 電源をオンにする

レベル1ランプが点灯します。


※電源オン時は安全のためレベル1に設定されています。

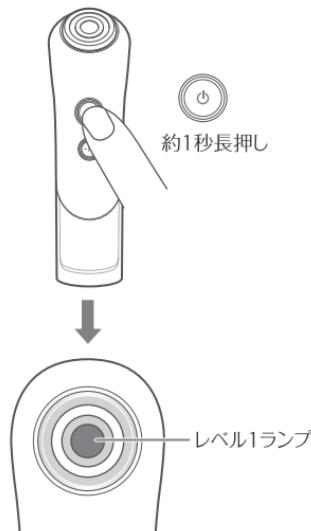

2 レベルを選ぶ

レベルボタン(−/+)を押すたびにレベルが切り換わります。

レベルランプの点灯でレベルの確認ができます。

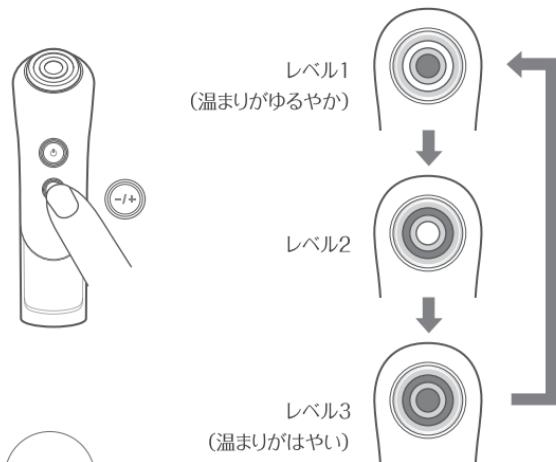

ご注意

初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ずレベル1で使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

3

フローレスゲルを電極ヘッド中央にのせ、電極ヘッドをお肌にあてて動かす

お手入れは、6つの部位に分けて行います(P.13~14)。

1つの部位につきフローレスゲルをパール粒(大)1粒程度のせてください。



4

終わったら、お肌を整える

お手入れが終わったら、日頃お使いの基礎化粧品でお肌を整えてください。

ご注意

動かしかたは、「動かしかた」(P.13~14)をご参照ください。


- ・フローレスゲルを手で塗布しないでください。本体の汚れや落下の原因になります。
- ・使用中にすべりが悪いと感じたら、フローレスゲルをつけ足してください。
- ・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
- ・熱く感じる場合は少し速めに動かすか、レベルを下げてください。

- ・のどぼとけ、まぶた、目のまわりには使用しないでください。



動かしかた


下図の通り、①～⑧の順に矢印の方向へ動かしてください。1つの矢印に対し3回ずつ繰り返してください。

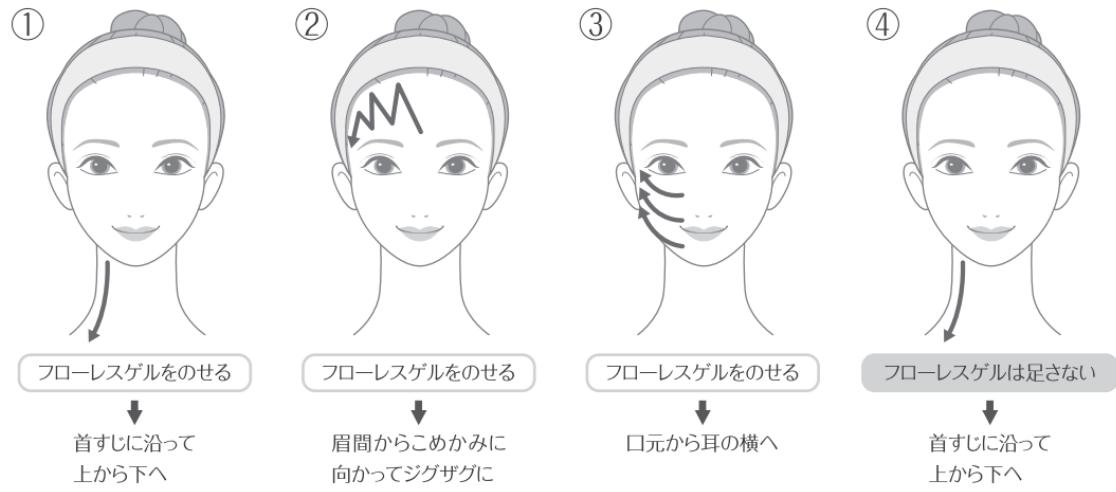

左半分 約3分

- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に4cm
- 使用時間の目安：1回約6分（顔全体）
- 3分経過するとブザーが「ビピビッ」と鳴ります。時間の目安にしてください。
- 途中で停止するときは、電源ボタン(▶)を1秒以上押して電源をオフにしてください。



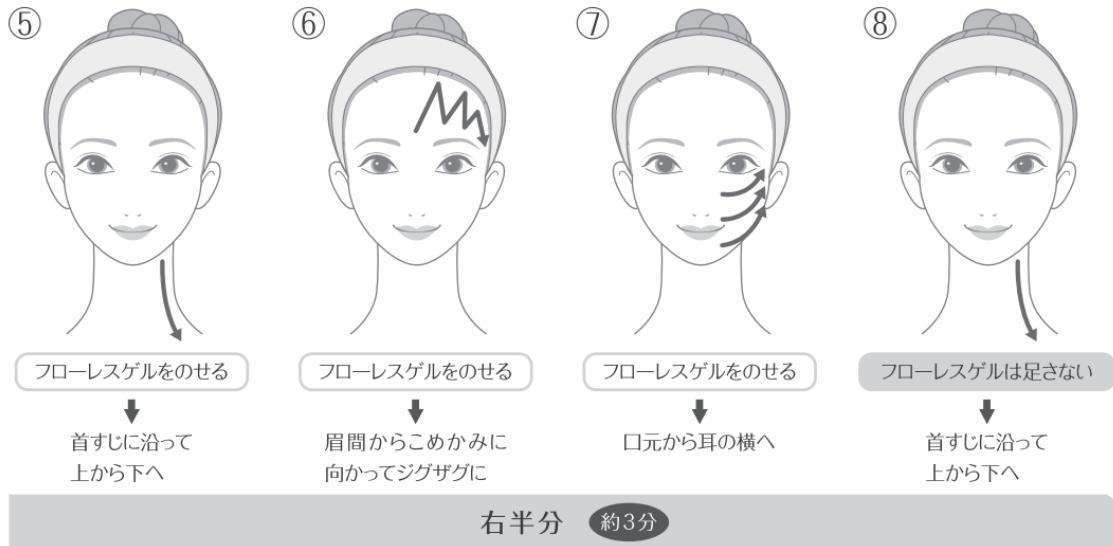

⚠ 注意

- 6分以上連続で使用しない。
肌トラブルの原因となります。



電源をオンにしてから約6分経過すると、自動的に電源がオフになります。

自動電源
オフ

ケアのポイント

気になる箇所には、下図のように使うと効果的です。

口もと

下図の通り、矢印の方向へ3回動かしてください。




フローレスゲルをのせる



ほうれい線に沿って下から上→こめかみへ(3回)

あご～フェイスライン

下図の通り、①～③の順に3回ずつ矢印の方向へ動かしてください。

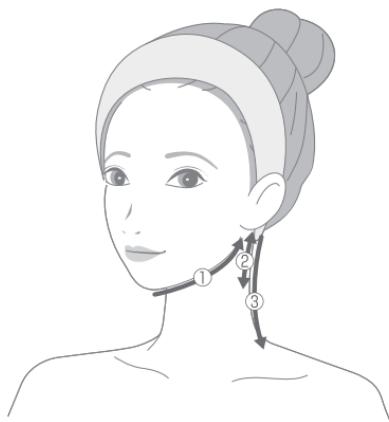

フローレスゲルをのせる



①あご先から耳の下へ(3回)

②耳の下を往復(3回)

③首筋に沿って上から下へ(3回)

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。




1

固く絞った柔らかい布等で 汚れを拭き取る

- ・汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、
本体からUSBケーブルを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

- 水洗いはしない。
本製品は防水製品ではありません。故障の原因となります。

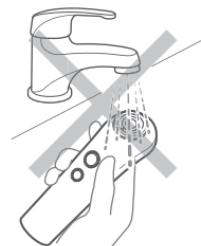

- フローレスゲルが付着した状態で放置しないでください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体とコンセントからACアダプターとUSBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所(火のそばや炎天下、浴室など)に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.18)を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ 電源ボタン(⊕)を約1秒長押ししてください。
	→ 電池残量がありません。充電してください(P.9)。
充電しても数分しか使えない	→ 約6分で自動的に電源がオフになります。
	→ 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.9)。
充電が開始されない	→ 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご連絡ください。
	→ 付属のUSBケーブルを本体に差し込んでください(P.9)。ゆるんでいないか確認してください。
	→ ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.9)。
	→ パソコンの電源を入れてください(P.9)。
ラジオ波(RF)が熱い	→ 電源ボタン(⊕)とレベルボタン(-/+)を同時に押してリセットしてください。充電が開始される場合があります。
	→ 同じ部位にあてている時間が長いです。必ず動かしながらあててください。
ラジオ波(RF)の熱さを感じない	→ 少し速く動かしてください。
	→ レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
	→ お肌が乾燥しています。フローレスゲルを塗って、お肌を湿らせてください。
	→ レベルを上げてください。

よくあるご質問

Q 使用頻度、使用時間の目安はありますか？

A 週に5日(1日1回6分まで)を目安にご使用ください。
※お肌の状態を見ながら、使用回数を増やしたり、減らしたりしても構いません。
※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

Q 連続で使用することはできますか？

A 本製品は1日1回、6分間のご使用をおすすめしています。

Q フローレスゲルは1回どれくらい使用すればよいですか？

A 顔全体で大きめのパール粒(大)6個程度使用してください。
フローレスゲルが少ないと感じたら付け足すことをおすすめします。

Q お風呂場で使用できますか？

A 本製品は防水製品ではありません。お風呂場では使用しないでください。

Q 使用後にお肌がほてります

A ラジオ波(RF)の温めによるものです。

Q 電極ヘッドが温まりません

A ラジオ波(RF)は電極ヘッドを温めるのではなく、電気の力でお肌を温めるものです。

Q レベルによって効果に違いはありますか？

A レベルを上げると、強く、早く温まります。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 2.0A
消 費 電 力	約4.5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約20分(満充電の状態から) ※使用環境やレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	約W47×D45×H154(mm)
製 品 質 量	約175g
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 電極ヘッド:銅(クロムメッキ)
製 造 国	日本
付 属 品	ACアダプター1個 USBケーブル(USB Type-C™)1本 フローレスゲル1個 取扱説明書(保証書付)
推奨環境温度	10°C~40°C

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

オススメの化粧品

フローレスゲル

内 容 量 : 80g
品 番 : CS17006
単品価格 : ¥3,500(税抜)

内 容 量 : 200g
品 番 : CS18002
単品価格 : ¥6,000(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(P.21)にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.21）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
 5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器		型番	S10
形名	ブルーム レッド			
無料修理保証	対象部分	期間		
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間		
店名・住所・電話	<p>ご購入日の記入欄に明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>			
※販売者名				

見
本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com