

取扱説明書

家庭用美容器 ブルーム WR スター S12PLUS

はじめに	1	使い終わったら	18
安全上のご注意	1	お知らせ	20
海外でのご使用について	8	● 故障かな?と思ったら	20
各部のなまえとはたらき	9	● よくあるご質問	22
お使いになる前に	11	● 製品仕様	23
使いかた	13	アフターサービス	24



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

● 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器・人工心肺など生命維持用医用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

警告 (ご使用、保管に関して)

● 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人・幼児や自分で意思表示できない人・温度や刺激の感覚が自覚できない人

・自己免疫疾患のある人



禁 止

● 次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人・高血圧の人や血液疾患のある人

・発熱している人・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人・神経障害のある人

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の人は

・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

● 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合・頭部・口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた(眼窩)

・のど・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をしている部位

・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位 ※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位

● 同じ箇所にあて続けない。必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。

やけど・低温やけどの原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

● オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。



禁
止

● 過剰な連続使用をしない。（業務用としての使用など）

事故・故障・けがの原因となります。

● 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。

お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。

● 引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。

爆発・火災のおそれがあります。

● 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ
禁
止

● 機器（本体等）に水をかけたり、水につけたりしない。水のかかるところや湿気の多いところで使用しない。

火災・感電・故障のおそれがあります。



用途以外
禁
止

● 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。

● 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

事故・けがの原因となります。

● 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。

事故・けがの原因となります。

● 本体/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

● 不安定な場所に置かない。また、機器（本体・付属品等）を落としたり、ぶつけたりしない。

本体の故障原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。



落下禁止

● 本体に重い物を置いたり、使用中に落させたりなど、強い衝撃を与えない。

けが・故障の原因となります。

● 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因となります。



- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。また、熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

- 電子レンジや高圧容器に入れない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 機器に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。



- 地震や雷を感じたら電源をオフにする。充電中の場合はACアダプターを抜く。
火災・感電のおそれがあります。

- 次のような場所で機器を使用・保管しない。

火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。

・浴室などの湿気の多い場所・ほこりの多い場所・直射日光のあたる場所・水などのかかる場所・傾斜・振動・衝撃のある場所・屋外・強い電波や磁気の発生する場所
・子供の手の届く場所・油煙、湯気の当たる場所・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにし、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。

- 通電したまま放置しない。

火災・事故のおそれがあります。



⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 使用前に電極ヘッドの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。
- 6分以上連続でケアしない。
肌トラブルの原因となります。
- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用すると肌を傷める可能性があります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 電源をオンにした状態で、電極ヘッドに化粧品を塗布したまま放置しない。
化粧品、本体の発熱の原因となります。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 電極ヘッドを金属にあてない。
故障・けがの原因となります。



禁
止

- ペットには使用しない。

けがの原因となります。

- 衣類の上から使用しない。



禁
止

- 屋外で使用しない。

本体が故障する原因となります。



屋外禁止

- 顔に使用するときは、必ずメイクを落として使用する。

メイクの上から使用すると、ファンデーションによりお肌が黒く汚れることがあります。

- 以下の項目は必ず守る。

事故やけが、本体が故障する原因となります。

・お肌の状態にあわせて使用する。

・日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。

・使用後は必ず電源をオフにする。

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

事故やけがをする原因となります。



必ず守る

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。

事故・故障のおそれがあります。

- 使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。

事故・けがの原因となります。また、アクセサリー類を巻き込むおそれがあります。

- 電極ヘッドとお肌の間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充する。

化粧品・水などがないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。

- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または付属の化粧品でお肌を湿らせてから使用する。

そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。

- 再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあける。

過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。

- 使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した汚れや化粧品などを取り除く。
故障や、肌トラブルの原因となります。

- 機器をお手入れする時は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜き、取扱説明書の指示にしたがう。

事故・故障のおそれがあります。

- 歯の治療中の人は、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。またはEMSをオフにする。

EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

⚠ 警告（電源に関して）

- 本製品には専用のACアダプターおよびUSBケーブルを使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- ACアダプターおよびUSBケーブルを破損、加工する、束ねるなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



- 収納時にUSBケーブルを本体またはACアダプターに巻き付けない。

USBケーブルに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因となります。

- ACアダプターおよびUSBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- ACアダプターや充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 本体やコンセントからACアダプターおよびUSBケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 使用しないときはACアダプターおよびUSBケーブルをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



- 万一、異常が発生したら、ACアダプターおよびUSBケーブルをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

警告 (電源に関して)

- 充電端子とUSBケーブルに水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。
- ACアダプターおよびUSBケーブルを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
ACアダプターおよびUSBケーブルは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。




発火注意

- 付属のアダプタープラグ以外の形状を使用する場合は、プラグ変換アダプター(付属品ではありません)をご使用ください。
- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


各部のなまえとはたらき

本体

●正面

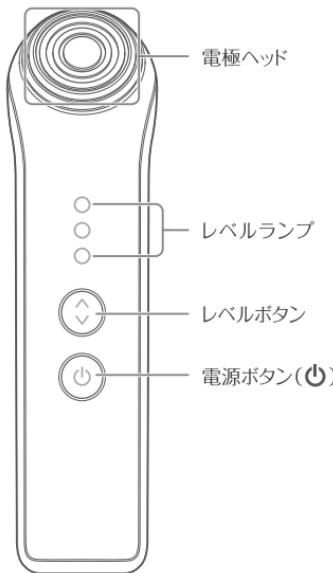

●背面

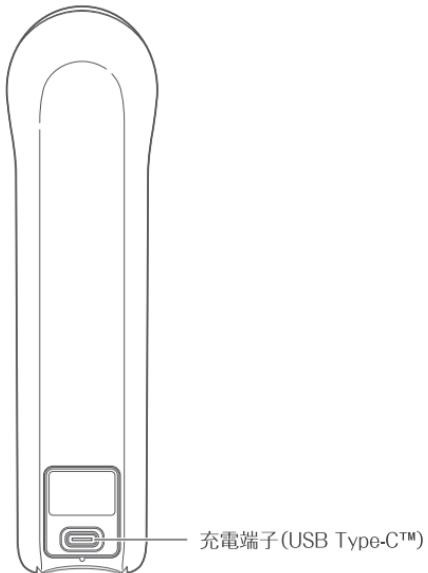

付属品

●ACアダプター

●USBケーブル(USB Type-C™)

●化粧品

●取扱説明書（保証書付）

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

・USB Type-C™およびUSB-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

はたらき

安全機能

● 温度センサー

お肌や電極ヘッドの温度が高くなってくると、安全のため出力を低くします。

また、高温になり過ぎると、安全のため電源がオフになります(電極ヘッドの点滅5回とブザー音5回でお知らせ)。

その場合は、約30分間本体を休ませてください。

● 電流センサー

出力される電流値を測定し出力を制御します。

オートオフ機能

ケア時間が約6分が経過すると、自動的に電源がオフになります(ブザー音:「ピッピッ」)。

タイマー・スタンバイ機能

使用時間の目安は顔全体で約6分です。3分経過するとブザー音「ピー」でお知らせし、RFやEMSの出力が一時停止します。(スタンバイ状態)

電源ボタン()・レベルランプが点滅しますので、ケアの準備が整いましたら、電源ボタン()を押して再開してください。

スタンバイ状態のまま約5分間操作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。(オートオフ)

ケアの準備が整いましたら、電源ボタン()を押して再開してください。


充電目安表示

電源をオンしたときに、点灯する電源ボタン()の色(白、赤の2色)で充電池の残量をお知らせします。赤が点灯したら、充電してからご使用ください。
バッテリーの状態や使用環境によって残量表示は前後します。

お使いになる前に

充電する

家庭用コンセントを使用する

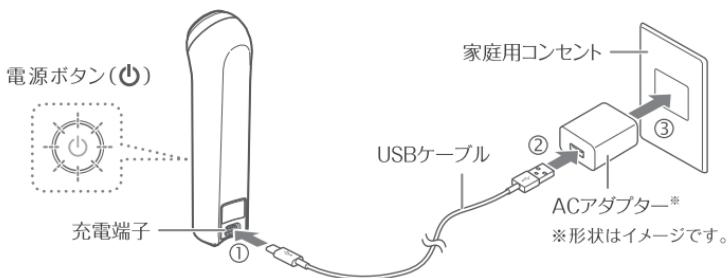

電源ボタン(○)で、
充電残量を確認することができます。

充電残量表示	
白	十分に充電されています。
赤点灯	充電が少なくなってきました。
赤点滅	充電してください。

- ・充電中は電源ボタン(○)が点滅します。
- ・充電が完了すると、電源ボタン(○)が約5秒間点灯後に消灯します。ACアダプターおよびUSBケーブルを外してください。
- ・室温約25°Cの場合、約3時間で満充電となり、約40分間動作可能です。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

※約10秒経っても充電を開始しない場合は、USBケーブルの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

ご注意

- ・本体と充電端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、故障の原因となります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してからご使用ください。
- ・USBケーブルとACアダプターは付属のものをご使用ください。
- ・定格電源がDC5V2.0A以下のアダプターで充電した場合、エラーになることがあります。(ブザー音:7回でお知らせ)
※市販品では正常に充電できない場合があります。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になる際は、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

⚠ 注意

- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

1 腕の内側を石鹼で
洗い、タオルなどで
拭き取る



2 電極ヘッドの中央に付属
の化粧品(パール1粒程
度)をのせ、電源をオンに
して約3分間動かしながら
使用する(P.13)

必ずレベル1でテストを行ってください。



3 お肌に残った化粧品を
なじませ、異常がないこ
とを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほて
りを感じなければ、本製品をご使
用ください。

図のように本体を持ち、電極ヘッド
全体をお肌にあててゆっくり動か
してください。

・必ず電極ヘッド全体をお肌にあ
て、動かしながら使用してくだ
さい。


使いかた

基本的な使いかた

必ずメイクを落とし、洗顔してからご使用ください。

1 電源をオンにする

電源ボタン(○)、レベルボタン、レベル1ランプ、電極ヘッドが点灯し、トリプルブーストRF(RF)、Dynamic Multiple Currents(EMS)、赤色LEDが出力されます。

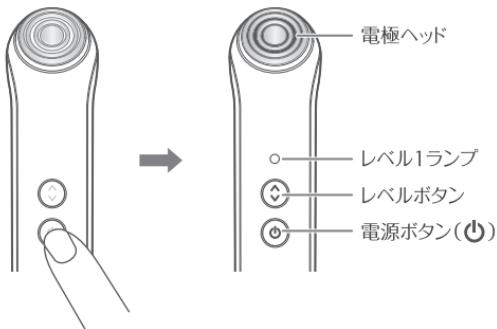


約1秒長押し

…パーソナル記憶機能 ……

終了時のレベルとEMSオン/オフを記憶して、次回電源オン時に同じ設定となります。

2 レベルを選ぶ

レベルボタンを押すたびにレベルが切り換わります。レベルランプの点灯でレベルの確認ができます。

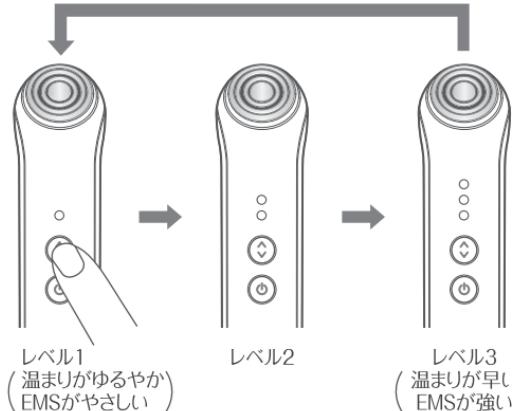

… Dynamic Multiple Currents(EMS)のオン/オフ切り換え …

レベルボタンを長押しするとEMSのオン/オフを切りえられます。(レベルボタン点灯:EMSオン、消灯:EMSオフ)



初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず
レベル1で使用してください。

3

付属の化粧品を電極ヘッド中央にのせ、電極ヘッドをお肌にあてて動かす

お手入れは、6つの部位に分けて行います(P.15~16)。
1つの部位につき化粧品をパール1粒程度のせてください。



4

終わったら、お肌を整える

お手入れが終わったら、お肌に残った化粧品をなじませ、日頃お使いの基礎化粧品でお肌を整えてください。

ご注意

動かしかたは、「動かしかた」(P.15~16)をご参照ください。


- 付属の化粧品を手で塗布しないでください。本体の汚れや落下の原因になります。
- 使用中にすべりが悪いと感じたら、付属の化粧品をつけ足してください。
- 電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
- 熱く感じる場合は少し速めに動かすか、レベルを下げてください。

- のどぼとけ、まぶた、目のまわりには使用しないでください。
- 電源をオンにした状態で、電極ヘッドに化粧品を塗布したまま放置しないでください。



動かしかた


下図の通り、①～⑧の順に矢印の方向へ動かしてください。1つの矢印に対し3回ずつ繰り返してください。

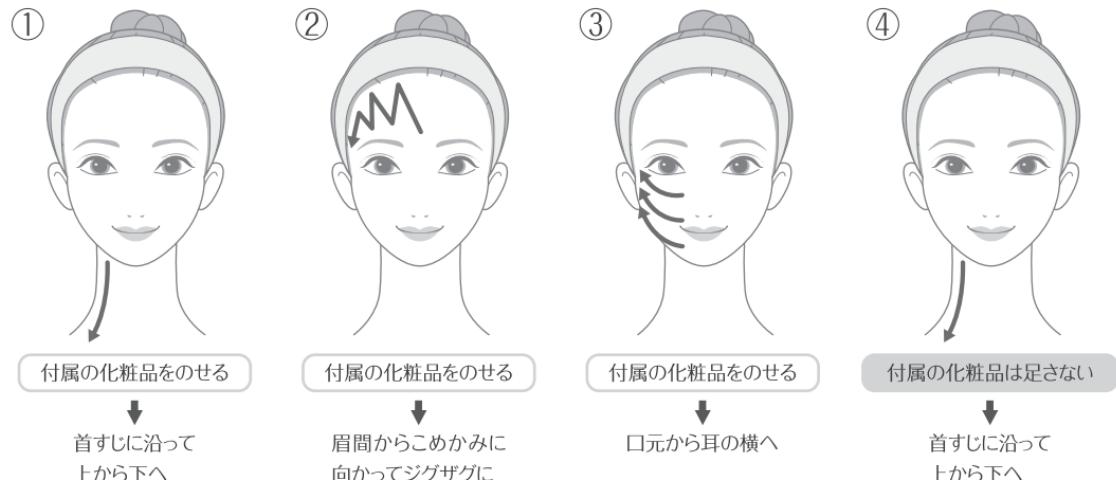

左半分 約3分

- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に4cm
- 使用時間の目安：1回約6分（顔全体）
- 3分経過するとブザーが「ビー」と鳴り出力が一時停止しますので、目安にしてください。
再開するには電源ボタン(▶)を押してください。
- 中途で停止するときは、電源ボタン(▶)を1秒以上押して電源をオフにしてください。



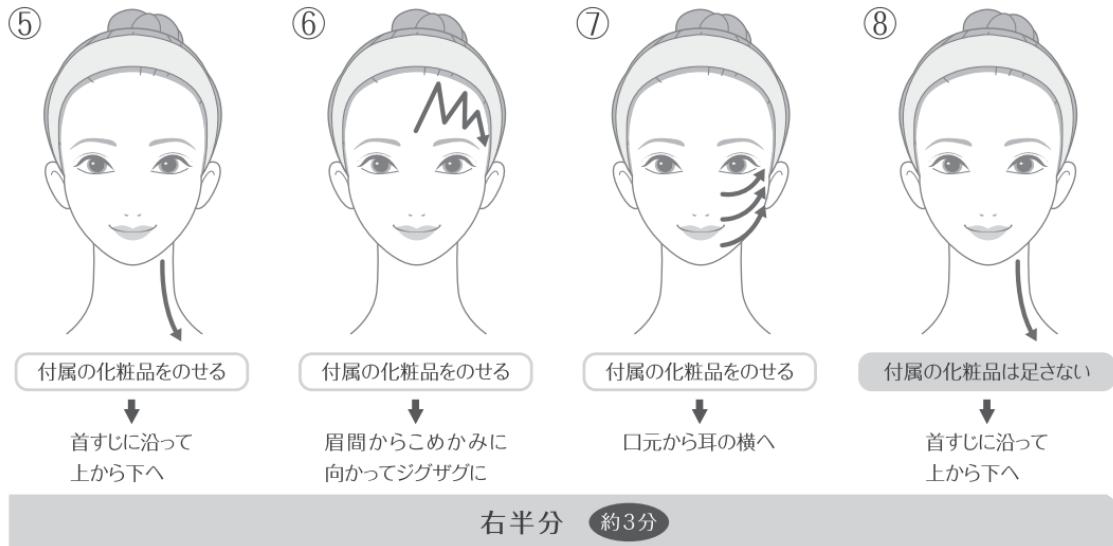

⚠ 注意

- 6分以上連続でケアしない。
肌トラブルの原因となります。




ケア時間が約6分経過すると、自動的に電源がオフになります。

ケアのポイント

気になる箇所には、下図のように使うと効果的です。

口もと


下図の通り、矢印の方向へ3回動かしてください。

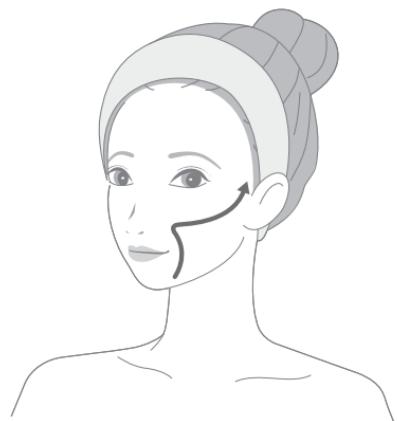

ほうれい線に沿って下から上→こめかみへ(3回)

あご～フェイスライン

下図の通り、①～③の順に3回ずつ矢印の方向へ動かしてください。

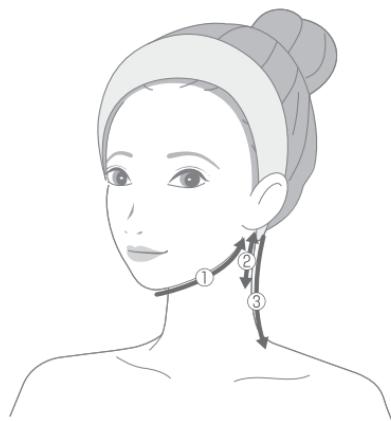

- ①あご先から耳の下へ(3回)
- ②耳の下を往復(3回)
- ③首筋に沿って上から下へ(3回)

使い終わったら

お手入れのしかた


使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、
本体からUSBケーブルを抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。

- 水洗いはしない。
本製品は防水製品ではありません。故障の原因となります。

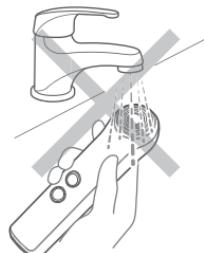

1

固く絞った柔らかい布等で 汚れを拭き取る

- ・汚れ等が落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いてください。
- ・ヘッド電極の間に残った化粧品は、綿棒やコットンを使用して取り除いてください。

ご注意

- 付属の化粧品が付着した状態で放置しないでください。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。



保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体とコンセントからACアダプターとUSBケーブルを抜いて保管してください。
- 高温多湿の場所(火のそばや炎天下、浴室など)に放置しないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.20)を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ 電源ボタン(▶)を約1秒長押ししてください。
	→ 電池残量がありません。充電してください(P.11)。
電源が切れる	→ スタンバイ状態/オートオフになっています(P.10)。 電源ボタン(▶)を押して、スタートさせてください(スタンバイ機能) スタンバイ機能のまま5分が経過すると、自動で電源が切れます(オートオフ)。
	→ ケア時間が約6分で自動的に電源がオフになります。
充電しても数分しか使えない	→ 電池残量が少なくなっています。充電してください(P.11)。
	→ 電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)にご連絡ください。
充電が開始されない	→ 付属のUSBケーブルを本体に差し込んでください(P.11)。ゆるんでいないか確認してください。
	→ 付属のACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.11)。
ラジオ波(RF)が熱い	→ 定格電源がDC5V2.0A以下のアダプターで充電した場合、エラーになることがあります。 ブザー音:7回でお知らせします(P.11)。
	→ 同じ部位に長い時間あてています。必ず動かしながらあててください。
	→ 少し速く動かしてください。
	→ レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。

こんな症状

考えられる原因と処置方法

ラジオ波(RF)の熱さを感じない

- お肌が乾燥しています。付属の化粧品を塗って、お肌を湿らせてください。
- レベルを上げてください。
- 開始から約3分経過すると、RFやEMS機能を一時停止します(タイマー・スタンバイ機能)。
電源ボタン()を押すと再開します。

ピリピリする・痛い

- レベルを下げてください。初めて使うときは必ずレベル1で使用してください。
- ヘッド全体がお肌にあたるように使用してください。
- レベルを上げてください。

EMSが弱い・感じない

- お肌が乾燥しています。付属の化粧品を塗って、お肌を湿らせてください。
- 筋肉のつきかたによって感じにくい場所があります。
- EMS出力がオフになっています。レベルボタンを長押ししてください(P.13)。
- 開始から約3分経過すると、RFやEMS機能を一時停止します(タイマー・スタンバイ機能)。
電源ボタン()を押すと再開します。

電源ボタンの色が赤になる

- 充電残量を表示しています(P.10)。

レベルが1から始まらない

- パーソナル記憶機能です(P.13)。

よくあるご質問

Q 使用頻度、使用時間の目安はありますか？

A 週に5日(1日1回6分まで)を目安にご使用ください。
※お肌の状態を見ながらご使用ください。
※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときは使用を中止してください。

Q 連続で使用することはできますか？

A 本製品は1日1回、6分間のご使用をおすすめしています。

Q 化粧品は1回どれくらい使用すればよいですか？

A 付属の化粧品は顔全体でパール粒6個程度使用してください。
水溶性の化粧品でしたら、お手持ちの化粧品のご使用も可能です。
その場合も、この量を参考にご使用ください。ゲル状の化粧品がおすすめです。
化粧品が少ないと感じたら付け足してください。

Q お風呂場で使用できますか？

A 本製品は防水製品ではありません。お風呂場では使用しないでください。

Q 使用後にお肌がほてります

A ラジオ波(RF)の温めによるものです。

Q 電極ヘッドが温まりません

A ラジオ波(RF)は電極ヘッドを温めるのではなく、電気の力でお肌を温めるものです。

Q レベルによって効果に違いはありますか？

A レベルを上げると、強く、早く温まります。また、EMSを強く感じます。
※初めて使用する場合や、使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。

製品仕様

定 格 電 源	DC5V 2.0A
消 費 電 力	約9W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約40分(満充電の状態から) ※使用環境やレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	約W46×D47×H173(mm)
製 品 質 量	約175g
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート 電極ヘッド:ステンレス
製 造 国	日本
付 属 品	ACアダプター1個 USBケーブル(USB Type-C™)1本 化粧品1個 取扱説明書(保証書付)
推奨環境温度	10°C~40°C

アフターサービス

おすすめ化粧品について

●製品詳細・お買い求めはヤーマンコールセンター(下記)にお問い合わせください。

※予告なく販売を終了する場合があります。

フローレスセラム ハイドレイティング



内 容 量：80g/200g

品 番：CS21004/CS21005

価 格：¥3,300/¥4,950(税込)

日本国内からのお問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

日本国外からのお問合せ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.24)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



廃棄充電池の取出方法

この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- 電池を取る前には必ず電源をOFFにし、充電アダプターを抜いてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、お怪我が無いように十分に注意しながら取り出してください。
- 電池を取り出す際は固いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- 外した電池は該当回収部門に渡し、処理をお願い致します。
- 外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)にしたがって、処理をお願い致します。

操作STEP

下図①～⑤を参照し、電池を取り出してください。

①先の細いものなどを使って、
キャップカバーを取り外し、
2ヶ所のネジを外します。




②フロントケースを
下側から外します。





③ケーブルを外します。



④バッテリーホルダー
の3カ所のネジを
外します。

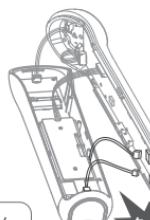

⑤バッテリーホルダーを
取り外し、バッテリーを
取り外します。

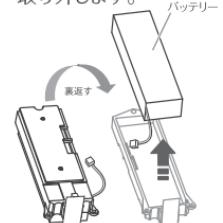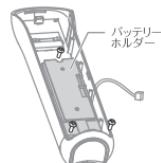

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.24）にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輪・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	S12PLUS
形名	ブルーム WR スター		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ お買い上げ日から 1年間		
店名・住所・電話 ※販売者名	<p>見 ご購入日の明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p> <p>本</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだつたりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。