

No.

## 保証書

持込修理

品名	家庭用光美容器		型番	STA-189
形名	レイボーテ スピーディスムース			
無料修理保証	対象部分	期間		
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間		
店名・住所・電話				
※販売者名	見本 ご購入日(年月日)明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください			

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
 また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
 これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045  
東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

※9:00～17:00(土・日・祝日除く)



[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

STA189-2-001X

美容家電のパイオニア

YA-MAN


保管用  
保証書付

# 取扱説明書

家庭用光美容器  
レイボーテ スピーディスムース

 Rei Beauté

STA-189

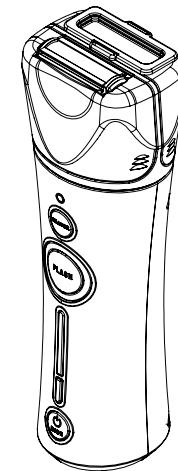

## もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	7
各部のなまえ	8
ご使用の前に	9
トリートメントをしましょう	12
使いかた	13
使い終わったら	18
こんなときには	20
アフターサービス	24
●製品仕様	24
●保証について	26
保証書	27

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●正しく使用されなかった場合、やけどをする恐れがございます。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害<sup>※</sup>の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について(次は図記号の例です。)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



# 警告

次のような人は使用しない。  
事故やトラブルの原因になります。

- 医師の治療を受けている人 ●成長過程の人 ●急性疾患
- 結核性疾患 ●発熱している人 ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体质 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病
- アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌の弱い人 ●疲労が激しい人
- 皮膚トラブルがある人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
- 眠気をさそう薬を服用中の人は ●妊娠中、生理中、授乳中
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人 ●てんかん
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人



### 禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。  
事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷 ●整形手術をした部位 ●口内や陰部、粘膜など
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位 ●にきび
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ●カユミやほてりのある部位
- 膨らんだホクロ ●ウイルス性のイボ ●しみ、ホクロ ●大静脈
- のどぼとけ ●乳首、乳輪 ●へそ内部 ●頭部 ●顔 ●頭髪
- 外陰部、肛門、その周囲 ●刺青、タトゥー、ボディペイント

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



# 警告



### 禁止

子供の近くで使用しない。

フラッシュは強い光のため、目を傷める危険があります。



### 禁止

通気口をふさいだまま使用しない。

発煙・発火の原因となります。

フラッシュ使用直後にフィルターに触れない。

使用直後のフィルターは高温になるため、指でフィルターに触れると、やけどの原因となります。

### 禁止

目には直接照射しない。

目を傷める原因となります。

### 禁止



## 警告

**過剰な連続使用はしない。**  
(業務用としての使用など)  
10分使用した場合は10分以上休ませる。  
ケガ・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。

**電源をオンにしてもファンが動作しない('ブーン'と音がしない)場合は使用しない。**  
そのまま使用すると発煙・発火・故障・ケガの原因となります。お近くの販売店または代理店(P.24)にご連絡ください。

**ACアダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。**  
また、重いものを乗せたり、挿み込んだりすると、アダプターケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

**異臭・異常発熱したときは使用しない。**  
そのまま使用すると破損・発火の原因となります。

**本体に重い物を置いたり、使用中に落させたりなど、強い衝撃を与えない。**  
ケガ・故障・ガラス管の割れ等の原因となります。

**引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。**  
火災・感電・ケガの原因となります。

**照射部を直視しない。また、周りの人を見ないようにする。**  
目を傷める原因となります。


**暗い部屋で使用しない。**  
目を傷める原因となります。また、製品が正常に動作しない場合があります。

**シェーバーを使用中は、刃を持たない。**  
ケガの原因となります。

**ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**  
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

**コード引っ張り移動禁止**  
ACアダプターを引っ張って製品を移動したり、持ち上げたりしない。  
感電・ショート・発火・断線の原因となります。

**用途以外禁止**  
取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。

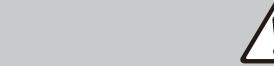

## 警告

**水かけ禁止**  
本体やACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。浴室や洗面台、湿気の多い所で使用したり、保管しない。

**必ず守る**  
必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ) ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

**火災・感電・故障の原因となります。**

**※海外からの修理保証への依頼には日本国内で発送、受取が可能な連絡先、住所が必要となります。**

**必ず守る**  
必ず専用のACアダプターを使用する。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

**必ず守る**  
照射口、肌センサー、明るさセンサーが汚れていないか定期的に確認・掃除する。

**やけどや故障の原因となります。**

**万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。**  
動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。また、製品が正常に動作しない場合があります。

**使用者の制限**  
子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。  
未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。ケガをする原因となります。

**タコ足配線をしない。**  
発熱・発火・破損の原因となります。

**分解や修理・改造はしない。**  
火災・感電・ケガの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

**プラグを抜く**  
ACアダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。  
感電・ショート・発火の原因となります。

**発火注意**  
火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入したり、熱器具に近づけない。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

**プラグを抜く**  
使用しないとき・お掃除するときはACアダプターを壁面コンセントから抜く。  
感電・ショート・発火の原因となります。



## 注意



**使用前に照射口、肌センター、シェーバーの割れ、変形、変色、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。**

肌や指の傷、やけどなどのトラブルや、症状悪化の原因となります。



**同じ部分に1日2回以上フラッシュを照射しない。**

- 過度な照射をしても効果は変わりません。トリートメントの頻度(P.12)をお守りください。
- 1回の使用中に、照射部分が多少重複しても問題ありません。



**ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しない。**赤みが完全に引くまで使用をお控えください。



**屋外で使用しない。**本体が故障する原因となります。また、正常に動作しない場合があります。



**衣服や頭髪・物に照射しない。**焦げたり、変色・破損の原因となります。



**トリートメント直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品を使用しない。**(保湿のためのクリーム・ローション・日焼け止めは除く)  
肌トラブルの原因となります。



**本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。**本体の表面に損傷を与える原因となります。



**ペットには使用しない。**ケガの原因になります。



**肌に発疹・炎症・かゆみ等の異常を起こしている場合や、使用中、使用後に肌に異常がみられるときは使用しない。**



**本製品のシェーバーを使用する際は、ジェルや化粧品、水は併用しない。**故障・破損の原因となります。



**肌に発疹・炎症・かゆみ等の異常を起こしている場合は、トリートメントした日の入浴(シャワーは可)、運動、飲酒を控える。**



**肌に毛くずが残っている場合は、取り除く。**

フラッシュ照射時に熱く感じることがあります。



**毛が1mm以上の場合は、ムダ毛を処理してからフラッシュトリートメントをする。**

長いムダ毛を処理せずにフラッシュを照射すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。毛が短い場合は、シェーバーと一緒にフラッシュ照射できます。



**使用後は毎回、「使い終わったら」(P.18)を参照して、製品に付着した毛くず・化粧品などを取り除く。**

焦げ、故障、肌トラブルの原因となります。



**使用環境温度を守る。**

使用できる環境温度は5~35°Cです。使用する場所の室温を確認してください。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。故障・破損の原因となります。



**ご自身の肌にあったレベルで使用する。「フラッシュレベルの設定」(P.12)参照**

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。



## 注意

**フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。**

24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。また、トリートメントをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。



**使用後、肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなど十分に冷やす。**

トリートメント後は個人の体质や使いかたにより、肌が熱をもつことがあります。ほてりなどが気になった場合は、保冷剤やぬらしたタオル等で冷やしてください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。



**ランプカートリッジに黒い汚れや、化粧品・毛くずなどが付着していないか確認してから使用する。**

ランプカートリッジの焦げ、製品故障の原因となります。



**普段から保湿などして、肌が乾燥しないようにケアする。**

肌が乾燥していると、製品が正常に動作しない、効果が正しくあらわれない場合があります。

## 警 告



必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)

火災・感電の原因となります。

必ず守る

※海外からの修理保証への依頼には日本国内で発送、受取が可能な連絡先、住所が必要となります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。


発熱・発火・故障の原因となります。

発火注意


●地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。

●プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

## ●本体

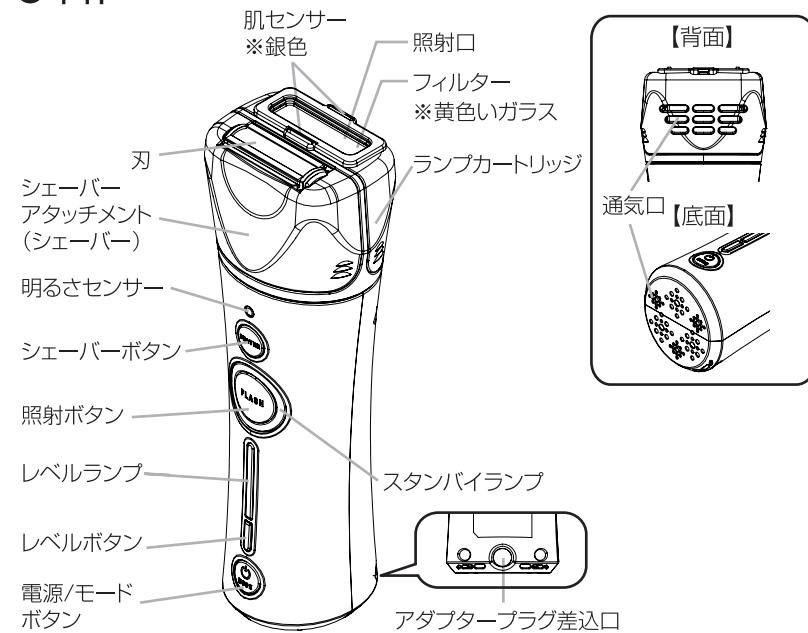

【背面】

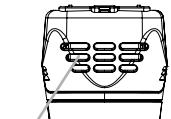


通気口【底面】



## ●付属品

・ ACアダプター

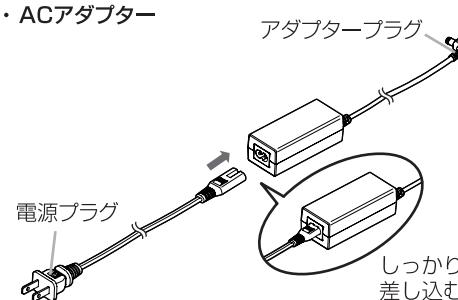


・ お掃除ブラシ

・ ビキニエリア用  
アタッチメント

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

# ご使用の前に

## ●操作表示部

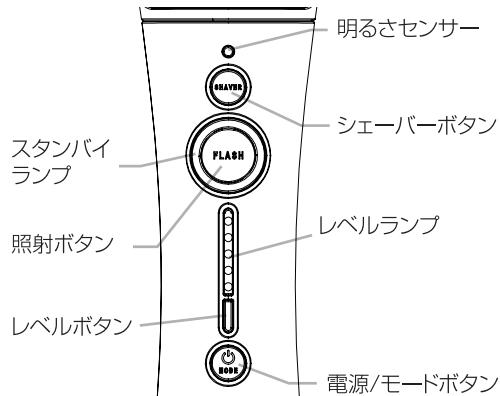

### ●電源/モードボタン


電源オン:長押し(約3秒)します。<レベルランプ1:青点灯>  
電源オフ:長押し(約3秒)します。<ランプ:全消灯>  
※本体冷却のため、電源がオフになんでも約60秒間ファンが作動します。  
ファンが止まるまでACアダプターは抜かないでください。

ボタンを押すと、フラッシュの照射モードが切り替わります。

### ●レベルボタン

フラッシュレベルの切り替えができます。

レベルは5段階あり、レベルランプの青点灯で表示します。

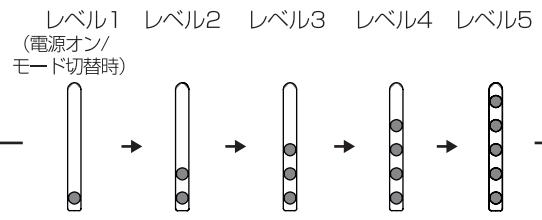

※レベルを高くするほどフラッシュが熱く感じられます。  
使い始めは必ずレベル1からご使用ください。

### ●照射ボタン

スタンバイランプが点灯した状態で押すと、フラッシュ照射できます。

※スピード連射モード連射中は肌センサーに触れるだけでフラッシュが照射されます。

### ●スタンバイランプ

消灯:準備中

点滅:照射待機中 (青色／単発モード 赤色／スピード連射モード)

点灯:単発モード／照射準備完了

スピード連射モード／照射準備完了またはフラッシュ連射中

※照射準備完了とは、照射ボタンを押す、または肌にあてるフラッシュが照射できる(連射中)状態です。

### ●シェーバーボタン

[シェーバーアタッチメント装着時]

シェーバーオン／オフ:長押し(約3秒)します。

### ●明るさセンサー

本製品は暗い部屋で使用できないように、明るさを検知するセンサーがついています。暗い部屋では電源をオンにする際に、以下のような症状とともに電源がオフすることがあります。

症状	考えられる原因	対処方法
	暗い部屋で使用している	明るい部屋で使用する
電源オン時にブザー音が鳴り電源が入らない	明るさセンサーが影でおおわれている	明るさセンサーをおおわないようにする
	明るさセンサーが床向きで電源を入れている	天井向きにして電源を入れてください

## トリートメントの準備

製品本来の効果を得るために、トリートメントの前は必ず行いましょう。

※トリートメントする部分の毛が1mm以上のときは前もってシェーバーで処理をしてください。(毛が短い場合はフラッシュトリートメントと同時に処理できます。)

### 1 シェーバーでトリートメントする部分のムダ毛を処理する。

※肌表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。

肌表面から毛くずを取り除いてください。

※トリートメント前に毛抜き、ワックス等を使用した脱毛は行わないでください。

### 2 照射口、フィルター、肌センサーにほこりや毛くずなどの汚れ、破損などの異常がないことを確認する。

・汚れている場合は必ずお掃除をしてください。

製品の故障や劣化、やけどやケガ、肌トラブルの原因となります。

お掃除の方法については、「お掃除のしかた」(P.18)を参照してください。

# トリートメントをしましょう

初めてお使いになる場合は、P.11の照射テストを必ず行ってください。

## トリートメントの頻度

最初の2ヶ月

2週間に1度

3ヶ月目以降

4~8週間に1度

※フラッシュ照射後に、お肌の赤みが気になる場合またはお肌が熱を持っている場合は、照射した部分を冷やしてください。

※1日2回以上、同じ部分にフラッシュを照射しないでください。

※効果の感じかたは使用する部位や個人によって異なります。

※効果が感じられない場合は、初期のトリートメントの頻度を継続してください。

※この製品は永久脱毛をするためのものではありません。

定期的なトリートメントをおすすめします。



過度な使用はしない。

上記頻度を超えて使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら使用してください。1日2回以上、同じ部分にフラッシュを照射しないでください。肌トラブルの原因となります。

## 単発/スピード連射モードについて

電源/モードボタンで単発モードとスピード連射モードが切り替わります。

**単発モード** 適切な部位:ワキなど凹凸のある部位

照射口をお肌にあて、照射ボタンを押すたびにフラッシュが照射されます。

**スピード連射モード** 適切な部位:ウデ、アシなど広範囲な部位

照射口をお肌にあて、照射ボタンを押すと連続してフラッシュが照射されます。

※1回照射したら、肌センサーをお肌にあてながら移動させてください。本体の照射準備が完了するとフラッシュが照射されます。連続最大5回まで照射が可能です。

※長時間(約3秒)お肌から離すと、ブザーが2回鳴り、連射回数がリセットされます。

## フラッシュレベルの設定

温かさや少し熱さを感じるレベルに設定してご使用ください。痛みを感じるようなレベルでは使用しないでください。

使用部位によってレベルを調整してください。


レベルが高いほど照射準備完了までの時間が長くなります。

## シェーバーの使いかた

※シェーバーを使う前にジェルや化粧品をぬらないでください。  
故障の原因となります。

1 電源がオンの状態でシェーバーボタンを長押し(約3秒)する。

2 刃をお肌に平行にあて、ゆっくり動かしながらトリートメントしたい部分のムダ毛を処理する。

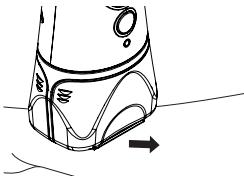

図のようにお肌に平行に刃をあて、毛の流れに逆らうように軽くすべらせます。シェーバーの刃をお肌に強く押しかてるとお肌を傷めるおそれがあります。

※ワキなど刃のあてにくい部位は手でお肌を伸ばしながらあててください。

3 シェーバーボタンを長押し(約3秒)しシェーバーをオフにする。

4 刃や照射口に付いた毛くずをお掃除ブラシなどで取り除く。

※ムダ毛を処理した直後は必ず行ってください。

毛くずが残っていると、やけど・発火・故障の原因となります。

毛が短い場合はフラッシュトリートメントと同時に処理できます。

## 肌への照射テスト

製品を初めてご使用になる際は必ず行ってください。

1 電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。

2 トリートメントしたい部位付近の目立たない箇所にレベル1(単発モード)から照射する。

照射方法については、「フラッシュ照射のしかた」(P.13)を参照してください。

3 保冷剤やぬらしたタオル等で照射した部位を冷やす。

4 照射テスト後、24時間経ってからお肌を確認する。

お肌に異常(赤みや水泡・ただれ等)がみられなければ製品の使用が可能です。

# 使いかた

※毛が1mm未満のときはシェーバーと一緒にフラッシュトリートメントできます。

## フラッシュ照射のしかた

### 1 ACアダプターを本体のアダプタープラグ差入口と背面コンセントに差し込む。

- ・アダプタープラグは図の点部分が見えなくなるまで差し込んでください。

※使用前は必ず奥まで差し込まれていることを確認してください。



### 2 ランプカートリッジがしっかりと奥まで差し込まれていることを確認する。

ランプカートリッジと本体がしっかりと接するまで、差し込んでください。


### 3 電源/モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。

- ・スタンバイランプが青点滅、レベルランプが青点滅します。

※部屋が暗いと明るさセンサーが働き、電源が入りません。(P.10)  
明るい部屋でご使用ください。

### 4 電源/モードボタンを押し、単発/スピード連射モード(P.12)を選択する。

単発モード [スタンバイランプ青色]  
照射ボタンを押すたびにフラッシュ照射

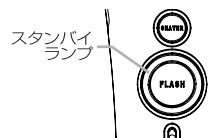

スピード連射モード [スタンバイランプ赤色]  
照射ボタンを1回押すと連続して5回フラッシュ照射



### 5 レベルボタンを押してレベルを選択する。

- ・フラッシュレベルは5段階あります。
- ・慣れるまでは必ずレベル1から使用してください。

### 6 肌センサーをお肌にしっかりとあて、照射ボタンを押す。

- ・スタンバイランプが点灯したら照射できます。  
スピード連射モード連射中は肌センサーがお肌にあたっていないと照射できません。  
※照射部を直視しないでください。  
※2個の肌センサーがお肌にふれるようにしてください。  
※肌センサーをあてにくい部分には、シェーバーアタッチメントをはずしても使用できます。

※お肌が乾燥していると肌センサーが反応しない場合があります。ぬらしたタオル等でお肌を湿らせるか入浴後にご使用ください。


### 7 図のように少しづつ位置を変えながらトリートメントを行う。

※スピード連射モード(P.12)で使用するときも、照射箇所を移動させながら使用してください。

※照射口の大きさが一度にトリートメントできる範囲です。

※本体が異常に熱くなっていると感じた場合はただちに使用を中止してください。

※ファンの音が変わることがあります。故障ではありません。ファンが止まっている場合はただちに使用を中止してください。

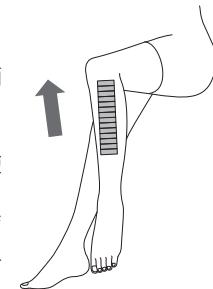


#### 【シェーバーと一緒にフラッシュ照射する場合】

※トリートメントする部分の毛が1mm以上のときは前もってシェーバーで処理をしてください。

### 1 シェーバーボタンを長押し(約3秒)してシェーバーをオンにする。

### 2 図のような向きでお肌の上をすべらせながら照射ボタンを押す。 お肌に強く押付けすぎないでください。

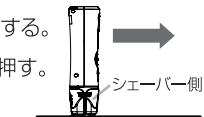

### 8 トリートメントを終了するときは、電源/モードボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

ランプがすべて消灯します。

※電源がオフになても約60秒間ファンが作動します。  
ファンが止まるまでACアダプターは抜かないでください。

### 9 化粧水・保湿ローションなどで照射したお肌を保湿する。

※お肌に赤みがある場合やお肌が熱をもっている場合は保冷剤やぬらしたタオル等で照射したお肌を冷やしてください。

### 10 使用後はACアダプターを抜き、照射口やアタッチメントをお掃除する。

・「お掃除のしかた」(P.18)に従って、必ず毎回お掃除してください。

- 安全機能  
肌センサーがお肌にあたるとフラッシュが照射できる、安全機能を備えています。
- 自動電源オフ  
電源をオンにしてから約10分経つと自動的に電源がオフになります(オートオフ)。  
再度使用するときは、10分以上あけてからご使用ください。  
連続使用すると故障の原因となります。

## 各部位のトリートメントのポイント

※慣れるまでは必ずレベル1から使用してください。

### ●ワキのトリートメント

トリートメント前にワキについている制汗剤、香水、クリームなどの化粧品類をきれいに拭き取ってください。  
鏡を見ながら使用するとお手入れ箇所が見やすくなり、トリートメントがしやすくなります。  
皮膚がたるみやすい部位は、指でお肌を伸ばしながら行いましょう。  
お肌が照射口に入り込むと、熱く感じる場合があります。

### ●ウデ/アシのトリートメント

骨の部分や凸凹した部分は、肌センサーをお肌にあてにくい場合があります。  
その場合は、シェーバーアタッチメントを取り外して使用すると、肌センサーがお肌にあてやすくなります。

- 同じ部位に1日2回以上フラッシュを照射しない。
- 暗い部屋で使用しない。  
目を傷める原因となります。
- 目には絶対に直接照射しない。  
目を傷める原因となります。
- 必要以上に肌に強く押し当てる。  
また、フラッシュ使用直後のフィルターに触れない。  
使用中、使用直後のフィルターは高温になるため、必要以上に肌を近づけたり、指でフィルターに触ると、やけどの原因となります。
- 次の部位には使用しない。  
事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
  - ◆切り傷 ◆整形手術をした部位 ◆口内や陰部、粘膜など
  - ◆過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位 ◆にきび
  - ◆皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
  - ◆カユミやはだりのある部位 ◆膨らんだホクロ ◆ウイルス性のイボ
  - ◆しみ、ホクロ ◆大静脈 ◆のどぼとけ ◆乳首、乳輪 ◆へそ内部
  - ◆頭部 ◆顔 ◆頭髪 ◆外陰部、肛門、その周囲
  - ◆刺青、タトゥー、ボディペイント



**警告**




**注意**

- ・日焼けをしている方は使用しないで下さい。
- ・フラッシュ照射中に照射口を直視しないで下さい。
- ・1日に2回以上同じ部分にフラッシュを照射しないでください。

## シェーバーアタッチメントの着脱方法


### ●取り外しかた

右図のようにシェーバーアタッチメントの左右を持ち、矢印の方向へスライドさせて取り外す。

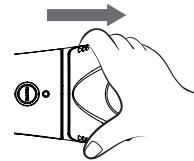

### ●取り付けかた

下図のようにシェーバーアタッチメントの溝と本体の装着部を合わせ、本体に押し付けるようにしながらシェーバーアタッチメントを根元までしっかりと差し込む。

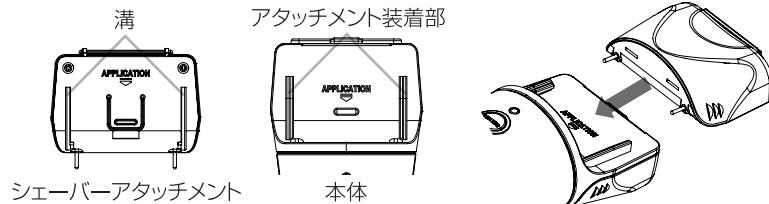


※アタッチメントは、無理に押し込まないで下さい。  
故障の原因になります。

## 刃の着脱方法と交換について

### ●取り外しかた


図1の矢印の部分にコインを入れ、刃を下から押し上げるように取り外します。

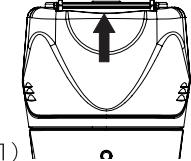

### ●取り付けかた

図2のように刃をもち、しっかりと奥まで差し込みます。

(図1)

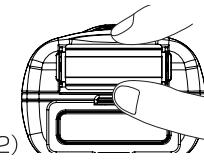

※使用後のお肌にヒリヒリ感が残ったり、切れ味が悪くなってしまった場合は交換してください。

肌を傷つける原因となります。

※刃の欠け・サビ等がみられた場合は、必ず交換してください。

(図2)

※刃のお掃除(P.18)をしていつも清潔に保ってください。


## ランプカートリッジの着脱方法と交換について

※ランプカートリッジ交換時以外は着脱しないでください。

### ●取り外しかた


ランプカートリッジの左右を持ち、矢印方向へスライドさせて取り外す。

※着脱する際には必ずACアダプターを壁面コンセントから抜いた状態で行ってください。

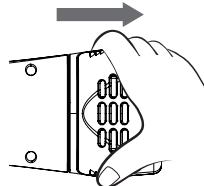

### ●取り付けかた

下図のようにランプカートリッジの溝と本体の装着部を合わせ、本体に押し付けるようにしながらランプカートリッジを根元までしっかりと差し込む。

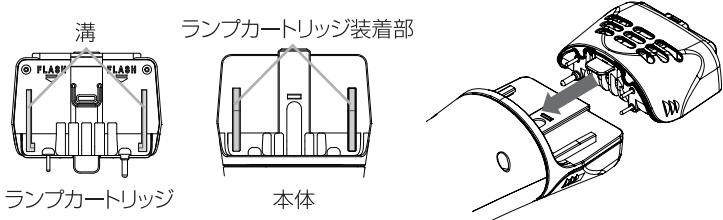

※ランプカートリッジは、無理に押し込まないでください。  
故障の原因になります。

### ●ランプカートリッジの寿命

電源を入れてからスタンバイランプが青赤交互に点滅する場合は、フラッシュランプの寿命です。

ランプカートリッジが寿命を迎えたら必ず新しいランプカートリッジと交換してください。

※ランプカートリッジを取り外した状態で装着部に触れないでください。

※寿命を過ぎたランプカートリッジは絶対に使用しないでください。

ガラス管が破損し、ケガをする原因となります。ガラス管が破損した場合は破片が散らばらないように必ず新聞紙などの紙の上でランプカートリッジを外してください。

替刃や交換用ランプカートリッジのご購入に関しましては、代理店（P.24）にお問い合わせください。

## お掃除のしかた

照射口、肌センサー部は、使用後に毎回必ずお掃除をしてください。

その他の部分についても故障・動作不良を防ぐために、定期的にお掃除をしてください。  
お掃除する際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。

### ●照射口・肌センサー・アタッチメント部のお掃除

1 お掃除ブラシや水で湿らせて固くしぼった布で、照射口、肌センサーの毛くずや汚れを拭き取る。

※照射口内側に入り込んだ汚れは、綿棒などを使用してやさしく取り除いてください。

※照射口とアタッチメントが接する部分の汚れも拭き取ってください。

2 お手持ちのやわらかい布や綿棒で、フィルター（黄色いガラス）に付いた汚れを取り除く。

※指紋などの汚れも拭き取り、きれいに保ってください。

フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。


### ●刃のお掃除

お掃除ブラシで毛くずを取り除く。

※刃とシェーバーアタッチメントの間に入り込んだ毛くずは、刃を取り外してお掃除してください。

刃とシェーバーアタッチメントの接続部に付いている潤滑油は拭き取らないようにしてください。

※水洗いしないでください。

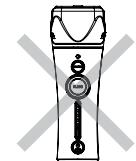

水洗い禁止

### ●本体のお掃除

水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る。

・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

・本体は防水構造ではありません。水洗いはしないでください。



使用禁止

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。



警告

- お掃除するときはACアダプターを壁面コンセントから抜く。  
感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体内部に水が入らないようにお掃除する。  
感電・ショート・発火の原因となります。



注意

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しない。
- 化粧水やローションが付着した状態で放置しない。

## 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体やアタッチメントのお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.24)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

### こんな症状

### 考えられる原因

### 処置方法

電源が入らない

→ ACアダプターが本体および壁面コンセントに差し込まれていない

→ ACアダプターを本体および壁面コンセントに差し込んでください

電源が切れる

→ 電源をオンにしてから約10分経過し、オートオフ(自動電源オフ)になった

→ 再度使用するときは、10分以上あけてからご使用ください

フラッシュがない

→ ACアダプターが壁面以外のコンセントに差し込まれている

→ 壁面コンセントに差し込んでください

照射ボタンを押していない

→ 照射ボタンを押していない

→ 照射ボタンを押してください

ランプカートリッジがしっかりと装着されていない。

→ 照射準備が完了していない

→ 肌センサーをお肌にしっかりとあて、スタンバイランプが点灯していることを確認してください

ランプカートリッジをしっかりと装着してください(P.17)

## こんな症状

## 考えられる原因

## 処置方法

フラッシュがない

→ 肌センサーがお肌にしっかりと触れていない  
→ スタンバイランプが点灯するように2つのセンサーをお肌にあててください(P.13)

フラッシュが熱く、または痛く感じる

→ レベルが高い  
→ 同じ箇所に2回以上照射している  
→ お肌の表面にムダ毛が残っている  
→ 日焼けやほくろのある部位に使用した  
→ 使用禁止部位を確認してください(P.2)

フラッシュがまぶしい

→ 照射口全体が肌に触れていない  
→ 照射口全体が肌に触れるようしてください  
まぶしく感じたときはサングラス等を着用してください

シェーバーが作動しない

→ シェーバーアタッチメントが本体にしっかりと装着されていない  
→ シェーバーボタンを押していない  
→ 電源をオンにしてシェーバーボタンを長押し(約3秒)してください

シェーバーで処理できない

→ 刃がお肌に正しくあたっていない  
→ 刃が古くなり切れ味が悪くなった  
→ 刃を交換してください(P.16)

「ブーン」と音がする

→ ファンの動作音です  
異常・故障ではありません

## よくあるご質問

## Q

## A

フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが?

フラッシュは多少の熱さを感じますが、お肌には問題ありません。  
熱さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。ムダ毛を処理し、日焼けしていない状態で使用してください。  
赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。  
治まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。

フィルターの汚れが取れない?

お掃除をしても汚れが取れない場合は、販売店または、ヤーマンコールセンター(P.24)にご連絡ください。

1日に何回も使用できますか?

同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。  
熱による刺激が強く、肌トラブルの原因となります。

フラッシュ直後に、焦げたにおいがするのですが?

フラッシュによりムダ毛に熱が加わったため、毛の焦げたようなにおいがします。  
フラッシュ照射時以外で製品本体から異臭がする場合は、ただちに使用を中止して本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁側コンセントから抜いてください。

冷却・保湿ジェルをぬった状態で使用できますか?

故障の原因となるため使用しないでください。使用後に赤みや痛みが出た場合に使用してください。

# アフターサービス

## エラー状態について

症状	考えられる原因	対処方法
電源オン時にブザー音が鳴り電源が入らない	暗い部屋で使用している	明るい部屋で使用する
	明るさセンサーが影でおおわれている	明るさセンサーをおおわないようにする
	明るさセンサーが床向きで電源を入れている	天井向きにして電源を入れてください
スタンバイランプが青色と赤色交互に点滅する	ランプカートリッジの寿命 ※使用したレベルにより異なります。	新しいランプカートリッジと交換してください

こんなときには

## 廃棄について

本製品を廃棄される場合は、各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

**ヤーマンコールセンター** **0120-776-282** (通話料無料)  
 受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く) 携帯電話・PHS **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあります。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

## ●製品仕様

定 格	DC12V 3.3A
電 源 方 式	交流式
消 費 電 力	最大約45W
外 形 尺 法	約W53xD69xH200(mm)
製 品 質 量	約350g(本体+ランプカートリッジ+シェーバーアタッチメント)
製 造 国	日本
材 質	本体:ABS樹脂 ランプカートリッジ:ABS樹脂 シェーバーアタッチメント:ABS樹脂 刃:ステンレス
セ ッ ト 内 容	本体……1台 ランプカートリッジ……1個 ※本体に初めから装着されています。 シェーバーアタッチメント……1個 ※本体に初めから装着されています。 ビキニエリア用アタッチメント……1個 ACアダプター……1個 お掃除ブラシ……1個

アフターサービス

## オススメ化粧品



### プラチナエステ RB パールスキン ジュレローション

ダイズ種子エキス<sup>※1</sup>と保湿成分により、ツヤとうるおいに満ちたパール肌へと導くムダ毛ケア<sup>※2</sup>ローションです。

※1 整肌成分 ※2 ムダ毛処理後の肌を整える

商品名：プラチナエステ RB パールスキン ジュレローション

内容量：150mL

品 番：PE14001

## ●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店または下記ヤーマンコールセンターにご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
  - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りや不適当な修理・改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (ハ) 地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(二) 接続する他の機器の異常に伴う故障及び損傷。  
(ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の(ヘ) 場合。  
一般家庭以外(例えば業務用の長時間)(ト)に使用された場合の故障及び損傷。  
車輪・船舶等に搭載された場合に生じる(チ) 故障および損傷。  
お買い上げ後の輸送・移動・落下等に(リ) による故障および損傷。  
(ヌ) 保証書のご提示がない場合。  
保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。  
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。