

No.

## 保証書

持込修理

|          |  |                 |         |
|----------|--|-----------------|---------|
| 品名       | 家庭用光美容器                                      | 型番              | STA-200 |
| 形名       | メンズ・レイボーテ エクストラ                              |                 |         |
| 無料修理保証   | 対象部分   | 期間              |         |
|          | 本体のみ   | お買い上げ日から<br>1年間 |         |
| 店名・住所・電話 | 見本<br>ご購入時の明細を貼付<br>または本保証書とあわせて<br>保管してください |                 |         |
| ※販売者名    |  |                 |         |

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定印欄が空欄のままだつたりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)をご参照ください。

利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
 また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
 これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

## 製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045  
東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料無料)

※9:00～17:00(土・日・祝日除く)

[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

STA200-1-001X

美容家電のパイオニア


YA-MAN

 保管用  
保証書付

## 取扱説明書

家庭用光美容器  
メンズ・レイボーテ エクストラ

Men's Rei Beauté  
STA-200

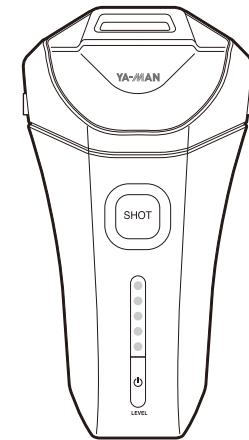

## もくじ

|               |    |
|---------------|----|
| 安全上のご注意       | 1  |
| 各部のなまえ        | 7  |
| ご使用の前に        | 8  |
| トリートメントをしましょう | 11 |
| 使いかた          | 12 |
| 使い終わったら       | 15 |
| こんなときには       | 17 |
| 海外でのご使用について   | 20 |
| アフターサービス      | 21 |
| ●製品仕様         | 21 |
| ●保証について       | 22 |
| 保証書           | 23 |

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 正しく使用されなかった場合、やけどをする恐れがございます。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

## ●注意区分について



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害<sup>※</sup>の発生が想定される内容です。

<sup>※</sup>物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ●図記号について(次は図記号の例です。)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



## 警告




### 無理な扱い 禁止

ACアダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せたり、挿み込んだりすると、アダプターケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



### 傷んだ コードプラグ 使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

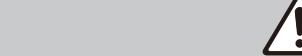

## 警告



### 必ず守る

必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)  
ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

※海外からの修理保証への依頼には日本国内で発送、受取が可能な住所、連絡先が必要となります。



### 必ず守る

必ず専用のACアダプターを使用する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



### 分解禁止

分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



### 禁止

電源をオンにしてもファンが動作しない(「ブーン」と音がしない)場合は使用しない。

そのまま使用すると発煙・発火・故障・ケガの原因となります。お近くの販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)にご連絡ください。



### 異臭・ 異常発熱時 使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用しない。

そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



### コード引張り 移動禁止

ACアダプターを引っ張って製品を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。



### プラグを抜く

万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。また、製品が正常に動作しない場合があります。



### タコ足配線をしない。 タコ足配線 禁止

タコ足配線をしない。  
発熱・発火・破損の原因となります。



### プラグを抜く

ACアダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないよう)にする。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



### 禁 止

子供の近くで使用しない。  
フラッシュは強い光のため、目を傷める危険があります。



### 禁 止

照射部を直視しない。また、周りの人が見ないようにする。眩しいときは、付属のサングラスを装着する。

目を傷める原因となります。



## 警告



取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。



子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。ケガをする原因となります。

次のような人は使用しない。  
事故やトラブルの原因になります。

- 医師の治療を受けている人 ●急性疾患
- 結核性疾患 ●発熱している人 ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体質 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病 ●光過敏症
- アトピー性皮膚炎 ●肌の弱い人 ●疲労が激しい人
- 皮膚トラブルがある人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
- 眠気をさそう薬を服用中の人は ●妊娠中、生理中、授乳中
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人 ●てんかん ●肌の色が濃い人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人



指定の部位以外や次のような部位には使用しない。  
事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷 ●整形手術をした部位 ●口内や陰部、粘膜など
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位 ●にきび
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ●カユミやほてりのある部位
- ホクロ ●しみ ●ウイルス性のイボ ●のどぼとけ ●耳 ●日焼け
- 乳首、乳輪 ●へそ内部 ●大静脈 ●刺青、タトゥー、ボディペイント
- まぶた、目の周囲、眼球 ●頭部 ●眉 ●頭髪 ●首
- 外陰部、肛門、その周囲 ●肌の色が濃い部分

ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



フラッシュ使用直後にフィルターに触れない。

使用直後のフィルターは高温になるため、フィルターに触ると、やけどの原因となります。



通気口をふさいだまま使用しない。

発煙・発火の原因となります。



## 警告



目には直接照射しない。  
目を傷める原因となります。



過剰な連続使用はしない。  
(業務用としての使用など)  
10分使用した場合は10分以上休ませる。

ケガ・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。



本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

ケガ・故障・ガラス管の割れ等の原因となります。



引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。  
火災・感電・ケガの原因となります。



暗い部屋で使用しない。  
目を傷める原因となります。  
また、製品が正常に動作しない場合があります。



本体やACアダプターを水につけてたり、水をかけたり、水洗いしない。  
浴室や洗面台、湿気の多い所で使用したり、保管しない。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



照射口、肌センサーが汚れていないか定期的に確認・掃除する。  
やけどや故障の原因となります。



火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入したり、熱器具に近づけない。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



使用しないとき・お掃除するときはACアダプターを壁面コンセントから抜く。  
プラグを抜く  
感電・ショート・発火の原因となります。



## 注意



ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しない。赤みが完全に引くまで使用をお控えください。



屋外で使用しない。  
本体が故障する原因となります。また、正常に動作しない場合があります。



衣服や頭髪・物に照射しない。  
焦げたり、変色・破損、肌トラブルの原因となります。



ペットには使用しない。  
ケガの原因となります。



肌に発疹・炎症・かゆみ等の異常を起こしている場合や、使用中、使用後に肌に異常がみられるときは使用しない。



肌に毛くずが残っている場合は、取り除く。  
フラッシュ照射時に熱く感じることがあります。



毛が1mm以上の場合、ムダ毛を剃ってから使用する。  
長いムダ毛を処理せずにフラッシュを照射すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。



必ず守る  
使用環境温度を守る。  
使用できる環境温度は約5～35℃です。使用する場所の室温を確認してください。  
場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。  
故障・破損の原因となります。



必ず守る  
カートリッジに黒い汚れや、化粧品・毛くずなどが付着していないか確認してから使用する。  
焦げたり、製品故障の原因となります。



必ず守る  
使用前に照射口、肌センター、変形、変色、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。  
肌や指の傷、やけどなどのトラブルや、症状悪化の原因となります。



同じ部分に1日3回以上フラッシュを照射しない。  

- ・ 過度な照射をしても効果は変わりません。トリートメントの頻度(P.11)をお守りください。
- ・ 使用中に、照射部分が多少重複しても問題ありません。



## 注意



必ず守る  
禁止

トリートメント直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品を使用しない。  
(保湿のためのクリーム・ローション・日焼け止めは除く)  
肌トラブルの原因となります。



必ず守る  
禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。



必ず守る

肌の赤み、ほてりがひかない場合は、入浴(シャワーは可)、運動、飲酒を控える。



必ず守る

ご自身の肌にあったレベルで使用する。「フラッシュレベルの設定」(P.10)参照  
初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。



必ず守る

使用後は毎回、「使い終わったら」(P.15)を参照して、製品に付着した毛くず・化粧品などを取り除く。  
焦げ、故障、肌トラブルの原因となります。



必ず守る

24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。  
また、トリートメントをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。  
肌トラブルの原因となります。



必ず守る

使用後、肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなどで十分に冷やす。  
トリートメント後は個人の体质や使いかたにより、肌が熱をもつことがあります。  
ほてりなどが気になった場合は、保冷剤やぬらしたタオル等で冷やしてください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。



必ず守る

普段から保湿などして、肌が乾燥しないようにケアする。  
肌が乾燥していると、製品が正常に動作しない、効果が正しくあらわれない場合があります。




必ず守る

成長過程の方は、保護者の管理下で安全に十分に配慮の上ご使用いただき、異常がおきた際は、ただちにご使用を中止してください。成長期はホルモンバランスの関係上、肌へのダメージが発生したり、トリートメントにおける効果がみられないことがあります。


# 各部のなまえ

## ●本体

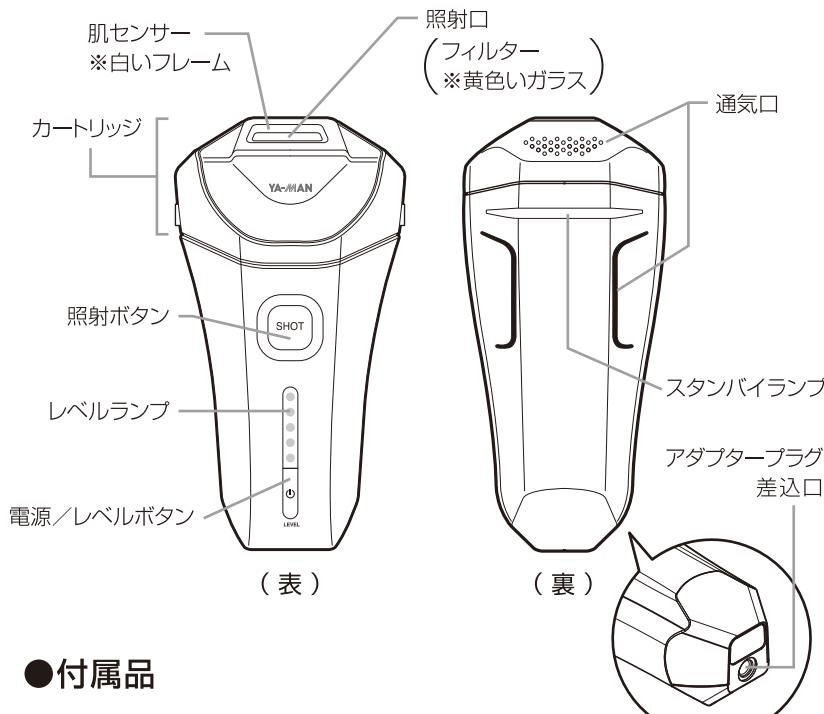

## ●付属品

### ・ACアダプター

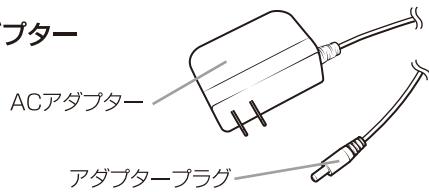


### ・サングラス

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

# ご使用の前に

## ●操作表示部

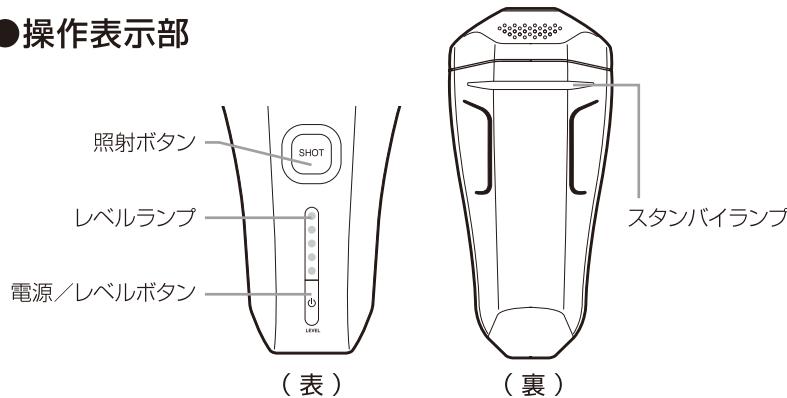

### ●電源/レベルボタン

オン:長押し(約3秒)します。<レベルランプ1:青点灯>

オフ:長押し(約3秒)します。<ランプ:全消灯>

※電源がオフになっても約90秒間ファンが動作します。

ファンが止まるまでACアダプターは抜かないでください。

電源がオンの状態で電源/レベルボタンを押すと、単発モードレベルの切り替えができます。

単発モードレベル:5段階


レベルをレベルランプの青点灯・点滅で表示します。

※レベルを高くするほどフラッシュが熱く感じられます。

使い始めは必ずレベル1からご使用ください。

レベル5のとき、もう一度電源/レベルボタンを押すと、パワーモードになり、レベルランプが4つ青点灯、1つ青点滅します。

パワーモードのとき、もう一度電源/レベルボタンを押すと、敏感肌モードになりレベルランプが5つ青点滅します。

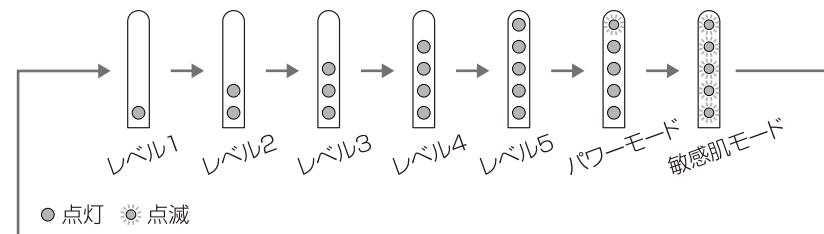

| モード    | 特徴   |
|--------|--|
| 単発モード  | 1回ずつフラッシュを照射する基本のモードです。レベルを5段階で調整できます。                             |
| パワーモード | 最大出力のモードです。1回ずつフラッシュを照射します。根深い毛のケアにオススメです。                         |
| 敏感肌モード | 弱めのフラッシュと同じ部位に5回高速連射するモードです。瞬間的な刺激が苦手な方、熱に敏感な方にオススメです。レベルは調整できません。 |

#### ●スタンバイランプ／照射ボタン

- 消灯：照射準備中または、肌センサーがお肌に正常にあたっていないとき。
- 青点灯：肌センサーがお肌に正常にあたっているとき（照射ボタンを押すと、フラッシュを照射できます）。
- ※照射準備が完了すると「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
- 照射ボタンを押し続けると、連続モードになります。（最大10発照射します）

#### ●自動電源オフ（オートオフ）

- 本製品は自動電源オフ機能を備えています。  
電源をオンにしてから約10分で電源がオフになります。  
トリートメントの途中でレベルを変更しても、電源オンから約10分で電源がオフになります。  
※自動電源オフ時は「ピーピー」と鳴ってお知らせします。

## トリートメントの準備

製品本来の効果を得るために、トリートメントの前は必ず行いましょう。

- 1 お手持ちのシェーバーなどでトリートメントする部分の毛を処理する。
  - ・毛を1mm以下までカットしてください。
  - ※肌表面に伸びた毛が残っていると、やけどの危険があります。
  - ※毛抜き、ワックス等を使用した脱毛は行わないでください。
- 2 カートリッジや照射口、肌センサーにほこりや毛くずなどの汚れ、破損などの異常がないことを確認する。
  - ・汚れている場合は必ずお掃除をしてください。
  - 製品の故障や劣化、やけどやケガ、肌トラブルの原因となります。
  - お掃除の方法については、「お掃除のしかた」（P.15）を参照してください。

## フラッシュレベルの設定

レベル1から照射し、使用できるレベルまでパワーを上げてください（推奨：レベル4～パワーモード）。フラッシュ照射時に、ゴムでお肌をはじいた感じの刺激があります。ひどく痛みを感じるようなレベルでは使用しないでください。

使用部位によってレベルを調整してください。

※肌色の濃い人や日焼けした後は、お肌が光を吸収しやすくなり、無理に高い出力レベルで使用すると肌トラブルの原因となります。

※敏感肌モードはレベルを調整できません。「肌への照射テスト」を行ってから使用してください。

## 肌への照射テスト

製品を初めてご使用になる際は必ず行いましょう。

- 1 使用前に保冷剤、冷やしたタオルなどで照射する部位を冷やす。
- 2 電源ボタンを長押し（約3秒）して電源をオンにする。
- 3 トリートメントしたい部位付近の目立たない箇所にレベル1から照射する。  
照射方法については、「基本の使い方について」（P.12）を参照してください。
- 4 使用後に保冷剤、冷やしたタオルなどで照射した部位を冷やす。
- 5 照射テスト後、24時間経ってからお肌を確認する。  
お肌に異常（赤みがひかない・水泡・ただれ等）がみられなければ製品の使用が可能です。

# トリートメントをしましょう

使いかた

## トリートメントの流れ

- ①毛の処理→②フラッシュトリートメント→③クールダウン  
※長い毛・色の濃い毛を1mm以下に処理してからお使いください。

## トリートメントの頻度

3日に2度使用

- ※フラッシュ照射前後は、必ず照射した部分を冷やしてください。  
※同じ部分に1日3回以上フラッシュを照射しないでください。  
※効果の感じかたは使用する部位や個人によって異なります。  
※この製品は永久脱毛をするためのものではありません。  
トリートメントを中止すると効果を感じにくくムダ毛の生え方は徐々に元に戻ります。




### 過度な使用はしない。

上記頻度を超えて使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら使用してください。また、1日の使用回数は必ず守ってください。  
肌トラブルの原因となります。


## 本体の持ちかた

- 図のように本体を持ってください。  
照射ボタンを親指で押せるように持ちます。
- 通気口をふさがないでください。

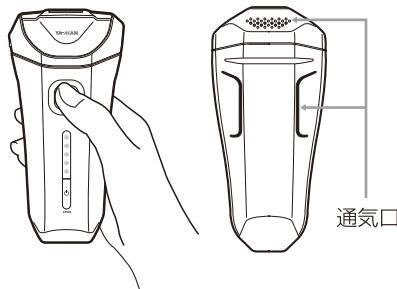


## 基本の使い方について

- 1 ACアダプターをアダプタープラグ差込口と壁面コンセントに差し込む。
- 2 カートリッジがしっかりと差し込まれていることを確認する。
- 3 保冷剤、冷やしたタオルなどでフラッシュを照射する部位を冷やす。
- 4 電源／レベルボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにする。
  - ・レベルランプのひとつが青色に点灯します。<レベル1>
  - ・電源がオンになると、本体内部のファンが「ブーン」と回り始めます。故障ではありません。
- 5 電源／レベルボタンを押してレベルを選択する。
  - ・フラッシュレベルは5段階あります。
  - ・慣れるまでは必ずレベル1から使用してください。
  - ・「ピピッ」と鳴ったら照射準備完了です。
- 6 肌センサーをお肌にやさしくあて、照射ボタンを押す。
  - ・鼻下など狭い部分や、角度の急な部分に使用するときは、  
使用箇所のお肌を伸ばすようにしながらトリートメントしてください。  
フラッシュ照射時はサングラスをかけるか、フラッシュを照射する時に目を閉じる等で、フラッシュを絶対に直視しないようにご注意ください。  
※目や目元には絶対に照射しないでください。
  - ・スタンバイランプが青色に点灯したら照射できます。
  - ・照射ボタンを押し続けると連続モード(P.14)が作動します。
  - ※照射部を直視しないでください。
  - ※お肌が乾燥していると肌センサーが反応しない場合があります。  
その場合は水または化粧水でお肌を保湿してください。

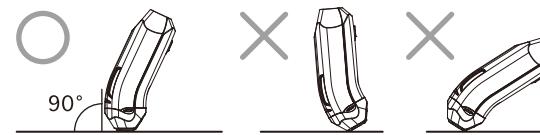

## 7 トリートメントしたい部分全体に照射できるよう、図のように少しずつ位置を変えながらトリートメントを行う。

- 肌センサーがお肌にあたったことを感知してフラッシュが照射できる、安全機能を備えています。
- ※連続モード(P.14)で使用するときも、照射箇所を移動させながら使用してください。
- ※照射口の大きさが一度にトリートメントできる範囲です。
- ※1箇所に照射したらいったん肌から離し、次の箇所へ移動させてください。

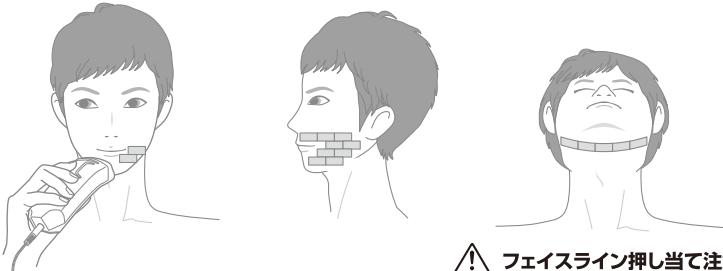

### ⚠ フェイスライン押し当て注意

フェイスラインは特に肌が照射口に入り込みやすいので、フラッシュ照射時は強く押し当てないようにご注意ください。

## 8 トリートメントを終了するときは、電源／レベルボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ※電源がオフになっても約90秒間ファンが作動します。  
ファンが止まるまでACアダプターは抜かないでください。

## 9 保冷剤・冷やしたタオルなどで照射したお肌を冷やす。その後化粧水・保湿ローションなどで照射したお肌を保湿する。

## 10 使用後はACアダプターを抜き、本体やカートリッジをお掃除する。

- ・「お掃除のしかた」(P.15)に従って、必ず毎回お掃除してください。
- ・トリートメントした日は入浴(シャワーは可)、運動、飲酒を控えてください。

## ●使用上のご注意

- 電源をオンにしてから約10分経つと「ピーピー」とブザーが鳴り、自動的に電源が切れます(オートオフ)。再度使用するときは、10分以上あけてからご使用ください。連続使用すると故障の原因となります。
- レベルが高いほど照射準備完了までの時間が長くなります。
- トリートメント後は直射日光にあたることを避け、トリートメントをしている期間は日焼けをしないようにしましょう。
- カートリッジは本体に初めから装着されています。安全のため取り外さないでください。

### <敏感肌モードについて(P.9)>

照射口をお肌にあて、照射ボタンを押すたびに高速フラッシュが5回連射されます。※照射中に照射口がお肌から離れると、安全機能により照射がリセットされます。もう一度照射ボタンを押してください。

### <連続モードについて>

照射ボタンを押し続けると、照射準備が完了するたびに自動でフラッシュが照射され続けます。最大10回照射します。  
※1箇所に照射したらいったん肌から離し、次の箇所へ移動させてください。



### 警告

- 同じ部分に1日3回以上フラッシュを照射しない。(敏感肌モードを除く。)
- 暗い部屋で使用しない。また、目には直接照射しない。目を傷める原因となります。
- 顔に使用する際は、髪の毛に照射しないように注意する。髪の毛を束ねるなどして顔にかかるないようにしてください。
- 必要以上に肌に強く押し当てない。また、フラッシュ使用直後のフィルターに触れない。使用中、使用直後のフィルターは高温になるため、必要以上に肌を近づけたり、フィルターに触ると、やけどの原因となります。
- 次の部位には使用しない。事故、肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
  - ◆ 傷 ◆ 傷跡など色の濃い部分 ◆ 眼球 ◆ まぶた、目の周り
  - ◆ にきび ◆ しみ、ホクロ ◆ 眉、頭髪 ◆ 日焼け

# 使い終わったら

## お掃除のしかた

照射口、肌センサー部は、使用後に毎回必ずお掃除をしてください。

また本体の故障・動作不良を防ぐために、定期的にお掃除をしてください。

お掃除する際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。

### ●照射口・肌センサー・カートリッジのお掃除

1 水で湿らせて固くしぼった布で、照射口、肌センサーの汚れを拭き取る。

※照射口内側に入り込んだ汚れは、綿棒などを使用してやさしく取り除いてください。

2 お手持ちのやわらかい布や綿棒で、フィルター(黄色いガラス板)に付いた汚れを取り除く。

※指紋などの汚れも拭き取り、きれいに保ってください。

フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。

### ●本体のお掃除

1 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る。

- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスponジや布で拭き取ってください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 本体は防水構造ではございません。水洗いはしないでください。



警告

- お掃除する際はACアダプターを壁面コンセントから抜く。感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体内部に水が入らないようにお掃除する。感電・ショート・発火の原因となります。



注意

- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しない。
- 化粧水やローションが付着した状態で放置しない。

## 保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体やカートリッジのお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.17)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.21)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

# こんなときには

## 困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

| こんな症状    | 考えられる原因  | 処置方法  |
|----------|--|---|
| 電源が入らない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ACアダプターが本体または壁面コンセントに差し込まれていない</li> <li>→ 電源ボタンを長押ししていない</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ACアダプターを本体または壁面コンセントに差し込んでください</li> <li>→ 電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにしてください</li> </ul>                      |
| 電源が切れる   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 電源をオンにしてから約10分経過し、オートオフ(自動電源オフ)になった</li> <li>→ カートリッジがしっかりと装着されていない</li> <li>→ ACアダプターが壁面以外のコンセントに差し込まれている</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 再度使用するときは、10分以上あけてからご使用ください</li> <li>→ カートリッジをしっかりと装着する</li> <li>→ 壁面コンセントに差し込んでください</li> </ul>        |
| フラッシュがない | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 照射ボタンを押していない</li> <li>→ 照射準備が完了していない</li> <li>→ 肌センサーがお肌にしっかりと触れていない</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 照射ボタンを押してください</li> <li>→ 「ピピッ」と鳴るまでお待ちください</li> <li>→ スタンバイランプが青点灯するようにをお肌に垂直にあててください(P.12)</li> </ul> |

| こんな症状             | 考えられる原因   | 処置方法  |
|-------------------|---|---|
| フラッシュがない          | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ カートリッジがしっかりと差し込まれていない</li> <li>→ 照射口を塞いだままずらすように移動させている</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ カートリッジをしっかりと奥まで差し込んでください</li> <li>→ 照射する毎に、いったん肌から離して移動させてください</li> </ul>  |
| フラッシュが熱く、または痛く感じる | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ レベルが高い</li> <li>→ 同じ箇所に3回以上照射している</li> <li>→ お肌表面に伸びた毛が残っている</li> <li>→ 日焼けやほくろのある部位に使用した</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ レベルボタンを押してレベルを下げてください</li> <li>→ 同じ箇所に3回以上照射しないでください</li> <li>→ 毛は必ず1mm以下に処理し、毛くずを取り除いてから照射してください</li> <li>→ 使用禁止部位を確認してください(P.3)</li> </ul> |
| フラッシュがまぶしい        | → 肌センサーがお肌から浮いている   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 肌センサーをお肌にしっかりと密着させてください</li> <li>→ それでも気になる場合は、サングラスをしてください</li> </ul>   |
| 「ブーン」と音がする        | → ファンの動作音です<br>異常・故障ではありません   |   |
| こげたニオイがする         | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 照射口に毛や汚れが付いたままフラッシュした</li> <li>→ 毛の焼けたニオイです。異常ではありません</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 照射口をお手入れしてください(P.15)</li> </ul>  |

# 海外でのご使用について

## よくあるご質問

| Q                          | A  |
|----------------------------|--|
| フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが? | フラッシュは多少の熱さを感じますが、お肌には問題ありません。<br>熱さを感じる原因としては、長い毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。<br>毛を処理し、日焼けしていない状態で使用してください。<br>赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。<br>治まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。 |
| フィルターの汚れが取れない?             | お掃除をしても汚れが取れない場合は、カートリッジ購入となります。販売店または、ヤーマンコールセンター（P.21）にご連絡ください。  |
| 1日に何回使用しても大丈夫ですか?          | 同じ部分に1日3回以上、フラッシュを照射しないでください。（敏感肌モードは除く。）<br>熱による刺激が強く、肌トラブルの原因となります。  |
| フラッシュ直後に、焦げたにおいがするのですが?    | フラッシュにより毛に熱が加わったためです。<br>フラッシュ照射時以外で製品本体から異臭がする場合は、ただちに使用を中止して本体の電源をオフにし、ACアダプターを抜いてください。  |

## エラー状態について

| 症状                                   | 考えられる原因               | 対処方法                     |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 電源オン時にスタンバイランプが赤点灯し、ブザー音が鳴り、電源がオフになる | カートリッジがしっかりと差し込まれていない | カートリッジをしっかりと奥まで差し込んでください |
| スタンバイランプが赤点滅する                       | カートリッジの寿命             | 新しいカートリッジと交換してください       |

## 警告



必ず交流100~240Vで使用する。(保証は国内のみ)

火災・感電の原因となります。

※海外からの無料修理保証への依頼は受付できませんので、ご了承ください。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。

●地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。

必ずご確認のうえご使用ください。

●プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

## 廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

**ヤーマンコールセンター**  **0120-776-282**(通話料無料)  
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)  **0570-550-637**(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。  
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですと  
お電話がつながりやすくなっています。

## ●製品仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 定 格       | DC12V 2.0A  |
| 消 費 電 力   | 最大約27W  |
| 外 形 尺 法   | 約W73xD58xH152(mm)   |
| 製 品 質 量   | 約250g※本体のみ  |
| 製 造 国     | 日本  |
| 材 質       | 本体・カートリッジ:ABS樹脂   |
| セ ッ ト 内 容 | 本体……1台<br>カートリッジ……1個<br>※本体に初めから装着されています。<br>サングラス……1個<br>ACアダプター……1個 |

## ●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします  
(消耗品、付属品は除く)。  
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、  
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.21)に  
ご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
  - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
  - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
  - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。  
(ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。  
(ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ト) 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。  
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。  
(リ) 保証書のご提示がない場合。  
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。  
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。