

取扱説明書

家庭用光美容器

レイポーター Go VIタイプ

STA-213

もくじ

はじめに……………1
安全上のご注意……………1
海外でのご使用について……………11
各部のなまえとはたらき……………12
モードの説明……………15
お使いになる前に……………17
使いかた……………19
使い終わったら……………25

お知らせ……………27
●故障かな?と思ったら……………27
●エラー表示について……………29
●よくあるご質問……………30
●製品仕様……………31
アフターサービス……………32



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



機器から照射される強い可視および不可視の光の照射が目傷める可能性があることを示しています。

警告 (電源に関して)

- 専用のACアダプター以外は使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止

- ACアダプターが傷んだり、壁面コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- ACアダプターを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



コード引っ張り
移動禁止

- ACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ
禁止

- 万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

- ACアダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、ACアダプターを壁面コンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを抜く

- タコ足配線をしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- ACアダプターを破損・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



無理な扱い
禁止

- ねじれたコードをそのまま収納しない。

ケーブルに負荷がかかり断線・感電の原因となります。

- 収納時にコードを本体またはACアダプターに巻き付けない。

電源コードに負荷がかかり、断線・感電・ショートの原因となります。

- 必ず交流100~240Vで使用(無料修理は国内のみ)。ACアダプターは根元まで確実に差し込む。火災・感電・事故の原因となります。



必ず守る

- 長期間使用しない時は、ACアダプターをコンセントから抜く。

火災のおそれがあります。

- 使用後は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。

火災・事故のおそれがあります。

危険 (ご使用、保管に関して)

● 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

● 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
・妊娠初期から出産直後までの人 ・自己免疫疾患のある人 ・黒皮症の人 ・てんかんの疾患がある人 ・光過敏症の人
・光線力学療法等で光増感剤を使用している人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人 ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

● 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩) ・のど
・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をした部位
・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位

※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・傷跡やしみなど色の濃い部分 ・眉、額、頭髪 ・耳 ・乳首、乳輪 ・へそ内部 ・大静脈等血管が見える部位
・刺青、タトゥー、ボディペイント

警告 (ご使用、保管に関して)

● 子供の近くで使用しない。

フラッシュは強い光のため、目を傷める危険性があります。

● 通気口をふさいだまま使用しない。

発煙・発火・やけどの原因となります。

● フラッシュ使用直後にフィルター(ガラス板)に触れない。

使用直後のフィルターは高温になるため、指でフィルターに触れると、やけどの原因となります。

● 過剰な連続使用はしない(業務用としての使用など)。10分使用した場合は10分以上休ませる。

けが・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。

● 引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。

爆発・火災の原因となります。

● 目には直接照射しない。

光の照射から目を保護するため、まぶたの上や目の近くで機器を使用しない。

● 照射部を直視しない。また、周りの人が見ないようにする。

誤用は目の損傷につながる可能性があります。

機器から照射される強い可視および不可視の光の照射が目を傷める可能性があります。

● 暗い部屋で使用しない。

目を傷める原因となります。



禁止

● 照射口を黒いものに向けない。

発煙・発火・故障・けがの原因となります。

● 衣服や頭髮・物に照射しない。

焦げたり、変色・破損の原因となります。

● ファンデーションなどメイクアップ用品をつけた状態でフラッシュ照射をしない。

必ずメイクを落としてから使用してください。やけど・肌トラブルの原因となります。

● ファンが作動しない(「ブーン」と音がしない)ときは使用しない。

そのまま使用すると発煙・発火・故障・けがの原因となります。お買い上げの販売店またはヤーマンコールセンター(P.32)にご連絡ください。

● 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。

感電・ショートによる発火・火災の原因となります。

● 次のような場所で機器の使用・保管しない。

- ・浴室などの湿気の多い場所・ほこりの多い場所
- ・直射日光の当たる場所・水などのかかる場所
- ・傾斜、振動、衝撃のある場所・屋外
- ・強い電波や磁気の発生する場所
- ・油煙、湯気の当たる場所
- ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
- ・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- ・火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与えるおそれがあります。

説明書の指示を守らない場合、目の損傷(視力低下につながる可能性)や皮膚の損傷の可能性がります。

- 通電したまま放置しない。

火災・事故のおそれがあります。



禁止

- シングルモードでは同じ部分に1日2回以上はフラッシュを照射しない。

過度な照射をしても効果は変わりません。「ケアの周期」(P.17)をお守りください。

1回の使用中に、照射部分が多少重複しても問題ありません。

皮膚の損傷は同じ部分に長時間または繰り返し照射した後に発生する可能性があります。

- ローラーモードでは同じ部位に1日5分以上の照射をしない。

お肌に異常を感じた場合はすぐにご使用を中止してください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。

皮膚の損傷は同じ部分に長時間または繰り返し照射した後に発生する可能性があります。

※1部位=ひじ上、ひじ下、ひざ上、ひざ下、ワキ、顔など



禁止

- 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 機器(本体等)に水をかけたり、水につけたりしない。水のかかるところや湿気の多いところで使用しない。

火災・感電・故障のおそれがあります。



水かけ
禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けが・故障の原因となります。



用途以外
禁止

- 子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。

事故・けがの原因となります。

- 本体は子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。

事故・けがの原因となります。

警告 (ご使用、保管に関して)

- 屋外・直射日光の下で使用しない。
故障の原因となります。



屋外禁止

- 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障・ガラス管の割れなどの原因となります。



衝撃禁止

- 分解や修理・改造はしない。
ガラス管の修理・交換は行わないでください。安全機能(タッチセンサー機能)を無効にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止し、使用しない。
破損・発火の原因となります。ヤーマンコールセンター(P.33)にご連絡ください。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

- 電子レンジや高压容器にいれない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



破裂注意

- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入したり、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- 機器(本体等)に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。
- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。
- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。ヤーマンコールセンター(P.33)にご連絡ください。
- 照射口が汚れていないか定期的に確認・お手入れする。
やけど・故障の原因となります。



必ず守る

注意 (電源に関して)

- 停電した時は、直ちに電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
事故のおそれがあります。



注意 (ご使用、保管に関して)

- 使用前に照射口の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。
- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品を使用しない。(保湿のためのクリーム・ローションは除く)
肌トラブルの原因となります。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- ワキの下のケアをした直後に制汗剤を使用しない。
赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
- ペットには使用しない。
けがの原因となります。



注意 (ご使用、保管に関して)

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める可能性があります。
- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 衣類の上から使用しない。



禁止

-
- 顔に使用するときはフェイスモードにして使用する。
お肌を傷める原因となります。
 - 顔に使用するときは、必ずメイクを落として使用する。
メイクの上から使用すると、やけど、肌トラブルの原因となります。
 - 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
痛みを感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。
 - 以下の項目は必ず守る。
事故・けが・本体の故障の原因となります。
 - ・日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。
 - ・使用後は必ず電源をオフにする。
 - ケア中にまぶしいと感じたときは、サングラスなどをかけてケアをする。
目やお肌を傷める原因となります。
 - お肌がフィルター(ガラス部分)に接触しないよう注意して使用する。
 - ・動作中はフィルター(ガラス部分)が非常に高温になります。やけどのおそれがあるため、お肌がフィルター(ガラス部分)に接触しないようご注意ください。
 - ・お肌が柔らかい箇所、脂肪が多い箇所には強く押し付けしないでください。
 - ・ひじ、ひざ等、丸みを帯びている部位への使用は、十分にご注意ください



必ず守る

注意 (ご使用、保管に関して)

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 成長過程の方は、保護者の管理下で安全に十分ご配慮の上ご使用いただき、異常がおきた際は、ただちに
ご使用を中止してください。
成長期はホルモンバランスの関係上、お肌へのダメージが発生したり、ケアにおける効果がみられないことがあります。
- 普段から保湿などして、お肌が乾燥しないようにケアする。
お肌が乾燥していると、製品の効果が正しくあらわれない場合があります。
- 必ずシェーバーやカミソリでムダ毛を除毛してからフラッシュケアをする。
ムダ毛を除毛せずにフラッシュを照射すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。
※毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。
- お肌に毛くずが残っている場合は、必ず取り除く。
フラッシュ照射時に熱く感じる場合があります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.25)を参照して、製品に付着した毛くず・化粧品などを取り除く。
焦げ・故障・肌トラブルの原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。
肌トラブルの原因となります。



必ず守る

注意 (ご使用、保管に関して)

- 機器(本体等)をお手入れする時は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜き、取扱説明書の指示にしたがう。
事故・故障のおそれがあります。
- フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。
24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。また、ケアをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。
- 使用後、お肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなどで十分に冷やす。
ケア後は個人の体質や使いかたにより、お肌が熱をもつことがあります。ほてりなどが気になった場合は、保冷剤や冷やしたタオルなどで処置をしてください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。
- 使用環境温度を守る。
使用できる環境温度は5～35℃です。使用する場所の室温を確認してください。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。故障・破損の原因となります。
- ケアした日は入浴(シャワーは可)、運動、飲酒を控える。
肌トラブルの原因となります。
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。
事故・故障のおそれがあります。



海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)

火災・感電の原因となります。



必ず守る

-
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。




発火注意

-
- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
 - ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

各部のなまえとはたらき

本体

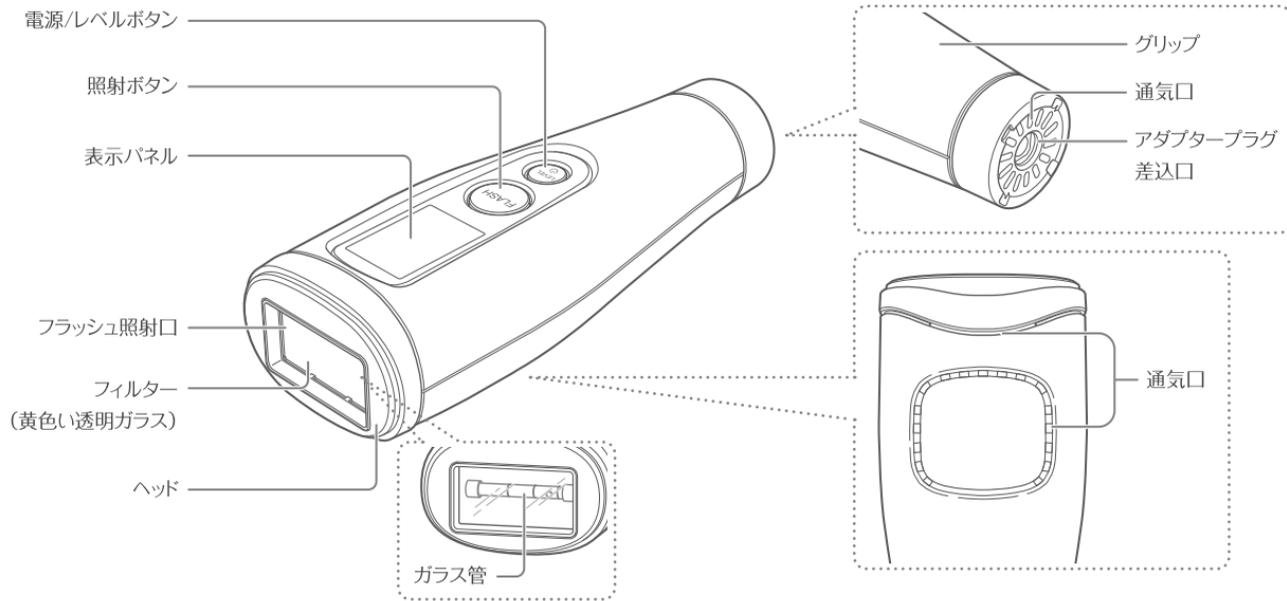

※ガラス管は消耗品です。

付属品

● スポットアタッチメント



● Vデザインツール

● ACアダプター

● 取扱説明書
(保証書付)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

安全機能

● タッチセンサー

照射口がお肌に当たったことを感知すると、フラッシュを照射できます。

オートオフ機能

電源をオンしてから約10分が経過すると、ブザー音が「ビッピッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

冷却機能

電源をオフにした後、約90秒間ファンが作動し続けます。本体を冷却するための機能ですので、ファンが止まるまでACアダプターを抜かないでください。

ご注意

・電源オフ後、再度使用するときは必ず10分以上あけてからご使用ください。連続使用すると故障の原因となります。



スポットアタッチメントの取り付けかた

スポットアタッチメントは正しい向きでなければ本体に装着できません。

●側面



●裏側(磁石部)

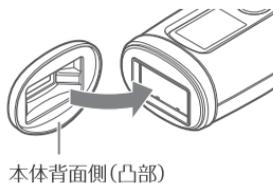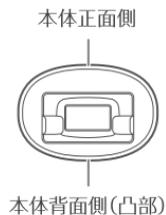


スポットアタッチメントの向きを確認し、
本体照射口の上からかぶせるようにし
て装着します。
マグネット式なので、かぶせるだけで装
着できます。

※照射口とスポットアタッチメントの間に異物が入り込まないように注意してくだ
さい。

・電源がオンの状態でスポットアタッチメントの着脱をおこなうと、「ピッ」とブザー音が鳴り、モードが自動で切り替わります。

スポットアタッチメントの取り外しかた

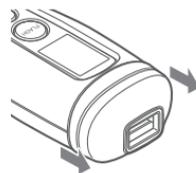

スポットアタッチメントの両側を
持って手前に引っ張ります。

モードの説明

本製品では、以下のモードを使用してお肌のケアをしていただけます。

ボディモード



<おすすめ使用部位>

●ウデ



●アシ



●ワキ



●ビキニライン



フェイスモード



スポットアタッチメントを取り付けると、自動でフェイスモードとなります。顔、V・Iラインのケアをするときは必ずスポットアタッチメントを装着し、フェイスモードを使用してください。

<おすすめ使用部位>

●フェイス(ほお)



●フェイス(口まわり)



※唇には使用できません。

●指



●V・Iライン




※粘膜には使用できません。

使用禁止部位

ケアする際は、以下の部位に使用しないでください。

(下図の  部位)

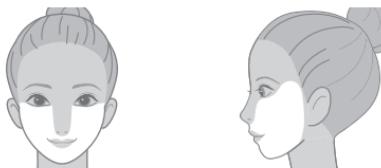

・口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた(眼窩)・のど

・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をした部位

・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位

※施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・傷跡やしみなど色の濃い部分・眉、額、頭髮・耳・乳首、乳輪

・へそ内部・大静脈等血管が見える部位

・刺青、タトゥー、ボディペイント

お使いになる前に

ケアの前に、以下の内容を必ず確認してください。

ケアの準備

- ケアする部位のムダ毛を、シェーバーやカミソリで必ず除毛してください。
ムダ毛が伸びていたり、お肌の表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。
※毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。
- 製品を初めてご使用になる際は、必ず照射テストを行ってください。

<照射テスト>



ケアする部位の近くを、単発照射のレベル1から照射します。体にはボディモード、顔にはフェイスモードで照射してください。
・24時間後にお肌に異常がなければ使用可能です。

- 痛みを感じるレベルでは使用しないでください。
- レベルを調整しながら使用してください。
使用部位によって感じかたが変わりますので、レベルを調整してください。
- 無理に高いレベルで使用しないでください。
特に肌色の濃い人や日焼けした後は、お肌が光を吸収しやすくなりますので、肌トラブルの原因となります。

- ヘッドや照射口、アタッチメントに異常がないことを確認してください。破損や変形があるときは使用しないでください。
 - ・汚れている場合は必ずお手入れをしてください。故障・劣化・やけど・けが・肌トラブルの原因となります。
 - ・お手入れ方法については「お手入れのしかた」(P.25)をご参照ください。
- 使用環境の明るさについて
 - ・使用環境が暗すぎると目を傷める原因となります。
 - ・推奨の使用環境は【天井照明がある部屋の卓上】です。
 - ・以下の環境での使用は避けてください。
 - 間接照明の部屋
 - 豆電球など照明が極端に暗い部屋
 - 机の下など影の中

ケアの周期



⚠ 注意

- 過剰な連続使用はしない。10分使用した場合は10分以上休める。
けが・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。
- お肌がフィルター(ガラス部分)に接触しないようご注意ください。
 - ・動作中はフィルター(ガラス部分)が非常に高温になります。やけどのおそれがあるため、お肌がフィルター(ガラス部分)に接触しないようご注意ください。
 - ・お肌が柔らかい箇所、脂肪が多い箇所には強く押し付けしないでください。
 - ・ひじ、ひざ等、丸みを帯びている部位への使用は、十分にご注意ください。


使いかた

基本的な使いかた

1

電源をオンにする

ACアダプターを本体と壁面コンセントに接続し、電源/レベルボタンを長押しします(約3秒)。表示パネルが点灯したらスタンバイ完了です。

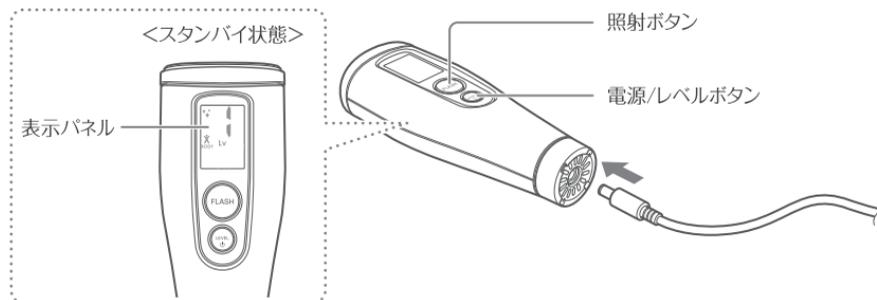

・スポットアタッチメントを装着すると、フェイスモードに切り替わります。

ご注意

・ACアダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。

2


レベルを選ぶ

電源/レベルボタンを押すごとに「ピッ」とブザー音が鳴り、レベルを変更できます。

ボディモード

レベルは以下の通りに切り替わります。

→ レベル 1 → 2 → 3 → 4 → 5
(電源オン時)

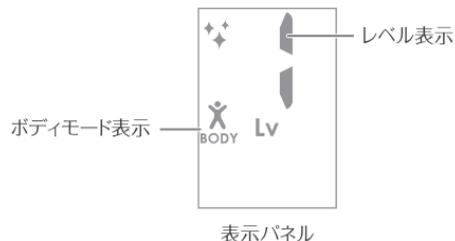

フェイスモード

レベルは以下の通りに切り替わります。

→ レベル 1 → 2 → 3 → 4 → 5
(電源オン時)



ご注意

・初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。

3


ケアする

照射口全体をお肌にしっかりあてましょう。「ピピッ」とブザー音が鳴り、表示パネルにOKランプが点灯したら照射準備完了です。

照射ボタンを押してフラッシュを照射します。

各部位のケアのポイントは、「ケアのポイント」(P.24)をご参照ください。

ボディ / フェイスモード共通

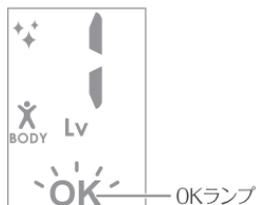

表示パネル

照射OK

● 単発照射(1回)



照射ボタンを短押しして、位置を移動させながら1発ずつ照射します。

・1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります。

※ボディモード時のイラストで説明しています。

●連続照射(最大10回)



※ボディモードのみ。
フェイスモードでは連続照射はできません。

電源オン時に照射ボタンを約3秒長押しすると「ピッピッ」とブザー音が鳴り、連続照射のオンオフができます。

1発照射するごとに、お肌の上を移動してください。

※オンオフは照射口をお肌から離れた状態で行ってください。

・連続照射中に約5秒間お肌から離れた状態が続くと「ピーピー」とブザー音が鳴り、連続照射が終了します。

・連続照射(最大10発)するごとに「ピー」とブザー音が鳴り、スタンバイ状態になります。照射口をお肌にあてた状態で照射ボタンを短押しすると再度連続照射(最大10発)が開始されます。


スタンバイ状態:  マークとOKランプが点滅

・連射時は、表示パネルに  マークが表示されます。

・連続照射中にレベルの変更はできません。

ご注意

- ・ケアしたい部分全体に照射できるように、少しずつ位置を変えながらケアを行ってください。
- ・連続照射で使用するときも、照射箇所を移動させながら使用してください。
- ・1箇所照射したらいったんお肌から離して、次の箇所へ移動させてください。
- ・照射口の大きさが、一度にケアできる範囲です。
- ・1日に2回以上、同じ部位に照射しないでください。
- ・フェイスラインは特にお肌が照射口に入り込みやすいので、フラッシュ照射時は強く押しあてないようにご注意ください。

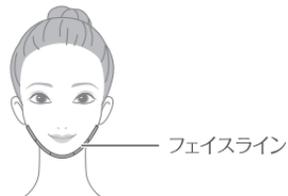

4

電源をオフにする

- ・電源/レベルボタンを長押しします(約3秒)。
- ・ファンが止まったことを確認し(約90秒)、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。


ケア後は、保冷剤・冷やしたタオルなどで照射したお肌を冷やしてください。その後、化粧水などで照射したお肌を保湿してください。

ケアのポイント

以下のポイントに注意してケアしてください。

【ボディモード】

●ウデ/アシ

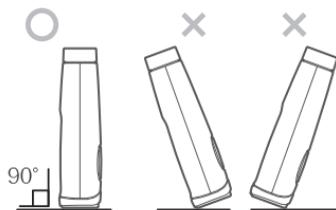

お肌に対して照射口を垂直にあててください。

●ワキ

指でお肌を伸ばしながらケアします。

・ケア前に、制汗剤などの化粧品類をきれいに拭き取ってください。

【フェイスモード】

●ビキニライン、V・Iライン

色素沈着が起きている部分や、お肌の色が濃い部分には低いレベルでご使用ください。

※慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。

※粘膜には使用できません。

●フェイス

必ずメイクを落としてからご使用ください。

・ほんのり温かみを感じる程度の強さで行ってください(使用目安: 週2~3回)。

・鼻下のヒゲ・顎ヒゲなど狭い部分や、角度の急な部分に使用するときは、指でお肌を伸ばしながらケアしてください。

・ケア後は直射日光にあたることを避け、ケアをしている期間は日焼けをしないようにしてください。

⚠ 注意

●顔をケアするときは、必ずフェイスモードを使用する。

ボディモードを使用すると、やけどなどの原因となります。

●照射部を直視しない。また、周りの人が見ないようにする。

目を傷める原因となります。

●顔をケアするときは、照射口をお肌にしっかりと密着させて使用する。

照射口がお肌に密着していないとフラッシュがまぶしく感じます。

●お肌がフィルター(ガラス部分)に接触しないようご注意ください

・動作中はフィルター(ガラス部分)が非常に高温になります。

やけどのおそれがあるため、お肌がフィルター(ガラス部分)に接触しないようご注意ください。

・お肌が柔らかい箇所、脂肪が多い箇所には強く押し付けしないでください。

・ひじ、ひざ等、丸みを帯びている部位への使用は、十分にご注意ください。照射口がお肌に密着していないとフラッシュがまぶしく感じます。

使い終わったら

お手入れのしかた

照射口は、使用後に毎回必ずお手入れをしてください。

本体も、故障や動作不良を防ぐため、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告

- お手入れの際は、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体内部に水が入らないようにお手入れする。
感電・ショート・発火の原因となります。

照射口

1

やわらかい布や綿棒で、汚れや毛くずを取り除く

※指紋などの汚れも拭き取ってください。

フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下・故障・肌トラブルの原因となります。

本体（ヘッド、アタッチメント含む）

1

水で湿らせて固くしぼった布で、
表面の汚れを拭き取る

・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、
除光液、灯油などの溶剤や薬品類、
磨き粉で拭かない。



保管のしかた

- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください(P.25の「お手入れのしかた」を参照)。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.27)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.32)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ ACアダプターを本体または壁面コンセントに差し込んでください。
	→ 電源/レベルボタンを長押しして(約3秒)、電源をオンにしてください。
操作できない	→ 「エラー表示について」(P.29)を確認してください。
電源が切れる	→ オートオフ(P.13)になっています。再度使用するときは10分以上あけてからご使用ください。
	→ ACアダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。
フラッシュが出ない	→ 照射準備が完了していません。「ビビッ」と鳴るまでお待ちください。
	→ 照射口をお肌しっかりとあてて、OKランプが点灯してからケアしてください(P.21)。
フラッシュが出ない (連続照射時)	→ 照射口をお肌の上しっかりとあててください(P.21)。
	→ スタンバイ状態になっています。電源/レベルボタンでレベルを設定してください(P.20)。
フラッシュが出ない (単発照射時)	→ 照射ボタンを押してください(P.21)。
	→ スタンバイ状態になっています。電源/レベルボタンでレベルを設定してください(P.20)。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
フラッシュが熱く/痛く感じる	→ 電源/レベルボタンを押してレベルを下げてください(P.20)。
	→ ムダ毛が残っています。シェーバーやカミソリでしっかりと除毛してください。
	→ 使用禁止部位を確認してください(P.16)。
	→ お肌が照射口の内側に入り込んでいます。お肌を強く押しあてないでください。
フラッシュがまぶしい	→ 照射口がお肌から浮いています。しっかり密着させてください。
	→ お手持ちのサングラス等をかけてください。
「ブーン」と音がする	→ ファンの動作音です。異常・故障ではありません。

エラー表示について

エラーが発生した場合は、本体の表示パネルにエラーが表示されます。

以下のエラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
	ブザー音が「ピッピッピッ」と3回鳴ります。 ヘッド内が高温となっているため、電源をオフにし約30分休ませてください。
Eと1、2、3、4いずれかが交互に点灯	ブザー音が「ピッピッ…」と20回鳴ります。 ヤーマンコールセンター(P.32)にお問い合わせください。
Eと5が交互に点灯	ブザー音が「ピッピッ…」と10回鳴ります。ヘッドの寿命の可能性あります。 ヤーマンコールセンター(P.32)にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？

A 使い始めはレベル1でご使用ください。慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。フラッシュは多少の熱さを感じますが、お肌には問題ありません。熱さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。シェーバーやカミソリでムダ毛を除毛し、日焼けしていない状態で使用してください。赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。治まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。※顔のケアをするときは必ずスポットアタッチメントをご使用ください。やけどなどの原因となります。

Q 1日の使用頻度はどれくらいですか？

A 1部位5分を上限としてください。※1部位＝ひじ上、ひじ下、ひざ上、ひざ下、ワキ、顔など同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。熱による刺激が強く、肌トラブルの原因となります。

Q 照射直後に、焦げたにおいがするのですが？

A フラッシュによりムダ毛に熱が加わったためです。製品本体からにおいがする場合は、ただちに使用を中止して本体の電源をオフにし、ACアダプターを抜いてください。

Q 家族や友人同士で共有できますか？

A アタッチメントを使用しないボディモードは共有してお使いいただけます。その場合は、必ず本体とアタッチメントをお手入れしてから機器をご使用ください。スポットアタッチメントは共有で使用しないでください。

製品仕様

定 格	DC12V 3.0A
消 費 電 力	待機時約3.3W(瞬間最大約39W)
外 形 寸 法	約68mm×47mm×178mm(W×D×H)
製 品 質 量	約270g
材 質	本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アクリル樹脂、ガラス スポットアタッチメント:ABS樹脂、アルミニウム、ステンレス(照射口)、ナイロン樹脂
製 造 国	日本
付 属 品	スポットアタッチメント 1個 Vデザインツール 1セット ACアダプター 1個 取扱説明書(保証書付)

アフターサービス

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHS

 **0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.32)にご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

Memo

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用光美容器	型番	STA-213
形名	レイボーテ Go VIタイプ		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ (ガラス管(消耗品)は含まれません。)	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<p>ご購入日の見明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。 本</p>		

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品の製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4



www.ya-man.com