



取扱説明書

家庭用美容器

レイボーテ ヴィーナス

STA-209

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~16)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

準備する

ケアする部分の
ムダ毛をシェーバー
やカミソリなどで
除毛してください。



2

電源を
オンにする

電源/レベルボタンを
長押ししてください。



3

レベルを選ぶ

電源/レベルボタンを
押してください。



4

フラッシュを
照射する

照射ボタンを押して
ください。



5

終了する

電源/レベルボタンを
長押ししてください。



もくじ

安全上のご注意	p 3	お知らせ	p 34
各部のなまえとはたらき	p 17	●製品仕様	p 34
お使いになる前に	p 22	●故障かな?と思ったら	p 35
使いかた	p 25	アフターサービス	p 40
使い終わったら	p 32		

動画で確認する

- 使いかたを動画で確認することもできます。下記のQRコードを読み込んでください。

<https://ymn.cm/2GGXAfZ>



■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害^{*}の発生が想定される内容です。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



機器から照射される強い可視および不可視の光の照射が目を傷める可能性があることを示しています。

⚠ 警告（電源に関して）

- 専用のACアダプター以外は使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 電源コードが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター（P.40）にて
専用ACアダプターを購入してください。
- 浴室ででは絶対に充電しない。



禁止

- ACアダプターが傷んだり、壁面コンセント
の差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談
ください。



- ACアダプターを引っ張って本体を移動し
たり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・故障の原因とな
ります。



- ACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因とな
ります。

水かけ
禁止

- 万一、異常が発生したら、ACアダプタ
ーをすぐに抜く。

動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、
異常状態のまま使用しないでください。

- ACアダプターを抜くときは、必ず先端
の電源プラグを持って引き抜く（金属部
に触れないようにする）。また、ぬれた
手で抜き差しはしない。

プラグを
抜く

感電・ショート・発火・故障の原因とな
ります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必
ず電源をオフにし、ACアダプターを壁
面コンセントから抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告（電源に関して）

- タコ足配線をしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- ACアダプターを破損させる・加工する、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- ねじれたコードをそのまま収納しない。

ケーブルに負荷がかかり断線・感電の原因となります。

- 収納時にコードを本体またはACアダプターに巻き付けない。

電源コードに負荷がかかり、断線・感電・ショートの原因となります。



- 必ず交流100～240Vで使用する（無料修理は国内のみ）。ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。

- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

乾いた布などで本体や充電プラグの水気をしっかりと拭き取ってください。



必ず守る

⚠ 危険（ご使用、保管に関して）

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器・人工心肺など生命維持用医用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような人は使用しない。

事故・トラブルの原因となります。

・医師の治療を受けている人・光線力学療法等で光増感剤を使用している人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患
 ・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・てんかん・悪性腫瘍・有熱性疾患・血液疾患・内臓疾患・心臓疾患・皮膚病
 ・黒皮症・アレルギー体质・アトピー性皮膚炎・光過敏症・皮膚トラブルがある人・敏感肌またはお肌の弱い人
 ・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
 ・化粧品により皮膚炎を起こしている人・疲労が激しい人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
 ・妊娠中、生理中、授乳中の人は・眠気をさそう薬を服用中の人は
 ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 ・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患がある人、および治療中の人は・強度近視の人（-6D以上）

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

事故・トラブルの原因となります。

・切り傷・手術（整形手術を含む）をした部位・美容施術をした部位・口内や、唇、粘膜など・にきび
 ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位・かゆみやはれりのある部位・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・のどぼとけ
 ・眼瞼・まぶた・目の周り・日焼けをしている部位・頭部・鼻骨・傷（傷跡など色の濃い部分）・しみ、ホクロ
 ・眉、額、頭髪、うなじ・耳・乳首、乳輪・へそ内部・メイクしている部分・大静脈等血管が見える部位
 ・刺青、タトゥー、ボディペイント

※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。



禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 予供の近くで使用しない。

フラッシュは強い光のため、目を傷める危険性があります。

- フラッシュ使用直後にフィルター（透明ガラス）に触れない。

使用直後のフィルターは高温になるため、指でフィルターに触ると、やけどの原因となります。

- 過剰な連続使用はしない（業務用としての使用など）。10分使用した場合は10分以上休ませる。

けが・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。

- 引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しない。

爆発・火災の原因となります。



禁止

- 目には直接照射しない。光の照射から目を保護するため、まぶたの上や目の近くで機器を使用しない。

- 照射部を直視しない。また、周りの人を見ないようにする。

誤用は目の損傷につながる可能性があります。機器から照射される強い可視および不可視の光が目を傷める可能性があります。

- 暗い部屋で使用しない。

目を傷める原因となります。



禁止

- 照射口を黒いものに向けない。

発煙・発火・故障・けがの原因となります。

- 衣服や頭髪・物に照射しない。

焦げたり、変色・破損の原因となります。

- 粘膜部位へ直接照射しない。

けがをする原因となります。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- お肌に保湿クリームやゲルを塗ったまま使用しない。
けがをする原因となります。
- ファンデーションなどメイクアップ用品をつけた状態でフラッシュ照射をしない。
必ずメイクを落としてから使用してください。やけど・肌トラブルの原因となります。
- 次のような場所で機器の使用・保管しない。
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所
 - ・傾斜・振動、衝撃のある場所・屋外
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・油煙、湯気が直接当たる場所
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
 - 火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。
- サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。



禁止

- 浴室内に放置・保管しない。浴室や水の入った容器の近くで充電しない。
また、浴槽で使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与えるおそれがあります。
説明書の指示を守らない場合、目の損傷（視力低下につながる可能性）や皮膚の損傷の可能性があります。
- 同じ部分に1日2回以上はフラッシュを照射しない。
 - ・過度な照射をしても効果は変わりません。「ケアの周期」（P.23）をお守りください。
 - ・1回の使用中に、照射部分が多少重複しても問題ありません。
 - ・皮膚の損傷は同じ部分に長時間または繰り返し照射した後に発生する可能性があります。



禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 同じ部位に1日5分以上の照射をしない。

皮膚の損傷は同じ部分に長時間または繰り返し照射した後に発生する可能性があります。また、お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

* 1 部位=ひじ上、ひじ下、ひざ上、ひざ下、ワキ、顔、Vライン、Iライン、Oラインなど



禁止

- 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の制限

- 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。

事故・けがの原因となります。

- 機器は子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。

事故・けがの原因となります。



用途以外
禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けが・故障の原因となります。



衝撃禁止

- 機器に重い物を置いたり、使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えない。

けが・故障・ガラス管の割れなどの原因となります。

- 分解や修理・改造はしない。

ガラス管の修理・交換は行わないでください。
安全機能（タッチセンサー機能）を無効にしないでください。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

本製品は一度分解すると防水機能が保持できなくなります。



分解禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 異臭・異常発熱したときは使用を中止し、使用しない。

破損・発火の原因となります。ヤーマンコールセンター（P.40）にご連絡ください。



- 機器に水をつけたり、洗ったりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



- 機器に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電のおそれがあります。

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。ヤーマンコールセンター（P.40）にご連絡ください。

- 照射口が汚れていないか定期的に確認・掃除する。

やけど・故障の原因となります。



⚠ 注意（電源に関して）

- 停電した時は、直ちに電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。
事故のおそれがあります。



必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 使用前に照射口の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。
- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品を使用しない。（保湿のためのクリーム・ローションは除く）
肌トラブルの原因となります。



禁 止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- お肌がフィルター（透明ガラス）に接触しないよう注意する。

動作中はフィルターが非常に高温になります。やけどのおそれがあるため、お肌がフィルターに接触しないようご注意ください。お肌が柔らかい箇所、脂肪が多い箇所に照射する場合はフラッシュ照射口を強く押しあてないでください。ひじ、ひざ等の丸みを帯びている部位への使用は、十分に注意しながらご使用ください。

- 機器をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。

- ワキのケアをした直後に制汗剤を使用しない。

赤みが完全に引くまで使用をお控えください。

- ペットには使用しない。

けがの原因となります。

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める可能性があります。

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。

他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。

- 衣類の上から使用しない。

焦げたり、変色・破損の原因となります。



禁 止

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 顔に使用するときはフェイスモードにして使用する。
- Vライン、Iライン、Oラインに使用するときはVIOモードにして使用する。

お肌を傷める原因となります。

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。

痛みを感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

レベルは少しづつ調節してください。事故・けがの原因となります。

- 以下の項目は必ず守る。

事故・けが・本体の故障の原因となります。

・日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。

・使用後は必ず電源をオフにする。

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- ケア中にまぶしいと感じたときは、サングラスなどをかけてケアをする。

目を傷める原因となります。



必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 成長過程の方は、保護者の管理下で安全に十分配慮の上使用する。異常が起きた際は直ちに使用を中止する。

成長期はホルモンバランスの関係上、肌トラブルが発生したり、ケアにおける効果がみられないことがあります。

- 普段から保湿などして、お肌が乾燥しないようにケアする。

お肌が乾燥していると、製品の効果が正しくあらわれない場合があります。

- 使用前に必ずシェーバーやカミソリでムダ毛を除毛してからフラッシュケアをする。

※毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。

ムダ毛を除毛せずにフラッシュを照射すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。
焦げが発生すると予期せぬ高温となり、肌トラブルの原因となります。

- お肌に毛くずが残っている場合は、必ず取り除く。

フラッシュ照射時に熱く感じことがあります。

- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.32) を参照して、製品に付着した毛くず・汚れなどを取り除く。

焦げ・故障・肌トラブルの原因となります。

- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。

肌トラブルの原因となります。



必ず守る

⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 機器をお手入れする時は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜き、取扱説明書の指示にしたがう。
事故・故障のおそれがあります。
- フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。
24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。また、ケアをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。
- 使用後、お肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなどで十分に冷やす。
ケア後は個人の体質や使いかたにより、お肌が熱をもつことがあります。ほてりなどが気になった場合は、保冷剤や冷やしたタオルなどで処置をしてください。症状が治まらない場合は医師にご相談ください。
- 使用環境温度を守る。
使用できる環境温度は5～35℃です。使用する場所の室温を確認してください。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。故障・破損の原因となります。
- ケアした日は入浴（シャワーは可）、運動、飲酒を控える。
肌トラブルの原因となります。
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。
事故・故障のおそれがあります。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。




発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。


■ 各部のなまえとはたらき

本体

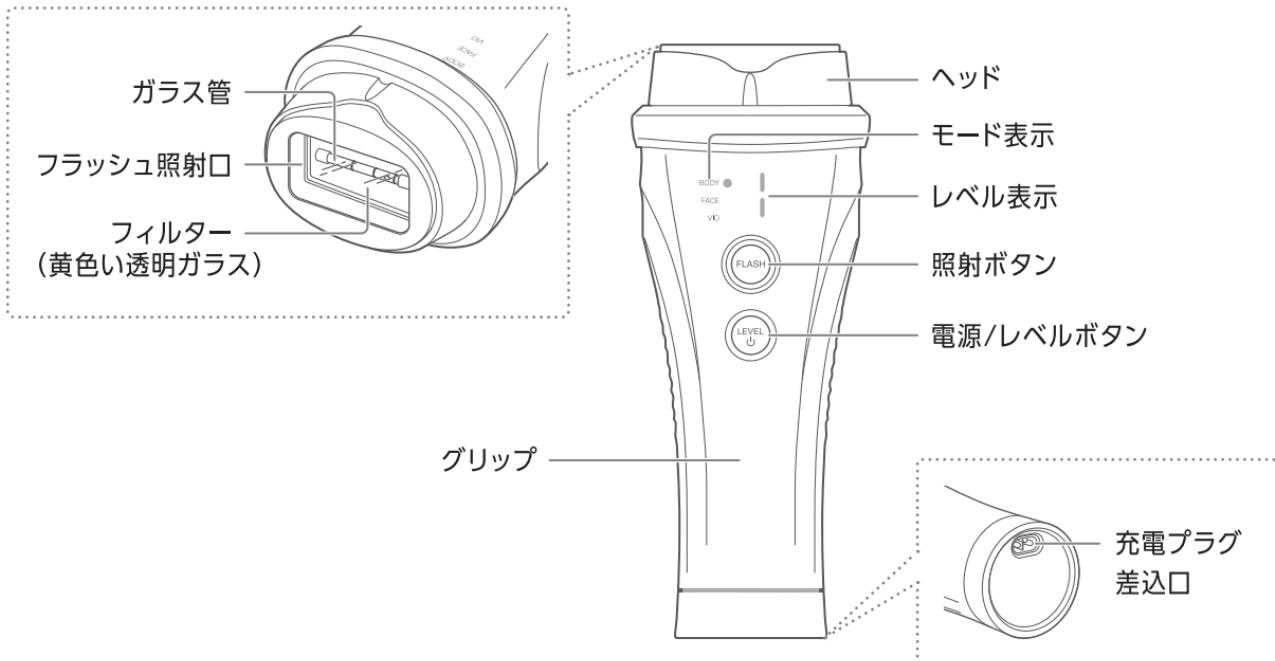

付属品

- フェイスアタッチメント

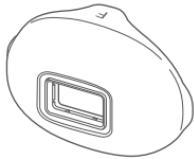

フェイシャルケアに使用 (P.20) VIゾーンケアに使用 (P.21)


※カットフィルターあり (オレンジ色のガラス)

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

- VIアタッチメント*



- Oアタッチメント*

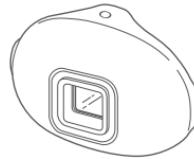

Oゾーンケアに使用 (P.21)

- キャップ

- Vデザインツール

- ACアダプター

- 取扱説明書 (保証書付)

はたらき

安全機能

- タッチセンサー

照射口がお肌にあたったことを感知すると、フラッシュを照射できます。

オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、ブザー音が「ピーッピーッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

冷却機能

電源をオフにした後、約3分間本体内蔵されているファンが作動し続けます。機器を冷却するための機能です。

防水仕様

本製品 (ACアダプターを除く) は、IPX5* (JIS防水保護等級) の防水仕様です。

※あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない製品です。

シャワーや流水、水中での使用には対応していませんので、浴室や水回りでの使用には十分にご注意ください。

濡れた状態では絶対に充電しないでください。


ACアダプターは防水ではありません。

アタッチメントの取り付けかた


アタッチメントは正しい向きでなければ本体に装着できません。

※フェイスアタッチメントを例に説明しています。


●側面

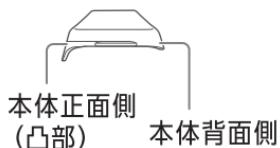

●裏側 (磁石部)

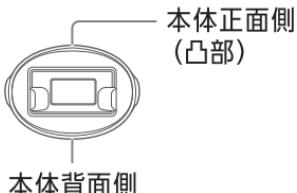

アタッチメントの取り外しかた

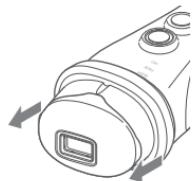

アタッチメントの両側を持って手前に引っ張ります。

本体正面側 (凸部)



アタッチメントの向きを確認し、本体照射口の上からかぶせるようにして装着します。

マグネット式なので、かぶせるだけで装着できます。

※照射口とアタッチメントの間に異物が入り込まないよう注意してください。

※アタッチメントが逆向きの場合は本体にはまりません。

- ・電源がオンの状態でアタッチメントの着脱をおこなうと、「ピッ」とブザー音が鳴ってモードが切り替わり (P.26)、自動的に単発照射 (P.29) レベル1 (P.27)になります。

■ モードの説明

本製品では付属のアタッチメントを取り付けることで(P.19)、以下のモードでお肌をケアできます。


ボディモード

アタッチメントなし



フェイスモード

フェイスアタッチメント使用

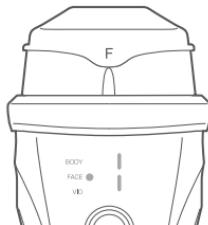

<おすすめ使用部位>

● ウデ



● アシ



● ワキ



● ビキニライン



※ショーツより
外側の部分

フェイスアタッチメントを取り付けると、自動でフェイスモードに切り替わります。

顔のケアをするときは必ずフェイスアタッチメントを装着し、フェイスモードを使用してください。
必ずレベル1から使用してください。

<おすすめ使用部位>

● フェイス
(ほお)



● フェイス
(口まわり)




● 指



※唇には使用できません。

VIOモード

VIアタッチメント
または
Oアタッチメント
使用

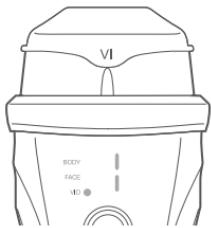

VIアタッチメントまたは

Oアタッチメントを取り付けると、自動でVIOモードに切り替わり、敏感な部位に適したフラッシュを照射します。
Vライン、Iライン、Oラインをケアするときは、ケアする部位にあったアタッチメントを装着してください。

<おすすめ使用部位>

● Vライン



※ショーツより
内側の部分

● Iライン



● Oライン



うしろ側

使用禁止部位

ケアする際は、以下の部位に使用しないでください。



- ・頭部、頭髪、うなじ、額、眉、眼球、まぶた、目の周り、耳、のどぼとけ、口内、唇（上図の  部位）
- ・乳首、乳輪、へそ内部、大静脈等血管が見える部位、日焼けしている部位、粘膜
- ・にきび、しみ、ホクロ、傷（傷跡など色の濃い部分）
- ・手術（整形手術含む）や美容施術をした部位、刺青、タトゥー、ボディペイント、メイクをしている部位

■ お使いになる前に

ケアの前に、以下の内容を必ず確認してください。

ケアの準備

- ケアする部位のムダ毛を、シェーバーやカミソリで必ず除毛してください。

ムダ毛が伸びていたり、お肌の表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。

※毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。

- 本製品を初めてご使用になる際は、必ず照射テストを行ってください。

<照射テスト>



ケアする部位の近くを、単発照射のレベル1から照射します。

体にはボディモード、顔にはフェイスモード、Vライン、Iライン、OラインにはVIOモードで照射してください (P.25~31参照)。

・24時間後にお肌に異常がなければ使用可能です。

- 痛みを感じるレベルでは使用しないでください。

- レベルを調整しながら使用してください。

使用部位によって感じかたが変わりますので、レベルを調整してください。

また、付属のカラーチャートも参考にしてください。


カラー チャートは、十分明るい場所で確認してください。

- 無理に高いレベルで使用しないでください。

特に肌色の濃い人や日焼けした後は、お肌が光を吸収しやすくなりますので、肌トラブルの原因となります。

- ヘッドや照射口、アタッチメントに異常がないことを確認してください。破損や変形があるときは使用しないでください。
 - ・汚れている場合は必ずお手入れをしてください。故障・劣化・やけど・けが・肌トラブルの原因となります。
 - ・お手入れ方法については「お手入れのしかた」(P.32)をご参照ください。
- 衛生上、VIアタッチメント、Oアタッチメントを家族や友人同士等で共有することはおやめください。
 - 使用環境の明るさについて
 - ・使用環境が暗すぎると目を傷める原因となります。
 - ・カラーチャートで確認する場合は、十分に明るい場所で使用してください。
 - ・以下の環境での使用は避けてください。
 - 間接照明の部屋
 - 豆電球など照明が極端に暗い部屋
 - 机の下など影の中

ケアの周期

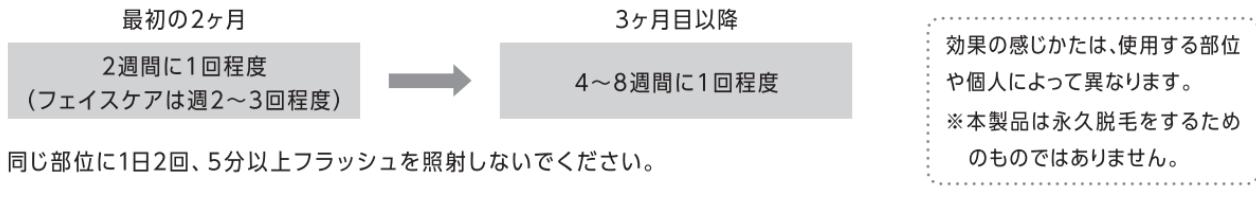

- 過度な使用はしない。
- 注意** 上記頻度を超えて使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら使用してください。
また、1日の使用頻度は必ず守ってください。肌トラブルの原因となります。

充電する



*必ず付属のACアダプターを使用してください。

- ・ACアダプターを接続すると充電が開始されます。
- ・充電中はレベル表示が1セグメントずつ順に点灯し、満充電になると「F」と30秒間表示され、その後消灯します。
- ・室温約25℃の場合、約2時間半で満充電となり、約20分間動作できます（10分間連続使用するとオートオフ機能が動作し、自動で電源がオフになります）。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。
- ※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、ACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

- 本体と充電端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 充電したまま使用できません。使用前にACアダプターを抜いてください。電源を入れたまま充電しようとすると電源がオフになります。
- 浴室では絶対に充電しないでください。

注意

- ACアダプターは壁面コンセントに直接差し込んでください。タコ足配線にすると充電されにくくなる場合があります。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してから使用してください。
- コードが破損した場合は、ACアダプターを交換してください。


■ 使いかた

| 基本的な使いかた

1 電源をオンにする

電源/レベルボタンを長押しします（約3秒）。

モード表示とレベル表示が点灯し、ピピッと音が鳴ったらスタンバイ状態です。

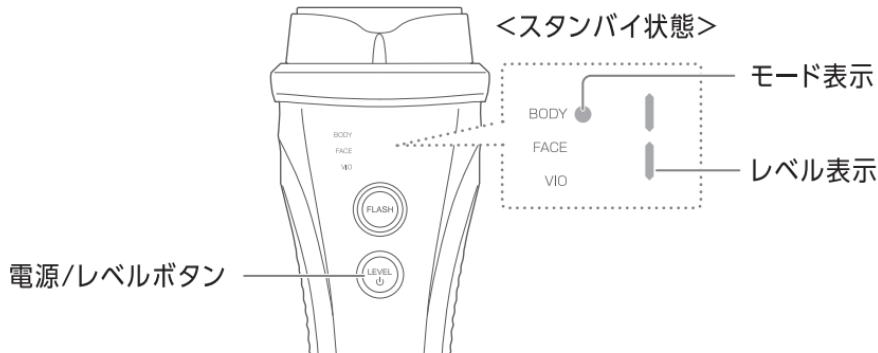

注意

- ご使用の際はACアダプターをはずしてください。本製品は充電しながら使用できません。


2 モードを確認する

モード	アタッチメント	モード表示
ボディモード	アタッチメントなし	BODY ● FACE VIO
フェイスモード	フェイス アタッチメント	BODY FACE ● VIO
VIOモード	VIアタッチメント	BODY FACE VIO
	Oアタッチメント	BODY FACE VIO ●

- ・アタッチメントを装着すると、アタッチメントにあわせて「ピッ」と音が鳴ってモードが切り替わり、自動的に単発照射（P.29）レベル1（P.27）になります。
- ・本体のモード表示でモードを確認してください。
- ・アタッチメントを装着しない場合はボディモードになります。
- ・ケアする部位にあわせて正しいアタッチメントを取り付けてください。

3 レベルを選ぶ

電源/レベルボタンを押すごとに「ピッ」とブザー音が鳴り、レベルを変更できます。

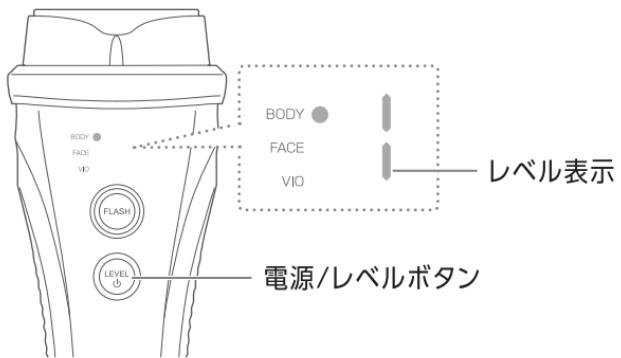

レベルは以下の通りに切り替わります。

→ レベル 1 → 2 → 3 → 4 → 5
(電源オン時)

付属のカラーチャートを参考に、肌色にあわせてレベルを選んでください。

注意

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。

4 ケアする

全モード共通



「ピピッ」とブザー音が鳴ったら、お肌に照射口をあてます。

照射ボタンが白く点灯したら、照射ボタンを押してフラッシュを照射します。

各部位のケアのポイントは、「ケアのポイント」(P.30)をご参照ください。

※イラストはボディモード時です。

注意

- ケアしたい部分全体に照射できるように、少しずつ位置を変えながらケアを行ってください。
- 連続照射で使用するときも、照射箇所を移動させながら使用してください。
- 1箇所に照射したらいったんお肌から離して、次の箇所へ移動させてください。
- 照射口の大きさが、一度にケアできる範囲です。
- 1日に2回以上、同じ部位に照射しないでください。
- 顔やVライン、Iライン、Oラインをケアするときは、必ず正しいアタッチメントを取り付けてください。
- フェイスラインは特にお肌が照射口に入り込みやすいので、フラッシュ照射時は強く押しあてないようにご注意ください。
- 電源オフ後、再度使用するときは必ず10分以上あけてからご使用ください。
連続使用すると故障の原因となります。



●単発照射（1回）<全モード使用可> モード表示点灯

照射ボタンを短押しして、位置を移動させながら1発ずつ照射します。

- ・1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります。

●連続照射（最大10回）<ボディモードのみ> モード表示点滅

電源オン時に照射ボタンを約3秒長押しすると「ピッピッ」とブザー音が鳴り、連続照射のオンオフができます。

※オンオフは照射口をお肌から離した状態で行ってください。

- ・最初の1発目のみ照射ボタンを押してお肌に照射します。
- ・2発目以降は、お肌に照射口をあてると照射できます。必ず1発ずつ位置をずらして使用してください。
- ・10回照射し終わったあと、もう一度お肌に照射口をあて照射ボタンを押すと、再度連続照射できます。
- ・お肌にあてない状態が15秒間続くとブザー音が鳴り、1発目の状態にリセットされます。

●ソフト照射 <VIOモードのみ> モード表示点滅

電源オン時に照射ボタンを約3秒長押しすると「ピッピッ」とブザー音が鳴り、ソフト照射になります。

- ・照射ボタンを短押しして、位置を移動させながら照射します。
- ・弱めのフラッシュを同じ部位に高速連射します。
- ・単発照射の瞬間的な刺激が苦手な方、熱に敏感な方におすすめです。

5

電源をオフにする

- ・電源/レベルボタンを3秒間長押しします。
- ・本体内蔵されたファンが止まったことを確認してください（約3分）。


ケア後は、保冷剤・冷やしたタオルなどで照射したお肌を冷やしてください。その後、化粧水などで照射したお肌を保湿してください。

ケアのポイント

以下のポイントに注意してケアしてください。

●ウデ/アシ

お肌に対して照射口を垂直にあててください。

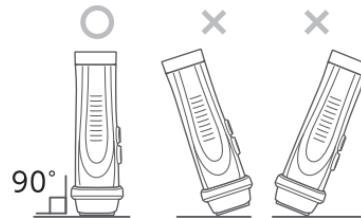

●ワキ

指でお肌を伸ばしながらケアします。

- ・ケア前に、制汗剤などの化粧品類をきれいに拭き取ってください。

●ビキニライン

色素沈着が起きている部分や、お肌の色が濃い部分には低いレベルでご使用ください。

※慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。

※外陰部およびその周辺の粘膜には使用できません。

使
う

●フェイス

必ずメイクを落としてからご使用ください。

- ・ほんのり温かみを感じる程度の強さで行ってください（使用目安：週2～3回）。
- ・鼻下のヒゲ・顎ヒゲなど狭い部分や、角度の急な部分に使用するときは、指でお肌を伸ばしながらケアしてください。
- ・ケア後は直射日光にあたることを避け、ケアをしている期間は日焼けをしないようにしてください。

●VIOゾーン

Vライン

指でお肌を伸ばしながらケアします。

付属品のVデザインツールを使用し形を整える場合は、

Vラインすべての毛を剃ってからフラッシュを照射してください。



I・Oライン

<推奨方法>

床に鏡を置き、鏡をまたいで図のように片ひざを立てます。

鏡を見ながら光をあてる部分を確認してください。

※毛の剃り残しがないか確認してください。

※照射する部位を鏡で確認したのち、鏡を直視せず照射してください。

※粘膜にフラッシュを直接照射しないようにしてください。



注意

- ケアする部位にあったモードを使用する。
やけどなどの原因となります。
- 照射部を直視しない。また、周りの人が見ないようにする。
目を傷める原因となります。

- 顔をケアするときは、照射口をお肌にしっかりと密着させて使用する。
照射口がお肌に密着していないとフラッシュがまぶしく感じます。

■ 使い終わったら

お手入れのしかた

照射口は、使用後に毎回必ずお手入れをしてください。

本体も、故障や動作不良を防ぐため、定期的にお手入れをしてください。

使用後は必ずしっかり水分を拭き取ってください。

照射口

- 1 やわらかい布や綿棒で、汚れや毛くずを取り除く

※指紋などの汚れも拭き取ってください。

フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下・故障・肌トラブルの原因となります。

本体

- 1 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスponジや布で拭き取ってください。

※本体を水洗いしないでください。充電端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。

警告

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

アタッチメント

- 1 本体から取り外し、流水で水洗いする

- 2 やわらかい布で水気を拭き取る

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。



- 本体内部に水が入らないようにお手入れする。
感電・ショート・発火の原因となります。

| 保管のしかた

- 必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のある場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など水気の多い場所での保管はしないでください。

| 保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 機器の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.35) を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.40) までご相談ください。
- 機器が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

製品仕様

定 格 電 源	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約8.0W (本体充電時)
外 形 尺 法	約82mm×65mm×203mm (W×D×H)
製 品 質 量	約450g (本体のみ)
材 質	本体:ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、ABS樹脂、ガラス フェイスアタッチメント:ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、ステンレス(照射口) VIアタッチメント:ポリカーボネート樹脂、ステンレス(照射口)、ナイロン樹脂、ガラス Oアタッチメント:ポリカーボネート樹脂、ステンレス(照射口)、ナイロン樹脂、ガラス キャップ:ポリカーボネート樹脂、ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
製 造 国	日本
付 属 品	フェイスアタッチメント 1個 VIアタッチメント 1個 Oアタッチメント 1個 キャップ 1個 Vデザインツール 1セット ACアダプター 1個 取扱説明書(保証書付)

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- 電池残量がありません。充電してください（P.24）。
- 電源/レベルボタンを3秒間長押しして、電源をオンにしてください。
- 充電中は電源が入りません。ACアダプターを抜いてください。

操作できない

- 「エラー表示お知らせについて」（P.37）を確認してください。

電源が切れる

- オートオフ（P.18）になっています。再度使用するときは10分以上あけてからご使用ください。
- 充電が不足しています。充電してください（P.24）。

フラッシュが出ない

- 照射準備が完了していません。「ピピッ」と鳴るまでお待ちください。
- 照射口をお肌にしっかりとあてて、照射ボタンが点灯してからケアしてください（P.28）。
- ガラス管の寿命です。「エラー表示お知らせについて」（P.37）を確認してください。

フラッシュが出ない
(連続照射時)

- 照射口をお肌の上にしっかりとあててください（P.29）。
- 電源/レベルボタンでレベルを設定してください（P.27）。

こんな症状

考えられる原因と対処法

フラッシュが出ない (単発照射時)

- 照射ボタンを押してください (P.29)。
- 電源/レベルボタンでレベルを設定してください (P.27)。

フラッシュが熱く/ 痛く感じる

- 電源/レベルボタンを押してレベルを下げてください (P.27)。
- ムダ毛が残っています。シェーバーやカミソリでしっかりと除毛してください。
- 使用禁止部位を確認してください (P.21)。
- お肌が照射口の内側に入り込んでいます。お肌に強く押しあてないでください。

フラッシュがまぶしい

- 照射口がお肌から浮いています。しっかりと密着させてください。
- お手持ちのサングラス等をかけてください。

「ブーン」と音がする

- 本体に内蔵されているファンの動作音です。異常・故障ではありません。

エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合は、本体のレベル表示にエラー情報が表示されます。

以下のエラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
EとHが交互に点灯	ブザー音が「ピッピッピッ」と5回鳴り、自動で電源がオフになります。 ヘッド内が高温となっているため、約30分休ませてください。
Eと1が交互に点灯	ブザー音が「ピッピッピッ」と5回鳴り、自動で電源がオフになります。 ガラス管の寿命ですので、ヤーマンコールセンター（P.40）にお問い合わせください。
Eと2～5のいずれかが交互に点灯	ブザー音が「ピッピッピッ」と5回鳴り、自動で電源がオフになります。 ヤーマンコールセンター（P.40）にお問い合わせください。

| よくあるご質問

Q フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？

- A
- 使い始めはレベル1でご使用ください。
 - 慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。フラッシュは多少の熱を感じますが、お肌には問題ありません。
 - 热さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。
 - シーバーやカミソリでムダ毛を除毛し、日焼けしていない状態で使用してください。
 - 赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。治まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。
※顔のケアをするときは必ずフェイスアタッチメントを、デリケートゾーンをケアするときはVIアタッチメントかOアタッチメントをご使用ください。やけどなどけがの原因となります。

Q 1日の使用頻度はどれくらいですか？

- A
- 1部位5分を上限としてください。
※1部位=ひじ上、ひじ下、ひざ上、ひざ下、ワキ、顔、デリケートゾーンなど
 - 同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。熱による刺激が強く、肌トラブルの原因となります。

Q 照射直後に、焦げた
においがするのですが？

A フラッシュによりムダ毛に熱が加わったためです。
製品本体からにおいがする場合は、ただちに使用を中止して本体の
電源をオフにしてください。

Q お手入れや保管は
どうするのですか？

A

- 水で温らせて固くしぶった布で本体表面の汚れを拭き取った後に、
保管してください。(P.32)
- アタッチメントを本体から取り外し、必ず流水で水洗いしてください。
(ただし、水中にしづめないようにしてください。)
- 高温多湿の場所では保管しないでください。

Q 浴室で使用できますか？

A 本体は浴室で使用いただけますが、水中にしづめたり、シャワーや流水
をあてないでください。また、浴室では充電しないでください。

Q 家族や友人同士で共有
できますか？

A アタッチメントを使用しないボディモードや、フェイスアタッチメント
を使用したケアでは共有してお使いいただけます。その場合は、必ず本体
やアタッチメントをお手入れしてから機器をご使用ください。
VIアタッチメント、Oアタッチメントは共有で使用しないでください。

■ アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。


日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。


| 内蔵電池の取り出し方法

- ・電池を取り出す前に、必ず電源をオフにしてください。
- ・電池を取り出す際はドライバーを使用し、おけががないように十分に注意して取り出してください。
- ・電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- ・取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。


1 先の細いものなどを
使って、ヘッド付け根
部分のリング部品を
取り外す。

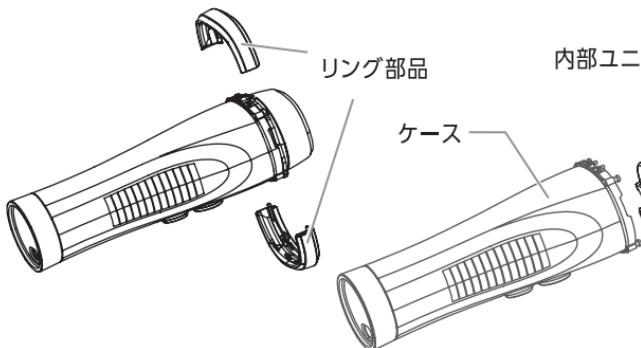

2 4本のネジを外し、ケース
から内部ユニットを抜き
取る。

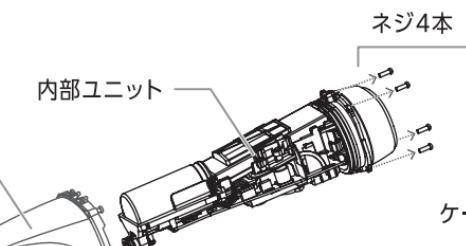

3 4本のネジを外し、
バッテリーを取り外す。

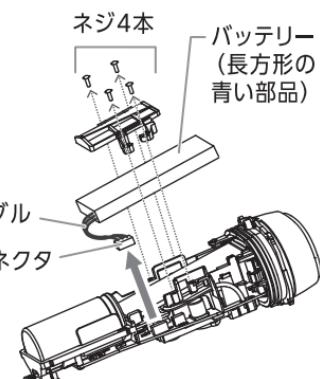

上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。



お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.40）にご相談ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

- (二) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (リ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用光美容器	型番	STA-209
形名	レイボーテ ヴィーナス		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ (ガラス管(消耗品)は含まれません。)	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話			
※販売者名	<p>ご購入日の記入欄に明細を貼付 または本書と一緒にあわせて 保管してください。</p> <h1>見本</h1>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ
(<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)
をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話・PHS

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



www.ya-man.com