



## 取扱説明書

防水コードレス光美容器  
レイボーテヴィーナス  
ビューティースキン  
YJEA7

\* 防水…IPX7

### はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~12)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

# 使いかたの流れ

1

準備する


ケアする部分の  
ムダ毛をシェーバーや  
カミソリなどで  
除毛してください。



2

電源を  
オンにする

電源/レベルボタンを  
長押ししてください。

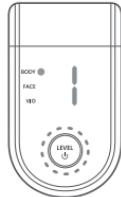

3

レベルを選ぶ


電源/レベルボタンを  
押してください。



4

フラッシュを  
照射する

照射ボタンを押して  
ください。

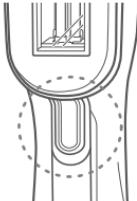

5

終了する

電源/レベルボタンを  
長押ししてください。



# もくじ

使用前

準備

使う

お手入れ

お知らせ

安全上のご注意	p3	お知らせ	p34
海外でのご使用について	p12	●故障かな?と思ったら	p34
各部のなまえとはたらき	p13	●製品仕様	p39
モードの説明	p15	アフターサービス	p40
お使いになる前に	p17		
使いかた	p20		
使い終わったら	p32		

## ■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### 注意区分について



**危険**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



**警告**  
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**  
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害<sup>\*</sup>の発生が想定される内容です。

\* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

### 図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



機器から照射される強い可視および不可視の光の照射が目を傷める可能性があることを示しています。

## ⚠ 警告（電源に関して）

- ACアダプターが傷んだり、差し込みがゆる

いときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- 専用のACアダプター以外は使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- ACアダプターを破損、加工しない。

束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。



## ⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

## ⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・妊娠初期から出産直後までの

・自己免疫疾患のある人 ・黒皮症の人 ・てんかんの疾患がある人 ・光過敏症の人

・光線力学療法等で光増感剤を使用している人 ・幼児や自分で意思表示できない人

次の人をご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人

・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人

・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の

・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩)

・のど ・鼻 ・頭部 ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位

・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・傷跡やしみなど色の濃い部分 ・眉、額、頭髪(もみあげ含む) ・耳 ・乳首、乳輪 ・うなじ ・ヘそ内部

・大静脈等血管が見える部位 ・刺青、タトゥー、ボディペイント



禁 止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- オーバーケアをしない。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。

身体に危害を与える原因となります。

- 使用前にヘッド、フラッシュ照射口、アタッチメントの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。

けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

- 次のような場所で機器の使用・保管・充電しない。

- ・浴室、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く（機器の使用は可）
- ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
- ・傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・強い電波や磁気の発生する場所
- ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
- ・油煙、湯気の当たる場所（機器の使用は可）
- ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
- ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。  
故障の原因となります。
- 通電したまま放置しない。  
火災・事故の原因となります。
- 子供の近くで使用しない。  
フラッシュは強い光のため、目を傷める原因となります。  
周りの人が直視しないよう配慮してください。
- 暗い部屋で使用しない。また、照射部をのぞき込んだり直視したりしない。  
目を傷める原因となります。
- 衣服や物に照射しない。  
焦げたり、変色・破損の原因となります。



禁止

- フラッシュ照射口を黒いものに向けない。  
発煙・発火・故障・けがの原因となります。
- 使用中および直後にフィルター（透明ガラス）に触れない。  
使用中のフィルターは高温になるため、触るとやけどの原因となります。
- ファンが作動しない（「ブーン」と音がない）ときは使用しない。  
冷却用のファンが故障している可能性があります。  
そのまま使用すると発煙・発火・故障・けがの原因となります。  
お買い上げの販売店またはヤーマンコールセンター（P.40）にご連絡ください。
- 過剰な連続使用はしない（業務用としての使用など）。10分使用した場合は20分以上休ませる。  
けが・発熱・キセノンランプの割れなどの原因となります。



禁止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。事故・けがの原因となります。
- 本体、ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。事故・けがの原因となります。



- 分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。キセノンランプの修理・交換はしないでください。安全機能（タッチセンサー等）を無効にしないでください。



- 地中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。



発火注意

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電の原因となります。

- 使用後および機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・事故の原因となります。

- 使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにし、プラグを抜く。

充電が終わったときはACアダプターをコンセントから抜いてください。



プラグを  
抜く

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。

本体の故障の原因となります。

- 使用環境温度を守る。

使用環境温度は10～35°Cです。使用する場所の室温を確認してください。故障・破損の原因となります。

場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。



必ず守る

- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電の原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。

故障・けがの原因となります。



用途以外  
禁止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。  
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。  
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。  
事故やけがの原因となります。
- 強く押しあてず、1ヶ所に集中して使用しない。  
必要以上に強く押し付けたり1ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。
- 水中では使用しない。  
水中での使用には対応しておりませんので、浴室や水回りでの使用には十分にご注意ください。



禁 止

- 同じ部分に1日2回以上照射しない。  
(ソフト照射は3連続高速照射を1回とします。)
  - ・過度な長時間又は繰り返しの照射はお肌を傷める原因となります。  
「ケアの周期」(P.18)をお守りください。
  - ・1回の使用中に、照射範囲が多少重なる程度は問題ありません。
- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品、制汗剤等を使用しない。（保湿のためのクリーム・ローションは除く）  
肌トラブルの原因となります。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。  
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。  
レベルは少しづつ調節してください。  
事故・けがの原因となります。



禁 止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。

使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

お肌に合わないときはご使用をおやめください。

翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

- ケアした日は激しい運動、飲酒を控える。

肌トラブルの原因となります。

- フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。

24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。

また、ケアをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。

- 使用後は必ず本体の水分をふき取る。

また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

本体がぬれたままの状態で放置すると、故障の原因となります。

- お肌に毛くずが残っている場合は、毛くずを取り払ってから使用する。

照射時に熱く感じることがあります。



必ず守る

## ■ 海外でのご使用について

### ⚠ 警告

- 必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)  
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。  
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



中文




TO ACCESS SCAN WITH  
YOUR CAMERA PHONE

[https://www.ya-man.co.jp/  
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

## ■ 各部のなまえとはたらき

### 本体

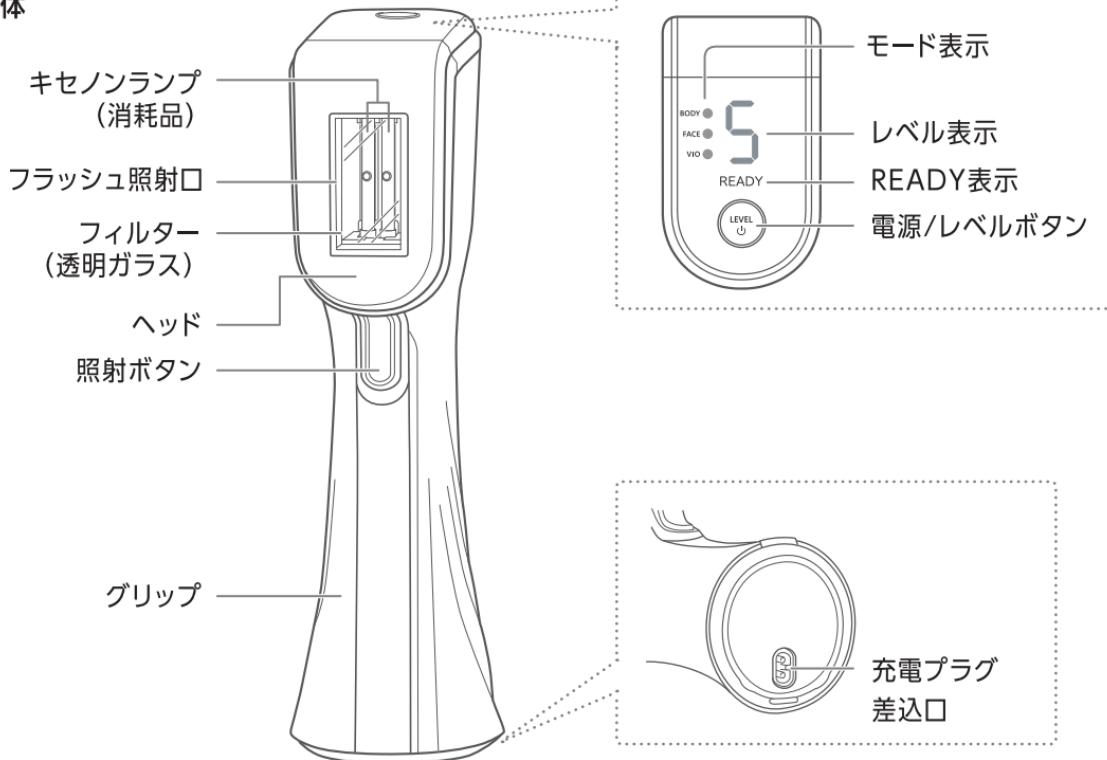

※キセノンランプは消耗品です。

## 付属品

- FACEアタッチメント



フェイスケア  
に使用 (P.15)

- VIアタッチメント



VIゾーンケアに  
使用 (P.16)

- Oアタッチメント



Oゾーンケアに  
使用 (P.16)

- Vデザインツール

- ACアダプター

- 取扱説明書（保証書付）

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

## はたらき

### 安全機能

- タッチセンサー

フラッシュ照射口がお肌にあたったことを感知すると、フラッシュを照射できます。

### オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、ブザー音が「ピーッピーッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

### 冷却機能

照射後、電源をオフした際に、約5分間本体内蔵されているファンが作動し続けます。機器を冷却するための機能です。再度使用するときは電源をオフしてから20分以上あけてご使用ください。

### 防水仕様

本製品(ACアダプターを除く)は、IPX7\*(JIS防水保護等級)の防水仕様です。

\*水中での使用には対応しておりませんので、浴室や水回りでの使用には十分にご注意ください。

- ・濡れた状態では絶対に充電しないでください。

- ・ACアダプターは防水ではありません。

### 充電目安表示

充電池の残量が少なくなったことをお知らせします。レベル表示に「L」と表示され、「ピーッ」と5回ブザーが鳴ったら、電池残量が少なくなった合図です。次回使用時までに充電してください。

### 高温検知

本体に熱がたまつた場合、安全のため自動で電源がオフになります。


再度使用するときは電源をオフしてから必ず30分以上あけてご使用ください。

## ■ モードの説明

本製品では付属のアタッチメントを取り付けることで(P.22)、以下のモードでお肌をケアできます。

### BODYモード

アタッチメントなし

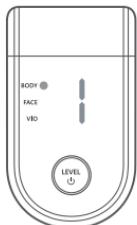

#### <おすすめ使用部位>


- ・ウデ



- ・アシ




- ・背中

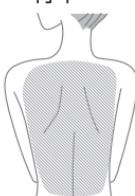

- ・ワキ




- ・ビキニライン

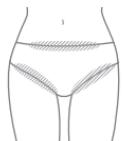

※ショーツより  
外側の部分

### FACEモード

FACEアタッチメント使用

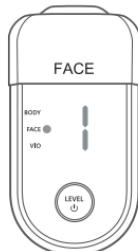

FACEアタッチメントを取り付けると、自動でFACEモードに切り替わります。

顔のケアをするときは必ずFACEアタッチメントを装着し、FACEモードを使用してください。

必ずレベル1から使用してください。

#### <おすすめ使用部位>

- ・フェイス  
(ほお)



- ・フェイス  
(口まわり)




- ・指



※唇には使用できません。

## VIOモード

VIアタッチメント  
または  
Oアタッチメント  
使用

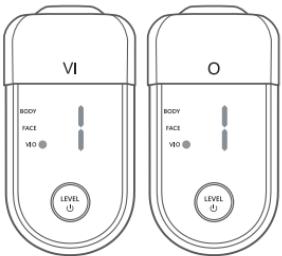

VIアタッチメントまたは  
Oアタッチメントを取り付けると、自動でVIOモードに  
切り替わり、敏感な部位に適したフラッシュを照射します。  
Vライン、Iライン、Oラインをケアするときは、ケアする  
部位にあったアタッチメントを装着してください。

### <おすすめ使用部位>

#### ● Vライン



※ショーツより  
内側の部分

#### ● Oライン



うしろ側

#### ● Iライン




※男性器などIラインよりも  
内側への照射はしないで  
ください。

## 使用禁止部位

ケアする際は、以下の部位に使用しないでください。

(下図の 部位)

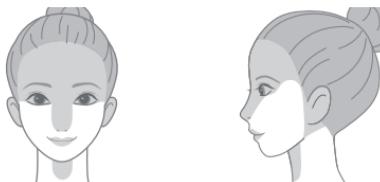

- ・口内や粘膜など
- ・眼球
- ・まぶた(眼窩)
- ・のど
- ・頭部
- ・鼻
- ・膨らんだホクロ
- ・ウイルス性のイボ
- ・骨折をしている部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
- ※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
- (施術例:ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
- ・傷跡やしみなど色の濃い部分
- ・眉、額、頭髪（もみあげ含む）
- ・耳
- ・うなじ
- ・乳首、乳輪
- ・へそ内部
- ・大静脈等血管が見える部位
- ・刺青、タトゥー、ボディペイント

## ■ お使いになる前に

ケアの前に、以下の内容を必ず確認してください。

### ケアの準備

- ケアする部位のムダ毛を、シェーバーやカミソリで必ず除毛してください。

ムダ毛が伸びていたり、お肌の表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。

また、お肌に毛くずが残っている場合は、毛くずを取り払ってください。

※毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。

- ヘッドやフラッシュ照射口、アタッチメントに異常がないことを確認してください。破損や変形があるときは使用しないでください。

・ごみや毛くずが付着している場合や、汚れている場合は、必ず拭き取ってください。

故障・劣化・やけど・けが・肌トラブルの原因となります。

・お手入れ方法については「お手入れのしかた」(P.32)をご参照ください。

- 本製品を初めてご使用になる際は、必ず照射テストを行ってください。

<照射テスト>



ケアする部位の近くを、単発照射のレベル1から照射します。

体にはBODYモード、顔にはFACEモード、Vライン、Iライン、OラインにはVIOモードで照射してください (P.20~30参照)。

・24時間後にお肌に異常がなければ使用可能です。

- 成長過程の方は、保護者の管理下で十分に安全を配慮して使用し、異常が起きた際は、直ちに使用を中止してください。成長期はホルモンバランスの関係上、お肌へのダメージが発生したり、ケアにおける効果がみられないことがあります。

- 衛生上、VIアタッチメント、Oアタッチメントを家族や友人同士等で共有することはおやめください。
- 使用環境の明るさについて
  - ・使用環境が暗すぎると目を傷める原因となります。
  - ・以下の環境での使用は避けてください。
    - 間接照明の部屋
    - 豆電球など照明が極端に暗い部屋
    - 机の下など影の中
- スキントーン（肌の色合い）は明るい場所でカラーチャートにて確認してください。  
(カラーチャートについては同梱の「～安全にご使用いただくために～」をお読みください。)

## ケアの周期

最初の2ヶ月

2週間に1回程度  
(フェイスケアは週2~3回程度)

3ヶ月目以降

4~8週間に1回程度



同じ部分に1日2回以上照射しないでください。  
(ソフト照射は3連続高速照射を1回とします。)

※効果を感じにくい場合は、お肌の状態を確かめた上で、VIOライン以外については3日に1回を限度に、VIOラインについては1週間に1回を限度にしてお試しください。

効果の感じかたは、使用する部位  
や個人によって異なります。

※本製品は永久脱毛をするため  
のものではありません。

- 過度な使用はしない。

## 注意

上記頻度を超えて使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら使用してください。  
また、1日の使用頻度は必ず守ってください。肌トラブルの原因となります。

## 充電する



- ・ACアダプターを接続すると充電が開始されます。
- ・充電中はレベル表示が1セグメントずつ順に点灯し、満充電になると「F」と1分間表示され、その後消灯します。
- ・室温約25°Cの場合、約3時間で満充電となり、約30分間動作できます。電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。
- ※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、ACアダプターの差し込みがゆるんでいないか確認してください。

## 注意

- ・本体と充電端子に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。水滴が残ったまま充電すると、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- ・充電したまま使用できません。使用前にACアダプターを抜いてください。電源を入れたままACアダプターを本体に接続しないでください。電源がオフになります。
- ・照射後、電源をオフにした直後はファンが作動します。(照射せずに電源をオフにした際は作動しません) ファンが作動中は、ACアダプターを本体に接続しないでください。
- ・浴室では絶対に充電しないでください。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してから使用してください。
- ・コードが破損した場合は、ACアダプターを交換してください。

# ■ 使いかた

## | 基本的な使いかた


### 1 電源をオンにする

電源/レベルボタンを長押しします（約3秒）。「ピピッ」と音が鳴り、電源がオンになります。

モード表示とレベル表示が点灯し「ピピッ」と音が鳴ったらスタンバイ状態です。

電源をオンしたときは単発照射のレベル1に設定されています。

<スタンバイ状態>

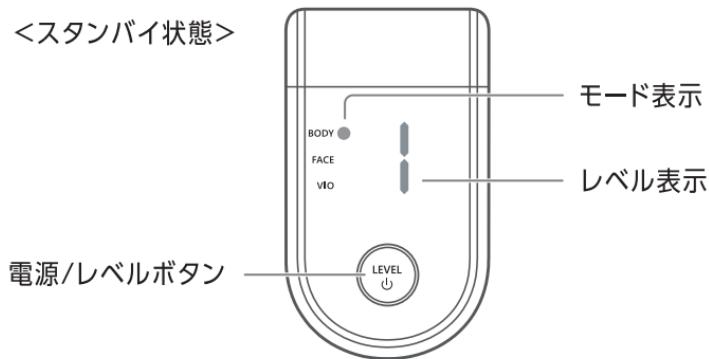

使う

## 注意

- ご使用の際はACアダプターをはずしてください。本製品は充電しながら使用できません。

## 2

## モードを設定する


- 電源がオンになっているときにアタッチメントを装着すると、アタッチメントにあわせて「ピッ」と音が鳴ってモードが切り替わり、自動的に単発照射(P.25)レベル1(P.23)になります。

モード	アタッチメント	モード表示
BODYモード	アタッチメントなし	
FACEモード	FACE アタッチメント	
VIOモード	VIアタッチメント	
	Oアタッチメント	

- 本体のモード表示でモードを確認してください。
- ケアする部位にあわせて正しいアタッチメントを取り付けてください。

## アタッチメントの取り付けかた

アタッチメントは正しい向きでなければ本体に装着できません。

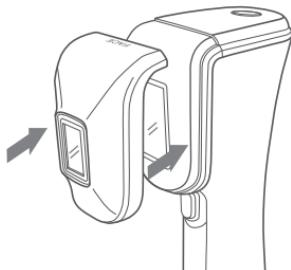

※FACEアタッチメントを例に説明しています。

アタッチメント文字が印字されている面を上にして、  
本体のフラッシュ照射口の上からかぶせるようにして装着します。  
マグネット式なので、かぶせるだけで装着ができます。


※フラッシュ照射口とアタッチメントの間に異物が入り込まないよう  
注意してください。

※アタッチメントが逆向きの場合は本体に装着できません。

- ・電源がオンの状態でアタッチメントの着脱をおこなうと、「ピッ」とブザー音が鳴つてモードが切り替わり(P.21)、自動的に単発照射(P.25) レベル1(P.23)になります。

使う


## アタッチメントの取り外しかた

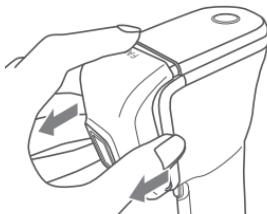

アタッチメントの上部と両側を持って  
手前に引っ張ります。

### 3 レベル/照射方法を選ぶ


電源/レベルボタンを押すごとに「ピッ」とブザー音が鳴り、レベル・照射方法を変更できます。

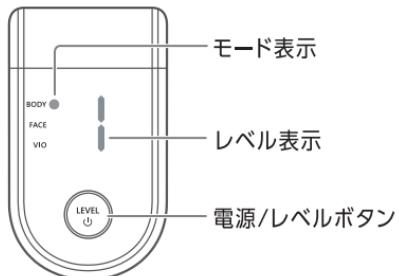


レベルと照射方法は以下の通りに切り替わります。

照射方法が変わるたびに「ピピッ」とブザー音が鳴ります。


#### • BODYモード時

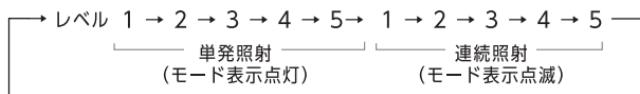

#### • FACEモード時

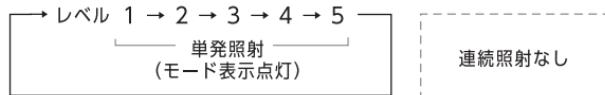

#### • VIOモード時

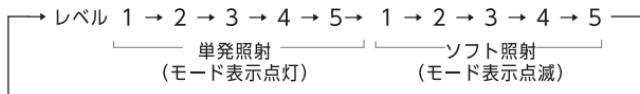


## 注意

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。

## 4 ケアする

### 全モード共通

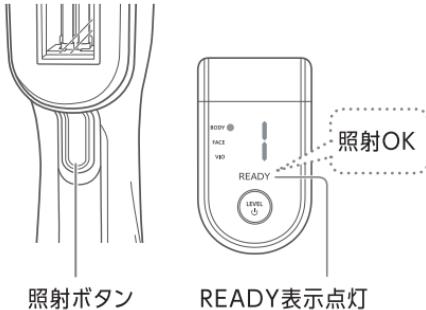

※イラストはBODYモード時です。

「ピピッ」とブザー音が鳴ったら、お肌にフラッシュ照射口をあてます。READY表示が点灯したら、照射ボタンを押してフラッシュを照射します。各部位のケアのポイントは、「ケアのポイント」(P.27)をご参照ください。

※水中での使用には対応しておりませんので、浴室や水回りでの使用には十分にご注意ください。

※ケア中にまぶしいと感じたときは、サングラスなどをかけてケアしてください。目やお肌を傷める原因となります。

- ・**設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。**
- ・本製品は連続照射が続くとヘッドが熱くなり、お客様に危険性が及ぼないよう照射間隔を調整してヘッド部の過剰な発熱を防ぐ仕様となっております。ヘッド部の発熱状況や使用環境により照射間隔は変化します。

## 注意

- 1ヶ所に照射したら1度お肌から離して、少しづつ照射位置を移動させながら使用してください。
- フェイスラインは特にお肌がフラッシュ照射口に入り込みやすいので、フラッシュ照射時は強く押しあてないようにご注意ください。
- 再度使用するときは電源をオフしてから20分以上あけてご使用ください。  
連続使用すると故障の原因となります。
- お肌がフィルター（透明ガラス）に接触しないよう注意してください。




## ●単発照射<全モード使用可> モード表示点灯

照射ボタンを短押しして、位置を移動させながら1発ずつ照射します。

1発ごとに位置を決めて照射したい場合におすすめです。

- 電源オン時やアタッチメント着脱をした時は単発照射の状態です。

- 1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります。(設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。)

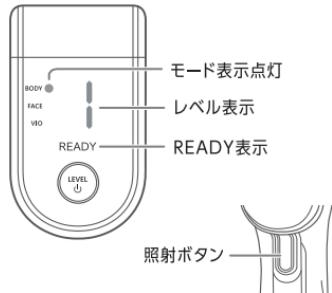

## ●連続照射<BODYモード> モード表示点滅

照射ボタンを1度短押しすると、照射ボタンを押さずに連続して照射します。

手が届きづらい部位や目視しづらい部位の照射におすすめです。

①照射ボタンを1度短押しでスタンバイ状態にします。

スタンバイ状態でのREADY表示は、チャージ中は点滅、照射可能な状態では点灯します。

②READY表示が点灯した状態でお肌にフラッシュ照射口をあてると照射ボタンを押さずに照射されます。

照射するとREADY表示が消灯し、フラッシュ照射口を1度お肌から離す事で、点滅または点灯に戻ります。


お肌に当てる→離すを繰り返す事で、連続照射ができます。

- 連続照射を停止したい場合は、照射ボタンを短押しすると、READY表示が消灯して停止状態になります。

- お肌にあてない状態が約30秒間続くと、ピピッとブザー音が鳴り、停止状態になります。

- もう1度照射ボタンを短押しでREADY表示が点灯すると、再度連続照射できます。

- 1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります。(設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。)

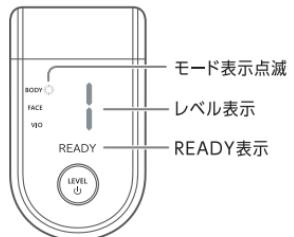

## ●ソフト照射 <VI/Oモードのみ> モード表示点滅

1回のフラッシュの強さを3分割して同じ部位に高速照射することで痛みを軽減します。

単発照射の瞬間的な刺激が苦手な方、熱に敏感な方におすすめです。

- ・照射ボタンを短押しして、位置を移動させながら照射します。
- ・3連射するごとに、数秒のチャージ時間があります。(設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。)




## ケアのポイント

以下のポイントに注意してケアしてください。

### ●ウデ/アシ

お肌に対してフラッシュ照射口を垂直にあててください。

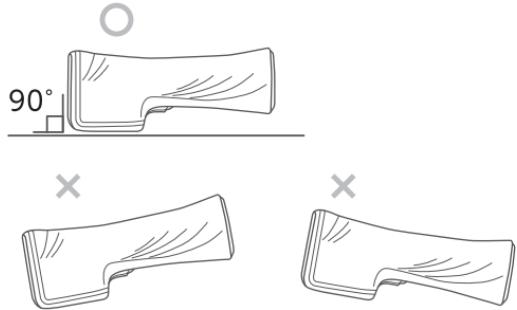

### ●ワキ

指でお肌を伸ばしながらケアします。

- ・ケア前に、制汗剤などの化粧品類をきれいに拭き取ってください。

### ●ビキニライン

色素沈着が起きている部分や、お肌の色が濃い部分には低いレベルでご使用ください。

※慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。

### ●フェイス

ファンデーションなど、メイクアップ用品をつけた状態での照射は避けてください。

やけどや肌トラブルの原因となります。


- ・ほんのり温かみを感じる程度の強さで行ってください。
- ・鼻下のヒゲ・顎ヒゲなど狭い部分や、角度の急な部分に使用するときは、指でお肌を伸ばしながらケアしてください。
- ・ケア後は直射日光にあたることを避け、ケアをしている期間は日焼けをしないようにしてください。
- ・フラッシュ照射口をお肌にしっかりと密着させ、フラッシュが目に入らないよう注意して照射してください。

## ●背中

- ・髪の長い方は、髪の毛を必ずまとめてください。
- ・鏡台などの大きな鏡を背にし、手鏡を持ってください。
- ・合わせ鏡にして、手鏡に照射部が映るように手鏡の位置を調節してください。
- ・照射前に鏡を用いて、背中にムダ毛/剃り残しの毛が残っていないか、傷や発疹、炎症等がないかご確認ください。  
※ムダ毛/剃り残しの毛に照射熱が加わりますと、においが感じられる原因となります。



- ・肩甲骨あたりを基準に図のように区分けし、左右それぞれ、製品を持ち替えて照射してください。

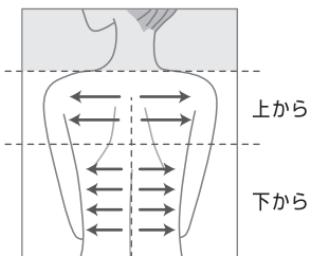

左手で持って照射 右手で持って照射

## ●VIOゾーン

### Vライン

指でお肌を伸ばしながらケアします。

色素沈着が起きている部分や、お肌の色が濃い部分には低いレベルでご使用ください。

※慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。


付属品のVデザインツールを使用し形を整える場合は、

Vラインすべての毛を剃ってからフラッシュを照射してください。




### <Vデザインツールについて>

トライアングル

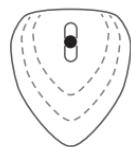


ミニ  
トライアングル

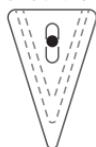

オーバル



スクウェア

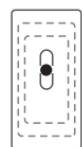

### ● つまみ部分

4種のデザインの中からお好きな形に

Vラインを整えることができます。

それぞれ3段階の大きさに調整可能です。

### <使いかた>

#### ① 形を選び、大きさを決める

#### ② 適した大きさの点線に沿ってハサミで切る

※大きいサイズから小さいサイズへと徐々に  
大きさを調整してください

#### ③ Vラインの毛を剃る

※毛を残したい場合でも必ず  
すべての毛を剃ってください

#### ④ つまみ部分を片側に押し出す

#### ⑤ 機器を持たない手の指でツールのつまみ 部分を押さえ、Vラインに密着させる

#### ⑥ 本体でツールの周りを照射する

※2回目以降も1回目と同じツールを同じ場所にあてて  
ケアしてください

## I・Oライン

<おすすめの使いかた>

床に鏡を置き、鏡をまたいで図のように片ひざを立てます。

鏡を見ながら光をあてる部分を確認してください。

色素沈着が起きている部分や、お肌の色が濃い部分には低いレベルでご使用ください。

※慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。

※毛の剃り残しがないか確認してください。

※照射する部位を鏡で確認したのち、鏡を直視せず照射してください。


※粘膜にフラッシュを直接照射しないようにしてください。

照射しにくい場合は、足をさらに開き臀溝（お尻の割れ目）を開くよう  
に手でお肌を伸ばしてください。

※男性器などIラインよりも内側への照射はしないでください。



上からみた図

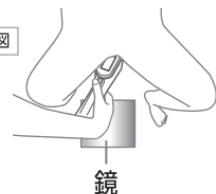

- ケアする部位にあったモードを使用してください。  
やけどなどの原因となります。
- 照射部を直視しないでください。また、周りの人が見ないようにしてください。  
目を傷める原因となります。
- 普段から保湿などして、お肌が乾燥しないようにケアしてください。  
お肌が乾燥していると、製品の効果が正しくあらわれない場合があります。

## 注意

## 5 電源をオフにする

- ・電源/レベルボタンを約3秒間長押しします。
- ・機器を冷却するため、照射後、電源をオフした際に、約5分間本体に内蔵されているファンが作動し続けます。
- ・ファンが作動中は、ACアダプターを本体に接続しないでください。故障の原因となります。
- ・本体に内蔵されたファンが止まったことを確認してください（電源オフから約5分後）。
- ・使用後は毎回、「使い終わったら」(P.32)を参照して、製品に付着した皮脂汚れや美容液などを取り除いてください。

使用後、お肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなどで十分に冷やしてください。

ケア後は個人の体質や使い方により、お肌が熱を持つことがあります。ほてりなどが気になった場合は、保冷剤や冷やしたタオルなどで処理してください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。

# ■ 使い終わったら

## お手入れのしかた

機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。肌トラブルの原因となります。

本体も、故障や動作不良を防ぐため、定期的にお手入れをしてください。

使用後は必ず電源をオフにし、しっかり水分を拭き取ってください。

### フラッシュ照射口

- 1 やわらかい布や綿棒で、汚れや毛くずを取り除く

※指紋などの汚れも拭き取ってください。

フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下・故障・肌トラブルの原因となります。

### 本体

- 1 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

※充電プラグ差込口に水滴がついている場合は、水滴をしっかり拭き取ってください。

### アタッチメント

- 1 本体から取り外し、流水で水洗いする

- 2 やわらかい布で水気を拭き取る

### Vデザインツール

- 1 流水で水洗いする

- 2 やわらかい布やティッシュで水気を拭き取る

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、

除光液、灯油などの溶剤や薬品類、

磨き粉で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



## | 保管のしかた

- 必ず水分を拭き取り十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
- ストーブやヒーターのそばなど高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など水気の多い場所での保管はしないでください。

## | 保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 機器の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.34) を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.40) までご相談ください。
- 機器が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

## ■ お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

### こんな症状

### 考えられる原因と対処法

電源が入らない	●電池残量がありません。充電してください (P.19)。
	●電源/レベルボタンを約3秒間長押しして、電源をオンにしてください。
	●充電中は電源が入りません。ACアダプターを抜いてください。
操作できない	●「エラー表示お知らせについて」 (P.36) を確認してください。
電源が切れる	●オートオフ (P.14) になっています。再度使用するときは電源をオフしてから20分以上あけてご使用ください。
	●充電が不足しています。充電してください (P.19)。
フラッシュが出ない	●照射準備が完了していません。「ピピッ」と鳴るまでお待ちください。
	●フラッシュ照射口をお肌にしっかりとあてて、READYランプが点灯してからケアしてください (P.24)。
	●キセノンランプの寿命です。「エラー表示お知らせについて」 (P.36) を確認してください。
フラッシュが出ない (単発照射時)	●照射ボタンを押してください (P.25)。
	●フラッシュ照射口をお肌の上にしっかりとあててください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
<b>フラッシュが出ない (連続照射時)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フラッシュ照射口をお肌の上にしっかりとあててください。</li> <li>● 照射ボタンを1度短押しすると、お肌に当てるごとにフラッシュが照射されます（P.25）。</li> <li>● モード表示が点滅していることを確認してください（P.25）。</li> </ul>
<b>フラッシュが熱く/ 痛く感じる</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源/レベルボタンを押してレベルを下げてください（P.23）。</li> <li>● ムダ毛が残っています。シェーバーやカミソリでしっかりと除毛してください。</li> <li>● 使用禁止部位を確認してください（P.5、16）。</li> <li>● お肌がフラッシュ照射口の内側に入り込んでいます。お肌に強く押しあてないでください。</li> <li>● 同じ部分に1日2回以上照射しないでください。（ソフト照射は3連続高速照射を1回とします。）</li> </ul>
<b>フラッシュがまぶしい</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フラッシュ照射口がお肌から浮いています。しっかりと密着させてください。</li> <li>● お手持ちのサングラス等をかけてください。</li> </ul>
<b>「ブーン」と音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体を冷却するために内蔵されているファンの作動音です。 異常・故障ではありません。照射後、電源をオフした際に、約5分間作動します。</li> </ul>
<b>フラッシュ準備時間が 長い</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。</li> <li>● 機器内部が熱くなると、1発ごとの照射準備時間が長くなります。</li> </ul>

## エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合は、本体のレベル表示にエラー情報が表示されます。

以下のエラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
EとHが交互に点灯	ブザー音が「ピッピッピッ」と5回鳴り、自動で電源がオフになります。機器内部が高温となっているため、電源をオフしてから30分以上休ませてください。
Eと全てのモード表示が点灯	ブザー音が「ピッピッピッ」と5回鳴り、自動で電源がオフになります。キセノンランプの寿命ですので、ヤーマンコールセンター（P.40）にお問い合わせください。
Eと1～6のいずれかが交互に点灯	ブザー音が「ピッピッピッ」と5回鳴り、エラーの数字を確認の上、電源／レベルボタンを長押しして電源をオフにしてください。ヤーマンコールセンター（P.40）にお問い合わせください。

## | よくあるご質問

Q フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？

A

- 使い始めはレベル1でご使用ください。
- 慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。フラッシュは多少の熱を感じますが、お肌には問題ありません。
- 热さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。
- シェーバーやカミソリでムダ毛を除毛し、日焼けしていない状態で使用してください。
- 赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。治まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。  
※顔のケアをするときは必ずFACEアタッチメントを、VIOラインをケアするときはVIアタッチメントかOアタッチメントをご使用ください。やけどなどの原因となります。
- お肌がフィルター（透明ガラス）に接触しないよう注意してください。動作中はフィルターが非常に高温になり、やけどの恐れがあります。
- お肌が柔らかい箇所、脂肪が多い箇所には強く押し付けないでください。ひじ・ひざ等丸みを帯びている部位への使用は十分にご注意ください。

**Q** 1日の使用頻度は  
どれくらいですか？

**A** 同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。  
熱による刺激が強く、肌トラブルの原因となります。

**Q** 照射直後に、焦げた  
においがするのですが？

**A** ムダ毛/剃り残しの毛に照射熱が加わりますと、においが感じられる  
原因となります。  
製品本体からにおいがする場合は、ただちに使用を中止して本体の電  
源をオフにしてください。

**Q** 浴室で使用できますか？

**A** 本体は浴室で使用いただけますが、水中に沈めての使用はできません。  
また、浴室では充電しないでください。

**Q** 家族や友人同士で共有  
できますか？

**A** アタッチメントを使用しないBODYモードや、FACEアタッチメントを  
使用したケアでは共有してお使いいただけます。その場合は、必ず本体  
やアタッチメントをお手入れしてから機器をご使用ください。  
VIアタッチメント、Oアタッチメントは共有で使用しないでください。

**Q** 冷却・保湿ジェルを  
ぬった状態で  
使用できますか？

**A** 故障の原因となるため使用しないでください。使用後に赤みや痛みが  
出た場合に使用してください。

## 製品仕様

定 格 電 源	DC9V 2.0A
消 費 電 力	約12.0W (本体充電時)
外 形 尺 法	約W65×D87×H224 (mm)
製 品 質 量	約495g (本体のみ)
防 水 機 能	IPX7
材 質	本体:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、アルミニウム、ガラス FACEアタッチメント:ポリカーボネート樹脂、ステンレス(照射口)、アルミニウム、ガラス、シリコーン VIアタッチメント:ポリカーボネート樹脂、ステンレス(照射口)、アルミニウム、ガラス、シリコーン Oアタッチメント:ポリカーボネート樹脂、ステンレス(照射口)、アルミニウム、ガラス、シリコーン
製 造 国	中国
付 属 品	FACEアタッチメント ..... 1個 VIアタッチメント ..... 1個 Oアタッチメント ..... 1個 Vデザインツール ..... 1セット ACアダプター ..... 1個 取扱説明書(保証書付)

## ■ アフターサービス

### 充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

### 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- この製品に使用しているリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



### お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

#### ヤーマンコールセンター

固定電話など

**0120-776-282** (通話料無料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

携帯電話

**0570-550-637** (通話料有料)

### 日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。


## 内蔵電池の取り出し方法

- 電池を取り出す前に、必ず電源をオフにし、充電ケーブルを抜いてください。
- 電池を取り出す際はドライバーを使用し、けがをしないように十分に注意して取り出してください。
- 電池を取り出す際は硬いもの等で電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱発火の原因となります。
- 取り外した電池は自治体の分別ルール（廃棄やリサイクル方法）に従って処理してください。


1 図Aのパネルを3箇所剥がし、図Bを留めているネジを外し、内部のコネクタを全て外す。

※パネルは強粘着両面テープで貼られているため、先の細いものなどを使って取り外す。

※A1→A2の順で外す。

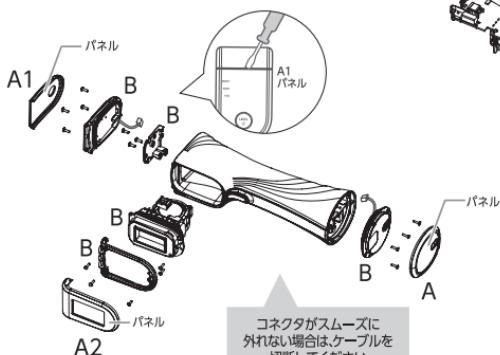


2 ケースから内部ユニットを外す。

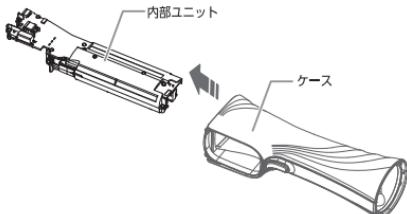


3 内部ユニット上、図Cのネジを外し、電池を取り外す。

※電池は強粘着テープで貼られているため電池を傷つけないよう注意する。

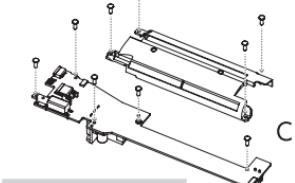

(!) 電池のケーブルは絶対に切らないこと

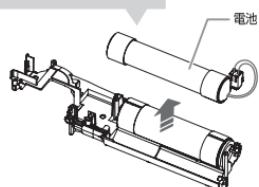

上記は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。

お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

## 保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.40）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスマント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがあります。

### 無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。  
(イ)お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合  
(ロ)電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合  
(ハ)以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合  
①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒、落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外で

の給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用  
(二)火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合  
(ホ)落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合  
(ハ)改造・分解の形跡がある場合  
(ト)説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合  
(チ)保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合  
(リ)弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合  
(ヌ)製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合  
(ル)その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

\*本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

\*ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

\*その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. \_\_\_\_\_

# 保証書

持込修理

品名	防水コードレス光美容器	型番	YJEA7
形名	レイボーテヴィーナス ピューティースキン		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ (キセノンランプ(消耗品)は含まれません。)	お買い上げ日から 1年間	
店名・住所・電話	<p>※販売者名</p> <p>ご購入日のレシート明細を貼付 または本体上部にあわせて 保管してください。</p> <p><b>見本</b></p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

\*防水…IPX7

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など(通話料無料)

0120-776-282

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

携帯電話(通話料有料)

0570-550-637



[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。  
左記無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」  
(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および  
「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ  
(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。