



取扱説明書

家庭用光美容器
レイボーテ クールエビ
YJEA8

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～12)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

準備する


ケアする部位の
ムダ毛をシェーバーや
カミソリなどで
除毛してください。



2

電源をオンにする


電源／レベルボタンを
長押ししてください。

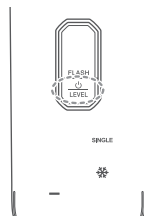

3

モードを選ぶ


フラッシュ／モードボタン
を長押ししてください。

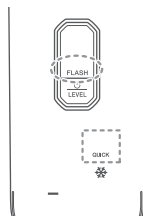

4

レベルを選ぶ

電源／レベルボタンを
押してください。

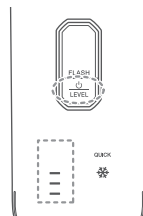

5

フラッシュを 照射する

お肌にしっかりとあて、
ケアします。



もくじ

安全上のご注意	p 3
各部のなまえとはたらき	p 13
お使いになる前に	p 18
使いかた	p 20
使い終わったら	p 27

お知らせ	p 29
●故障かな?と思ったら	p 29
●製品仕様	p 33
アフターサービス	p 34

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



機器から照射される強い可視および不可視の光の照射が目を傷める可能性があることを示しています。

⚠ 警告 (電源に関して)

- 専用のACアダプター以外は使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止

- ACアダプターが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



タコ足配線
禁止

- ACアダプターを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。
ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
収納時にはコードのねじれを直してください。



無理な扱い
禁止

- 必ず交流100～240Vで使用する。
コンセントは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。
※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。



必ず守る

危険（ご使用、保管に関して）

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・妊娠初期から出産直後までの人
・自己免疫疾患のある人 ・黒皮症の人 ・てんかんの疾患がある人 ・光過敏症の人
・光線力学療法等で光増感剤を使用している人 ・幼児や自分で意思表示できない人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩) ・のど ・鼻
・頭部 ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※ 施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・傷跡やしみなど色の濃い部分 ・眉、額、頭髮(もみあげ含む) ・うなじ ・耳 ・乳首、乳輪 ・へそ内部
・大静脈等血管が見える部位 ・刺青、タトゥー、ボディペイント

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与える原因となります。
- 使用前に照射口、アタッチメントの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。
- 次のような場所で機器の使用・保管しない。
 - ・浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

- 通電したまま放置しない。
火災・事故の原因となります。
- 子供の近くで使用しない。
フラッシュは強い光のため、目を傷める原因となります。周りの人が直視しないよう配慮してください。
- 暗い部屋で使用しない。また、照射部をのぞき込んだり直視したりしない。
目を傷める原因となります。
- 衣服や物に照射しない。
焦げたり、変色・破損の原因となります。
- 照射口を黒いものに向けない。
発煙・発火・故障・けがの原因となります。



禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- ファンが作動しない(「ブーン」と音がしない)ときは使用しない。

冷却用のファンが故障している可能性があります。そのまま使用すると発煙・発火・故障・けがの原因となります。お買い上げの販売店またはヤーマンコールセンター(P.34)にご連絡ください。

- 通気口をふさいだまま使用しない。
発煙・発火・やけどの原因となります。
- 過剰な連続使用はしない(業務用としての使用など)。10分使用した場合は10分以上休ませる。

けが・発熱・キセノンランプの割れなどの原因となります。

- 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。
感電・ショートによる発火・火災の原因となります。
必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。
- 電源コードが破損したら使用しない。
ヤーマンコールセンター(P.34)にお問い合わせの上、専用電源コードをお使いください。



禁止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。キセノンランプの修理・交換は行わないでください。安全機能(タッチセンサー機能)を無効にしないでください。



分解禁止

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。

事故・けがの原因となります。

- 本体、ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。
また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

警告 (ご使用、保管に関して)

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。
火災・感電のおそれがあります。
- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 使用後および機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、プラグをコンセントから抜く。
火災・事故の原因となります。



プラグを
抜く

- 機器(本体等)を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電の原因となります。

- 使用環境温度を守る。

使用できる環境温度は 10～40℃です。使用する場所の室温を確認してください。場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。故障・破損の原因となります。

- アタッチメントを取り外す時は必ず電源がオフの状態に取り外す。
けが・故障の原因となります。



必ず守る

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
けが・故障の原因となります。



用途以外
禁止

注意 (電源に関して)

- 停電した時は、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
事故の原因となります。



注意 (ご使用、保管に関して)

- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品、制汗剤等を使用しない。(保湿のためのクリーム・ローションは除く)
肌トラブルの原因となります。
- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



注意 (ご使用、保管に関して)

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。
- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。
- 同じ部分に1日2回以上照射しない。
 - ・過度な長時間又は繰り返しの照射はお肌を傷める原因となります。
「ケアの周期」(P.19)をお守りください。
 - ・一回の使用中に、照射範囲が多少重なる程度は問題ありません。
- お肌に異常を感じた場合はすぐにご使用を中止する。
異常が治まらない場合は医師にご相談ください。



注意 (ご使用、保管に関して)

- VIOラインに使用するときにはスポットアタッチメントを使用する。
肌トラブルの原因となります。
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
痛みを感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- お肌に毛くずが残っている場合は、毛くずを取り払ってから使用する。
照射時に熱く感じる場合があります。



必ず守る

注意（ご使用、保管に関して）

- フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。
24 時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。また、ケアをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。
- ケアした日は長時間の入浴（シャワーは可）、激しい運動、飲酒を控える。
肌トラブルの原因となります。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH
YOUR CAMERA PHONE




■ 各部のなまえとはたらき

本体

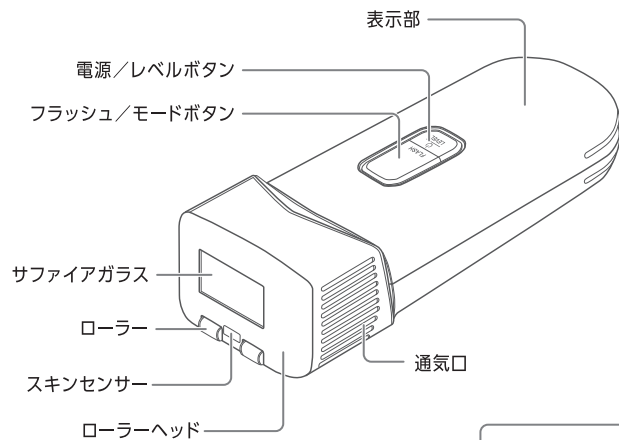


ヘッド部

キセノンランプ (消耗品) (Xenon Lamp (Consumable))

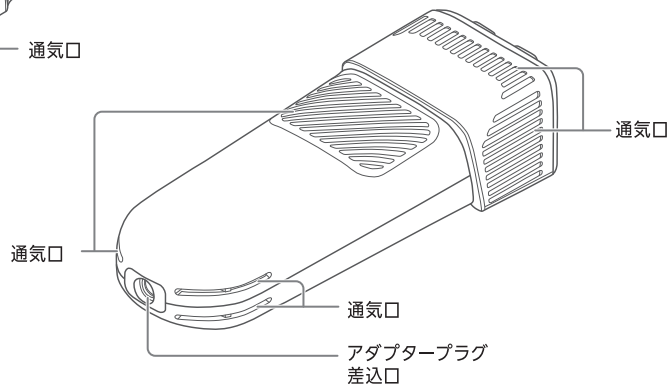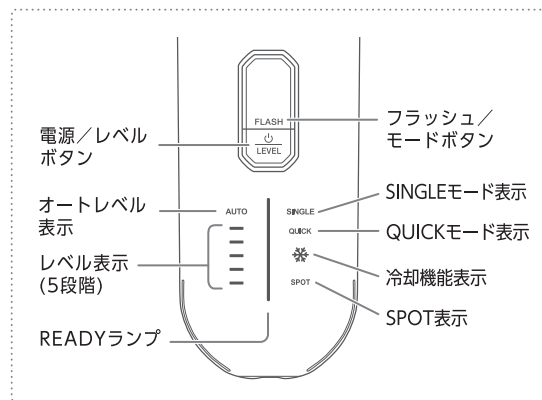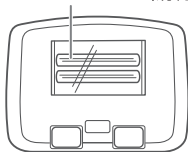

付属品

- スポットアタッチメント

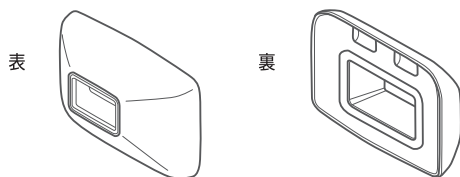

- ACアダプター


- 取扱説明書
(保証書付)

顔、口元、指、VIOライン、わきなどの細かい部分のケアをする際に使用します (P.16)。


※スポットアタッチメント装着時はクイックモード (P.17)、オートレベル (スキンセンサー) (P.21) を選べません。

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

スポットアタッチメントの取り付けかた

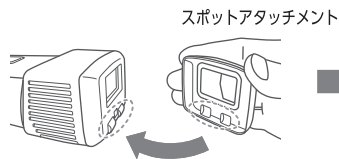


図のようにローラーヘッドの突起部分に合わせて、スポットアタッチメントを装着する。

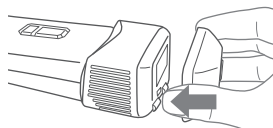

スポットアタッチメントを矢印の方向に装着する。
スポットアタッチメント装着後、SPOT表示が点灯する。

スポットアタッチメントの取り外しかた

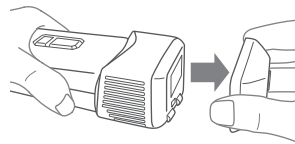

スポットアタッチメントを持って手前に引っ張ります。

はたらき

安全機能

- オートレベル（スキンセンサー）

フラッシュ照射面の肌色を読み取り、フラッシュのレベルを自動調整します（P.21「スキンセンサーを使用する（オートレベルについて）」参照）。

※スポットアタッチメント装着時はオートレベル（スキンセンサー）を選ばません。

- タッチセンサー

照射口がお肌に当たったことを感知すると、READYランプが点灯し、フラッシュを照射できます。

- 高温検知

本体に熱がたまった場合、安全のため自動で電源がオフになります。内部のファンが作動しているためACアダプターを抜かないでください。

再度使用するときは必ず10分以上あけてからご使用ください。

オートオフ機能

約10分を連続使用すると、ブザー音が「ピッピッ」と2回鳴り、自動的に電源がオフになります。

冷却機能

電源をオンすると自動で冷却機能が開始し、冷却機能表示が点灯します。

30秒間操作がないと冷却が一時的にオフとなり冷却機能表示が消えます。

フラッシュを照射するごとに、10秒間冷却機能が動作します。

※スポットアタッチメント装着時はオフになります。

※サファイアガラスの特性上、冷却機能がオフになってもしばらく冷たく感じる場合があります。

■ モードの説明


本製品では、以下のモードを使用してお肌がケアできます。

シングルのモード

電源／レベルボタンを長押しし、電源をオンにするとシングルモードになります。

フラッシュ／モードボタンを押すたびに、フラッシュが1発ずつ照射されます。

※スポットアタッチメント装着時はオートレベル(P.21)とクイックモード(P.17)を選べません。

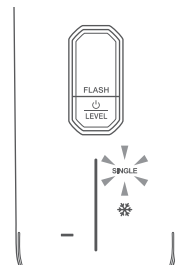

<おすすめ使用部位>

ローラーヘッド		スポットアタッチメント			
●ワキ	●ビキニライン	●フェイス (ほお)	●フェイス (口まわり)	●指	●Vライン
					
●フェイス (ほお)		※唇には使用できません。 ※鼻下をケアする場合はフラッシュが唇にあたらないうようによく伸ばしてから照射してください。		●Iライン	●Oライン
					
		※男性器などIラインよりも内側への照射はしないでください。			


クイックモード

(ローラーヘッドのみ)

フラッシュ／モードボタンを長押しするとクイックモードになります。

フラッシュ／モードボタンを押すとフラッシュが10回連続照射されます。

※スポットアタッチメント装着時はオートレベル (P.21) とクイックモード
を選べません。

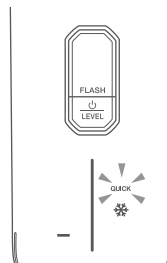

<おすすめ使用部位>

ローラーヘッド	スポットアタッチメント
● アシ  ● ウデ 	スポットアタッチメントは この機能を選べません。

■ お使いになる前に

ケアの前に、以下の内容を必ず確認してください。

ケアの準備

- ケアする部位のムダ毛を、シェーバーやカミソリで必ず除毛してください。
ムダ毛が伸びていたり、お肌の表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。
※毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。
- 製品を初めてご使用になる際は、必ず照射テストを行ってください。
＜照射テスト＞
ケアする部位の近くを、シングルモードのレベル1から照射します。
顔や細かい部分にはスポットアタッチメントで照射してください（P.16）。
・24時間後にお肌に異常がなければ使用可能です。
- アタッチメントや照射口に異常がないことを確認してください。破損や変形があるときは使用しないでください。
 - ・汚れている場合は必ずお手入れをしてください。故障・劣化・やけど・けが・肌トラブルの原因となります。
 - ・お手入れ方法については「お手入れのしかた」（P.27）をご参照ください。
- 衛生上、スポットアタッチメントをVライン、Iライン、Oラインで使用する場合は、家族や友人同士等で共有することはおやめください。

注意

- 成長過程の方は、保護者の管理下で十分に安全を配慮して使用し、異常が起きた際は、直ちに使用を中止してください。
成長期はホルモンバランスの関係上、お肌へのダメージが発生したり、ケアにおける効果がみられないことがあります。

- 使用環境の明るさについて
 - ・使用環境が暗すぎると目を傷める原因となります。
 - ・カラーチャートで確認する場合は、十分に明るい場所で使用してください。
(カラーチャートについては同梱の「～安全にご使用いただくために～」をお読みください)
 - ・推奨の使用環境は【天井照明がある部屋の卓上】です。
 - ・以下の環境での使用は避けてください。
 - 間接照明の部屋
 - 豆電球など照明が極端に暗い部屋
 - 机の下など影の中

ケアの周期



効果の感じかたは、使用する部位
や個人によって異なります。
※本製品は永久脱毛をするため
のものではありません。

同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。

※効果を感じにくい場合は、お肌の状態を確認した上で、VIOライン以外については
3日に1回を限度に、VIOラインについては1週間に1回を限度にしてお試しくささい。

注意

- 過度な使用はしない。
上記頻度を超えて使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら使用してください。
また、1日の使用頻度は必ず守ってください。肌トラブルの原因となります。
- 照射口をしっかりとお肌に当てて使用する。また通気口から出る熱風には触れ続けない。
 - ・通気口をふさいだまま使用しないでください。
 - ・発煙・発火・やけどの原因となります。

■ 使いかた



基本的な使いかた

1 電源をオンにする

ACアダプターを本体と壁面コンセントに接続し、電源／レベルボタンを長押しします（約3秒）。

ローラーヘッド使用時はレベル1とSINGLEモード表示、冷却機能表示が点灯します。

スポットアタッチメント装着時はレベル1とSINGLEモード表示、SPOT表示が点灯します。

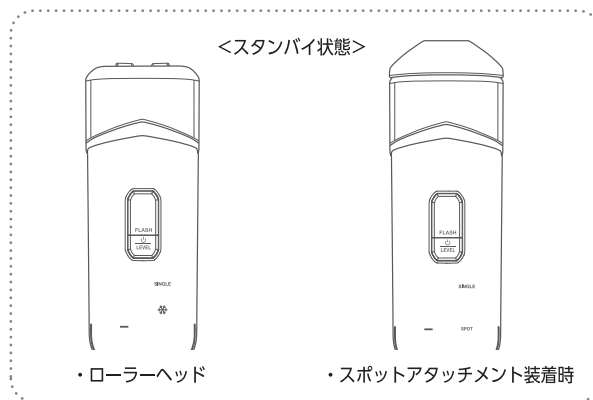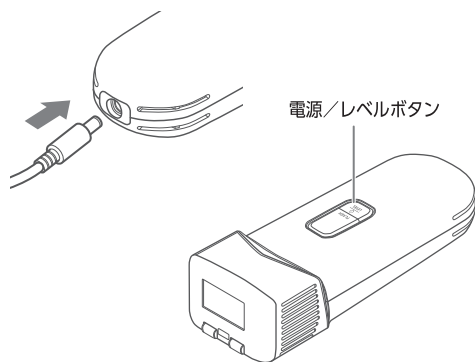

注意

- ACアダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。

2 モードとレベルを選ぶ

電源をオンにした際はシングルモードとなります。

フラッシュ／モードボタンを長押しするとクイックモードへ変更できます。

電源／レベルボタンを短押しするとレベル変更できます。

ローラーヘッド

<モード>

→ シングルモード → クイックモード →

<レベル>

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → オートレベル (AUTO) →

スポットアタッチメント

<モード>


シングルモード

※スポットアタッチメント装着時はクイックモードを選べません。

<レベル>

→ 1 → 2 → 3 →

※スポットアタッチメント装着時はレベル1～3を調整できます。
オートレベルは選択できません。

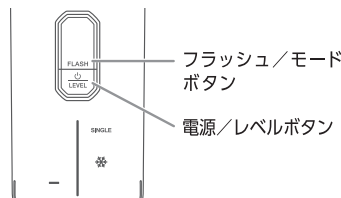

レベル表示



注意

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。


スキンセンサーを使用する（オートレベルについて）

オートレベルを選ぶと、お肌に当てるたびにスキンセンサーがお肌の色を読み取り、お肌に適切なレベルに自動調整できます。

- ① レベルをオートレベルにし、スキンセンサー、ローラー、照射口をしっかりとお肌にあてる。
 - ・ お肌の色によりレベルが表示されます。
 - ・ スキンセンサーをお肌にあてると照射口が浮く場合は、本体の向きを変えて使用してください。
- ② ケアする（P.22手順3「ケアする」を参照）。

※やけどや肌トラブルの原因になる為、肌色が濃すぎる場合は自動照射停止し、使用できません。

※スポットアタッチメント装着時は、オートレベルを選べません。

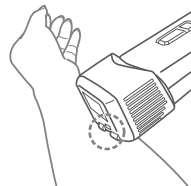

3 ケアする

照射口全体とスキンセンサーをお肌にしっかりとあて、READYランプが白点灯してからケアします。

各部位のケアのポイントは、「ケアのポイント」(P.24)をご参照ください。

シングルモード




- ①電源オン後、シングルモードが選択されます。
- ②照射口全体をお肌にしっかりあてると、READYランプが点灯します。
- ③フラッシュ／モードボタンを短押しすると1発ずつ照射します。
- ④位置を移動させながら照射します。

※1発照射するごとに、数秒のチャージ時間があります。
(レベルによってチャージ時間は異なります。)

クイックモード

(ローラーヘッド使用時のみ)

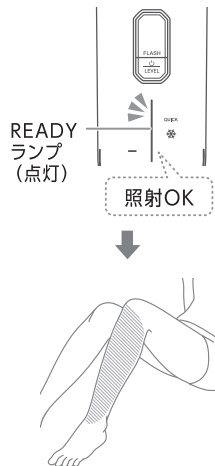

- ①電源オン後、フラッシュ／モードボタン長押しでシングルモードからクイックモードに切り替えます。
- ②照射口全体をお肌にしっかりあてると、READYランプが点灯します。
- ③フラッシュ／モードボタンを短押しし、**QUICKモード表示が点滅から点灯に切り替わると連続照射が開始します。**
- ④お肌の上を滑らすように動かします。

※お肌にあてた状態で連続10回照射されます。

※何も操作をしない状態で約30秒間続くとQUICKモード表示が点滅になります。照射を続ける場合は、再度③から開始してください。

注意

- ケア中にまぶしいと感じたときは、サングラスなどをかけてケアしてください。目を傷める原因となります。
- 照射時に、お肌に毛くずが残っていないか、アタッチメントに汚れがないかご確認の上、ケアしてください。肌トラブルの原因となります。

4 電源をオフにする

- ・電源／レベルボタンを長押しします（約3秒）。
- ・電源オフしてから約90秒間は、内部を冷却するためにファンが動作しております。
完全に動作が停止した事を確認し、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。

使用後、お肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなどで十分に冷やしてください。

ケア後は個人の体質や使いかたにより、お肌が熱をもつことがあります。ほてりなどが気になった場合は、保冷剤や冷やしたタオルなどで処置をしてください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。

使用後は毎回「使い終わったら」（P.27）を参照して、製品に付着した皮脂汚れや美容液などを取り除いてください。

注意

- ・オートレベルで表示されたレベルよりも高いレベルで使用した場合、お肌に熱を持つ場合があります。
冷たいタオルなどで十分に冷やしてください。
- ・電源オフ後、再度使用するときは必ず10分以上あけてからご使用ください。
連続使用すると故障の原因となります。

ケアのポイント

以下のポイントに注意してケアしてください。

- ワキ

指でお肌を伸ばしながらケアします。

※ケア前に、制汗剤などの化粧品類をきれいに拭き取ってください。

- アシ

位置を移動させながら照射します。

・フラッシュのレベルをあげたときは、ゆっくり動かすようにしてください。

- フェイスケア

必ずメイクを落としてからご使用ください。やけど、肌トラブルの原因となります。

・ほんのり温かみを感じる程度の強さで行ってください。

・鼻下のヒゲ・顎ヒゲなど狭い部分や、角度の急な部分に使用するときは、指でお肌を伸ばしながらケアしてください。

・ケア後は直射日光にあたることを避け、ケアをしている期間は日焼けをしないようにしてください。

注意

- ファンデーションなど、メイクアップ用品をつけた状態での照射は避けてください。やけどや肌トラブルの原因となります。
- 照射部を直視しない。また、周りの人が見ないようにする。
目を傷める原因となります。
- 普段から保湿などして、お肌が乾燥しないようにケアしてください。
お肌が乾燥していると、製品の効果が正しくあらわれない場合があります。

- ビキニライン、VIOライン（スポットアタッチメント使用時）

色素沈着が起きている部分や、お肌の色が濃い部分には低いレベルでご使用ください。

※慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。

※粘膜には使用できません。

I・Oラインのおすすめの使いかた

床に鏡を置き、鏡をまたいで図のように片ひざを立てます。

鏡を見ながら光をあてる部分を確認してください。


※毛の剃り残しがないか確認してください。

※照射する部位を鏡で確認したのち、鏡を直視せず照射してください。

※粘膜にフラッシュを直接照射しないようにしてください。

※照射しにくい場合は、足をさらに開き腎溝（お尻の割れ目）を開くように手でお肌を伸ばしてください。

※男性器などIラインよりも内側への照射はしないでください。

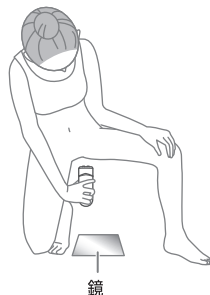

注意


- 顔をケアするときには、照射口をお肌にしっかりと密着させて使用する。

照射口がお肌に密着していないとフラッシュがまぶしく感じます。

使用禁止部位

ケアする際は、以下の部位に使用しないでください。

(下図の ■■■ 部位)

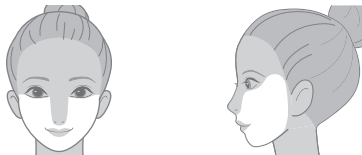

- ・口内や粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩) ・のど ・鼻 ・頭部
 - ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
 - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
- ※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU 等)
- ・傷跡やしみなど色の濃い部分 ・眉、額、頭髪 (もみあげ含む)
 - ・うなじ ・耳 ・乳首、乳輪 ・へそ内部
 - ・大静脈等血管が見える部位 ・刺青、タトゥー、ボディペイント

使
う

■ 使い終わったら

お手入れのしかた

機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。肌トラブルの原因となります。

照射口・スキンセンサーは、使用後に毎回必ずお手入れをしてください。

本体も、故障や動作不良を防ぐため、定期的にお手入れをしてください。

照射口・スキンセンサー

1 やわらかい布や綿棒で、汚れや毛くずを取り除く

※指紋などの汚れも拭き取ってください。

フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。

本体（アタッチメント含む）

1 水で湿らせて固くしぼった布で、 表面の汚れを拭き取る

- ・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。



警告

- お手入れの際は、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体内部に水が入らないようにお手入れする。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体を水洗いしないでください。

保管のしかた

- 長時間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください（P.27「お手入れのしかた」を参照）。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、不安定な場所での使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。
事故・故障のおそれがあります。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.29）を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター（P.34）までご相談ください。
- 本製品が故障・損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と処置方法

電源が入らない

- ACアダプターを本体または壁面コンセントに差し込んでください。
- 電源／モードボタンを長押しして(約3秒)、電源をオンにしてください。

操作できない

- 「エラー表示お知らせ」(P.31)を確認してください。

電源が切れる

- オートオフ(P.15)になっています。再度使用するときは10分以上あけてからご使用ください。
- ACアダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。

フラッシュが出ない

- 照射準備が完了していません。「ピピッ」と鳴るまでお待ちください。
- 照射口とスキンセンサーをお肌にしっかりとあてて、READYランプが白点灯してからケアしてください(P.22)。
- 本体にアタッチメントをしっかりと装着してください。
- シングルモード時、フラッシュ／モードボタンを押してください(P.22)。
- クイックモード時、QUICKモード表示が点滅時は照射されません。
フラッシュ／モードボタンを短押しし点灯に切り替え、照射口とスキンセンサーをお肌にしっかりとあててください。(P.22)。

こんな症状

考えられる原因と対処法

フラッシュが熱く/ 痛く感じる

- 電源／レベルボタンを押してレベルを下げてください。
- ムダ毛が残っています。シェーバーやカミソリでしっかりと除毛してください。
- 使用禁止部位を確認してください(P.26)。
- お肌が照射口の内側に入り込んでいます。お肌を強く押しあてないでください。
(スポットアタッチメント使用時)

フラッシュが まぶしい

- 照射口がお肌から浮いています。しっかり密着させてください。

「ブーン」と音がする

- ファンの動作音です。異常・故障ではありません。

フラッシュ 準備時間が長い


- 設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。
- 照射部が熱くなると、1発ごとの照射準備時間が長くなります。

冷却を感じない

- 冷却機能を10分以上連続で使用しています。
- 使用環境が推奨環境以上の場所で使用しています。

エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合はREADYランプが橙色に点灯／点滅します。
以下のエラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

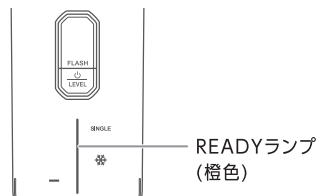

エラー表示	対処方法
橙色点滅	ブザー音が「ピピピピピ」と5回鳴った後、電源がオフになります。 機器内部が高温になったために安全機能がはたらいたときの表示です。 再度使用するときには必ず10分以上あけてからご使用ください。
橙色点灯 その他表示全て白点灯	ブザー音が「ピピピピピ」と5回鳴った後、電源がオフになります。 キセノンランプの寿命です。 ヤーマンコールセンター (P.34) にお問い合わせください。
橙色点滅 自動で電源オフにならない	ブザー音が「ピピピピ…」と10回鳴ります。 ヤーマンコールセンター (P.34) にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？

A

- レベルをご自身で選ぶ場合、使い始めはレベル1でご使用ください。
慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。フラッシュは多少の熱さを感じますが、お肌には問題ありません。
- 熱さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。
- シェーバーやカミソリでムダ毛を除毛し、日焼けしていない状態で使用してください。
- 赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。
治まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。

Q 照射直後に、焦げたにおいがするのですが？

A

- フラッシュによりムダ毛に熱が加わったためです。
製品本体からにおいがする場合は、ただちに使用を中止して本体の電源をオフにし、ファンが停止してからACアダプターを抜いてください。

Q 1日の使用頻度はどれくらいですか？

A

- 同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。
熱による刺激が強く、肌トラブルの原因となります。

Q 家族や友人で共有できますか？

A

- ローラーヘッドは共有でお使いいただけます。
その場合は必ず本体をお手入れしてから機器をご使用ください。
スポットアタッチメントをVIOラインで使用する際は共有で使用しないでください。

Q 冷却・保湿ジェルをぬった状態で使用できますか？

A

- 故障の原因となるため使用しないでください。
使用後に赤みや痛みが出た場合に使用してください。

製品仕様

定 格	DC12V 5.0A
消 費 電 力	待機時約6.0W(瞬間最大約90W)
外 形 寸 法	約65mm×47mm×180mm(W×D×H)
製 品 質 量	約395g(本体のみ)
材 質	本体:ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、サファイアガラス、アルミニウム アタッチメント:ポリカーボネート樹脂、シリコン、ステンレス
製 造 国	中国
付 属 品	スポットアタッチメント……………1個 ACアダプター ……………1個 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問合せ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

Memo

Memo

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.34）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り
 - ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下
 - ③ 弊社以外の第三者による修理・改造
 - ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - ⑤ 接続する他の機器の異常
 - ⑥ (家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - ⑦ (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外の給電
 - ⑧ 非純正部品の使用
 - ⑨ 車両・船舶への搭載
 - ⑩ 海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法（レンタル行為を含みます）でのご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基つき、譲渡、転売、中古品（オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます）と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※ その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用光美容器	型番	YJEA8
形名	レイボーテ クールエビ		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本体のみ (キセノンランプ(消耗品)は含まれません。)	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話  ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

☎ 0120-776-282

携帯電話

☎ 0570-550-637



www.ya-man.com

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。

※製造から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」

(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。