

取扱説明書

家庭用美容器	フォトプラス ディープリフト	YJFA1
--------	----------------	-------

もくじ	はじめに……………1	使い終わったら……………27
	安全上のご注意……………1	お知らせ……………29
	海外でのご使用について……………9	●故障かな?と思ったら……………29
	各部のなまえとはたらき……………10	●よくあるご質問……………31
	お使いになる前に……………13	●製品仕様……………32
	使いかた……………16	アフターサービス……………33



はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・ お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- ・ 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

危険 (ご使用、保管に関して)

● 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心臓など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

警告 (ご使用、保管に関して)

● 次のような人は使用しない。

事故・トラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人
・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人 ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁 止

● 次のような場合や部位には使用しない。

事故・トラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・頭部 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球
・上まぶた (COOLモードのみ使用可、LED光は照射可能)
・下まぶた及び目尻 (EYE CARE、COOLモードは使用可。LED光は照射可能)
・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
・美容医療施述後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施述後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

(施述例: ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・外科手術等 (形成、整形、美容) 等で体内に金属を埋め込んだ部位

● 過剰な連続使用はしない。(業務用としての使用など)

けが・発熱などの原因となります。

警告 (ご使用、保管に関して)

- 皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。
お肌や身体の問題を生じる原因となります。



禁止

- 指定部位以外には使用しない。
けがの原因となります。

- EYE CARE、COOLモード使用時以外は同じ箇所
にあて続けない。必ずお肌の上を動かしながら使用
する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。
やけど・低温やけどの原因となります。

- 火中投入・加熱・高温での使用・放置をしない。
発熱・発火・破裂の原因となります。

- 引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・
除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。

- 次のような場所で機器の使用・保管しない。

・ほこりの多い場所 ・直射日光の当たる場所
・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・屋外
・強い電波や磁気の発生する場所
・子供の手の届く場所 ・油煙、湯気の当たる場所
・温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。

- 異臭・異常発熱したときは使用しない。
そのまま使用すると破損・発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

- 本体に重い物を置いたり、使用中に落下させ
たりなど、強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。



衝撃禁止

- 不安定な場所に置かない。また、落としたり、
ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすと
けがの原因となります。



落下禁止

- 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚の低
下した人に使わせない。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避
ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護
者監視のもと使用する。
けがの原因となります。

- 本体や充電台および充電用USBケーブルは
乳幼児の手の届かない場所に保管し使わせ
ない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途以外には
使用しない。
けが・故障の原因となります。



用途以外
禁止

警告 (ご使用、保管に関して)

- 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近くで機器を使用したり、充電したりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

-
- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

-
- 初めて使用する前は必ずプレテストを行ってから使用する。

事故・けがの原因となります。



必ず守る

- 歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMSによりほお・あごに刺激を強く感じたり、不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。

- 機器(本体等)に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。

火災・感電のおそれがあります。

警告（ご使用、保管に関して）

- 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。
また、火中投入・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



発火注意

-
- 電子レンジや高圧容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



破裂注意

注意（ご使用、保管に関して）

- 強く押しあてず、一か所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一か所に集中して使用すると、お肌を傷める可能性があります。
- 電極部を金属・物にあてない。
発熱・発火・故障・破損の原因となります。
- 使用前に電極部の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
肌トラブル・故障の原因となります。
- 極端に暑い場所や寒い場所では使用しない。
使用環境推奨範囲は15℃～30℃です。



禁止

注意 (ご使用、保管に関して)

- 本体や充電台をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。
表面に損傷を与える原因となります。
- ペットには使用しない。
けがの原因となります。
- 電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。
家具などの破損・けがの原因となります。
- 電源をオンにした状態で他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつなど)に接触させない。同時使用しない。
けが・故障の原因となります。
- LED光を直接のぞき込まない。LED光で上まぶた、下まぶた、目尻へのケアをするときは、目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。(COOLモードのLED光は直接お肌にあてて使用可)
目やお肌を傷める原因となります。
- COOLモードを連続して使用しない。
連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。
再度使用する時は30分以上間をあけてから使用してください。
- ピーリングとの併用はしない。
肌トラブルの原因となります。



禁止

-
- アクセサリー(ネックレス・ベルト・指輪・イヤリング等)は外してから使用する。
事故・けがの原因となります。
 - 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
事故・けがの原因となります。
 - ケア中に痛みを感じる場合は、使用を中止する。
事故・肌トラブルの原因となります。



必ず守る

注意 (ご使用、保管に関して)

- 電極ヘッドとお肌の間に、常に化粧品・水などがあるように、途中で補充する。
化粧品・水などが少ないと、刺激の伝達が悪くなったり、肌トラブルの原因となります。
- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。または化粧水などでお肌を湿らせてから使用する。
そのまま使用すると、お肌を痛める原因となります。
- 機器のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。
肌トラブルの原因となります。
- 途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
- 下記の使用限度を守って使用する。

【デイリーケア】

- ・DAILYモード: 1回3分、1日1回まで

【スペシャルケア】

- ・CLEANモード: 1回3分、1日1回、週2～3回まで
- ・D×LIFTモード: 1回5分、1日1回、週2～3回まで
- ・EYE CAREモード: 1回2分、1日2回、週5回まで
- ・COOLモード: 1回3分、1日1回まで

デイリーケアとスペシャルケアのCLEANモード、デイリーケアとスペシャルケアのD×LIFTモードは同日に使用しないでください。

- 同一部位に連続使用は避ける。(EYE CAREモード以外)
再度同一部位に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。
過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。
あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
- 使用後は必ず毎回「使い終わったら」(P.27)を参照して、製品に付着した汚れなどを取り除く。
肌トラブル・故障の原因となります。



必ず守る

⚠ 警告 (電源に関して)

- 充電用USBケーブルを破損・加工・束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、充電用USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



無理な扱い
禁止

- 充電用USBケーブルを引っ張って製品を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・断線の原因となります。



コード引っ張り
移動禁止

- 充電用USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

- 充電用USBケーブルを抜くときは、必ず先端のUSBプラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを抜く

- お手入れするときは必ず電源をオフにし、使用しないときは、充電用USBケーブルを抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 充電用USBケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ禁止

- 充電用USBケーブルは根元まで確実に差し込む。火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ず専用の充電用USBケーブルを使用する。またACアダプター(市販品)は、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 充電端子に化粧水などが付着していないことを確認してから充電する。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合は、充電用USBケーブルを抜く。

- 充電台に化粧水などが入った状態でACアダプター(市販品)をコンセントに差し込まない。充電しない。



禁止

海外でのご使用について

警告

- 必ず直流5VのUSB電源で使用する(無料修理は日本国内のみ)。

火災・感電・故障の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用する。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。

・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店などにご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE


各部のなまえとはたらき

本体

●正面

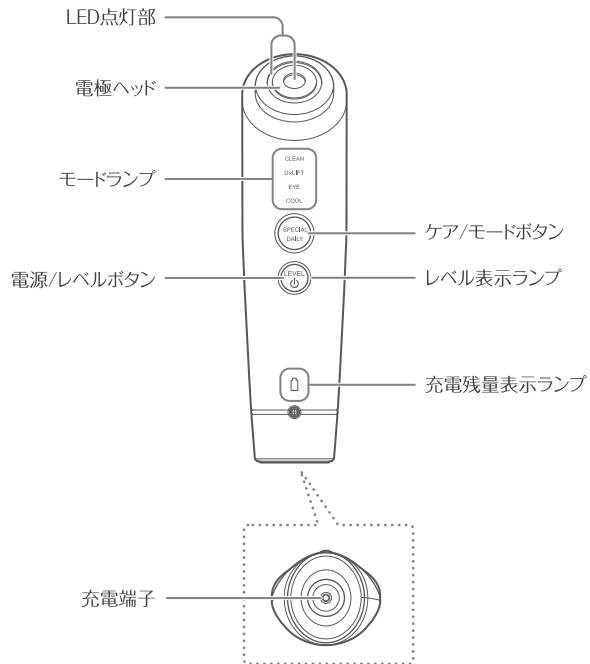

●背面

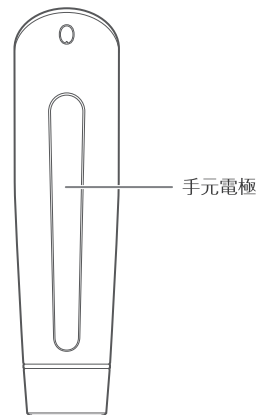


付属品

- 充電台



- コットンストッパー
(本体の電極ヘッドに取り付けて梱包)

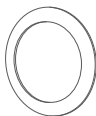

コットンを電極ヘッドに固定できます(P.19)。

- 充電用USBケーブル
(USB Type-C)

- 取扱説明書
(保証書付)

※本製品専用です。付属しているもの以外は使用しないでください。

※本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

安全機能

安全にご使用いただくために、様々なセンサーを搭載しています。

機器やお肌の状態に合わせて出力を制御することで、オーバーケアを防止します。

- 温度センサー

お肌や電極ヘッドの温度が高温になると、安全のため電源がオフになります(ブザー音が10回鳴ります)。

その場合は、約30分間本体を休ませてください。

- モーションセンサー

機器の動きを検知し、機器が停止している場合や電極ヘッドを同じ箇所当て続けている場合は、安全のため出力を停止します。

- 電流センサー

電極がお肌に触れているかを検知して出力します。

- 出力コントロールセンサー

お肌に流れる電流を常時モニタリングすることで、適切な出力に調節します。

その他の機能

- タイマー機能

動作時間の半分が経過すると、ブザー音「ピーッ」でお知らせします。各モードの動作時間は、P.17～18を参照してください。

- スタンバイモード(スペシャルケア選択時のみ)

モード終了時に「ピッピッピッ」とブザー音が鳴り、次のモード表示が点滅します(スタンバイモード=機能が停止している状態です)。

各モードの動作時間は、P.17～18を参照してください。

もう一度ケア/モードボタンを短押しすると、点滅していたモードが開始します。

C00Lモードの終了時のみ、スタンバイモードにはならず「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。


- オートオフ機能

デイリーモードはモード終了後、スペシャルケアはスタンバイモードのまま約5分間操作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます。


お使いになる前に

充電する

家庭用コンセントを使用する

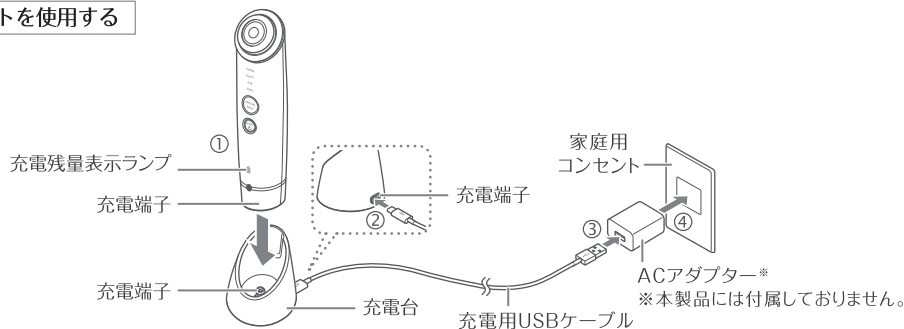

パソコンを使用する

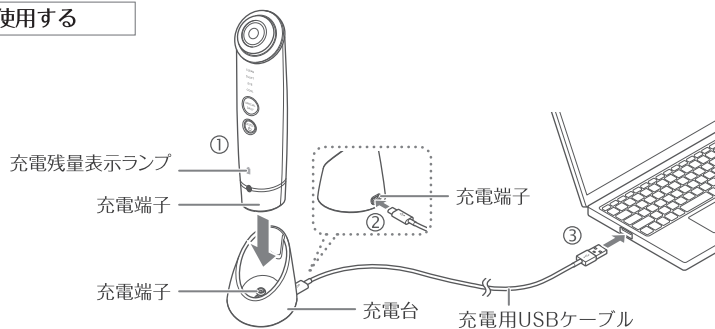

本製品を図のように充電用USBケーブルに接続された充電台に置くと、充電が始まります。

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、充電用USBケーブルまたはACアダプター(市販品)の差し込みがゆるんでいないか確認してください。

充電中	充電残量表示ランプが白色に点滅。
充電完了時	充電残量表示ランプが5秒間白色点灯後、消灯。
充電時間	約3時間(室温約25℃) 電池残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は前後します。
動作時間	約30分(D×LIFTモード最大出力時) 電池残量や充電環境によって、動作時間は前後します。

電源オン中は、充電残量表示ランプで、充電残量を確認することができます。

充電残量表示	
白	十分に充電されています。
赤点灯	充電が少なくなってきました。
赤点滅	充電してください。

ご注意

- ・ACアダプター(市販品)を使用する際は、タコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。
ACアダプター(市販品)は記載されている電流値をご確認ください。1Aより低いものでは充電できない可能性があります。
- ・購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してから使用してください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。
その場合は、再度充電してから使用してください。
- ・充電用USBケーブルは付属のものをご使用ください。
- ・浴室、洗面所など高温多湿な場所で充電しないでください。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

- ⚠ 注意**
- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
 - 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
 - お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る

完全に水分がなくなるまで、しっかり拭き取ってください。

2 お肌にお手持ちの化粧水などを塗り、D×LIFTモードのレベル1で約5分間使用する(P.21)

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。



使いかた

使用上のご注意

ご使用になる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行ってください(P.15)。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
(EYE CARE、COOLモード使用時以外)
- RF(ラジオ波)は使用時の化粧品の種類やお肌の状態によって、温感が変わります。
- 上まぶた(COOLモードのみ使用可)、下まぶた及び目尻(EYE CARE、COOLモードは使用可)には使用しないでください。
※LED光は上まぶた、下まぶた、目尻に照射できます。目を閉じ、電極ヘッドをお肌から5cm以上離してください。LED光は直接のぞき込まないでください。(COOLモードのLED光は直接お肌にあてて使用可)
- 必ず手元電極に触れるように持ってください。
- 推奨環境温度15℃～30℃

基本の流れ



モードについて

	モード	こんなときに	機能	コットン	おすすめ化粧品 ^{*1}	時間	レベル	使用頻度 (目安)
デイリー ケア	DAILY	毎日のうるおいケア、 リフトケア ^{*2} がしたい とき	・RF ・EMS ・イオン導入 ・LED（赤）	どちらでも	化粧水または 美容液	約3分	6段階	毎日 ^{*3}
スペシャル ケア	導出モード CLEAN	古い角質や毛穴汚れ を取り除きたいとき	・RF ・イオン導出 ・振動 (イオン出力時のみ)	コットン あり	化粧水	約3分	6段階	週に 2～3回
	導入モード D×LIFT	スペシャルなうるおい ケア、リフトケア ^{*2} が したいとき	・RF ・EMS ・DYHP ・LED（赤）	どちらでも	美容液または シートマスク	約5分	6段階	
	アイケアモード EYE CARE	目もととケアをしたい とき	・RF ・目もと用EMS ・マイクロカレント	コットン なし	目もと用 美容液	約2分	6段階	週に 2～3回 ^{*4}

	モード	こんなときに	機能	コットン	おすすめ 化粧品 ^{※1}	時間	レベル	使用頻度 (目安)
スペシャル ケア	引き締め ^{※2} モード COOL	クールダウンで肌を 引き締め ^{※5} たいとき	・冷却 ・LED（青）	コットン なし	そのまま お肌に あてる ^{※6}	約3分	－	毎日 ^{※7}

※1 お手持ちの化粧品をご使用いただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。オイル系、スクラブ系は使用しないでください
製品が故障したり、肌トラブルの原因となります

※2 引き上げるように動かすこと

※3 デイリーケアとスペシャルケアは同日の使用をしないでください（EYE CAREモード、COOLモードはご使用可能です）

※4 目もとの乾燥が気になる方は週に5回のご使用がおすすめです

※5 お肌を冷やしてケアすること


※6 乳液などでお肌を保湿してからのご使用がおすすめです

※7 あくまでも目安ですので、お肌の状態を見ながら週に2～3回など使用頻度を調節してください

コットンの付けかた

1

本体からコットンストッパーを外す

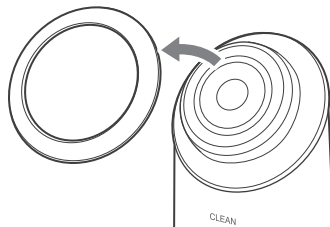

2

電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンストッパーを押し込むように付ける

- ・コットンストッパーでコットンがとまりづらい場合は、大きめで、薄手のコットンを使用してください。厚手のコットンは止まりづらいため、半分に割いて使用してください。
- ・コットンが厚すぎるとRFの温感が弱くなる可能性があります。

3

コットンにお手持ちの化粧水などを付ける

- ・電極ヘッド面全体に化粧水などがいきわたるように付けてください。

ご注意

- ・コットンが乾いてきたら化粧水などを足してください。

基本的な使いかた

1

メイクを落として洗顔する

・油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

※COOLモードはメイクの上からでもご使用になれます。

2


必要な場合は、電極ヘッド部にコットンを装着し、化粧水などを付ける

コットンの付けかたは、P.19を参照してください。

3

電源をオンにする

電源/レベルボタンを長押しします。(約3秒以上)
「ピピッ」と音が鳴り、ケア/モードボタン(DAILY)のランプが点灯し、DAILYモードが開始します。

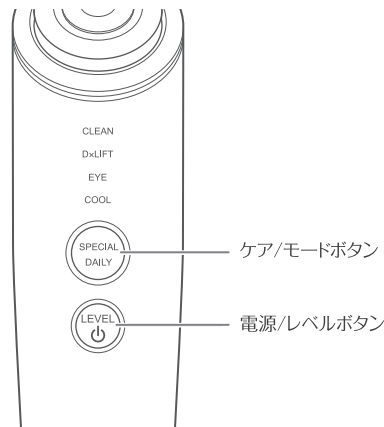


4

お好みのモードを選ぶ

ケア/モードボタンの長押し、短押しでモードが切り換わります。

デイリーケアを選択すると、ケア/モードボタン(DAILY)が点灯します。

スペシャルケアを選択すると、ケア/モードボタン(SPECIAL)と選択したモードのモードランプが点灯します。

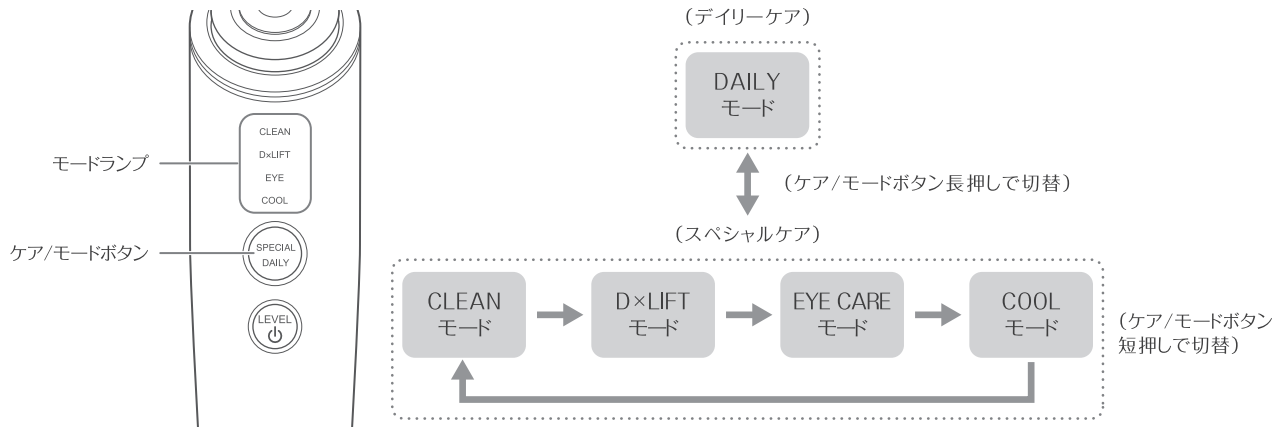


- ・デイリーケアとスペシャルケアはケア/モードボタンを長押しすると切り替わります。
- ・スペシャルケアのどのモード使用中でも、ケア/モードボタンを長押しすると、デイリーケアに切り替わります。

各モードについては、「モードについて」(P.17～18)を参照してください。

5

好みのレベル(強さ)を選ぶ(COOLモード以外)

・電源/レベルボタンを短押しするたびに「ピッ」とブザー音が鳴り、レベルが変わります。

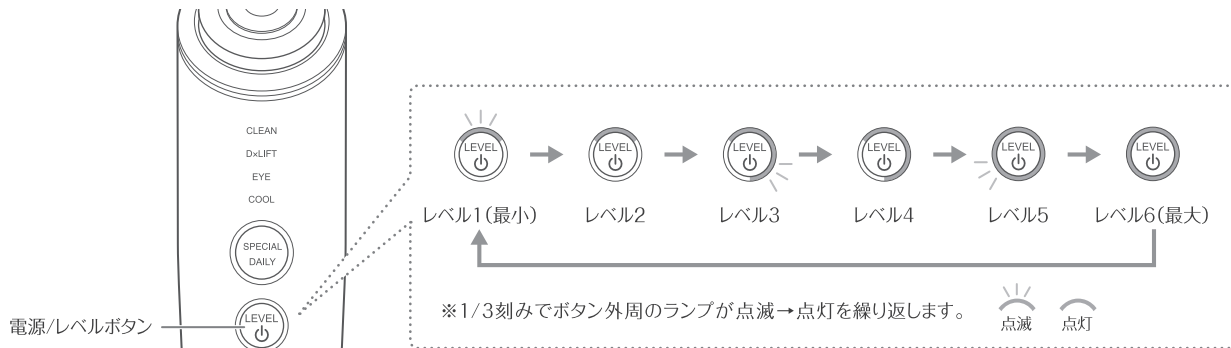

ご注意

- ・使い始めは必ずレベル1からご使用ください。
- ・痛みを感じるレベルでは使用しないでください。

6

本体背面の手元電極(シルバー部分)に触れるように持つ

- ・手元電極に触れていないと、正しく使用できません。

7

電極ヘッドをお肌にあてて動かす

- ・DAILYモードが終了するとオートオフになります。
- ・スペシャルケアの各モードが終了するとスタンバイモード(COOLモード以外)になります。好みのモードを選択して、次のモードをスタートできます。
- ・途中で電源をオフにしたい時は、電源/レベルボタンを長押ししてください。

- ・本体の動かし方は、「お肌へのあてかた」(P.24～26)を参照してください。
- ・各モードの動作時間は、P.17～18を参照してください。

ご注意

- ・使用中は必ず、電極ヘッドをお肌にしっかりあててください。

8

終わったら、お肌を整える

- ・お手入れが終わったら、お肌についた化粧水などをなじませ、日頃ご使用の基礎化粧品で仕上げをしてください。

ご注意

- ・使用後は毎回本体のお手入れをしてください(P.27)。

お肌へのあてかた

- ・本体を動かすスピードの目安：1秒間に約2cm
※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。
- ・動作時間の半分が経過すると「ピッ」とブザー音でお知らせします。顔の反対側のケアにうつりましょう。

ご注意


- ・電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。
- ・必ずお肌の上を動かしながら使用してください(EYE CARE、COOLモード使用時以外)。一か所にあて続けるとやけどや低温やけどの原因となります。
- ・上まぶた(COOLモードのみ使用可)、下まぶた及び目尻(EYE CARE、COOLモードは使用可)には使用しないでください。

DAILYモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。
上まぶた、下まぶた、目尻はLEDの光をあててケアできます。


-  矢印のように
くるくる動かす
-  使用できない部位
-  LED光のみ使用可

※LED光は目を閉じて
5cm以上離してください。

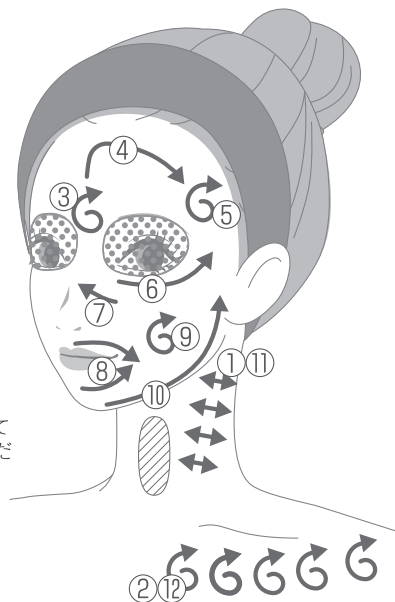


CLEANモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。

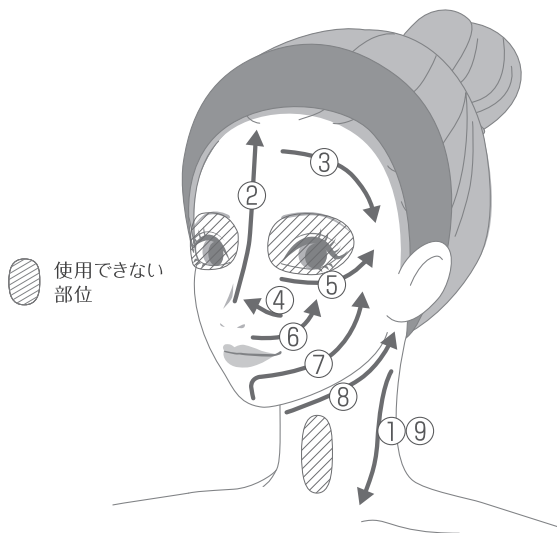

D×LIFTモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら使用してください。
上まぶた、下まぶた、目尻はLEDの光をあててケアできます。

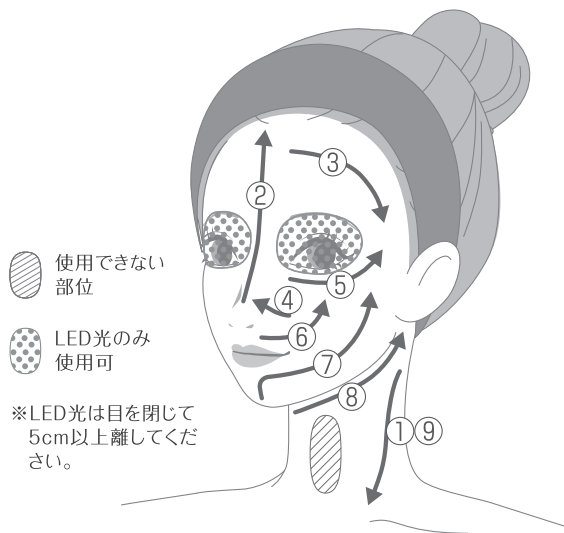


EYE CAREモード

目頭から目尻に向かってスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。押しあて時間の目安は約3秒です。

目もとの乾燥が気になる方は1回2分、1日2回、週に5回のご使用がおすすめです。

※3秒以上連続で押しあてないようにしてください。

※押しあてながら動かさないでください。

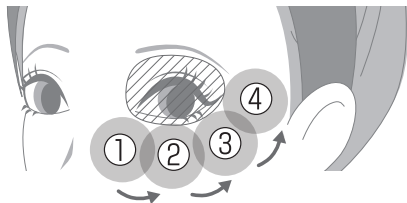

使用できない部位：上まぶた

※下まぶた、目尻には使用可

COOLモード

顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

※上まぶた、下まぶた、目尻にもご使用いただけます。

※まぶたにあてる際は、目を閉じ、電極ヘッドを強く押しあてすぎないようにしてください。

※LED光は直接のぞき込まないでください。

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

⚠ 警告

- お手入れするときは、充電していないこと、電源がオフになっていることを確認する。

1

本体・電極ヘッドの汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る
コットンストッパーは本体から外した状態で水洗いする

2

全体を乾いた布で拭き、水分を拭き取ってから、保管する

ご注意

- 本体や充電台を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 化粧水などが付着した状態で放置しないでください。
- 充電端子に水分が残らないようにしてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。



保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、充電用USBケーブルを抜いてください。
- ストープやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.29)を参照して、症状についてご確認ください。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.36)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お知らせ

故障かな?と思ったら

本製品をご使用中に異常を感じたら、修理を依頼する前に以下をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
電源が入らない	→ 電源/レベルボタンを約3秒以上長押ししてください(P.20)。
	→ 電池残量がありません。充電してください(P.13)。
充電できない	→ ACアダプター(市販品)や充電用USBケーブルを正しく接続してください(P.13)。 ACアダプター(市販品)は記載されている電流値をご確認ください。1Aより低いものでは充電できない可能性があります。
	→ 本体が充電台に正しく設置されていない可能性があります。正しく設置してください(P.13)。
本体が熱い	→ 連続して使用しています。電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください。
レベル(強さ)が変わらない	→ COOLモードはレベルの選択ができません。
COOLモードで冷えない	→ COOLモードを連続使用しています。電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
	→ 推奨環境温度以外で使用しています。15℃～30℃の環境で使用してください。
EMSが強い(ビリビリする・痛い)	→ 電源/レベルボタンでレベルを下げてください。
	→ 電極ヘッド全体がお肌にあたっていません。鏡で確認しながら、電極ヘッド全体をお肌にあててください。

こんな症状	考えられる原因と処置方法
EMSが弱い(感じない)	→ 電源/レベルボタンでレベルを上げてください。
	→ お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧水などで湿らせてからご使用ください。 手を軽く湿らせてください。
	→ 筋肉に沿ってあてていません。電極ヘッドを筋肉に沿ってあててください(P.24～P.26)。
	→ 充電残量が不足しています。充電してください(P.13)。
EMSの出力が一定ではない	→ 複数のEMSを出力しているため、体感に強弱を感じる場合があります。
熱い(COOLモード使用时以外)	→ 電極ヘッドを動かさずに使用しています。COOLモード使用时以外は必ず動かしながら使用してください。
	→ 動かすスピードが遅い可能性があります。少し速く動かしてください。
	→ 使用する化粧品、コットンの有無によっては非常に熱く感じる場合があります。 熱いと感じる場合は、以下をお試しください。 ・コットンを使用する、またはコットンを使用していたらなしで使用する ・使用する化粧品を変える
熱さを感じない	→ スタンバイモード/オートオフになっています(P.12)。ケア/モードボタンを押して、各モードをスタートさせてください(P.17)。
	→ お肌に水分が足りていない、または乾燥しています。お肌を化粧水などで湿らせてからご使用ください。
	→ 動かすスピードが速い可能性があります。少し遅く動かしてください。
	→ 充電残量が不足しています。充電してください。

よくあるご質問

Q 化粧水などは1回どれくらい使用すればよいですか？

A 目安として、コットンを使用する場合は、電極ヘッド全体が化粧水で濡れるくらい使用してください。
化粧水などが少ないと感じたら、付け足すことをおすすめします。

Q 使用頻度、使用時間の目安は？

A 推奨時間は下記の通りです。
【デイリーケア】
・DAILYモード: 1回3分、1日1回
【スペシャルケア】
・CLEANモード: 1回3分、1日1回、週2～3回
・D×LIFTモード: 1回5分、1日1回、週2～3回
・EYE CAREモード: 1回2分、1日1回、週2～3回
-目もとの乾燥が気になる方は1回2分、1日2回、週に5回のご使用がおすすめです。
・COOLモード: 1回3分、1日1回
-お肌の状態を見ながら週に2～3回など使用頻度を調節してください。
デイリーケアとスペシャルケアのCLEANモード、デイリーケアとスペシャルケアのD×LIFTモードは同日に使用しないでください。
単独でひとつのモードだけを使用する場合も上記を推奨します。

Q DAILY/CLEAN/D×LIFT/EYE CAREモード使用時にRFの温まりを感じないのですが

A 電極ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。また化粧水や、コットンの水分量が足りない可能性があります。化粧水やジェルなどを付け足してください。

Q コットンに汚れが付かないのですが

A 目に見えなくても汚れは落ちています。また、汚れの付きかたには個人差があります。

Q RFで電極ヘッドが温まらないのですが

A RFは電極ヘッドを温めるのではなく、ラジオ波の力でお肌を温めるものです。

製品仕様

定 格 入 力	DC5V 1.0A (充電台)
定 格 出 力	DC9V 0.55A (充電台)
消 費 電 力	約4.5W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※電池残量や充電環境、ACアダプター(市販品)によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約30分(D×LIFTモード最大出力時) ※電池残量や充電環境によって、動作時間は前後します。
外 形 寸 法	本体(コットンストッパー付):約W47×D44×H176(mm)
製 品 質 量	本体(コットンストッパー付):約210g
材 質	本体:ABS樹脂/シリコーンゴム 電極ヘッド:PET樹脂/ステンレス 手元電極:ステンレス
製 造 国	日本
付 属 品	充電台 1個 充電用USBケーブル(USB Type-C) 1本 コットンストッパー 1個(本体の電極ヘッドに取り付けて梱包) 取扱説明書(保証書付)
推 奨 環 境	15℃～30℃

アフターサービス

充電電池について

- 充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.36)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。廃棄方法については、下記「電池の廃棄について」と「電池の取り出しかた」(P.34)をご確認ください。



電池の廃棄について


この製品に使用しておりますリチウムイオン蓄電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

- ・電池が内蔵された機器は、廃棄する前に電池を取り外してください。
- ・電池を取り出す前には必ず電源をオフにし、ACアダプター(市販品)を抜いてください。
- ・電池を取り出す際はドライバーを使用し、おけががないように十分に注意しながら取り出してください。
- ・電池を取り出す際は硬いものなどで電池を傷つけないようにご注意ください。※発熱、発火の原因となります。
- ・取り外した電池は自治体の分別ルール(廃棄やリサイクル方法)に従って処理してください。

電池の取り出しかた


1

先の細いものなどを使って、ネジカバー、ゴムシートを取り外し、ネジを外す

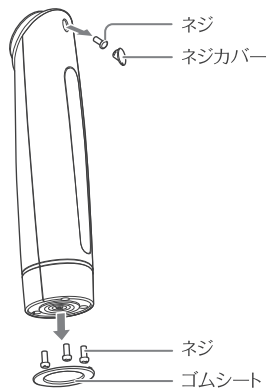


2

ボトムケースを外す

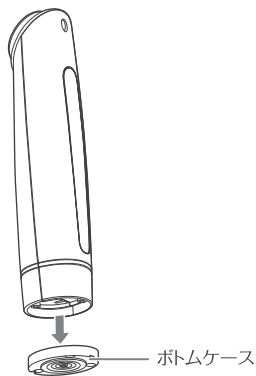


3

背面ケースを外す

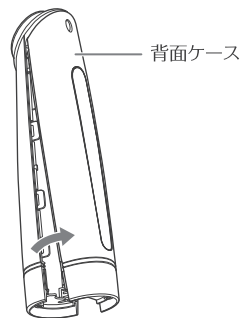


4

電池ケーブルを外す

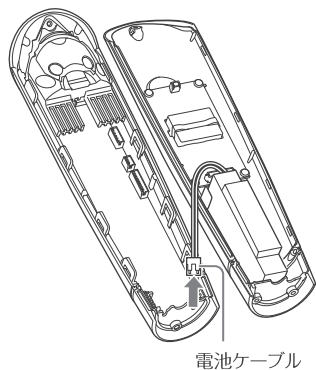

5

電池を取り出す

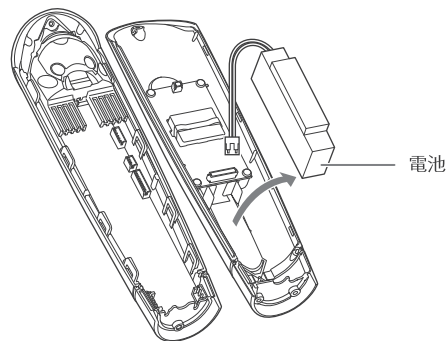

注意

- この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
廃棄目的以外では、分解は行わないでください。火災・感電・けがの原因となります。

日本国内からのお問い合わせ先

本製品の保証・修理など、ご不明な点に関しては、下記コールセンターまでお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

携帯電話

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 **0120-776-282** (通話料無料)

 **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

販売店またはヤーマングローバルサイト(<https://www.ya-man.com/en/>)までお問い合わせください。

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.36)にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ① 使用上の誤り ② お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③ 弊社以外の第三者による修理・改造 ④ 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤ 接続する他の機器の異常 ⑥ (家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦ (説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電 ⑧ 非純正部品の使用 ⑨ 車両・船舶への搭載 ⑩ 海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※ その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJFA1
形名	フォトプラス ディープリフト		
無料修理保証	対象部分	期 間	
	本 体 の み	お買い上げ日から 1 年 間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日の_____詳細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話

☎ 0570-550-637 (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修性能部品の保有期間

当社は本製品の補修性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.co.jp/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com