



取扱説明書

家庭用美容器

ブルーグリーンショット

YJFC0

はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~12)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

使いかたの流れ

1

電源を オンにする


電源/モードボタンを
長押ししてください
(約3秒)。

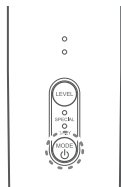

2

モードを選ぶ


電源/モードボタンを
押してください。

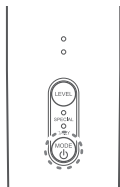

3

レベルを選ぶ (DAILYモードのみ)

レベルボタンを
押してください。

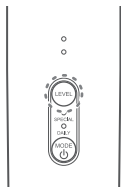

4

フラッシュを 照射する


お肌にしっかりとあて、
ケアします。



5

終了する

電源/モードボタンを
長押ししてください
(約3秒)。

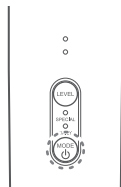

もくじ

安全上のご注意	p 3
各部のなまえとはたらき	p 13
お使いになる前に	p 15
使いかた	p 16
使い終わったら	p 25

お知らせ	p 27
●故障かな?と思ったら	p 27
●よくあるご質問	p 30
●製品仕様	p 31
アフターサービス	p 32

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



機器から照射される強い可視および不可視の光の照射が目傷める可能性があることを示しています。

⚠ 警告 (電源に関して)

- ACアダプターが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- ACアダプターを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。

ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

収納時にはコードのねじれを直してください。



- 専用のACアダプター以外は使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 必ず100～240Vで使用する。コンセントは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・事故の原因となります。

※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。



- コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



危険（ご使用、保管に関して）

- 次に該当する人は使用しない。
医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
 - ◆ 医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心臓など生命維持用医用電気機器 ・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

警告（ご使用、保管に関して）

- 次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人
 - ・自己免疫疾患のある人 ・黒皮症の人 ・てんかんの疾患がある人 ・光過敏症の人
 - ・光線力学療法等で光増感剤を使用している人 ・幼児や自分で意思表示できない人次の人はご使用前に医師にご相談ください。
 - ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人
 - ・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人
 - ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人
 - ・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩)
 - ・のど ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位
 - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
 - ※ 施術後2週間のご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
 - (施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)
 - ・傷跡 ・眉 ・頭髮（もみあげ含む） ・頭部 ・耳 ・乳首、乳輪 ・うなじ ・へそ内部
 - ・大静脈等血管が見える部位 ・刺青、タトゥー、ボディペイント



禁 止

⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
身体に危害を与える原因となります。
- 皮膚が薄い部分、骨のすぐ上には長時間使用しない。
お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- 使用前にヘッド、照射口の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。
けが・肌トラブルの原因となります。
- 使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。
感電・ショートによる発火の原因となります。必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。



禁止

- 次のような場所で機器の使用・保管しない。
 - ・ 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ・ ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・ 強い電波や磁気の発生する場所
 - ・ 引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く
 - ・ 油煙、湯気の当たる場所
 - ・ 発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
 - ・ 温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）
 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。
- 水かけ禁止。
水をかけたり、水洗いをしない。



禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 通電したまま放置しない。

火災・事故の原因となります。

- 子供の近くで使用しない。

フラッシュは強い光のため、目を傷める原因となります。

周りの人が直視しないよう配慮してください。

- 暗い部屋で使用しない。また、照射部をのぞき込んだり直視したりしない。

火災・事故の原因となります。

- 衣服や物に照射しない。

焦げたり、変色・破損の原因となります。



禁止

- 照射口を黒いものに向けない。

火災・事故の原因となります。

- 使用中および直後にフラッシュ照射口（透明ガラス）に触れない。

使用中のフラッシュ照射口は高温になるため、触れるとやけどの原因となります。

- ファンが作動しない（「ブーン」と音がしない）ときは使用しない。

冷却用のファンが故障している可能性があります。

そのまま使用すると発煙・発火・故障・怪我の原因となります。

お買い上げの販売店またはヤーマンコールセンター（P.32）にご連絡ください。

- 通気口を塞いだまま使用しない。

発煙・発火・やけどの原因となります。



禁止

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。

事故・けがの原因となります。

- 本体、ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

ガラス管の修理・交換はしないでください。
安全機能（タッチセンサー等）を無効にしないでください。



分解禁止

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。

- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。

火災・感電の原因となります。

- 使用後および機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・事故の原因となります。



プラグを
抜く

警告（ご使用、保管に関して）

- 使用環境温度を守る。

使用環境温度は10～40℃です。使用する場所の室温を確認してください。

故障・破損の原因となります。

場所を変えた直後は、室温に対応しないことがあります。



- 機器を落したり破損したりした場合は直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。

火災・感電の原因となります。

- 取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ等）との同時使用はしない。

誤動作による事故のおそれがあります。

- 車両運転中に使用しない。
事故やけがの原因となります。

- 強く押しあてず、一箇所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一箇所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。



禁止

- 連続して同じ箇所に照射しない。
・ 過度な長時間又は繰り返しの照射はお肌を傷める原因となります。
・ 一回の使用中に照射範囲が多少重なる程度は問題ありません。

- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品、制汗剤等を使用しない。(保湿のためのクリーム・ローションは除く)
肌トラブルの原因となります。



禁止

- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。
刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
自身にあったレベルで使用する。
レベルは少しずつ調節してください。
事故・けがの原因となります。

注意（ご使用、保管に関して）

- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。
お肌に合わないときはご使用をおやめください。
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- ケアした日は激しい運動、飲酒を控える。
肌トラブルの原因となります。
- フラッシュ照射後に赤みがみられる場合は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。
赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。
また、ケアをしている期間は日焼け止めなどでお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。



必ず守る

- 停電した時は、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
事故の恐れがあります。



プラグを
抜く

■ 海外でのご使用について

⚠ 警告

- 必ず交流100～240Vで使用する。
(無料修理は日本国内のみ)
- 火災・感電・事故の原因となります。



- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ
使用すること。
- 発熱・発火・故障の原因となります。



- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文




[https://www.ya-man.co.jp/
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE

■ 各部のなまえとはたらき

本体

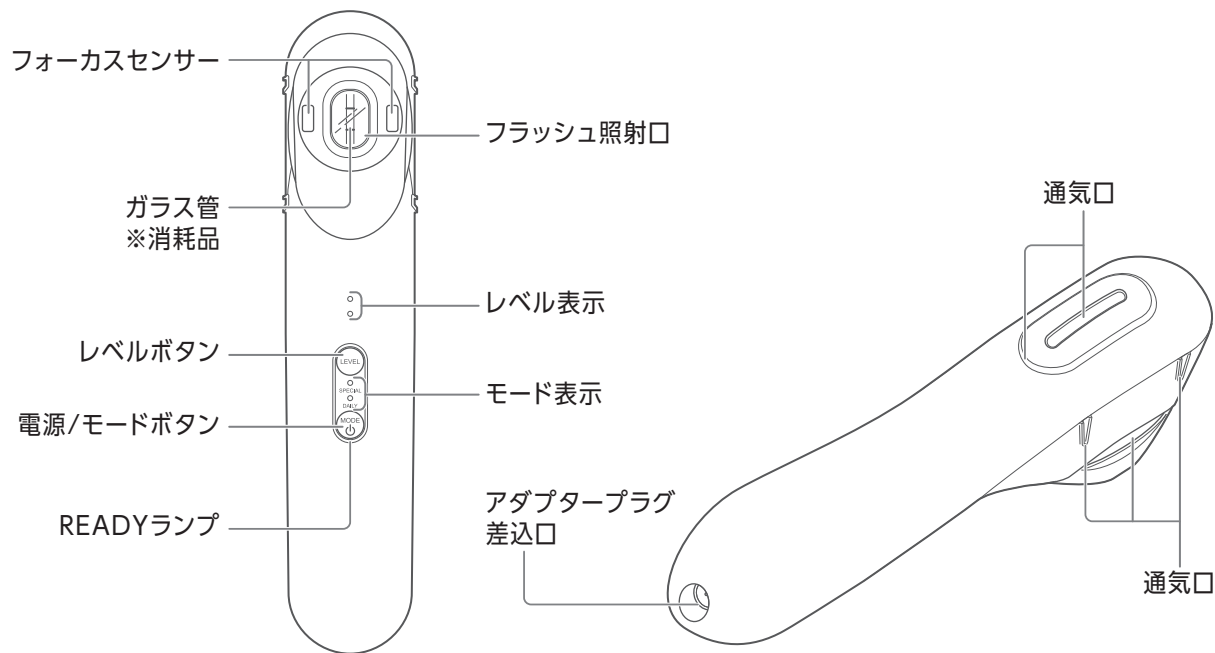

付属品

- ACアダプター
- 取扱説明書（保証書付）

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

フォーカスセンサー（DAILYモードのみ）

本体の左右2つのフォーカスセンサーで肌状態を測定し、お肌に適切なパワーでLEDを照射します。

安全機能

- タッチセンサー

照射口がお肌に当たっているときだけフラッシュを照射します。お肌から離して約20秒以内に再度お肌にあてると、照射を再開します。

※DAILYモードの連続照射（最大5発）のカウントは、一時停止前から継続されます。

その他の機能

- スタンバイモード

電源をオンにしてから約5分が経過すると、「ピーッ」とブザー音が鳴り、READYランプが回転しながら点灯してスタンバイモードになります（スタンバイモード＝機能が停止している状態です）。電源/モードボタンを短押しし、照射口をお肌にあてると照射を開始します。

- オートオフ機能

電源をオンにしてから10分が経過するか、スタンバイモードのまま約5分間操作をしないと「ピッピッ」とブザー音が鳴り、自動で電源がオフになります。

- 冷却機能

電源をオフにした後、約10分本体に内蔵されているファンが作動し続けます。機器を冷却するための機能です。再度使用するときは、10分以上あけてからご使用ください。

■ お使いになる前に

初めてご使用になるときは、必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

お肌へのプレテスト

1 腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取る


完全に水分がなくなるまで、しっかり拭き取ってください。

<プレテスト>

2 DAILYモードのレベル1で約5分間使用する (P.18)

3 お肌に異常がないことを確認する

24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。

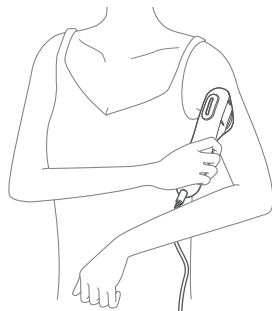

注意

- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

■ 使いかた

使用上のご注意

ご使用になる前に、以下の内容をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

- 本製品を初めてご使用になるときは、必ずプレテストを行なってください（P.15）。
- 一箇所に集中して使用しないでください。同じ箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- ファンデーションなど、メイクアップ用品をつけた状態で照射は避け、必ずメイクを落としてから使用してください。
やけどや肌トラブルの原因となります。
- 成長過程の方は、保護者の管理下で十分に安全を配慮して使用し、異常が起きた際は、直ちに使用を中止してください。
成長期はホルモンバランスの関係上、お肌へのダメージが発生したり、ケアにおける効果がみられないことがあります。
- 照射口に異常がないことを確認してください。破損や変形があるときは使用しないでください。
故障・劣化・やけど・けが・肌トラブルの原因となります。
- お手入れ方法については「お手入れのしかた」（P.25）をご参照ください。
- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をしてください。事故・故障のおそれがあります。
- 推奨環境温度 10℃～40℃

モードについて

	モード	機能	レベル	使用頻度 (目安)
デイリーケア	DAILY	連続照射（最大5発）でお肌を毎日手軽にケアできます。約10分間使用してください。	2段階	毎日*
スペシャルケア	SPECIAL	強力照射で週に1回集中ケアできます。気になる箇所をケアするときにお使いください。	—	週に1回

※スペシャルケアと同日の使用はしないでください。

基本的な使いかた

1 メイクを落として洗顔する


油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

洗顔後、お肌に化粧水をつけた状態での使用も可能です。

2 電源をオンにする

ACアダプターを本体と壁面コンセントに接続し、電源/モードボタンを長押しします（約3秒）。

電源をオンにすると、モード表示（DAILYモード）とレベル表示（レベル1）が点灯し「ビピッ」と音が鳴ります。

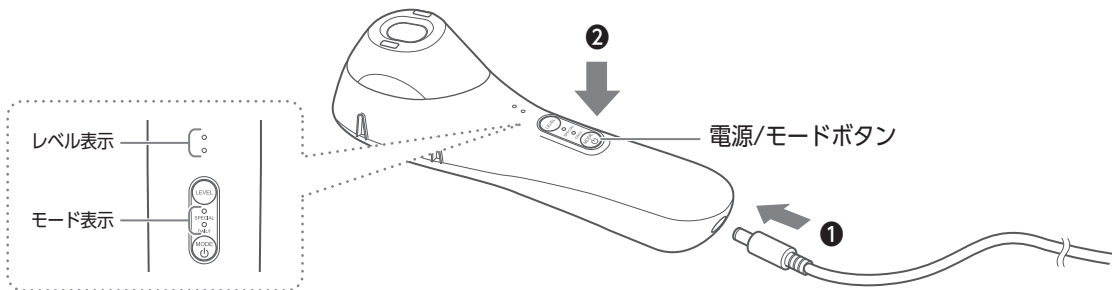

注意

- ACアダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。
- 透明度の低い化粧水をつけると、フォーカスセンサーが正常に働かない可能性があります。無色透明の化粧水のご使用をおすすめします。


3 モードを選ぶ

電源/モードボタンを押すごとに、モードを変更できます。

各モードについては、「モードについて」(P.16)を参照してください。

DAILYモードは、モード表示ランプ (DAILY) が点灯します。

SPECIALモードは、モード表示ランプ (SPECIAL) が点灯します。

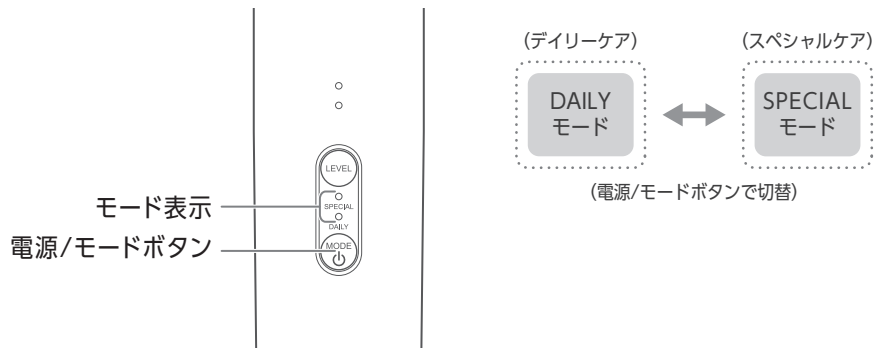


注意

- 電源/モードボタンは、照射口がお肌に触れていない状態で押してください。

4 レベル（強さ）を選ぶ（DAILYモードのみ）

レベルボタンを押すごとに、「ピッ」とブザー音が鳴り、レベルが変わります。

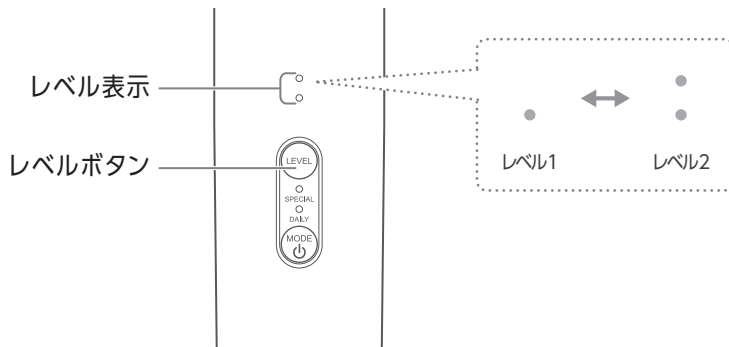


注意

- 使い始めは必ずレベル1からご使用ください（DAILYモードのみ）。
- 痛みを感じるレベルでは使用しないでください。
- レベルを調整しながら使用してください。使用部位によって感じかたが変わりますので、レベルを調整してください。無理に高いレベルで使用しないでください。

5 ケアする

全モード共通

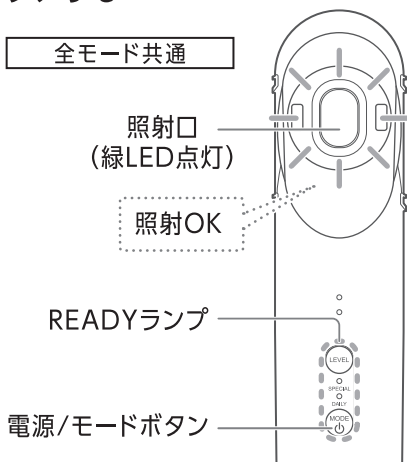

ブザー音が「ピピッ」と鳴ったら、照射口全体をお肌にしかりとあて、ケアします。照射中はREADYランプが点灯します（お肌にあてると自動照射されるため、ボタンを押す必要はありません）。

・お肌から照射口を離すと一時停止しますが、約20秒以内に再度お肌にあてると、照射を再開します。

※DAILYモードの連続照射（最大5発）のカウントは、一時停止前から継続されます。

・お肌から照射口を離れた状態が約20秒以上続くと、READYランプが点滅します。お肌に照射口をあて、電源/モードボタンを短押しして、再開させてください（「安全機能」P.14）。

・お肌に照射口をあてたまま一定時間経過すると、タッチセンサーの精度を維持するため照射を一時停止することがあります。

その際は、照射口をお肌から一度離してください。再度お肌に照射口をあて、電源/モードボタンを短押しすると照射を開始します。


注意

- 動作中は照射口、照射口付近を手で触らないでください。
- 照射するときは目を閉じてください。
- モードを切り替えるときは、お肌から離してください。
- ケア中にまぶしいと感じたときは、サングラスなどをかけてケアしてください。
目や肌を傷める原因となります。
- 照射部を直視しない。また、周りの人が見ないようにする。
目を傷める原因となります。
- ヘッド部が熱くなると、1発ごとの照射準備時間が長くなります。

●DAILYモード（連続照射）

お肌の上をすべらせるように動かします。本体の左右2つのフォーカスセンサーで肌状態を測定し、お肌に適切なパワーでLEDを照射します。


- ・連続照射（最大5発）するごとに、ブザー音が「ピーツ」と鳴り、数秒のチャージ時間があります。
- ・設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。

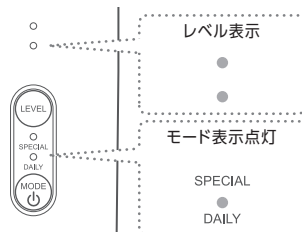

●SPECIALモード（単発照射）

位置を移動させながら1発ずつ照射します。

1発照射するごとに、お肌から一度照射口を離してください（お肌にあてると自動照射されるため、ボタンを押す必要はありません）。

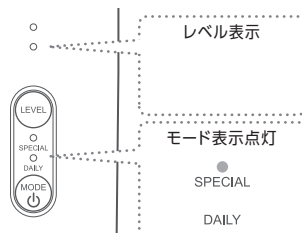

6 電源をオフにする

- 電源/モードボタンを約3秒間長押しします。
- ファンが止まったことを確認し（約10分）、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」(P.25)を参照して、製品に付着した皮脂汚れや美容液などを取り除いてください。故障や、肌トラブルの原因となります。

使用後、お肌のほてりが続く場合は、冷たいタオルなどで十分に冷やしてください。

ケア後は個人の体質や使い方により、お肌が熱を持つことがあります。ほてりなどが気になった場合は、保冷剤や冷やしたタオルなどで処理してください。異常が治まらない場合は医師にご相談ください。

お肌へのあてかた


- 本体を動かすスピードの目安：1秒間に約2cm
※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。
- 一定時間（約5分）経過するとスタンバイ機能が発動し、一時停止します。再開するには電源/モードボタンを短押ししてください。

DAILYモード

矢印に沿ってお肌の上を動かしながら約10分間（顔全体）使用してください。

 使用できない
部位

※ほくろ、生え際にも
使用できません。

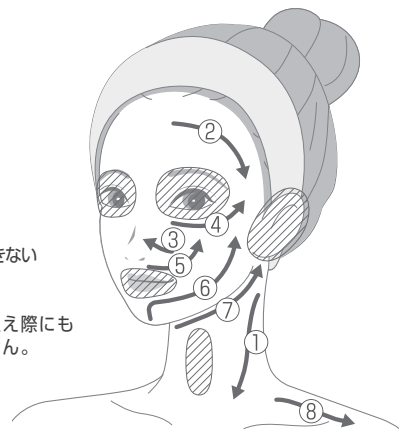

注意

- 照射口全体がお肌に触れるように使用してください。
- 必ずお肌の上を動かしながら使用してください。1箇所にあて続けるとやけどの原因となります。
- 1箇所に集中して照射しないでください。少しずつ照射位置を移動させながら使用してください。
- 照射口をお肌にしっかりと密着させて使用する。
照射口がお肌にしっかりと密着していないとフラッシュがまぶしく感じます。
- フェイスラインは特にお肌が照射口に入り込みやすいので、フラッシュ照射時は強く押しあてないようにご注意ください。

SPECIALモード

気になる部分に照射口をあて、顔にスタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

 使用できない
部位

※ほくろ、生え際にも
使用できません。



■ 使い終わったら

お手入れのしかた

機器のお肌に触れる部分は使用後に毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用してください。肌トラブルの原因となります。

照射口

1 やわらかい布や綿棒で、汚れや毛くずを取り除く

※指紋などの汚れも拭き取ってください。

フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下・故障・肌トラブルの原因となります。

本体

1 全体を乾いた布で拭き、水分を拭き取ってから、保管する

・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉で拭かない。

本体の表面に損傷を与える原因となります。



警告

- お手入れの際は、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜く。
 - 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
 - 化粧水などが付着した状態で放置しない。
- 感電・ショート・発火の原因となります。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。
- ストーブやヒーターのそばなど高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など水気の多い場所での保管はしないでください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 機器の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」(P.27)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター (P.32) までご相談ください。
- 機器が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

■ お知らせ

故障かな?と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状

考えられる原因と対処法

電源が入らない

- ACアダプターを本体または壁面コンセントに差し込んでください。
- 電源/モードボタンを長押し（約3秒）して、電源をオンにしてください。

操作できない

- 「エラー表示お知らせ」（P.29）を確認してください。

電源が切れる

- スタンバイモードのまま約5分経過すると、ブザー音が「ピッピッ」と鳴り、自動で電源がオフになります。
電源/モードボタンを長押し（約3秒）して、電源をオンにしてください。
- オートオフになっています（P.14）。
再度使用するときは10分以上あけてからご使用ください。
- ACアダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。

フラッシュが出ない

- 照射準備が完了していません。ブザー音が「ピピッ」と鳴ったら、照射口全体をお肌にしっかりとあて、ケアします。
- お肌に照射口をあてた状態で、電源/モードボタンを押してください（P.20）。
- DAILYモード時は、お肌の上をすべらせるように動かしてください（P.21）。
- SPECIALモード時は、1発照射するごとに、お肌から一度照射口を離してください（P.21）。

こんな症状

考えられる原因と対処法

フラッシュがまぶしい

- 照射口がお肌から浮いています。しっかり密着させてください。
- サングラスなどをかけてケアしてください。

フラッシュが熱く / 痛く感じる

- レベルボタンを押して、レベルを下げてください（P.19）。
※ DAILYモードのみ
- お肌が照射口の内側に入り込んでいます。お肌に強く押しあてないでください。
- 使用禁止部位を確認してください（P.5）。

LEDが点灯しない

- 照射口をお肌にしっかりとあててください。
お肌にあてたときのみLEDが点灯します。

フラッシュ準備時間が 長い

- 設定レベルが高いほど、1発ごとの照射準備時間が長くなります。
- ヘッド部が熱くなると、1発ごとの照射準備時間が長くなります。

エラー表示お知らせ

エラーが発生した場合は、本体のブザー音が数回続けて鳴ります。

以下のエラー内容を確認し、エラー原因を解消してください。

エラー表示	対処方法
ブザー音が「ピーッピーッ ピーッピーッピーッ」と 5回続けて鳴る	ブザー音が鳴ったあと、自動で電源がオフになります。 ヘッド内が高温となっているため、約30分休ませてください。
ブザー音が「ピーッピーッ ピーッピーッ…」と10回 続けて鳴る	ガラス管の寿命です。ヤーマンコールセンター（P.32）にお問い合わせ してください。
ブザー音が「ピーッピーッ ピーッピーッ…」と10回以上 続けて鳴る	ヤーマンコールセンター（P.32）にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q 使用頻度の目安は？

推奨時間は下記の通りです。

【デイリーケア】

- DAILYモード：週7日（1日1回10分まで）

A 【スペシャルケア】

- SPECIALモード：週1日

※気になる箇所をケアするときにお使いください。

デイリーケアとスペシャルケアは同日に使用しないでください。

Q フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？

使い始めはレベル1でご使用ください。（DAILYモードのみ）

慣れてきたら徐々にレベルを上げてください。フラッシュは多少の熱さを感じますが、お肌には問題ありません。

A

- 赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。

収まらない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。

Q メイクをした状態で使用できますか？

必ずメイクを落とし、素肌（メイク落とし、洗顔をした状態）または化粧水をつけてご使用ください。

A

やけど、肌トラブルの原因となります。

製品仕様

定 格 電 源	DC12V 5.0A
消 費 電 力	待機時約5.0W (瞬間最大約55W)
外 形 寸 法	約45mm×74mm×214mm (W×D×H)
製 品 質 量	約275g (本体のみ)
材 質	本体：ポリカーボネート樹脂 フォーカスセンサー部：アクリル樹脂
製 造 国	日本
付 属 品	ACアダプター 1個 取扱説明書(保証書付)

■ アフターサービス

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

お問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など

 **0120-776-282**（通話料無料）

携帯電話

 **0570-550-637**（通話料有料）

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

Memo

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.32）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがございます。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外の給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
 - (ニ) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (ホ) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (ヘ) 改造・分解の形跡がある場合
 - (ト) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
 - (チ) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (リ) 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (ヌ) 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - (ル) その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でない弊社が判断した場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※ その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No. _____

保証書

持込修理

品名		家庭用美容器	型番	YJFC0
形名		ブルーグリーンショット		
無料修理保証	対 象 部 分		期 間	
	本体のみ (ガラス管(消耗品)は含まれません。)		お買い上げ日から 1 年 間	
店名・住所・電話				
※販売者名				

ご購入日の明細を貼付
または本保証書とあわせて
保管してください。

見本

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
 左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性があります。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様の買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」

(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



www.ya-man.com