



## 取扱説明書

家庭用美容器

ハイパーフェイスリフトブラシ

YJFD0

### はじめに

このたびは、ヤーマン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~11) を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

# 使いかたの流れ

1

アタッチメント  
を取り付け、  
電源をオンにする

電源/バイブレーション  
ボタンを長押し  
(約1秒) してください。

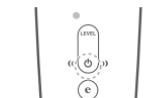

2

EMSの  
レベルを選ぶ

レベルボタンを  
押してください。



3

エレクトロ  
カレントの  
オン/オフを選ぶ

エレクトロカレント  
ボタンを長押し  
(約1秒) してください。

※エレクトロカレントを  
オンにした場合、レベル  
ボタンではEMSおよび  
エレクトロカレントの  
レベルを選択できます。

※MULTIモード使用時  
のみエレクトロカレント  
をONにできません。



4

バイブレーション  
のオン/オフを  
選ぶ

電源/バイブレーション  
ボタンを押して  
ください。



5  
6

頭皮または  
お肌にあてる

頭皮またはお肌を  
ぬらした状態で  
ご使用ください。



終了する

約10分後に、  
自動で電源が  
オフになります。

# もくじ

安全上のご注意	p3	お知らせ	p31
各部のなまえとはたらき	p12	●困ったときは	p31
お使いになる前に	p15	●よくあるご質問	p33
使いかた	p20	●製品仕様	p35
使い終わったら	p28	アフターサービス	p36

## ■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをして生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

### 注意区分について



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
危険が切迫して生じることが想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
可能性が想定される内容です。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損  
害<sup>\*</sup>の発生が想定される内容です。

### 図記号について



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

## ⚠ 危険 (ご使用、保管に関して)

- 次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

◆ 医用電気機器を使用している人

・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器 ・人工心肺など生命維持用医用電気機器

・心電計などの装着型医用電気機器



禁 止

## ⚠ 警告 (ご使用、保管に関して)

- 次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・心臓疾患、障害及びその疑いのある人 ・幼児や自分で意思表示できない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人  
・自己免疫疾患のある人 ・妊娠初期から出産直後までの(MULTIモードのみ)

次の人をご使用前に医師にご相談ください。

・急性疾患の人 ・感染症疾患の人 ・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人 ・高血圧の人や血液疾患のある人  
・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人  
・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の  
・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人

- 次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合 ・酒気帯びの場合 ・口内や陰部、粘膜など ・眼球 ・まぶた(眼窩) ・のど  
・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・骨折をしている部位

・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。(施術例:ヒアルロニン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位



禁 止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 水の中に落とさない。水の中につけない。  
感電・ショート・発火の原因となります。



禁 止

- 分解や修理・改造はしない。

火災・感電・ケガの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

- 本体/充電台/ACアダプターは子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。

また、遊ばせない。

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけでの使用は避ける。

子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。  
事故・ケガの原因となります。



使用者の制限

- 不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。

本体が故障する原因となります。

また、足の上などに落とすとケガの原因となります。



落 下・  
衝 撃 禁 止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

ケガ・故障の原因となります。



用 途 以 外  
禁 止

- 異臭・異常発熱したときは使用しない。

そのまま使用すると破損や発火の原因となります。



異 臭・  
異 常 発 熱 時  
使 用 禁 止

## ⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- お肌、頭皮に異常が生じていないかよく注意して使用する。

お肌、頭皮に合わないときは使用を中止する。

肌トラブルの原因となります。

- 歯の治療中の人は、歯に詰め物がある人は、レベルを下げ、使用部位を調整する。

EMS や、エレクトロカレントにより頬・あごに刺激を強く感じたり、不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

- 次のような場所で機器を使用・保管・充電しない。

・浴室、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く（機器の使用は可）

・ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外

・傾斜、振動、衝撃のある場所

・強い電波や磁気の発生する場所

・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近く

・油煙、湯気の当たる場所

・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所

・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

- 温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。

故障の原因となります。



禁 止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 頭皮の弱い人は、状態を見ながら使用し、使用的目安を絶対に守る。  
過度なケアは、頭皮を傷める原因となります。
- 次に該当する人は使用しない。
  - 髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。
  - ・植毛をされている人。
  - ・部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の人。
- 初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使い始めや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。  
事故・ケガの原因となります。身体にならしてからレベルを調整してください。
- 電源をオンにした状態でほかの美容機器や電気製品に接触させない。  
ケガ・故障の原因となります。
- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。  
本体の変形・故障の原因となります。
- LEDの光を直接のぞき込まない。  
目を傷める原因となります。
- 車両運転中に使用しない。  
事故やけがの原因となります。



禁止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- オイル、スクラブなどの刺激の強いものは使用しない。  
肌トラブル、故障の原因となります。
- 本体をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。  
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 使用前に電極に傷や汚れなどの異常がないことを確認する。傷がある場合には使用しない。  
肌トラブル・故障の原因となります。
- 連続して使用しない。  
業務用等、過剰に連続使用すると、本体が熱をもちます。再度使用するときは 1 時間以上間をあけてからご使用ください。
- 使用禁止部位（P.4）には使用しない。  
事故・ケガの原因となります。



禁止

## ⚠ 注意（ご使用、保管に関して）

- 使用中に疲労を感じたり、お肌、頭皮に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。  
翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 使用時間を使って使用する。1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。  
過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、お肌の状態をみながらご使用ください。
- お肌、頭皮に痛みを伴う刺激を感じた場合は、使用を中止する。電極とお肌との間に水などを補充する。  
そのまま使用すると、お肌、頭皮を傷める原因となります。
- 力を入れて頭皮にこすりつけない。  
頭皮を傷める原因となります。
- スムーズに動かせるように、電極とお肌との間に常に水分があるように、途中で補充する。  
そのまま使用すると、お肌を傷める原因となります。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」（P.28）を参考し、製品に付着した汚れ・水滴を拭きとってください。
- アタッチメントに傷などの異常がないか確認してから使用する。  
異常がある場合は使用しない。  
肌トラブル・故障の原因となります。



必ず守る

## ⚠ 警告（電源について）

- ACアダプターおよびUSBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。

また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、ACアダプターおよびUSBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。  
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



- ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

感電・ショート・発火の原因となります。



- お手入れの際は、必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。

● 使用しないときは必ず電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。  
また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火の原因となります。

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにし、ACアダプターをすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



ACアダプター  
を抜く

- コンセントからACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターの側面を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを  
抜く

## ⚠ 警告 (電源に関して)

- 火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。



発火注意

本製品は充電式電池を内蔵しています。

発熱・発火・破裂の原因となります。

- 交流100V～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ) ACアダプターは根元まで確実に差し込む。



必ず守る

火災・感電・故障の原因となります。

英語・中国語でも安全上の注意を確認することができます。

You can also check safety precautions in English from the QR code below.

您可以扫二维码了解更多“安全注意”信息。

English



[https://www.ya-man.co.jp/  
support/caution/en/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/en/)

中文



[https://www.ya-man.co.jp/  
support/caution/cn/](https://www.ya-man.co.jp/support/caution/cn/)

TO ACCESS SCAN WITH YOUR CAMERA PHONE

## ■ 各部のなまえとはたらき

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

### 付属品

- ACアダプター
- 充電台 (USBケーブル付き) \*
- 取扱説明書 (保証書付)
- アタッチメント (マルチ/スカルプ/フェイス)


\*本製品以外では使用しないでください。

### アタッチメント

#### ●マルチアタッチメント


顔・首・二の腕・肩・おなかなど  
に使用できます。

※お買い上げ時は、本体に  
セットされています。

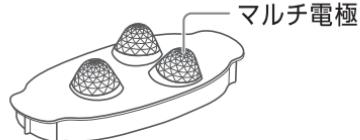


#### ●スカルプアタッチメント

頭皮専用です。

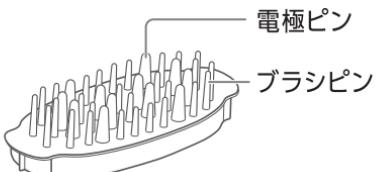

#### ●フェイスアタッチメント


顔・首・デコルテに使用できます。

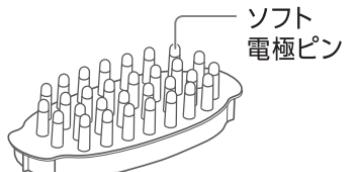


アタッチメントはマグネット式で簡単に着脱可能です。詳細については、「アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた」(P.16) を参照してください。

## | 本体

### ●正面

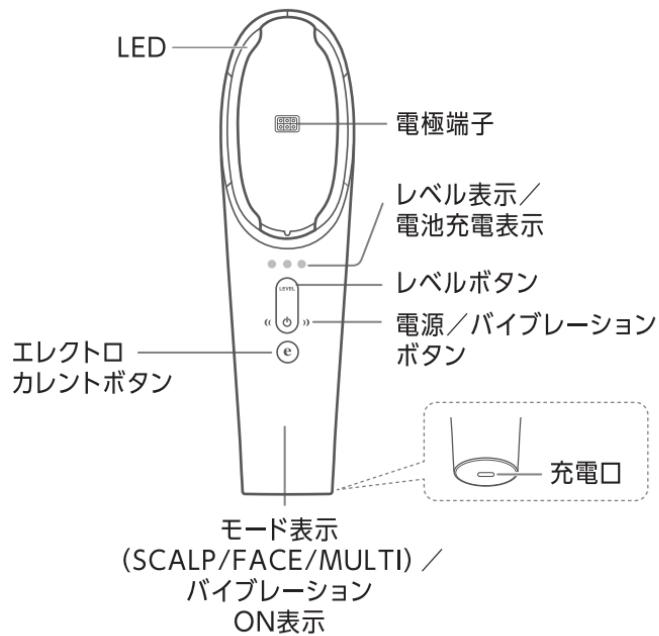

### ●背面

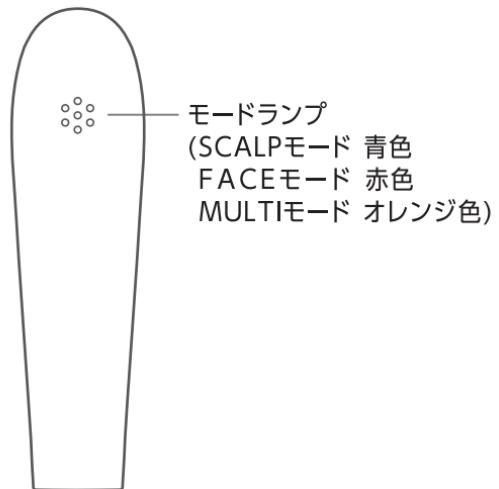

## はたらき

### オートオフ機能

電源をオンにしてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになります。(自動電源オフ)

### EMS

電気的に筋肉を刺激します。

### フォト

頭皮やお肌にLED光をあてることでケアします。

### エレクトロカレント

電流であるエレクトロカレントでお肌全体を整えます。

### 振動


細かなバイブレーションにより、頭皮やお肌を優しくタッピングし、ケアをサポートします。

### 防水仕様

本製品はIPX5 (JIS 防水保護等級) の防水仕様です。  
※完全防水仕様ではありません。水中にしづめたり、  
流水を3分以上あて続けないでください。  
※ACアダプターおよび充電台は防水ではありません。

## ■ お使いになる前に

### | 充電する

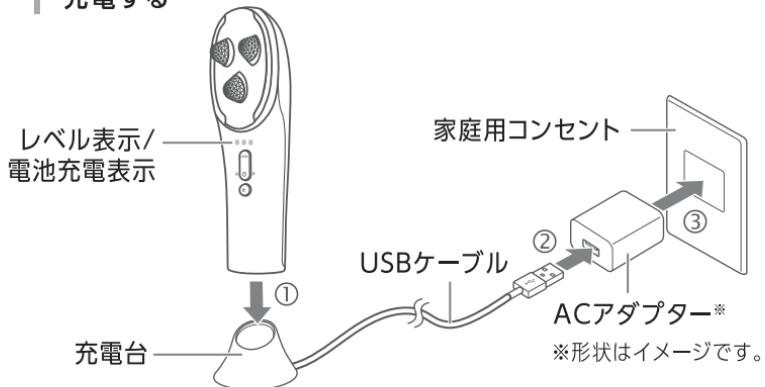

- 本体は正しい向きで取り付けてください。逆向きに取り付けると充電が開始されません。
- 充電口が充電台の突起にはまるように置いてください。
- 購入後初めて充電するときは、完全に充電が完了してからご使用ください。
- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。  
その場合は、再度充電してからご使用ください。

### 注意

- 充電台は防水仕様ではありません。  
**充電口に水滴などがない場合は、綿棒や柔らかい布でしっかり拭き取ってください。**  
水滴などが残ったまま充電すると、故障の原因となります。




## アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた

用途に合わせてスカルプアタッチメントまたはフェイスアタッチメント、マルチアタッチメントを付け替えてご使用ください。

- スカルプアタッチメント：頭皮専用です。
- フェイスアタッチメント：顔・首・デコルテに使用できます。
- マルチアタッチメント：顔・首・二の腕・肩・おなかなどに使用できます。

### ●取り外しかた

- 1** アタッチメントの上部と下部の突起部分に指をかけて、持ち上げて取り外す

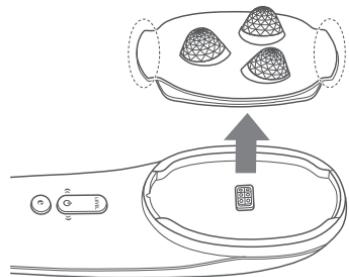


### ●取り付けかた

- 1** 本体にアタッチメントをはめ込む

- アタッチメントはマグネット式です。
- 自動でモード (SCALPモード／FACEモード／MULTIモード) が切り替わります。

※アタッチメントは上下の形状が異なるため、はめ込むことができる向きが決まっています。無理にはめ込まないようにしてください。

※はめ込むときは、指を挟まないよう十分に注意してください。

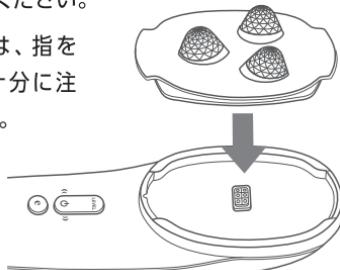

## モードの切替

モードは次の3種類です。

- SCALP モード：頭筋を刺激して頭皮全体をストレッチします。スカルプアタッチメントをご使用ください。
- FACE モード：表情筋を刺激してお肌の引き締めケアを行います。フェイスアタッチメントをご使用ください。
- MULTI モード：EMSで顔・首・二の腕・肩・おなかなどの部位の筋肉を刺激します。マルチアタッチメントをご使用ください。

アタッチメントを取り付けると自動でモードが切り替わります。


※アタッチメントの取り付け方法については、「アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた」(P.16) を参照してください。

## レベルの調整

EMSおよびエレクトロカレントのレベルはレベル1～6の6段階あります。レベルボタンを押すごとに、レベルが切り替わります。使いはじめは必ずレベル1からご使用ください。

※レベルを高くするとEMSおよびエレクトロカレントの出力が上がります。エレクトロカレントをオンにした状態でEMSのみ、エレクトロカレントのみのレベル調整はできません。

※各モードのLEDの明るさ、およびパイブレーションはレベル調整できません。

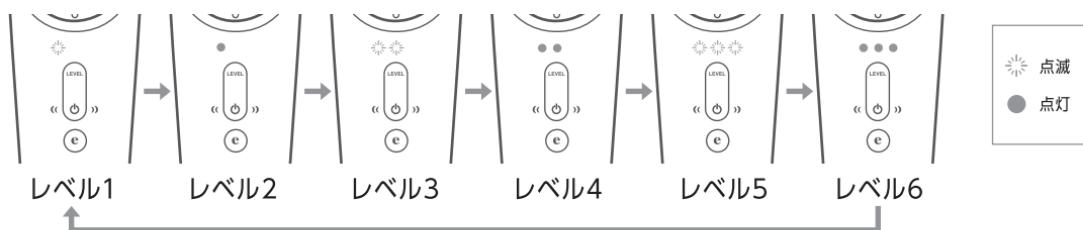

## お肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ずお肌との相性をプレテストしましょう。

- マルチアタッチメントをご使用ください。

### 1 お肌を清潔な状態にする

- 腕の内側を石鹼で洗い、タオルなどでふきとります。

### 2 腕の内側を水でぬらし、バイブレーションをオンにして、MULTIモードで約1分間動かしながら使用する

- レベル1でおこなってください。
- プレテストをした部分はこすらないでください。



### 3 24時間以内にお肌に異常（赤みやほてりなど）がないことを確認してから使用する

#### 注意

- 実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。お肌に合わないときはご使用をおやめください。

## | オートオフ（自動電源オフ）

本製品はオートオフ機能を備えています。

各モードの動作開始時から約10分で自動で電源がオフになります。

- ケアの途中でレベルを変更しても、動作開始時から約10分で電源がオフになります。
- 途中で電源をオフにしたい場合は電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）してください。

## ■ 使いかた

### | 使用の目安

- 1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。毎日ご使用できます。
- 翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。

※あくまでも目安です。頭皮やお肌の状態を見ながらご使用ください。

※過度な使用は頭皮やお肌を傷める原因となります。

### | 準備

#### 1 頭皮やお肌を清潔な状態にする

- 顔に使用するときは、必ずメイクを落としてからご使用ください。

#### 2 頭皮やお肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認する

### 注意

- 頭皮やお肌に異常がある部分には使用しないでください。
- 使用中に頭皮やお肌に異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

### ③ アタッチメントを選んで、本体に取り付ける

- 自動でモード (SCALPモード／FACEモード／MULTIモード) が切り替わります。
- アタッチメントの取り付け方法については、「アタッチメントの取り外しかた・取り付けかた」(P.16) を参照してください。

### 注意

- スカルプアタッチメントを頭皮以外に使用しないでください。
- フェイスアタッチメントを顔・首・デコルテ以外に使用しないでください。
- オイルやスクラブなど刺激の強いものは使用しないでください。製品が故障したり、肌トラブルの原因となります。
- お手持ちの化粧品をお使いいただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。

### ④ 頭皮またはお肌をぬらす

- 頭皮：水やシャンプー、トリートメント、ヘアローション（オイルタイプ以外）など
- お肌：水や化粧水、ゲルなど

※エレクトロカレントの体感が弱い場合は水気を切ってご使用ください。

## 各モードの使いかた

### ●SCALPモード(EMS+フォト(赤色LED)+振動ON/OFF可+エレクトロカレントON/OFF可)


- スカルプアタッチメントをご使用ください。
- 水などで頭皮をぬらした状態、または入浴中にシャンプーで髪全体を泡立てた状態でのご使用をおすすめします。  
※エレクトロカレントの体感が弱い場合は水気を切ってご使用ください。

① 電源／バイブレーションボタンを長押し(約1秒)して、電源をオンにする

- モード表示がSCALPと表示され、青色に光ります。


② EMSのレベルを選ぶ

- レベルボタンを押すごとに、EMSのレベルが切り替わります。
- エレクトロカレントをオンにした状態でEMSのみ、エレクトロカレントのみのレベル調整はできません。

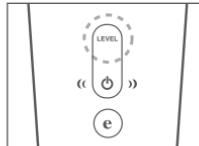

③ エレクトロカレントボタンを長押し(約1秒)でエレクトロカレントのオン／オフを選ぶ

- オンの場合レベル表示／電池充電表示が青く光り、再度エレクトロカレントボタンを押すとレベル表示／電池充電表示が白く光り、エレクトロカレントがオフになります。
- エレクトロカレントをオンにした場合、レベルボタンではEMSおよびエレクトロカレントのレベルを選択できます。

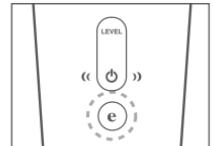


## 注意

- 水の中に落とさない。
- 水の中にしづめない。  
故障・事故・ケガの原因となります。

使う


#### 4 電源／バイブレーションボタンを押して、バイブレーションのオン／オフを選ぶ

- 再度、電源／バイブレーションボタンを押すとバイブレーションがオフになります。

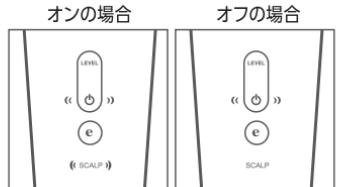

#### 5 ブラシピン、電極ピン全体が頭皮にあたるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かす

※頭皮以外に使用しないでください。

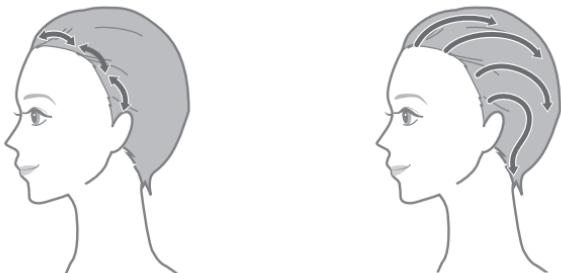

前頭筋+側頭筋をジグザグ 生え際から髪をとかすように後頭部  
と細かく動かします。 向かってゆっくり動かします。

- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。
- 力を入れて頭皮にこすりつけない。


#### 注意

- スムーズに動かせるように、電極と頭皮の間に常に水分があるように、途中で補充する。  
※エレクトロカレントの体感が弱い場合は水気を切ってご使用ください。
- オイル、スクラブなどの刺激の強いものは使用しない。  
肌トラブル、故障の原因となります。

- 6 ケアが終わったら、電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して電源をオフにする

#### 使用時のポイントと頭皮へのあてかた

- 水やシャンプー、トリートメント、ヘアローション（オイルタイプ以外）などで先に頭皮をぬらすことで、スムーズに動かすことができます。
- 生え際から頭頂部に向かって頭皮をなぞるようにゆっくりと使用していただくのがおすすめです。頭皮に水分がなくなった場合は再度、頭皮に水やシャンプー、トリートメント、ヘアローション（オイルタイプ以外）などを付けてください。
- 温かい蒸しタオルで頭皮を温めた後や、入浴後に頭皮が温まった状態で使用していただくのがおすすめです。
- ブラシピン、電極ピン全体が頭皮に触れるように、垂直に軽くあててください。
- 強く押しあてないでください。

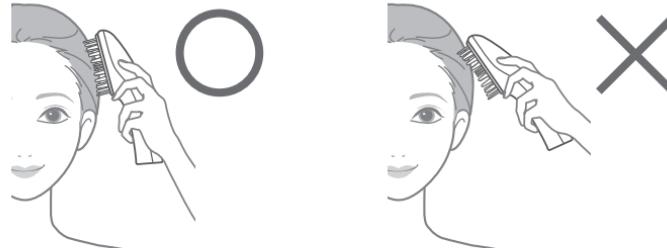

## ●FACEモード (EMS+フォト (赤色LED) +振動ON/OFF可+エレクトロカレントON/OFF可)

## ●MULTIモード (EMS+フォト (赤色LED) +振動ON/OFF可)

- FACEモードには、フェイスアタッチメント・MULTIモードには、マルチアタッチメントをご使用ください。
- 入浴中や、水または化粧水、ゲルなどでお肌を湿らせた状態でのご使用をおすすめします。
- 顔に使用するときは、必ずメイクを落としてからご使用ください。

※MULTIモードではエレクトロカレントが出力されません。

### 1 電源／バイブレーションボタンを長押し (約1秒) して、電源をオンにする

- FACEモードの場合、モード表示がFACEと表示され、赤色に光ります。

MULTIモードの場合、モード表示がMULTIと表示され、オレンジ色に光ります。

### 2 お好みのレベル (強さ) を選ぶ


- レベルボタンを押すごとに、EMSおよびエレクトロカレントのレベルが切り替わります。
- エレクトロカレントをオンにした状態でEMSのみ、エレクトロカレントのみのレベル調整はできません。



### 3 (FACEモードのみ)

エレクトロカレントボタンを長押し (約1秒) でエレクトロカレントのオン／オフを選ぶ

- オンの場合レベル表示/電池充電表示が青く光り、再度エレクトロカレントボタンを押すとレベル表示/電池充電表示が白く光り、エレクトロカレントがオフになります。
- エレクトロカレントをオンにした場合、レベルボタンではEMSおよびエレクトロカレントのレベルを選択できます。

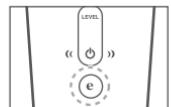


## 注意

- 水の中に落とさない。
- 水の中にしづめない。
- 故障・事故・ケガの原因となります。
- お手持ちの化粧品をお使いいただく場合は、必ず水溶性の化粧品を使用してください。
- オイルやスクランプなど刺激の強いものは使用しないでください。

## 4 電源／バイブレーションボタンを押して、バイブレーションのオン／オフを選ぶ

- 再度、電源／バイブレーションボタンを押すとバイブレーションがオフになります。

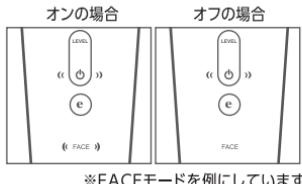

\*FACEモードを例にしています

## 5 すべての電極が顔にあたるようにして、矢印に沿ってゆっくり動かす



使用できない  
部位

まぶた、目のまわり、  
のどぼとけ、鎖骨

## 6 首とデコルテをケアする


- MULTIモードは肩までのケアができます。

\*すべらせながら使  
用してください。  
※必ずレベル1から  
ご使用ください。  
※のどぼとけや鎖骨  
にあてないように  
すべらせてくださ  
い。



### 使用時のポイントと顔へのあてかた

- すべてのソフト電極ピン、マルチ電極がお肌に触れるように、お肌に垂直に軽くあててください。
- 強く押しあてないでください。

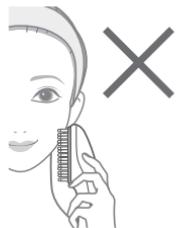


### 注意

- 初めて使用する場合や使いかたに慣れるまでは、必ず「レベル1」に設定してご使用ください。


## <MULTIモードのみ>

- 二の腕ケア

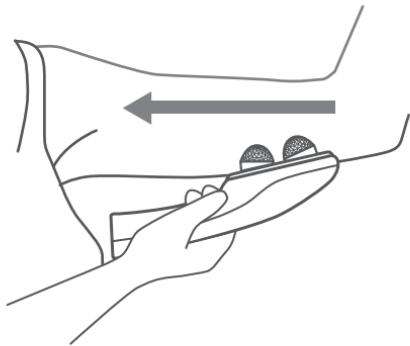

ひじとワキの中間のあたりをすべらせマルチ電極を止めます。一番刺激を感じる場所にマルチ電極をあてましょう。

- お腹のケア

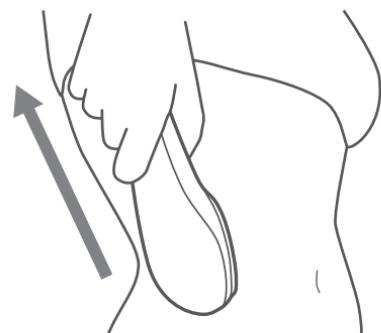

ワキ腹をすべらせながらマルチ電極を押しあてます。より筋肉の近くで刺激を与えましょう。

- 6 ケアが終わったら、電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して電源をオフにする

## ■ 使い終わったら

### | お手入れのしかた(本体、アタッチメント)


使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

本体からアタッチメントを外します。

1 電源がオフになって  
いることを確認する

2 本体についている髪の毛  
や汚れを洗い流す

3 アタッチメントの汚れを  
流水で流す

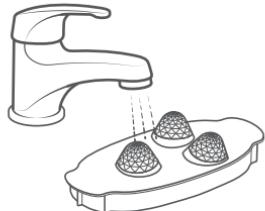

### 注意

- お手入れの際は、必ず電源をオフにする。  
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

#### 4 タオルなどの乾いた布で、本体表面の汚れやアタッチメントの水分を拭き取る

- 汚れなどが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいてください。

※特に充電口の水分は必ず拭き取ってください。

ぬれたまま放置したり充電すると故障の原因となります。底面に水滴などがついている場合は綿棒等でしっかり拭き取ってください。



#### 5 風通しの良い場所で乾燥させる

- 化粧水やゲルなどが付着した状態で放置しないでください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 本体は決して水にしづめないでください。また、熱湯を使用しないでください。故障の原因となります。
- 水やお風呂の中にしづめたまま放置しない。  
本体が故障する原因となります。
- シャンプーやトリートメント（オイルタイプ以外）、ヘアローション（オイルタイプ以外）などを使った場合は、必ず水洗いする。  
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。  
においや変色の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。  
本体がぬれたままの状態で放置すると、故障の原因となります。



#### 注意

## 保管のしかた

- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れをして保管してください。
- ・本体や電極に付着した汚れはしっかり拭きとってから保管してください。
- ・使用しないときは、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- ・火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

## 保守・点検について

- ・長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- ・本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.31~32)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.36)までご相談ください。
- ・本製品が故障、損傷した場合は、お買い上げいただいた販売店までご相談ください。

## ■ お知らせ

### 困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

#### こんな症状

#### 考えられる原因と対処法

電源が入らない	●アタッチメントを取り付けないと電源は入りません。アタッチメントを取り付けてから電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）してください（P.16、P.22、P.25）。
	●電池残量がありません。充電してください（P.15）。
充電しても 数分しか使えない	●電池残量が少なくなっています。充電してください（P.15）。
	●電池の寿命です。販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご連絡ください。 ※故障の原因となるためお客様では交換できません。
充電が開始されない	●ACアダプターをコンセントに差し込んでください（P.15）。
	●本体の向きが合っていません。本体を正しい向きで充電台に置いてください。
EMSが弱い (感じない)	●レベルボタンでEMSのレベルを上げてください（P.17）。 ※エレクトロカレントをオンにしている場合、エレクトロカレントの出力も上がります。
	●電極ピン、ソフト電極ピン、マルチ電極が正しくお肌にあたっていません。 正しくあててください（P.24、P.26、P.27）。
	●お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

## こんな症状

## 考えられる原因と対処法

### EMSが強い (痛い)

- レベルボタンでEMSのレベルを下げてください (P.17)。  
※エレクトロカレントをオンにしている場合、エレクトロカレントの出力も下がります。
- お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

### スムーズに動かない

- 頭皮が乾燥しています。水やシャンプー、トリートメント、ヘアローション（オイルタイプ以外）で、頭皮を湿らせてください。
- お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

### 電源が切れる

- アタッチメントが正しく取り付けられていないと電源が切れます。正しく取り付けてください。
- 電源をオンにしてから約10分後に、自動で電源がオフになります。連続して使用する際は、再度電源／バイブレーションボタンを長押し（約1秒）して電源をオンにしてください。

### エレクトロカレント が弱い（感じない）

- レベルボタンでEMSおよびエレクトロカレントのレベルを上げてください。  
※レベルを高くするとEMSおよびエレクトロカレントの出力も上がります (P.17)。
- ピンが正しくお肌にあたっていないません。正しくあててください (P.24、P.26、P.27)。
- エレクトロカレントは、乾いたお肌のほうがより刺激を感じることができます。  
水気を切ってご使用ください。

### エレクトロカレント が強い（痛い）

- エレクトロカレントボタンでエレクトロカレントをオフにしてください。
- お肌が乾燥しています。水や化粧水、ゲルなどを塗って、お肌を湿らせてください。

## | よくあるご質問

Q 頭皮が赤くなるのですが

A ブラシピンおよび電極ピンで強くこすると、頭皮を傷める原因となります。頭皮の上を軽くすべらせるように動かしてください。また、電極ピンと頭皮との間には、常に水分があるように補充しながらご使用ください。

Q 本体を移動しにくいのですが？

A 頭皮の表面が乾いた状態では、本体をなめらかに移動できない場合があります。上手にケアをするために、頭皮を水などでたっぷりぬらして本製品をご使用ください。また、髪が長い場合は、ブラッシングして髪の絡まりをほどいてから使用してください。

Q お手入れや保管はどうするのですか？

A

- 乾いた布で本体表面の汚れを拭き取った後に、保管してください。  
(P.28~29)
- アタッチメントを本体から取り外し、必ず流水で水洗いしてください。  
(ただし、水中にしづめないようにしてください。)
- 高温多湿の場所では保管しないでください。

Q 浴室で使用できますか？

A 本体は浴室で使用いただけますが、水中にしづめたり、流水を3分以上あて続けないでください。また、浴室で充電はしないでください。

Q 頭皮にピリピリ感を感じることはありますか？

A 個人差により微弱電流による刺激を感じることがあります。頭皮に違和感を感じる場合は使用を中止して専門医にご相談ください。

- Q 整髪料をつけたまま使用できますか？**
- A 肌トラブルの原因となるおそれがあるため、毛髪・頭皮は清潔な状態でご使用ください。**
- Q 使用する際は水以外は使用できませんか？**
- A 頭皮にはシャンプーやヘアローション（オイルタイプ以外）など、顔には化粧水やゲルなどもご使用いただけます。オイル、スクラブなどの刺激の強いものは使用しないでください。肌トラブルや本製品が故障する原因となります。**
- <使用に適さない化粧品>**
- ・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧品（シャンプー・化粧水）など
- Q EMSの刺激が一定ではなく、途中で弱くなる時がありますか？**
- A EMSの出力は変化します。その際に、刺激が弱くなるように感じられる場合があります。**
- Q 部位によって同じEMSのレベルでも刺激の感じ方が違うことがありますか？**
- A EMSは筋肉を刺激する機能のため、部位によっては刺激を感じにくい場合があります。**
- Q 使用目安はどのくらいですか？**
- A 1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安にご使用ください。  
毎日ご使用できます。  
※翌日以降ご使用になる場合は、24時間以上空けてご使用ください。**

## 製品仕様

定 格 電 源	DC5V 1.0A
消 費 電 力	最大約3W(充電時)
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約3時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
動 作 時 間	約60分(満充電の状態から) ※使用環境やレベルによって、動作時間は前後します。
外 形 尺 法	約W51xD188xH49(mm) マルチアタッチメント取付時 マルチアタッチメント:約W39xD89xH19(mm) スカルプアタッチメント:約W39xD89xH25(mm) フェイスアタッチメント:約W39xD89xH23(mm)
製 品 質 量	本体:約170g マルチアタッチメント:約26g スカルプアタッチメント:約40g フェイスアタッチメント:約40g
材 質	本体:ABS樹脂 充電台:ABS樹脂 マルチアタッチメント:ポリカーボネート樹脂 スカルプアタッチメント:ABS樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂 フェイスアタッチメント:ABS樹脂、ステンレス、シリコーン、ポリカーボネート樹脂
製 造 国	中国
付 属 品	マルチアタッチメント ..... 1個 スカルプアタッチメント ..... 1個 フェイスアタッチメント ..... 1個 ACアダプター ..... 1個 充電台(USBケーブル付:長さ約1m) ..... 1個 取扱説明書(保証書付)

## ■ アフターサービス

### 充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。



### 廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

### 日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

#### ヤーマンコールセンター

固定電話など

**0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話

**0570-550-637** (通話料有料)

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ年月日・販売店名が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっています。

### 日本国外からのお問い合わせ先

- 販売店またはヤーマングローバルサイト (<https://www.ya-man.com/en/>) までお問い合わせください。

# Memo

## 保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター（P.36）にご相談ください。
- 弊社製品保証約款に照らしお客様の言動がカスタマーハラスメント行為に該当すると判断した場合は、保証対応をお断り、または中止させていただくことがあります。

### 無料修理規定

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
  - お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
  - 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
  - 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
    - 使用上の誤り
    - お買い上げ後の輸送、転倒・落下
    - 弊社以外の第三者による修理・改造
    - 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
    - 接続する他の機器の異常
    - (家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
    - (説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電
    - 非純正部品の使用
    - 車両・船舶への搭載
    - 海外でのご使用

- 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
- 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
- 改造・分解の形跡がある場合
- 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でご使用された場合
- 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
- 弊社販売記録などに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
- 製造・販売から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
- その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

\*本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

\*ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

\*その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)

および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。

No.

## 保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	YJFD0
形名	ハイパーフェイスリフトブラシ		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体・アタッチメント	お買い上げ日から 1年間	

店名・住所・電話

※販売者名

ご購入日の明細を貼付  
 または本保証書にあわせて  
 保管してください。  
**見本**

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。左記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

## ・補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造終了後、最低3年間保有しています。

※性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

※上記期間は目安となりますため、箇所により生産完了から3年以内でも部品在庫が無くなる可能性がございます。

※製造・販売から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」

(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>) および

「ヤーマン製品保証約款」

(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)

をご確認ください。

## ・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ  
 (<https://www.ya-man.com/privacy-policy.html>)  
 をご参照ください。

## ・利用目的

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。



[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など

0120-776-282

携帯電話

0570-550-637

受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)